



Препоръчителни последователности на фрезоване

за импланти на BTI Interna



ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете наличността на продукта на различните пазари при вашия дистрибутор.

Маркировки за дълбочина на фрезование

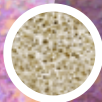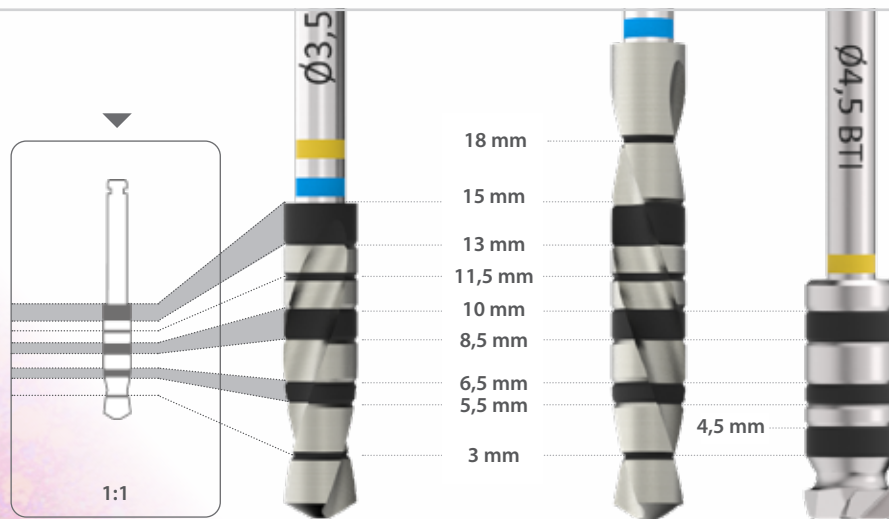

ТИП / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

ФРЕЗА

Стартираща фреза
Фрези
Фрези за фрезование
Фрези за фронтално
рязане

СКОРОСТ

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

НАПОЯВАНЕ

si
no
no
no

ИМПЛАНТИ ДЪЛЖИНА (от 5,5 до 13 mm)



Обща дължина на импланта
променлива
2-3 mm дълбочина на фрезозане


ИМПЛАНТИ ДЪЛЖИНА	КОСТЕН ТИП	НАЧАЛО	Ø 1,8 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,2 mm	Ø 2,3 mm	Ø 2,4 mm	
5,5 - 6,5 - 7,5 mm	III							2
	II			5,5 mm				3
	0-I			5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	■	6
8,5 - 10 mm	III							2
	II			6,5 mm				3
	0-I			6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	■	6
11,5 - 13 mm	III							2
	II			8,5 mm				3
	0-I			8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	■	6



ИМПЛАНТИ ДЪЛЖИНА (от 7,5 до 13 mm)




Обща дължина на импланта
6,5 mm дълбочина на фрезозване
2-3 mm дълбочина на фрезозване

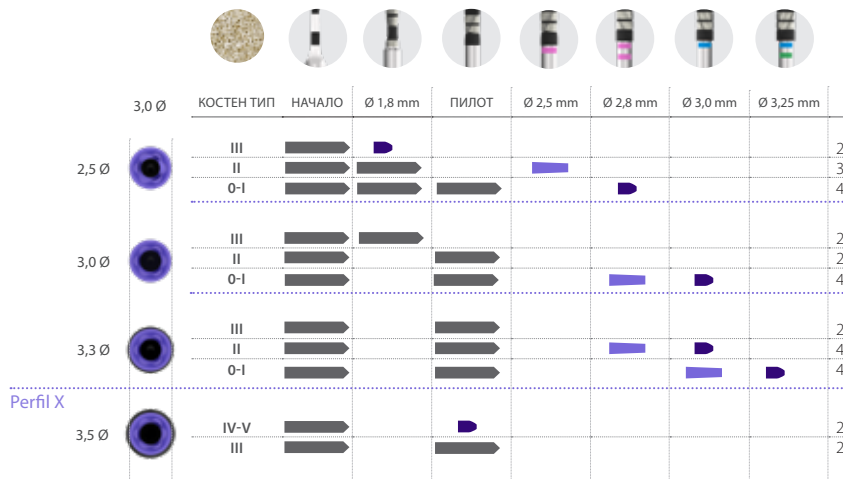

ИМПЛАНТИ ДЪЛЖИНА (от 4,5 до 6,5 mm)



- Обща дължина на импланта
- X.X Ø Обща дължина на импланта с фреза с посочения диаметър
- 2-3 mm дълбочина на фрезване
- 2-3 mm дълбочина на фрезване. Само за импланти от 6,5 mm

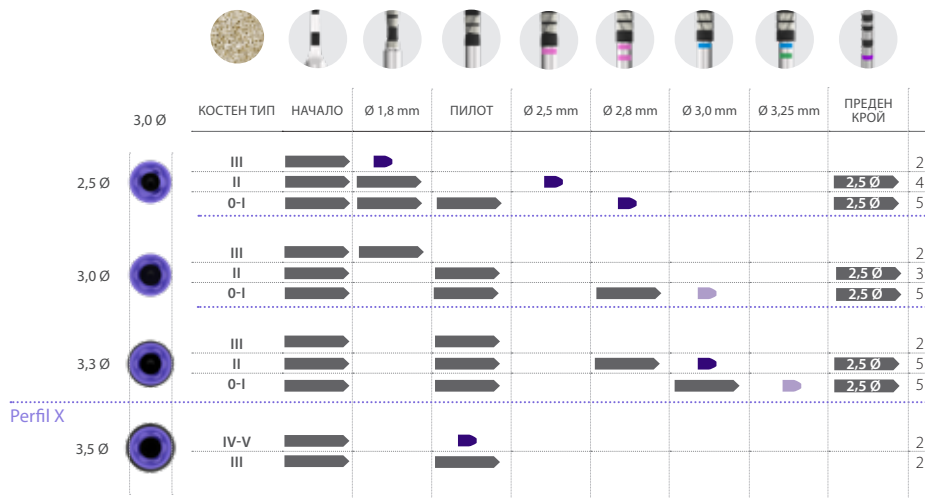




ИМПЛАНТИ ДЪЛЖИНА (от 7,5 до 15 mm)



Обща дължина на импланта
 6,5 mm дълбочина на фрезозване
 2-3 mm дълбочина на фрезозване

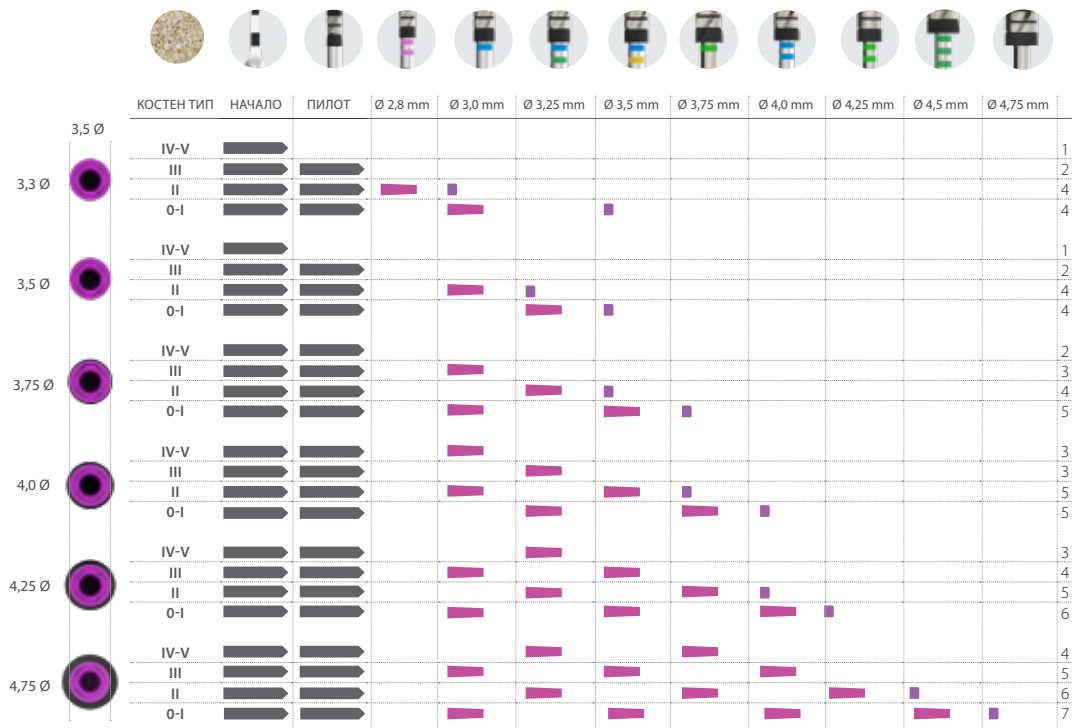

фрезози
 последователности





ИМПЛАНТИ ДЪЛЖИНА

(от 4,5 до 6,5 mm)



- Обща дължина на импланта
- X,X Ø Обща дължина на импланта с фреза с посочения диаметър
- 2-3 mm дълбочина на фрезозане






ИМПЛАНТИ ДЪЛЖИНА

(от 6,5 до 13 mm)

Обща дължина на импланта
 5,5 mm дълбочина на фрезоване
 2-3 mm дълбочина на фрезоване

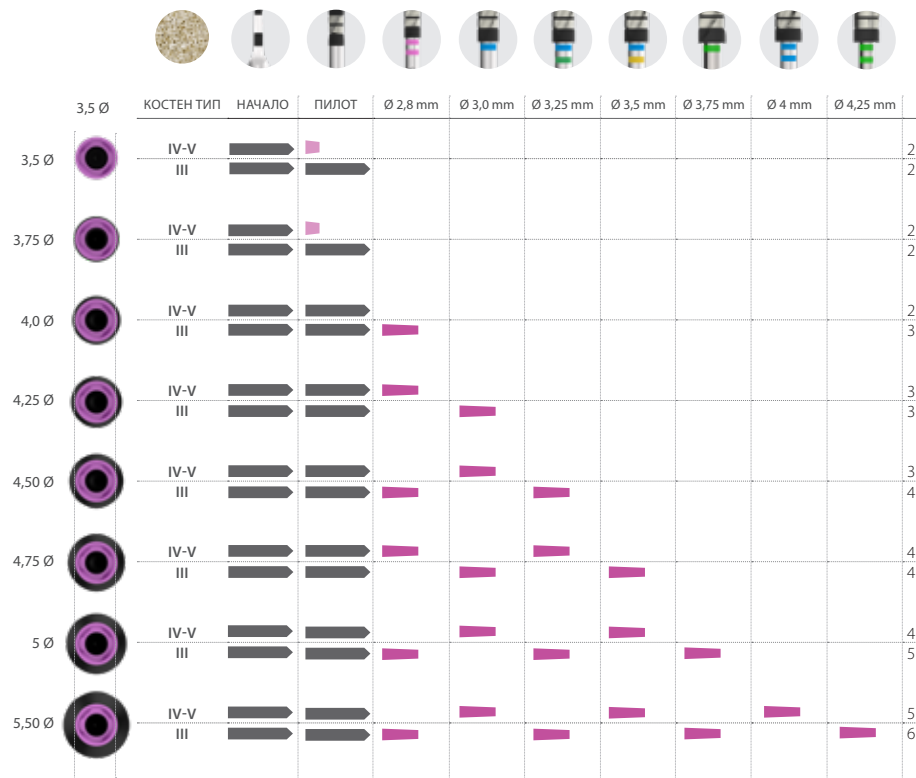

Важно:

Последователността на фрезоването е валидна само за импланта CORE-X.

фрезови
последователности






ИМПЛАНТИ ДЪЛЖИНА

(4,5 - 5,5 mm)

Обща дължина на импланта
 2-3 mm дълбочина на фрезоване

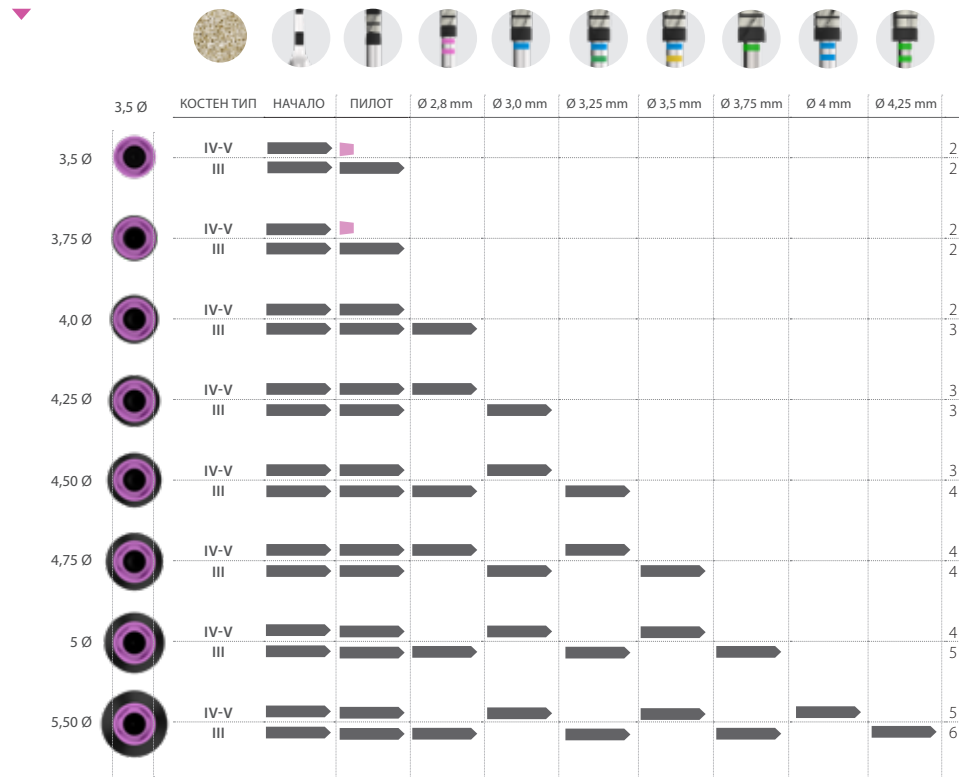



Важно:

Последователността на фрезването е валидна само за импланта CORE-X.

фрезови
последователности




ИМПЛАНТИ ДЪЛЖИНА (от 10 до 15 mm)

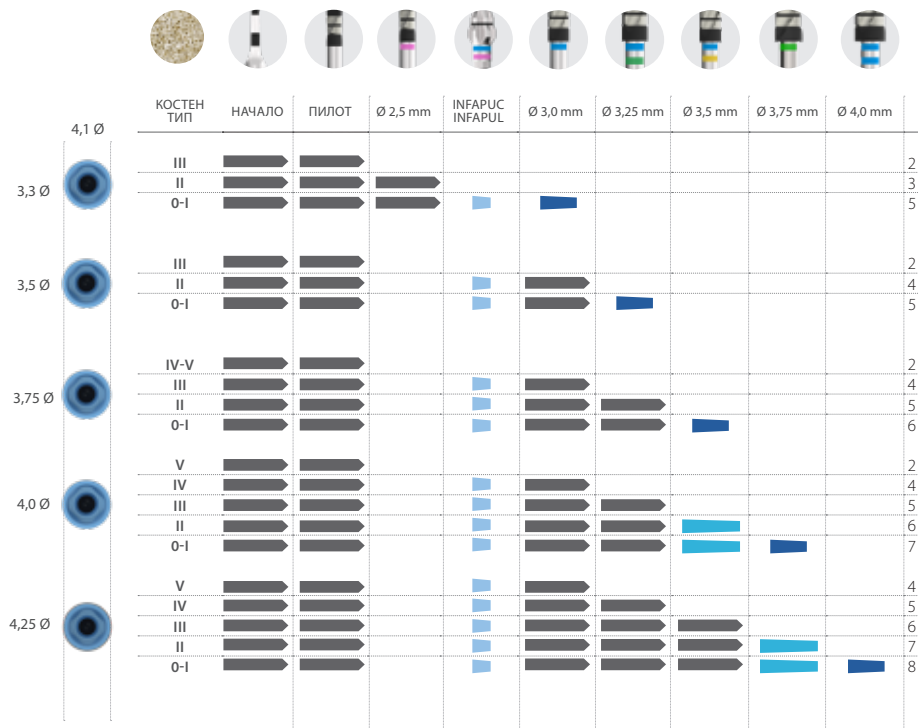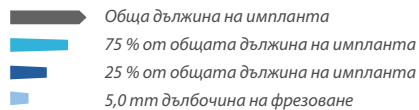

ИМПЛАНТИ ДЪЛЖИНА (от 5,5 до 8,5 mm)


- Обща дължина на импланта
- X,X Ø Обща дължина на импланта с фреза с посочения диаметър
- 5,0 mm дълбочина на фрезване
- 2-3 mm дълбочина на фрезване

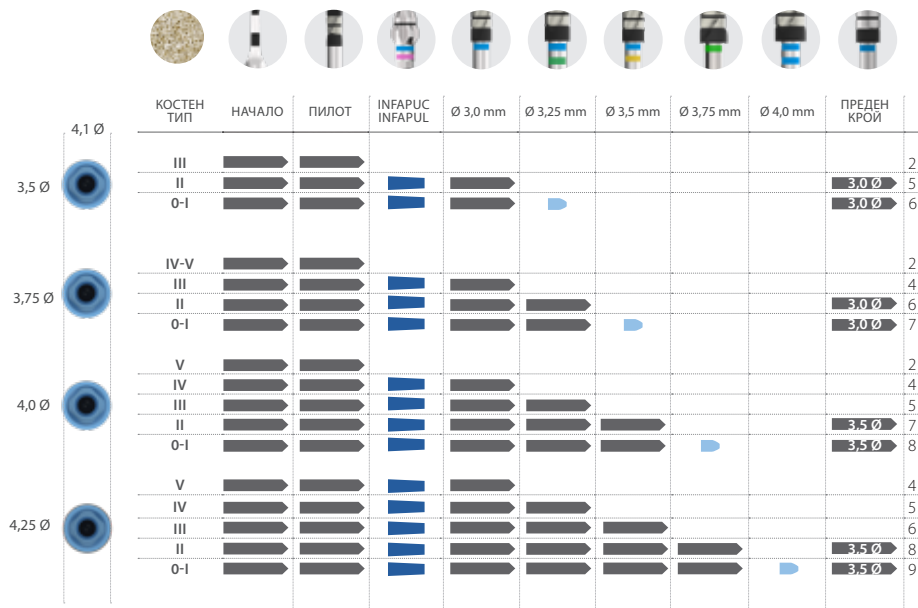

ИМПЛАНТИ ДЪЛЖИНА

(от 8,5 до 15 mm)

Обща дължина на импланта
6,5 mm дълбочина на фрезване
3 mm дълбочина на фрезване

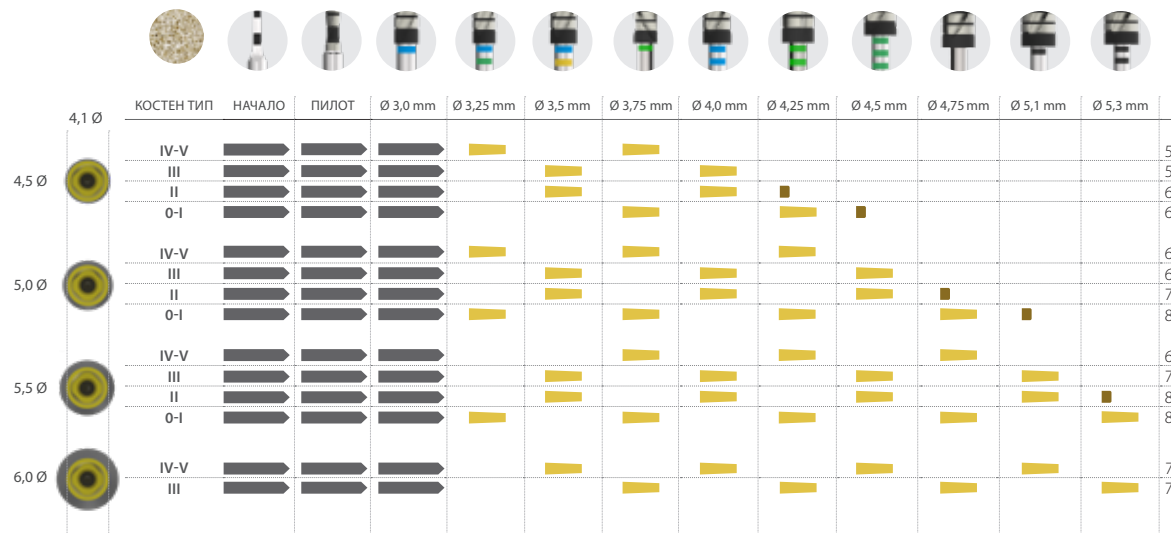

ИМПЛАНТИ ДЪЛЖИНА

(от 4,5 до 7,5 mm)

Обща дължина на импланта
Обща дължина на импланта с фреза с посочения диаметър
3 mm дълбочина на фрезване

