



Doporučený průvodce sekvencemi vrtání

pro implantáty Interna BTI



POZNÁMKA: o dostupnosti výrobku na různých trzích se informujte u svého distributora.

Značky hloubky vrtáku

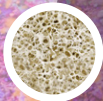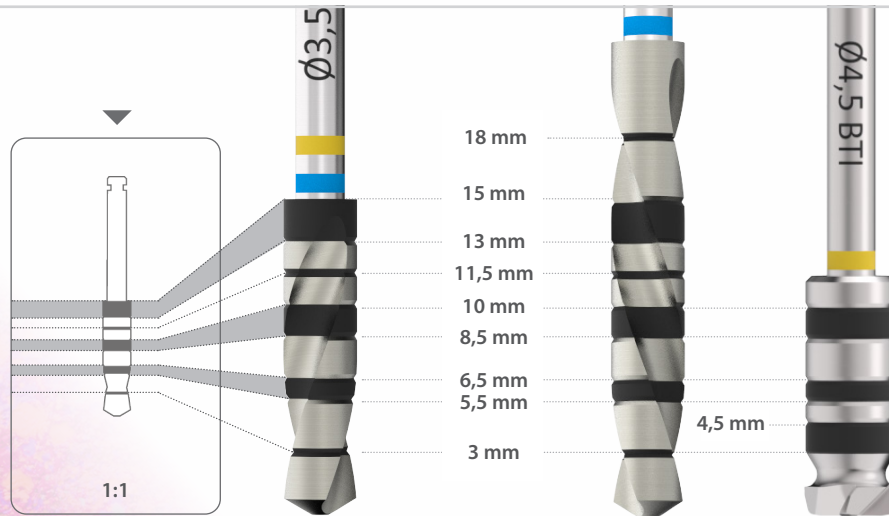

TŘÍDA / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

VRTÁK

Počáteční vrták
Vrták
Zahloubovací vrták
Přední řezací vrtáky

OTÁČKY


800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

IRIGACE

ano
ne
ne
ne

Délka implantátu (od 6,5 do 13 mm)


 Celková délka implantátu
 Hloubka vrtání 6,5 mm
 Hloubka vrtání 2–3 mm

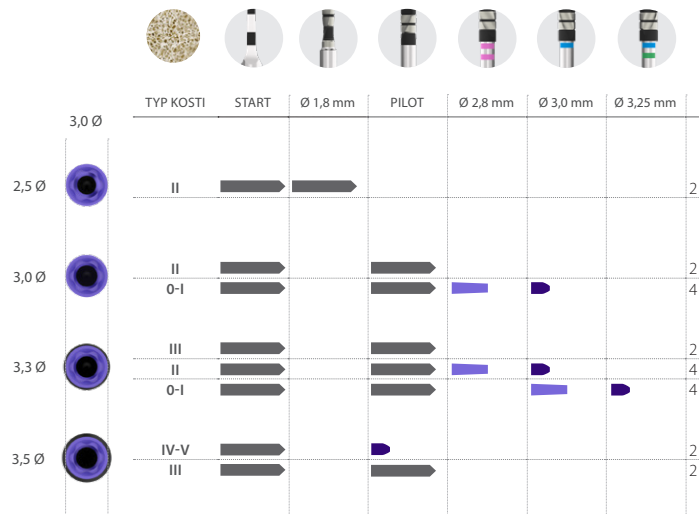

Délka implantátu


(od 4,5 do 5,5 mm)

→ Celková délka implantátu
■ Hloubka vrtání 2–3 mm

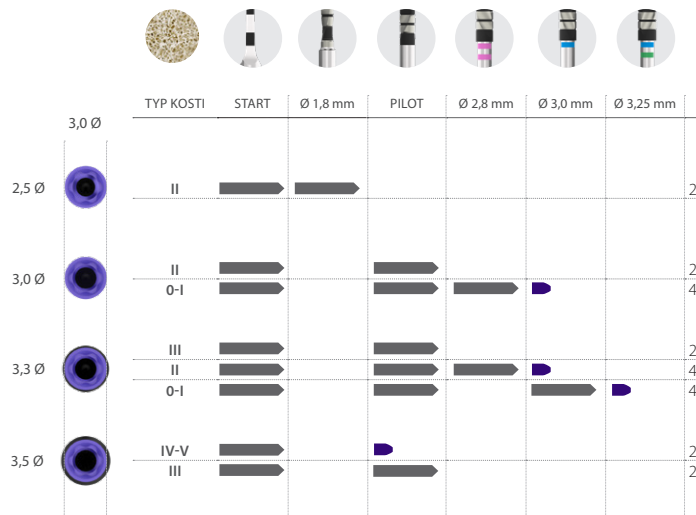


Délka implantátu (od 7,5 do 15 mm)

 Celková délka implantátu
 Hloubka vrtání 6,5 mm
 Hloubka vrtání 2-3 mm

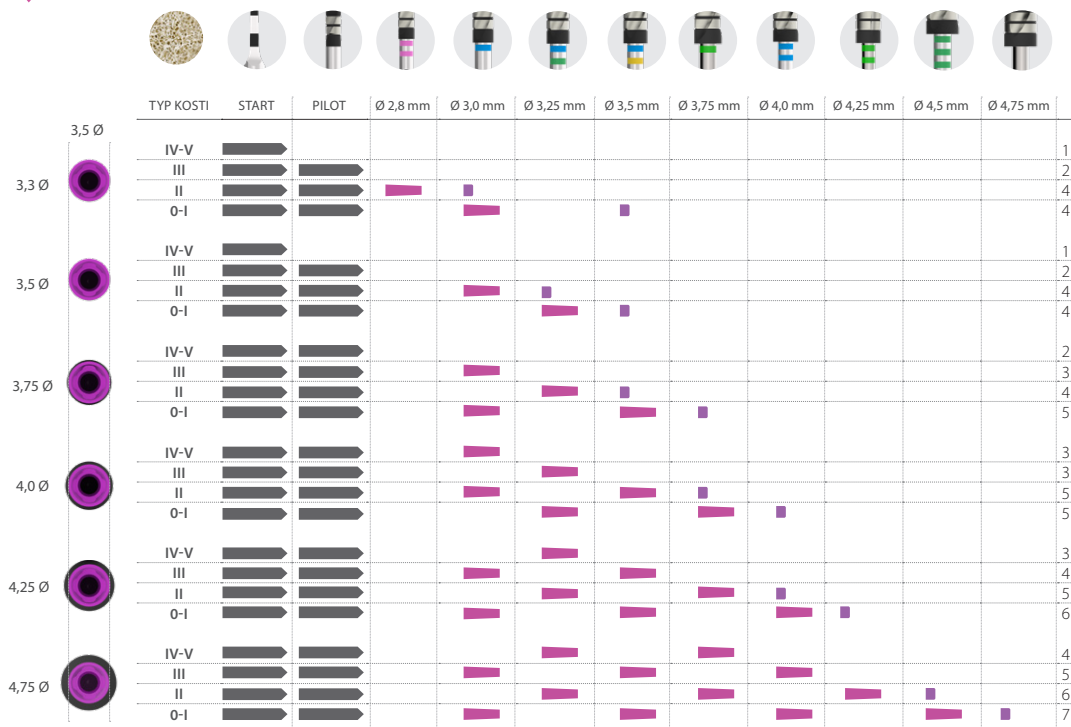


Délka implantátu (od 4,5 do 6,5 mm)

→ Celková délka implantátu
X.X Ø Celková délka implantátu se stanoveným průměrem vrtáku
■ Hloubka vrtání 2–3 mm

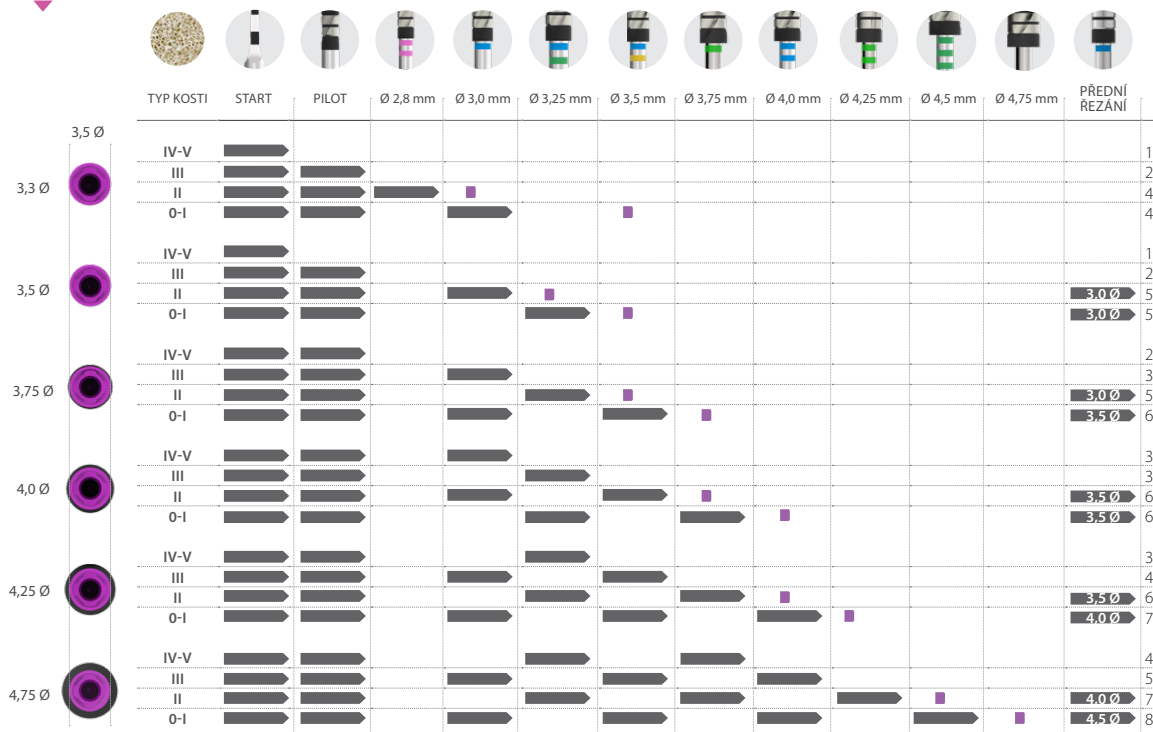

Délka implantátu (od 6,5 do 13 mm)

 Celková délka implantátu
 Hloubka vrtání 5,5 mm
 Hloubka vrtání 2-3 mm

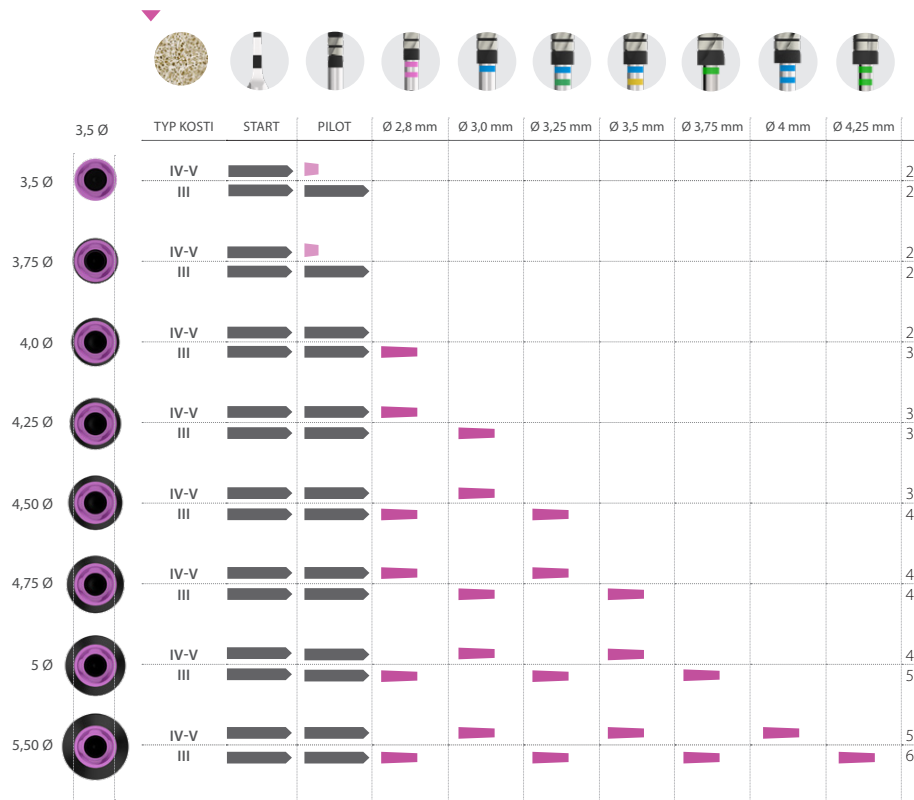


DŮLEŽITÉ:
 Sekvence frézování platí
 pouze pro implantáty
 CORE-X



Délka implantátu (od 4,5 do 5,5 mm)

 Celková délka implantátu
 Hloubka vrtání 2-3 mm

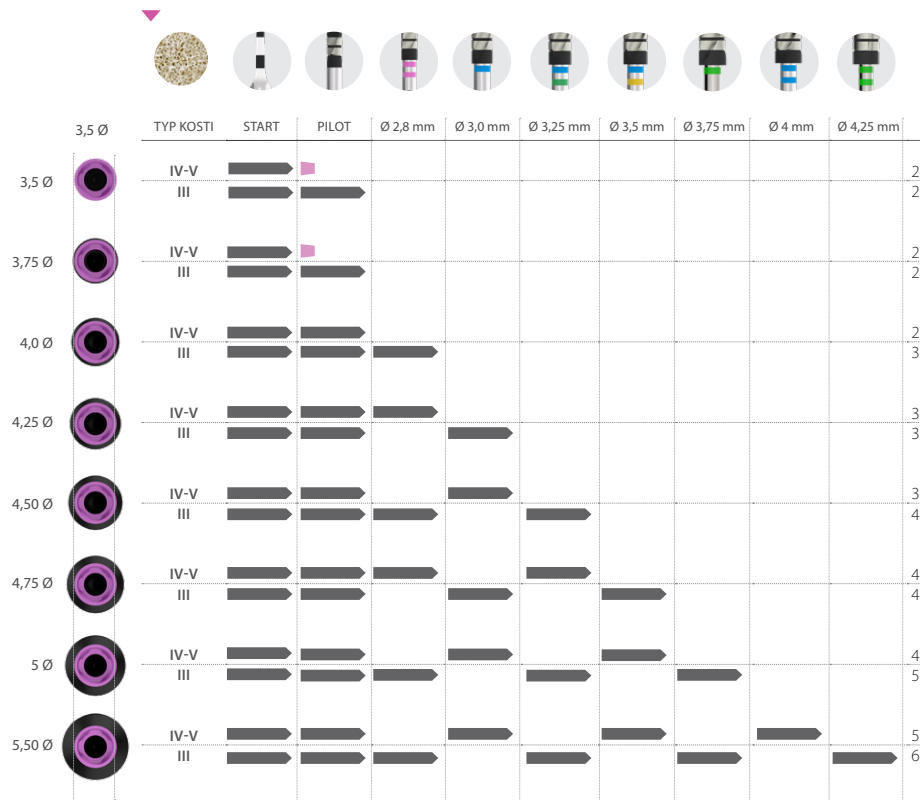


DŮLEŽITÉ:
 Sekvence frézování platí
 pouze pro implantáty
CORE-X



Délka implantátu (od 10 do 15mm)




- Celková délka implantátu
- 75 % celkové délky implantátu
- 25 % celkové délky implantátu
- Hloubka vrtání 5 mm

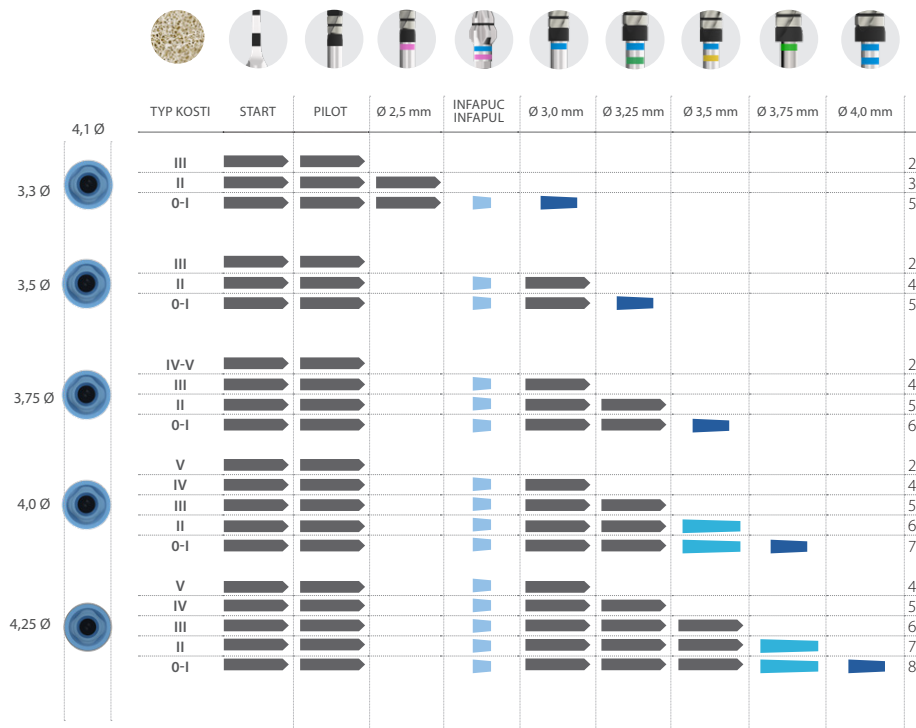

Délka implantátu (od 5,5 do 8,5 mm)

-  Celková délka implantátu
-  Celková délka implantátu se stanoveným průměrem vrtáku
-  Hloubka vrtání 5 mm
-  Hloubka vrtání 2–3 mm

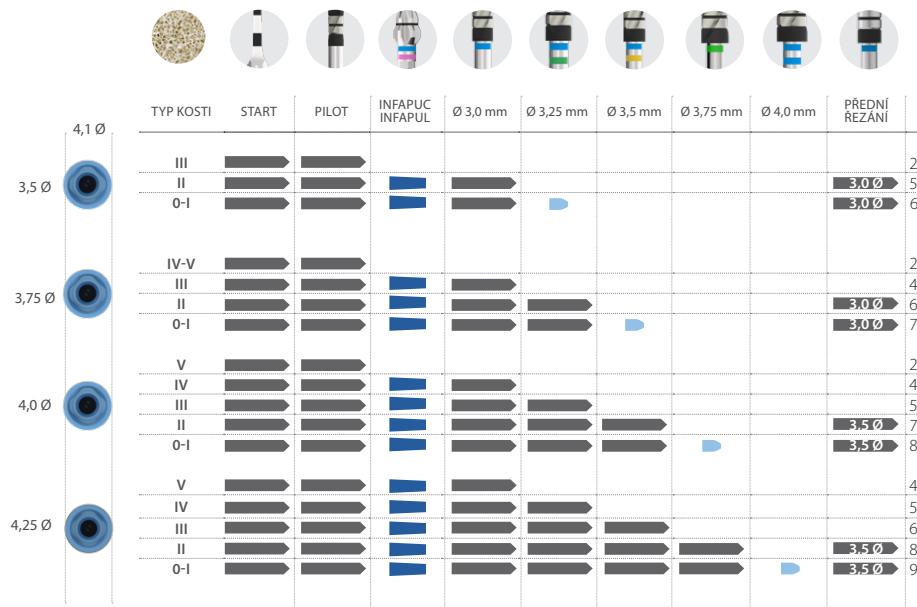




Délka implantátu

(od 8,5 do 15 mm)



 Celková délka implantátu
 Hloubka vrtání 6,5 mm
 Hloubka vrtání 3 mm

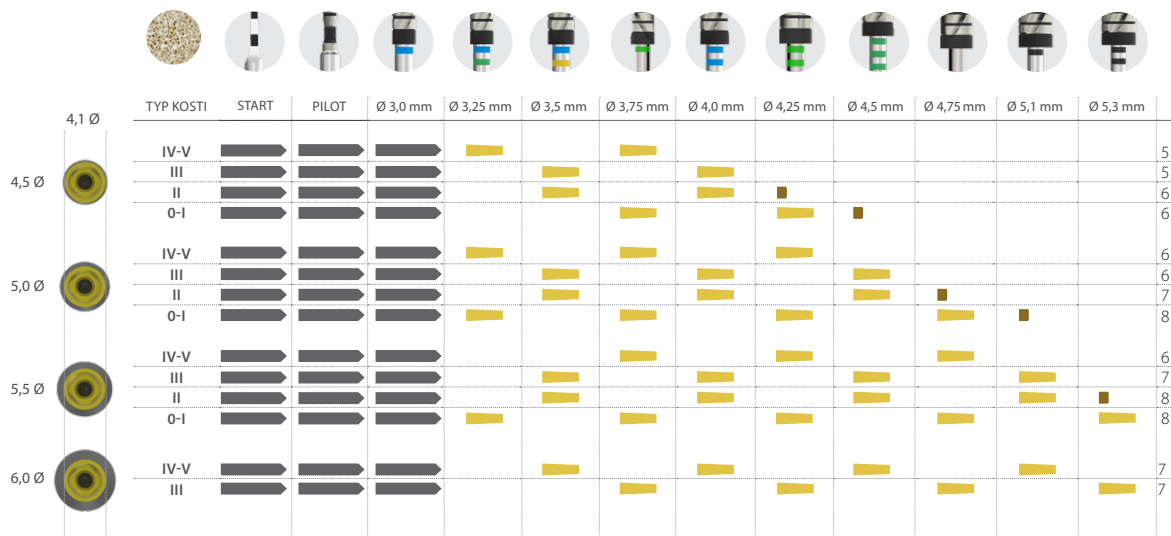

Délka implantátu (od 4,5 do 7,5 mm)

 Celková délka implantátu
 Celková délka implantátu se stanoveným průměrem vrtáku
 Hloubka vrtání 3 mm

