



Doporučený průvodce sekvencemi vrtání

pro implantáty Interna BTI



POZNÁMKA: o dostupnosti výrobku na různých trzích se informujte u svého distributora.

Značky hloubky vrtáku

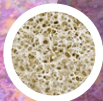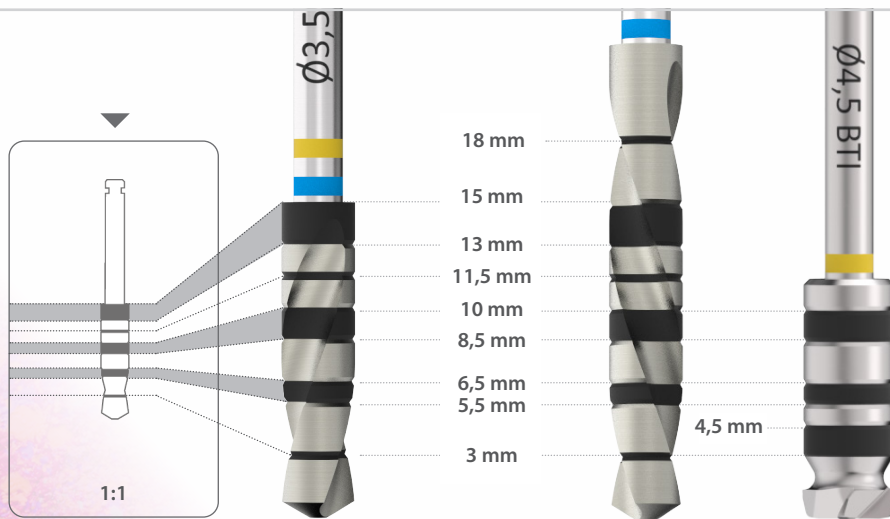

TŘÍDA / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

VRTÁK

Počáteční vrták
Vrták
Zahloubovací vrták
Přední řezací vrtáky

OTÁČKY

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

IRIGACE

ano
ne
ne
ne

Délka implantátu

(od 5,5 do 13 mm)

 Celková délka implantátu
 mm Variable
 Hloubka vrtání 2-3 mm


DÉLKA IMPLANTÁTU														
	TYP KOSTI	START	Ø 1,8 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,2 mm	Ø 2,3 mm	Ø 2,4 mm							
5,5 - 6,5 - 7,5 mm	III												2	
	II												3	
	0-I												6	
8,5 - 10 mm	III												2	
	II												3	
	0-I												6	
11,5 - 13 mm	III												2	
	II												3	
	0-I												6	



Délka implantátu (od 7,5 do 13 mm)




 Celková délka implantátu
 Hloubka vrtání 6,5 mm
 Hloubka vrtání 2–3 mm

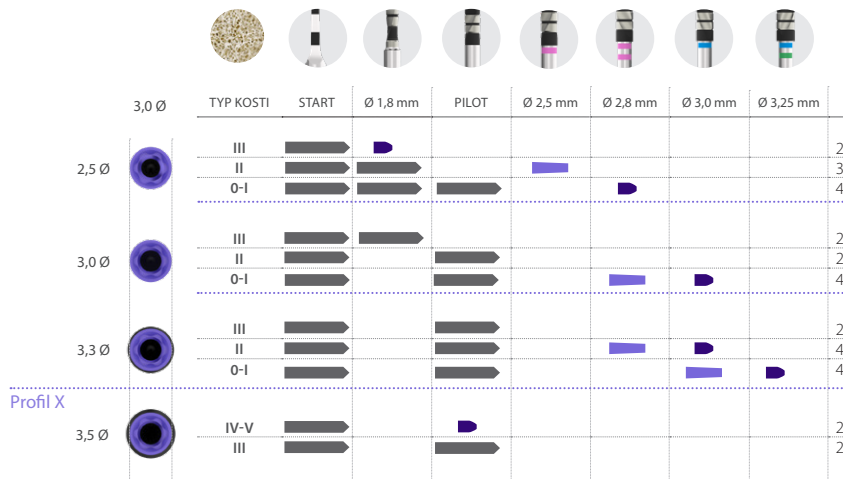

Délka implantátu


(od 4,5 do 6,5 mm)

-  Celková délka implantátu
-  Celková délka implantátu frézou o specifikovaném průměru
-  Hloubka vrtání 2–3 mm
-  Hloubka vrtání 2–3 mm. Pouze pro implantáty 6,5 mm

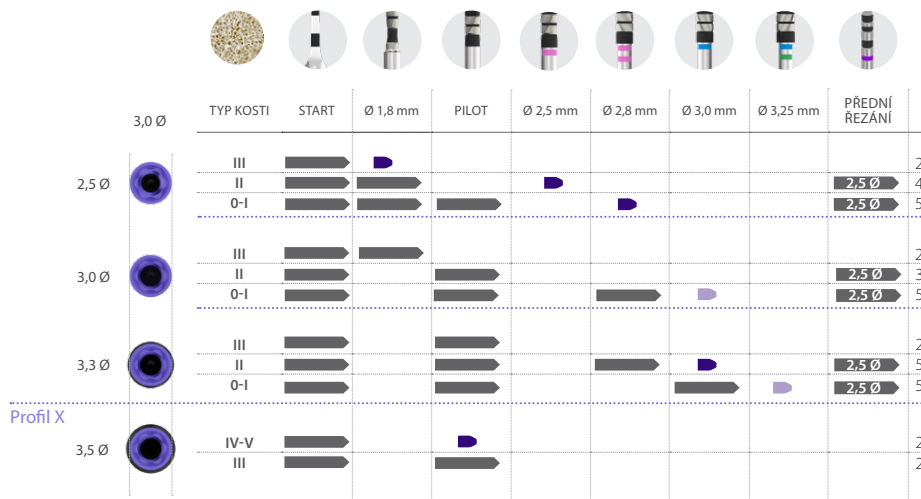


Délka implantátu (od 7,5 do 15 mm)

 Celková délka implantátu
 Hloubka vrtání 6,5 mm
 Hloubka vrtání 2-3 mm

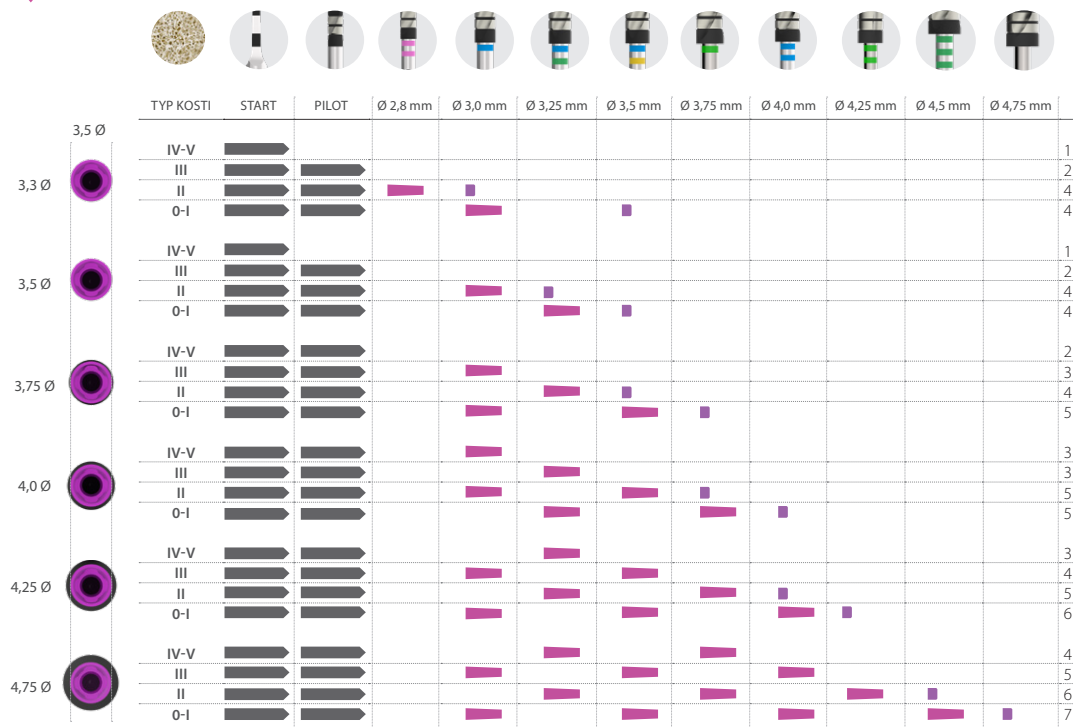


Délka implantátu (od 4,5 do 6,5 mm)

→ Celková délka implantátu
X.X Ø Celková délka implantátu se stanoveným průměrem vrtáku
■ Hloubka vrtání 2–3 mm

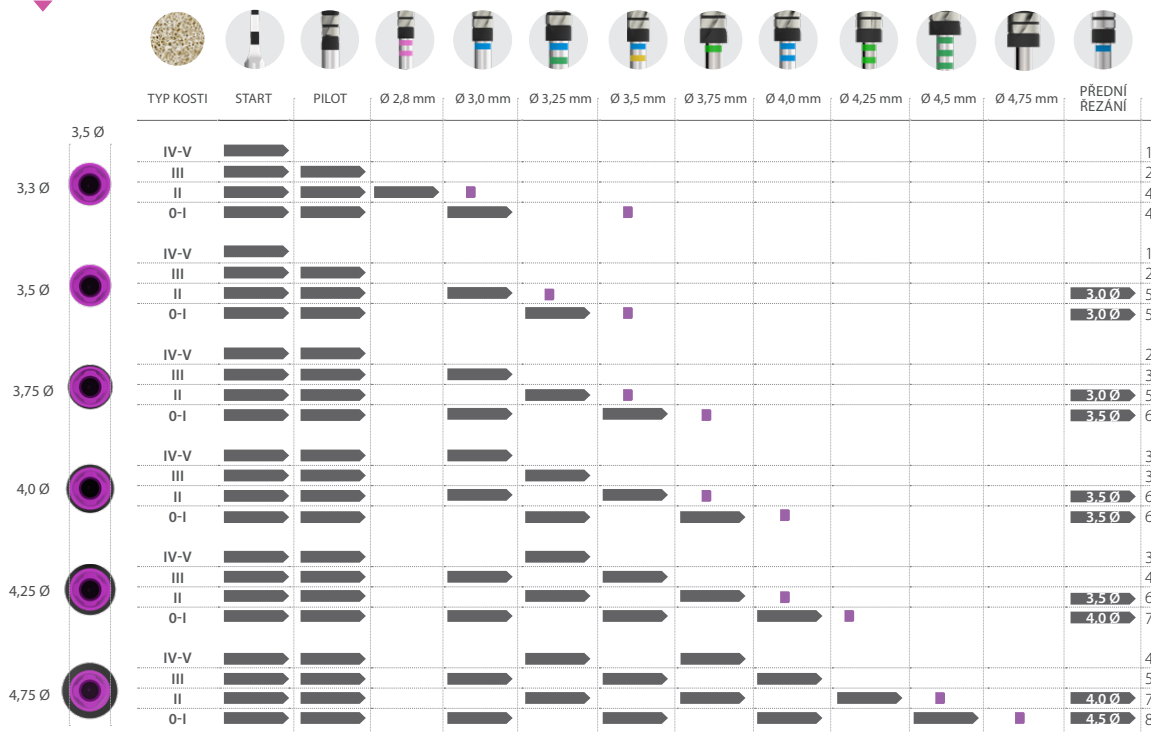

Délka implantátu (od 6,5 do 13 mm)

 Celková délka implantátu
 Hloubka vrtání 5,5 mm
 Hloubka vrtání 2-3 mm

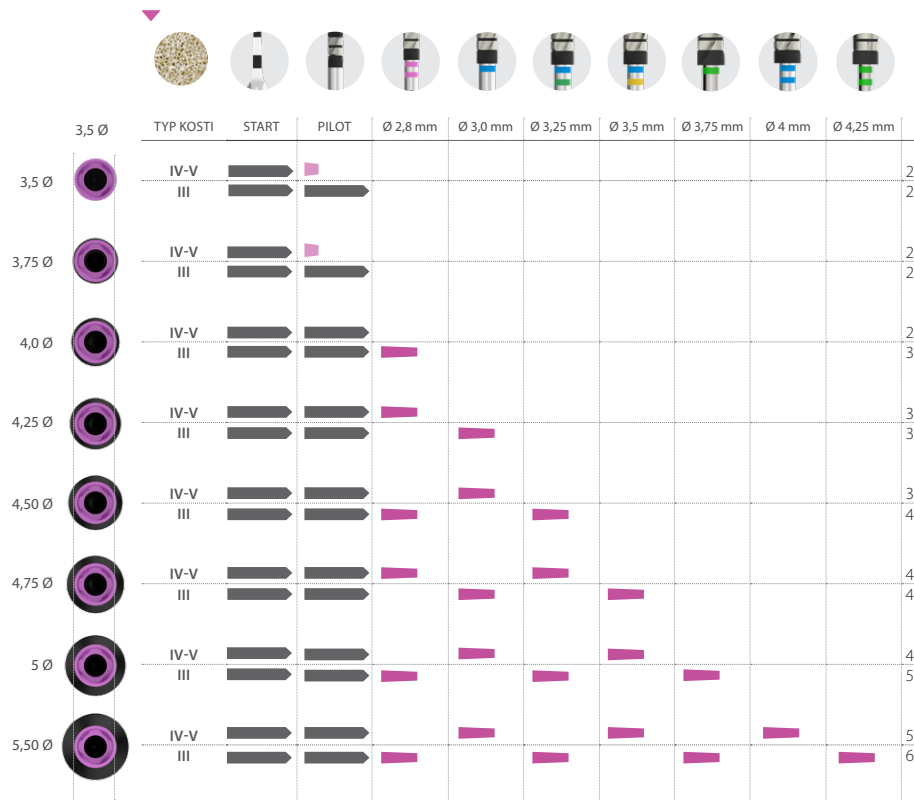


DŮLEŽITÉ:
 Sekvence frézování platí
 pouze pro implantáty
 CORE-X



Délka implantátu (od 4,5 do 5,5 mm)

 Celková délka implantátu
 Hloubka vrtání 2-3 mm

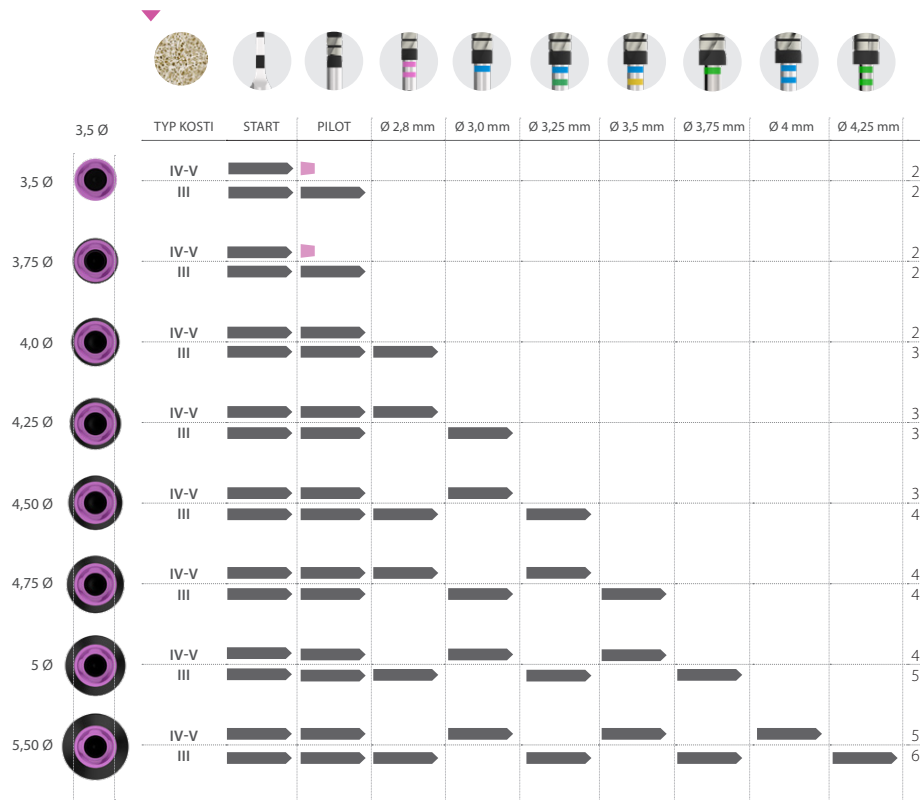


DŮLEŽITÉ:
 Sekvence frézování platí
 pouze pro implantáty
CORE-X



Délka implantátu (od 10 do 15 mm)




- Celková délka implantátu
- 75 % celkové délky implantátu
- 25 % celkové délky implantátu
- Hloubka vrtání 5 mm

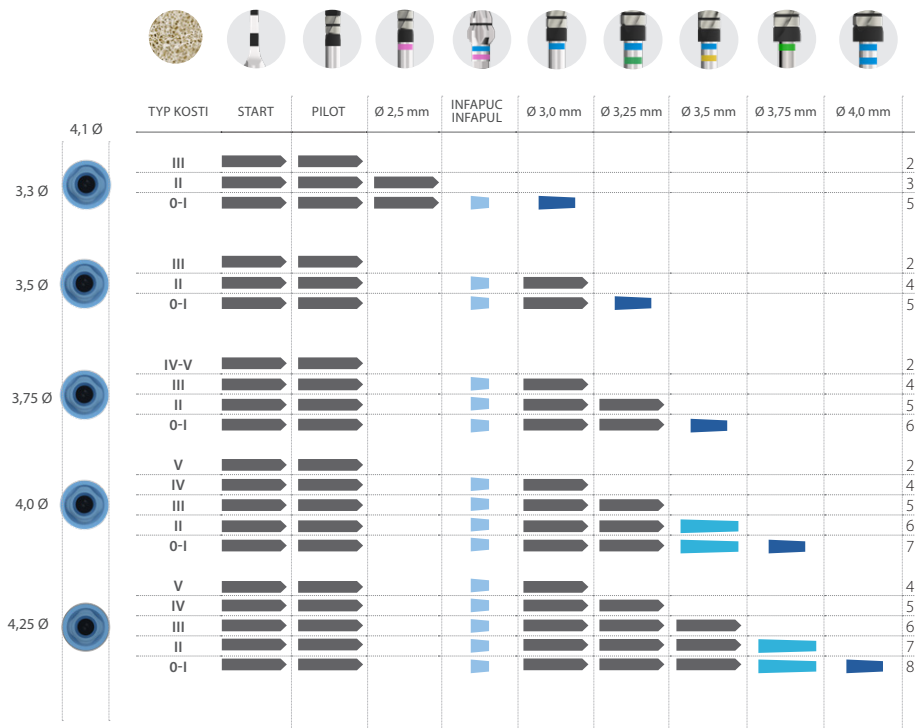

Délka implantátu (od 5,5 do 8,5 mm)

-  Celková délka implantátu
-  Celková délka implantátu se stanoveným průměrem vrtáku
-  Hloubka vrtání 5 mm
-  Hloubka vrtání 2–3 mm

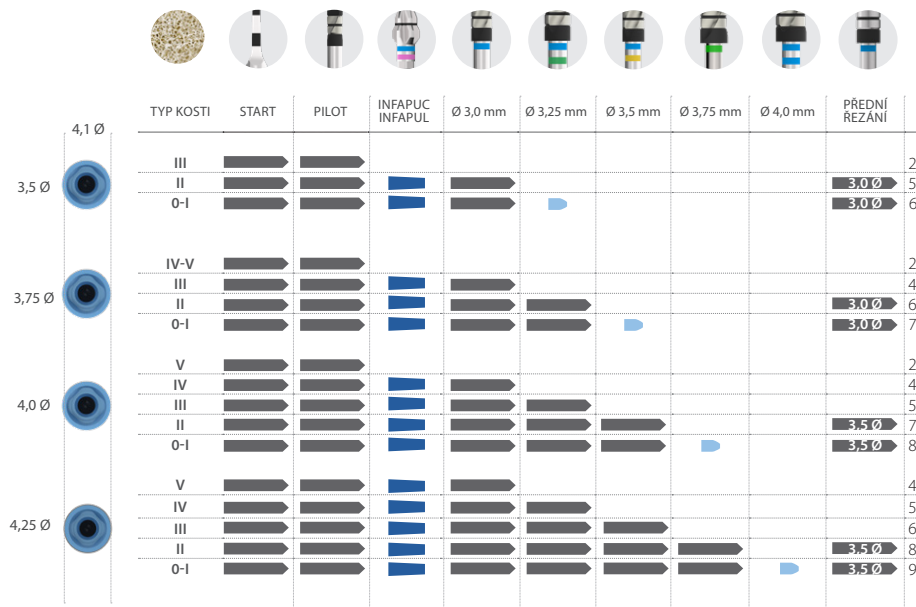




Délka implantátu

(od 8,5 do 15 mm)



 Celková délka implantátu
 Hloubka vrtání 6,5 mm
 Hloubka vrtání 3 mm

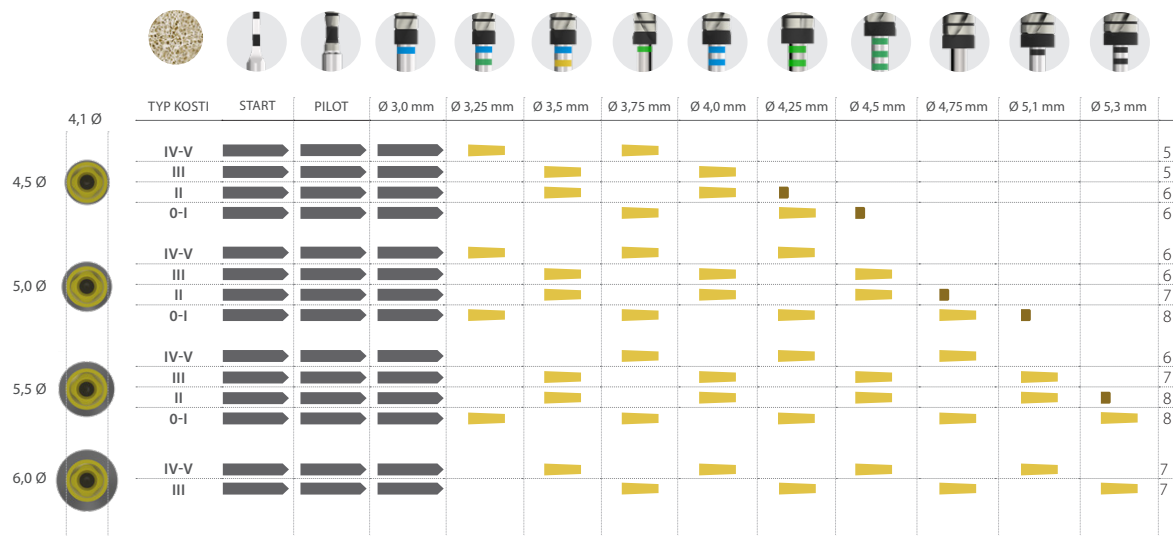

Délka implantátu (od 4,5 do 7,5 mm)

 Celková délka implantátu
 Celková délka implantátu se stanoveným průměrem vrtáku
 Hloubka vrtání 3 mm

