



Anbefalet boresekvensguide

for Interna BTI-implantater



BEMÆRK: Kontakt din distributør for at høre, om produktet er tilgængeligt på de forskellige markeder.

Boredybdemærker

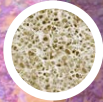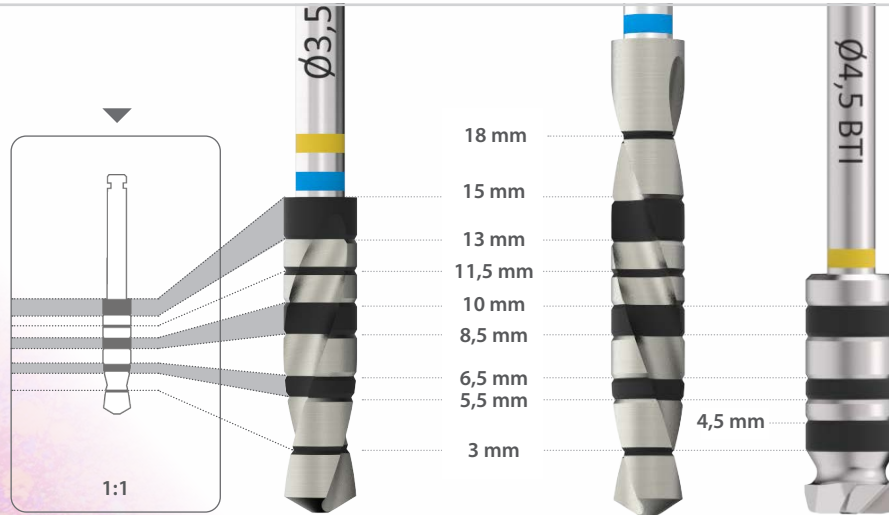

KLASSE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BOR

Indledende bor
 Bor
 Sænkebor
 Front skærebor

REVOLUTIONER

800 - 1.000 rpm
 50 - 75 rpm
 150 - 200 rpm
 50 - 75 rpm


VANDING

ja
 nej
 nej
 nej

Implantatlængder

(fra 6,5 til 13 mm)

Implantatets samlede længde
6,5 mm boredybde
2-3 mm boredybde

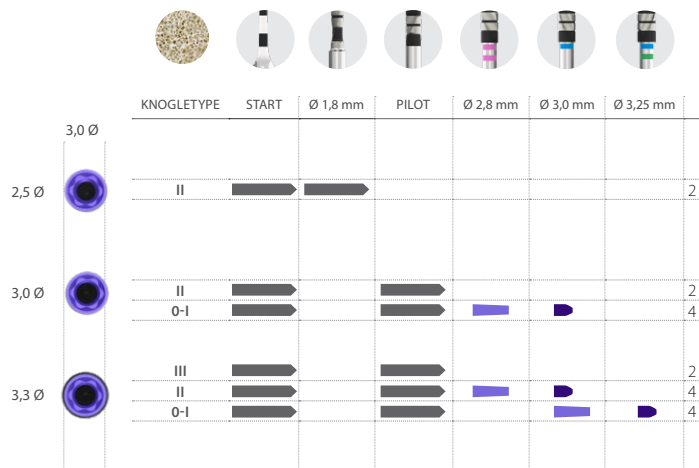


Boresekvensguide

Implantatlængder

(fra 4,5 til 5,5 mm)

Implantatets samlede længde
2-3 mm boreddybde

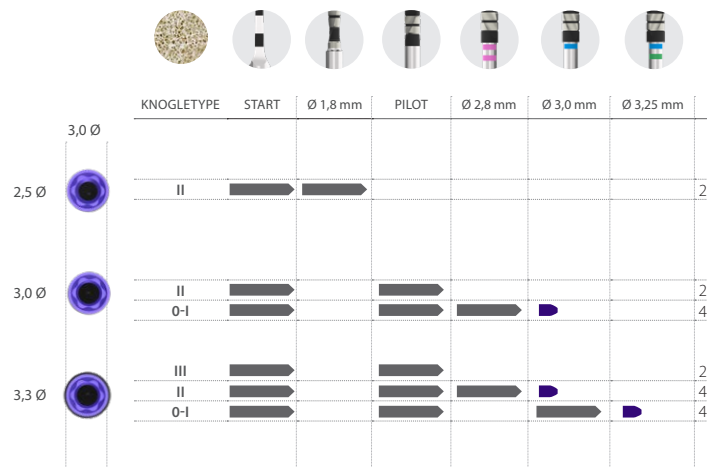


Boresekvensguide



Implantatlængder

(fra 7,5 til 15 mm)

Implantatets samlede længde
6,5 mm boreddybde
2-3 mm boreddybde

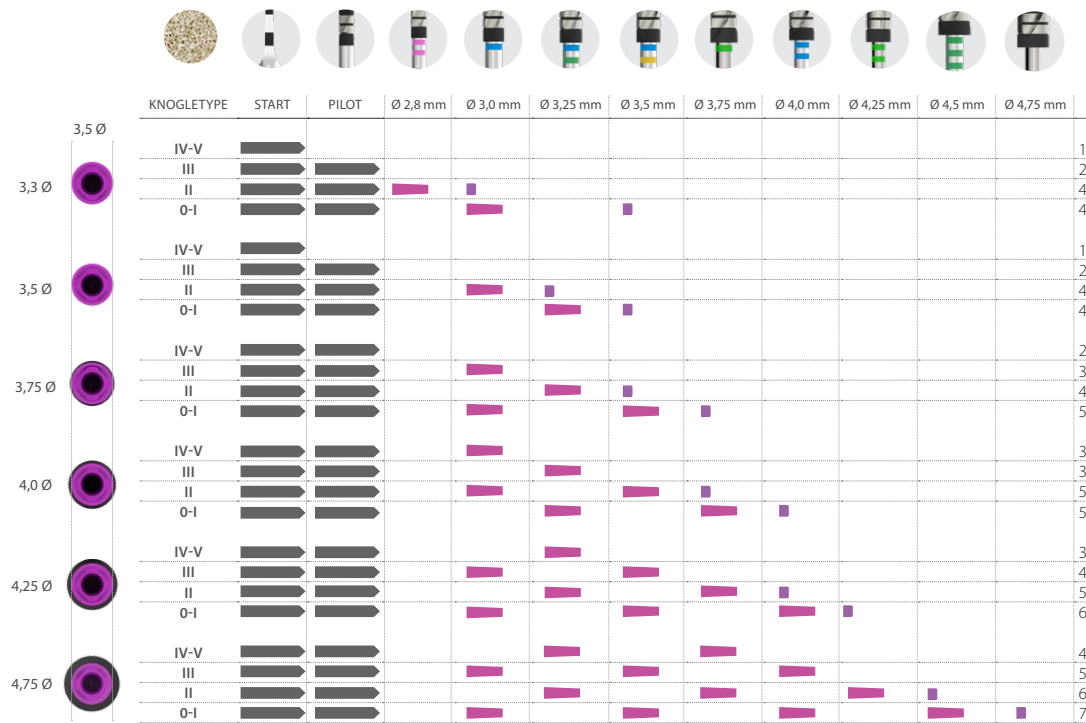



(fra 4,5 til 6,5 mm)


2-3 mm bodedybde



Implantatlængder

(fra 6,5 til 13 mm)

Implantatets samlede længde
5,5 mm boreddybde

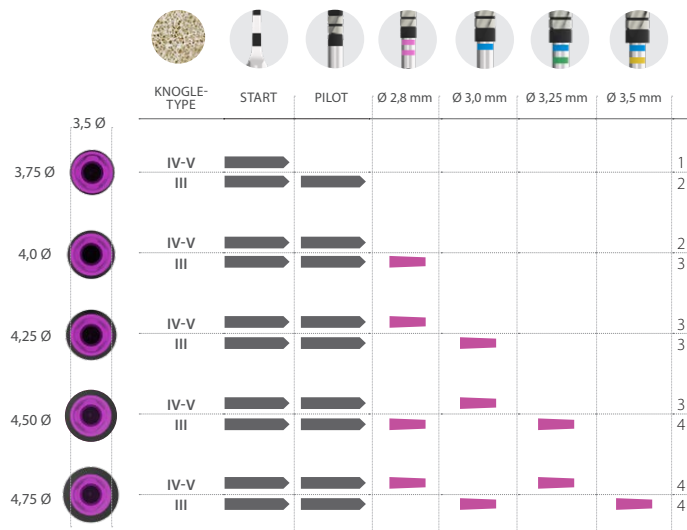


VIGTIGT:
Fræsesekvensen gælder kun
for CORE-X® -implantater

Boresekvensguide

Implantatlængder

(fra 4,5 til 5,5 mm)

Implantatets samlede længde

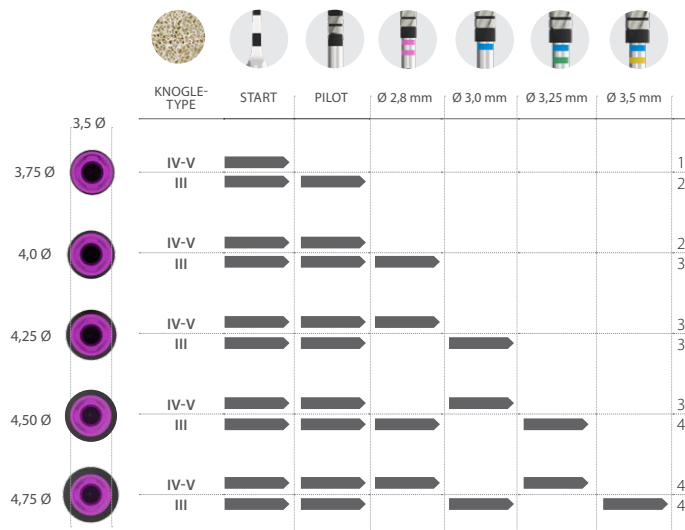

VIGTIGT:
Fræsesekvensen gælder kun
for CORE-X® -implantater


Boresekvensguide

Implantatlængder

(fra 10 til 15 mm)



-  Implantatets samlede længde
-  75 % of the Implantatets samlede længde
-  25 % of the Implantatets samlede længde
-  5,0 mm boreddybde

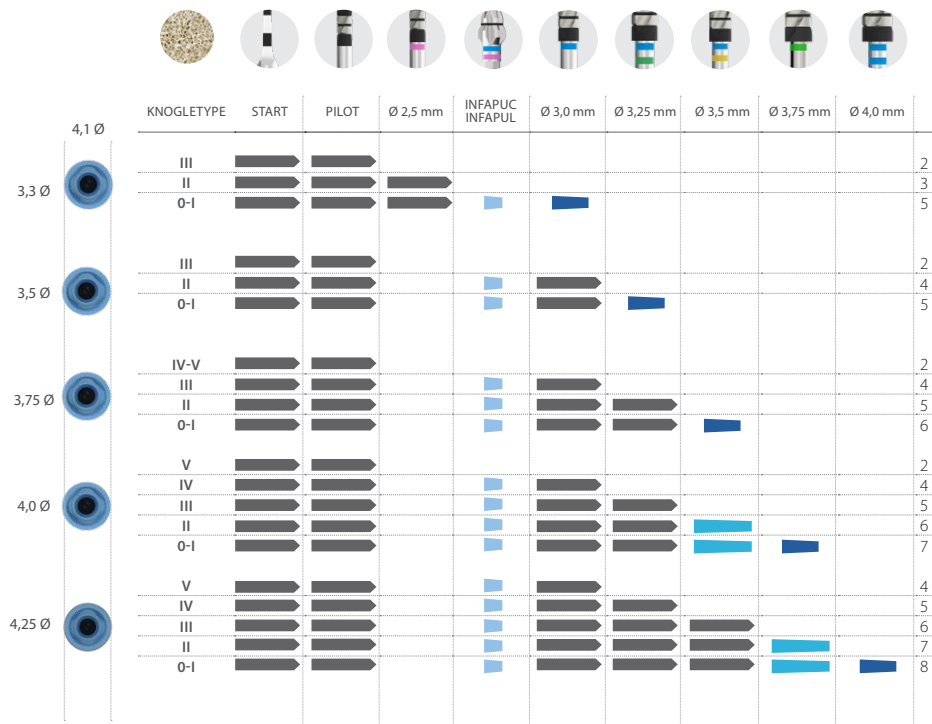


Boresekvensguide



Implantatlængder

(fra 5,5 til 8,5 mm)

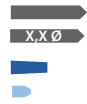


Implantatets samlede længde

X.X Ø

Implantatets samlede længde med bore-maskine med specificeret diameter

5,0 mm boreddybde


2-3 mm boreddybde

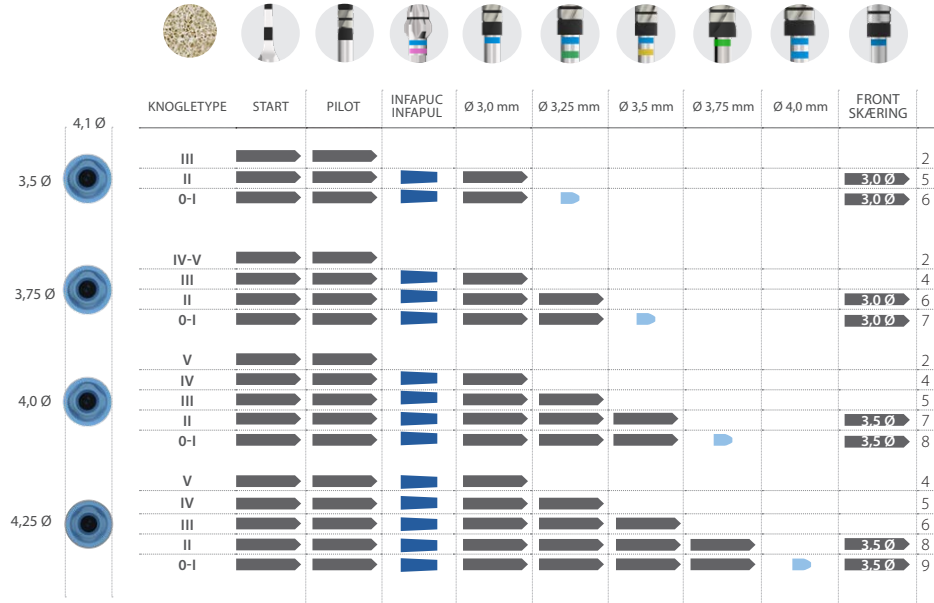

Implantatlængder (fra 8,5 til 15 mm)



Implantatets samlede længde
6,5 mm boreddybde
3 mm boreddybde

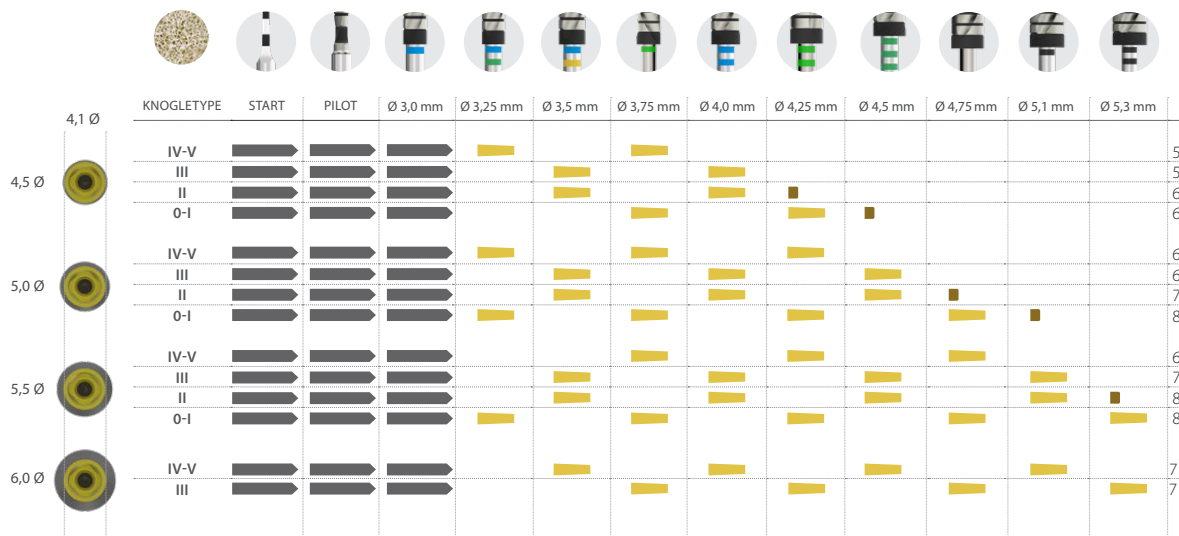



Implantatlængder

(fra 4,5 til 7,5 mm)



Implantatets samlede længde




Implantatets samlede længde med bore-maskine med specificeret diameter



3 mm boreddybde

Universal Plus Platform

Platformdiameter Ø4,1 mm

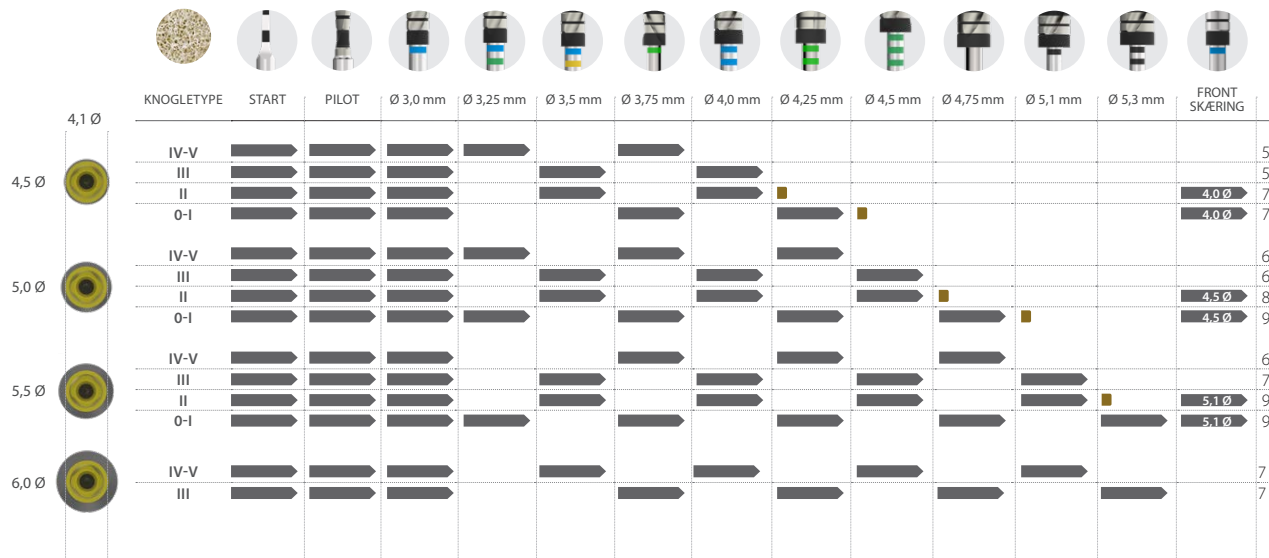

Boresekvensguide