



Anbefalet boresekvensguide

for Interna BTI-implantater



BEMÆRK: Kontakt din distributør for at høre, om produktet er tilgængeligt på de forskellige markeder.

Boredybdemærker

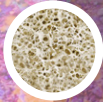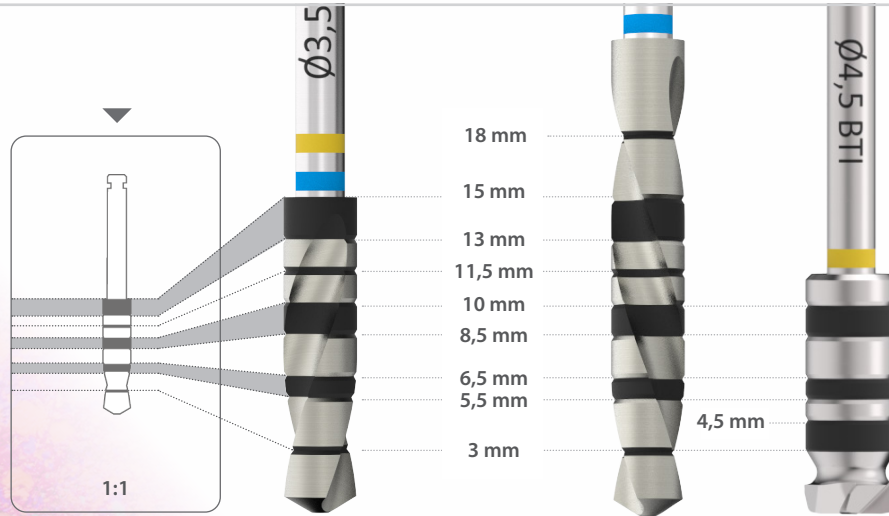

KLASSE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BOR

Indledende bor
 Bor
 Sænkebor
 Front skærebør

REVOLUTIONER

800 - 1.000 rpm
 50 - 75 rpm
 150 - 200 rpm
 50 - 75 rpm


VANDING

ja
 nej
 nej
 nej

Implantatlængder (fra 6,5 til 13 mm)




Implantatets samlede længde
6,5 mm boreddybde
2-3 mm boreddybde

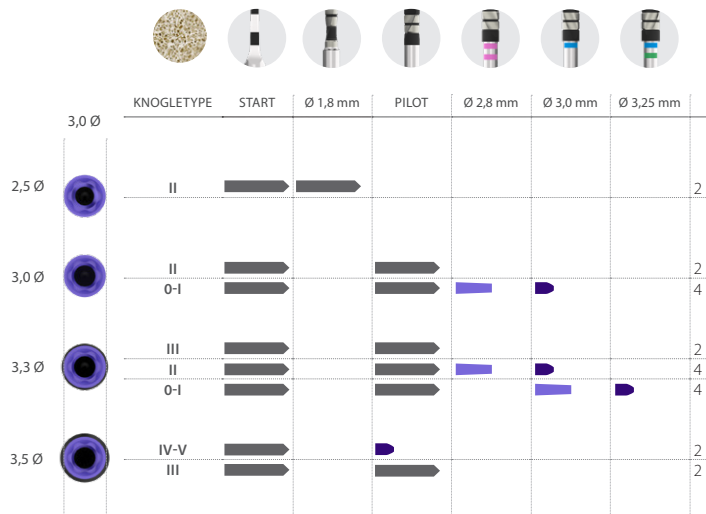

Implantatlængder

(fra 4,5 til 5,5 mm)

Implantatets samlede længde
2-3 mm boreddybde

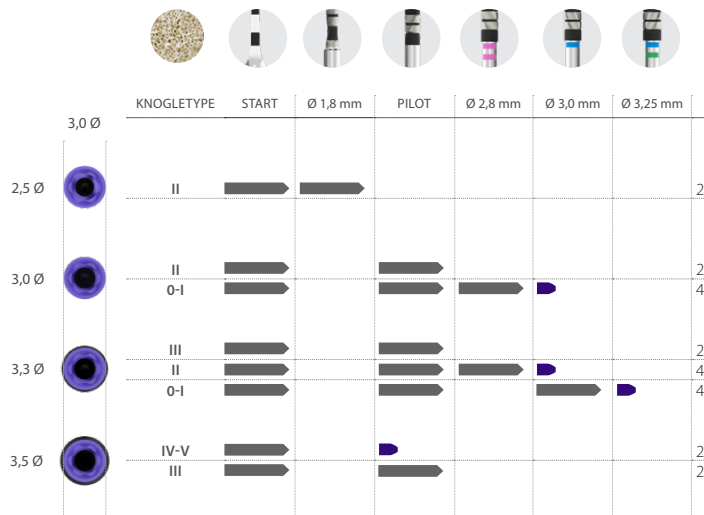


Boresekvensguide



Implantatlængder

(fra 7,5 til 15 mm)

Implantatets samlede længde
6,5 mm boreddybde
2-3 mm boreddybde

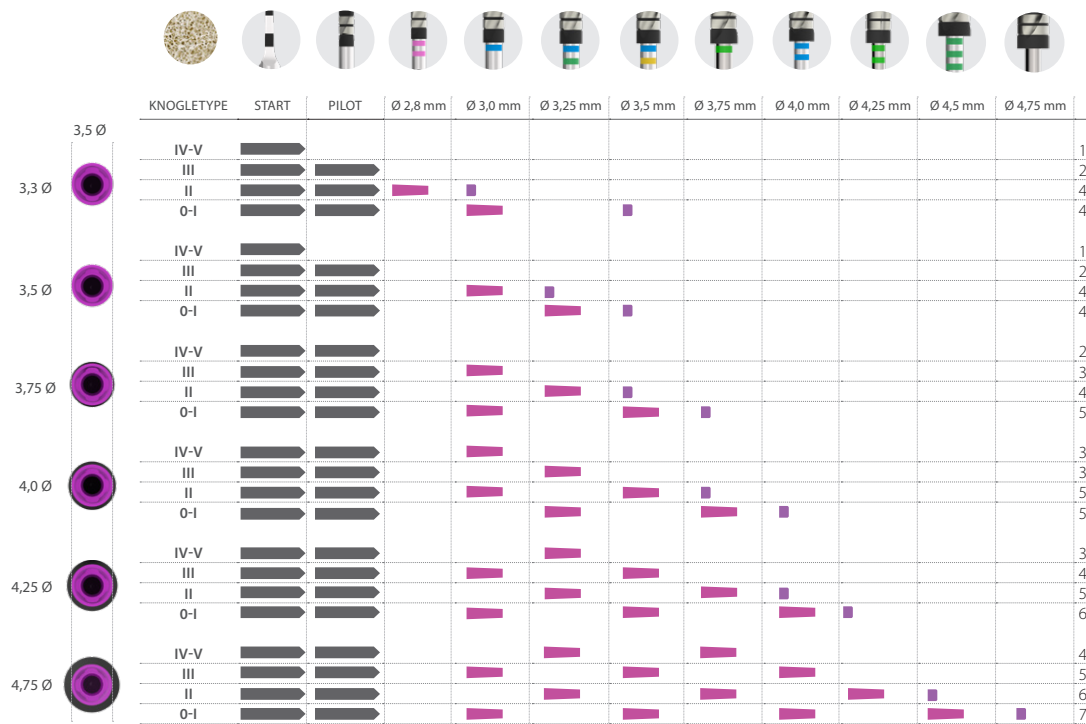


Boresekvensguide



Implantatlængder

(fra 4,5 til 6,5 mm)

 Implantatets samlede længde
 Implantatets samlede længde med bore-maskine med specificeret diameter
 2-3 mm boreddybde

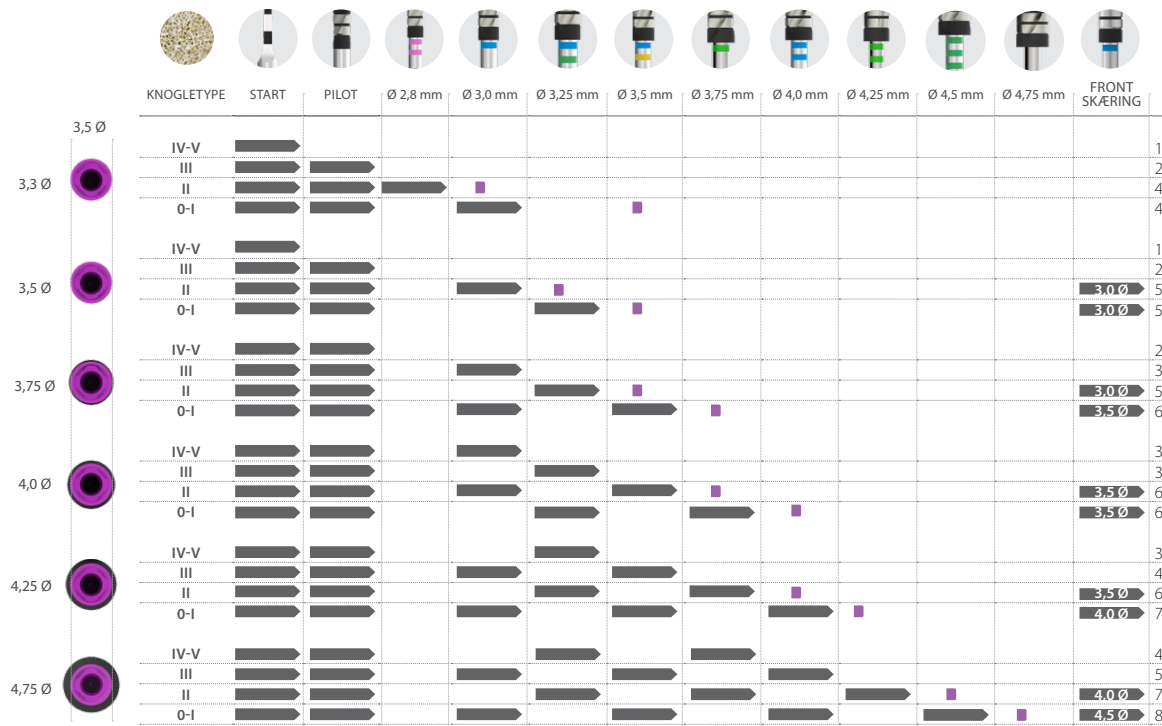


Boresekvensguide



Implantatlængder (fra 6,5 til 13 mm)



 Implantatets samlede længde
 5,5 mm boreddybde
 2-3 mm boreddybde

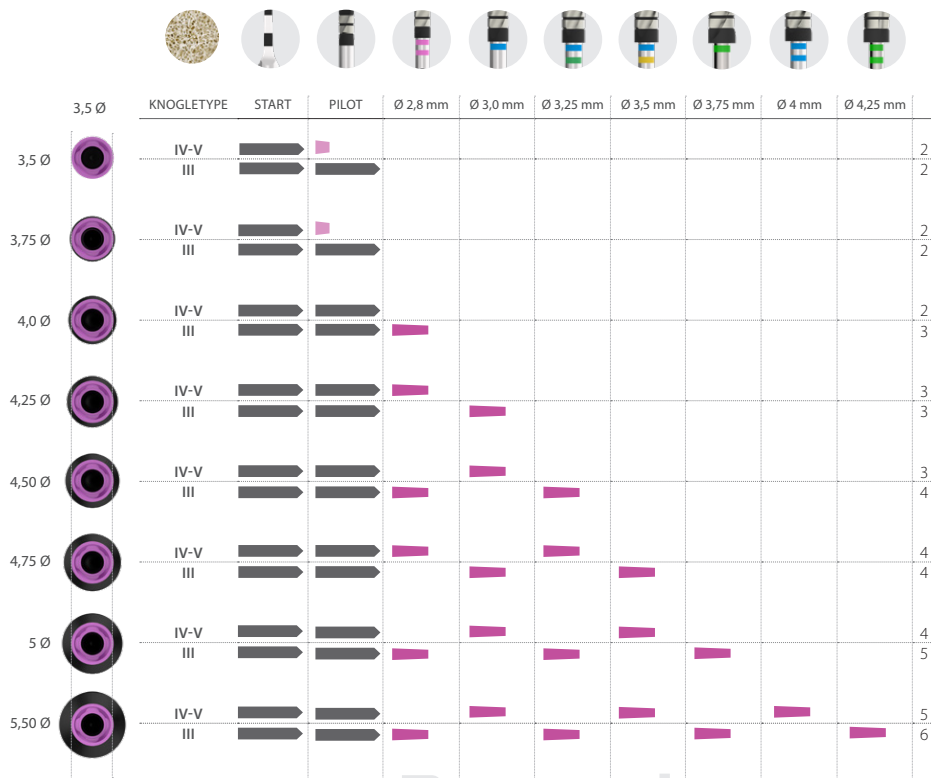

VIGTIGT:
 Fræsesekvensen
 gælder kun for CORE-X
 -implantater


Boresekvensguide



Implantatlængder

(fra 4,5 til 5,5 mm)

Implantatets samlede længde
2-3 mm boredybde

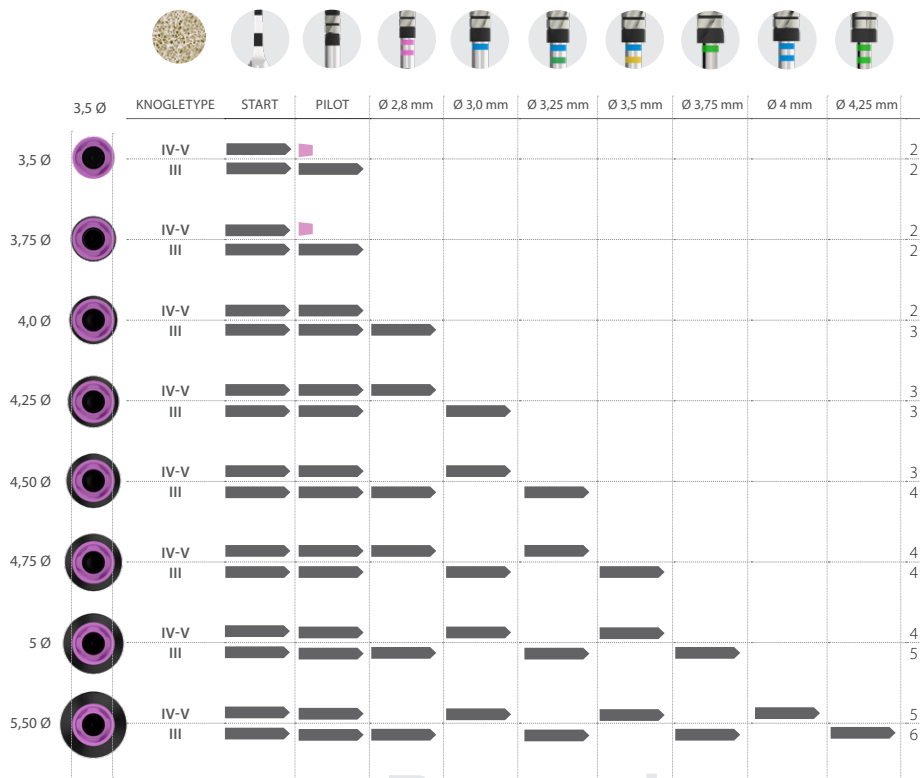

VIGTIGT:



Fræsesekvensen
gælder kun for CORE-X
-implantater

Boresekvensguide



Implantatlængder

(fra 10 til 15 mm)

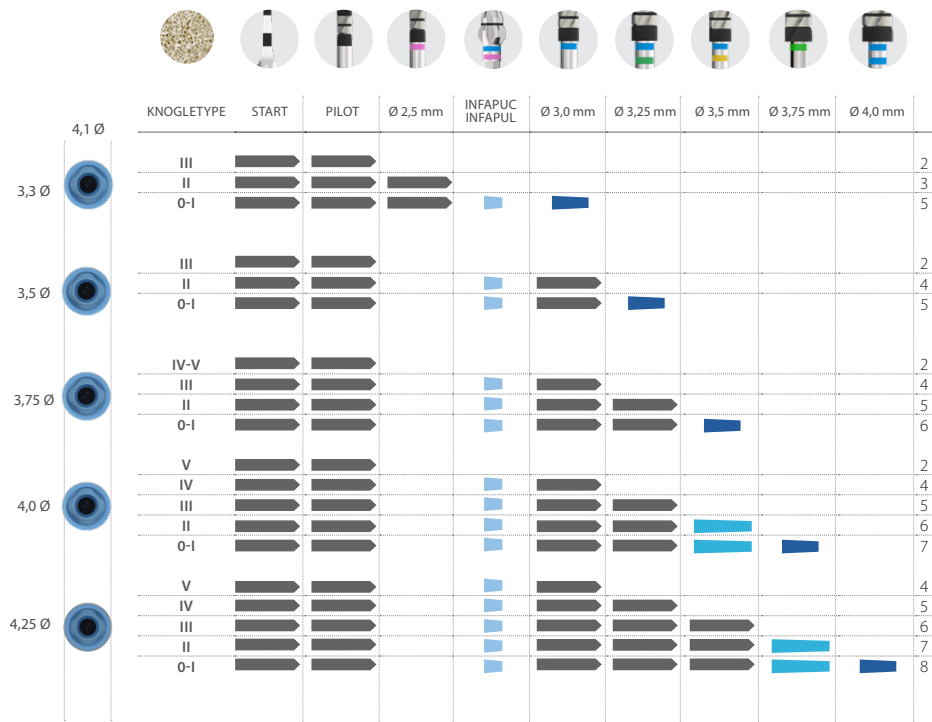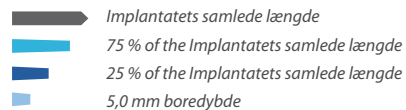


Boresekvensguide



Implantatlængder

(fra 5,5 til 8,5 mm)

- Implantatets samlede længde
- X,X Ø Implantatets samlede længde med bore-maskine med specificeret diameter
- 5,0 mm boreddybde
- 2-3 mm boreddybde

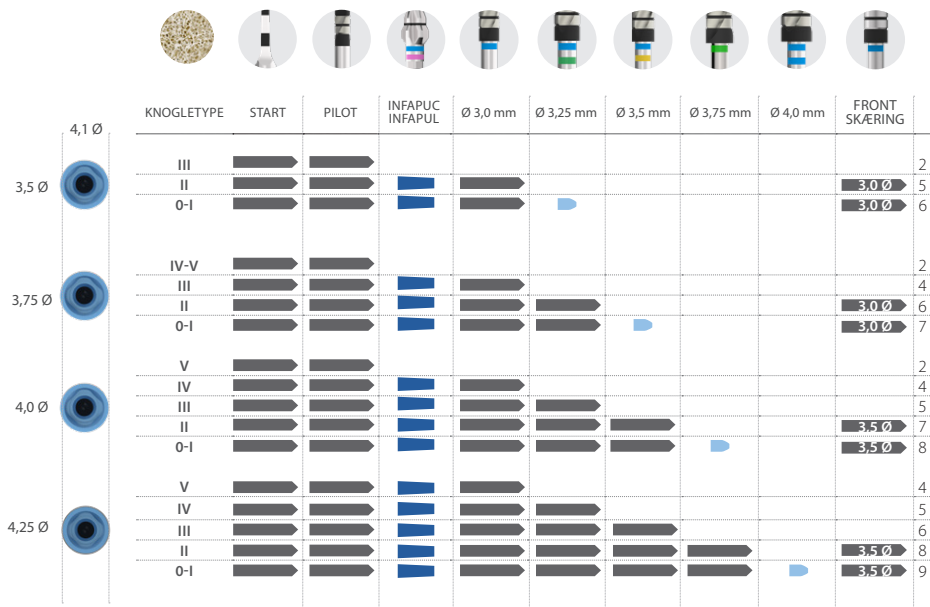

Boresekvensguide






Implantatlængder (fra 8,5 til 15 mm)



 Implantatets samlede længde
 6,5 mm boreddybde
 3 mm boreddybde

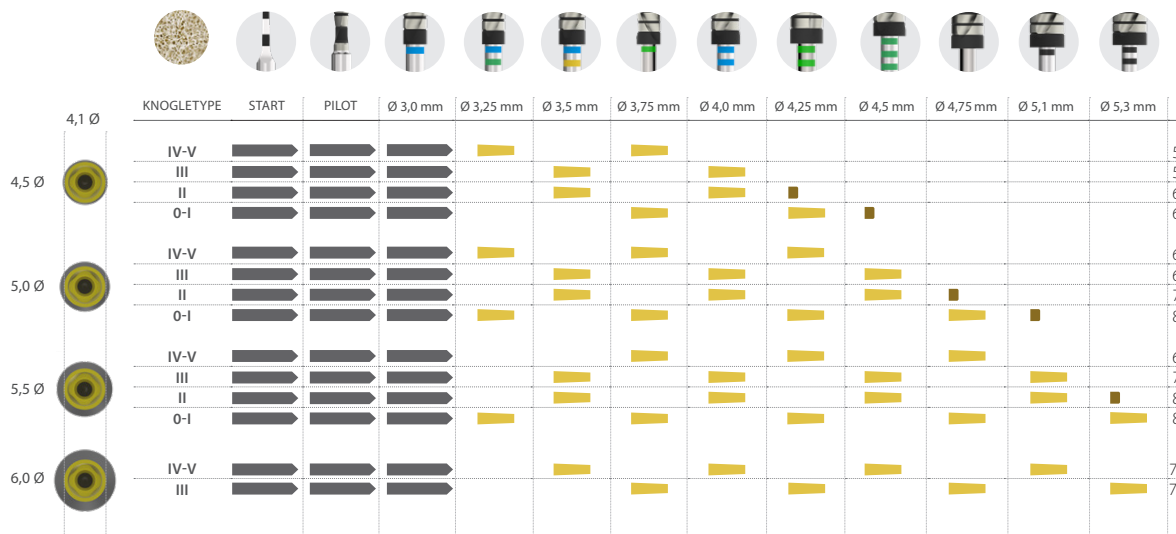


Boresekvensguide



Implantatlængder

(fra 4,5 til 7,5 mm)

- Implantatets samlede længde
- X,X Ø Implantatets samlede længde med bore-maskine med specificeret diameter
- 3 mm boreddybde

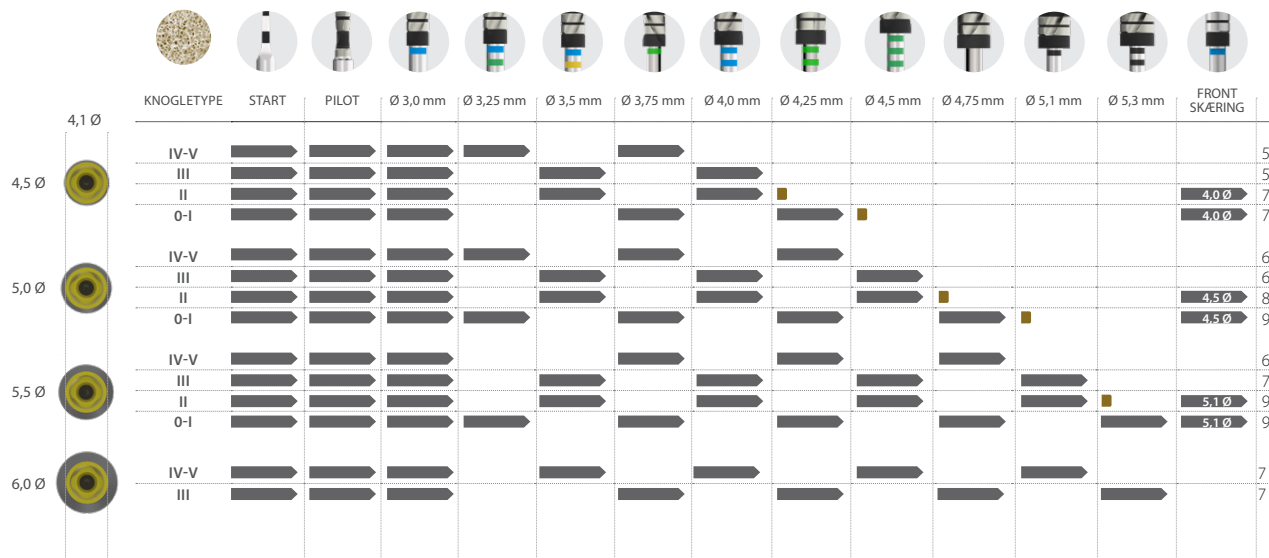

Boresekvensguide

