



Anbefalet boresekvensguide

for Interna BTI-implantater



BEMÆRK: Kontakt din distributør for at høre, om produktet er tilgængeligt på de forskellige markeder.

Boredybdemærker

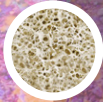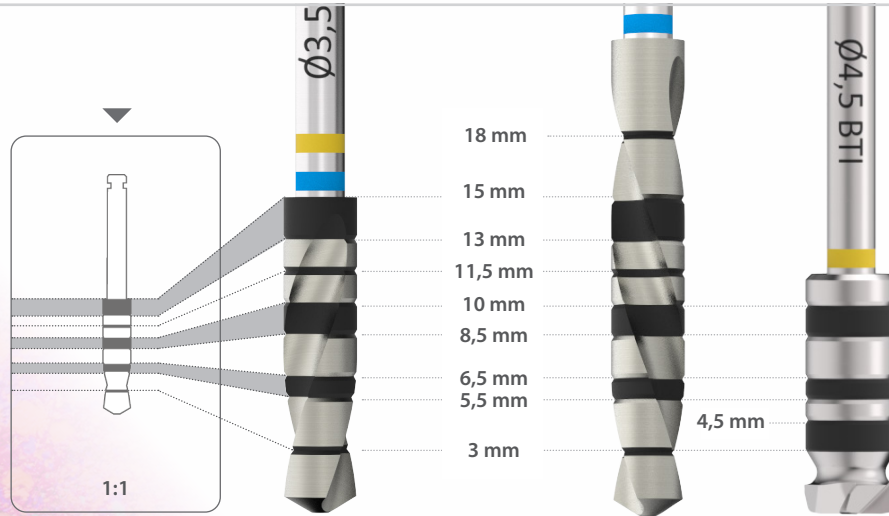

KLASSE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BOR

Indledende bor
 Bor
 Sænkebor
 Front skærebør

REVOLUTIONER

800 - 1.000 rpm
 50 - 75 rpm
 150 - 200 rpm
 50 - 75 rpm

VANDING

ja
 nej
 nej
 nej

Implantatlængder

(fra 5,5 til 13 mm)

Implantatets samlede længde
mm
Profil
2-3 mm boreddybde


IMPLANTATLÆNGDER	2,5 Ø						
	KNOGLETYP	START	Ø 1,8 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,2 mm	Ø 2,3 mm	Ø 2,4 mm
5,5 - 6,5 - 7,5 mm	III						2
	II			5,5 mm			3
	0-I			5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	6
8,5 - 10 mm	III						2
	II			6,5 mm			3
	0-I			6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6
11,5 - 13 mm	III						2
	II			8,5 mm			3
	0-I			8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	6



Implantatlængder

(fra 7,5 til 13 mm)

Implantatets samlede længde
6,5 mm boreddybde
2-3 mm boreddybde

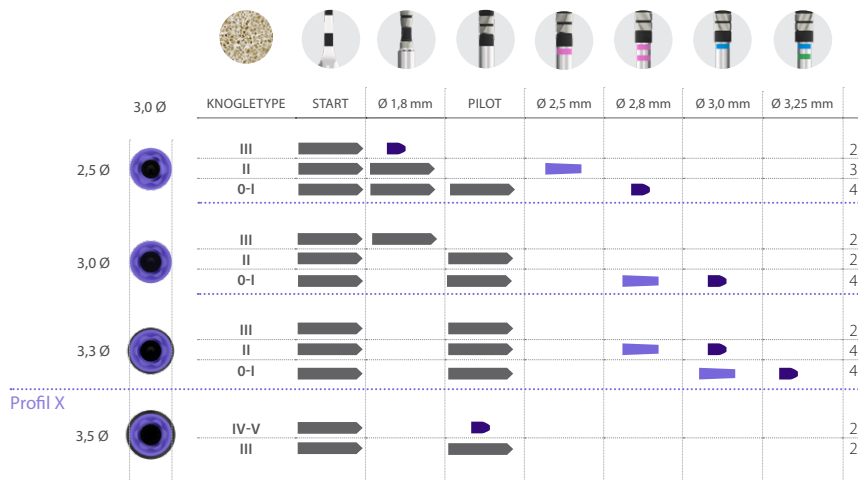


Implantatlængder

(fra 4,5 til 6,5 mm)



-  Implantatets samlede længde
-  Implantatets samlede længde med bor med den angivne diameter
-  2-3 mm boreddybde
-  2-3 mm boreddybde. Kun til implantater på 6,5 mm

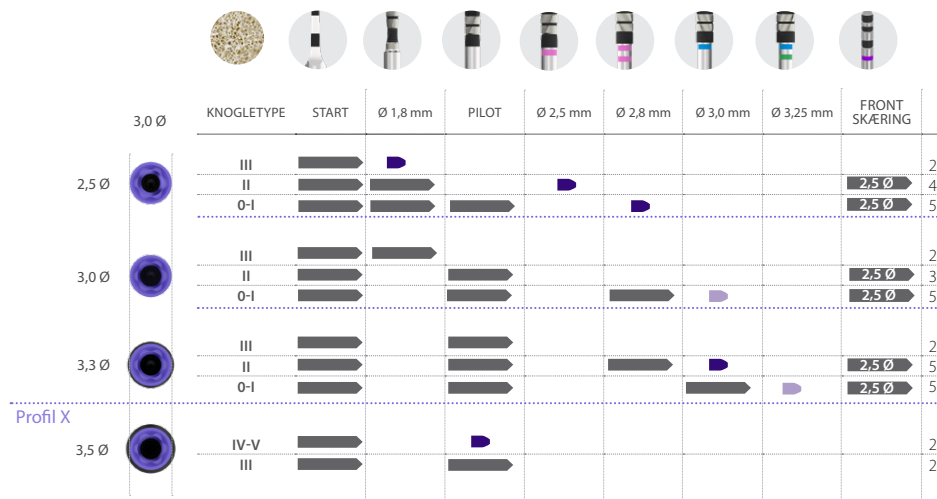

3.0 Platform
Platformdiameter Ø3,0 mm




Boresekvensguide



Implantatlængder

(fra 7,5 til 15 mm)

Implantatets samlede længde
6,5 mm boreddybde
2-3 mm boreddybde

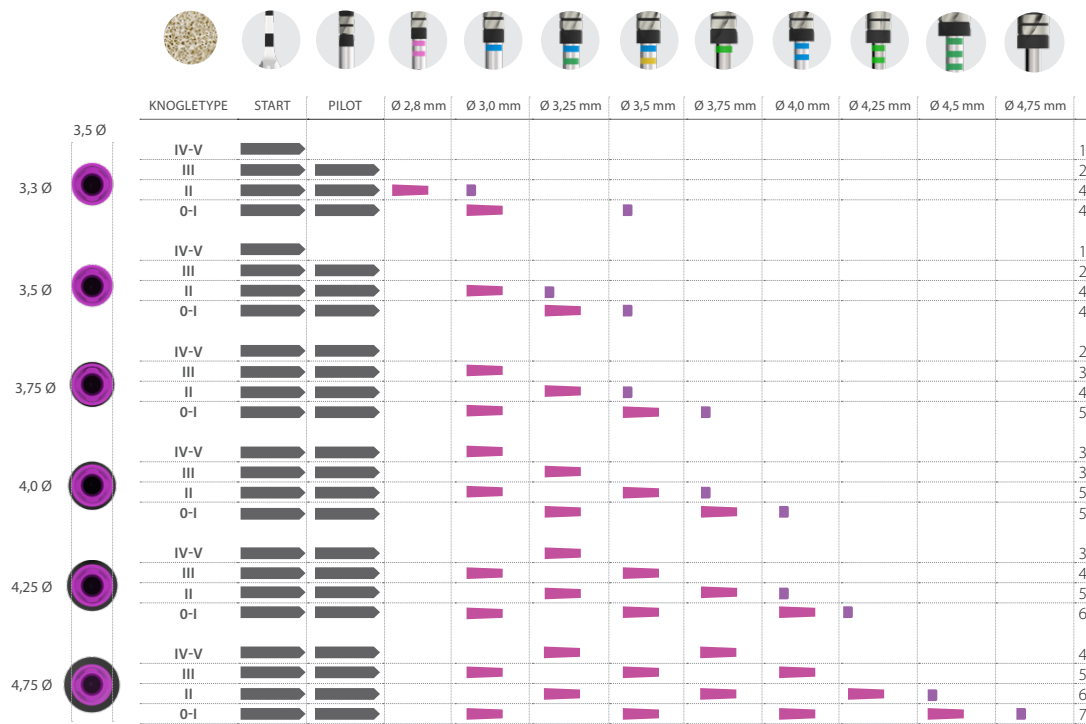


Boresekvensguide



Implantatlængder

(fra 4,5 til 6,5 mm)

 Implantatets samlede længde
 Implantatets samlede længde med bore-maskine med specificeret diameter
 2-3 mm boreddybde

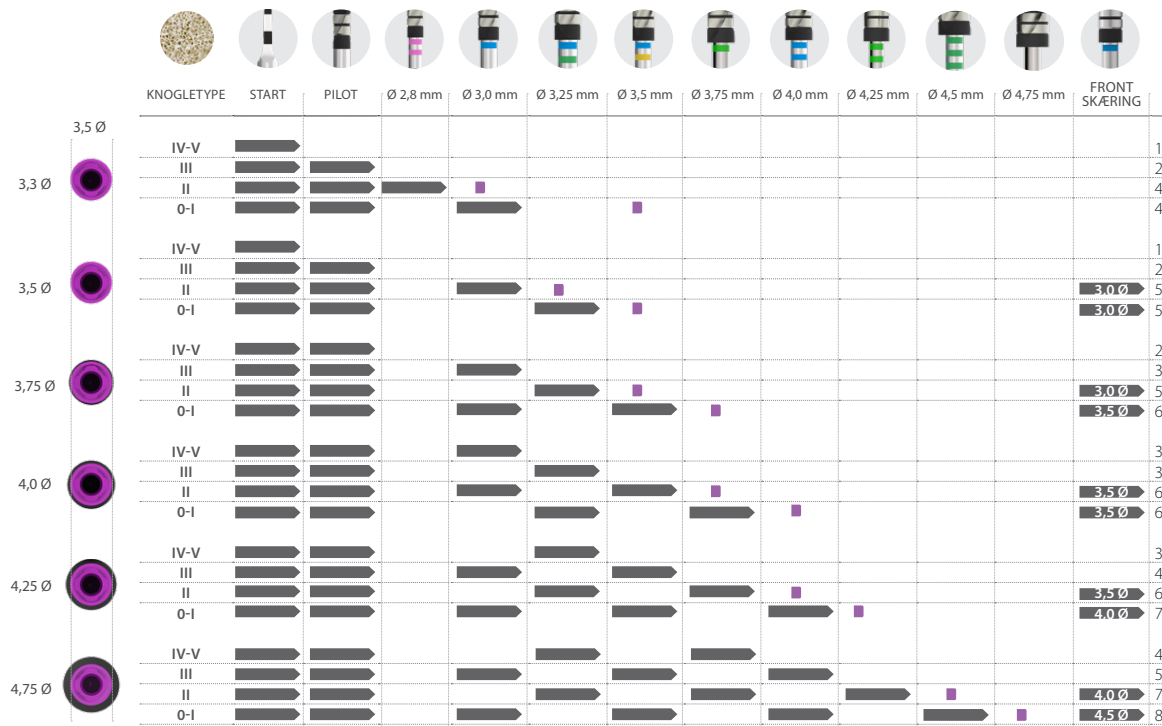

Boresekvensguide






Implantatlængder

(fra 4,5 til 5,5 mm)

Implantatets samlede længde
2-3 mm boreddybde

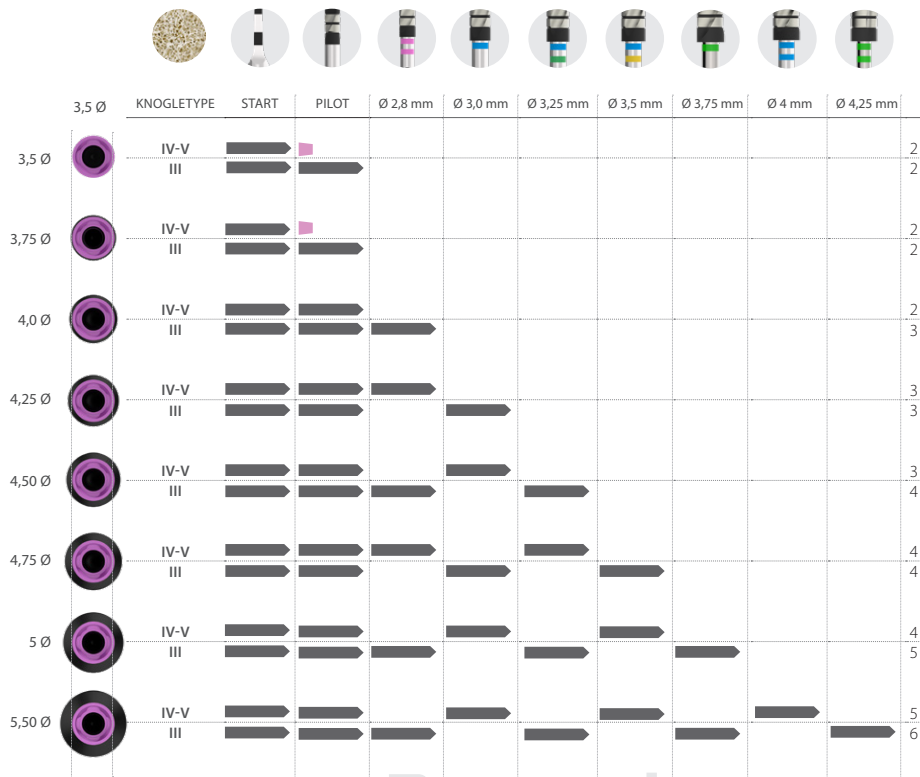

VIGTIGT:



Fræsesekvensen
gælder kun for CORE-X
-implantater

Boresekvensguide



Implantatlængder

(fra 10 til 15 mm)

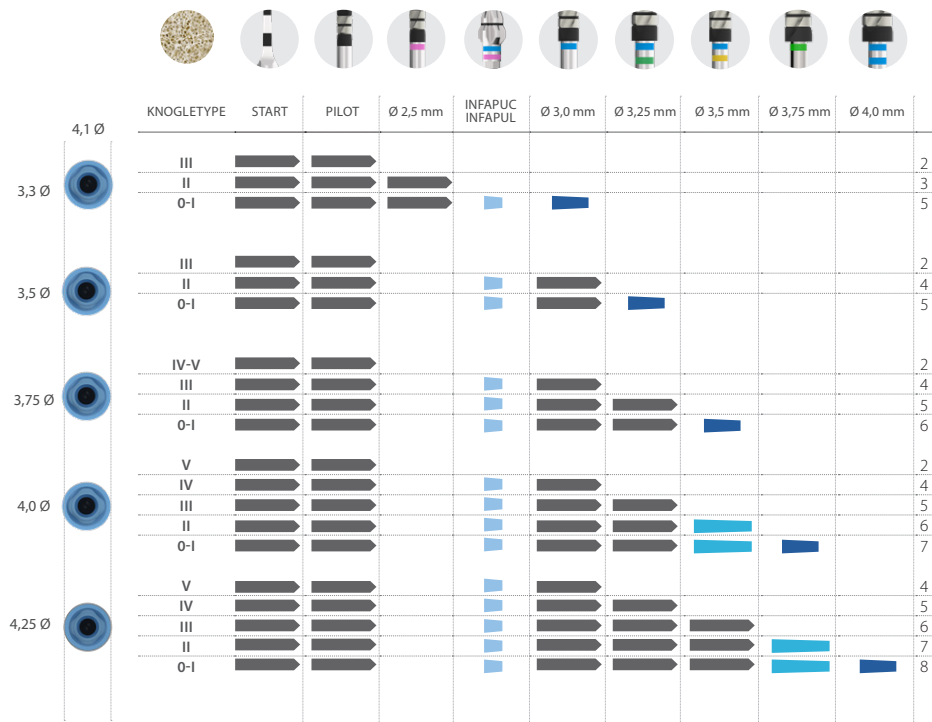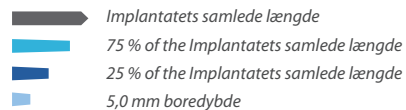


Boresekvensguide



Implantatlængder

(fra 5,5 til 8,5 mm)

- Implantatets samlede længde
- X,X Ø Implantatets samlede længde med bore-maskine med specificeret diameter
- 5,0 mm boreddybde
- 2-3 mm boreddybde

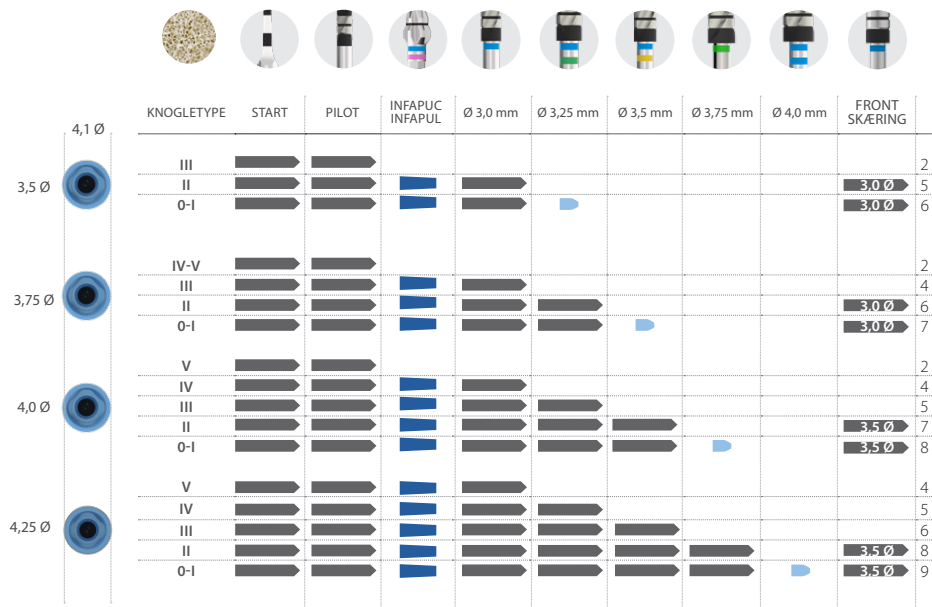




Implantatlængder (fra 8,5 til 15 mm)



 Implantatets samlede længde
 6,5 mm boreddybde
 3 mm boreddybde

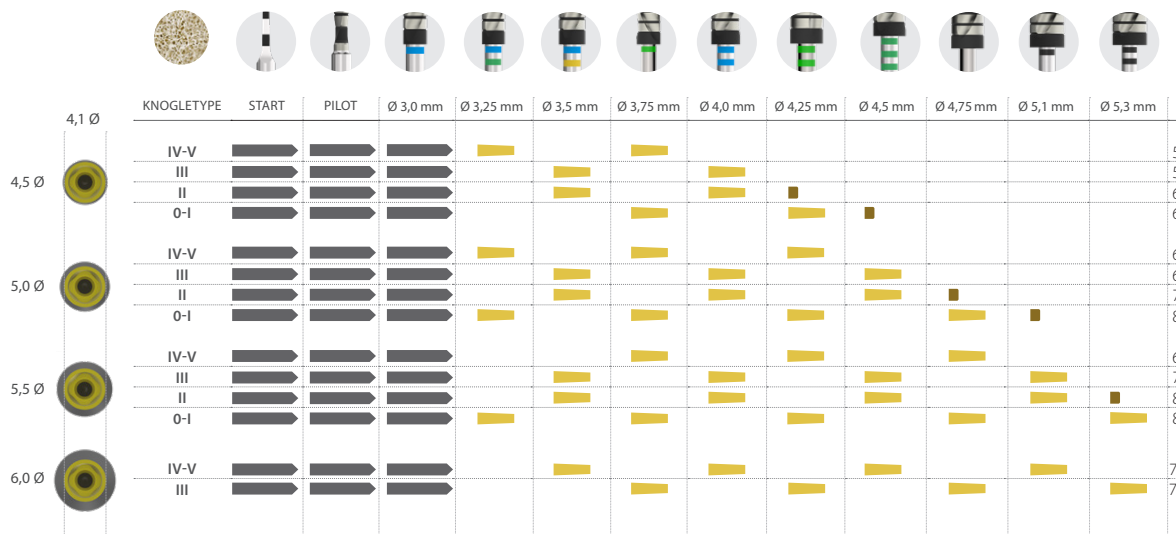

Boresekvensguide



Implantatlængder

(fra 4,5 til 7,5 mm)

- Implantatets samlede længde
- X,X Ø Implantatets samlede længde med bore-maskine med specificeret diameter
- 3 mm boreddybde

