



Empfohlene Bohrsequenzen

für BTI Interna Implantate



Hinweis: Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der Produkte in den verschiedenen Ländern.

Lasermarkierungen

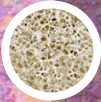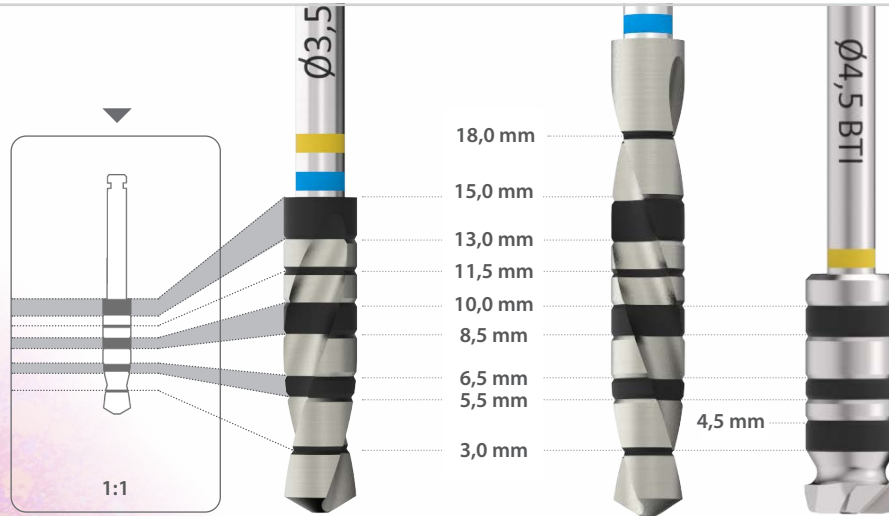

KLASSE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BOHRER

Initialbohrer
Spiralbohrer
Versenker
Bohrer mit
frontaler Schneide

UMDREHUNGSZAHL

800 - 1.000 U/min
50 - 75 U/min
150 - 200 U/min
50 - 75 U/min


KÜHLUNG

ja
nein
nein
nein

Implantate

(Länge von 6,5 bis 13 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 6,5 mm Bohrtiefe
 2-3 mm Bohrtiefe

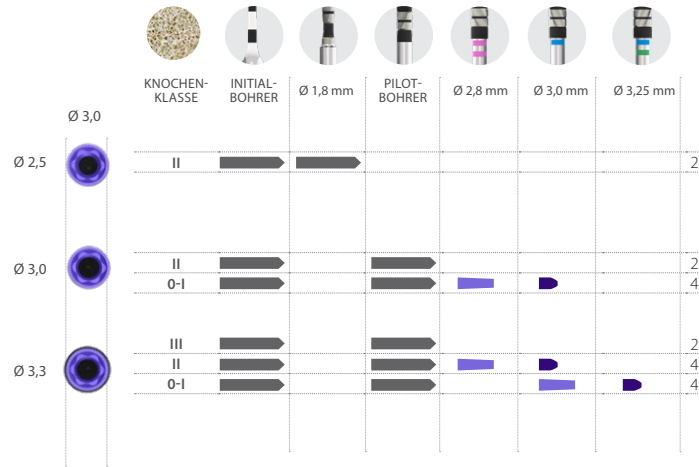


Bohrsequenzen
Empfohlene

Implantate

(Länge von 4,5 bis 5,5 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 2-3 mm Bohrtiefe

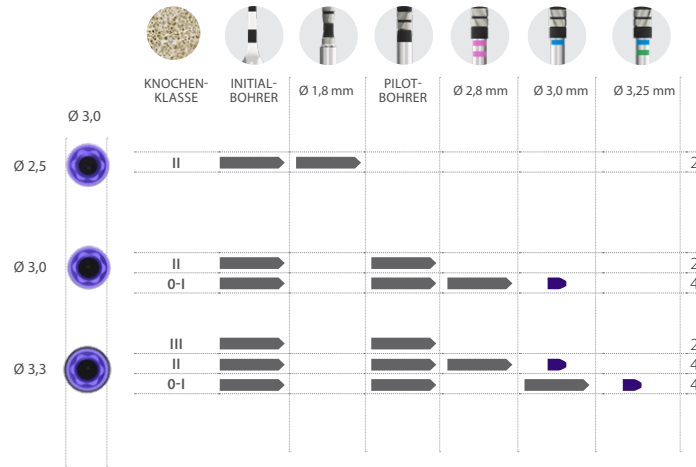


Bohrsequenzen
Empfohlene

Implantate

(Länge von 7,5 bis 15 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 6,5 mm Bohrtiefe
 2-3 mm Bohrtiefe

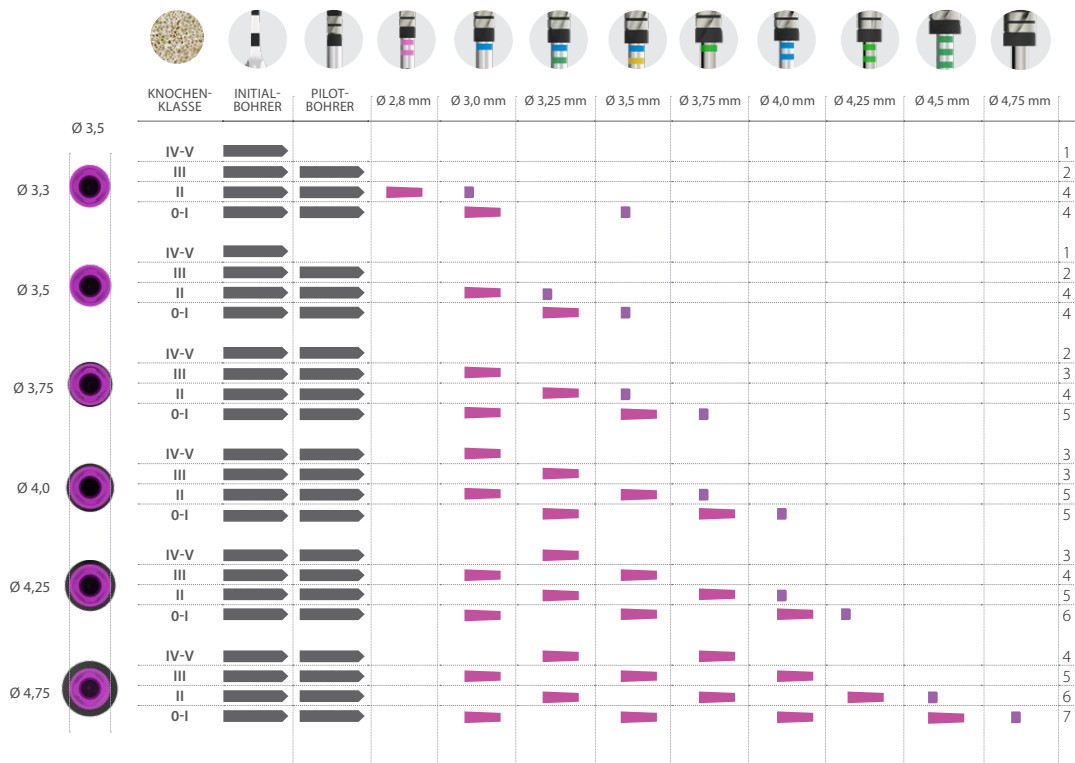

Bohrsequenzen
Empfohlene

Implantate

(Länge von 4,5 bis 6,5 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers
 2-3 mm Bohrtiefe




Bohrsequenzen
Empfohlene

Implantate

(Länge von 6,5 bis 13 mm)

— Gesamtlänge des Implantats
— 5,5 mm Bohrtiefe

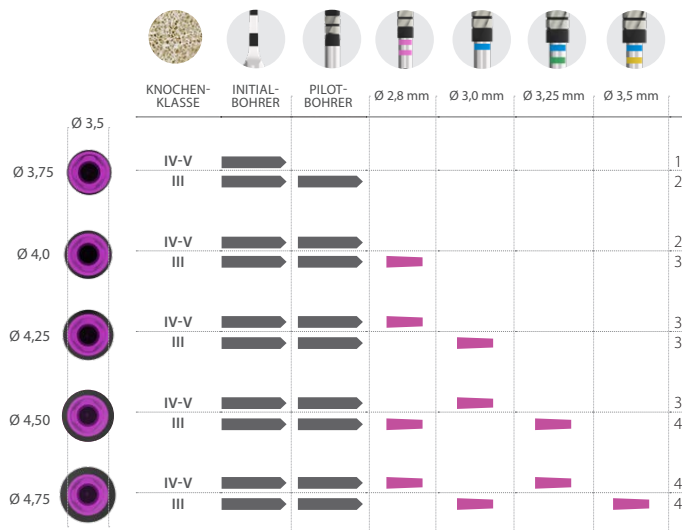


WICHTIG:
Bohrsequenzen nur gültig
für CORE-X® Implantate

Bohrsequenzen
Empfohlene

Implantate

(4,5 - 5,5 mm)

➡ Gesamtlänge des Implantats

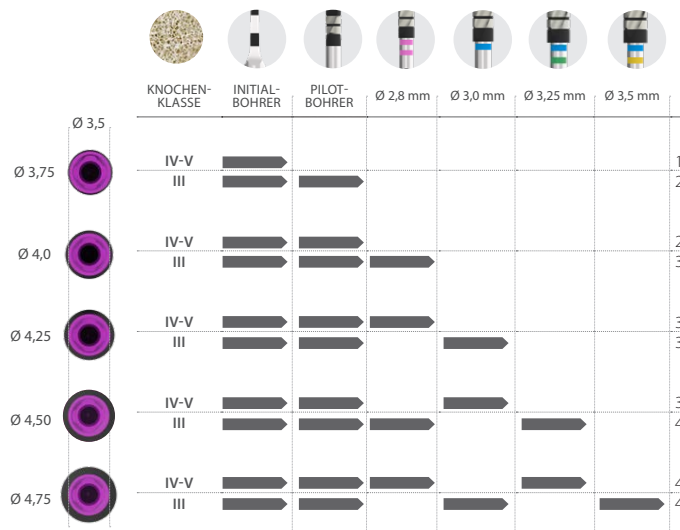

WICHTIG:
Bohrsequenzen nur gültig
für CORE-X® Implantate


Bohrsequenzen
Empfohlene



Implantate

(Länge von 10 bis 15 mm)


- Gesamtlänge des Implantats
- 75 % der Gesamtlänge des Implantats
- 25 % der Gesamtlänge des Implantats
- 5,0 mm Bohrtiefe

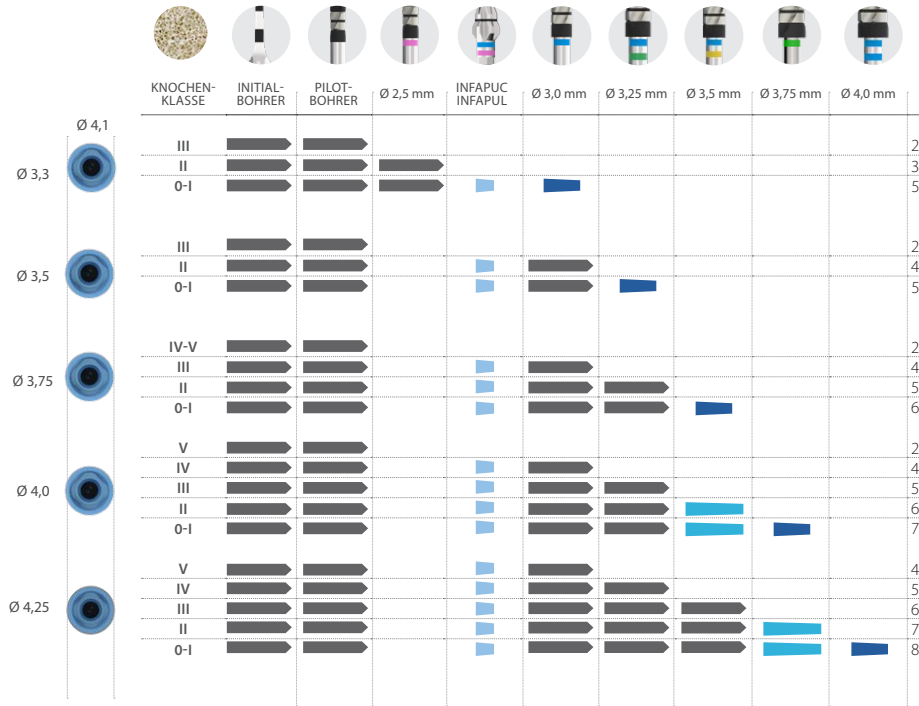

Bohrsequenzen
Empfohlene

Implantate (Länge von 5,5 bis 8,5 mm)


-  Gesamtlänge des Implantats
-  Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers
-  5,0 mm Bohrtiefe
-  2-3 mm Bohrtiefe

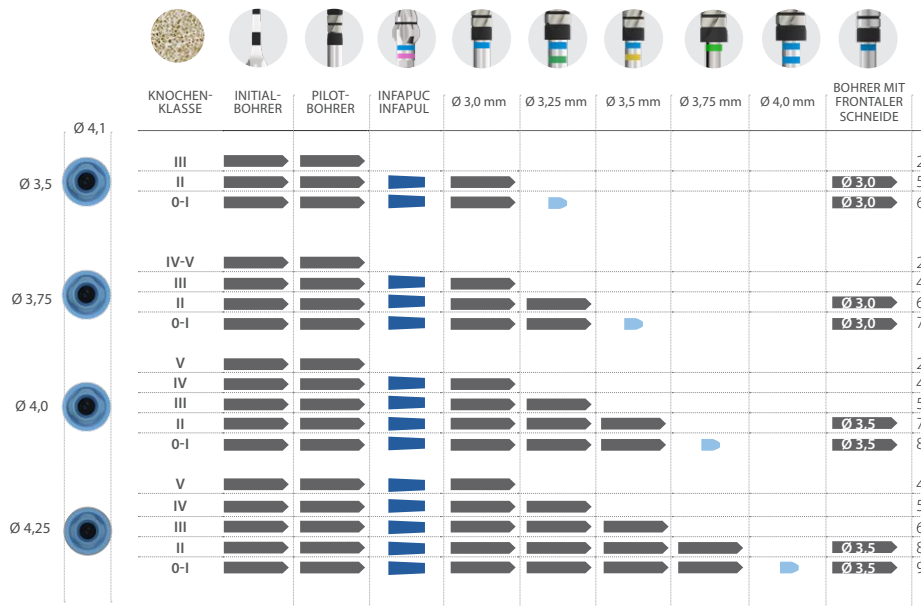

Implantate

(Länge von 8,5 bis 15 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 6,5 mm Bohrtiefe
 3 mm Bohrtiefe

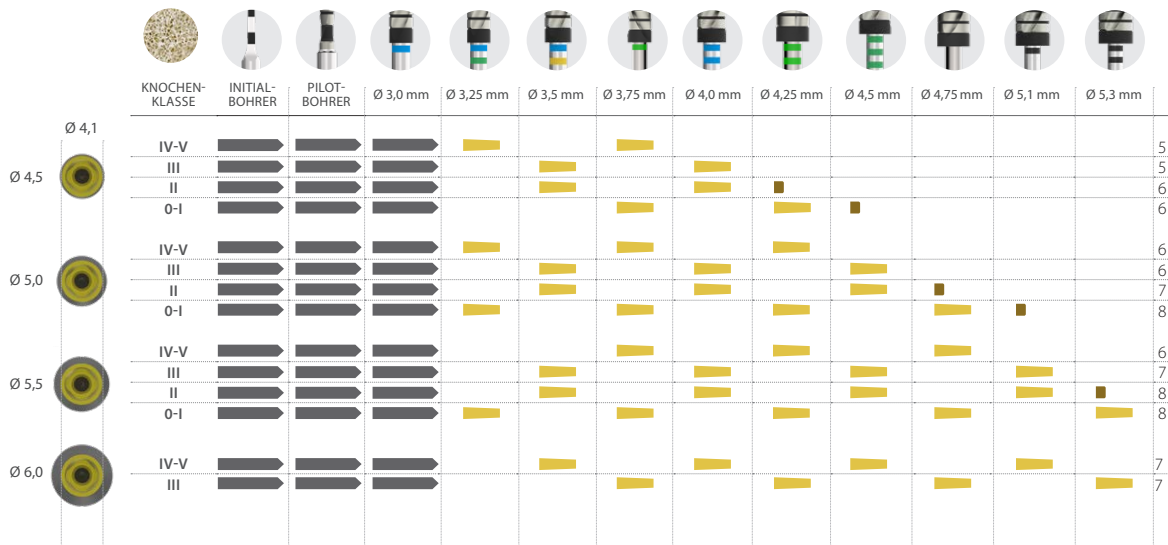


Bohrsequenzen
Empfohlene

Implantate

(Länge von 4,5 bis 7,5 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers
 3 mm Bohrtiefe

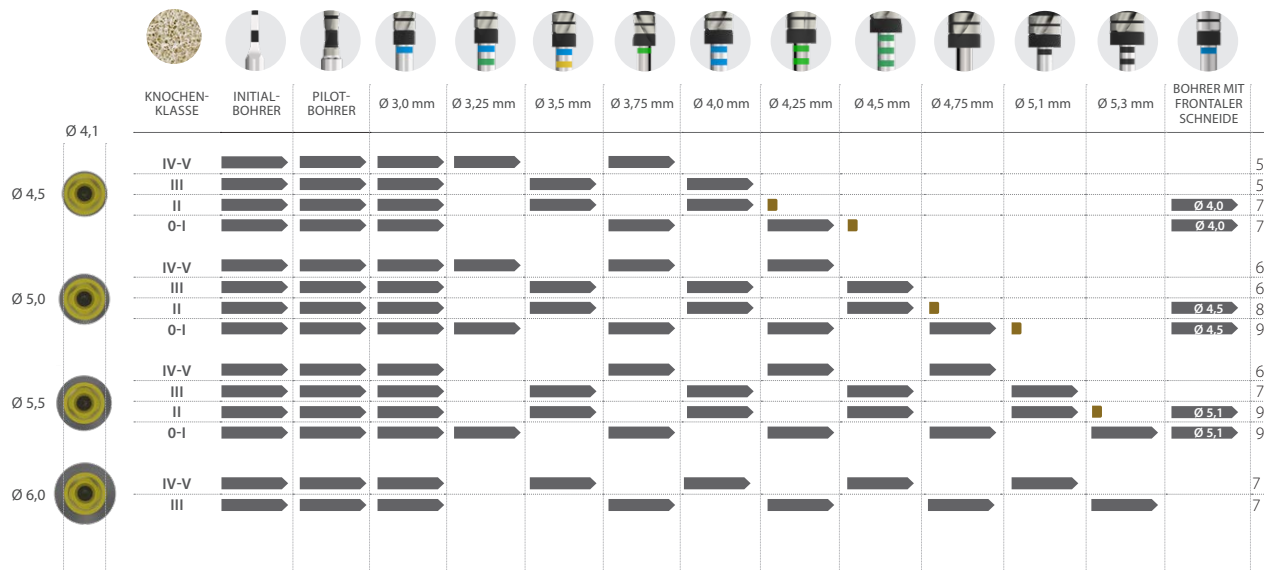

Bohrsequenzen

Empfohlene