



Empfohlene Bohrsequenzen

für BTI Interna Implantate



Hinweis: Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der Produkte in den verschiedenen Ländern.

Lasermarkierungen

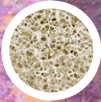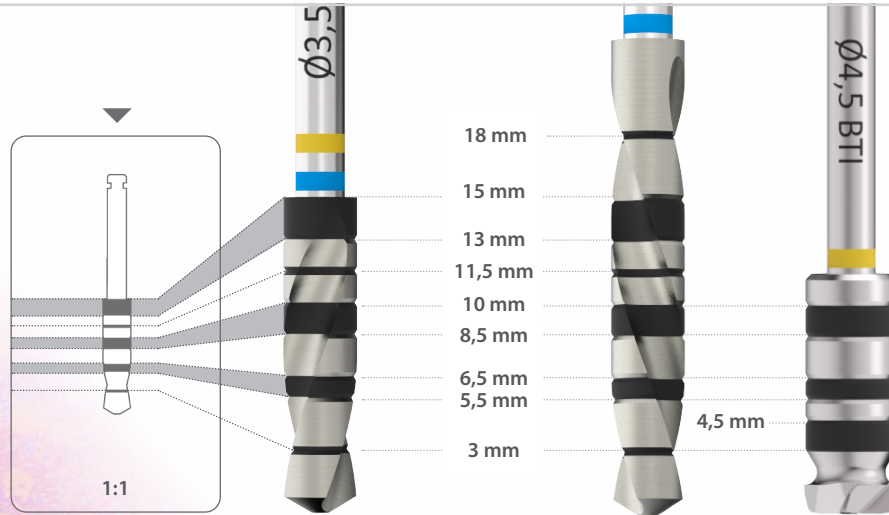

KLASSE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BOHRER

Initialbohrer
Spiralbohrer
Versenker
Bohrer mit
frontaler Schneide

UMDREHUNGSZAHL

800 - 1.000 U/min
50 - 75 U/min
150 - 200 U/min
50 - 75 U/min

KÜHLUNG

ja
nein
nein
nein

Implantate

(Länge von 5,5 bis 13 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 mm Variable
 2-3 mm Bohrtiefe


IMPLANTATE	      						
	KNOCHEN- KLASSE	INITIA BOHRER	Ø 1,8 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,2 mm	Ø 2,3 mm	Ø 2,4 mm
5,5 - 6,5 - 7,5 mm	III						2
	II			5,5 mm			3
	0-I			5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	6
8,5 - 10 mm	III						2
	II			6,5 mm			3
	0-I			6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6
11,5 - 13 mm	III						2
	II			8,5 mm			3
	0-I			8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	6



Implantate

(Länge von 7,5 bis 13 mm)


 Gesamtlänge des Implantats
 6,5 mm Bohrtiefe
 2-3 mm Bohrtiefe

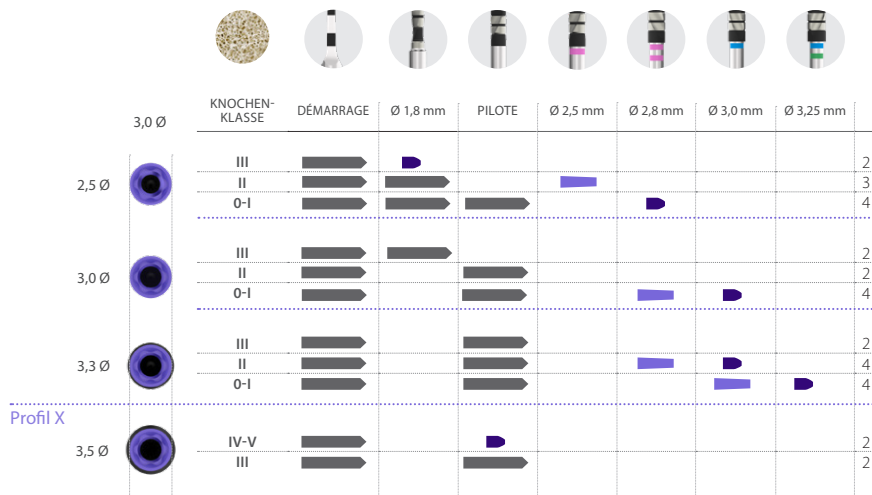

Implantate


(Länge von 4,5 bis 6,5 mm)

-  Gesamtlänge des Implantats
-  Gesamtlänge des Implantats mit einem Bohrer des angegebenen Durchmessers
-  2-3 mm Bohrtiefe
-  2-3 mm Bohrtiefe. Nur für Implantate mit 6,5 mm Durchmesser

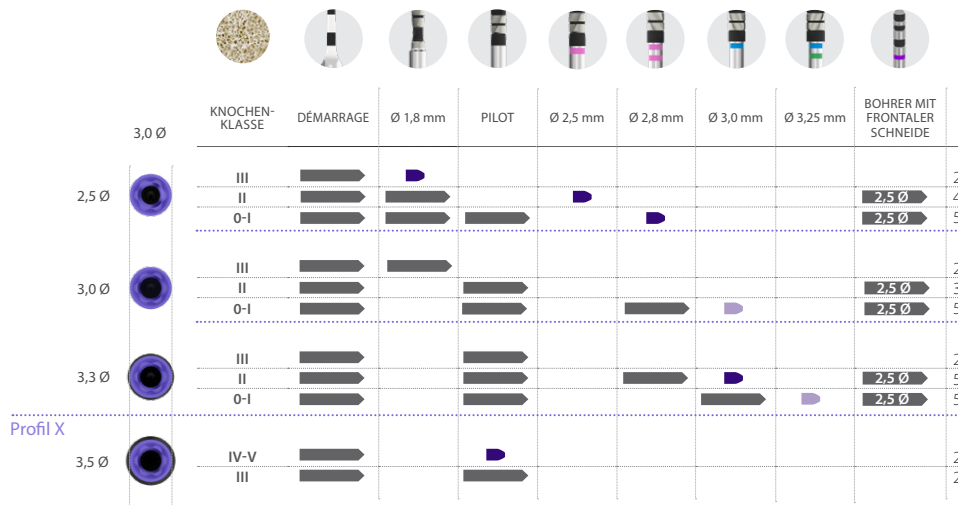

Implantate


(Länge von 7,5 bis 15 mm)

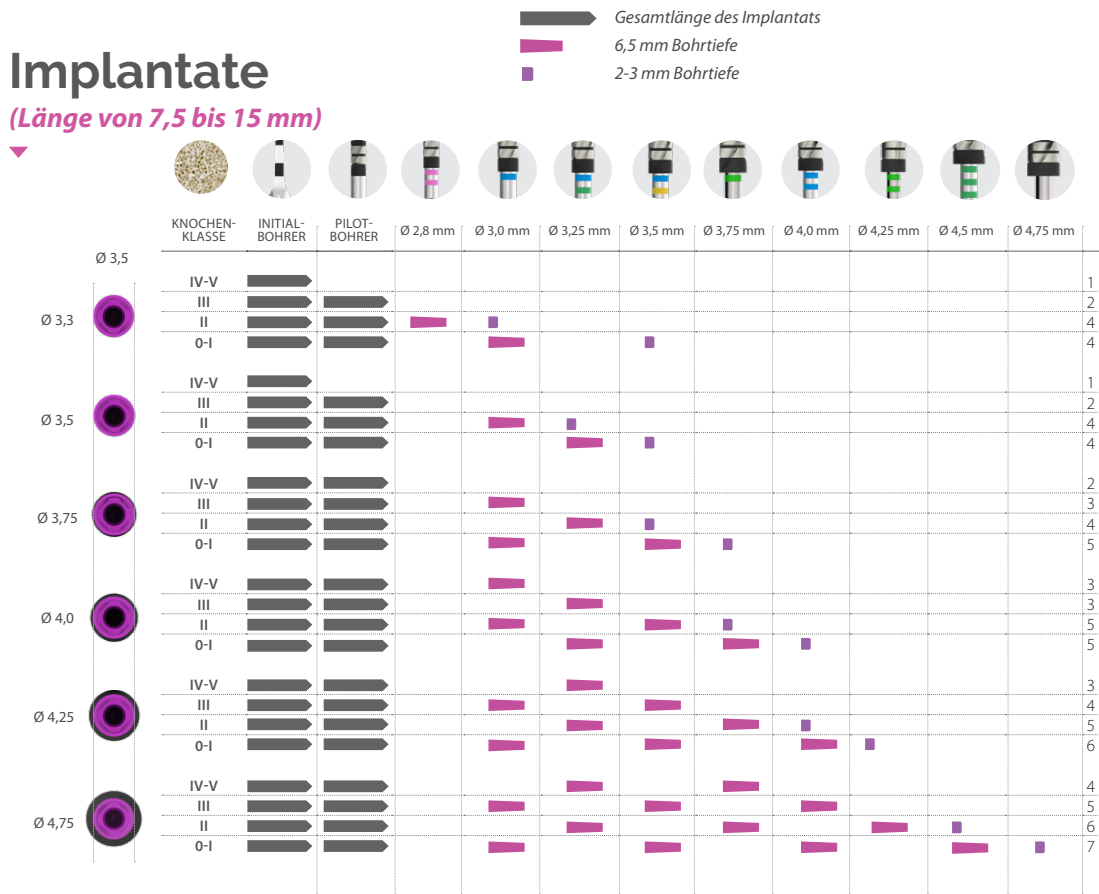

Implantate

(Länge von 4,5 bis 6,5 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers
 2-3 mm Bohrtiefe

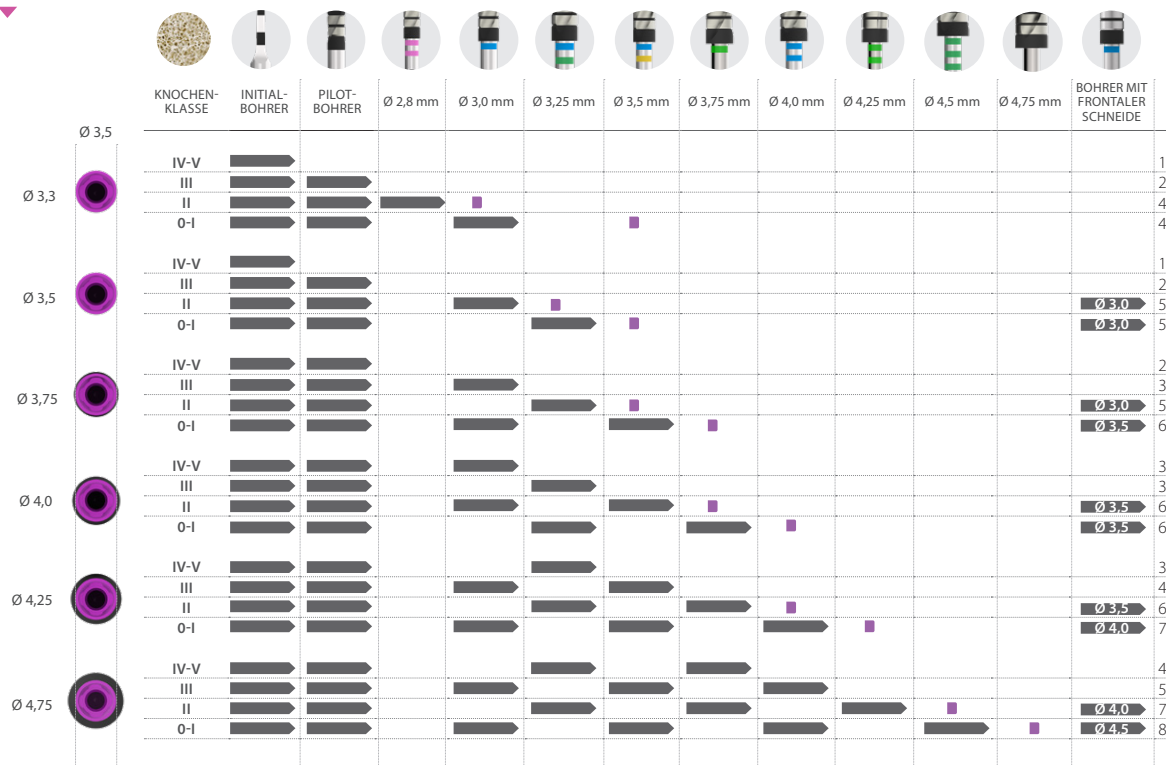


Bohrsequenzen
Empfohlene



Implantate

(Länge von 6,5 bis 13 mm)

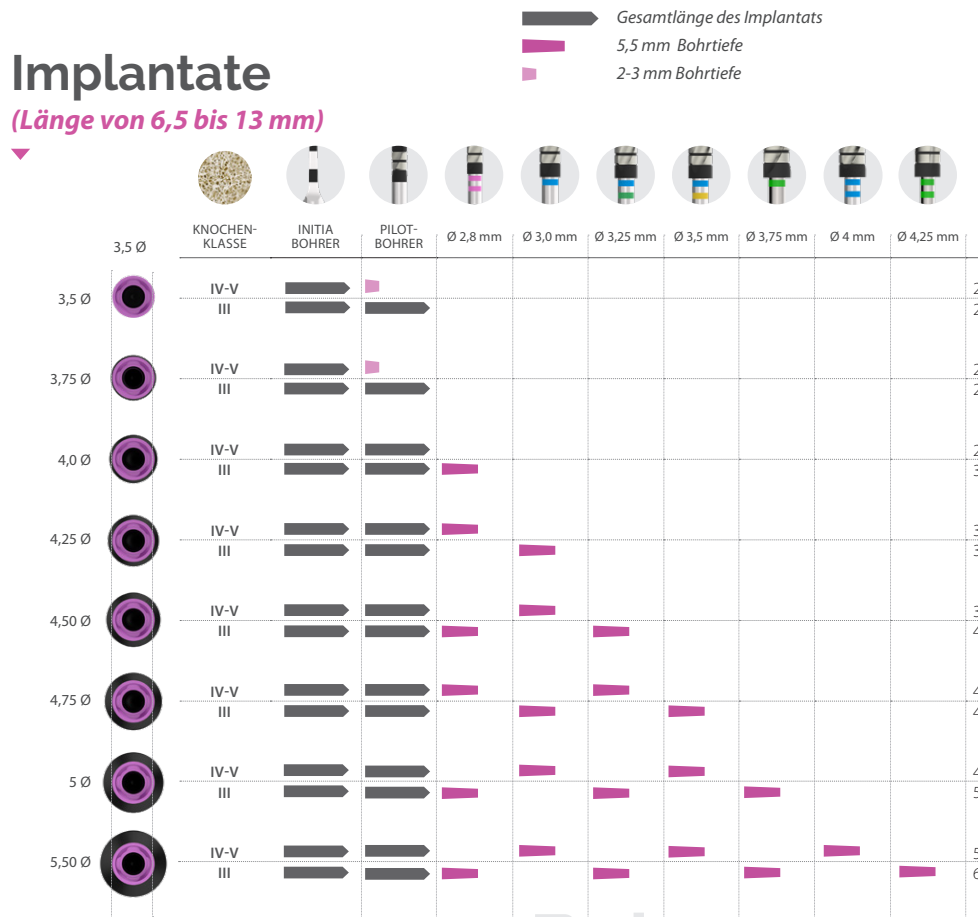

WICHTIG:
Bohrsequenzen
nur gültig für **CORE-X**
Implantate


Bohrsequenzen
Empfohlene



Implantate

(4,5 - 5,5 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 2-3 mm Bohrtiefe

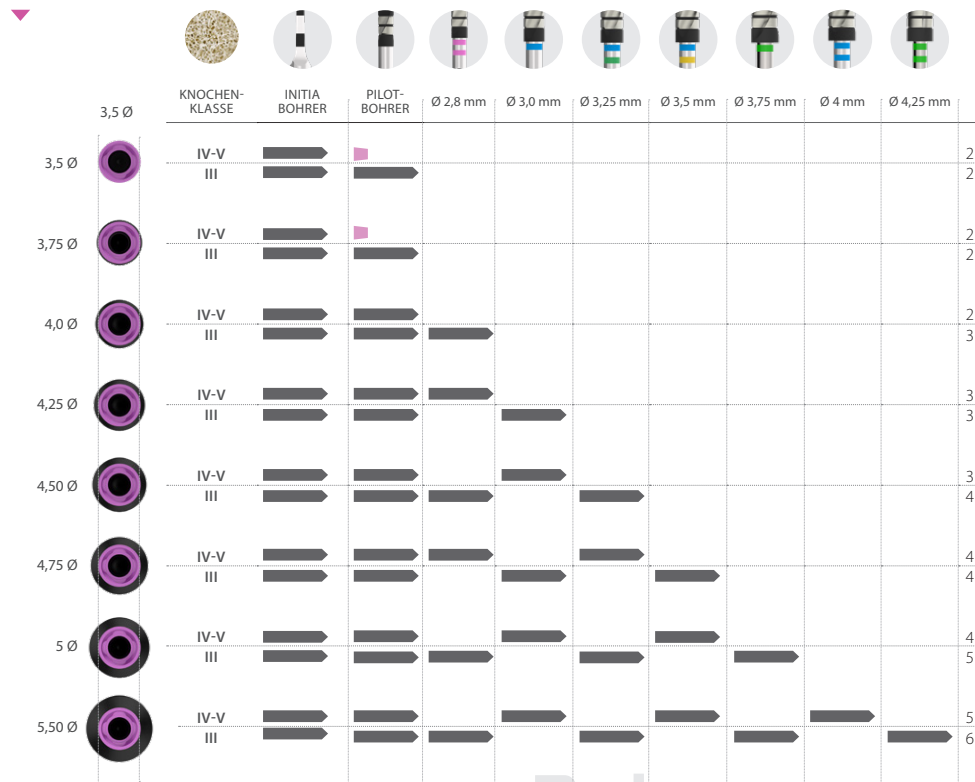



WICHTIG:
 Bohrsequenzen
 nur gültig für CORE-X
 Implantate

Bohrsequenzen
Empfohlene



Implantate

(Länge von 10 bis 15 mm)

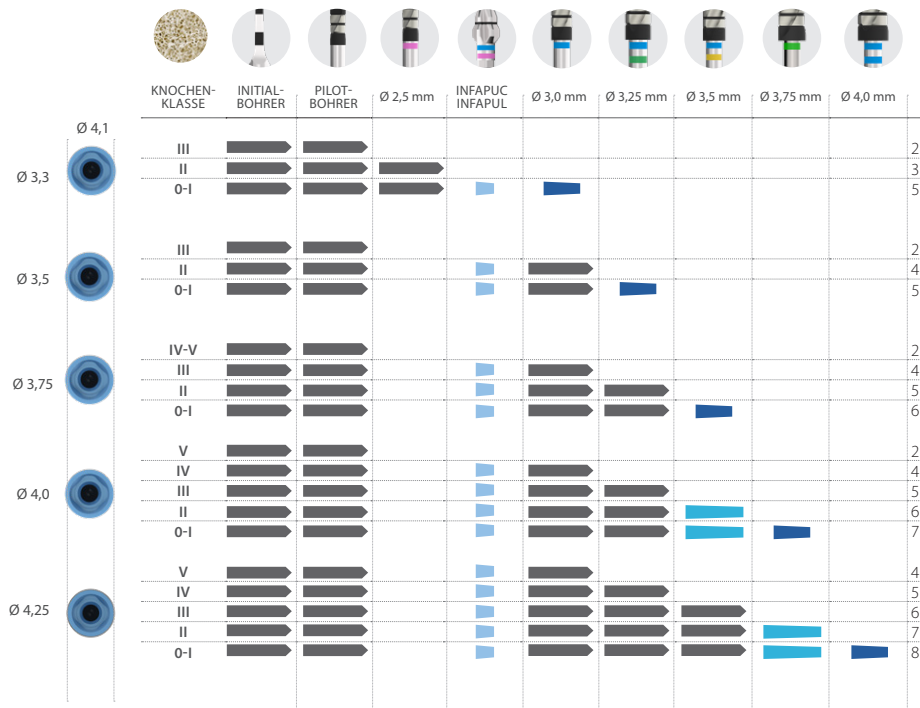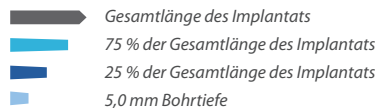


Bohrsequenzen
Empfohlene



Implantate

(Länge von 5,5 bis 8,5 mm)


 Gesamtlänge des Implantats
 Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers
 5,0 mm Bohrtiefe
 2-3 mm Bohrtiefe

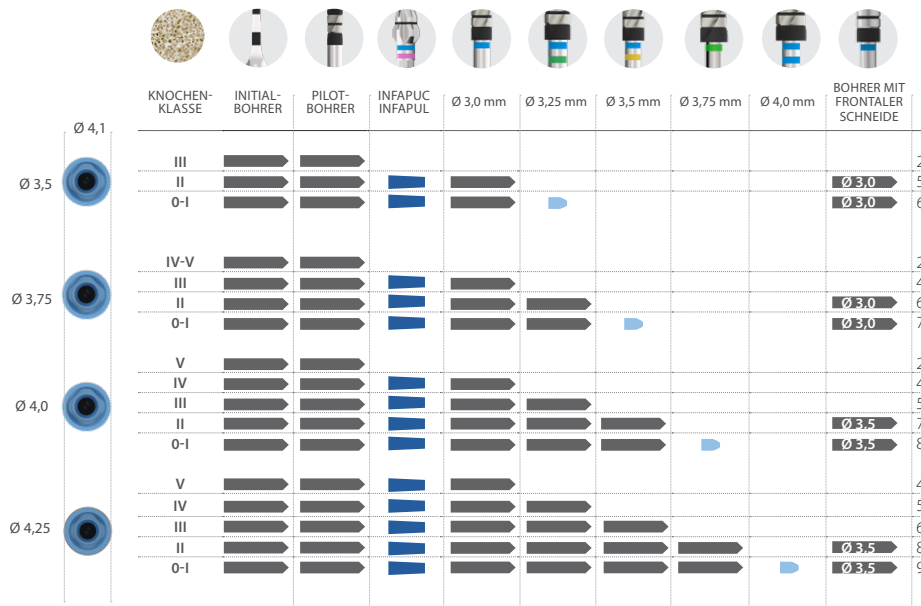

Implantate

(Länge von 8,5 bis 15 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 6,5 mm Bohrtiefe
 3 mm Bohrtiefe

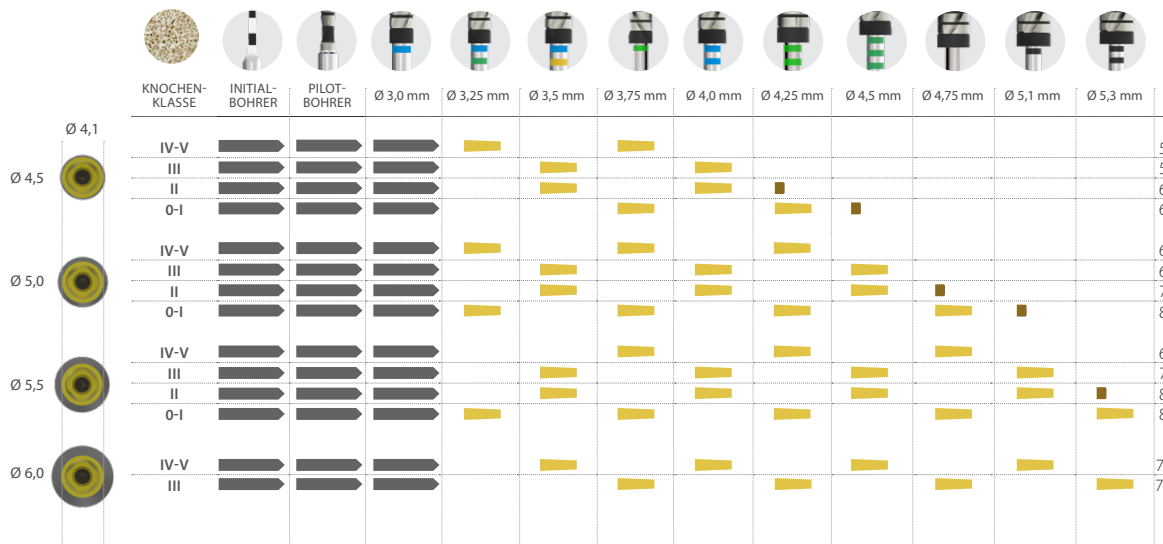

Implantate

(Länge von 4,5 bis 7,5 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers
 3 mm Bohrtiefe

