



Secuencias de fresado recomendadas

para implantes de BTI Interna



NOTA: Consulte disponibilidad del producto en los diferentes mercados con su distribuidor.

Marcas de profundidad de fresado

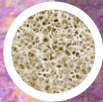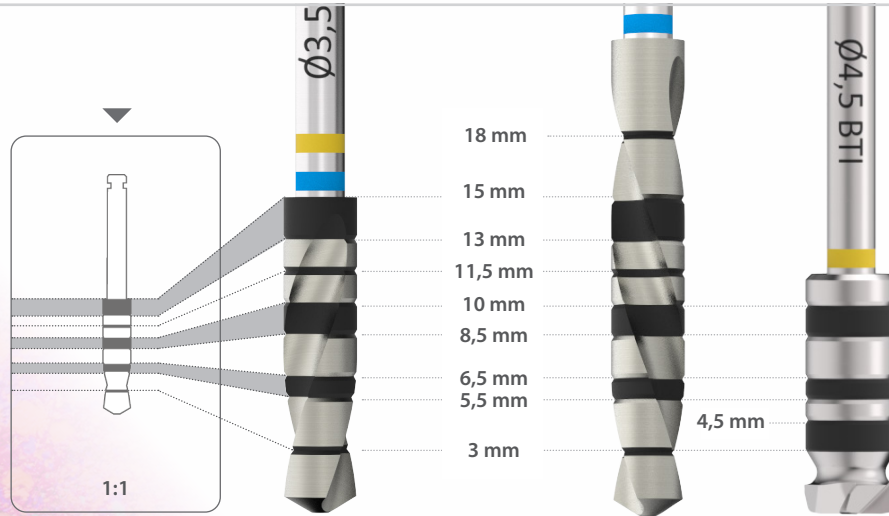

TIPO / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

FRESA

Fresa de inicio
Fresas
Fresas avellanado
Fresas corte frontal

VELOCIDAD

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm


IRRIGACIÓN

sí
no
no
no

Implantes longitud

(desde 6,5 hasta 13 mm)


Longitud total del implante
6,5 mm de profundidad de fresado
2-3 mm de profundidad de fresado

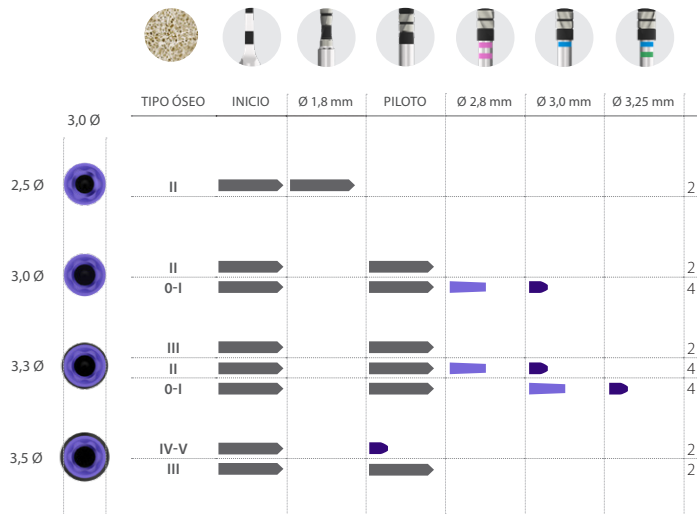

Implantes longitud

(desde 4,5 hasta 5,5 mm)


Longitud total del implante
 2-3 mm de profundidad de fresado

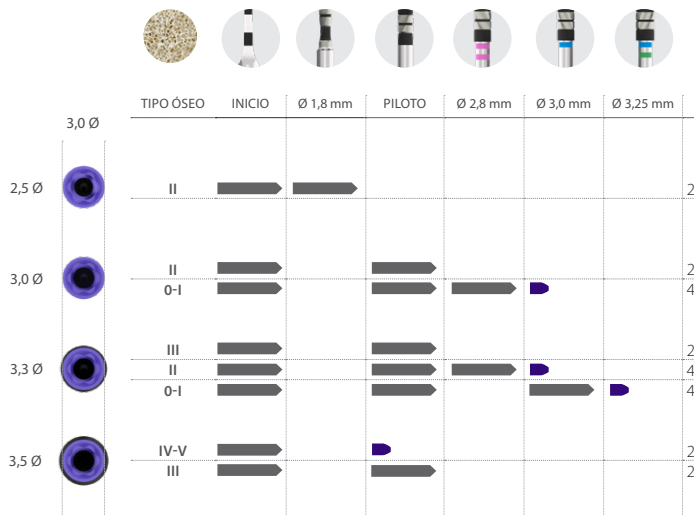

Implantes longitud

(desde 7,5 hasta 15 mm)


Longitud total del implante
6,5 mm de profundidad de fresado
2-3 mm de profundidad de fresado

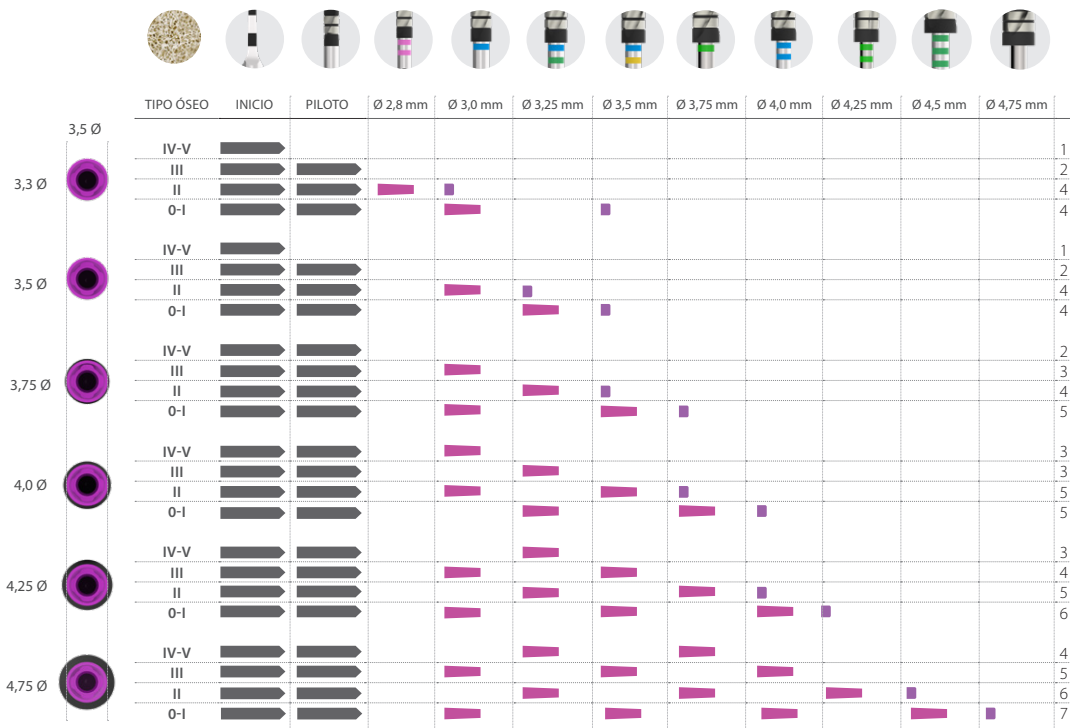

Implantes longitud

(desde 4,5 hasta 6,5 mm)


Longitud total del implante
X,X Ø Longitud total del implante con fresa del diámetro especificado
2-3 mm de profundidad de fresado

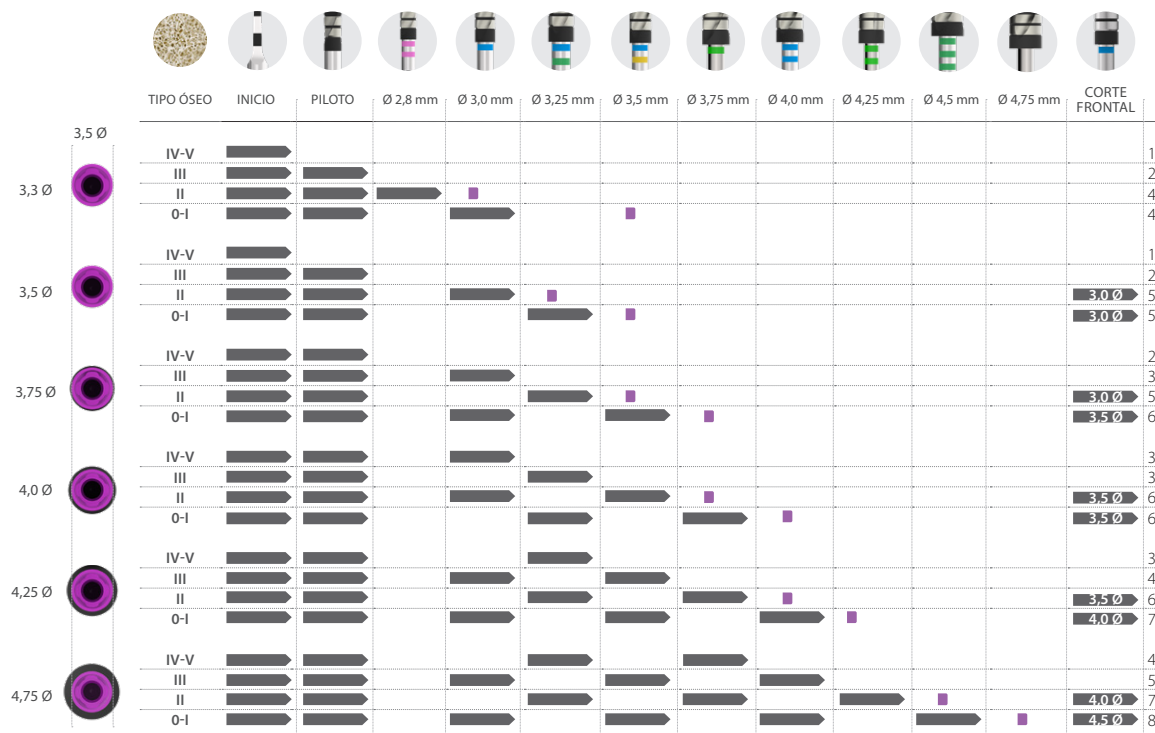

Implantes longitud

(desde 6,5 hasta 13 mm)

Longitud total del implante
5,5 mm de profundidad de fresado
2-3 mm de profundidad

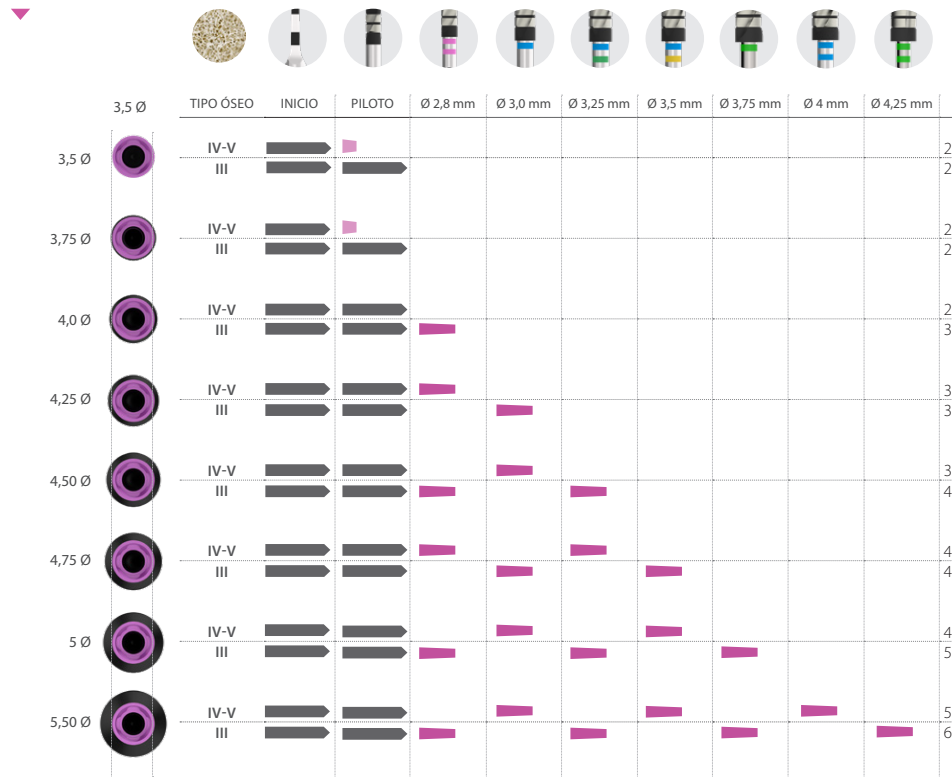

IMPORTANTE:
Secuencia de fresado
válida únicamente para
el implante CORE-X


fresado
Secuencias de



Implantes longitud

(4,5 - 5,5 mm)

Longitud total del implante
2-3 mm de profundidad

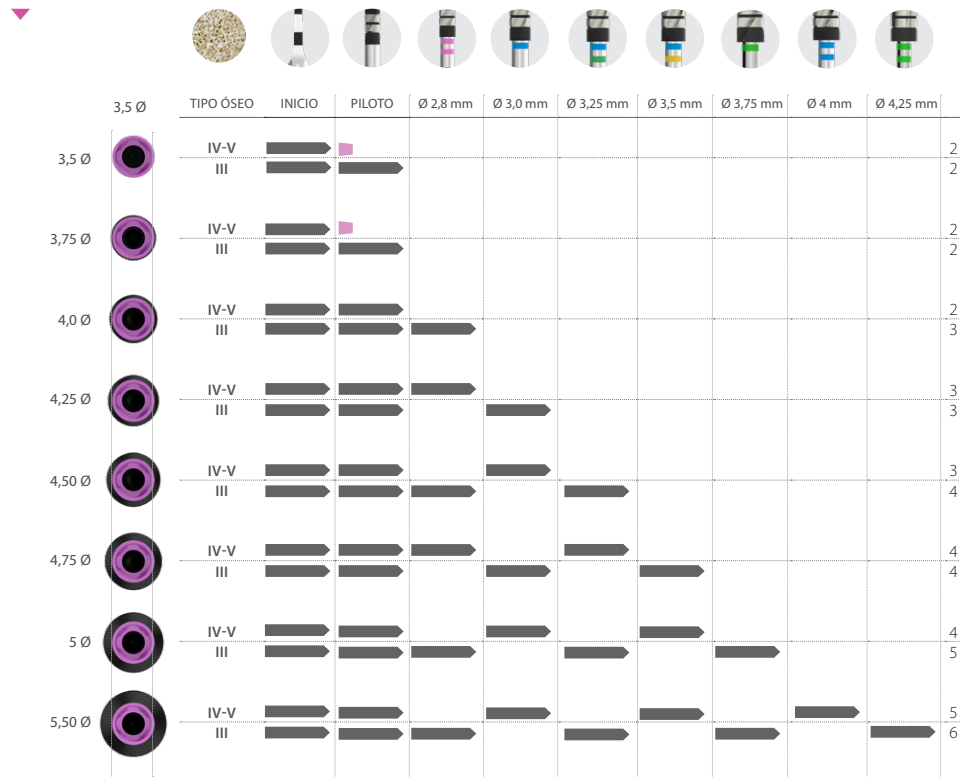

IMPORTANTE:



Secuencia de fresado
válida únicamente para
el implante CORE-X

fresado
Secuencias de



Implantes longitud


(desde 10 hasta 15 mm)

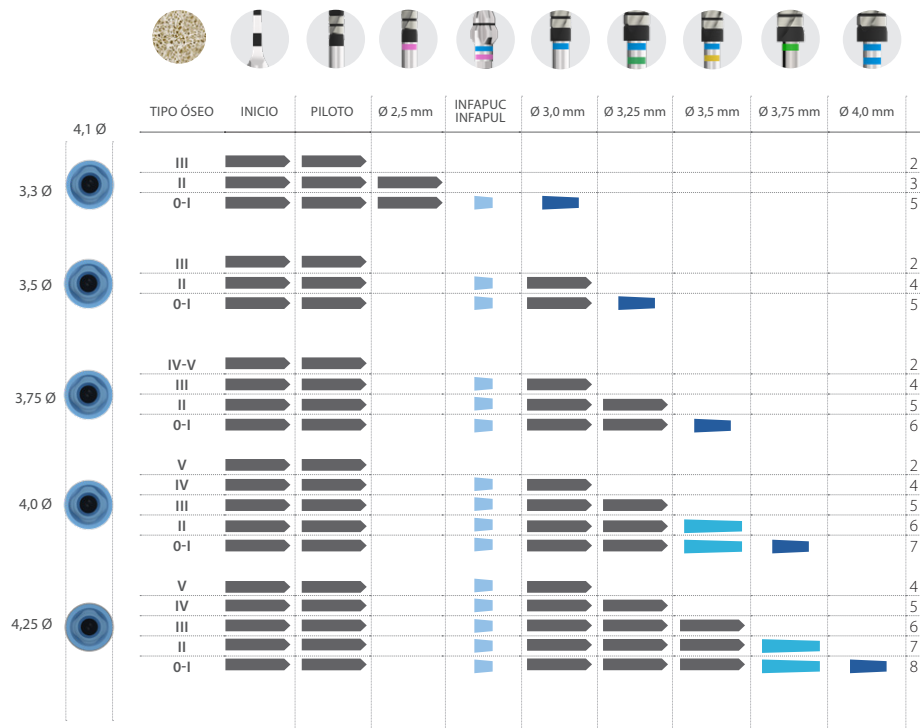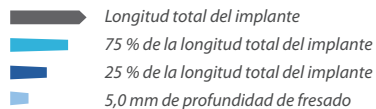

Implantes longitud

(desde 5,5 hasta 8,5 mm)

- Longitud total del implante
- X,X Ø Longitud total del implante con fresa del diámetro especificado
- 5,0 mm de profundidad de fresado
- 2-3 mm de profundidad de fresado

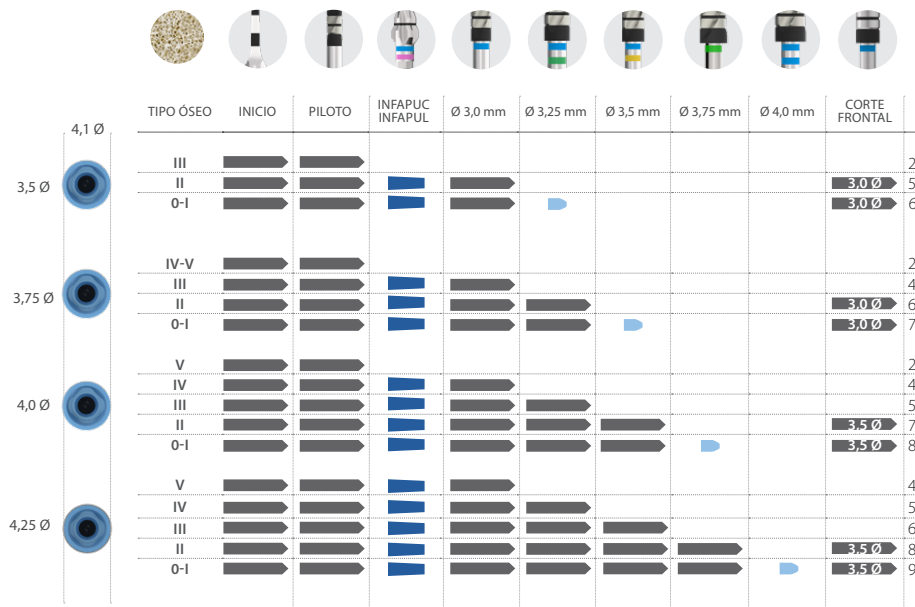




Implantes longitud

(desde 8,5 hasta 15 mm)



Longitud total del implante
6,5 mm de profundidad de fresado
3 mm de profundidad de fresado

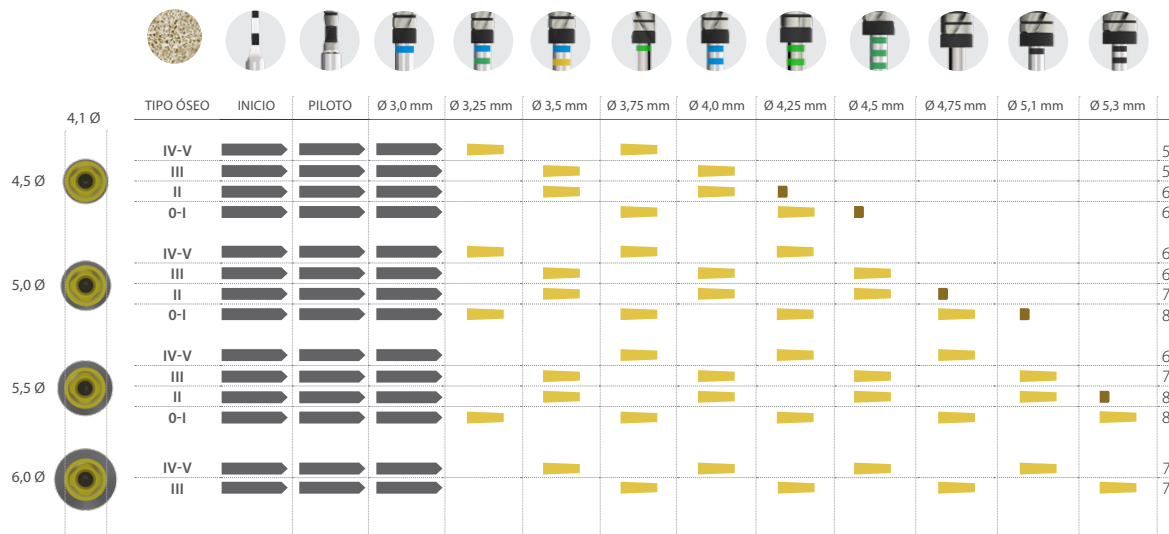




Plataforma Universal Plus

Ø4,1 mm diámetro de plataforma

Implantes longitud

(desde 4,5 hasta 7,5 mm)

- Longitud total del implante
- Longitud total del implante con fresa del diámetro especificado
- 3 mm de profundidad de fresado

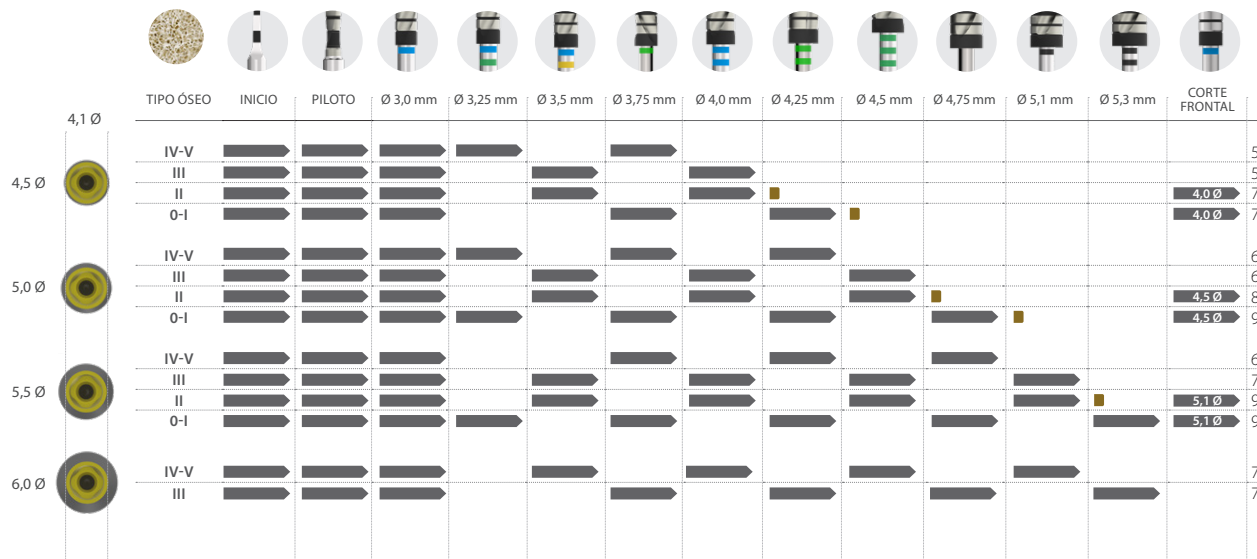

fresado
Secuencias de

