



Secuencias de fresado recomendadas

para implantes de BTI Interna



NOTA: Consulte disponibilidad del producto en los diferentes mercados con su distribuidor.

Marcas de profundidad de fresado

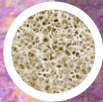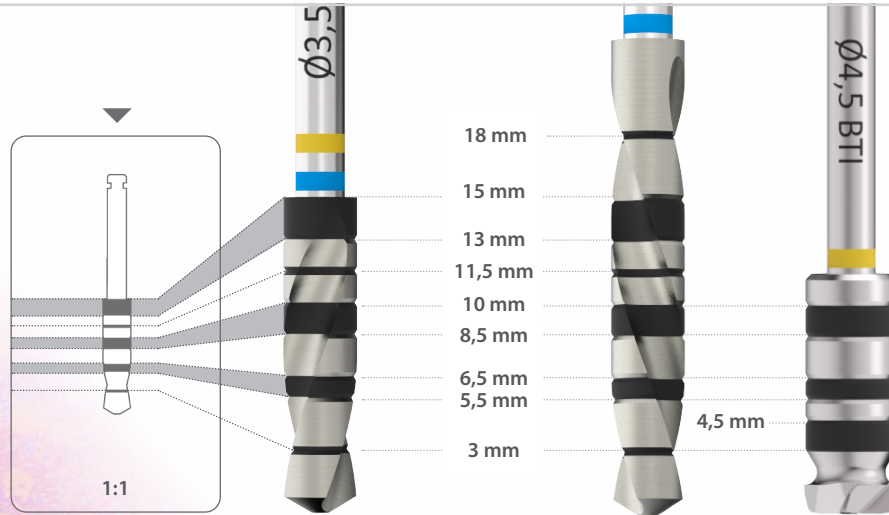

TIPO / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

FRESA

Fresa de inicio
Fresas
Fresas avellanado
Fresas corte frontal

VELOCIDAD

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

IRRIGACIÓN

sí
no
no
no

Implantes longitud

(desde 5,5 hasta 13 mm)

Longitud total del implante
Variable
2-3 mm de profundidad de fresado


LONGITUD IMPLANTE	2,5 Ø						
	TIPO ÓSEO	INICIO	Ø 1,8 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,2 mm	Ø 2,3 mm	Ø 2,4 mm
5,5 - 6,5 - 7,5 mm	III						2
	II			5,5 mm			3
	0-I			5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	6
8,5 - 10 mm	III						2
	II			6,5 mm			3
	0-I			6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6
11,5 - 13 mm	III						2
	II			8,5 mm			3
	0-I			8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	6



Implantes longitud

(desde 7,5 hasta 13 mm)


Longitud total del implante
6,5 mm de profundidad de fresado
2-3 mm de profundidad de fresado

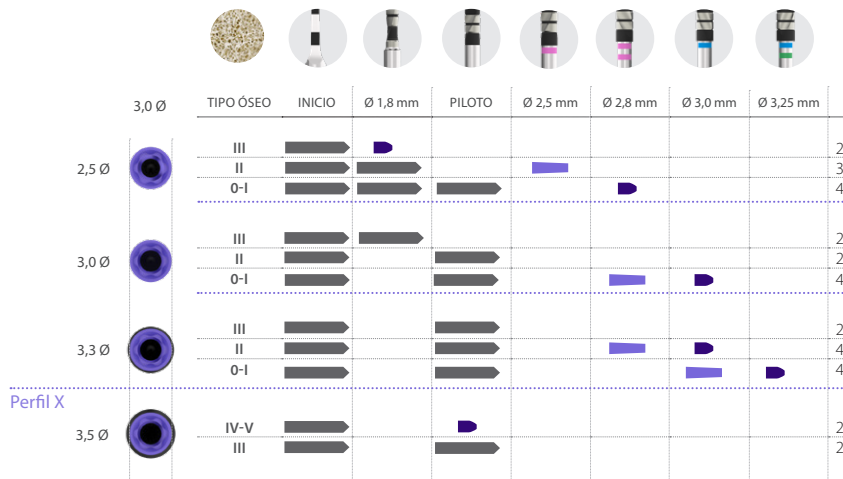

Implantes longitud

(desde 4,5 hasta 6,5 mm)

- Longitud total del implante
- X,X Ø Longitud total del implante con fresa del diámetro especificado
- 2-3 mm de profundidad de fresado
- 2-3 mm de profundidad de fresado. Solo para implantes de 6,5 mm

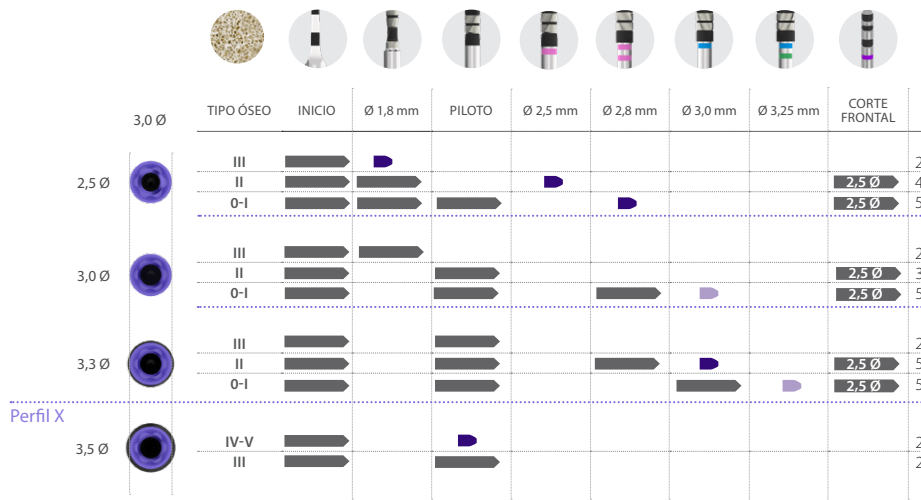




Implantes longitud

(desde 7,5 hasta 15 mm)




 Longitud total del implante
 6,5 mm de profundidad de fresado
 2-3 mm de profundidad de fresado

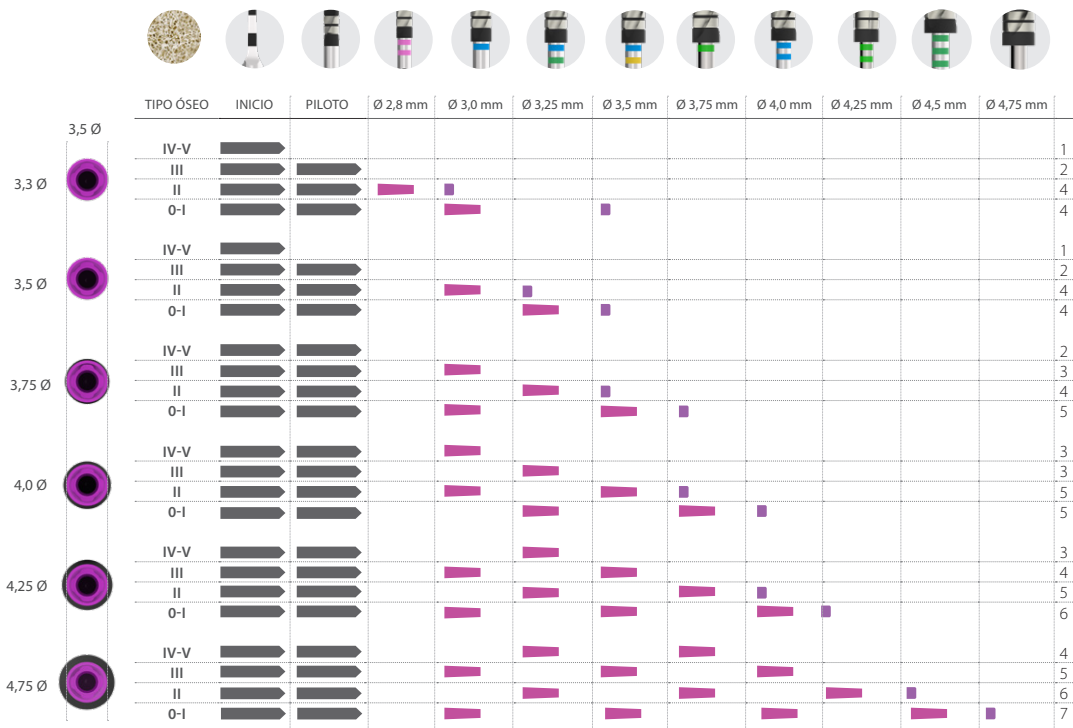

Implantes longitud

(desde 4,5 hasta 6,5 mm)


 Longitud total del implante
 X,X Ø Longitud total del implante con fresa del diámetro especificado
 2-3 mm de profundidad de fresado

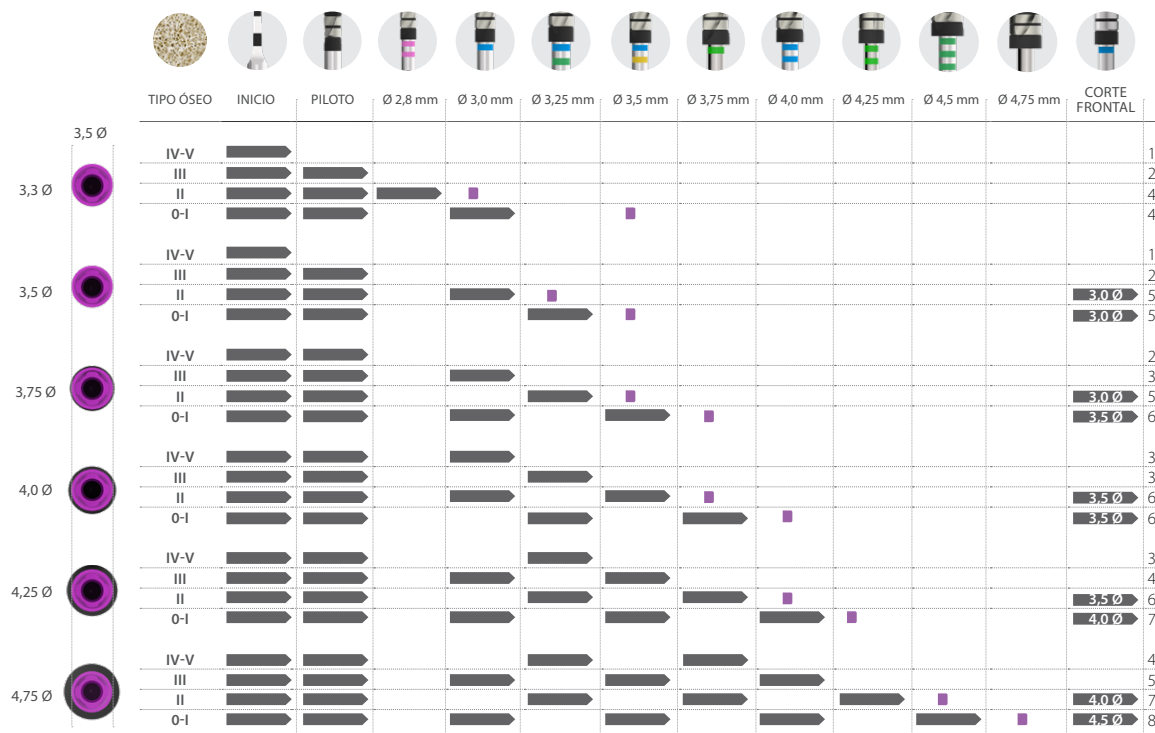

Implantes longitud

(desde 6,5 hasta 13 mm)

Longitud total del implante
5,5 mm de profundidad de fresado
2-3 mm de profundidad

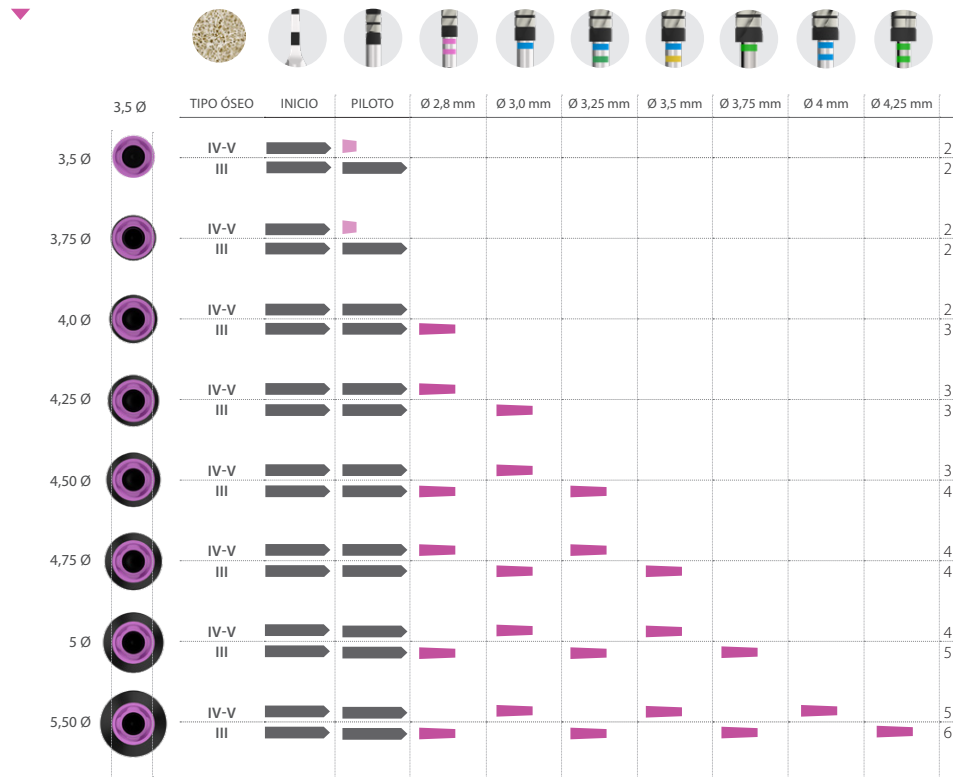

IMPORTANTE:

Secuencia de fresado
válida únicamente para
el implante CORE-X

fresado
Secuencias de



Plataforma Estrecha / CORE-X




Ø3,5 mm diámetro de plataforma

Implantes longitud

(4,5 - 5,5 mm)

Longitud total del implante
2-3 mm de profundidad

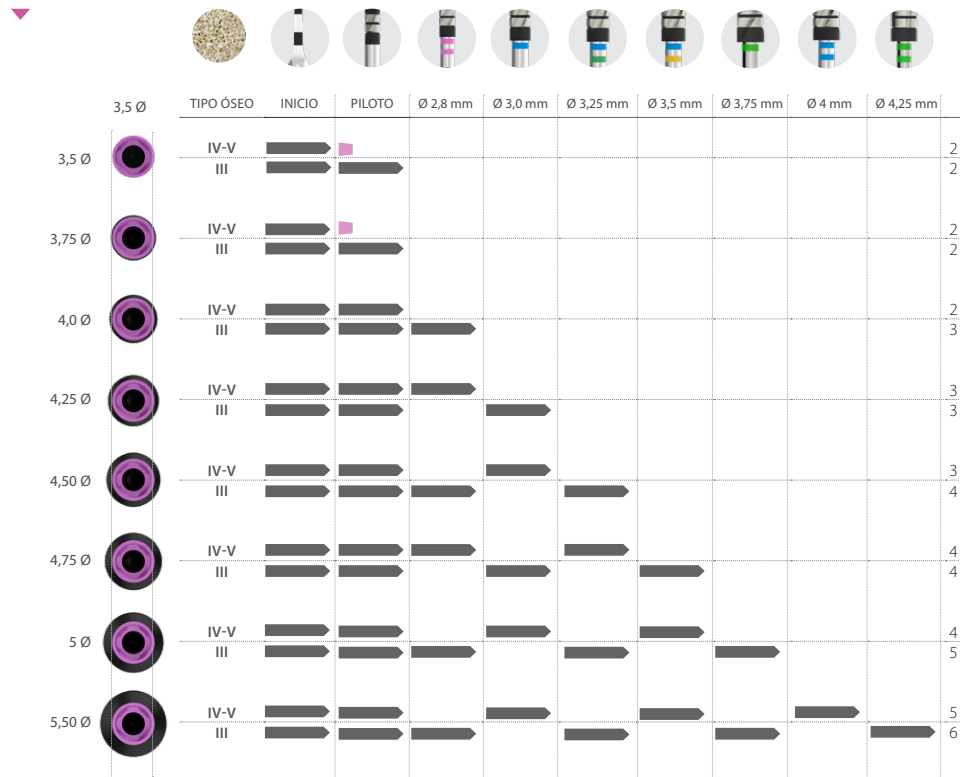

IMPORTANTE:



Secuencia de fresado
válida únicamente para
el implante CORE-X

fresado
Secuencias de



Implantes longitud


(desde 10 hasta 15 mm)

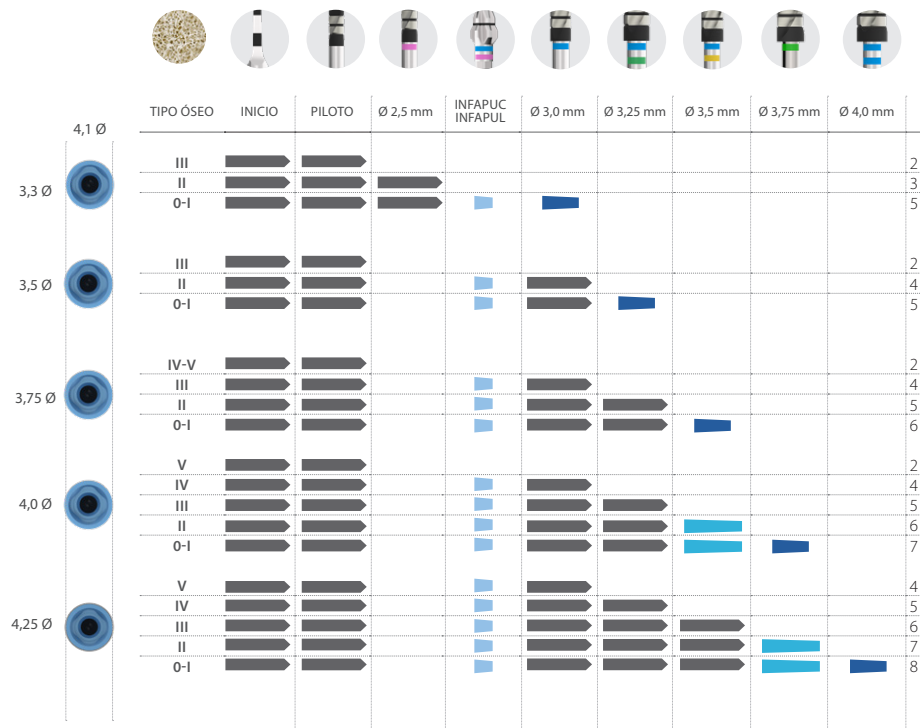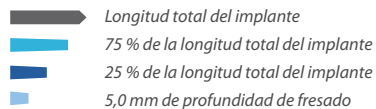

Implantes longitud

(desde 5,5 hasta 8,5 mm)

- Longitud total del implante
- X,X Ø Longitud total del implante con fresa del diámetro especificado
- 5,0 mm de profundidad de fresado
- 2-3 mm de profundidad de fresado

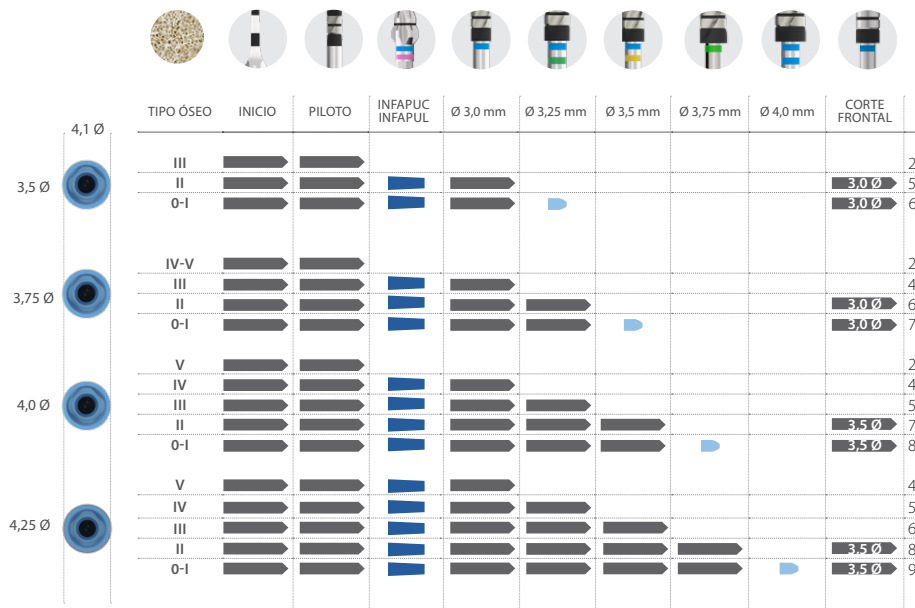




Implantes longitud

(desde 8,5 hasta 15 mm)



Longitud total del implante
6,5 mm de profundidad de fresado
3 mm de profundidad de fresado

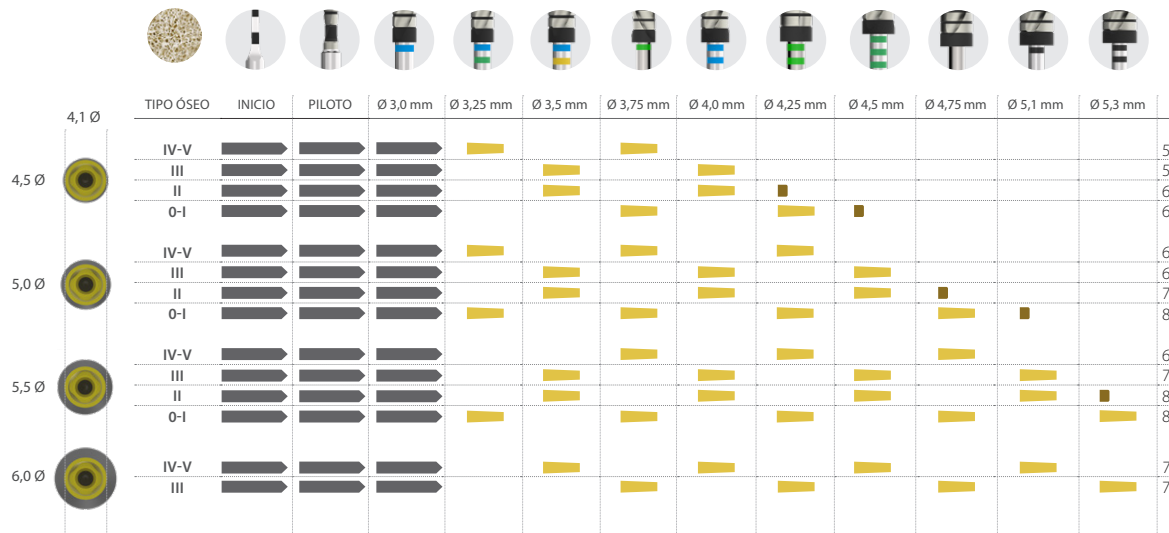



Implantes longitud

(desde 4,5 hasta 7,5 mm)

Longitud total del implante
Longitud total del implante con fresa del diámetro especificado
3 mm de profundidad de fresado

