



Soovitav puurimisjärjestuse juhend

Interna BTI implantaatidele



MÄRKUS: Kontrollige toote kättesaadavust erinevatel turgudel oma turustajalt.

Puuri sügavuse märgid

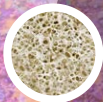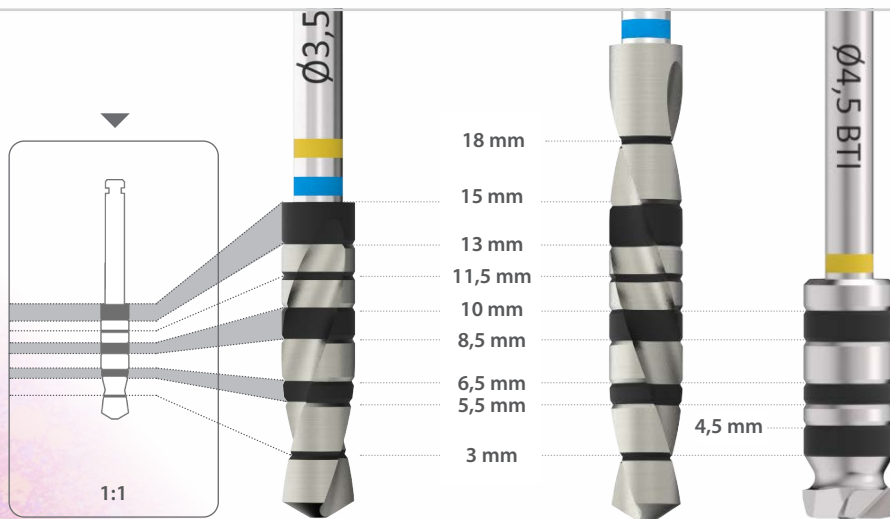

KLASS / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

PUUR

Initsiaalpuur
 Puur
 Süvistuspuur
 Esilõikepuurid

PÖÖRETE ARV


800 - 1.000 rpm
 50 - 75 rpm
 150 - 200 rpm
 50 - 75 rpm

NIISUTUS

jah
 nr
 nr
 nr

Implantaadi pikkused (6,5 - 13 mm)


Implantaadi kogupikkus
 6,5 mm puurimissügavus
 2-3 mm puurimissügavus

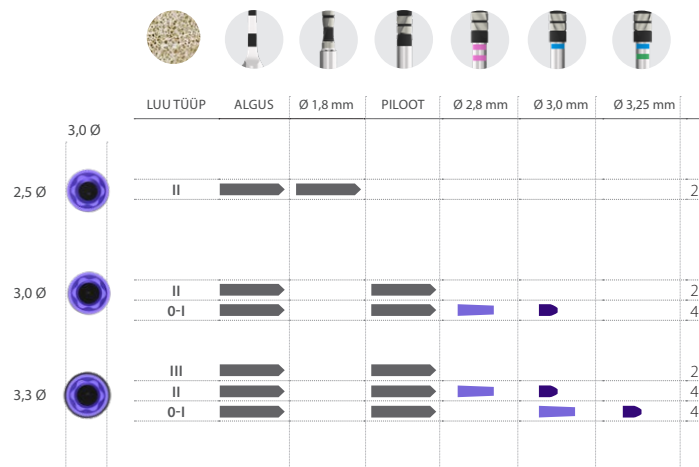

Implantaadi pikkused (4,5 - 5,5 mm)




Implantaadi kogupikkus
 2-3 mm puurimissügavus

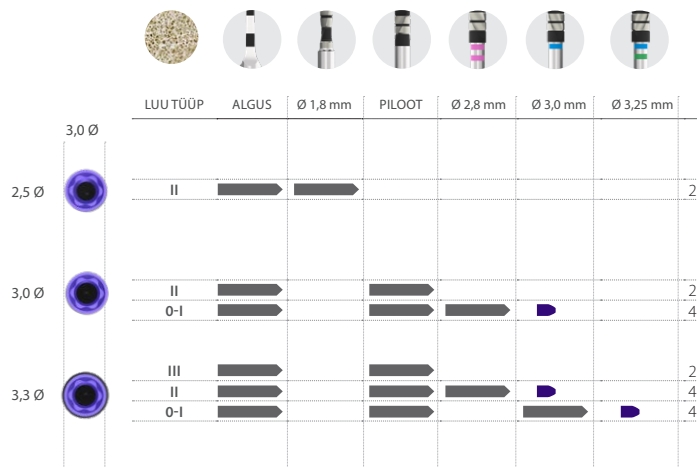


Implantaadi pikkused (7,5 - 15 mm)

Implantaadi kogupikkus
6,5 mm puurimissügavus
2-3 mm puurimissügavus

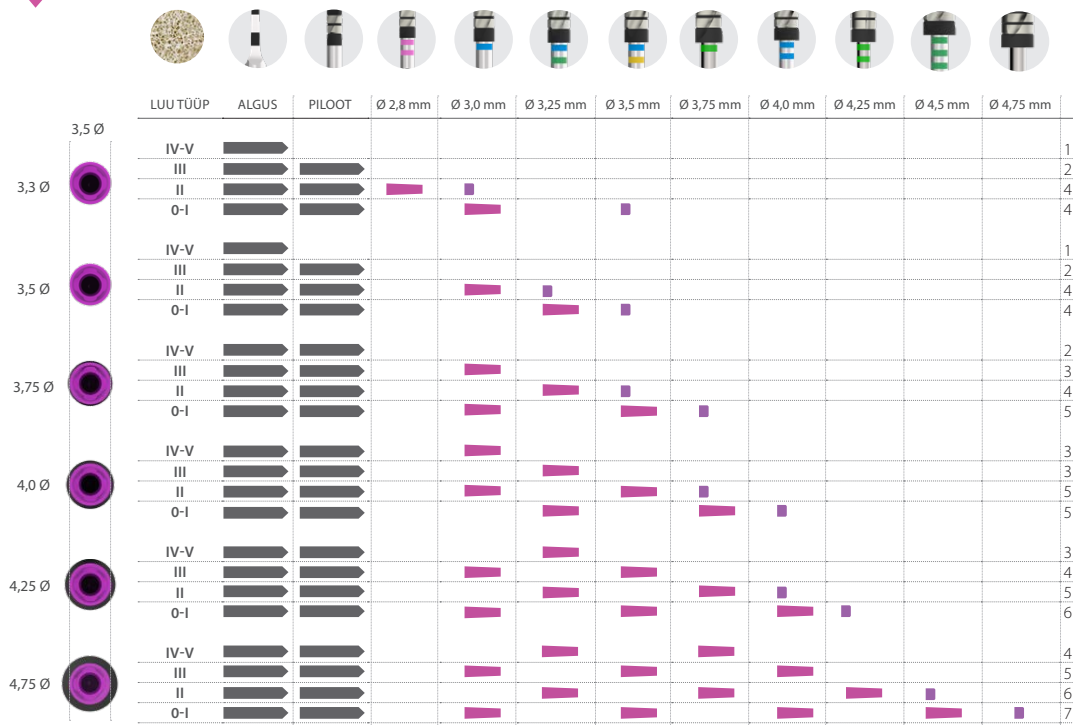


Implantaadi pikkused (4,5 - 6,5 mm)

Implantaadi kogupikkus
X.X Ø Implantaadi kogupikkus koos määratud puuri läbimõõduga
2-3 mm puurimisügavus

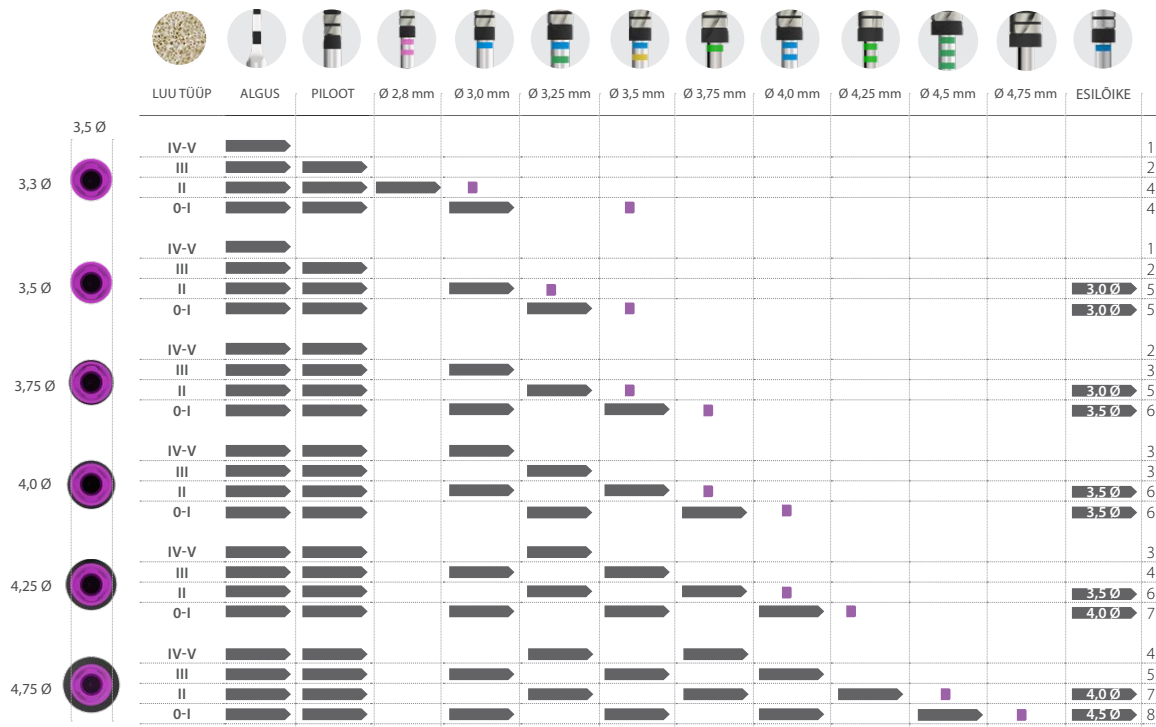

Implantaadi pikkused (6,5 - 13 mm)

Implantaadi kogupikkus
5,5 mm puurimissügavus

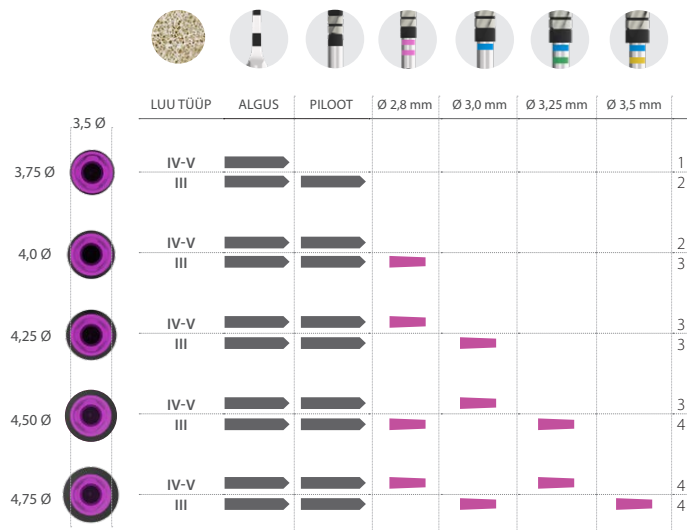


OLULINE:
freesimisjärjestus kehtib
ainult CORE-X® implantaatide
puhul

Puurimisjärjestuse
juhend

Implantaadi pikkused (4,5 - 5,5 mm)

Implantaadi kogupikkus

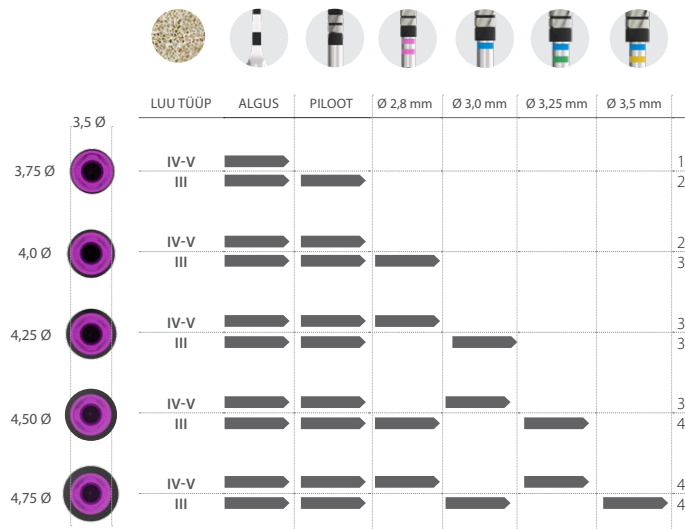


OLULINE:
freesimisjärjestus kehtib
ainult CORE-X® implantaatide
puhul

Puurimisjärjestuse juhend



Implantaadi pikkused (10 - 15 mm)


- Implantaadi kogupikkus
- 75 % of the Implantaadi kogupikkus
- 25 % of the Implantaadi kogupikkus
- 5,0 mm puurimissügavus

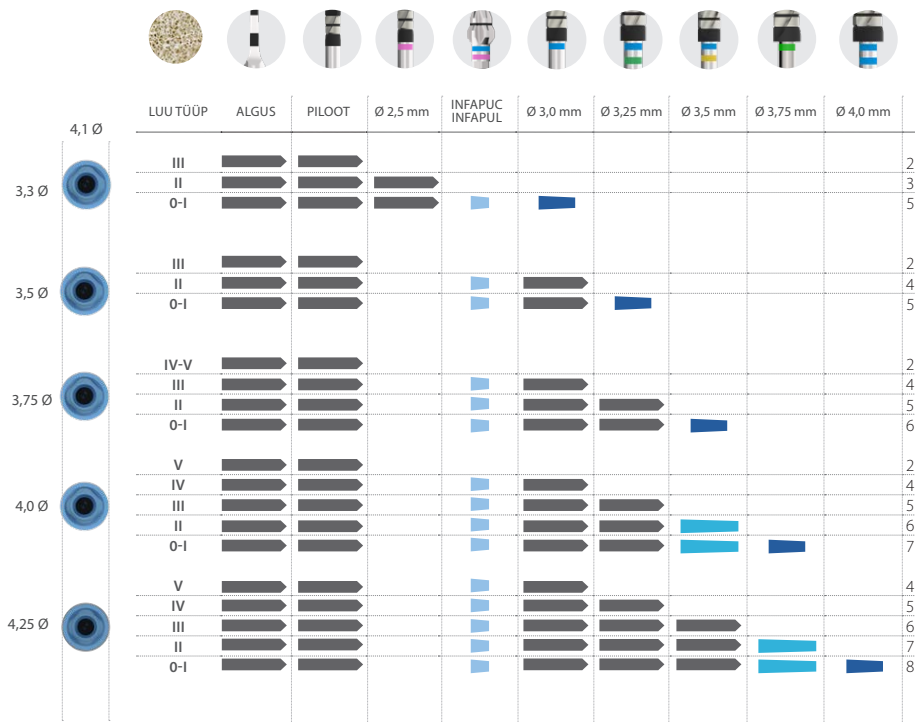

Puurimisjärjestuse juhend

Implantaadi pikkused (5,5 - 8,5 mm)


- Implantaadi kogupikkus
- X.X Ø Implantaadi kogupikkus koos määratud puuri läbimõõduga
- 5,0 mm puurimissügavus
- 2-3 mm puurimissügavus

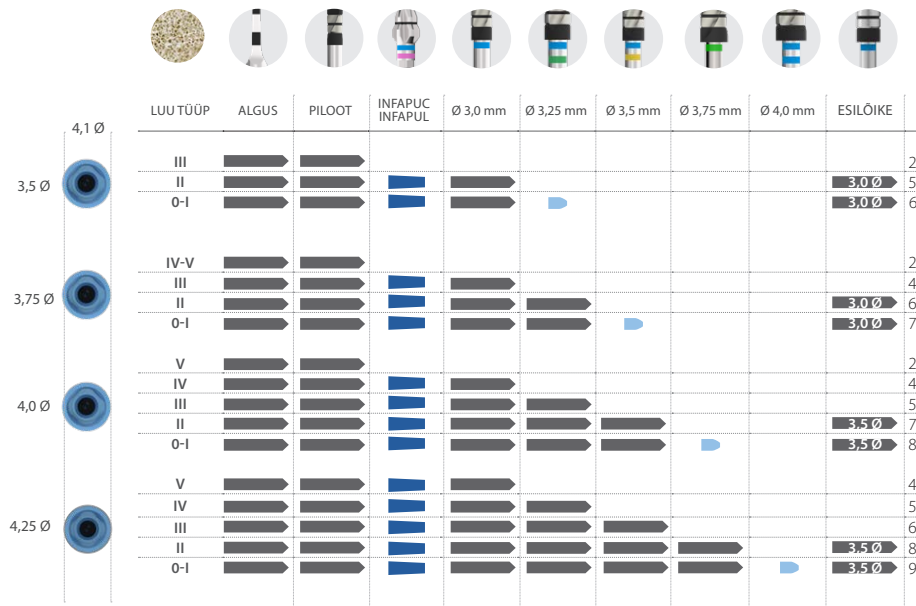

Implantaadi pikkused (8,5 - 15 mm)



Implantaadi kogupikkus
6,5 mm puurimissügavus
3 mm puurimissügavus

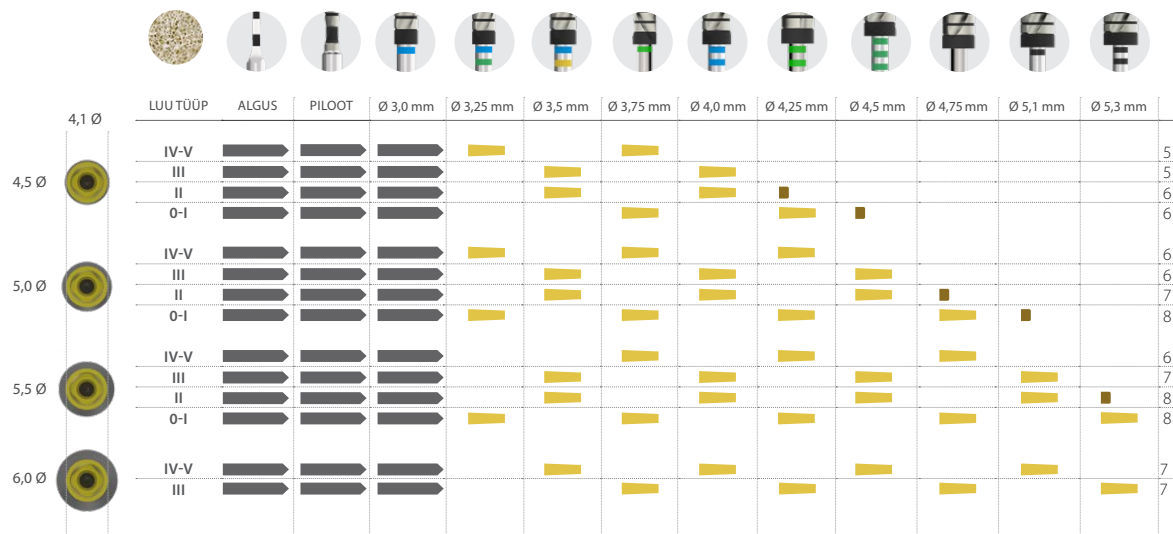

Implantaadi pikkused

(4,5 - 7,5 mm)

- Implantaadi kogupikkus
- X,X Ø Implantaadi kogupikkus koos määratud puuri läbimõõduga
- 3 mm puurimissügavus

