



Suositteltava poraus järjestysopas

Interna BTI-implanttien osalta



HUOMAUTUS: kysy jälleenmyyjältäsi tuotteen saatavuudesta eri markkinoilla

Poraussyvyyden merkit

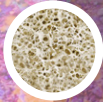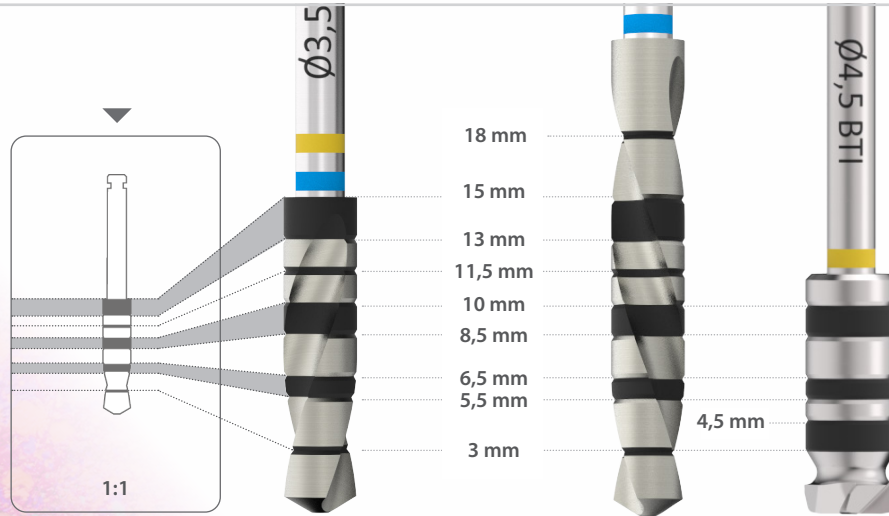

LUOKKA / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

PORA

Aloituspora
Pora
Upotusporat
Edestä leikkaavat porat

KIERROSNOPEUDET


800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

KASTELU

kyllä
ei
ei
ei

Implantin pituudet (6,5 - 13 mm)


Implantin kokonaispituus
Poraussyvyys 6,5 mm
Poraussyvyys 2-3 mm

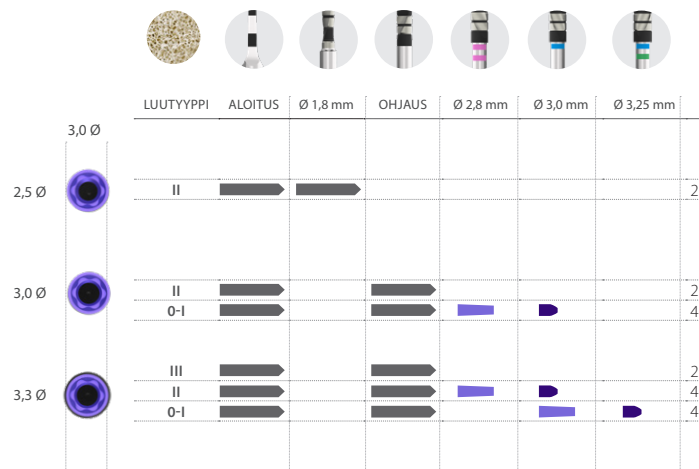

Implantin pituudet (4,5 - 5,5 mm)




Implantin kokonaispituus
Porausyvvyys 2-3 mm

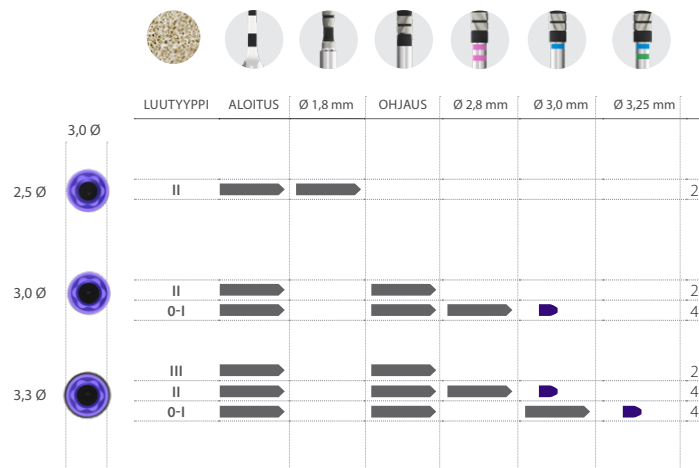


Implantin pituudet (7,5 - 15 mm)

Implantin kokonaispituus
Poraussyvyys 6,5 mm
Poraussyvyys 2-3 mm

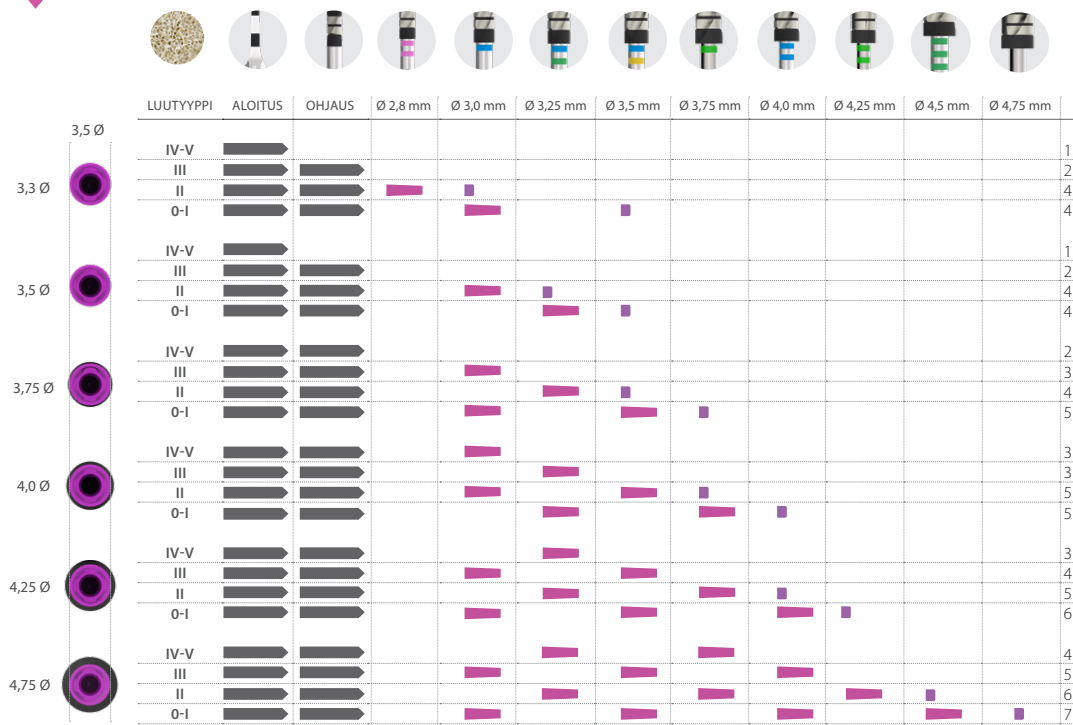


Implantin pituudet (4,5 - 6,5 mm)

Implantin kokonaispituus
X.X Ø Implantin kokonaispituus määritetyllä halkaisijalla
Poraussyvyys 2-3 mm

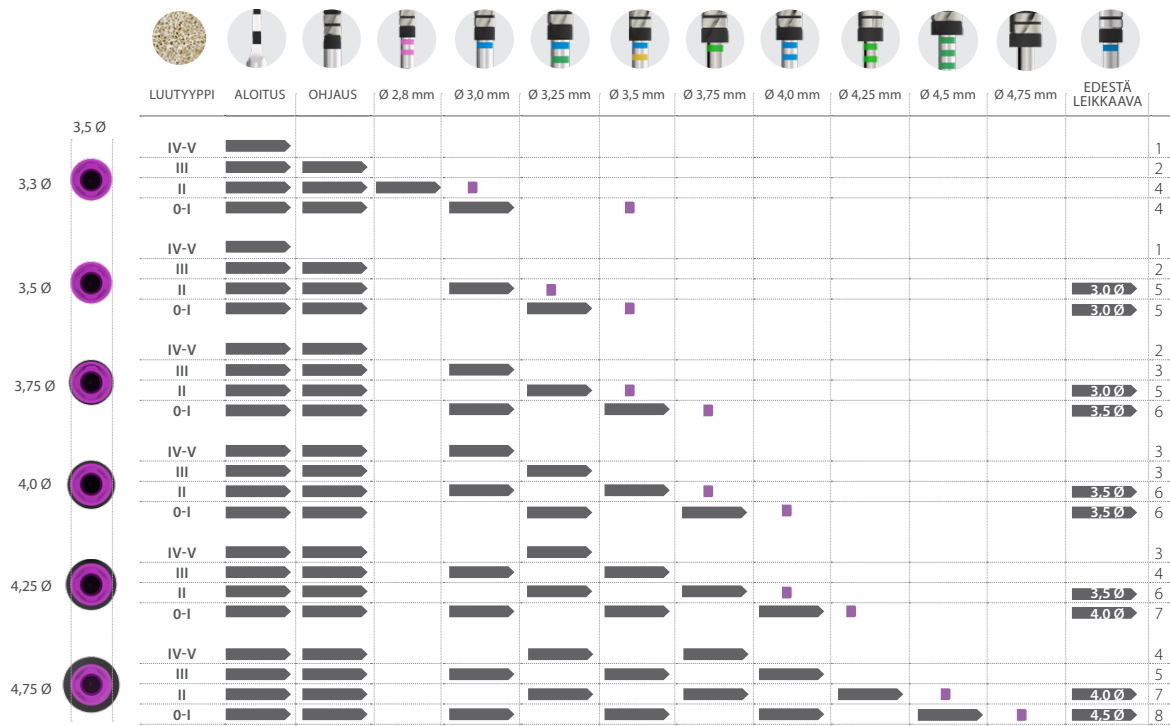

Implantin pituudet (6,5 - 13 mm)

Implantin kokonaispituus
Poraussyvyys 5,5 mm

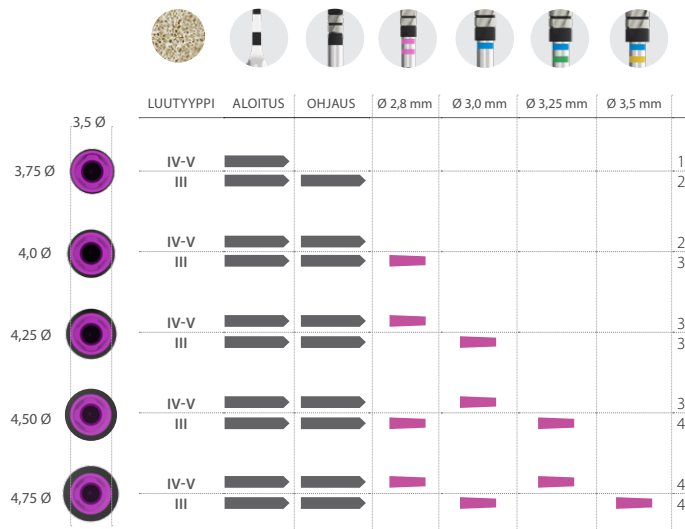


TÄRKEÄÄ:

Jyrsintäjärjestys koskee vain
CORE-X® -implantteja

opas Porausjärjestysten

Implantin pituudet (4,5 - 5,5 mm)

➡ Implantin kokonaispituus

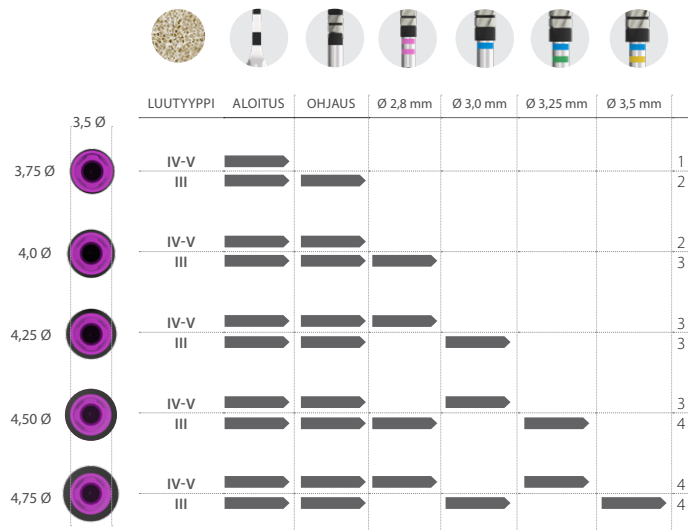


TÄRKEÄÄ:

Jyrsintäjärjestys koskee vain
CORE-X[®] -implantteja

Implantin pituudet (10 - 15 mm)


Implantin kokonaispituus
75 % implantin kokonaispituudesta
25 % implantin kokonaispituudesta
Poraussyvyys 5,0 mm

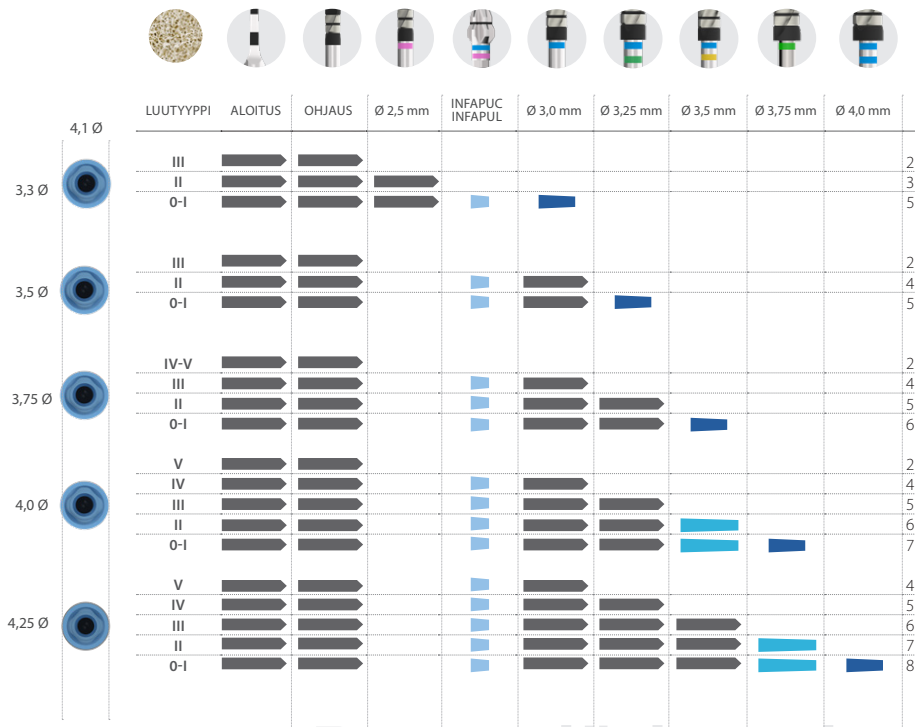

opas Porausjärjestyksen

Implantin pituudet (5,5 - 8,5 mm)


- Implantin kokonaispituus
- Implantin kokonaispituus määritetyllä halkaisijalla
- Poraussyvyys 5,0 mm
- Poraussyvyys 2-3 mm

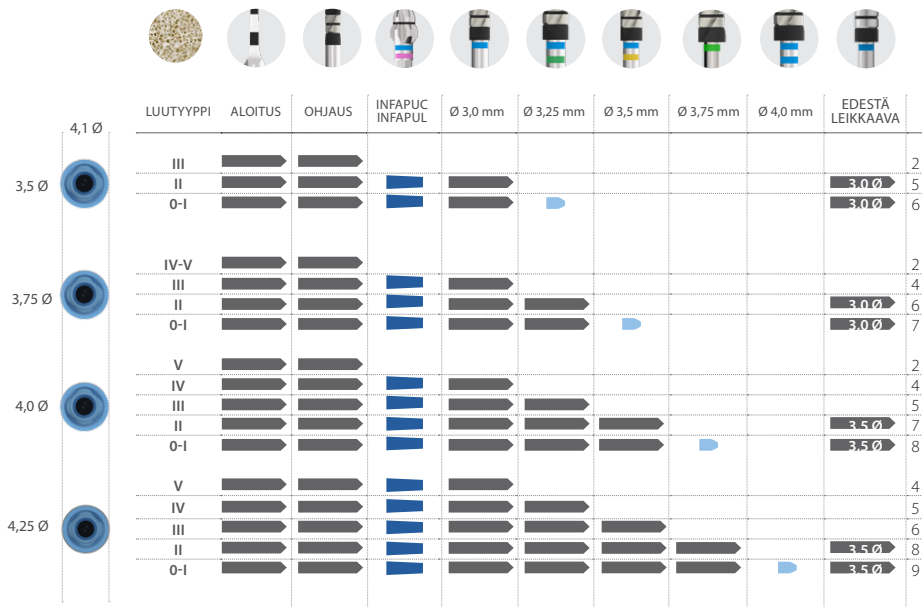

Implantin pituudet (8,5 - 15 mm)



Implantin kokonaispituus
Poraussyvyys 6,5 mm
Poraussyvyys 3 mm

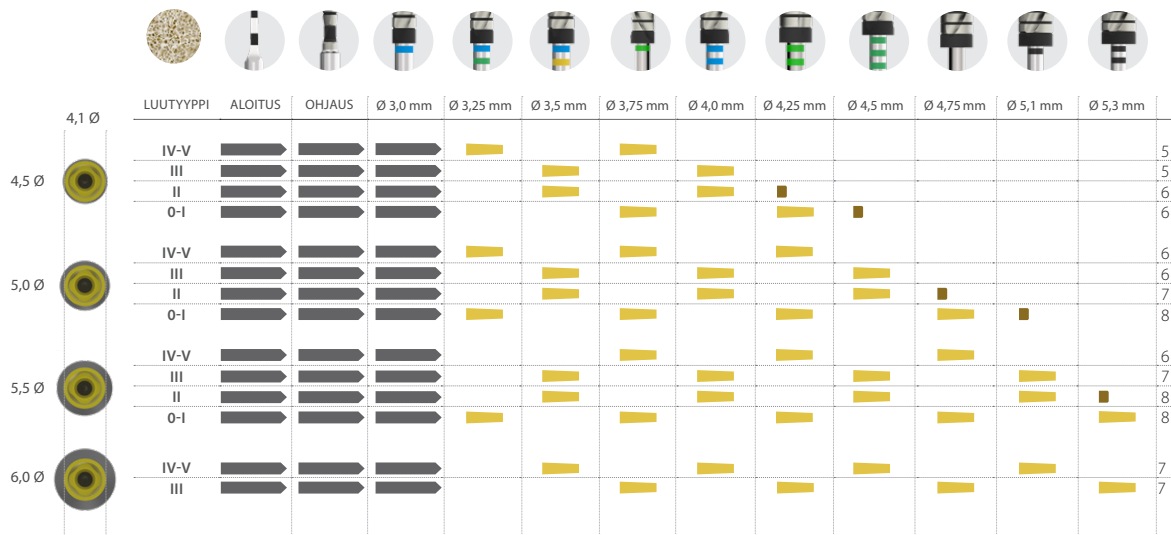

Implantin pituudet (4,5 - 7,5 mm)



- Implantin kokonaispituus
- X,X Ø Implantin kokonaispituus määritetyllä halkaisijalla
- Porausvyövyys 3 mm

