



Útmutató az ajánlott fúrási lépésekről

az Interna BTI implantátumokhoz



MEGJEGYZÉS: a termék elérhetőségéről a különböző piacokon érdeklődjön a forgalmazónál

Fúrásmélység-jelek

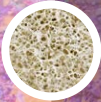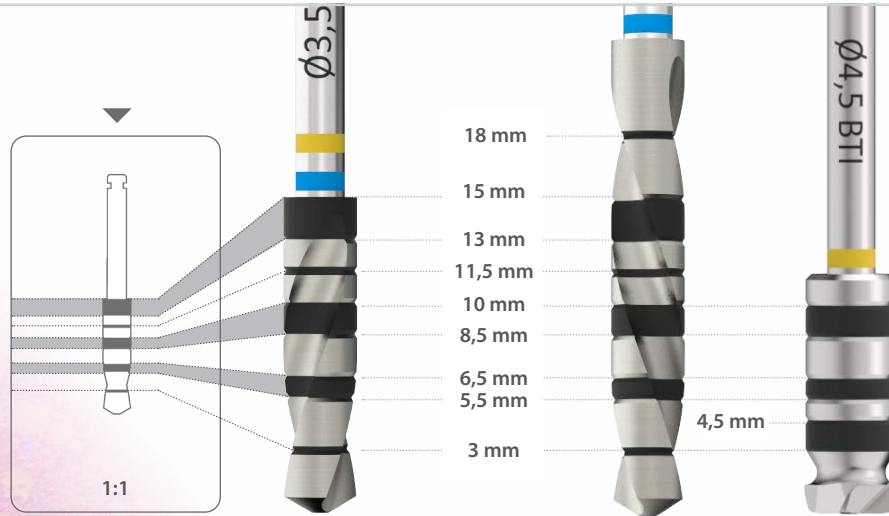

BESOROLÁS / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

FÚRÓ

Előfúró
Fúró
Marófúró
Vágóéles fúrók

FORDULAT

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm


ÖBLÍTÉS

igen
nem
nem
nem

Implantátum hossza

(6,5 - 13 mm)

 Az implantátum teljes hossza
 6,5 mm-es fúrásmélység
 2-3 mm-es fúrásmélység

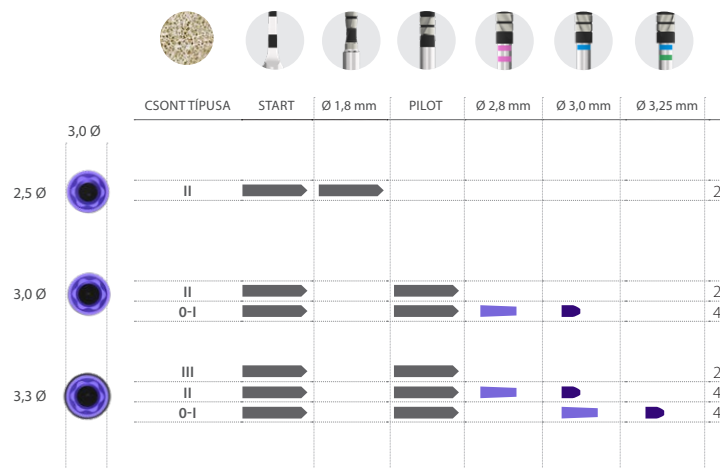


fúrási lépésekhez
Útmutató a

Implantátum hossza

(4,5 - 5,5 mm)



 Az implantátum teljes hossza
 2-3 mm-es fúrásmélység

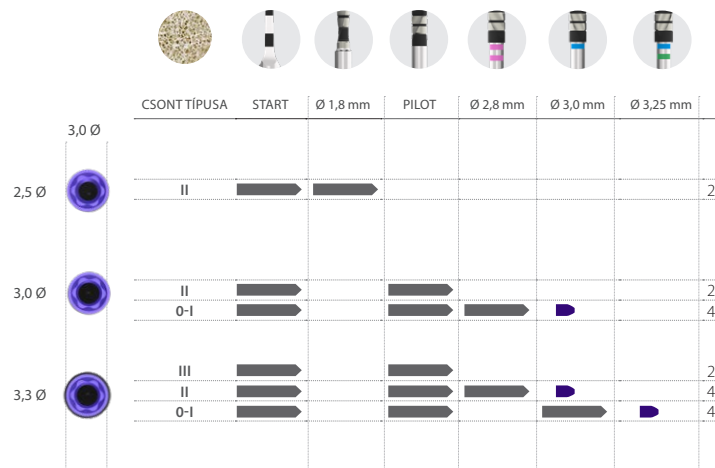


fúrási lépésekhez
Útmutató a



Implantátum hossza

(7,5 - 15 mm)

 Az implantátum teljes hossza
 6,5 mm-es fúrásmélység
 2-3 mm-es fúrásmélység

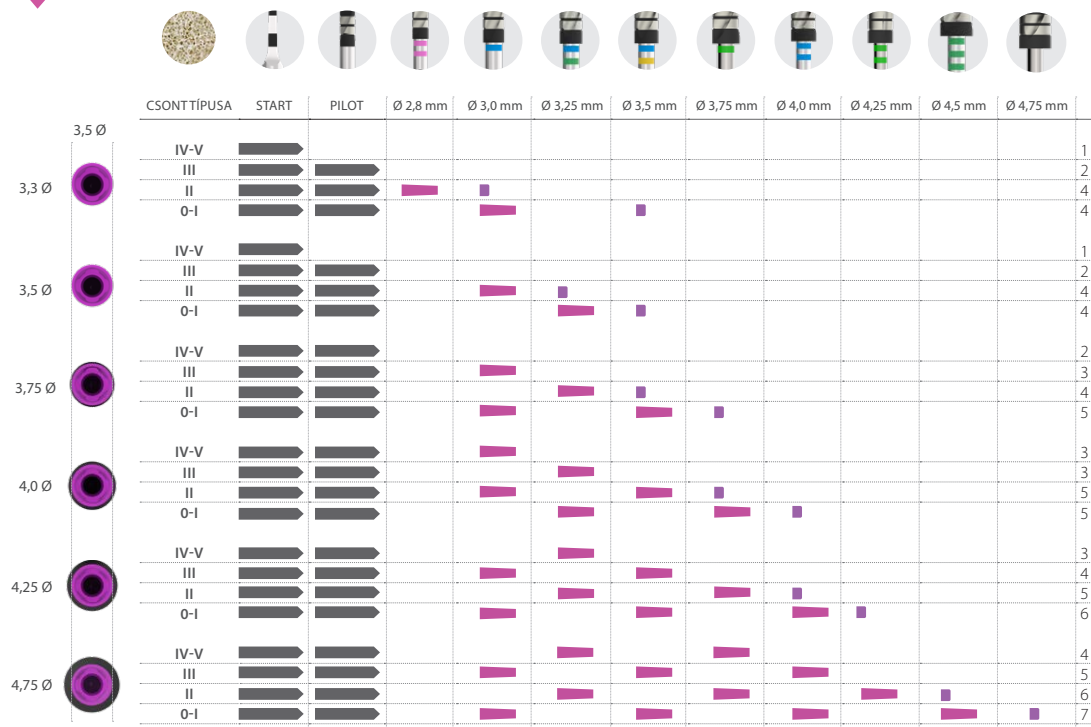


fúrási lépésekhez
Útmutató a



Implantátum hossza (4,5 - 6,5 mm)

- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hossza a megadott átmérőjű fúróval
- 2-3 mm-es fúrásmélység

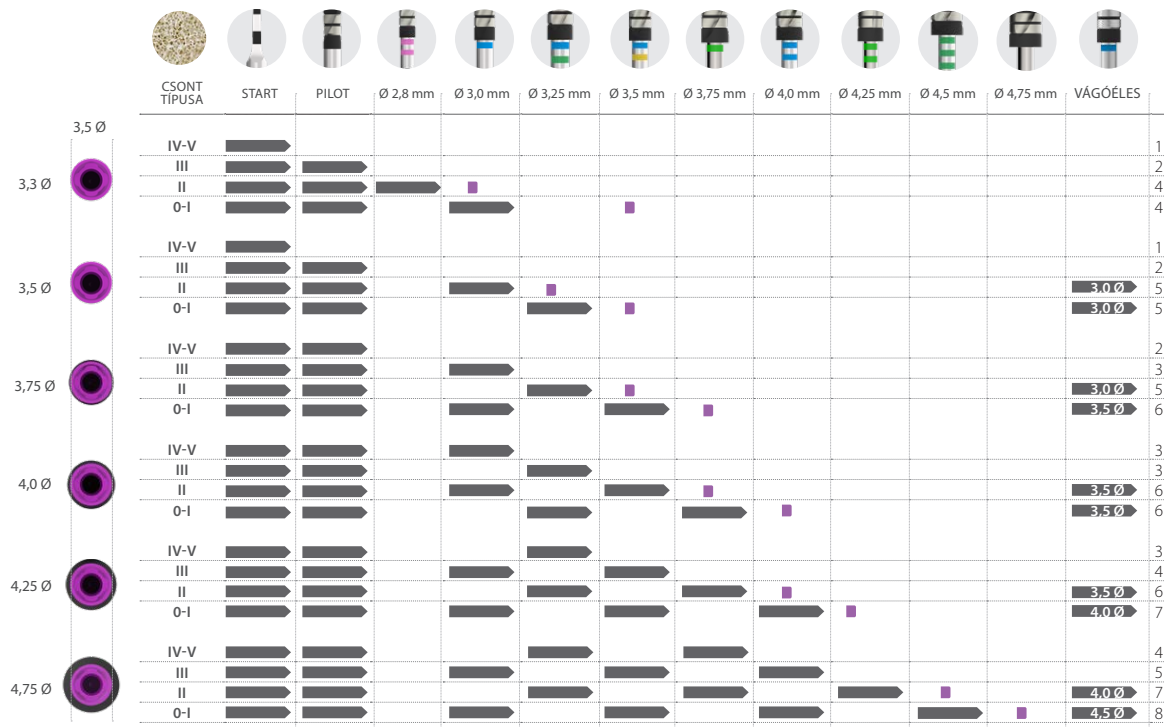


Keskeny/CORE Platform
Platform átmérője Ø3-5 mm

fúrási lépésekhez
Útmutató a

Implantátum hossza (6,5 - 13 mm)

 Az implantátum teljes hossza
 5,5 mm-es fúrásmélység

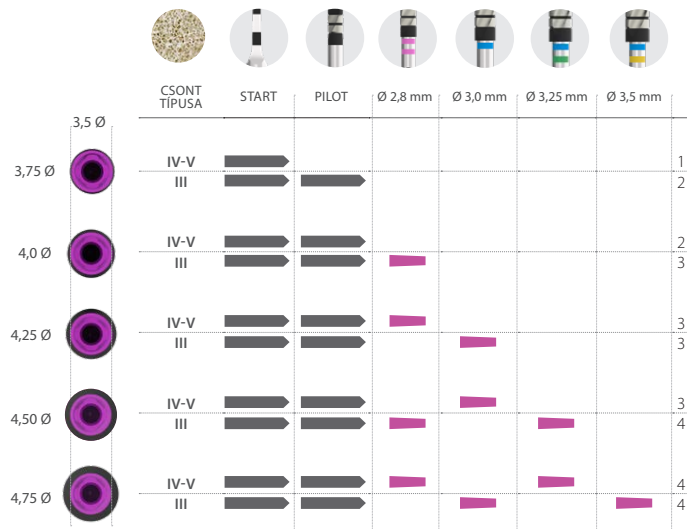


FONTOS:
A marási sorrend csak
CORE-X® implantátumokra
érvényes

fúrási lépésekhez
Útmutató a

Implantátum hossza

(4,5 - 5,5 mm)

➡ Az implantátum teljes hossza

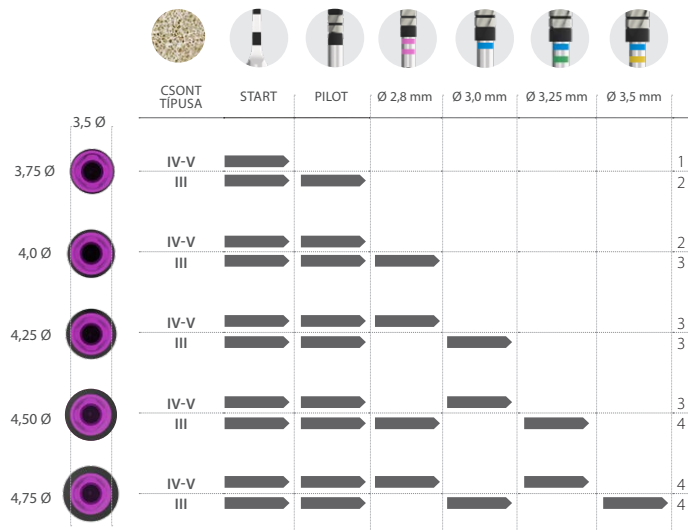

FONTOS:

A marási sorrend csak
CORE-X® implantátumokra
érvényes


fúrási lépésekhez
Útmutató a



Implantátum hossza

(10 - 15 mm)

- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hosszának 75%-a
- Az implantátum teljes hosszának 25%-a
- 5,0 mm-es fúrásmélység

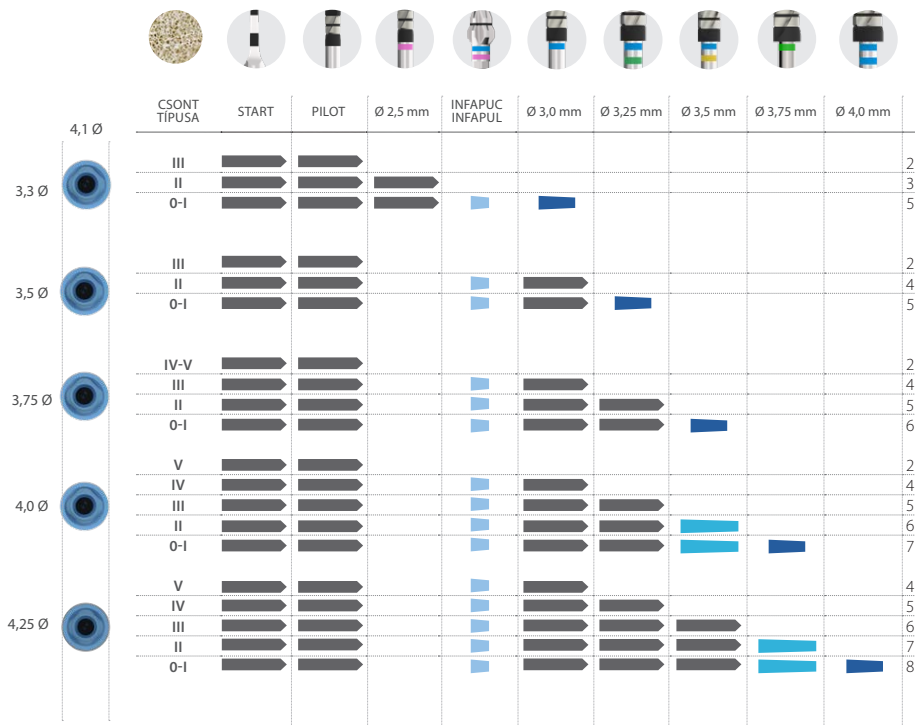


Útmutató a fúrási lépésekhez

Implantátum hossza

(5,5 - 8,5 mm)

- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hossza a megadott átmérőjű fúróval
- 5,0 mm-es fúrásmélység
- 2-3 mm-es fúrásmélység

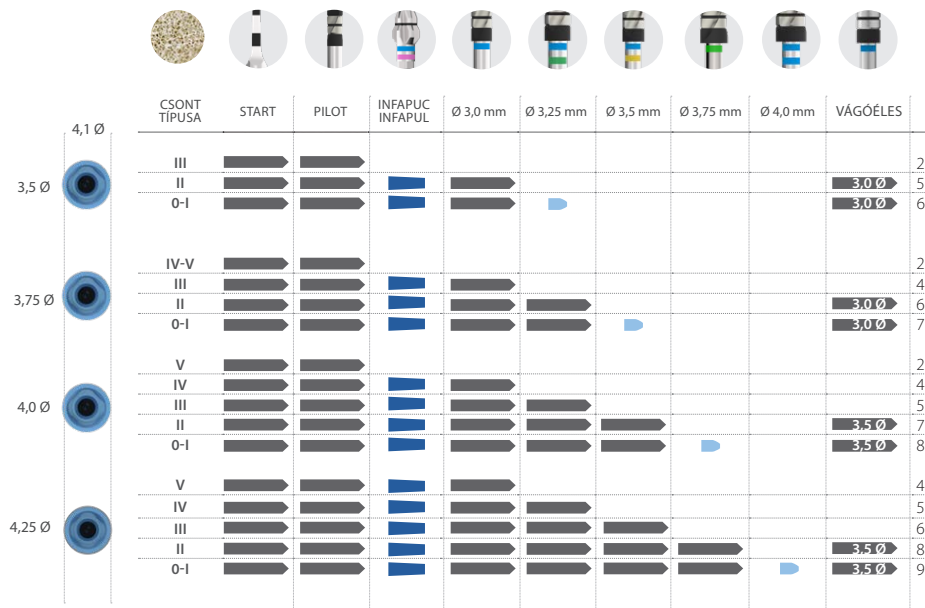

fúrási lépésekhez


Útmutató a

Implantátum hossza

(8,5 - 15 mm)



 Az implantátum teljes hossza
 6,5 mm-es fúrásmélység
 3 mm-es fúrásmélység

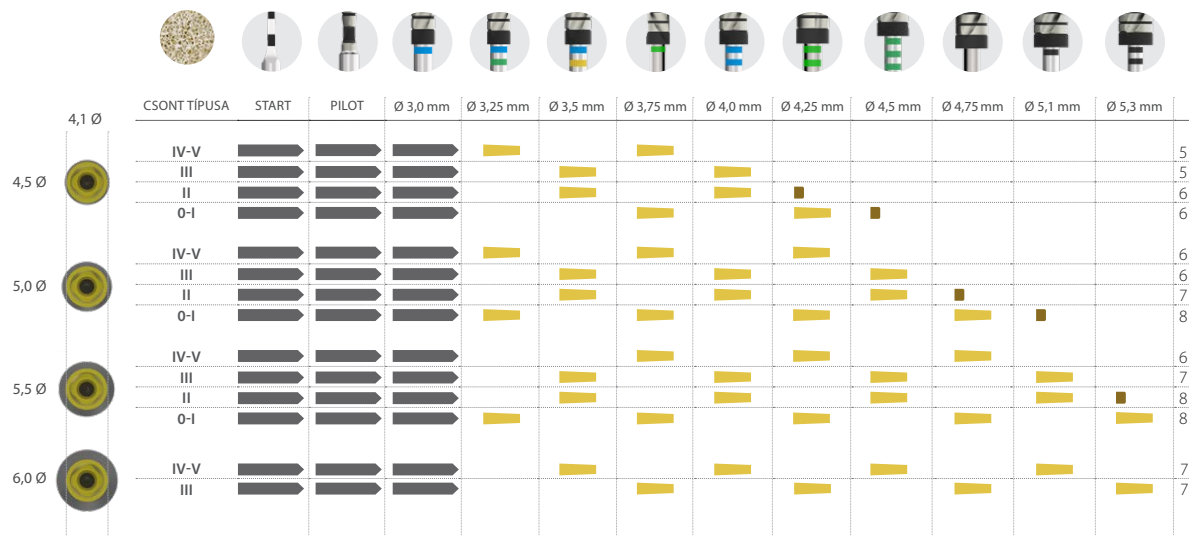

fúrási lépésekhez
Útmutató a



Implantátum hossza

(4,5 - 7,5 mm)



Az implantátum teljes hossza




Az implantátum teljes hossza a megadott átmérőjű fúróval



3 mm-es fúrásmélység

Universal Plus Platform

Platform átmérője Ø4,1 mm

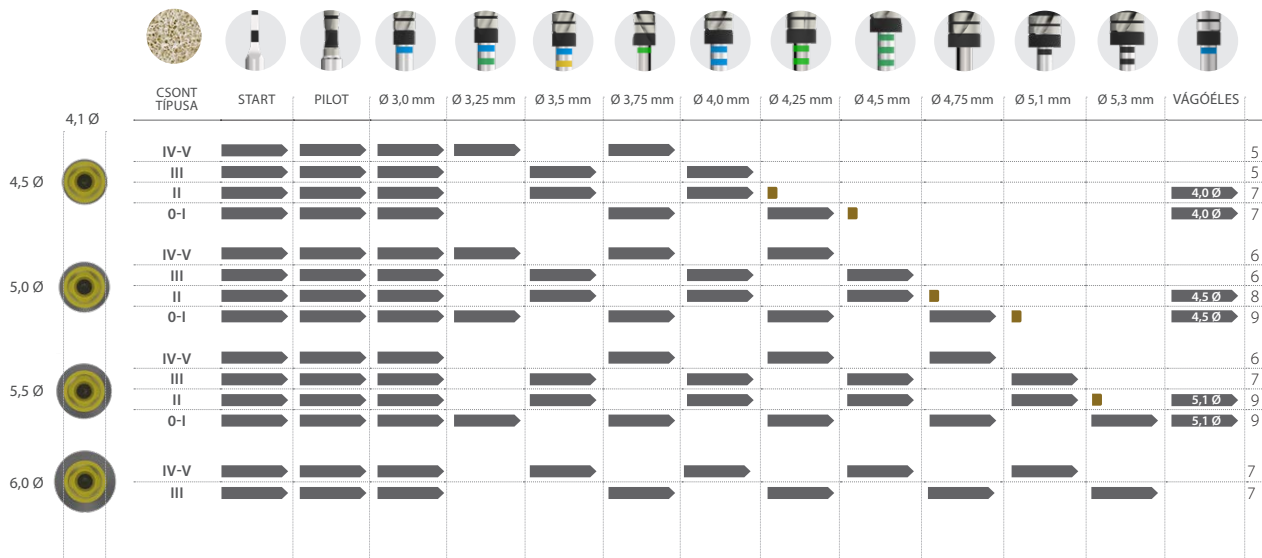

fúrási lépésekhez

Útmutató a