



Útmutató az ajánlott fúrási lépésekről

az Interna BTI implantátumokhoz



MEGJEGYZÉS: a termék elérhetőségéről a különböző piacokon érdeklődjön a forgalmazónál

Fúrásmélység-jelek

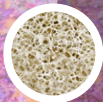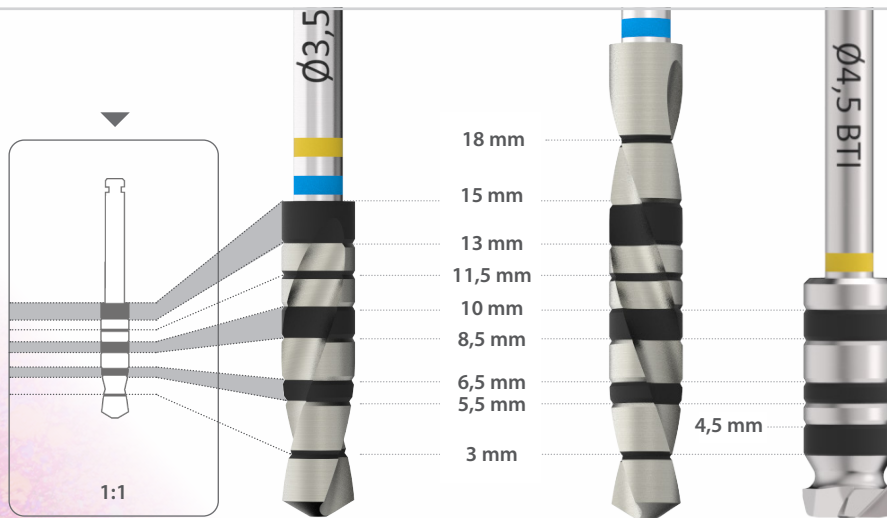

BESOROLÁS / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

FÚRÓ

Előfúró
Fúró
Marófúró
Vágóéles fúrók

FORDULAT

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

ÖBLÍTÉS

igen
nem
nem
nem

Implantátum hossza

(5,5 - 13 mm)



 Az implantátum teljes hossza
 mm Változó
 2-3 mm-es fúrásmélység


IMPLANTÁTUM HOSSZA	2,5 Ø						
	CSONT TÍPUSA	START	Ø 1,8 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,2 mm	Ø 2,3 mm	Ø 2,4 mm
5,5 - 6,5 - 7,5 mm	III						2
	II			5,5 mm			3
	0-I			5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	6
8,5 - 10 mm	III						2
	II			6,5 mm			3
	0-I			6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6
11,5 - 13 mm	III						2
	II			8,5 mm			3
	0-I			8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	6



Implantátum hossza

(7,5 - 13 mm)

 Az implantátum teljes hossza
 6,5 mm-es fúrás mélység
 2-3 mm-es fúrás mélység

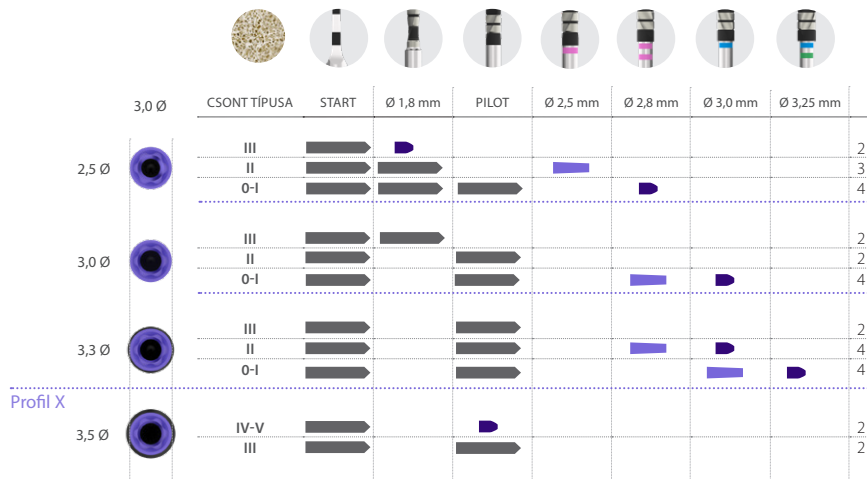

Implantátum hossza

(4,5 - 6,5 mm)



- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hossza a megadott átmérőjű fúróval
- 2-3 mm-es fúrásmélység
- 2-3 mm-es fúrásmélység. Csak 6,5 mm-es implantátumokhoz

		CSONT TÍPUSA	START	Ø 1,8 mm	PILOTO	Ø 2,5 mm	Ø 2,8 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	VÁGÓÉLES	
3,0 Ø											
		III									2
		II									4
		0-I									5
2,5 Ø											
		III									2
		II									3
		0-I									5
3,0 Ø											
		III									2
		II									5
		0-I									5
3,3 Ø											
		III									2
		II									5
		0-I									5
3,5 Ø											
		IV-V									2
		III									2

Profil X


fúrási lépésekhez
Útmutató a



Implantátum hossza

(7,5 - 15 mm)

 Az implantátum teljes hossza
 6,5 mm-es fúrásmélység
 2-3 mm-es fúrásmélység

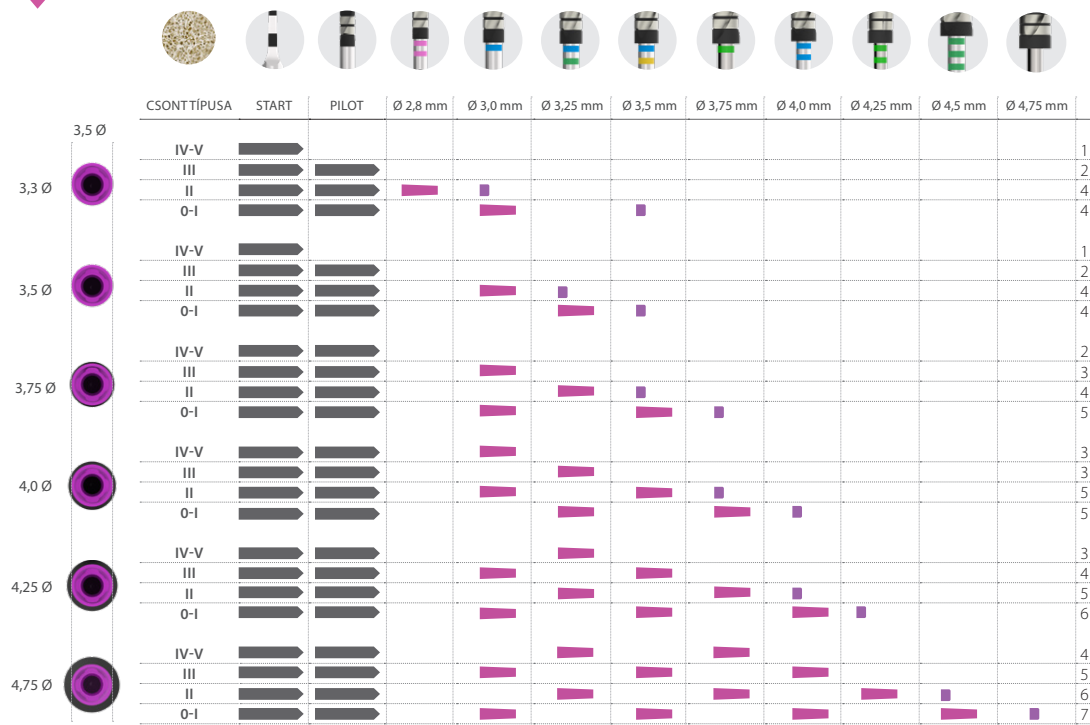

fúrási lépésekhez


Útmutató a





Implantátum hossza (4,5 - 6,5 mm)


- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hossza a megadott átmérőjű fúróval
- 2-3 mm-es fúrásmélység

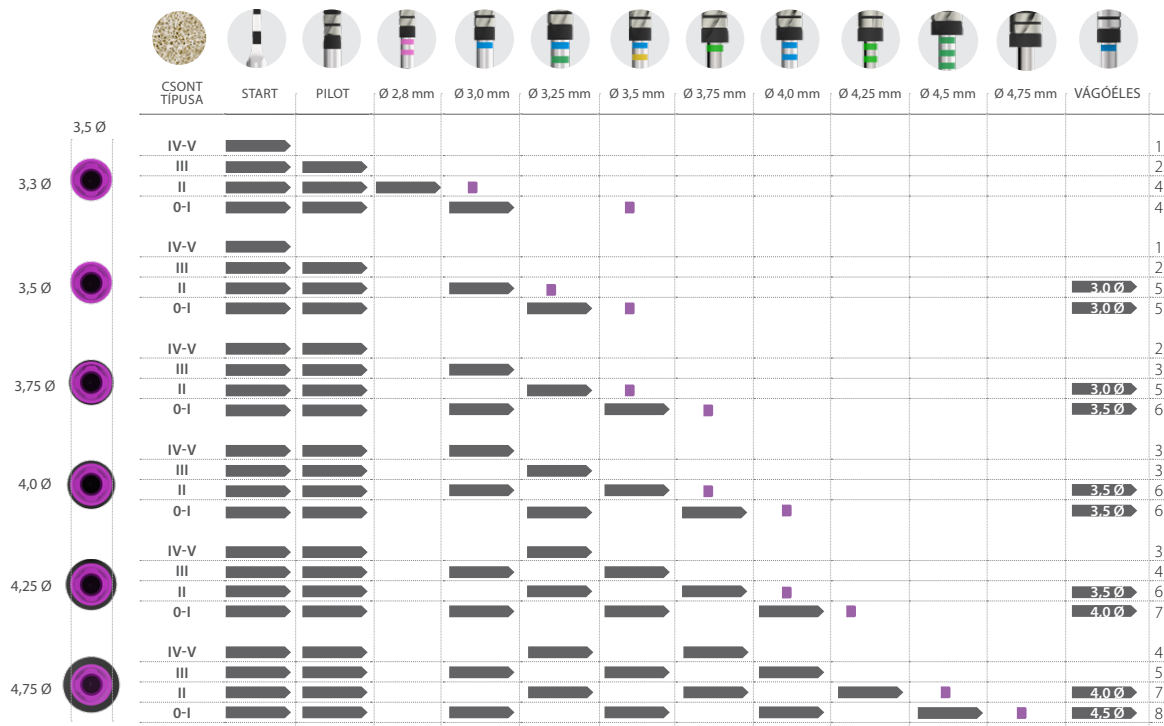

Implantátum hossza

(6,5 - 13 mm)

 Az implantátum teljes hossza
 5,5 mm-es fúrásmélység
 2-3 mm -es fúrásmélység

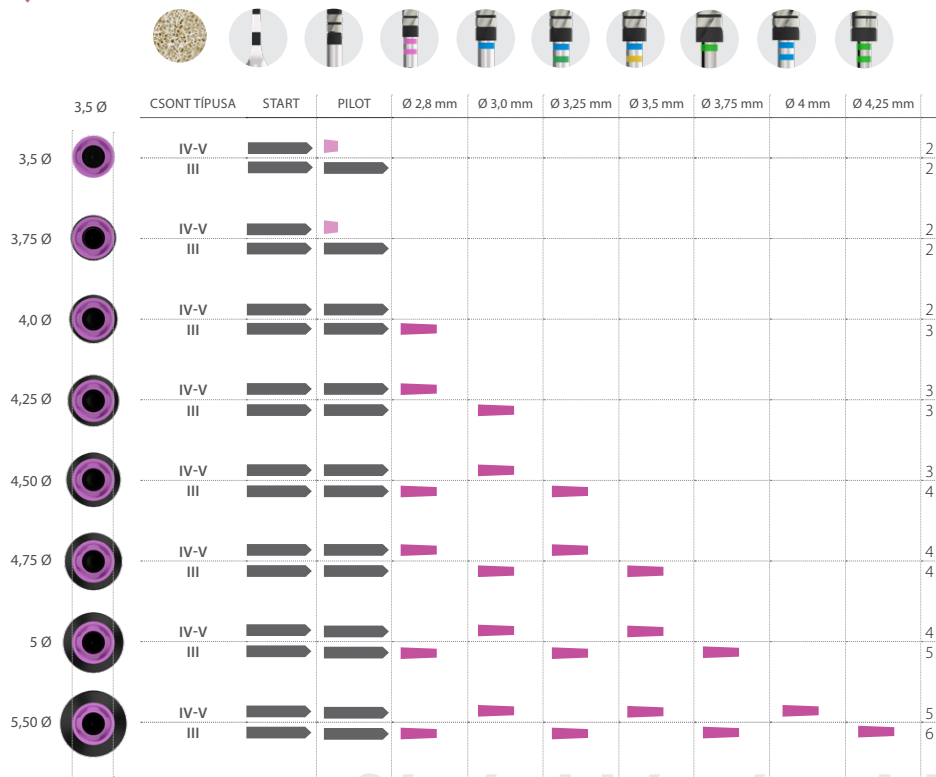

FONTOS:

A marási sorrend csak a
CORE-X implantátumokra
érvényes

Utmutató a fúrási lépésekhez






Implantátum hossza

(4,5 - 5,5 mm)

— Az implantátum teljes hossza
■ 2-3 mm -es fúrásmélység

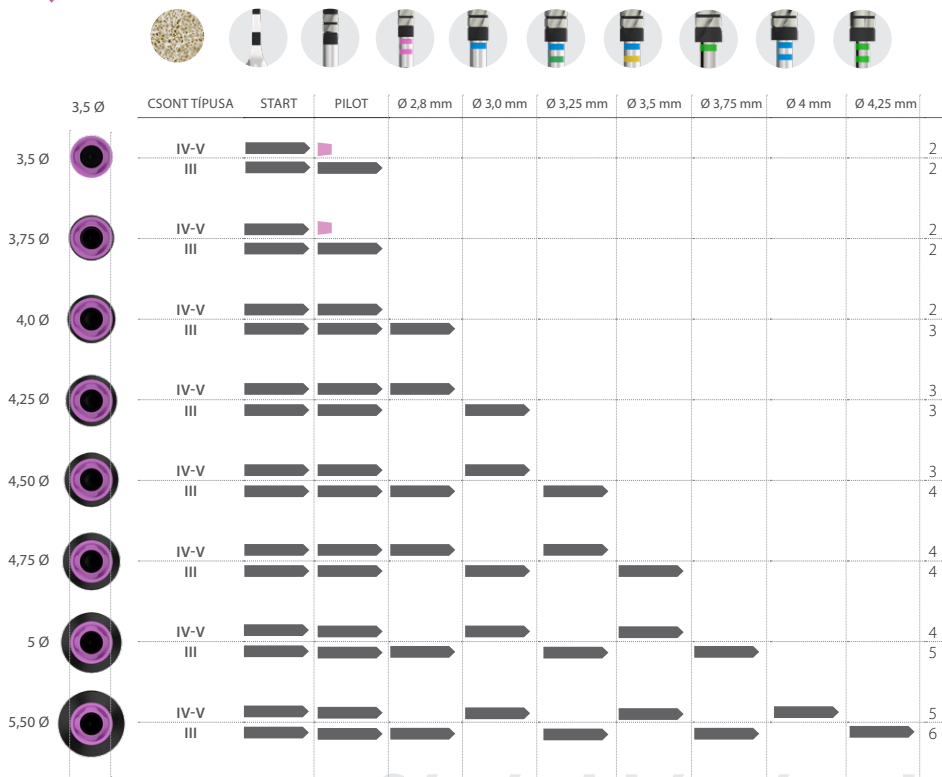

FONTOS:

A marási sorrend csak
CORE-X implantátumokra
érvényes


Útmutató a fúrási lépésekhez



Implantátum hossza (10 - 15 mm)



- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hosszának 75%-a
- Az implantátum teljes hosszának 25%-a
- 5,0 mm-es fúrásmélység

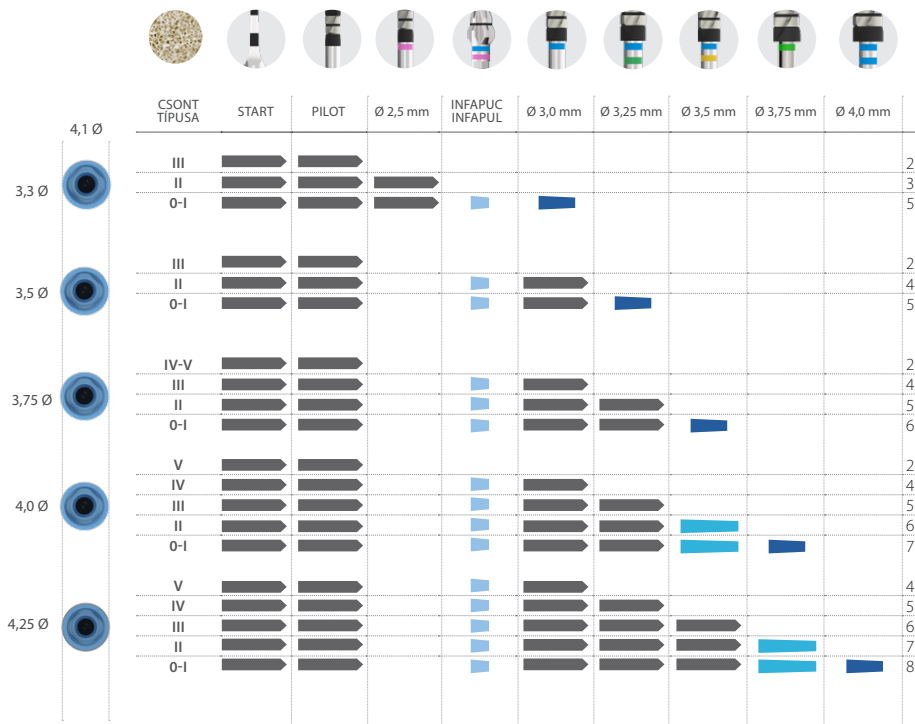


fúrási lépésekhez
Útmutató a



Implantátum hossza (5,5 - 8,5 mm)

- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hossza a megadott átmérőjű fúróval
- 5,0 mm-es fúrás mélység
- 2-3 mm-es fúrás mélység

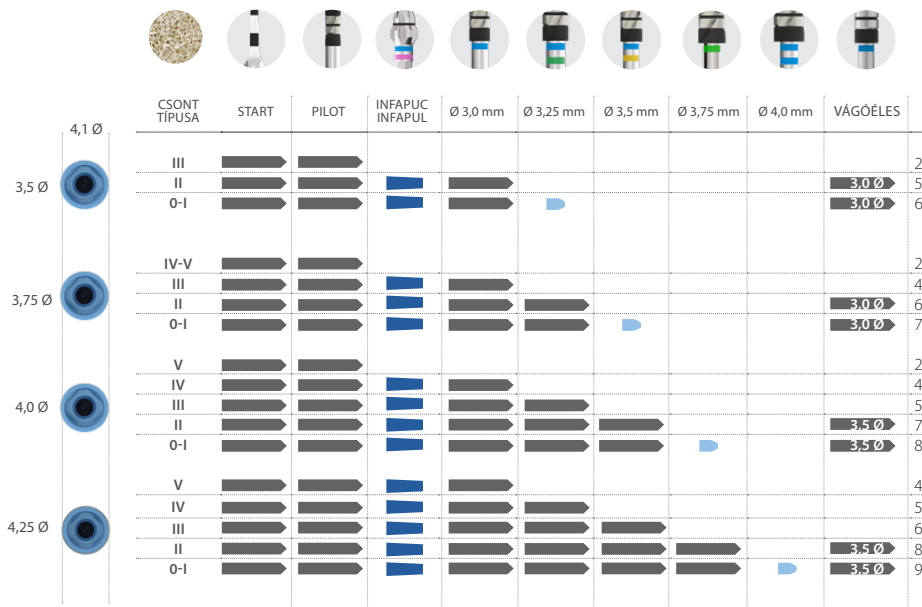




Implantátum hossza

(8,5 - 15 mm)



 Az implantátum teljes hossza
 6,5 mm-es fúrásmélység
 3 mm-es fúrásmélység

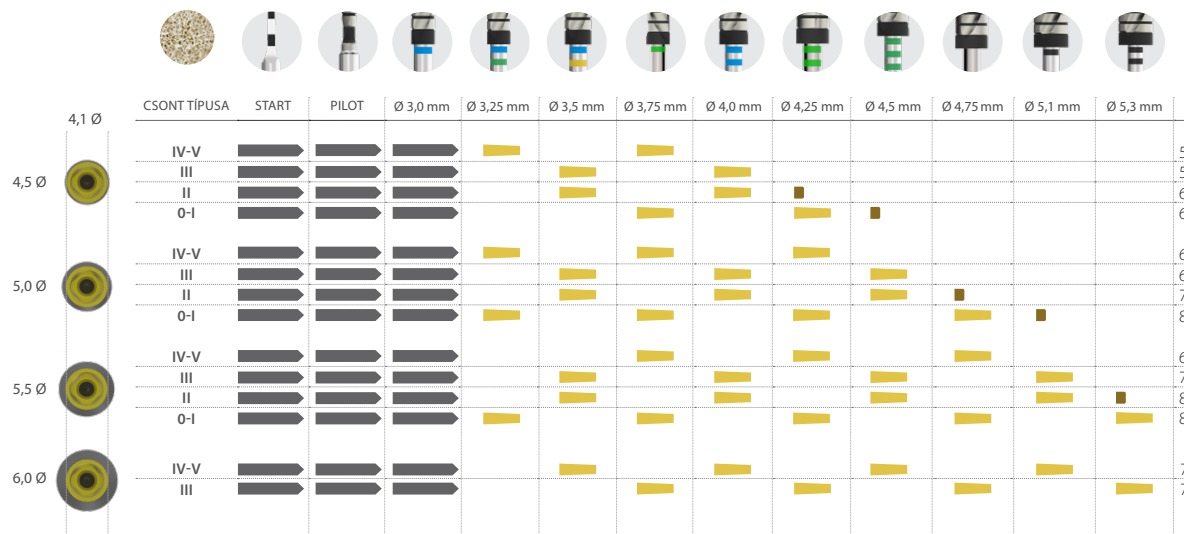

fúrési lépésekhez

Útmutató a



Implantátum hossza

(4,5 - 7,5 mm)



- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hossza a megadott átmérőjű fúróval
- 3 mm-es fúrásmélység

	CSONT TÍPUSA	START	PILOT	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,25 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,75 mm	Ø 5,1 mm	Ø 5,3 mm	VÁGÓÉLES	
4,1 Ø															
4,5 Ø	IV-V														5
	III														5
	II													4.0 Ø	7
	0-I													4.0 Ø	7
5,0 Ø	IV-V														6
	III														6
	II													4.5 Ø	8
	0-I													4.5 Ø	9
5,5 Ø	IV-V														6
	III														7
	II													5.1 Ø	9
	0-I													5.1 Ø	9
6,0 Ø	IV-V														7
	III														7

fúrási lépésekhez
Útmutató a



