



Sequenze consigliate di fresatura

per impianti BTI Interna



NOTA: Si prega di verificare la disponibilità del prodotto sui vari mercati con la filiale di riferimento.

Tacche di profondità di fresatura

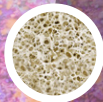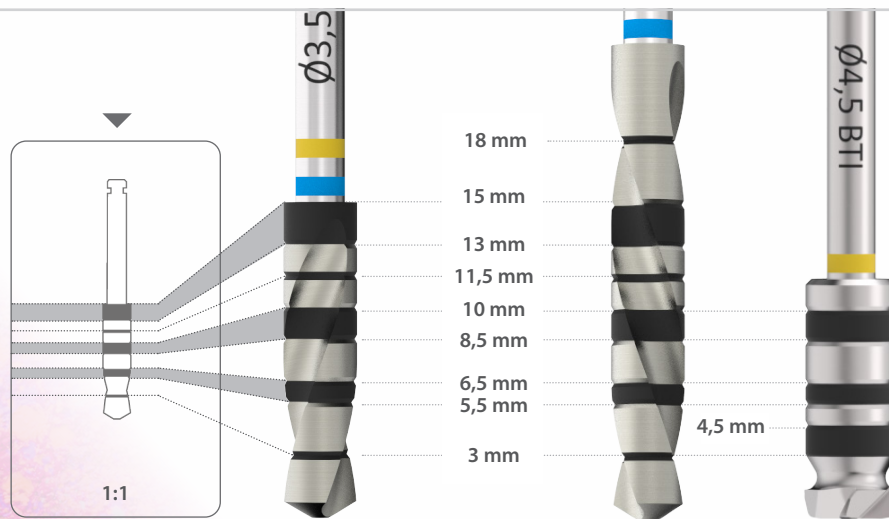

TIPO / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

FRESA

Fresa di inizio
Frese
Frese svasatrici
Fresa taglio frontale

VELOCITÀ




800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm


IRRIGAZIONE

si
no
no
no

Impianti lunghezza

(da 6,5 a 13 mm)

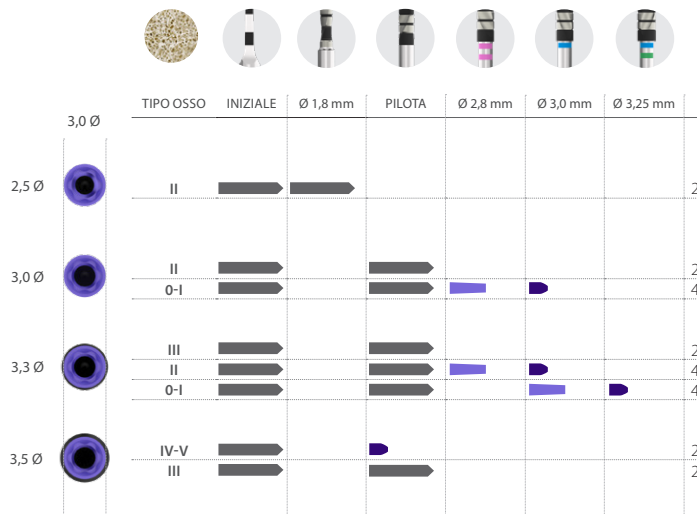

 Lunghezza totale dell'impianto
 6,5 mm di profondità di fresatura
 2-3 mm di profondità di fresatura




Impianti lunghezza

(da 4,5 a 5,5 mm)



 Lunghezza totale dell'impianto
 2-3 mm di profondità di fresatura

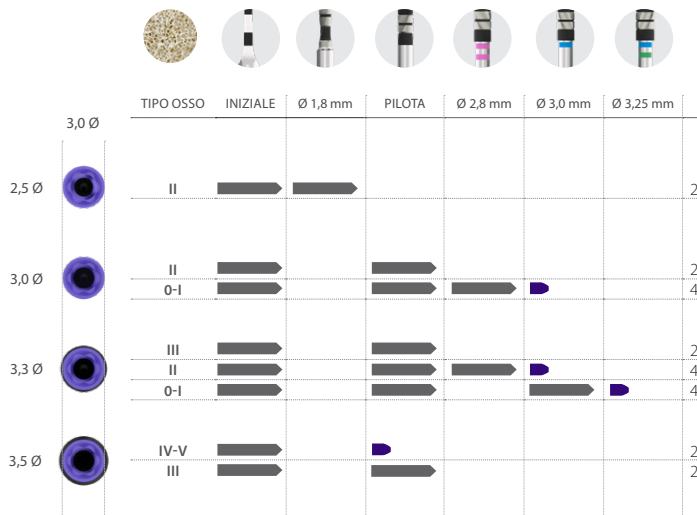




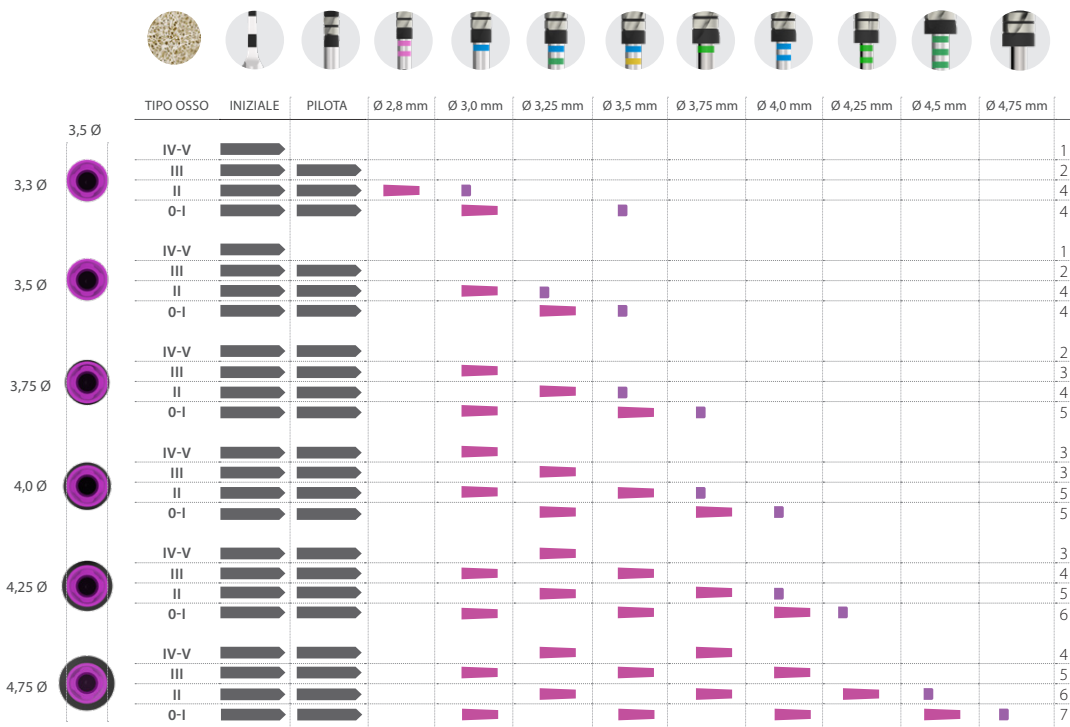
Piattaforma Stretta / CORE

Ø3,5 mm diametro della piattaforma

Impianti lunghezza

(da 7,5 a 15 mm)

 Lunghezza totale dell'impianto
 6,5 mm di profondità di fresatura
 2-3 mm di profondità di fresatura






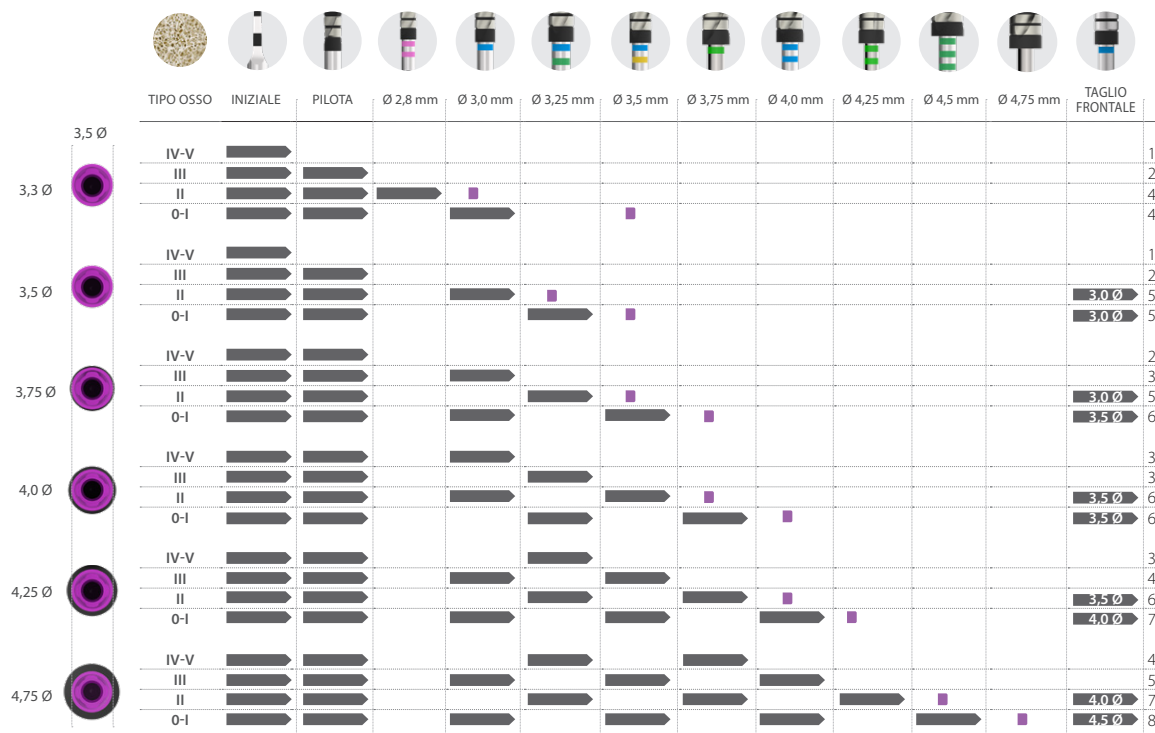
fresatura
Sequenze di



Impianti lunghezza

(da 4,5 a 6,5 mm)

 Lunghezza totale dell'impianto
 Lunghezza totale dell'impianto con fresa del diametro specificato
 2-3 mm di profondità di fresatura



Piattaforma Stretta / CORE-X






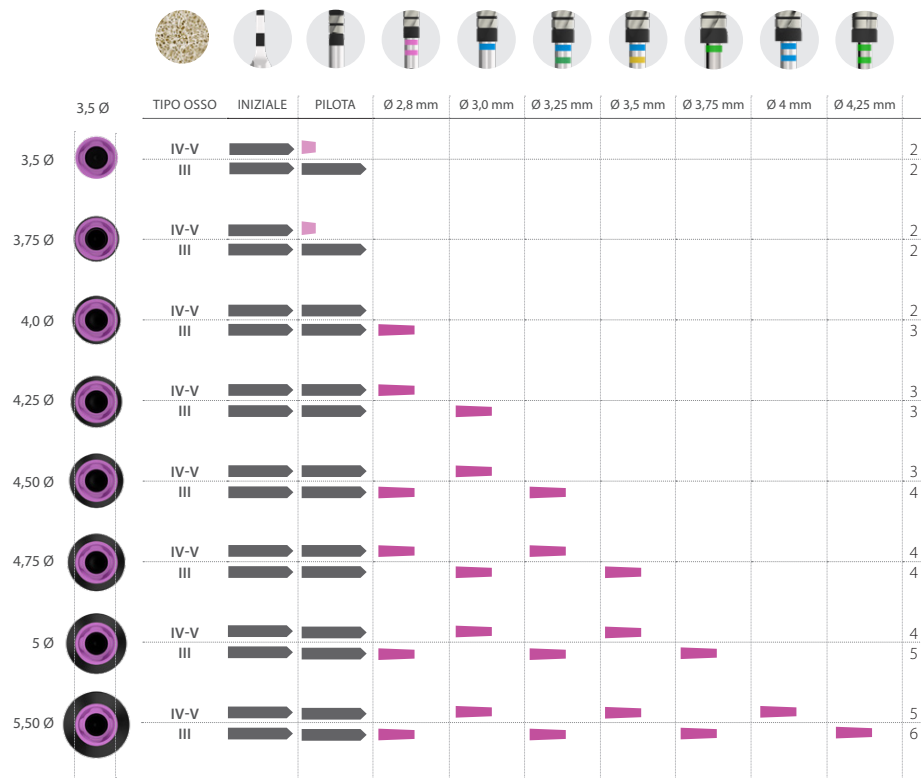
Ø3,5 mm diametro della piattaforma

Impianti lunghezza

(da 6,5 a 13 mm)



 Lunghezza totale dell'impianto
 5,5 mm di profondità di fresatura
 2-3 mm di profondità



IMPORTANTE:
sequenza di fresatura
valida solo per impianti
e CORE-X

fresatura
Sequenze di






Piattaforma Stretta / CORE-X

Ø3,5 mm diametro della piattaforma

Impianti lunghezza

(da 4,5 a 5,5 mm)

 Lunghezza totale dell'impianto
 2-3 mm di profondità

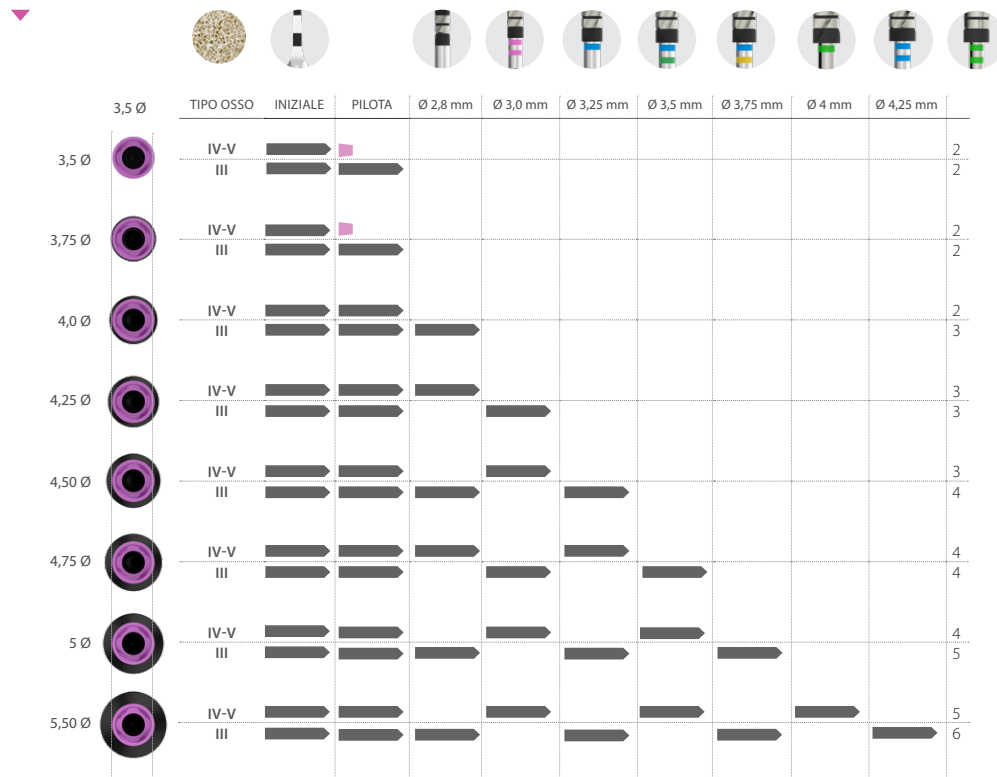



IMPORTANTE:
sequenza di fresatura
valida solo per impianti
e CORE-X

fresatura
Sequenze di





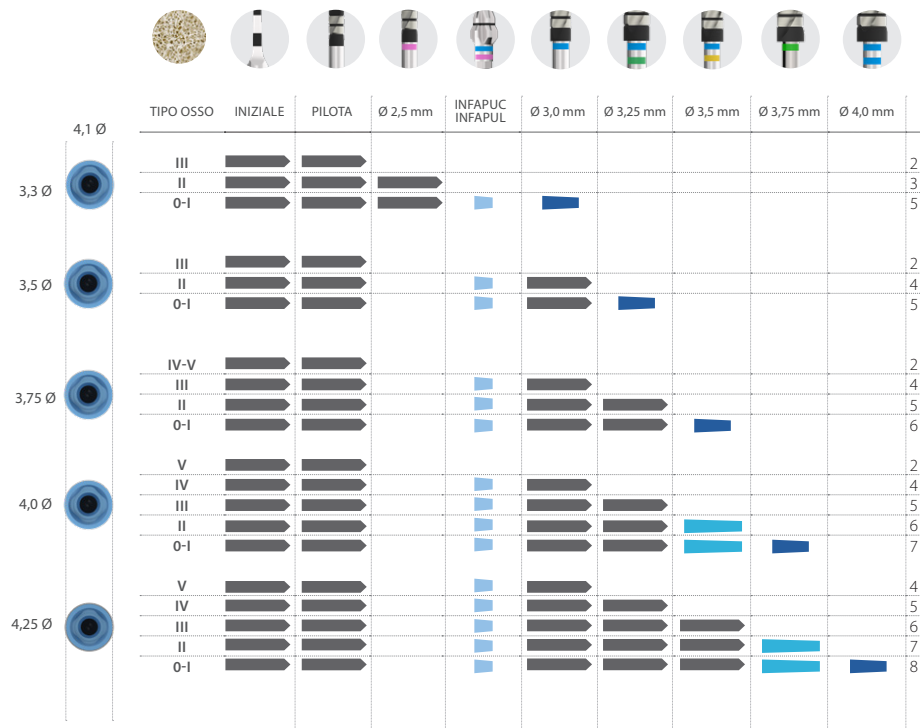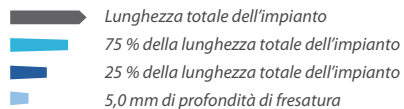

Impianti lunghezza


(da 10 a 15 mm)



Impianti lunghezza

(da 5,5 a 8,5 mm)

-  Lunghezza totale dell'impianto
-  X,X Ø Lunghezza totale dell'impianto con fresa del diametro specificato
-  5,0 mm di profondità di fresatura
-  2-3 mm di profondità di fresatura

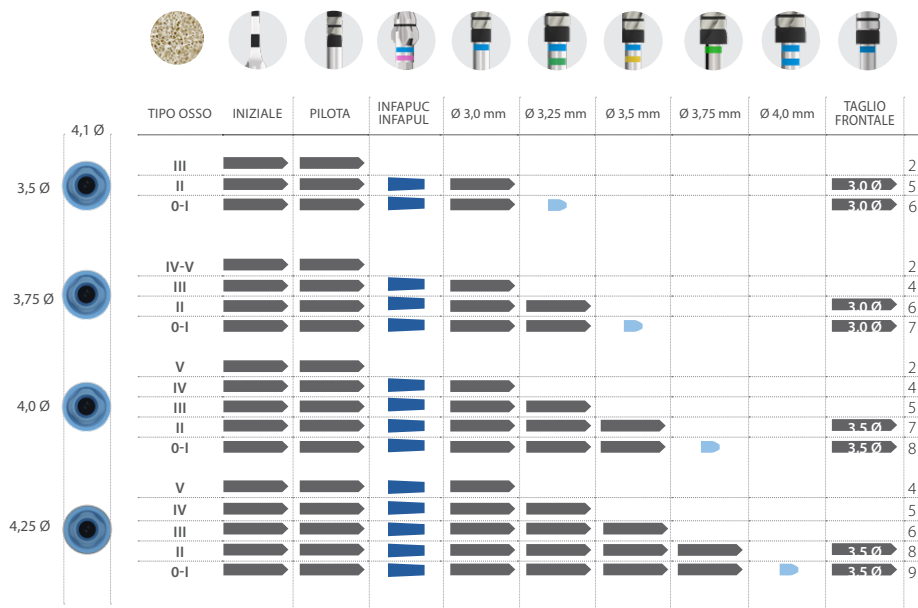



Piattaforma Universale Plus


Ø4,1 mm diametro della piattaforma

Impianti lunghezza

(da 8,5 a 15 mm)



→ Lunghezza totale dell'impianto
6,5 mm di profondità di fresatura
3 mm di profondità di fresatura

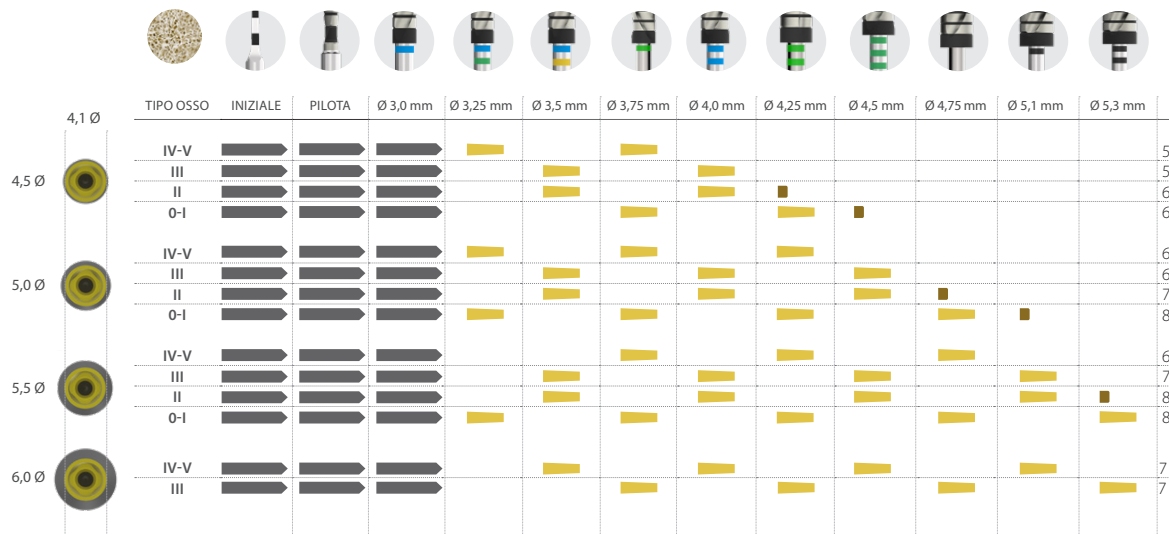

fresatura
Sequenze di








Piattaforma Universale Plus


Ø4,1 mm diametro della piattaforma

Impianti lunghezza

(da 4,5 a 7,5 mm)



-  Lunghezza totale dell'impianto
-  Lunghezza totale dell'impianto con fresa del diametro specificato
-  3 mm di profondità di fresatura

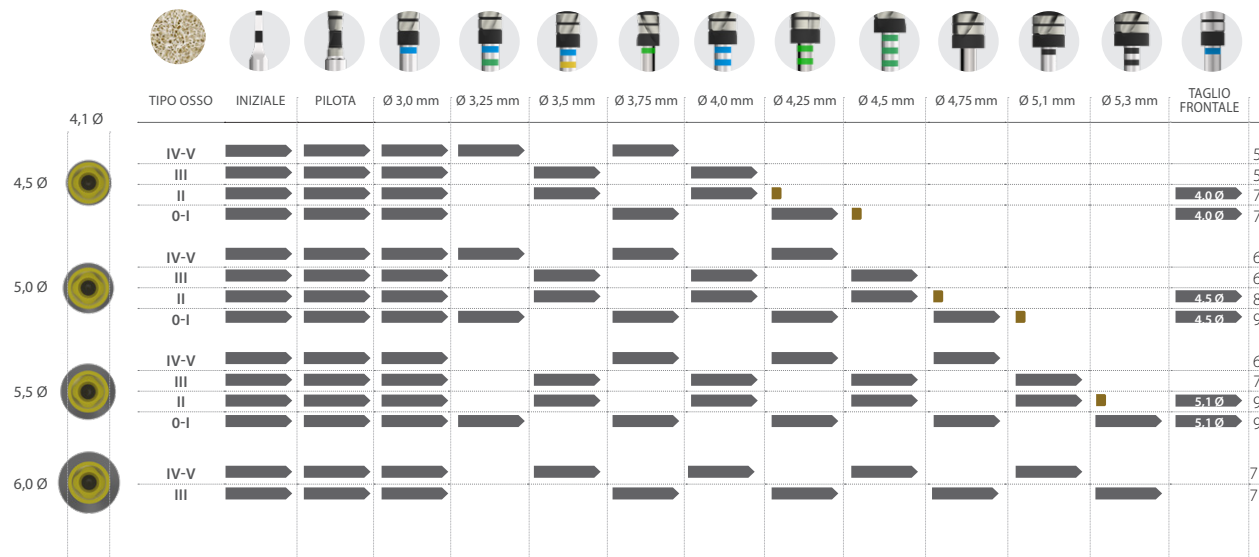

fresatura
Sequenze di

