



# Sequenze consigliate di fresatura

*per impianti BTI Interna*



NOTA: Si prega di verificare la disponibilità del prodotto sui vari mercati con la filiale di riferimento.

# Tacche di profondità di fresatura

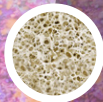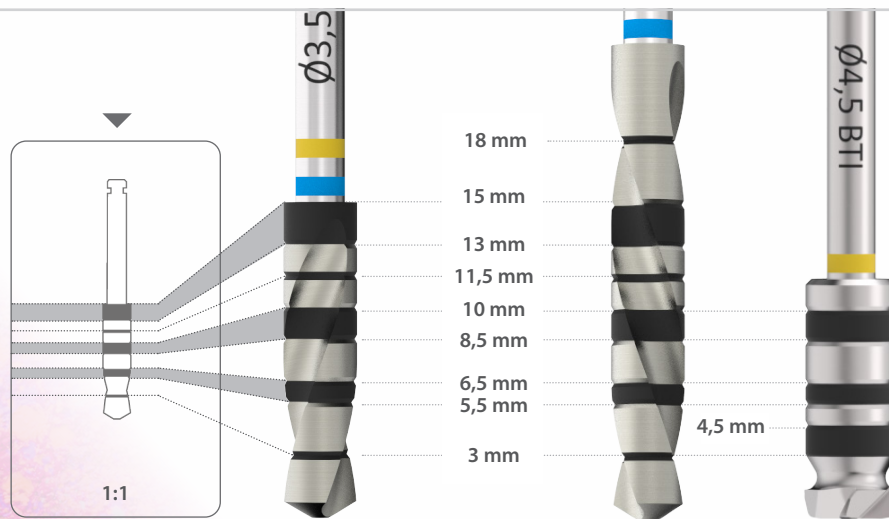

## TIPO / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

## FRESA

Fresa di inizio
Frese
Frese svasatrici
Fresa taglio frontale

## VELOCITÀ

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm




## IRRIGAZIONE

si
no
no
no

# Impianti lunghezza

(da 5,5 a 13 mm)



 Lunghezza totale dell'impianto  
 mm Variabile  
 2-3 mm di profondità di fresatura

## IMPIANTI LUNGHEZZA



















2,5 Ø



5,5 - 6,5 - 7,5 mm

8,5 - 10 mm

11,5 - 13 mm




	TIPO OSSO	INIZIALE	Ø 1,8 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,2 mm	Ø 2,3 mm	Ø 2,4 mm
5,5 - 6,5 - 7,5 mm	III						2
	II			5,5 mm			3
	0-I			5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	6
8,5 - 10 mm	III						2
	II			6,5 mm			3
	0-I			6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6
11,5 - 13 mm	III						2
	II			8,5 mm			3
	0-I			8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	6




# Impianti lunghezza

(da 7,5 a 13 mm)



 Lunghezza totale dell'impianto  
 6,5 mm di profondità di fresatura  
 2-3 mm di profondità di fresatura

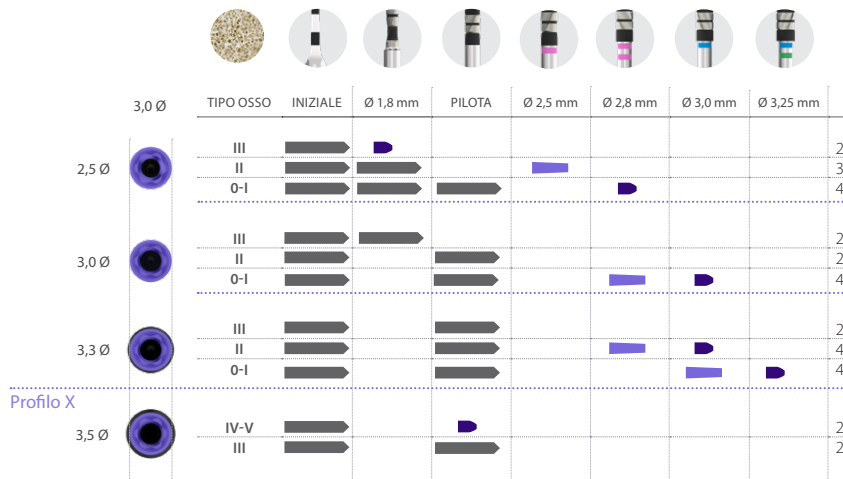


# Impianti lunghezza

(da 4,5 a 6,5 mm)



- Lunghezza totale dell'impianto
- Lunghezza totale dell'impianto con fresa del diametro specificato
- 2-3 mm di profondità di fresatura
- 2-3 mm di profondità di fresatura. Solo per impianti da 6,5 mm

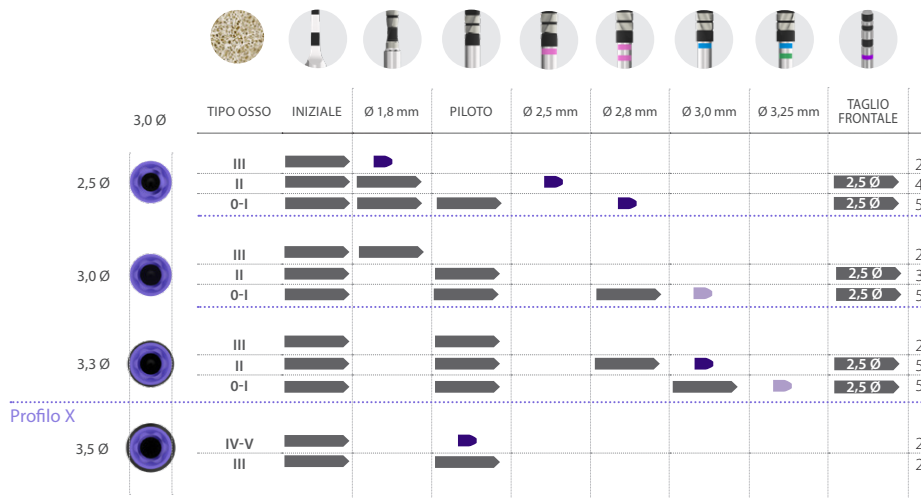




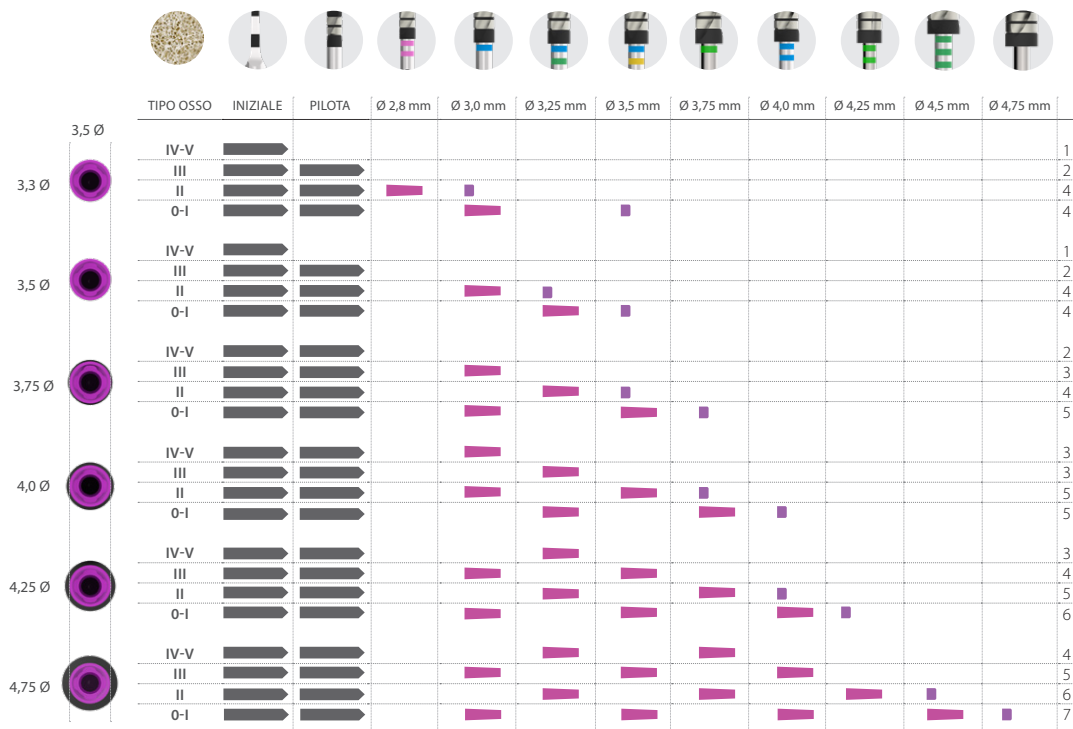
# Piattaforma Stretta / CORE

Ø 3,5 mm diametro della piattaforma

## Impianti lunghezza

(da 7,5 a 15 mm)

 Lunghezza totale dell'impianto  
 6,5 mm di profondità di fresatura  
 2-3 mm di profondità di fresatura






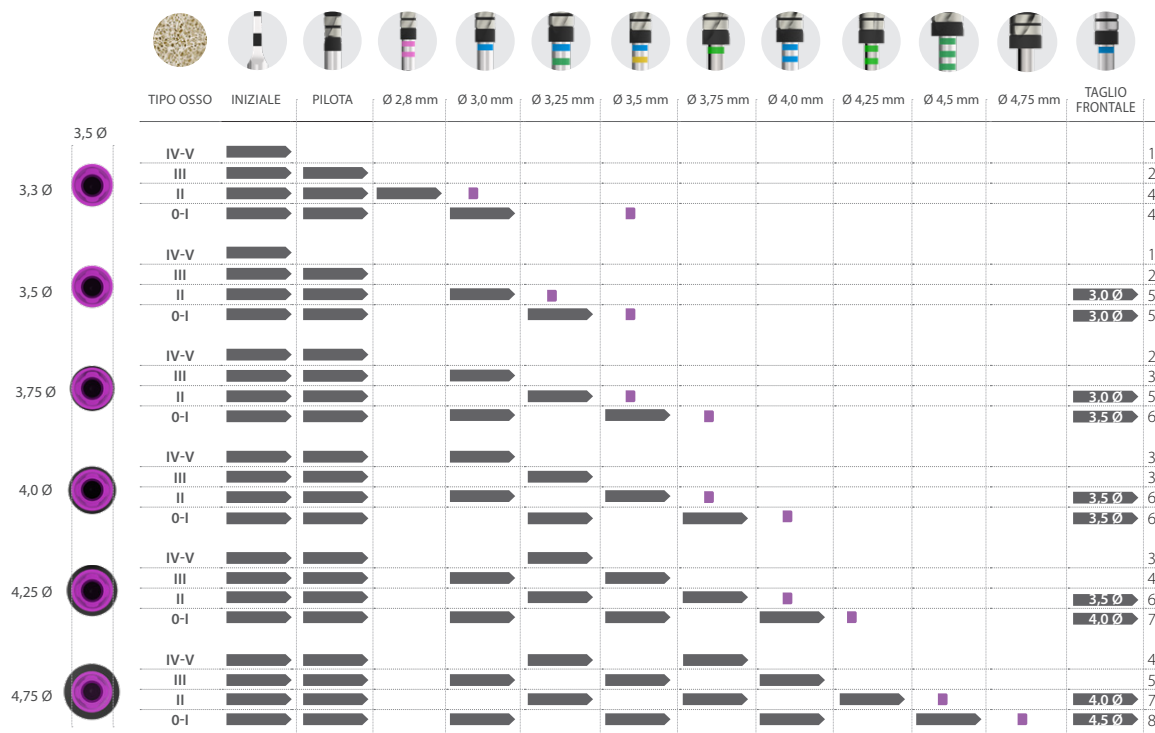
fresatura  
Sequenze di



## Impianti lunghezza

(da 4,5 a 6,5 mm)

 Lunghezza totale dell'impianto  
 Lunghezza totale dell'impianto con fresa del diametro specificato  
 2-3 mm di profondità di fresatura



# Piattaforma Stretta / CORE-X






Ø3,5 mm diametro della piattaforma

## Impianti lunghezza

(da 6,5 a 13 mm)



 Lunghezza totale dell'impianto  
 5,5 mm di profondità di fresatura  
 2-3 mm di profondità



	3,5 Ø	TIPO OSSO	INIZIALE	PILOTA	Ø 2,8 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4 mm	Ø 4,25 mm	
3,5 Ø		IV-V III	 	 								2 2
3,75 Ø		IV-V III	 	 								2 2
4,0 Ø		IV-V III	 	 								2 3
4,25 Ø		IV-V III	 	 								3 3
4,50 Ø		IV-V III	 	 								3 4
4,75 Ø		IV-V III	 	 								4 4
5 Ø		IV-V III	 	 								4 5
5,50 Ø		IV-V III	 	 								5 6



**IMPORTANTE:**  
sequenza di fresatura  
valida solo per impianti  
e CORE-X

fresatura  
Sequenze di







# Piattaforma Stretta / CORE-X


Ø3,5 mm diametro della piattaforma



## Impianti lunghezza

(da 4,5 a 5,5 mm)

 Lunghezza totale dell'impianto  
 2-3 mm di profondità

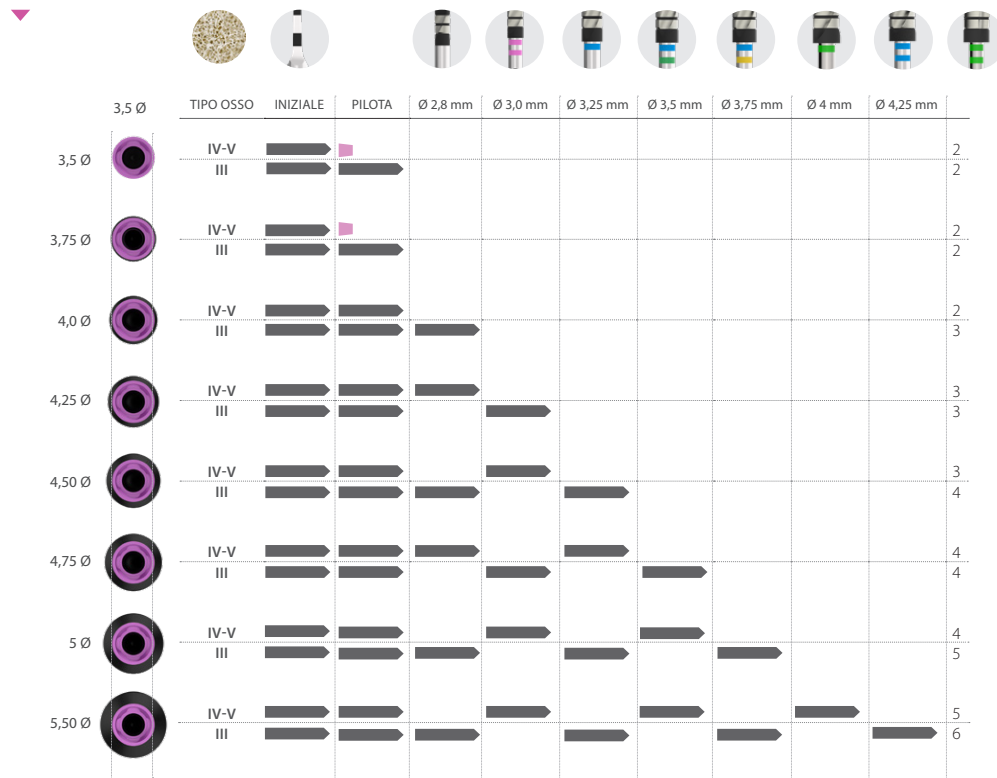



**IMPORTANTE:**  
sequenza di fresatura  
valida solo per impianti  
e CORE-X

fresatura  
Sequenze di





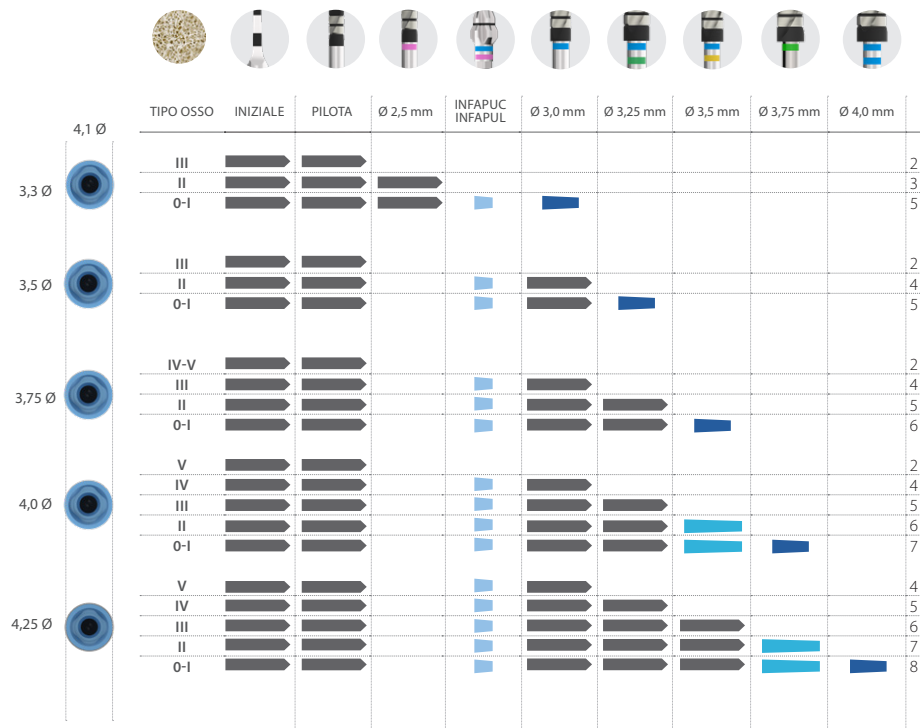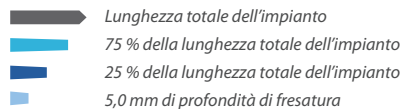

# Impianti lunghezza


(da 10 a 15 mm)



# Impianti lunghezza

(da 5,5 a 8,5 mm)

-  Lunghezza totale dell'impianto
-  X,X Ø Lunghezza totale dell'impianto con fresa del diametro specificato
-  5,0 mm di profondità di fresatura
-  2-3 mm di profondità di fresatura

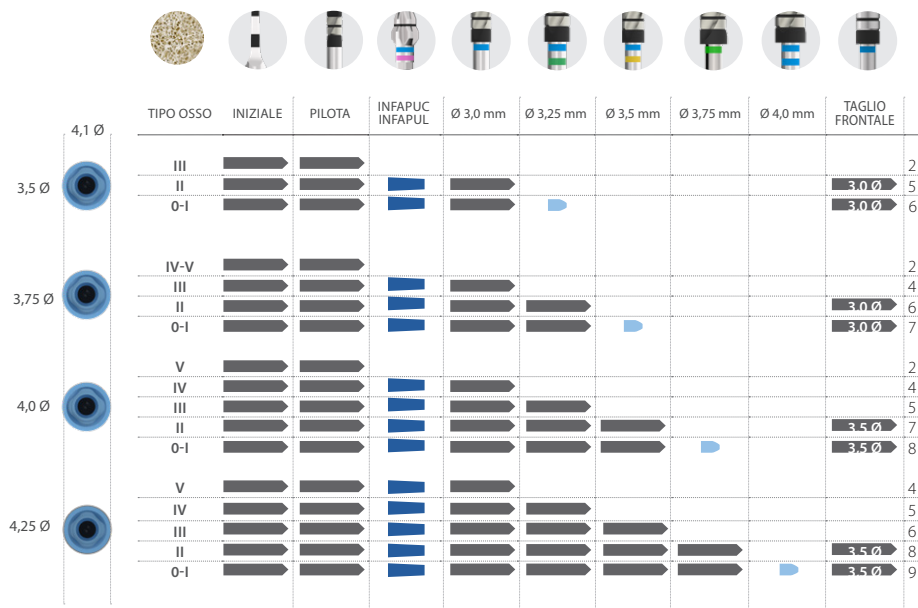



# Piattaforma Universale Plus


Ø4,1 mm diametro della piattaforma

## Impianti lunghezza

(da 8,5 a 15 mm)



→ Lunghezza totale dell'impianto  
■ 6,5 mm di profondità di fresatura  
■ 3 mm di profondità di fresatura

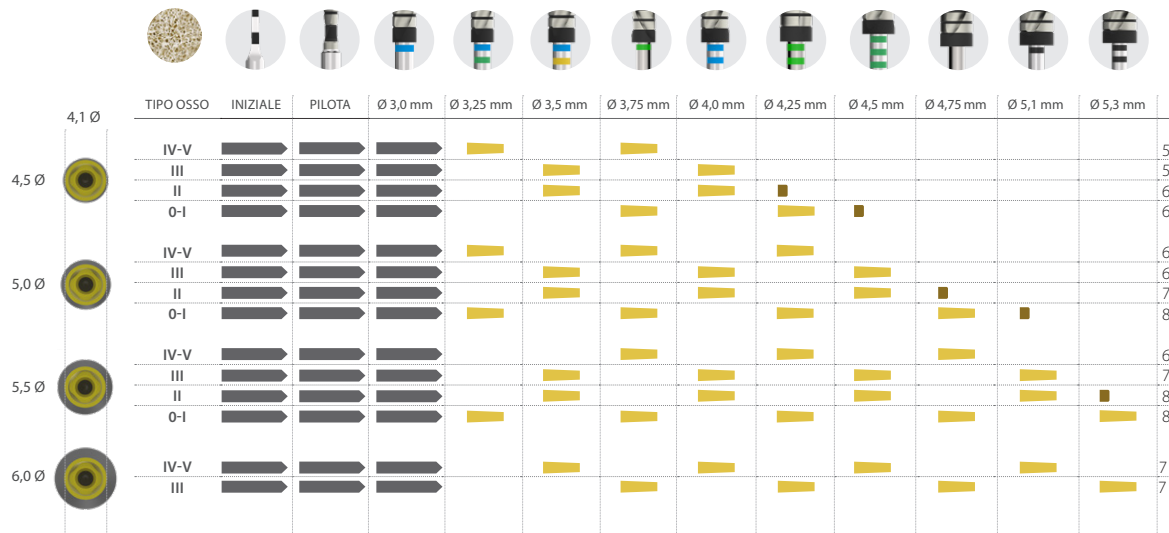

fresatura  
Sequenze di








# Piattaforma Universale Plus


Ø4,1 mm diametro della piattaforma

## Impianti lunghezza

(da 4,5 a 7,5 mm)



-  Lunghezza totale dell'impianto
-  Lunghezza totale dell'impianto con fresa del diametro specificato
-  3 mm di profondità di fresatura

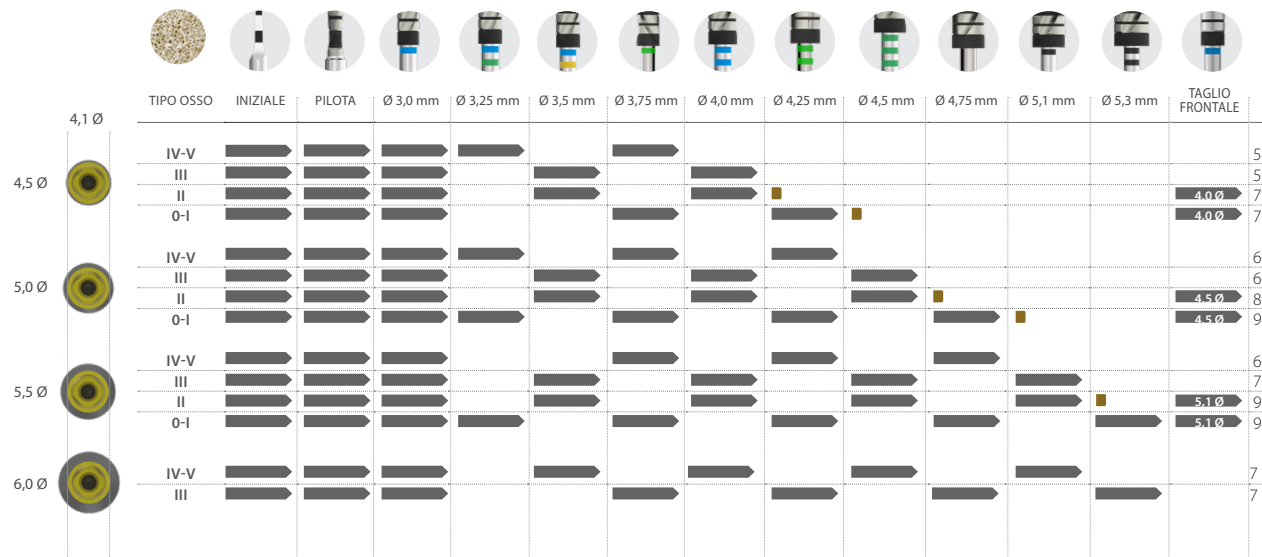

fresatura  
Sequenze di



