



Rekomenduojamas gręžimo sekos vadovas

skirtas Interna BTI implantams



PASTABA: dėl gaminio prieinamumo skirtingose rinkose kreipkitės į platintoją

Gręžimo gylio žymės

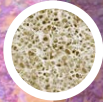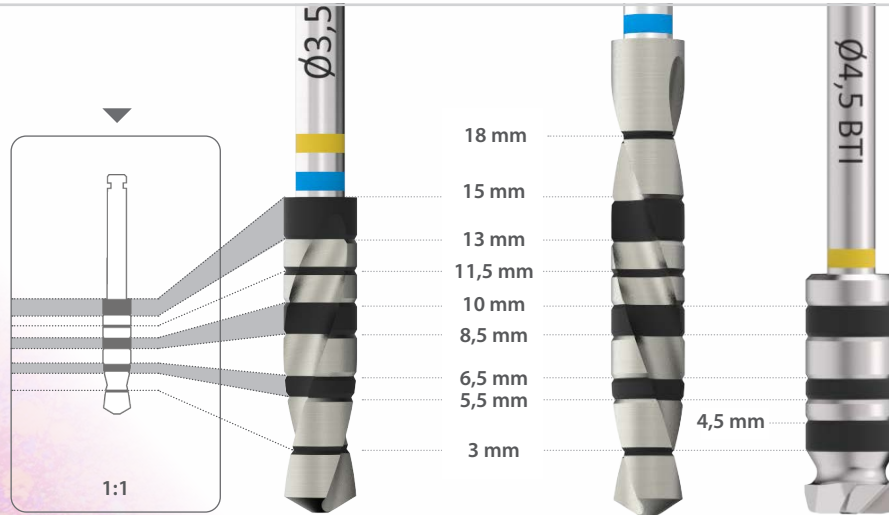

KLASĖ / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

GRĘŽTUVAS

Pradinis gręžtuvas
Gręžtuvas
Latakų gręžtuvas
Gręžtuvai priekiniams
dantims

APSISUKIMAI

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm


DRĖKINIMAS

taip
ne
ne
ne

Implanto ilgis

(nuo 6,5 iki 13 mm)


 Bendras implanto ilgis
 6,5 mm gręžimo gylis
 2-3 mm gręžimo gylis

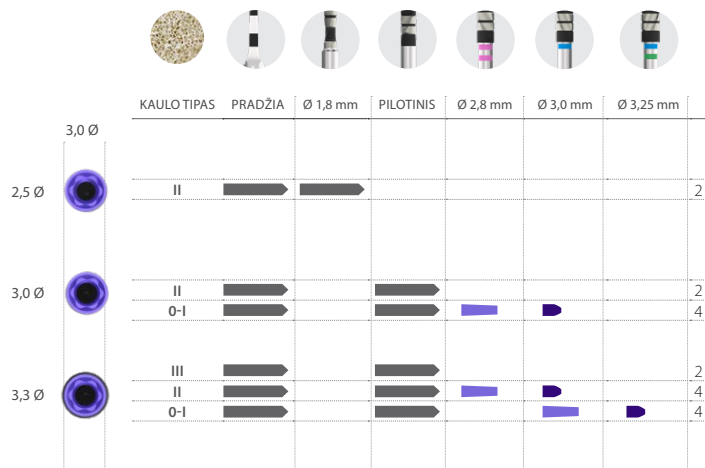

Implanto ilgis

(nuo 4,5 iki 5,5 mm)


➔ Bendras implanto ilgis
■ 2-3 mm gręžimo gylis

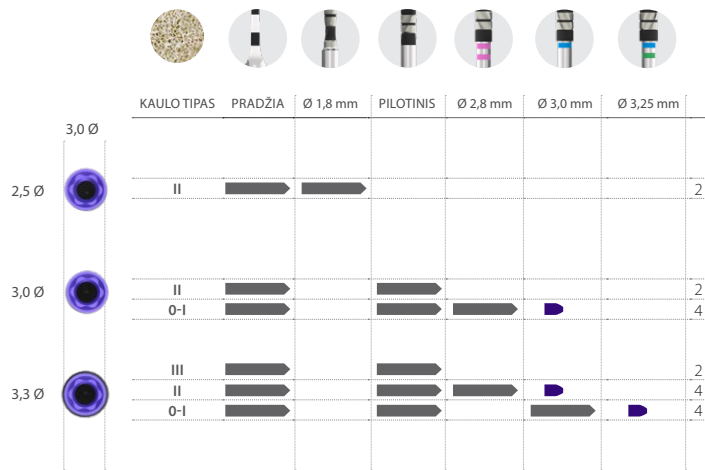

Implanto ilgis

(nuo 7,5 iki 15 mm)


 Bendras implanto ilgis
 6,5 mm gręžimo gylis
 2-3 mm gręžimo gylis

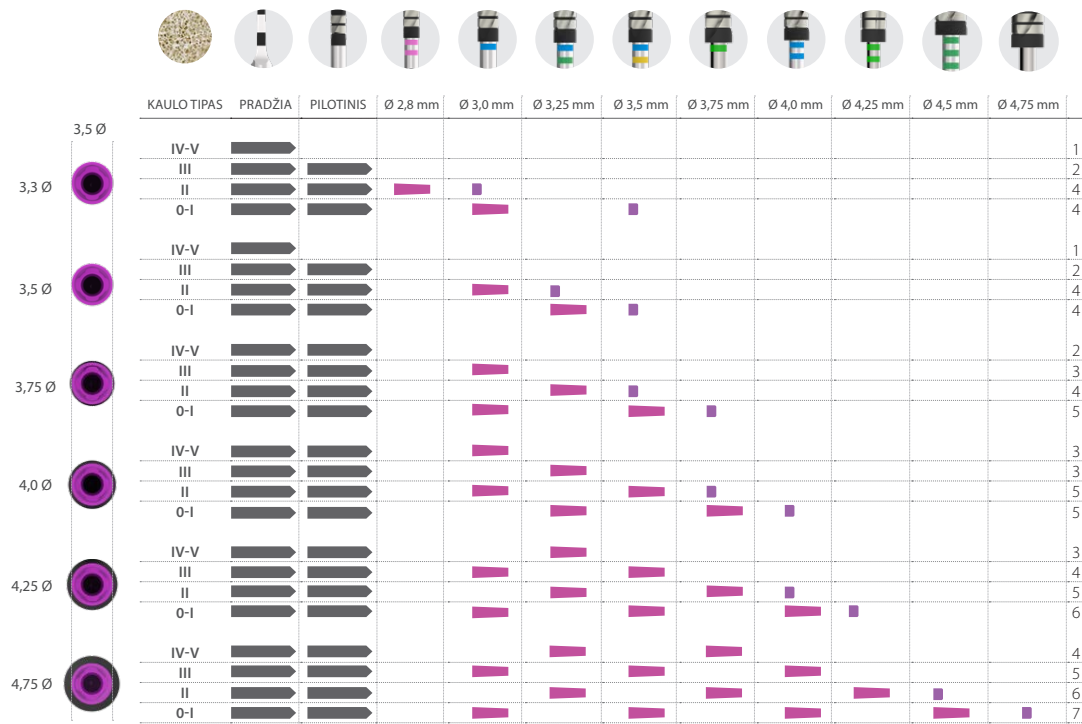

Implanto ilgis

(nuo 4,5 iki 6,5 mm)


 Bendras implanto ilgis
 Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu
 2-3 mm gręžimo gylis

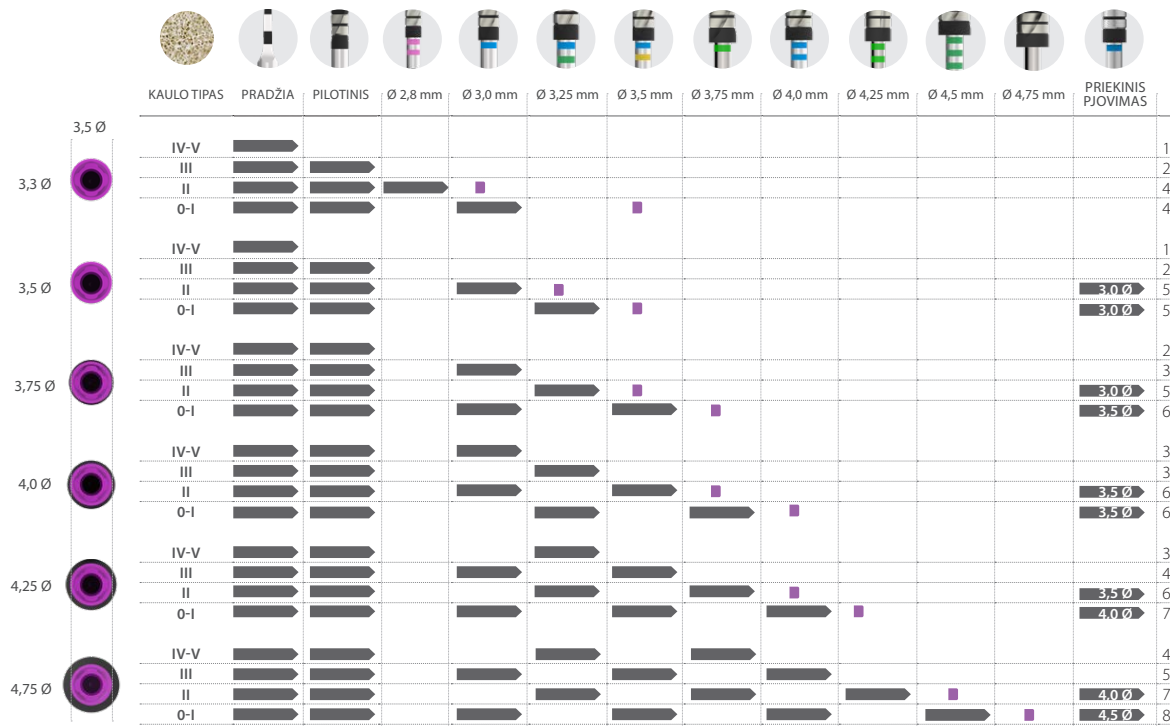

Implanto ilgis

(nuo 6,5 iki 13 mm)

➔ Bendras implanto ilgis
■ 5,5 mm gręžimo gylis

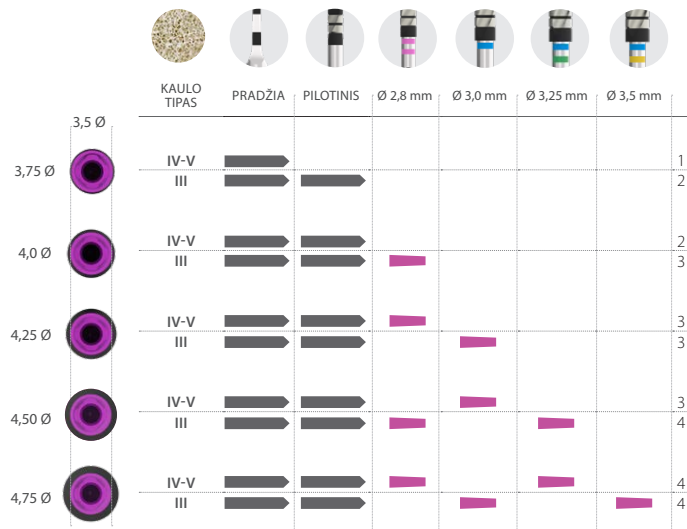


SVARBU:

Šis frezavimo eiliškumas tinka tik CORE-X® implantams

Implanto ilgis

(nuo 4,5 iki 5,5 mm)

➡ Bendras implanto ilgis

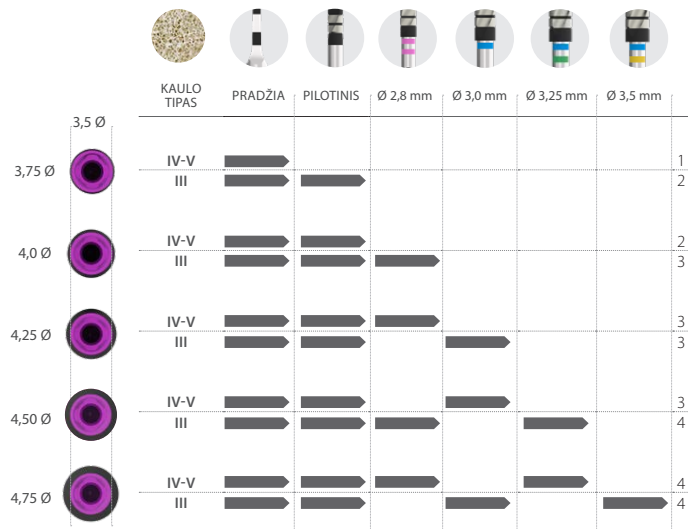

SVARBU:


Šis frezavimo eiliškumas tinka tik CORE-X® implantams



Implanto ilgis

(nuo 10 iki 15 mm)

- Bendras implanto ilgis
- 75 % viso implanto ilgio
- 25 % viso implanto ilgio
- 5,0 mm gręžio gylis

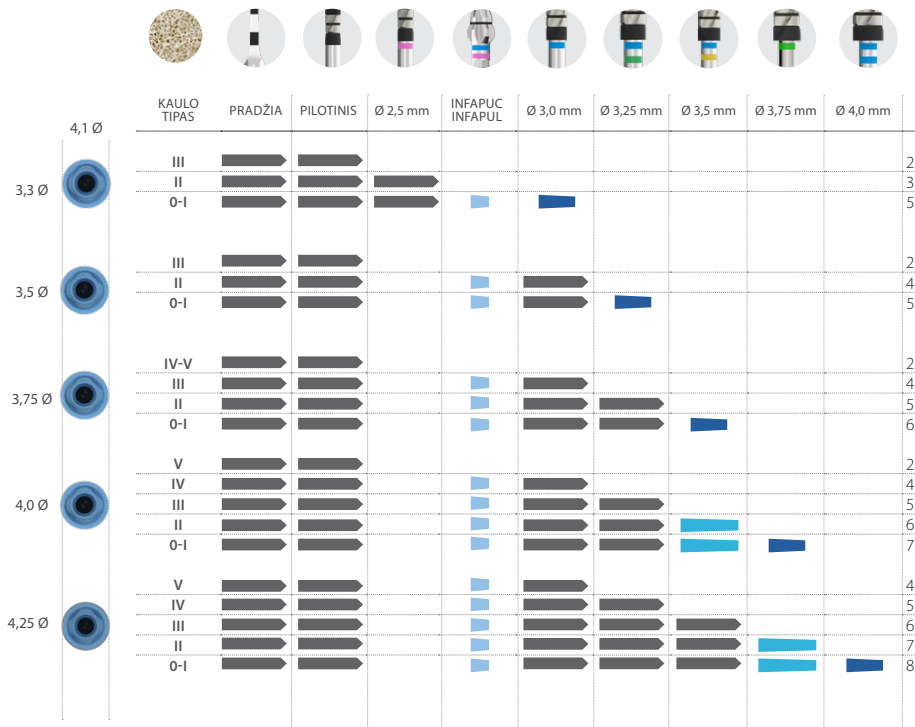

Gręžio
sekos kreiptuvas






Implanto ilgis

(nuo 5,5 iki 8,5 mm)


- Bendras implanto ilgis
- Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu
- 5,0 mm gręžimo gylis
- 2-3 mm gręžimo gylis

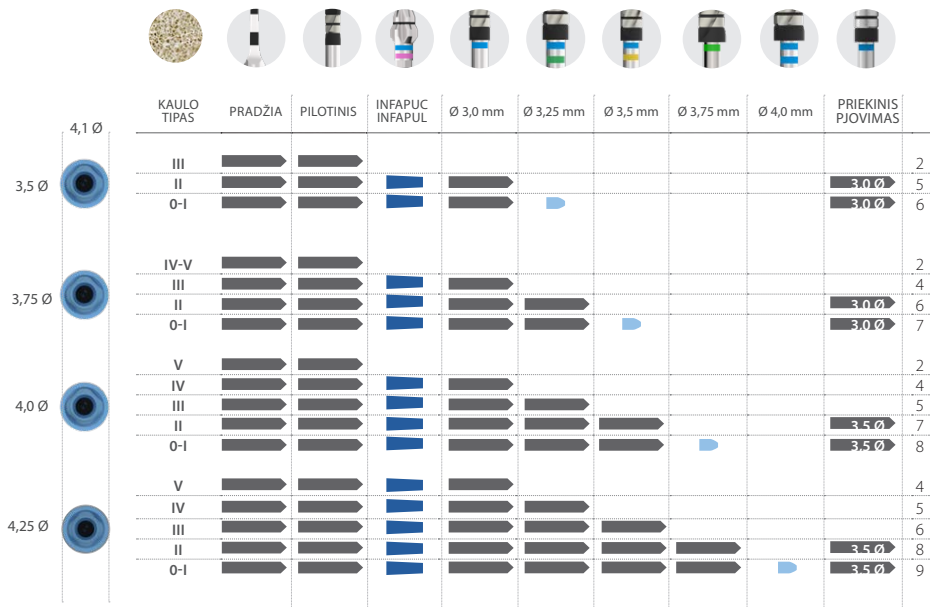

Implanto ilgis

(nuo 8,5 iki 15 mm)

 Bendras implanto ilgis
 6,5 mm gręžimo gylis
 3 mm gręžimo gylis

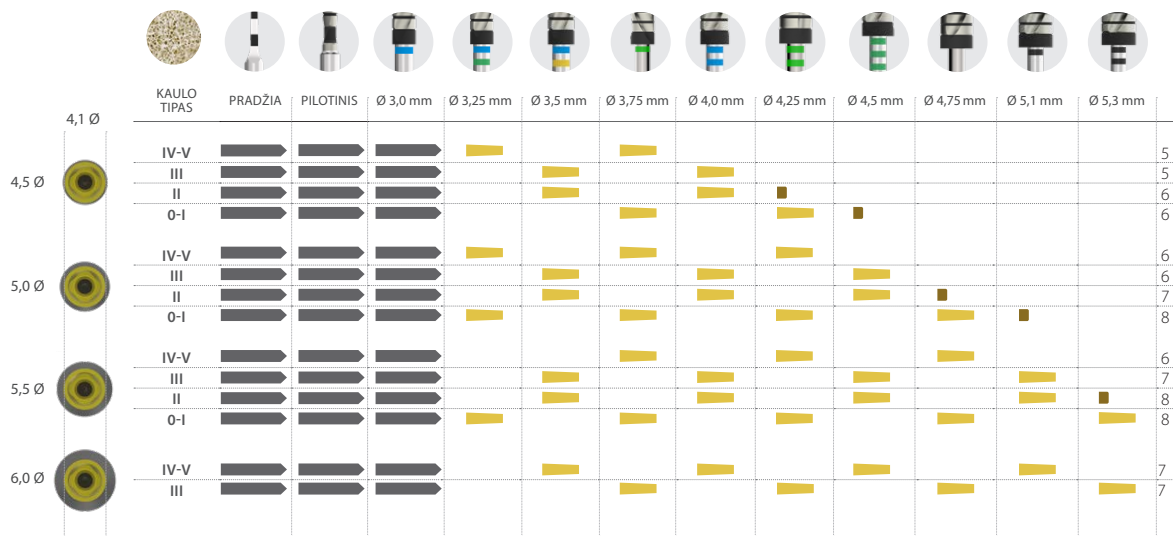

Implanto ilgis

(nuo 4,5 iki 7,5 mm)

 Bendras implanto ilgis
 Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu
 3 mm gręžimo gylis

