



Rekomenduojamas gręžimo sekos vadovas

skirtas Interna BTI implantams



PASTABA: dėl gaminio prieinamumo skirtingose rinkose kreipkitės į platintoją

Gręžimo gylio žymės

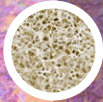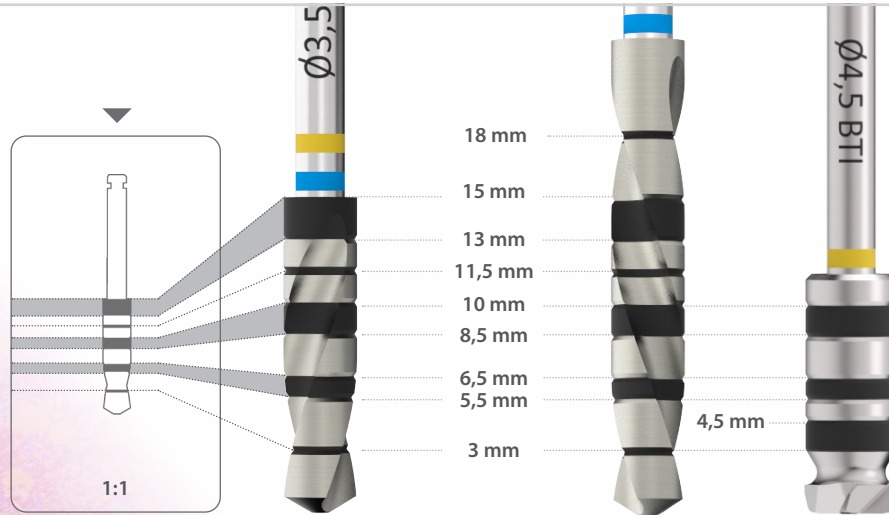

KLASĖ / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

GRĘŽTUVAS

Pradinis gręžtuvas
Gręžtuvas
Latakų gręžtuvas
Gręžtuvai priekiniams
dantims

APSISUKIMAI

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm


DRĖKINIMAS

taip
ne
ne
ne

Implanto ilgis

(nuo 6,5 iki 13 mm)


 Bendras implanto ilgis
 6,5 mm gręžimo gylis
 2-3 mm gręžimo gylis

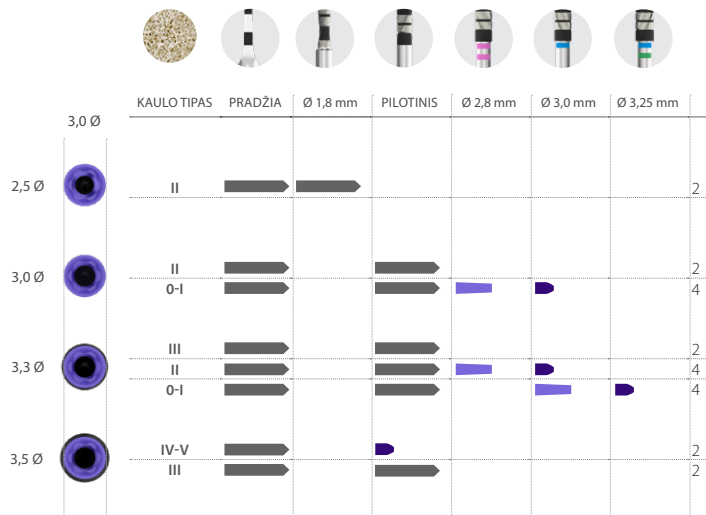

Implanto ilgis


(nuo 4,5 iki 5,5 mm)

— Bendras implanto ilgis
■ 2-3 mm gręžimo gylis

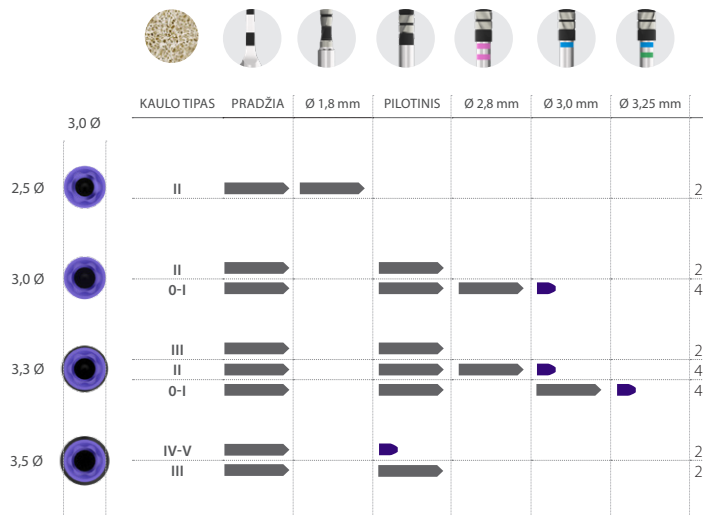

Implanto ilgis (nuo 7,5 iki 15 mm)


 Bendras implanto ilgis
 6,5 mm gręžimo gylis
 2-3 mm gręžimo gylis

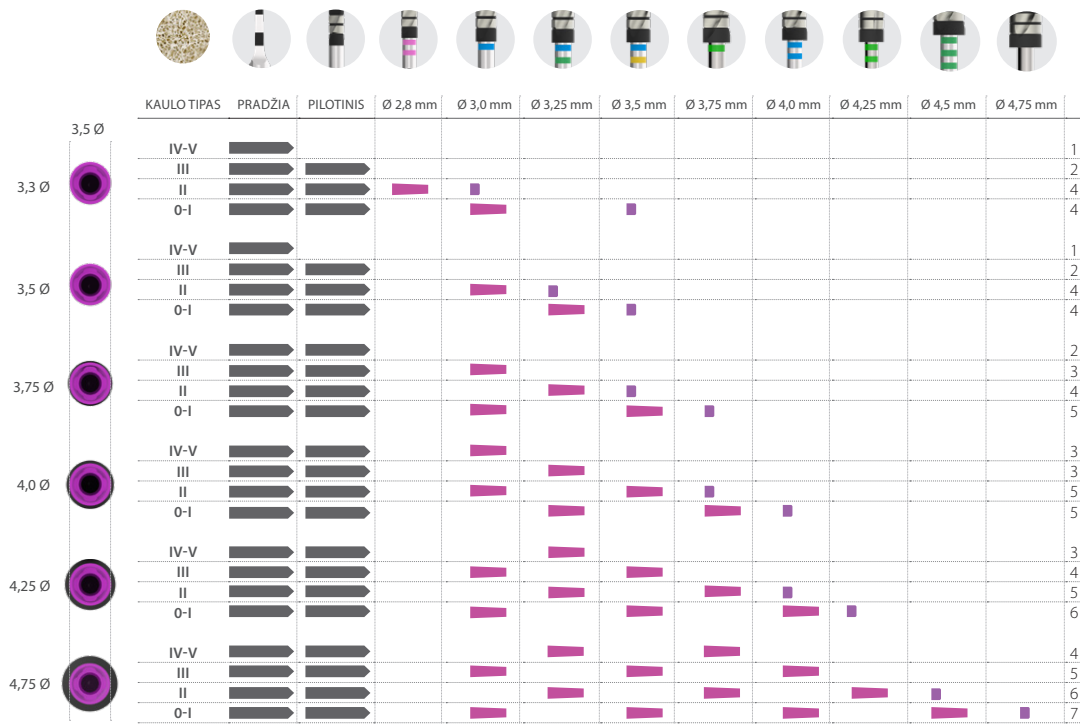

Implanto ilgis

(nuo 4,5 iki 6,5 mm)


 Bendras implanto ilgis
 Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu
 2-3 mm gręžimo gylis

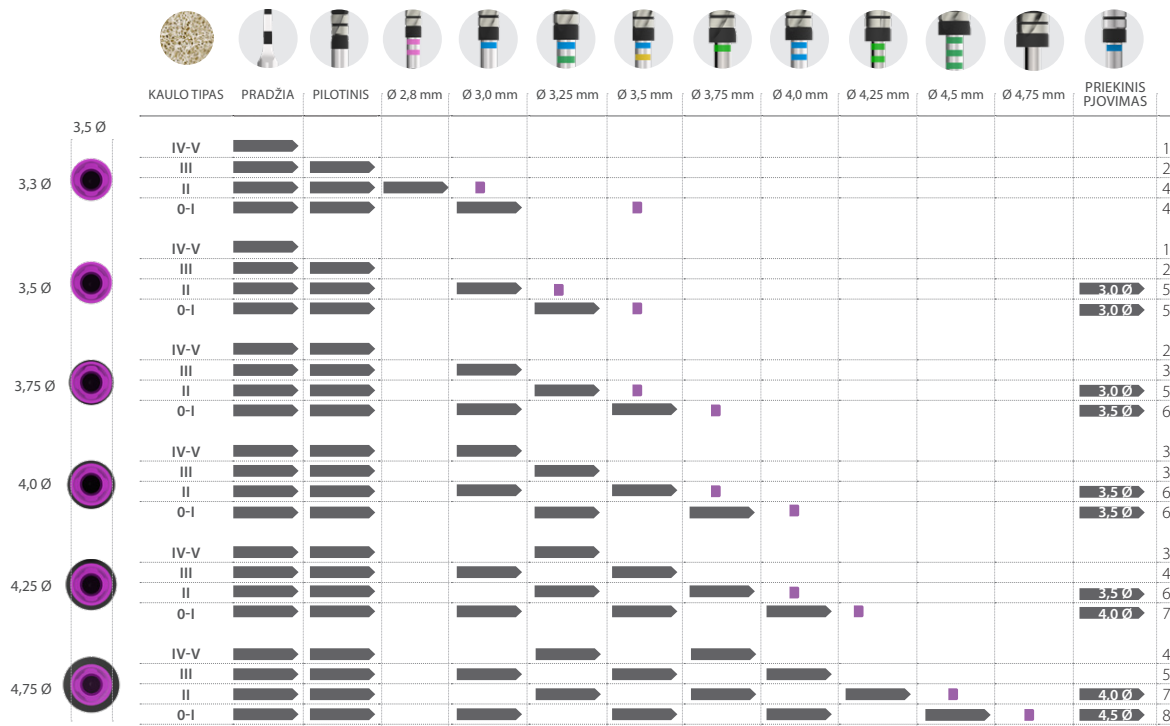

Implanto ilgis

(nuo 6,5 iki 13 mm)


 Bendras implanto ilgis
 5,5 mm gręžimo gylis
 2-3 mm gręžimo gylis

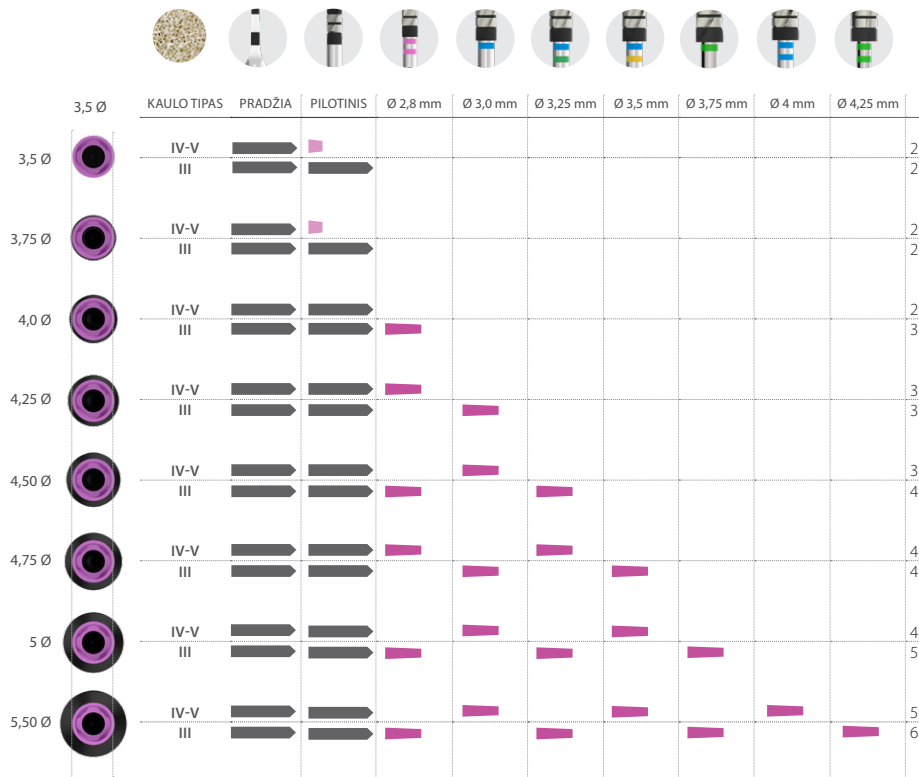

SVARBU:

Šis frezavimo eiliškumas
tinka tik CORE-X
implantams


Grežimo
 sekos kreiptuvas



Implanto ilgis (nuo 4,5 iki 5,5 mm)



— Bendras implanto ilgis
■ 2-3 mm gręžimo gylis

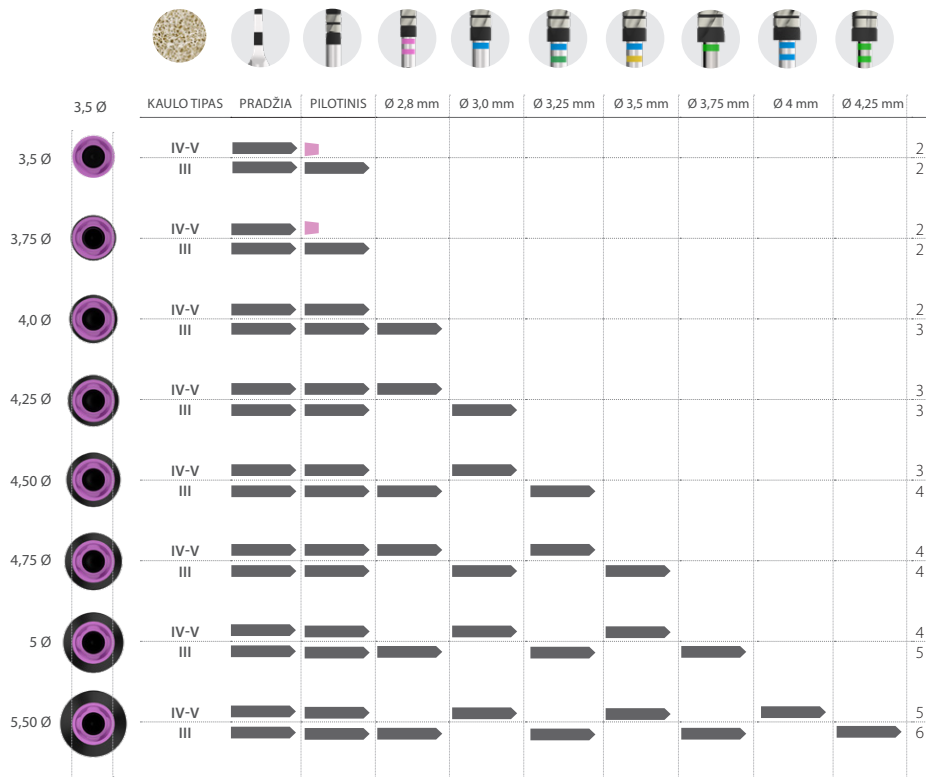

SVARBU:



Šis frezavimo eiliškumas
tinka tik CORE-X
implantams

Gręžimo
sekos kreiptuvas



Implanto ilgis


(nuo 10 iki 15 mm)

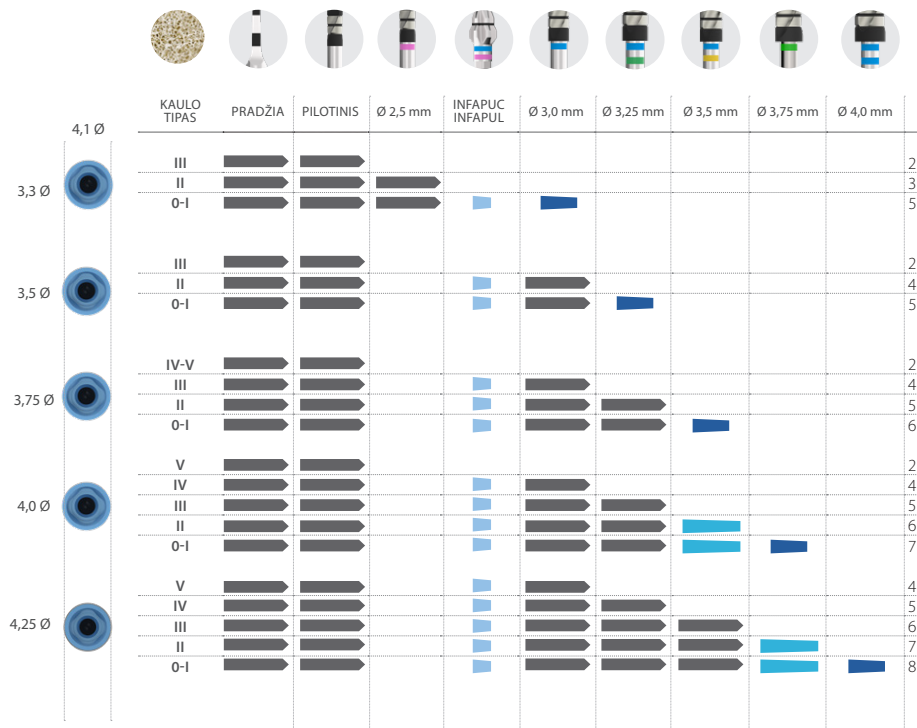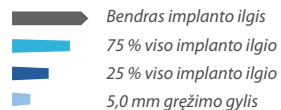

Implanto ilgis

(nuo 5,5 iki 8,5 mm)

- Bendras implanto ilgis
- XXØ Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu
- 5,0 mm gręžimo gylis
- 2-3 mm gręžimo gylis

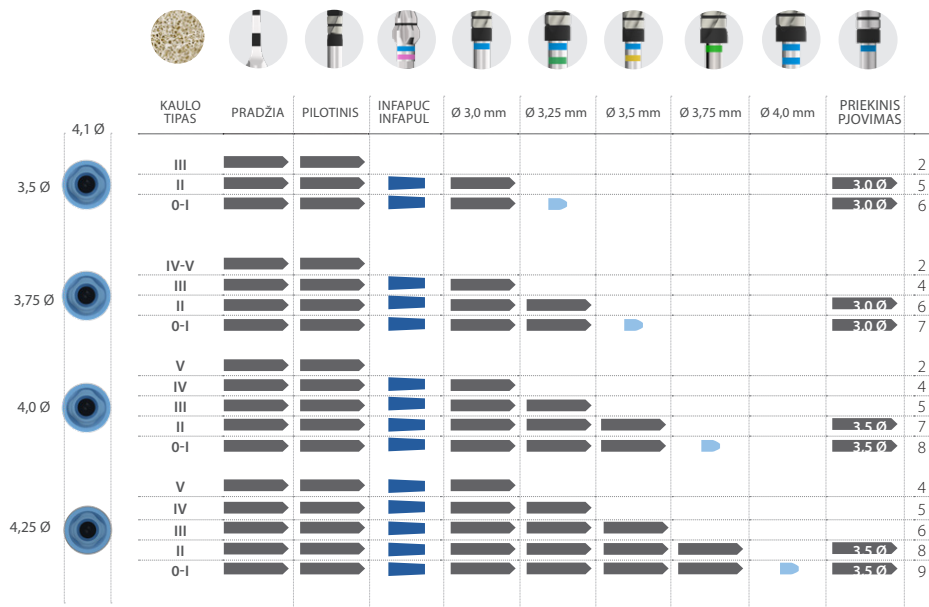




Implanto ilgis (nuo 8,5 iki 15 mm)



Bendras implanto ilgis
 6,5 mm gręžimo gylis
 3 mm gręžimo gylis

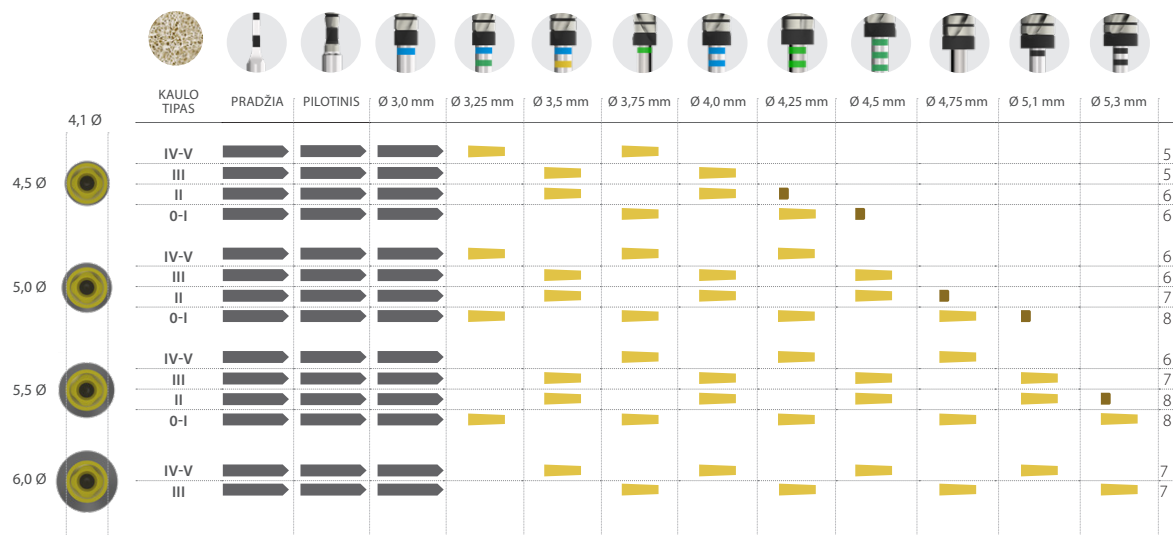

Implanto ilgis (nuo 4,5 iki 7,5 mm)

- Bendras implanto ilgis
- X,X $\varnothing$ Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu
- 3 mm gręžimo gylis

