



Rekomenduojamas gręžimo sekos vadovas

skirtas Interna BTI implantams



PASTABA: dėl gaminio prieinamumo skirtingose rinkose kreipkitės į platintoją

Gręžimo gylio žymės

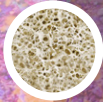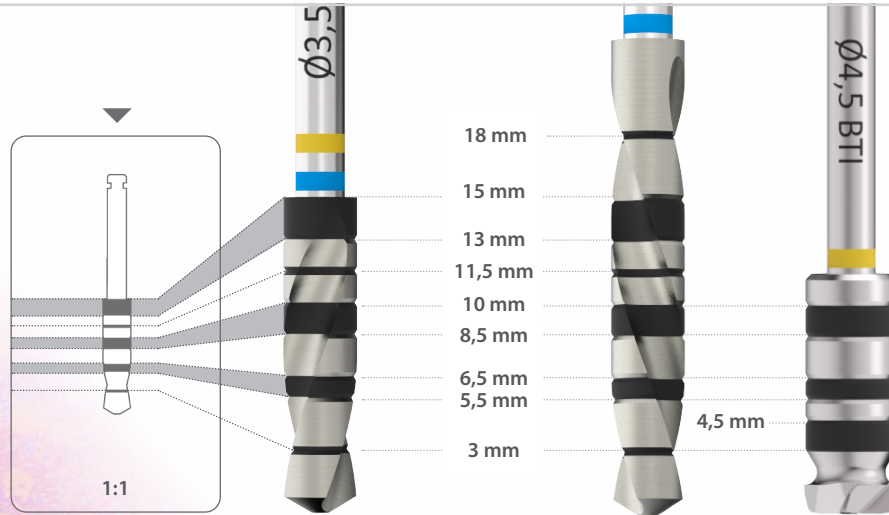

KLASĖ / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

GRĘŽTUVAS

Pradinis gręžtuvas
Gręžtuvas
Latakų gręžtuvas
Gręžtuvai priekiniams
dantims

APSISUKIMAI

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

DRĖKINIMAS

taip
ne
ne
ne

Implanto ilgis

(nuo 5,5 iki 13 mm)

 Bendras implanto ilgis
 mm Kintamasis
 2-3 mm gręžimo gylis


IMPLANTO ILGIS	 2,5 Ø						
	KAULO TIPAS	PRADŽIA	Ø 1,8 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,2 mm	Ø 2,3 mm	Ø 2,4 mm
5,5 - 6,5 - 7,5 mm	III						2
	II			5,5 mm			3
	0-I			5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	6
8,5 - 10 mm	III						2
	II			6,5 mm			3
	0-I			6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6
11,5 - 13 mm	III						2
	II			8,5 mm			3
	0-I			8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	6



Implanto ilgis (nuo 7,5 iki 13 mm)




 Bendras implanto ilgis
 6,5 mm gręžimo gylis
 2-3 mm gręžimo gylis

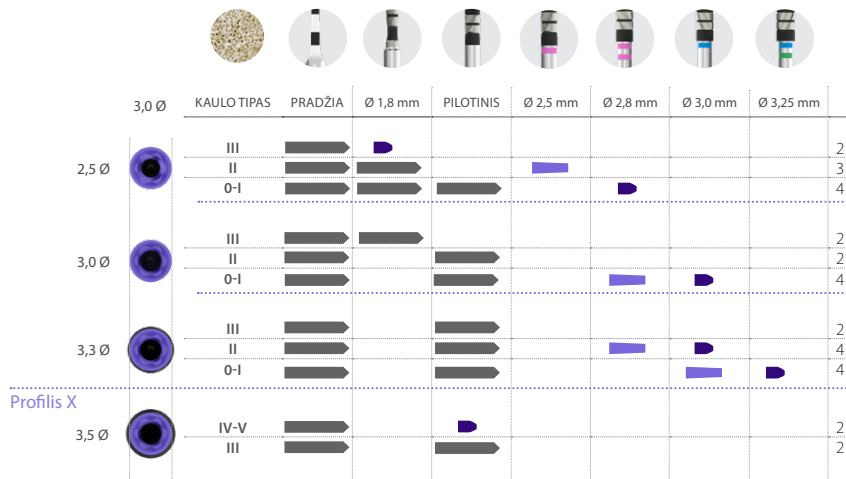

Implanto ilgis

(nuo 4,5 iki 6,5 mm)


-  Bendras implanto ilgis
-  Bendras implanto ilgis su nurodytu skersmens grąžtu
-  2-3 mm gręžimo gylis
-  2-3 mm gręžimo gylis. Tik 6,5 mm implantams

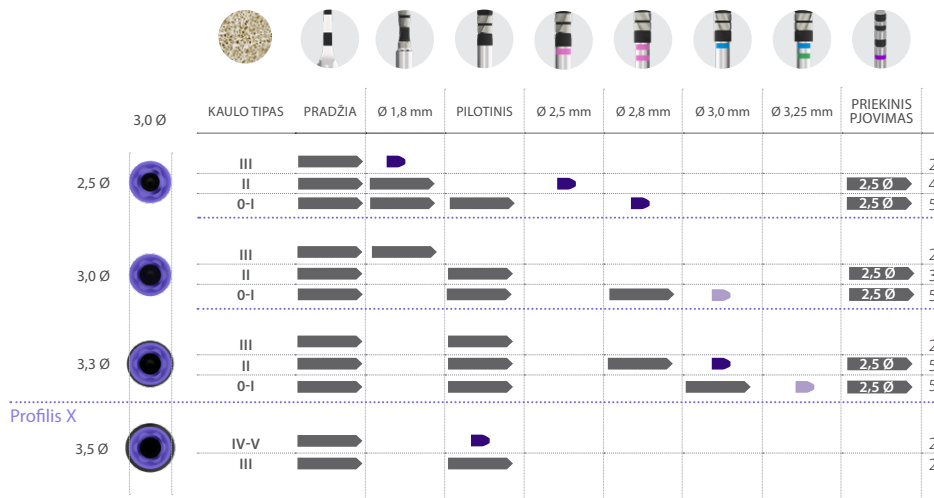

Implanto ilgis

(nuo 7,5 iki 15 mm)


 Bendras implanto ilgis
 6,5 mm gręžimo gylis
 2-3 mm gręžimo gylis

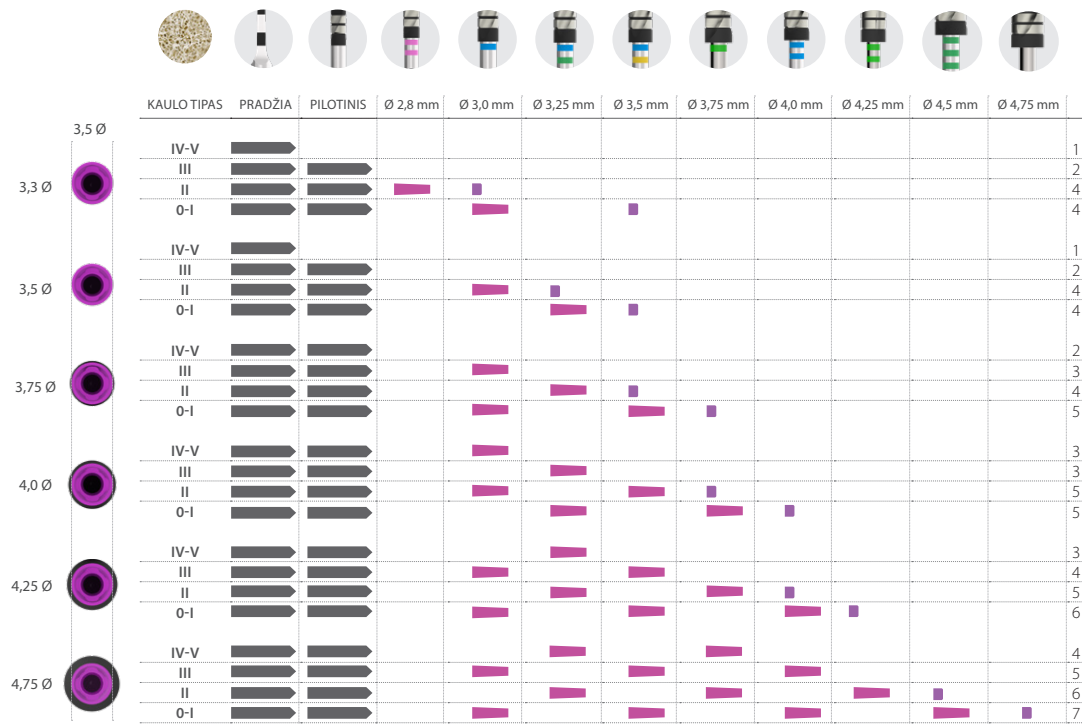

Implanto ilgis


(nuo 4,5 iki 6,5 mm)

 Bendras implanto ilgis
 Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu
 2-3 mm gręžimo gylis

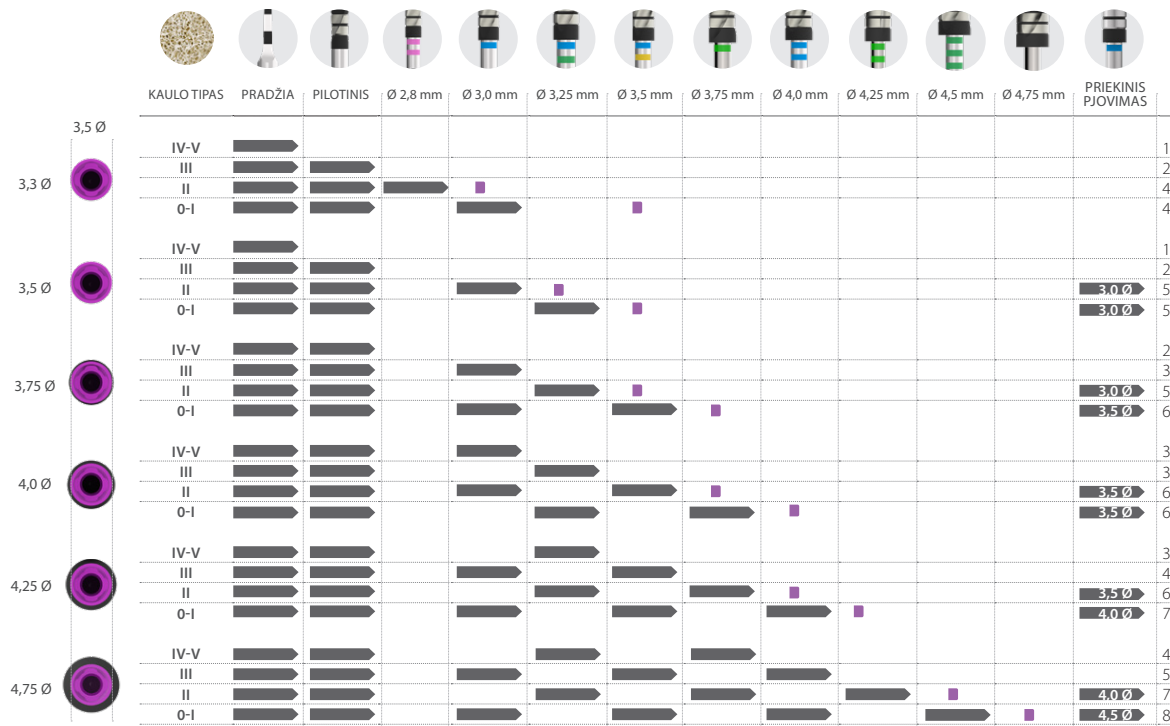

Implanto ilgis (nuo 6,5 iki 13 mm)

 Bendras implanto ilgis
 5,5 mm gręžimo gylis
 2-3 mm gręžimo gylis

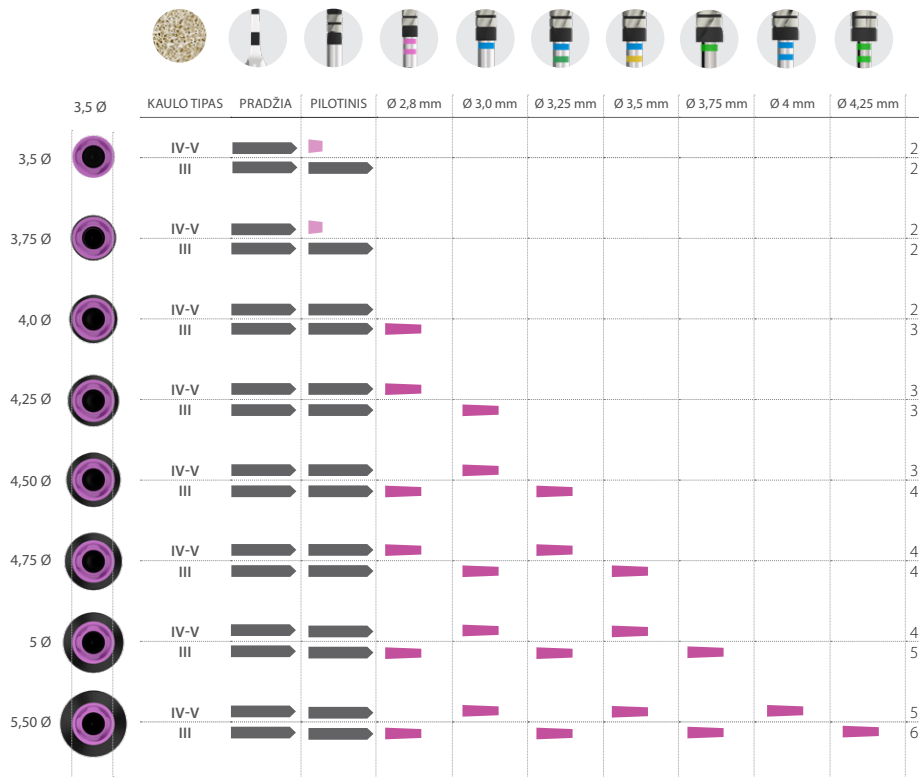

SVARBU:


Šis frezavimo eiliškumas
tinka tik CORE-X
implantams


 Grežimo
 sekos kreiptuvas



Implanto ilgis (nuo 4,5 iki 5,5 mm)

— Bendras implanto ilgis
■ 2-3 mm gręžimo gylis

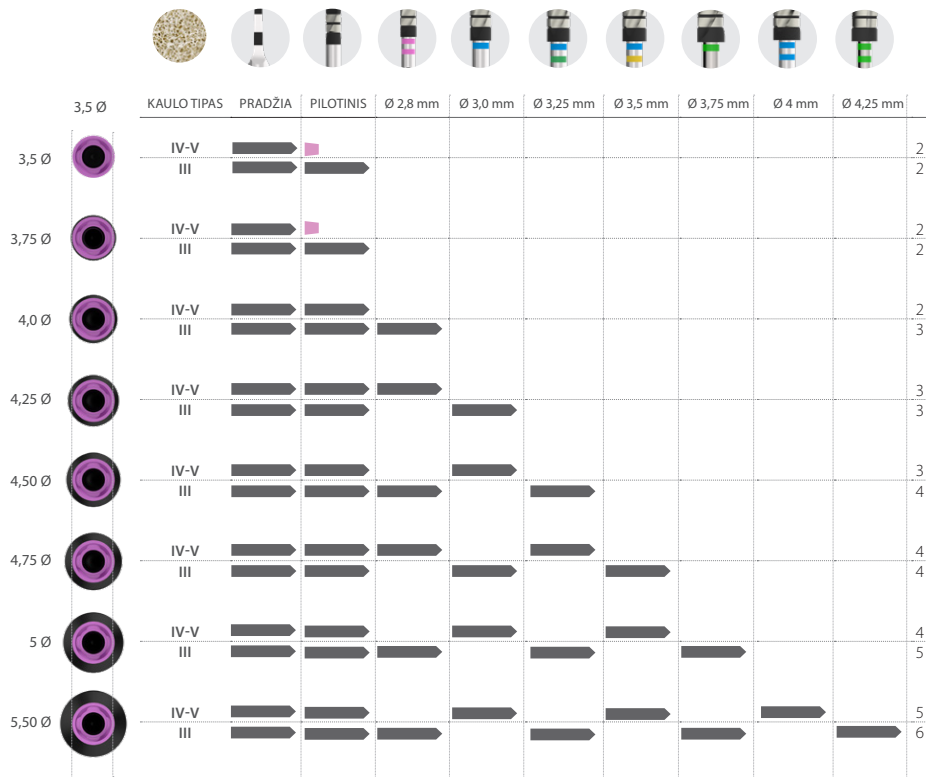

SVARBU:



Šis frezavimo eiliškumas
tinka tik CORE-X
implantams

Gręžimo
sekos kreiptuvas



Implanto ilgis

(nuo 10 iki 15 mm)

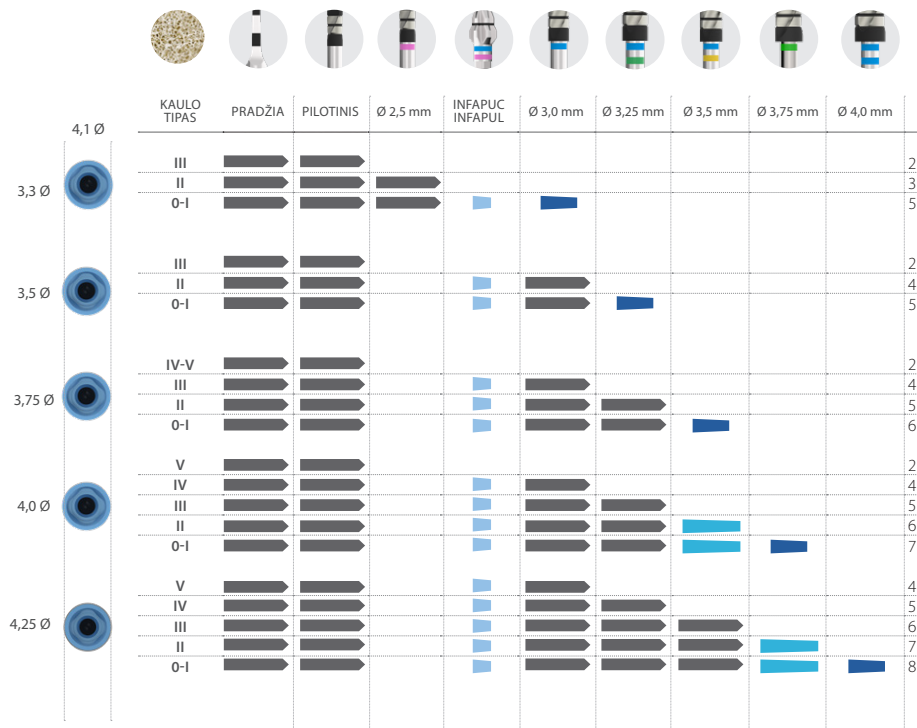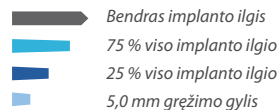

Implanto ilgis

(nuo 5,5 iki 8,5 mm)



Bendras implanto ilgis




Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu



5,0 mm gręžimo gylis



2-3 mm gręžimo gylis

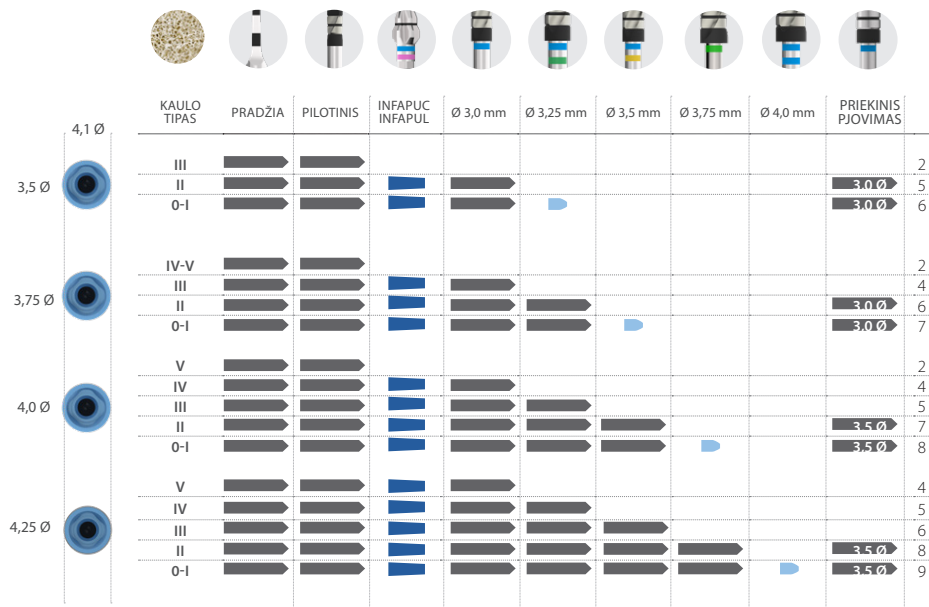




Implanto ilgis (nuo 8,5 iki 15 mm)



Bendras implanto ilgis
 6,5 mm gręžimo gylis
 3 mm gręžimo gylis

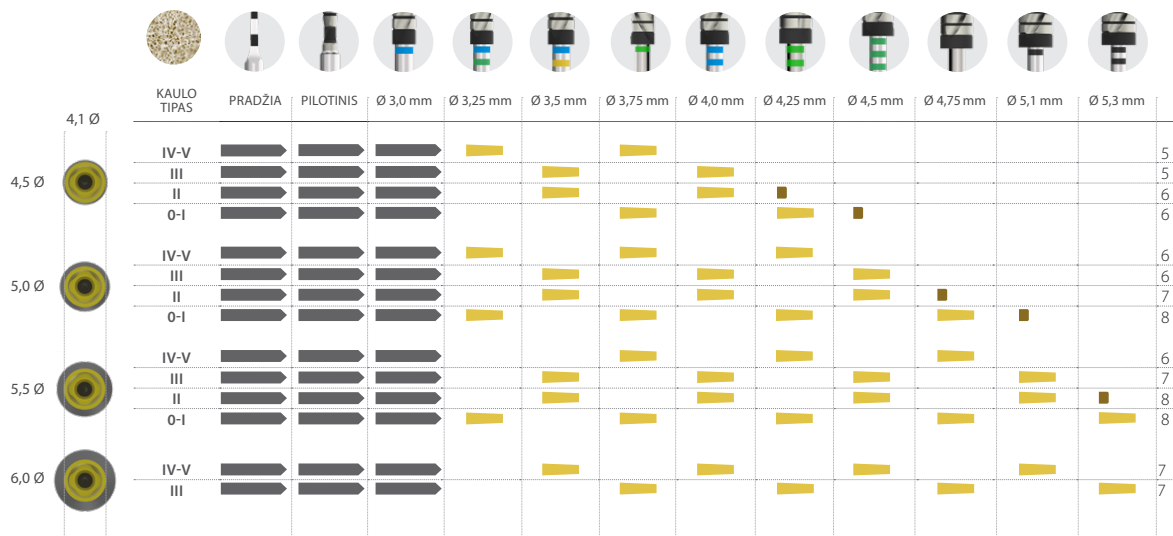

Implanto ilgis (nuo 4,5 iki 7,5 mm)

- ➔ Bendras implanto ilgis
- X,X Ø Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu
- 3 mm gręžimo gylis

