



Leteicamā urbšanas secības rokasgrāmata

Interna BTI implantiem



PIEZĪME: konsultējieties ar izplatītāju par produkta pieejamību dažādos tirgos

Urbšanas dziļuma atzīmes

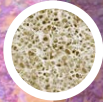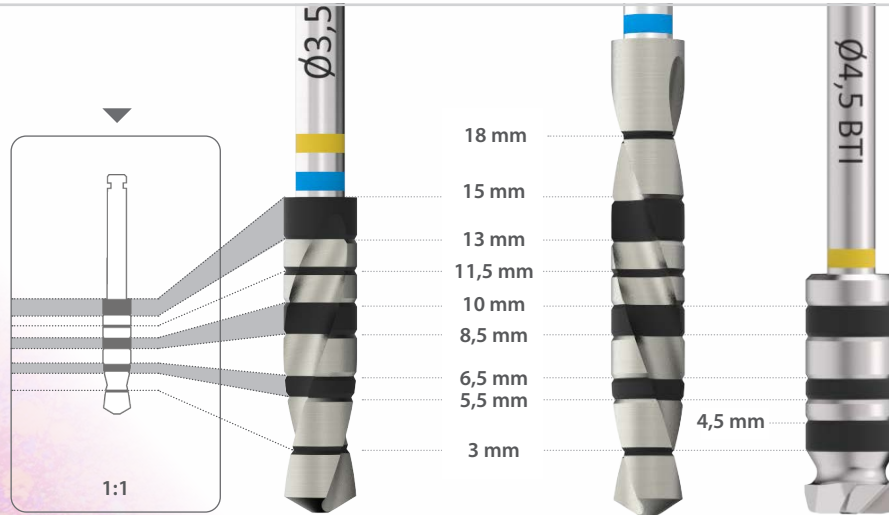

KLASE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

URBIS

Sākotnējais urbis
Urbis
Izlīdzināšanas urbis
Priekšējās griešanās urbjī

APGRIEZIENI


800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

IRIGĀCIJA

jā
nē
nē
nē

Implanta garums (no 6,5 līdz 13 mm)


Implanta kopējais garums
6,5 mm urbšanas dziļums
2-3 mm urbšanas dziļums

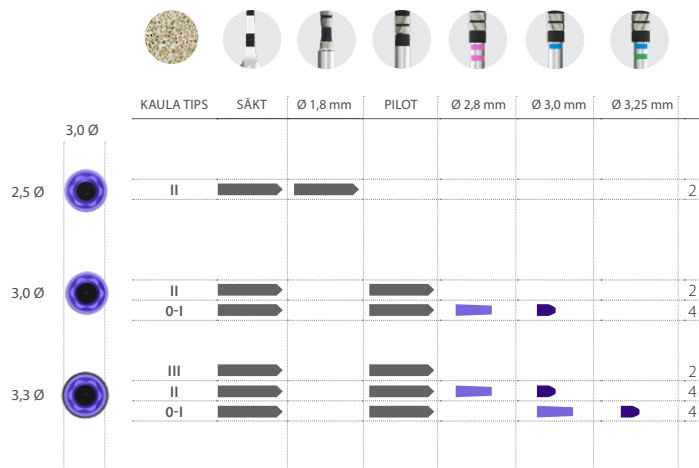

Implanta garums (no 4,5 līdz 5,5 mm)




Implanta kopējais garums
2-3 mm urbšanas dziļums

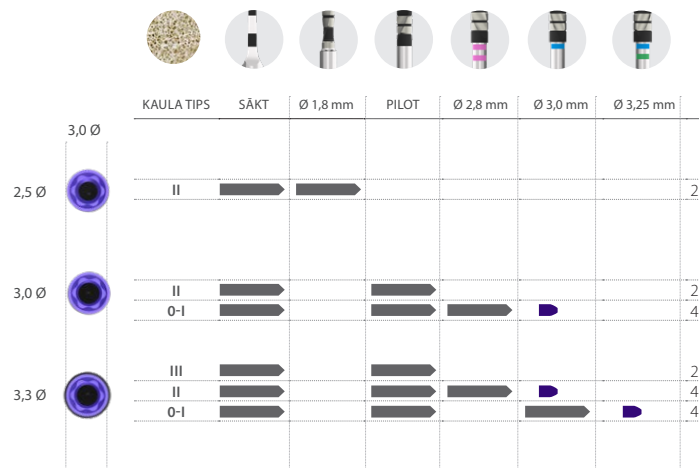


Implanta garums (no 7,5 līdz 15 mm)

Implanta kopējais garums
6,5 mm urbšanas dziļums
2-3 mm urbšanas dziļums

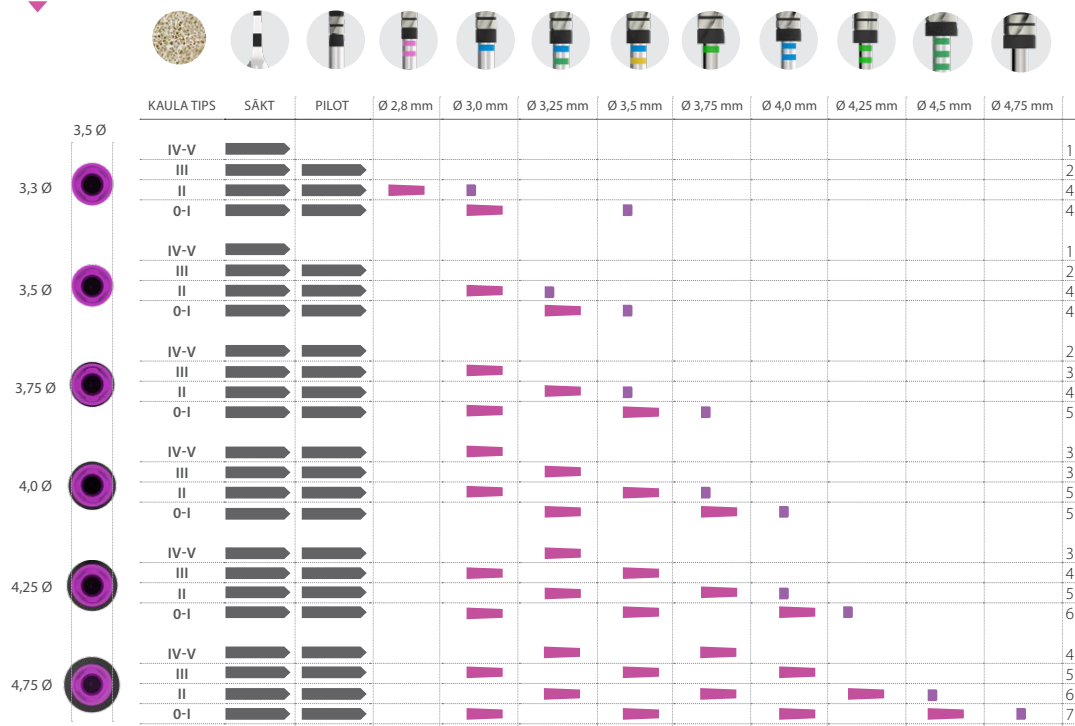


Implanta garums (no 4,5 līdz 6,5 mm)

Implanta kopējais garums
X.X Ø Implanta kopējais garums ar noteikta diametra urbi
2-3 mm urbšanas dziļums

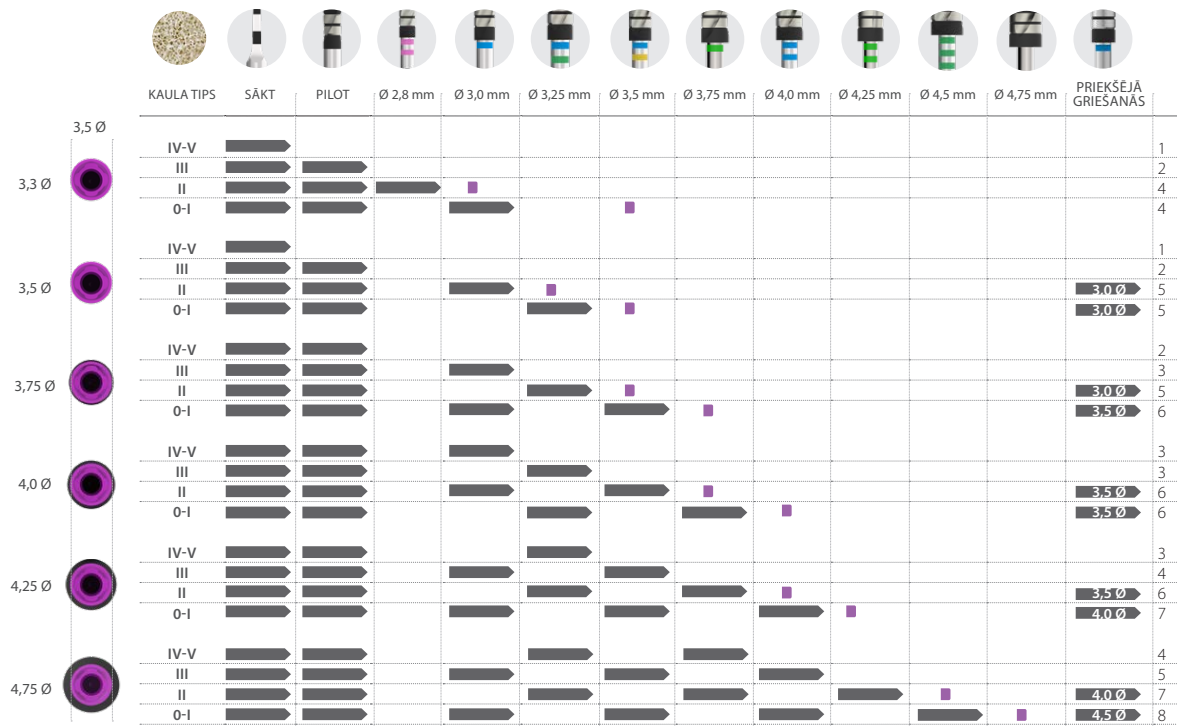

Implanta garums (no 6,5 līdz 13 mm)


Implanta kopējais garums
5,5 mm uršanas dziļums

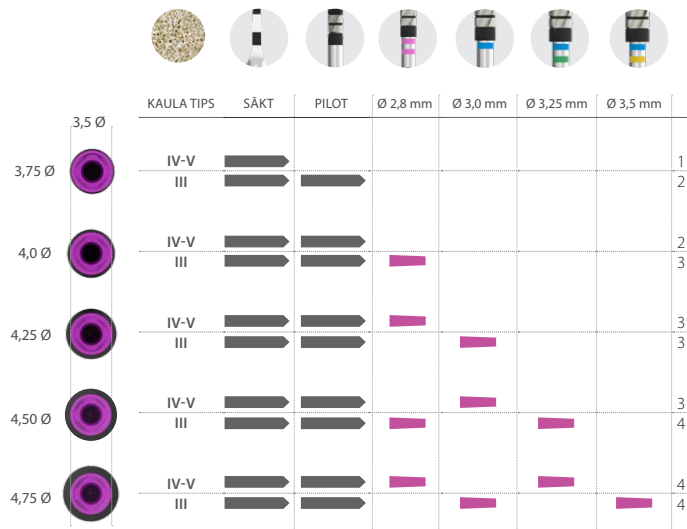

SVARĪGI:
frēzēšanas secība attiecas
tikai uz CORE-X® implantiem

Implanta garums (no 4,5 līdz 5,5 mm)

Implanta kopējais garums

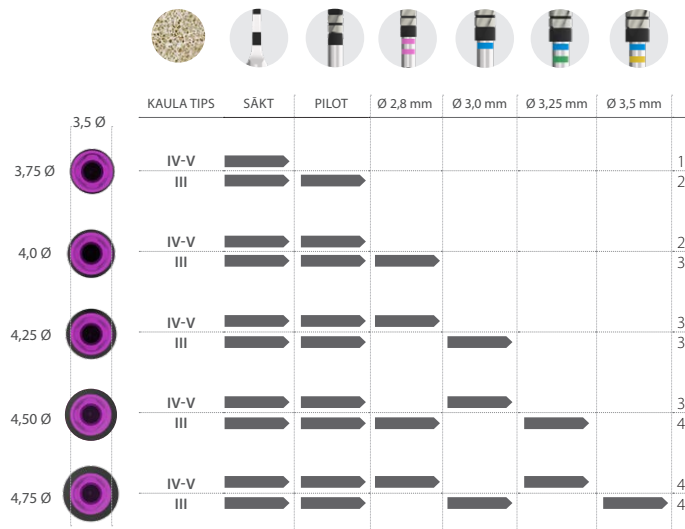


SVARĪGI:
frēzēšanas secība attiecas
tikai uz CORE-X® implantiem

Implanta garums (no 10 līdz 15 mm)




- Implanta kopējais garums
- 75 % no implanta kopējā garuma
- 25 % no implanta kopējā garuma
- 5,0 mm uršanas dziļums

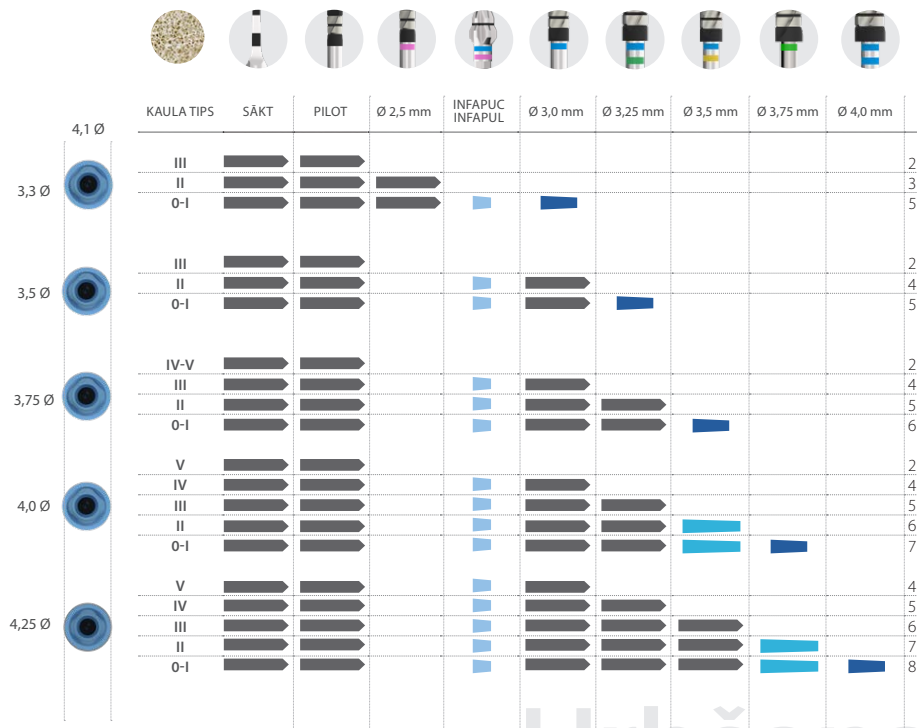

Implanta garums

(no 5,5 līdz 8,5 mm)


- Implanta kopējais garums
- Implanta kopējais garums ar noteikta diametra urbi
- 5,0 mm urbšanas dziļums
- 2-3 mm urbšanas dziļums

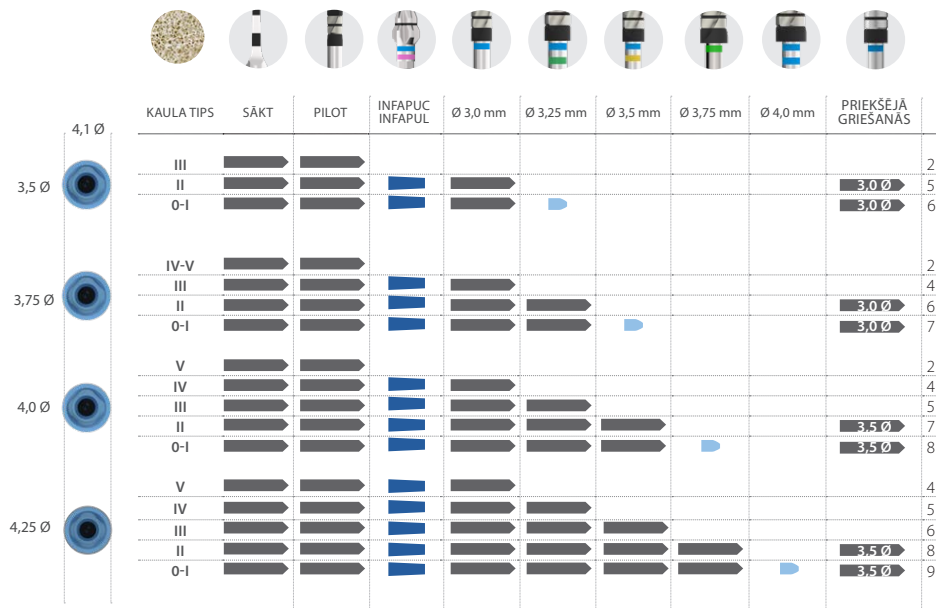

Implanta garums (no 8,5 līdz 15 mm)



Implanta kopējais garums
6,5 mm urbšanas dziļums
3 mm urbšanas dziļums

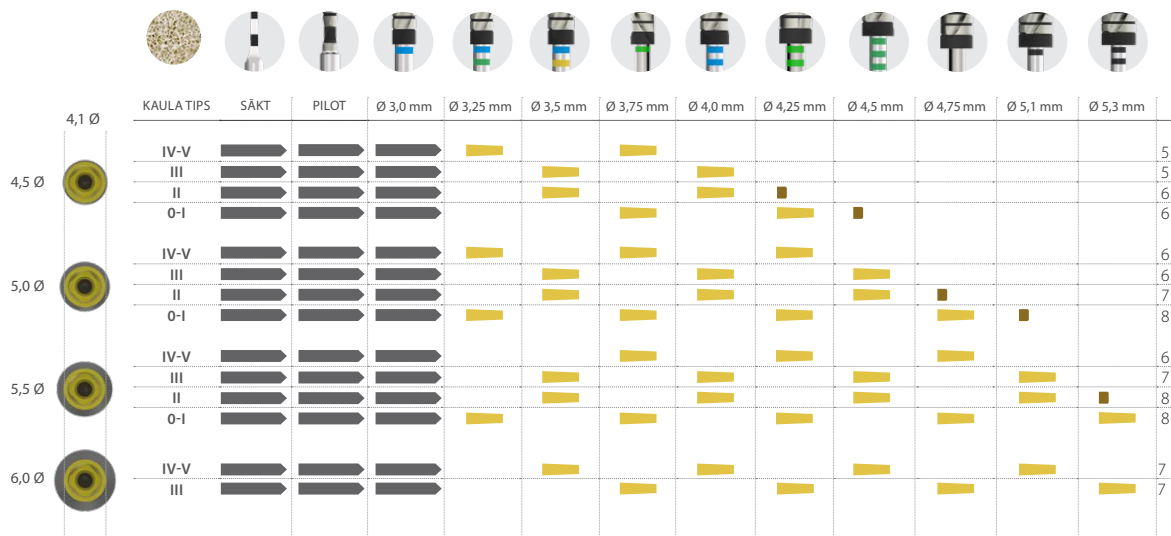

Implanta garums

(no 4,5 līdz 7,5 mm)

- Implanta kopējais garums
- X,X Ø Implanta kopējais garums ar noteikta diametra urbi
- 3 mm urbšanas dziļums

