



Leteicamā urbšanas secības rokasgrāmata

Interna BTI implantiem



PIEZĪME: konsultējieties ar izplatītāju par produkta pieejamību dažādos tirgos

Urbšanas dziļuma atzīmes

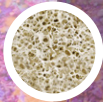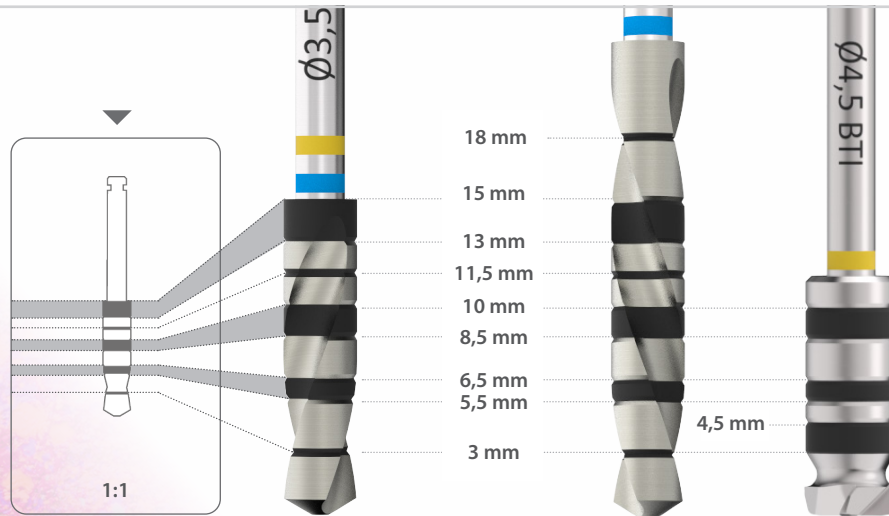

KLASE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

URBIS

Sākotnējais urbis
Urbis
Izlīdzināšanas urbis
Priekšējās griešanās urbj

APGRIEZIENI


800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

IRIGĀCIJA

jā
nē
nē
nē

Implanta garums (no 6,5 līdz 13 mm)


Implanta kopējais garums
6,5 mm urbšanas dziļums
2-3 mm urbšanas dziļums

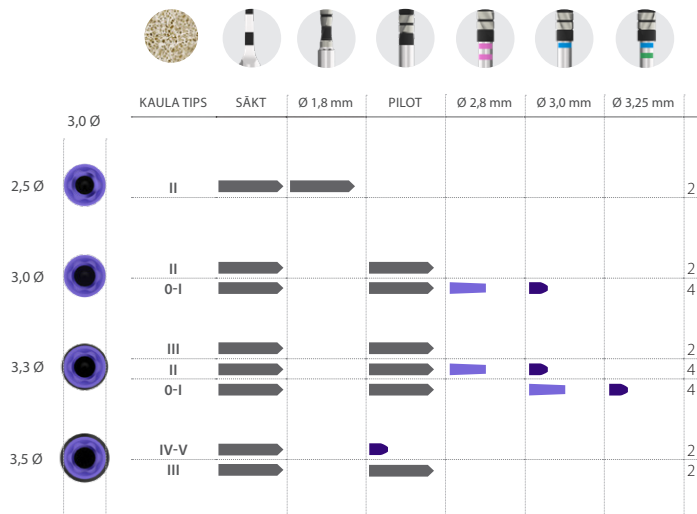

Implanta garums (no 4,5 līdz 5,5 mm)




Implanta kopējais garums
2-3 mm urbšanas dziļums

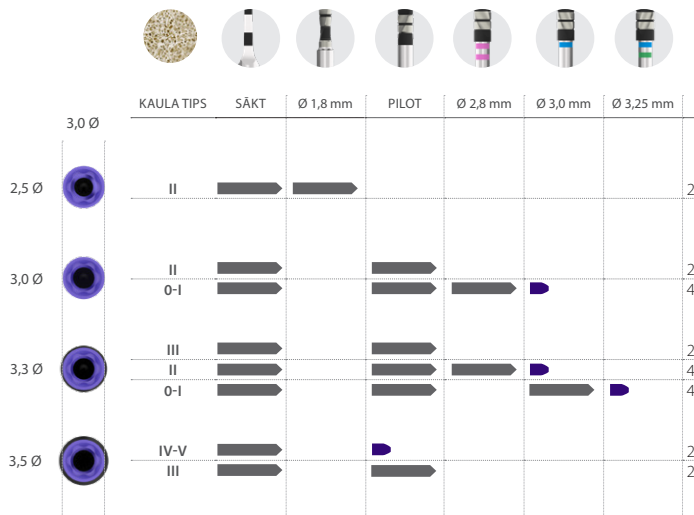


Implanta garums (no 7,5 līdz 15 mm)

Implanta kopējais garums
6,5 mm urbšanas dziļums
2-3 mm urbšanas dziļums

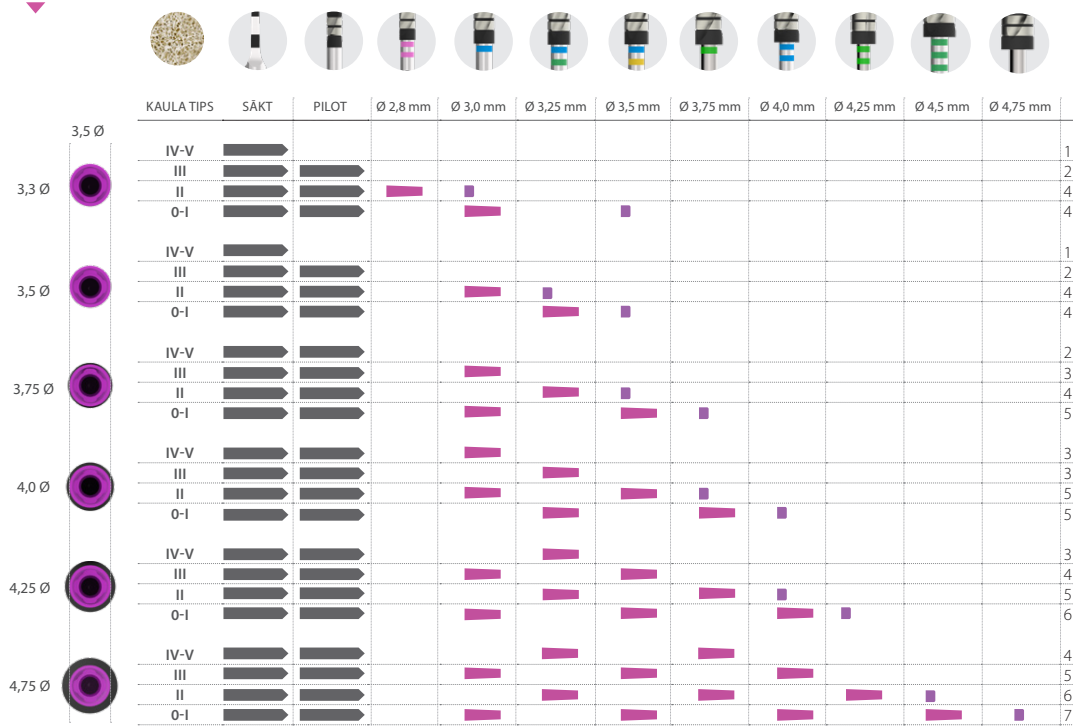


Implanta garums (no 4,5 līdz 6,5 mm)

Implanta kopējais garums
X.X Ø Implanta kopējais garums ar noteikta diametra urbi
2-3 mm urbšanas dziļums

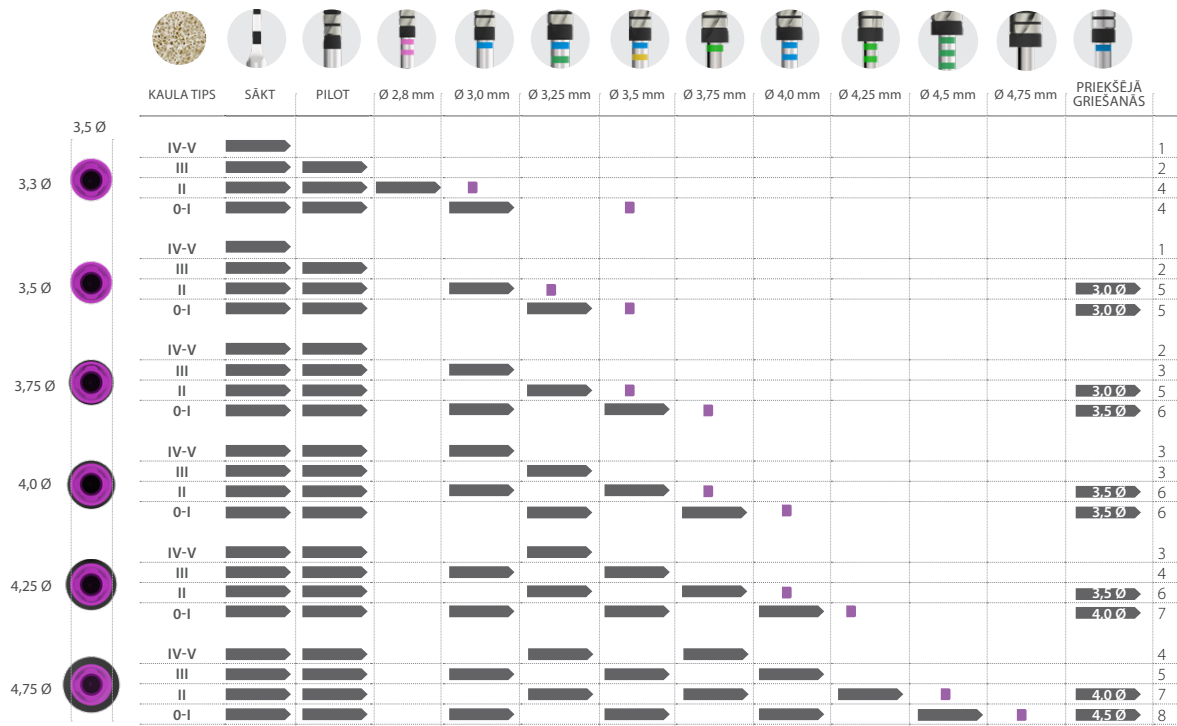

Implanta garums (no 6,5 līdz 13 mm)

Implanta kopējais garums
5,5 mm urbšanas dziļums
2-3 mm urbšanas dziļums

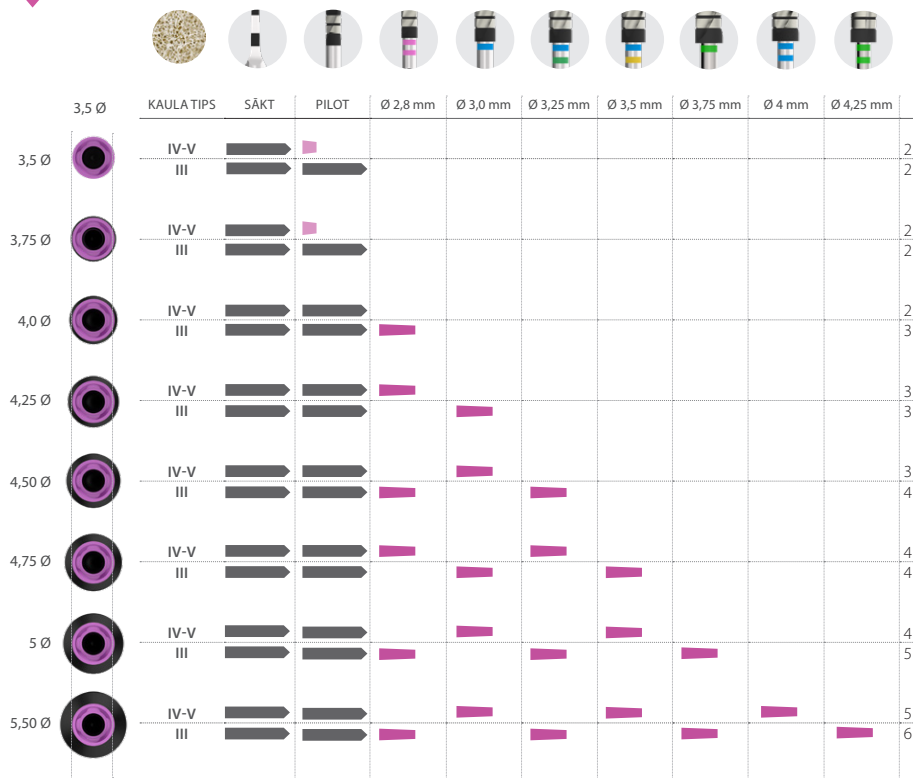


SVARĪGI:
frēzēšanas secība
attiecas tikai uz
CORE-X implantiem

Urbšanas
secības rokasgrāmata



Implanta garums (no 4,5 līdz 5,5 mm)

Implanta kopējais garums
2-3 mm urbšanas dziļums

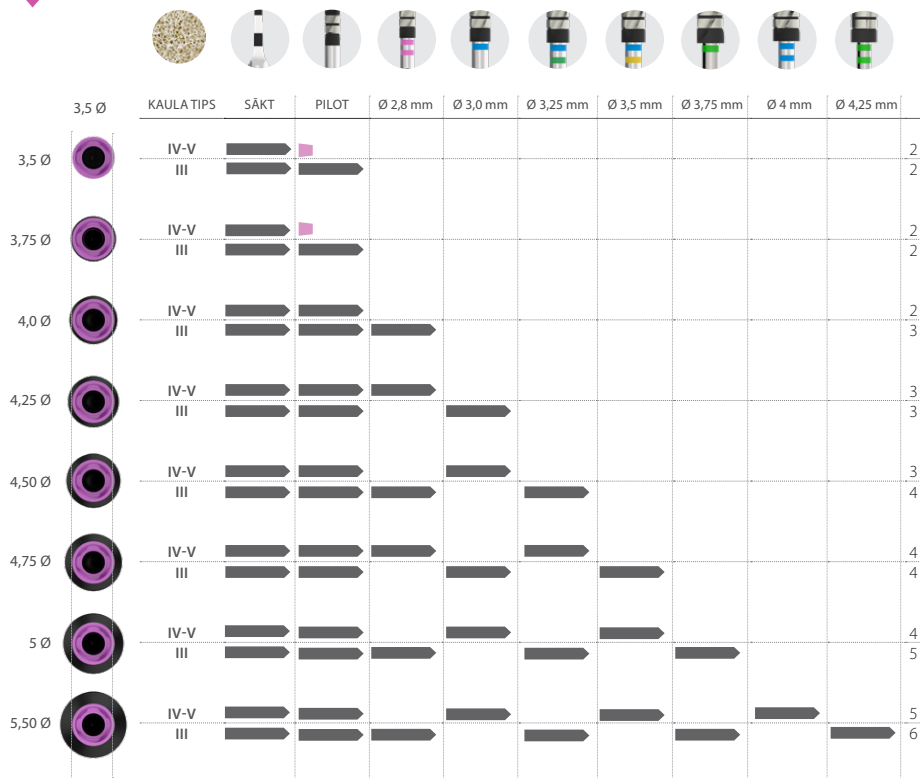

SVARĪGI:
frēzēšanas secība
attiecas tikai u
CORE-X implantiem


Urbšanas
secības rokasgrāmata



Implanta garums (no 10 līdz 15 mm)




- Implanta kopējais garums
- 75 % no implanta kopējā garuma
- 25 % no implanta kopējā garuma
- 5,0 mm urbšanas dziļums

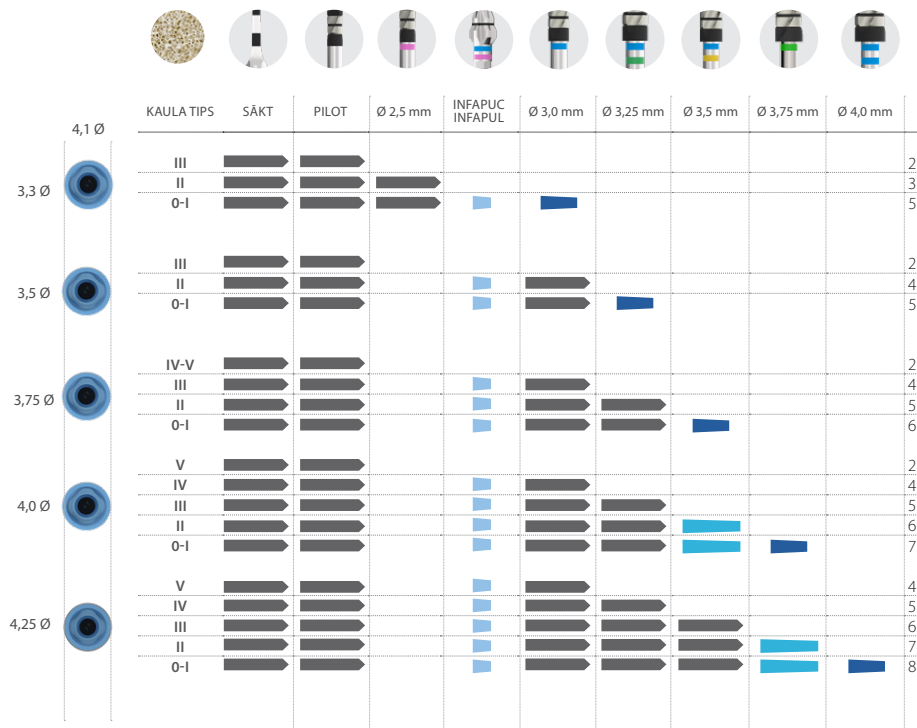

Implanta garums

(no 5,5 līdz 8,5 mm)

- Implanta kopējais garums
- Implanta kopējais garums ar noteikta diametra urbi
- 5,0 mm urbšanas dziļums
- 2-3 mm urbšanas dziļums

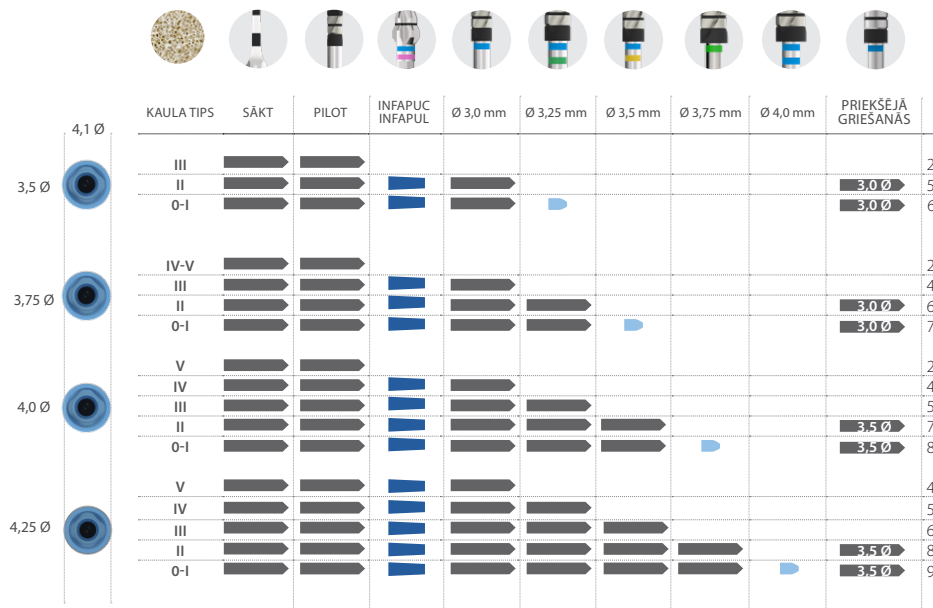




Implanta garums

(no 8,5 līdz 15 mm)



Implanta kopējais garums
6,5 mm urbšanas dziļums
3 mm urbšanas dziļums

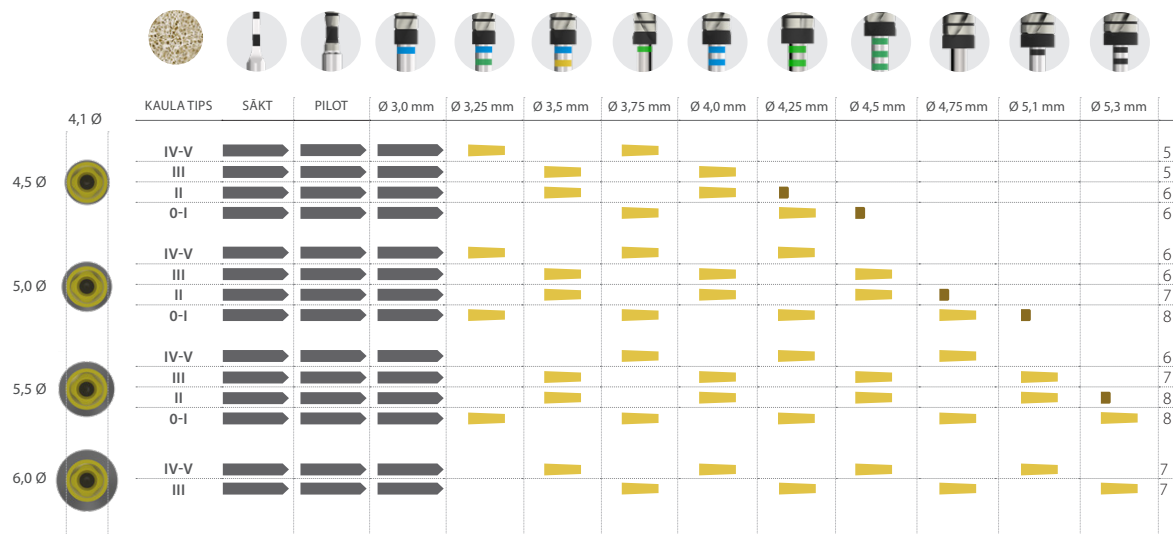





Implanta garums

(no 4,5 līdz 7,5 mm)



-  Implanta kopējais garums
-  Implanta kopējais garums ar noteikta diametra urbi
-  3 mm urbšanas dziļums

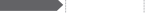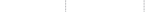	KAULA TIPS	SĀKT	PILOT	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,25 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,75 mm	Ø 5,1 mm	Ø 5,3 mm	PRIEKŠĒJĀ GRIEŠANĀS	
4,1 Ø															
4,5 Ø	IV-V														5
	III														5
	II														7
	0-I														7
5,0 Ø	IV-V														6
	III														6
	II														8
	0-I														9
5,5 Ø	IV-V														6
	III														7
	II														9
	0-I														9
6,0 Ø	IV-V														7
	III														7

