



Anbefalt boresekvensguide

for Interna BTI-implantater



MERK: Ta kontakt med din distributør for å få informasjon om tilgjengeligheten av produktet i de ulike markedene

Boredybdemerker

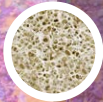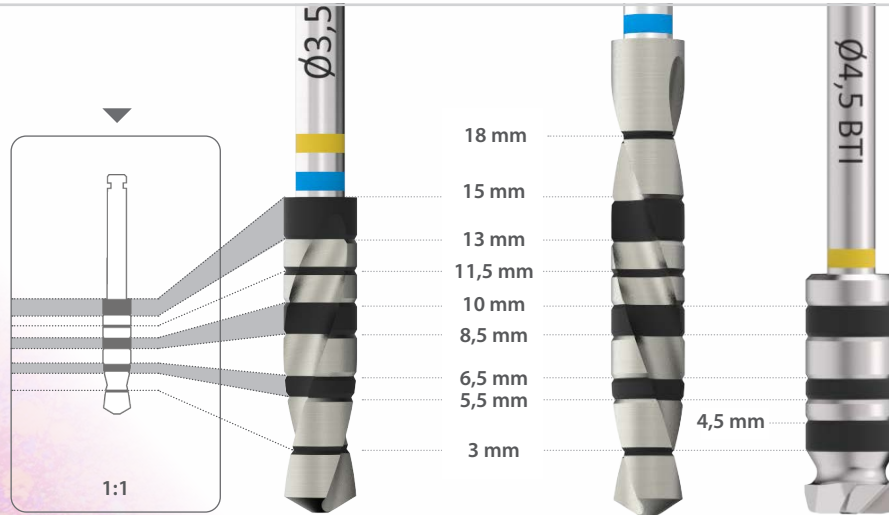

KLASSE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BOR

Første boring
 Bor
 Forskningsbor
 Frontskjærende bor

REVOLUSJONER


800 - 1.000 rpm
 50 - 75 rpm
 150 - 200 rpm
 50 - 75 rpm

IRRIGASJON

ja
 nei
 nei
 nei


Implantatlengder (fra 6,5 til 13 mm)

 Total lengde på implantatet
 6,5 mm boreddybde
 2-3 mm boreddybde

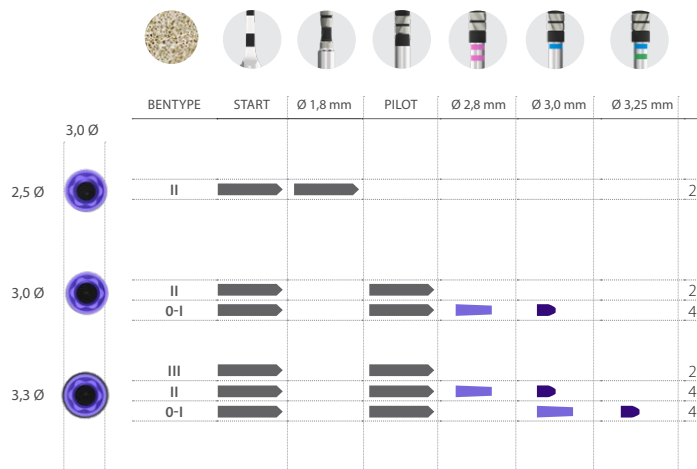

Implantatlengder (fra 4,5 til 5,5 mm)

 Total lengde på implantatet
 2-3 mm boreddybde

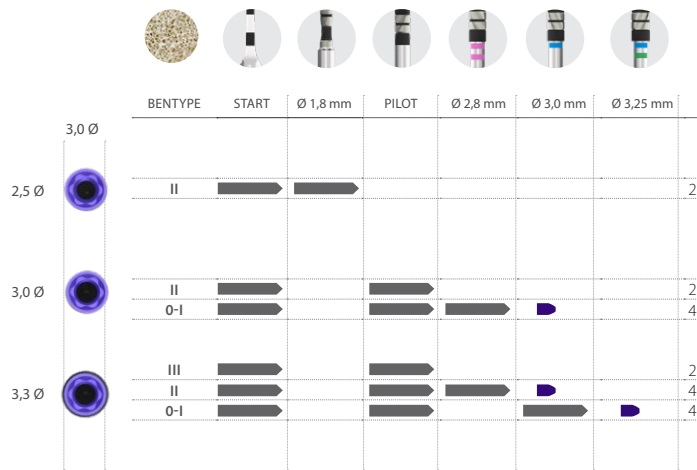



Implantatlengder

(fra 7,5 til 15 mm)

— Total lengde på implantatet
— 6,5 mm boreddybde
■ 2-3 mm boreddybde





Implantatlengder

(fra 4,5 til 6,5 mm)



Total lengde på implantatet



Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor



2-3 mm boredybde



	BENTYPE	START	PILOT	Ø 2,8 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,25 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,75 mm	FRONTSKJÆRING	
3,5 Ø	IV-V	■												1
3,3 Ø	III	■	■											2
	II	■	■	■	■									4
3,5 Ø	0-I	■	■		■		■							4
	IV-V	■	■											1
3,5 Ø	III	■	■											2
	II	■	■		■	■	■						3,0 Ø	5
3,5 Ø	0-I	■	■			■	■						3,0 Ø	5
3,75 Ø	IV-V	■	■		■									2
	III	■	■		■									3
3,75 Ø	II	■	■			■	■						3,0 Ø	5
	0-I	■	■		■		■	■					3,5 Ø	6
4,0 Ø	IV-V	■	■		■									3
	III	■	■		■									3
4,0 Ø	II	■	■		■		■	■					3,5 Ø	6
	0-I	■	■		■		■	■	■				3,5 Ø	6
4,25 Ø	IV-V	■	■		■									3
	III	■	■		■		■	■						4
4,25 Ø	II	■	■		■		■	■	■	■			3,5 Ø	6
	0-I	■	■		■		■	■	■	■	■		4,0 Ø	7
4,75 Ø	IV-V	■	■		■									4
	III	■	■		■		■	■	■					5
4,75 Ø	II	■	■		■		■	■	■	■	■		4,0 Ø	7
	0-I	■	■		■		■	■	■	■	■	■	4,5 Ø	8

Smal/CORE plattform

Plattformdiameter Ø3,5 mm


Boresekvensguide



btì
Human
Technology

Implantatlengder (fra 6,5 til 13 mm)

 Total lengde på implantatet
 5,5 mm boredybde

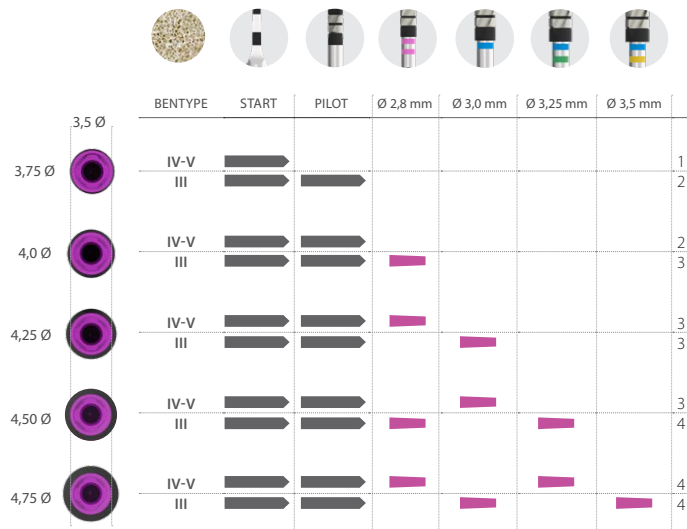


VIKTIG:
Fresesekvensen gjelder kun
for CORE-X® -implantater

Boresekvensguide

Implantatlengder

(fra 4,5 til 5,5 mm)

➡ Total lengde på implantatet


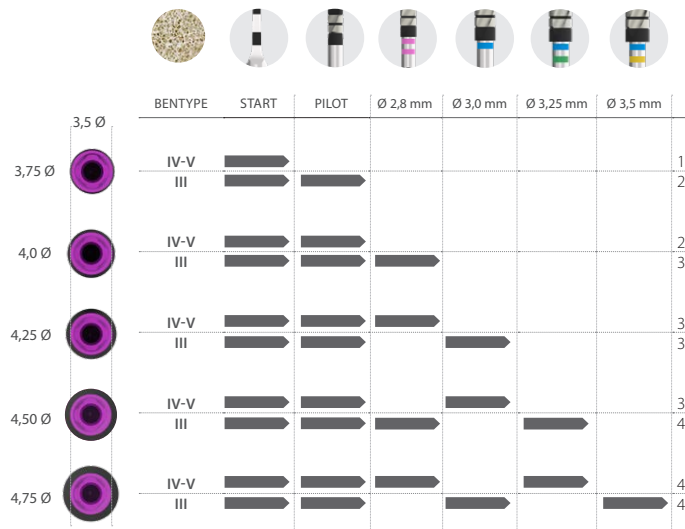


VIKTIG:
Fresesekvensen gjelder kun
for CORE-X® -implantater

Boresekvensguide

Implantatlengder

(fra 10 til 15 mm)

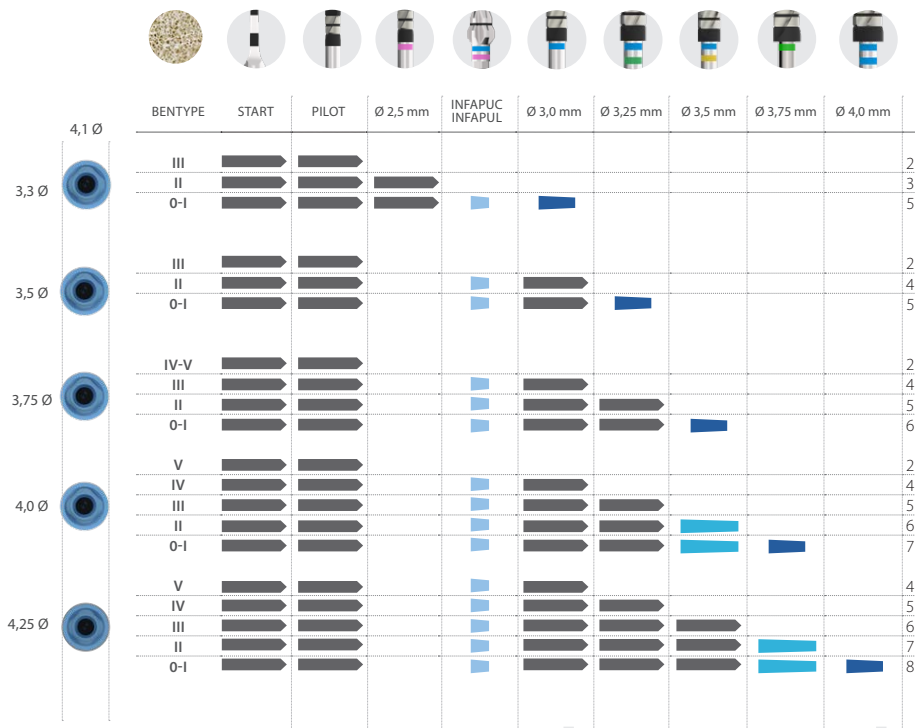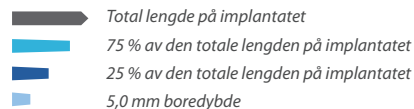


Boresekvensguide



Implantatlengder

(fra 5,5 til 8,5 mm)


- Total lengde på implantatet
- Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor
- 5,0 mm boreddybde
- 2-3 mm boreddybde

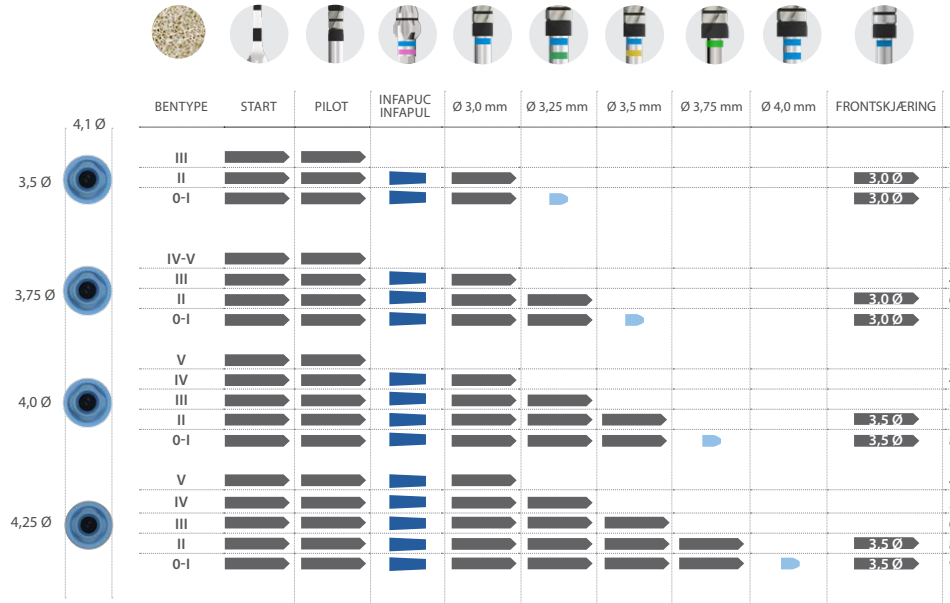

Implantatlengder (fra 8,5 til 15 mm)



 Total lengde på implantatet
 6,5 mm boreddybde
 3 mm boreddybde

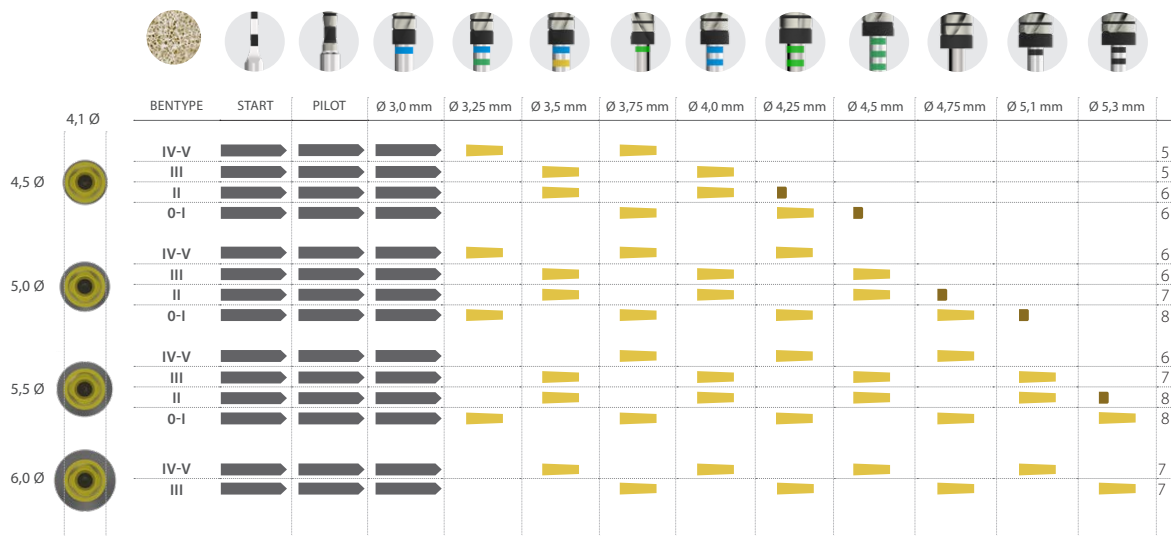

Implantatlengder

(fra 4,5 til 7,5 mm)

- Total lengde på implantatet
- X,X Ø Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor
- 3 mm boreddybde

