



Anbefalt boresekvensguide

for Interna BTI-implantater



MERK: Ta kontakt med din distributør for å få informasjon om tilgjengeligheten av produktet i de ulike markedene

Boredybdemerker

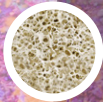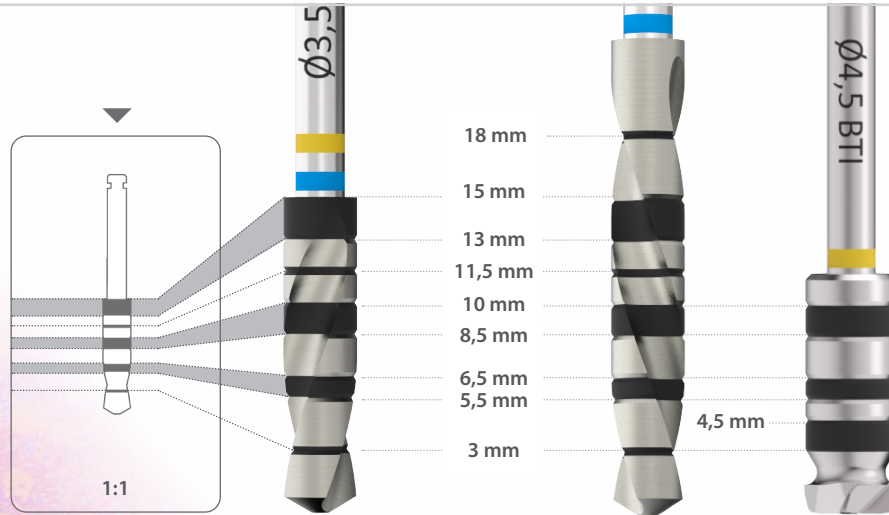

KLASSE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BOR

Første boring
 Bor
 Forskningsbor
 Frontskjærende bor

REVOLUSJONER

800 - 1.000 rpm
 50 - 75 rpm
 150 - 200 rpm
 50 - 75 rpm


IRRIGASJON

ja
 nei
 nei
 nei

Implantatlengder (fra 6,5 til 13 mm)




 Total lengde på implantatet
 6,5 mm boredybde
 2-3 mm boredybde

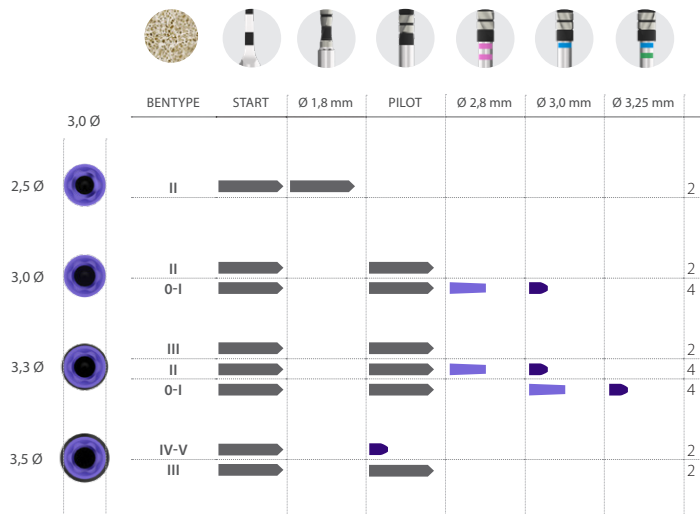

Implantatlengder

(fra 4,5 til 5,5 mm)


 Total lengde på implantatet
 2-3 mm boreddybde

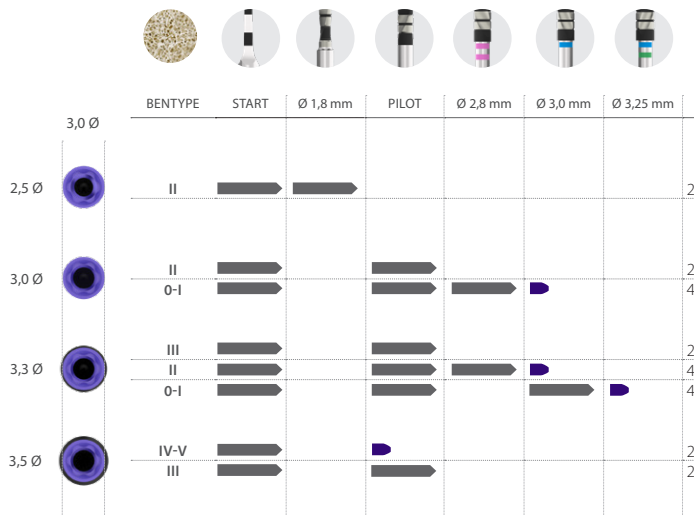

Implantatlengder

(fra 7,5 til 15 mm)


 Total lengde på implantatet
 6,5 mm boredybde
 2-3 mm boredybde

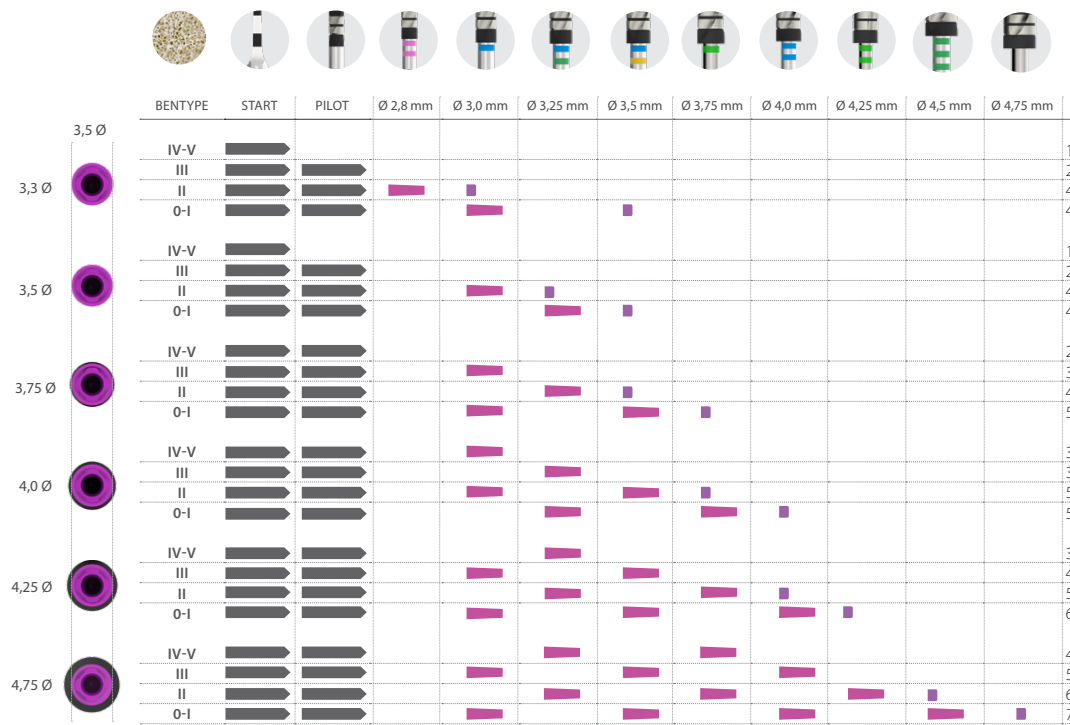

Implantatlengder


(fra 4,5 til 6,5 mm)

 Total lengde på implantatet
 Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor
 2-3 mm boreddybde

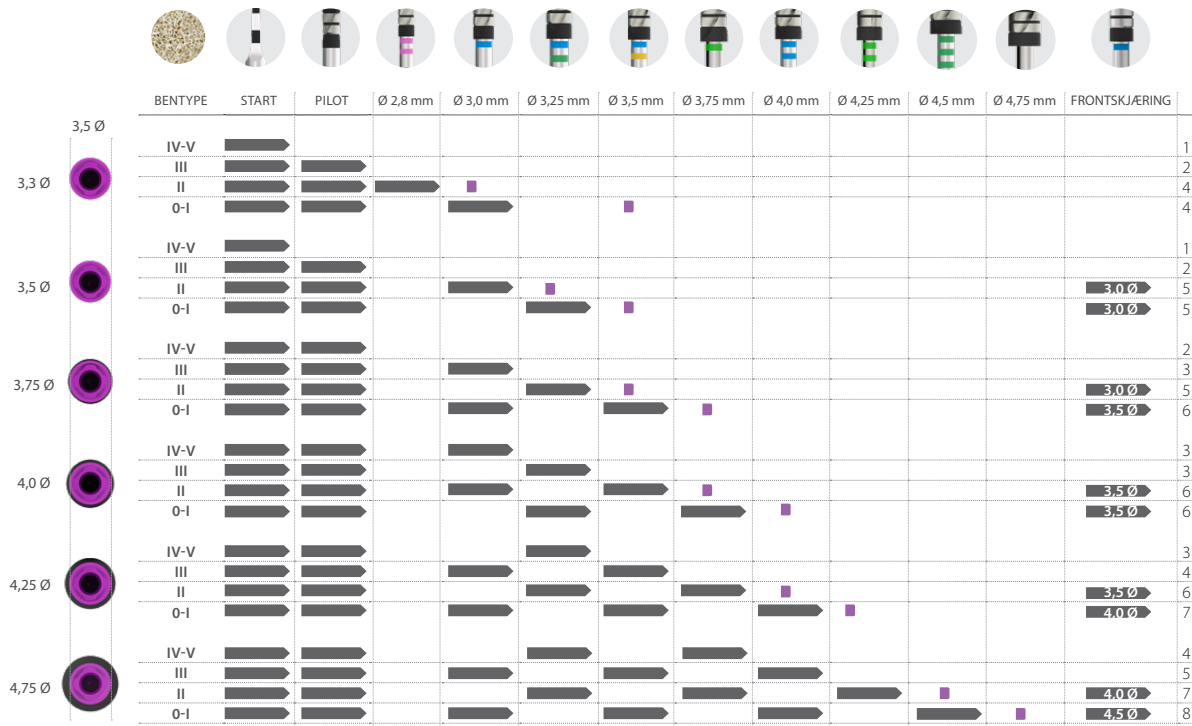

Implantatlengder (fra 6,5 til 13 mm)

 Total lengde på implantatet
 5,5 mm boreddybde
 2-3 mm boreddybde

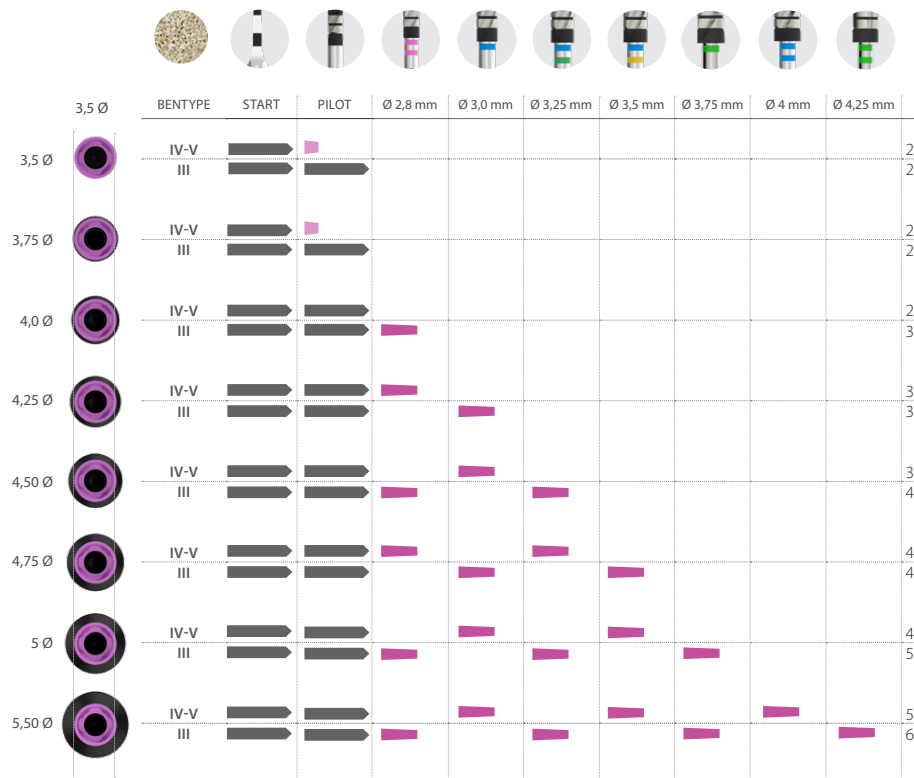


VIKTIG:

Fresesekvensen gjelder kun CORE-X-implantater



Implantatlengder (fra 4,5 til 5,5 mm)

— Total lengde på implantatet
■ 2-3 mm boreddybde

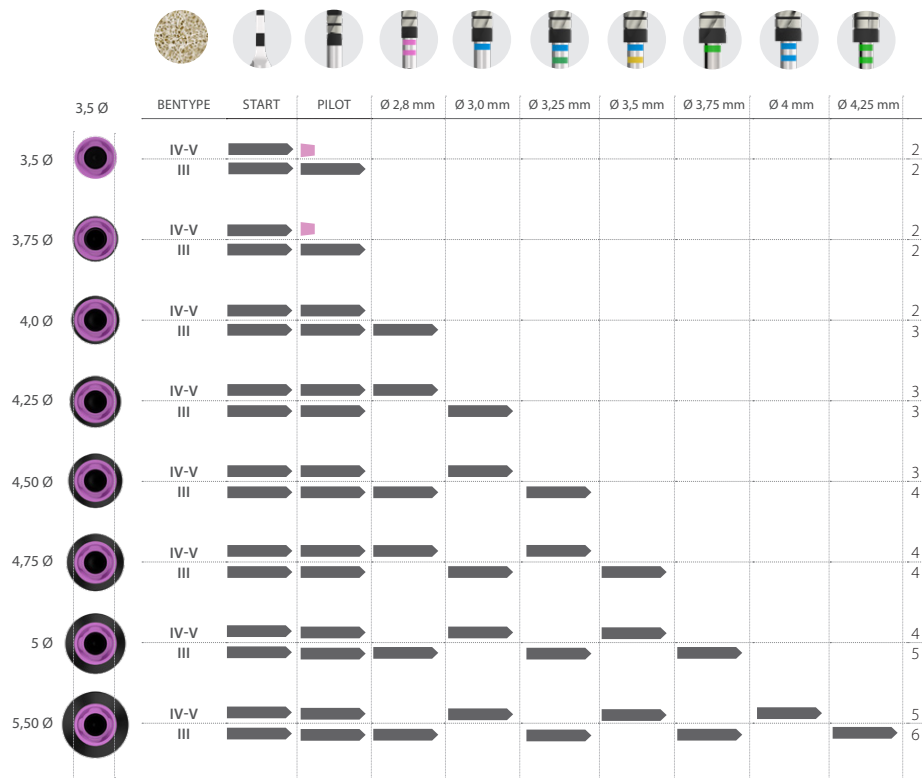

VIKTIG:
Fresesekvensen gjelder
kun for CORE-X
-implantater




Implantatlengder

(fra 10 til 15 mm)




-  Total lengde på implantatet
-  75 % av den totale lengden på implantatet
-  25 % av den totale lengden på implantatet
-  5,0 mm boreddybde

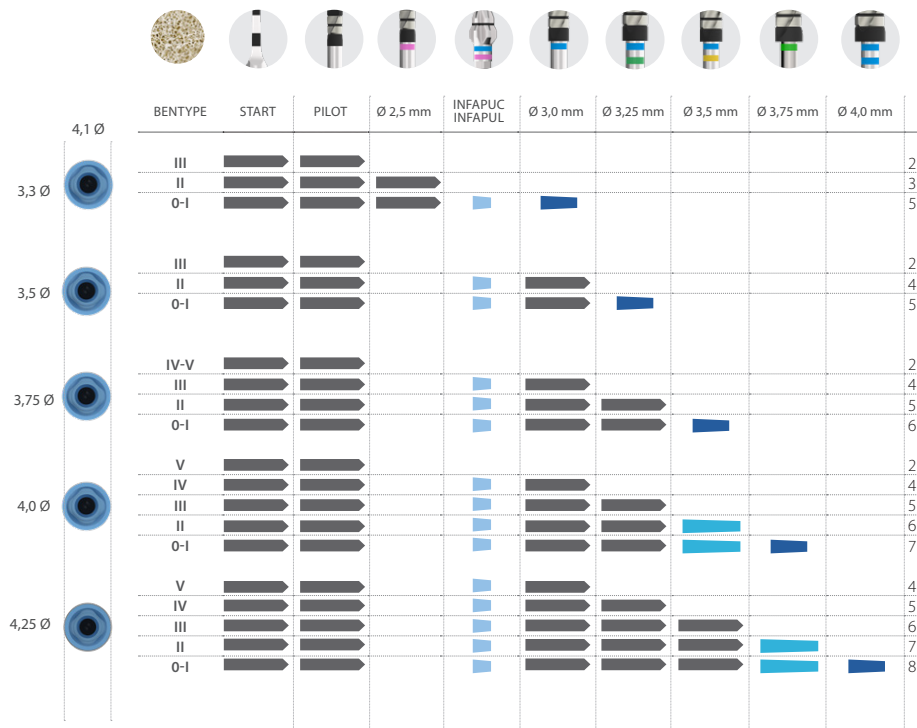

Implantatlengder

(fra 5,5 til 8,5 mm)

-  Total lengde på implantatet
-  Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor
-  5,0 mm boreddybde
-  2-3 mm boreddybde

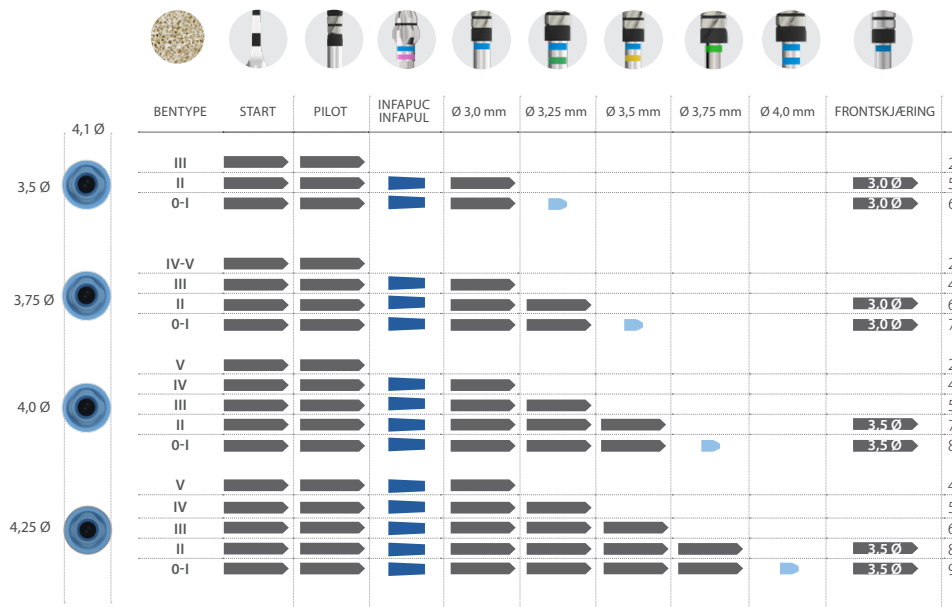




Implantatlengder

(fra 8,5 til 15 mm)



 Total lengde på implantatet
 6,5 mm boreddybde
 3 mm boreddybde

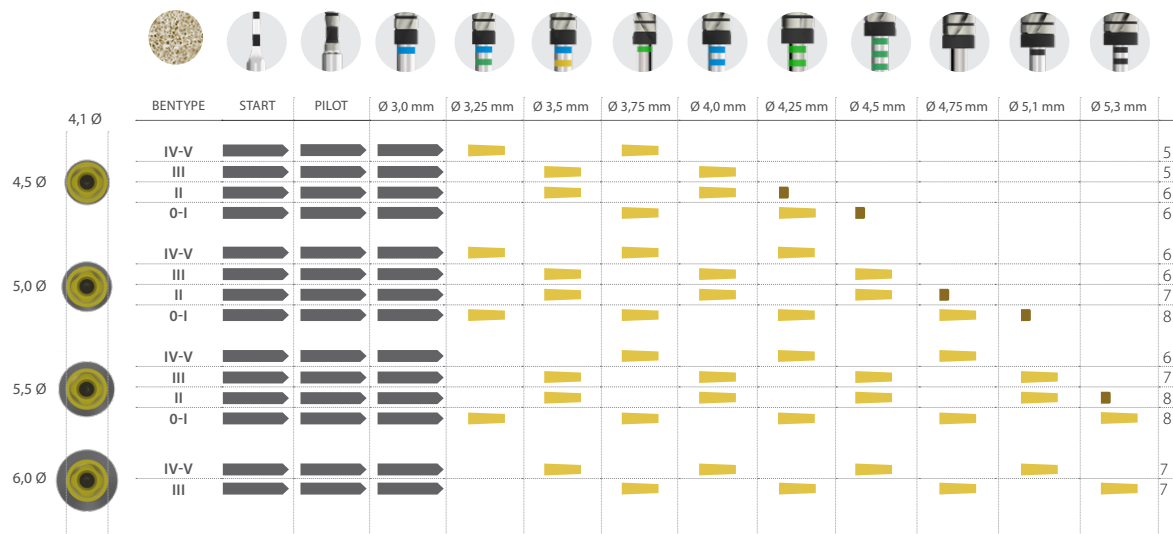



Implantatlengder

(fra 4,5 til 7,5 mm)



Total lengde på implantatet



Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor



3 mm boreddybde

