



Anbefalt boresekvensguide

for Interna BTI-implantater



MERK: Ta kontakt med din distributør for å få informasjon om tilgjengeligheten av produktet i de ulike markedene

Boredybdemerker

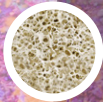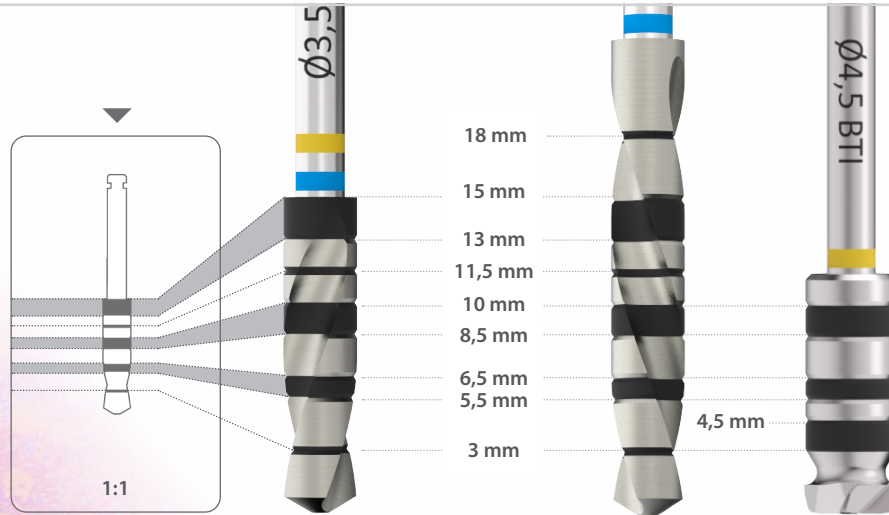

KLASSE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BOR

Første boring
 Bor
 Forskningsbor
 Frontskjærende bor

REVOLUSJONER

800 - 1.000 rpm
 50 - 75 rpm
 150 - 200 rpm
 50 - 75 rpm

IRRIGASJON

ja
 nei
 nei
 nei

Implantatlengder

(fra 5,5 til 13 mm)

 Total lengde på implantatet
 mm Variabel
 2-3 mm boreddybde


IMPLANTATLENGDER	 2,5 Ø						
	BENTYPE	START	Ø 1,8 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,2 mm	Ø 2,3 mm	Ø 2,4 mm
5,5 - 6,5 - 7,5 mm	III						2
	II						3
	0-I						 6
8,5 - 10 mm	III						2
	II						3
	0-I						 6
11,5 - 13 mm	III						2
	II						3
	0-I						 6



Implantatlengder (fra 7,5 til 13 mm)




 Total lengde på implantatet
 6,5 mm boreddybde
 2-3 mm boreddybde

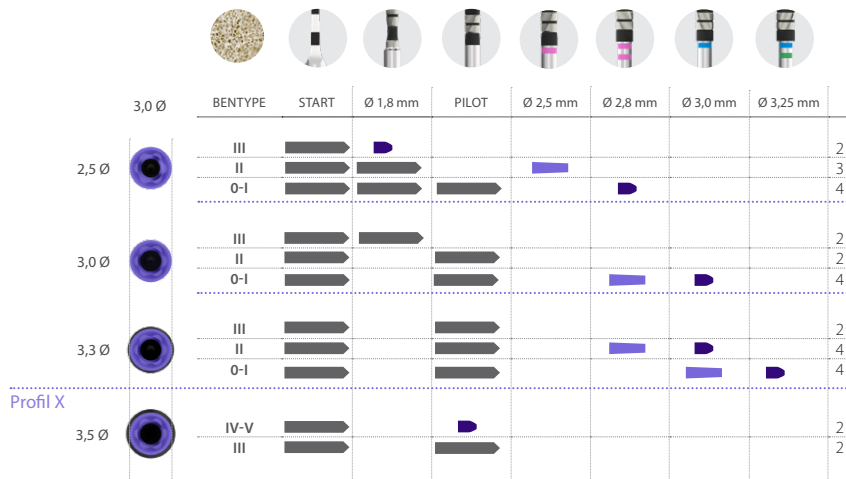

Implantatlengder (fra 4,5 til 6,5 mm)




- Total lengde på implantatet
- Total lengde på implantatet med fres med angitt diameter
- 2-3 mm boreddybde
- 2-3 mm boreddybde. Kun for implantater på 6,5 mm

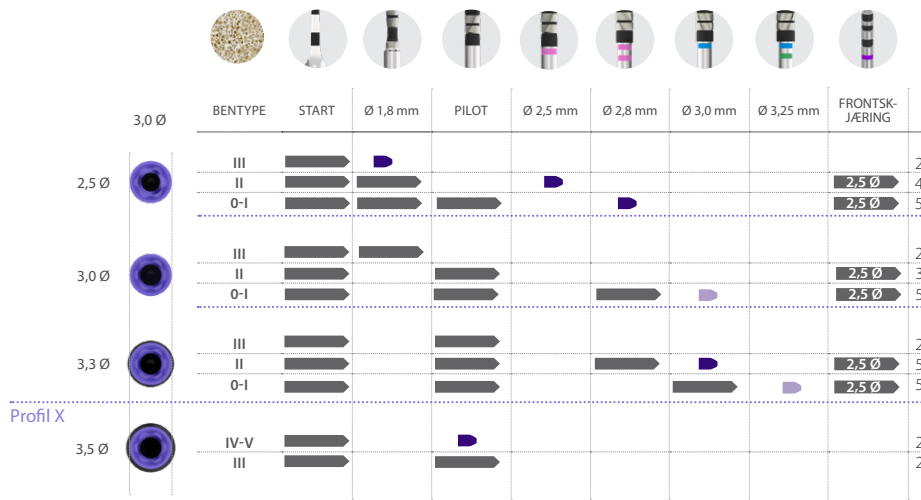

Implantatlengder

(fra 7,5 til 15 mm)


 Total lengde på implantatet
 6,5 mm boreddybde
 2-3 mm boreddybde

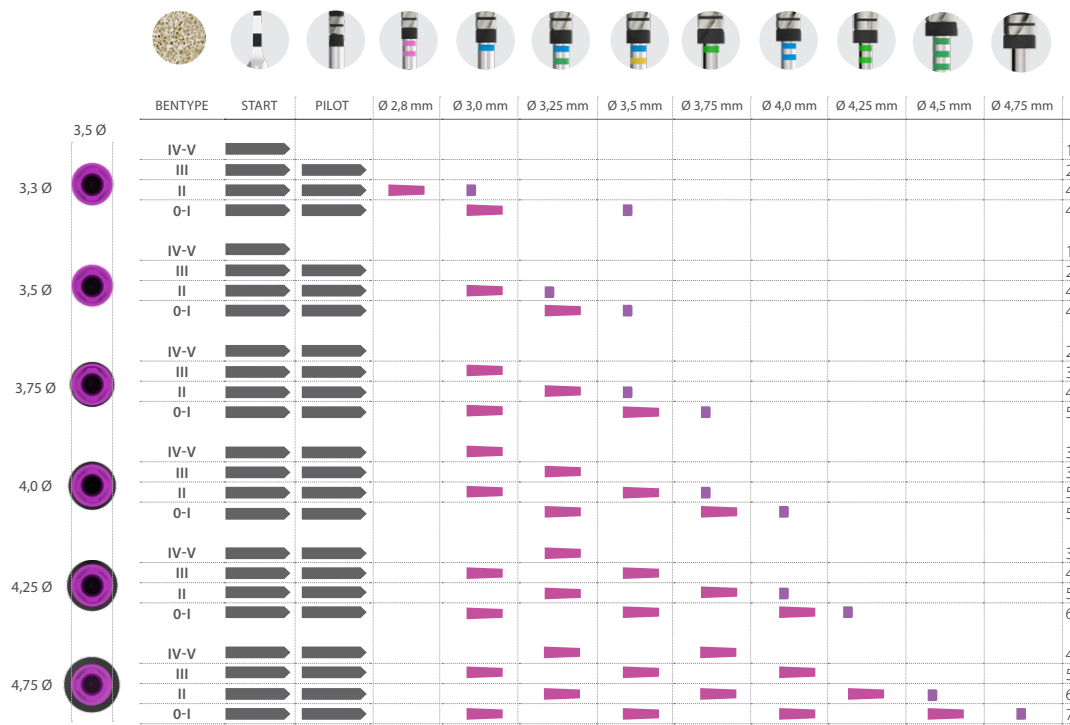

Implantatlengder


(fra 4,5 til 6,5 mm)

 Total lengde på implantatet
 Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor
 2-3 mm boreddybde

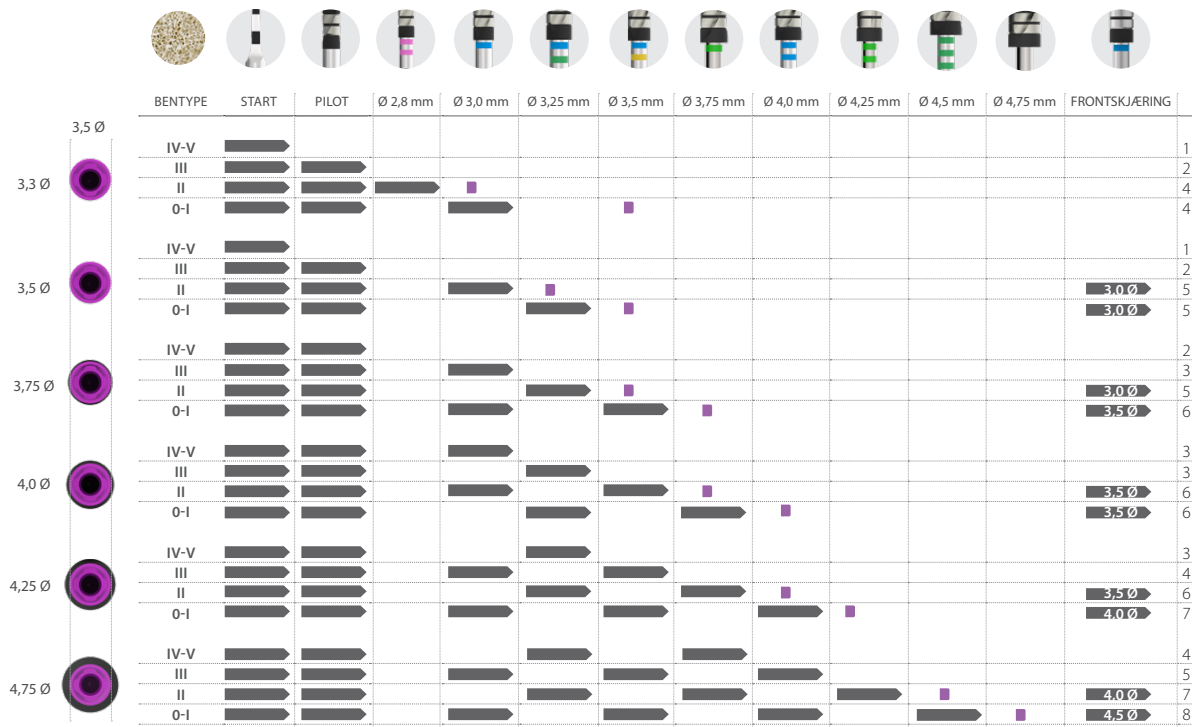

Implantatlengder (fra 6,5 til 13 mm)

 Total lengde på implantatet
 5,5 mm boreddybde
 2-3 mm boreddybde

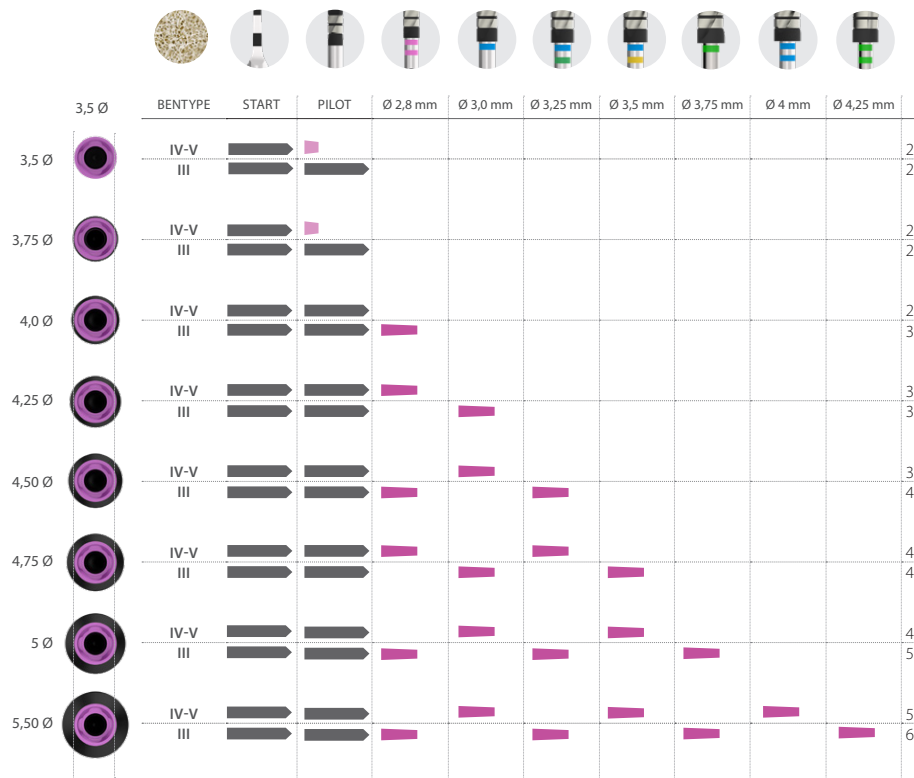

VIKTIG:


Fresesekvensen
 gjelder kun CORE-X
 -implantater



Implantatlengder

(fra 4,5 til 5,5 mm)

— Total lengde på implantatet
■ 2-3 mm boreddybde

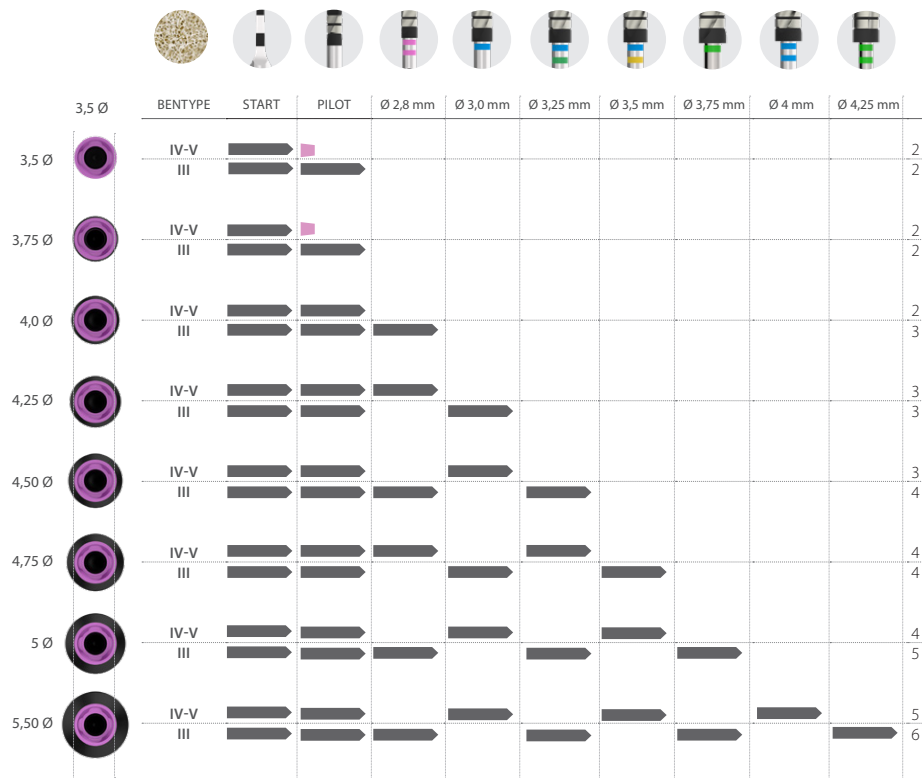

VIKTIG:

Fresesekvensen gjelder
kun for CORE-X
-implantater




Implantatlengder

(fra 10 til 15 mm)



-  Total lengde på implantatet
-  75 % av den totale lengden på implantatet
-  25 % av den totale lengden på implantatet
-  5,0 mm boreddybde

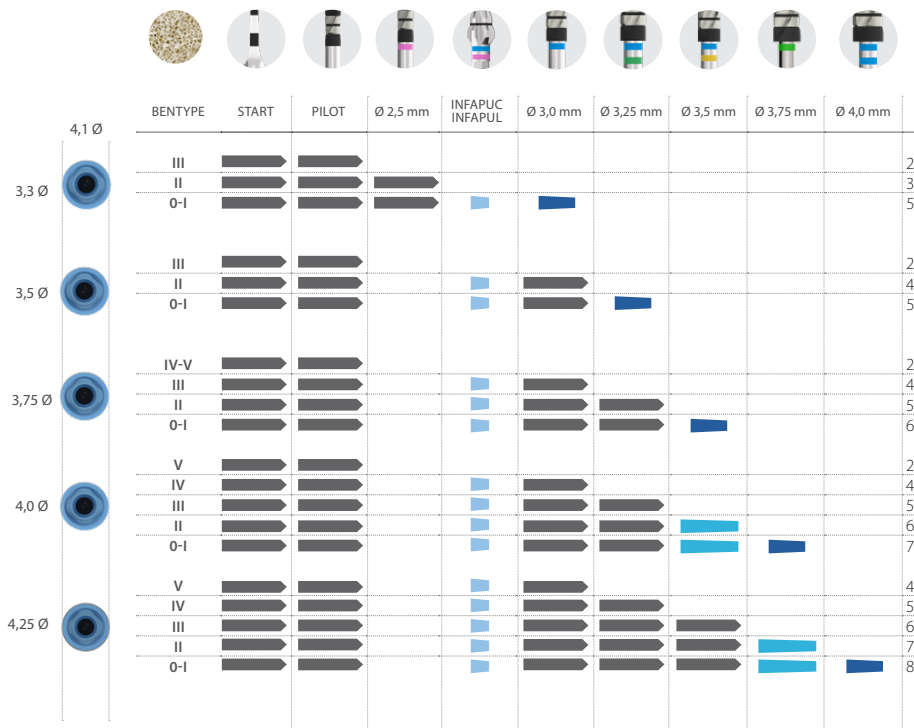




Implantatlengder

(fra 8,5 til 15 mm)



 Total lengde på implantatet
 6,5 mm boreddybde
 3 mm boreddybde

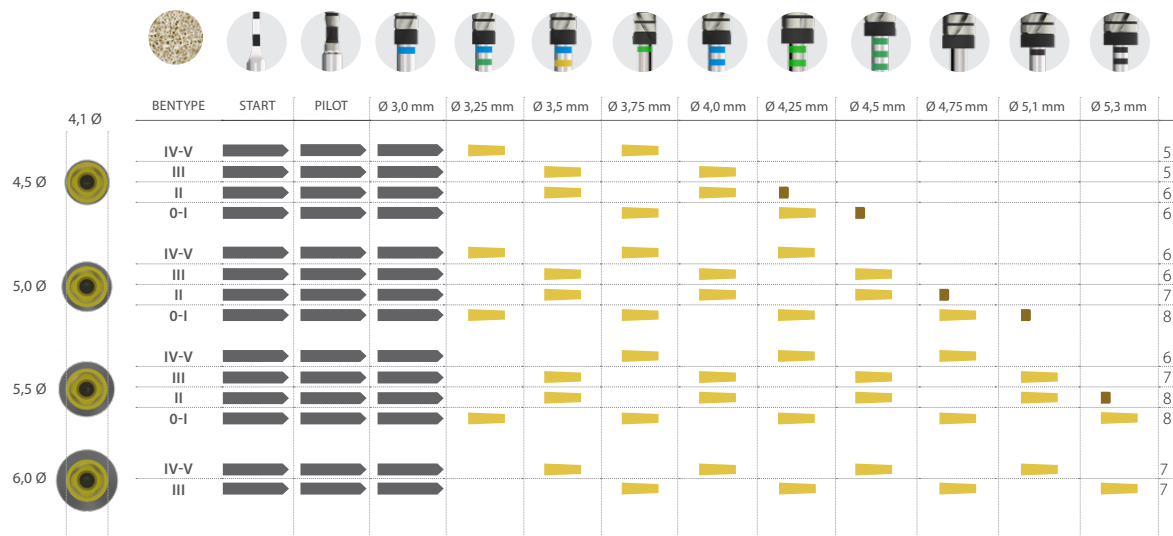

Implantatlengder (fra 4,5 til 7,5 mm)

- Total lengde på implantatet
- X X Ø Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor
- 3 mm boreddybde

