



Protocolo de perfuração recomendado

para implantes de BTI Interna



NOTA: consulte disponibilidade do produto nos diferentes mercados com o seu distribuidor.

Marcas de profundidade de perfuração

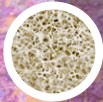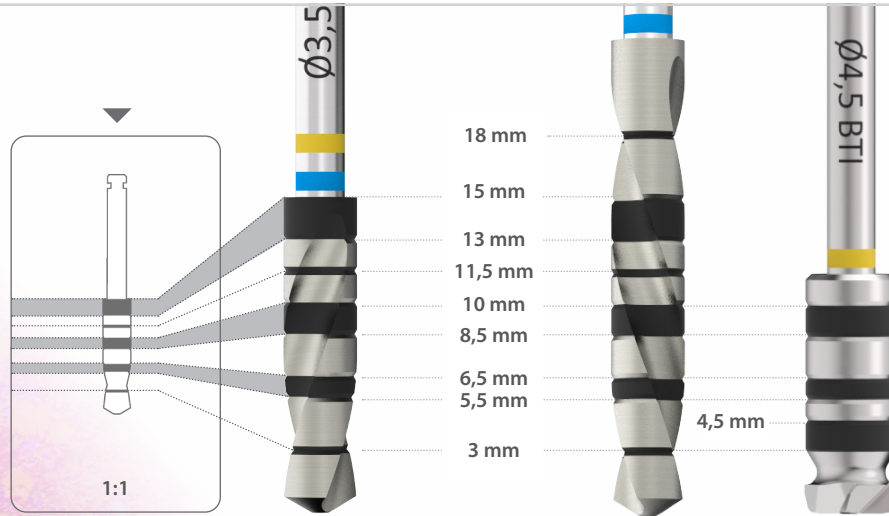

TIPO / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BROCAS

Brocas de Início
Brocas helicoidais
Brocas Countersink /
Avellanadoras
Broca corte frontal

VELOCIDADE

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm


IRRIGAÇÃO

sim
não
não
não

Implantes comprimento

(de 6,5 a 13 mm)

Comprimento total do implante
6,5 mm de profundidade
2-3 mm de profundidade

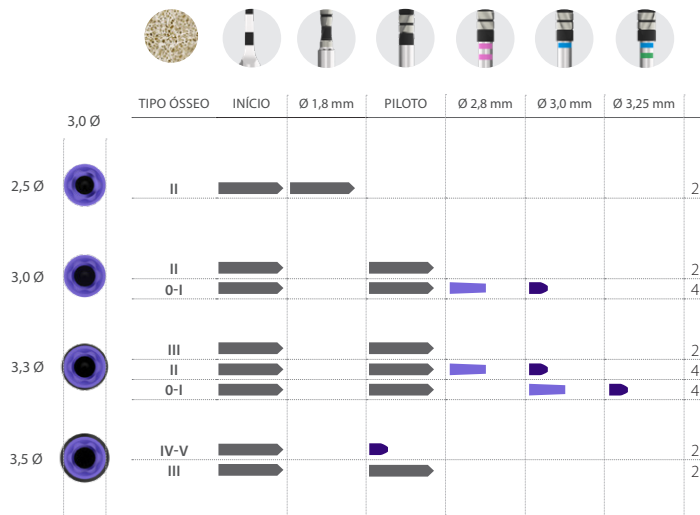



Plataforma 3.0

Ø 3,0 mm de diâmetro da plataforma


Implantes comprimento

(de 4,5 a 5,5 mm)



Comprimento total do implante

2-3 mm de profundidade

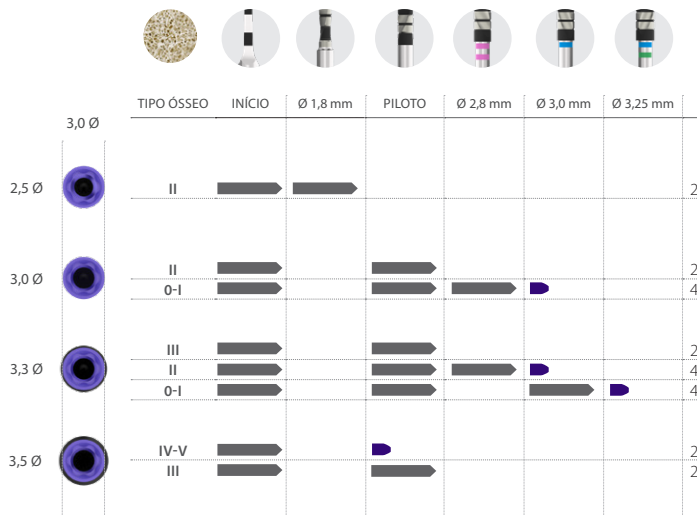


Protocolo de perfuração



Implantes comprimento

(de 7,5 a 15 mm)


Comprimento total do implante
6,5 mm de profundidade
2-3 mm de profundidade

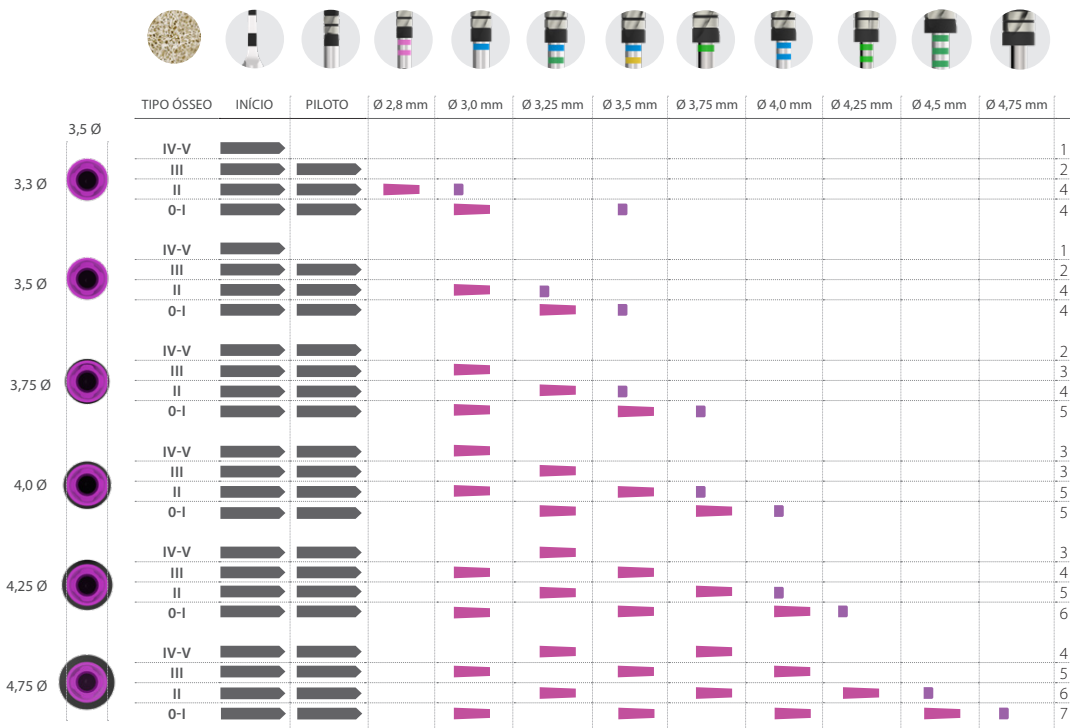

Implantes comprimento

(de 4,5 a 6,5 mm)


 Comprimento total do implante
 Comprimento total do implante com a broca de diâmetro especificado
 2-3 mm de profundidade

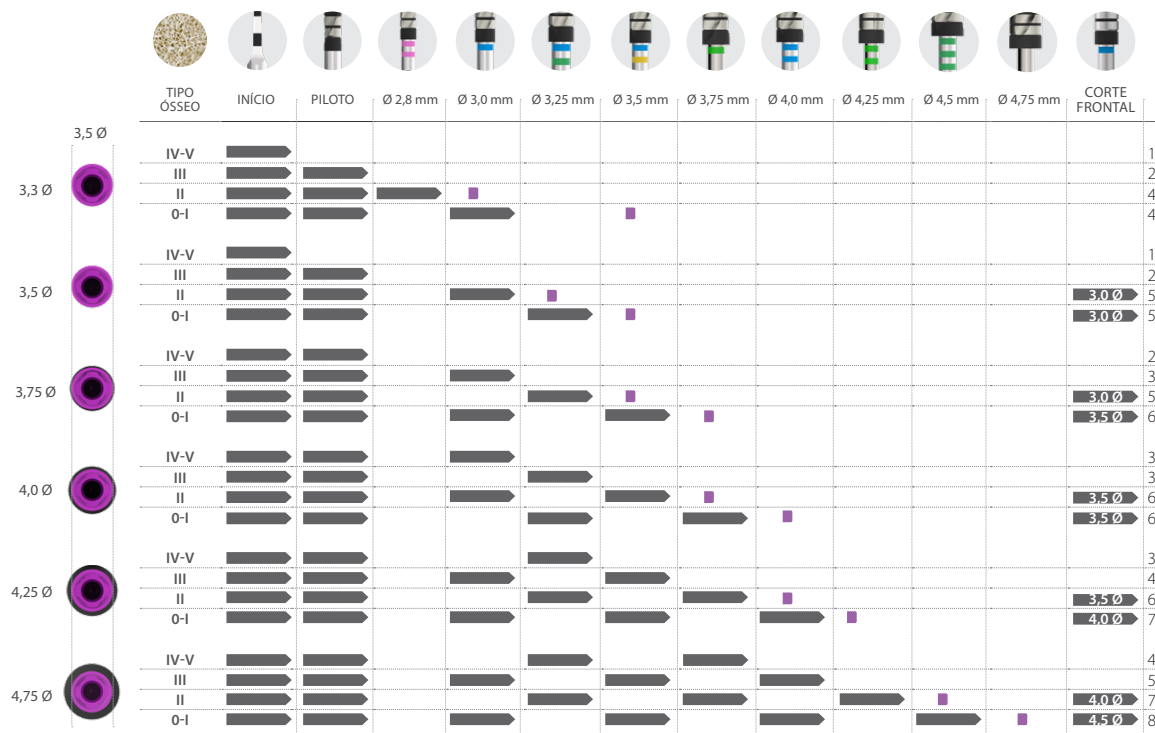

Implantes comprimento

(de 6,5 a 13 mm)

Comprimento total do implante
5,5 mm de profundidade
2-3 mm de profundidade

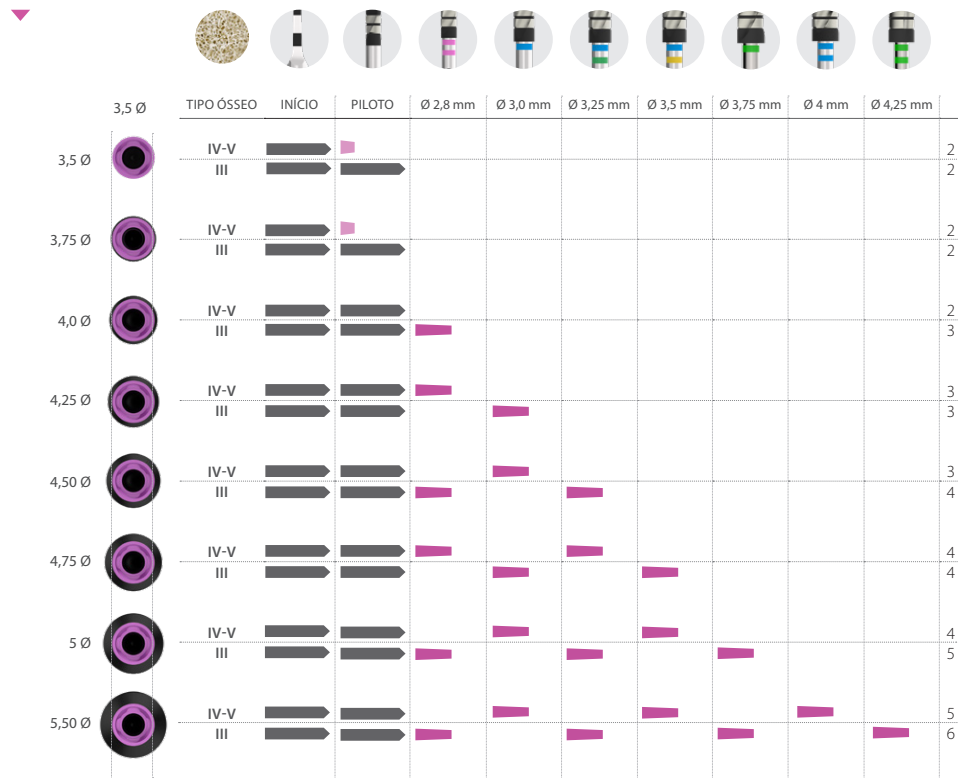

IMPORTANTE:
sequência de fresagem
válida apenas para
implantes e CORE-X

Protocolo de perfuração






Plataforma Estreita / CORE-X

Ø 3,5 mm de diâmetro da plataforma

Implantes comprimento

(de 4,5 a 5,5 mm)

Comprimeto total do implante
2-3 mm de profundidade

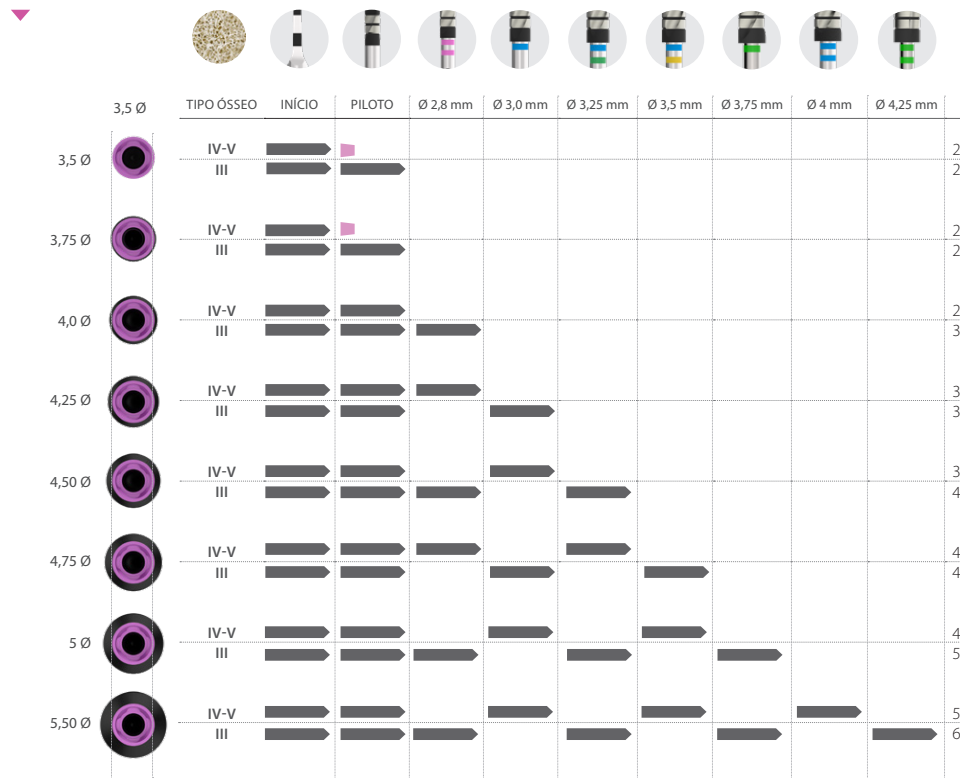



IMPORTANTE:
sequência de fresa
válida apenas para
implantes e CORE-X

Protocolo de perfuração



Implantes comprimento


(de 10 a 15 mm)

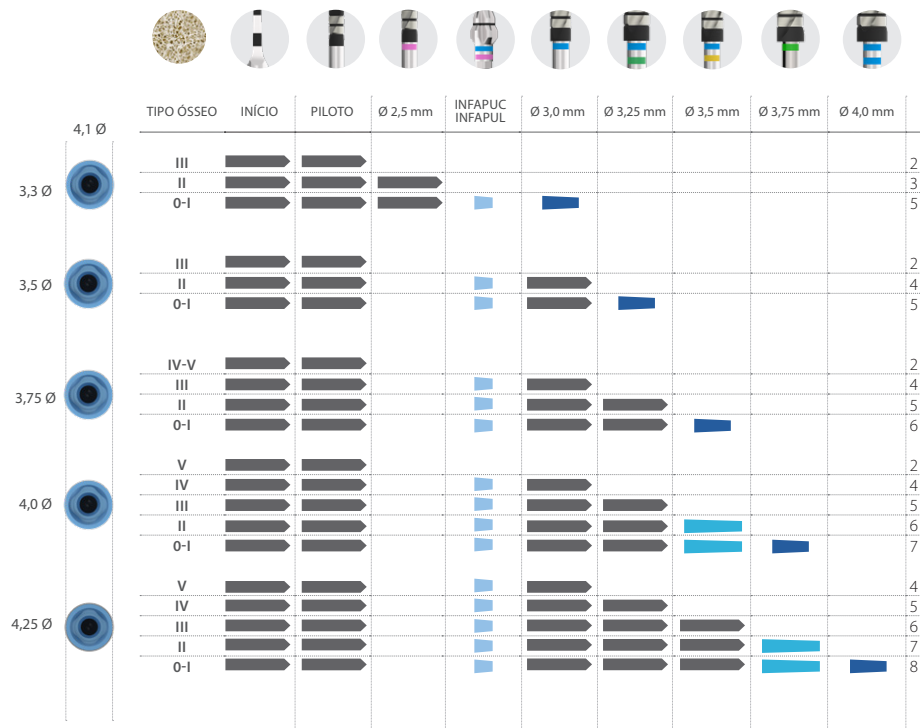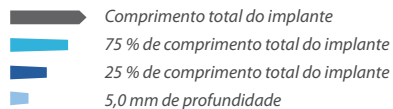

Implantes comprimento

(de 5,5 a 8,5 mm)

- Comprimento total do implante
- X,X Ø Comprimento total do implante com a broca de diâmetro especificado
- 5,0 mm de profundidade
- 2-3 mm de profundidade

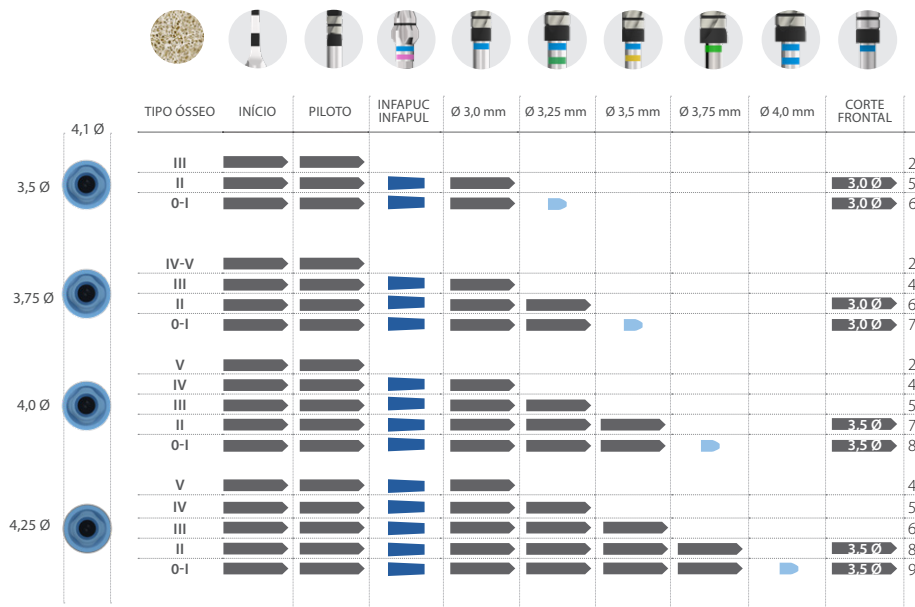




Implantes comprimento

(de 8,5 a 15 mm)



Comprimeto total do implante
6,5 mm de profundidade
3 mm de profundidade

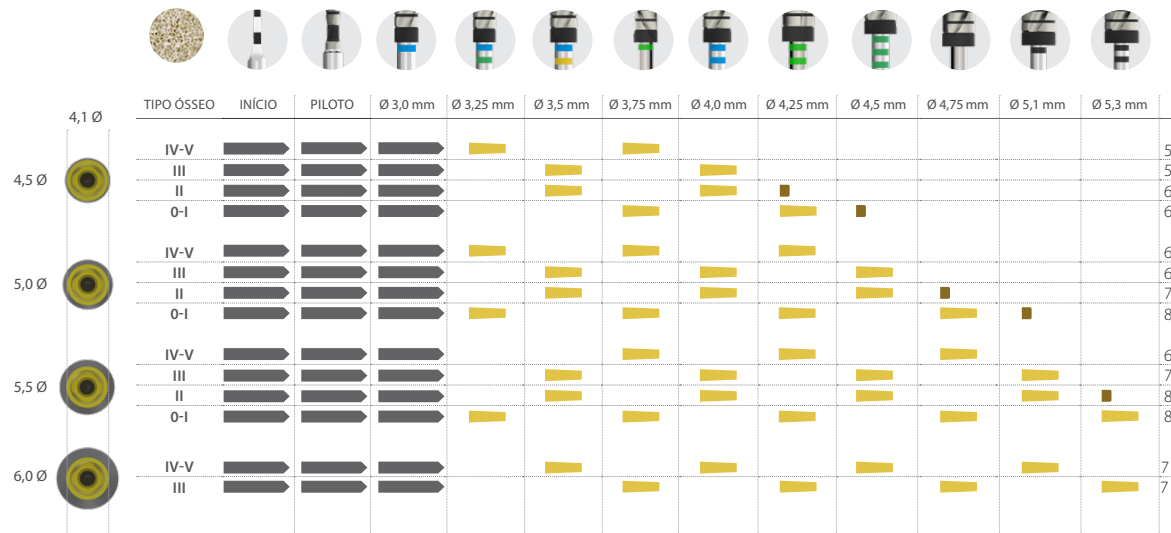



Plataforma Universal Plus

Ø4,1 mm de diâmetro da plataforma

Implantes comprimento

(de 4,5 a 7,5 mm)




Comprimento total do implante



Comprimento total do implante com a broca de diâmetro especificado



3 mm de profundidade

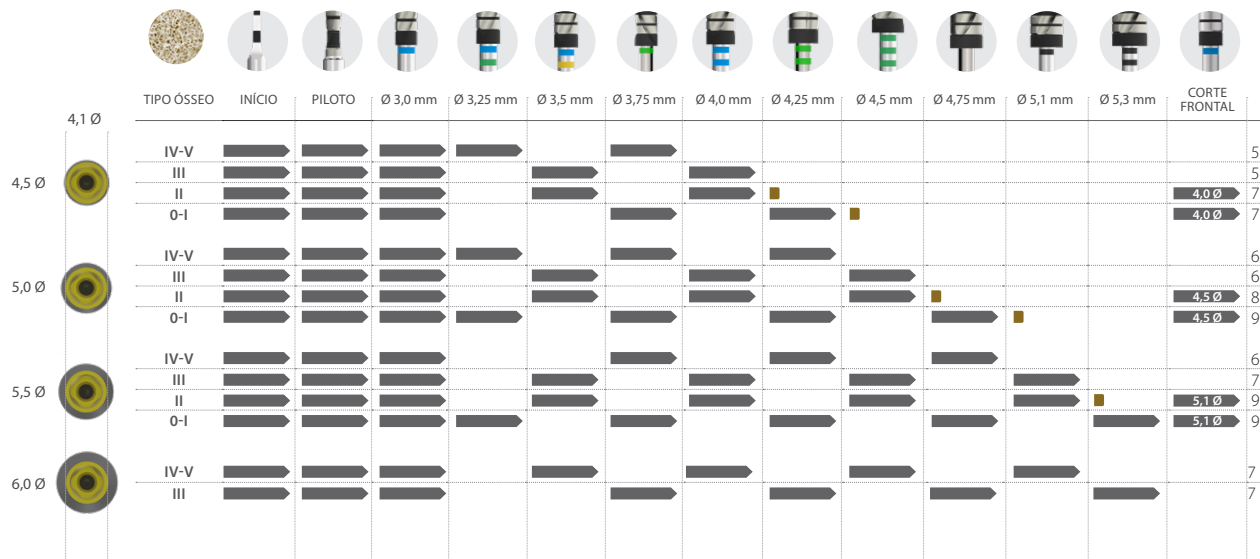

Protocolo de perfuração

