



Protocolo de perfuração recomendado

para implantes de BTI Interna



NOTA: consulte disponibilidade do produto nos diferentes mercados com o seu distribuidor.

Marcas de profundidade de perfuração

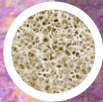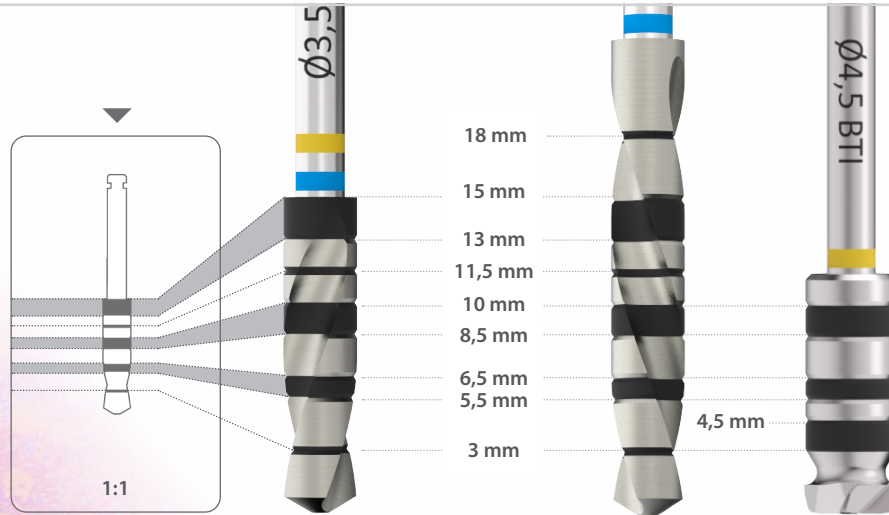

TIPO / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BROCAS

Brocas de Início
 Brocas helicoidais
 Brocas Countersink /
 Avellanadoras
 Broca corte frontal

VELOCIDADE

800 - 1.000 rpm
 50 - 75 rpm
 150 - 200 rpm
 50 - 75 rpm

IRRIGAÇÃO

sim
 não
 não
 não

Implantes comprimento

(de 5,5 a 13 mm)

Comprimeto total do implante
Variável
2-3 mm de profundidade

IMPLANTES COMPRIMENTO

2,5 Ø

5,5 - 6,5 - 7,5 mm

8,5 - 10 mm

11,5 - 13 mm


	TIPO ÓSSEO	INÍCIO	Ø 1,8 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,2 mm	Ø 2,3 mm	Ø 2,4 mm
5,5 - 6,5 - 7,5 mm	III						2
	II			5,5 mm			3
	0-I			5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	6
8,5 - 10 mm	III						2
	II			6,5 mm			3
	0-I			6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6
11,5 - 13 mm	III						2
	II			8,5 mm			3
	0-I			8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	6



Implantes comprimento

(de 7,5 a 13 mm)

Comprimeto total do implante
6,5 mm de profundidade
2-3 mm de profundidade

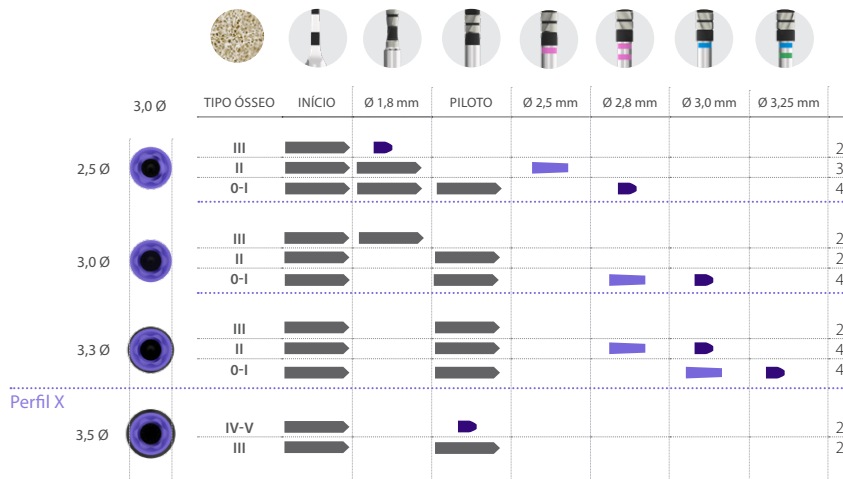

(de 4,5 a 6,5 mm)



Comprimento total do implante



Comprimento total do implante com broca do diâmetro especificado



2-3 mm de profundidade



2-3 mm de profundidade. Apenas para implantes de 6,5 mm



	TIPO OSSEO	INICIO	Ø 1,8 mm	PILOTO	Ø 2,5 mm	Ø 2,8 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	CORTE FRONTAL
3,0 Ø									
2,5 Ø	III								2,5 Ø
	II								2,5 Ø
	0-I								2,5 Ø
3,0 Ø	III								2,5 Ø
	II								2,5 Ø
	0-I								2,5 Ø
3,3 Ø	III								2,5 Ø
	II								2,5 Ø
	0-I								2,5 Ø
3,5 Ø	IV-V								2,5 Ø
	III								2,5 Ø

Perfil X

Plataforma 3.0



perfuracão


Protocolo de



Implantes comprimento

(de 7,5 a 15 mm)


Comprimento total do implante
6,5 mm de profundidade
2-3 mm de profundidade

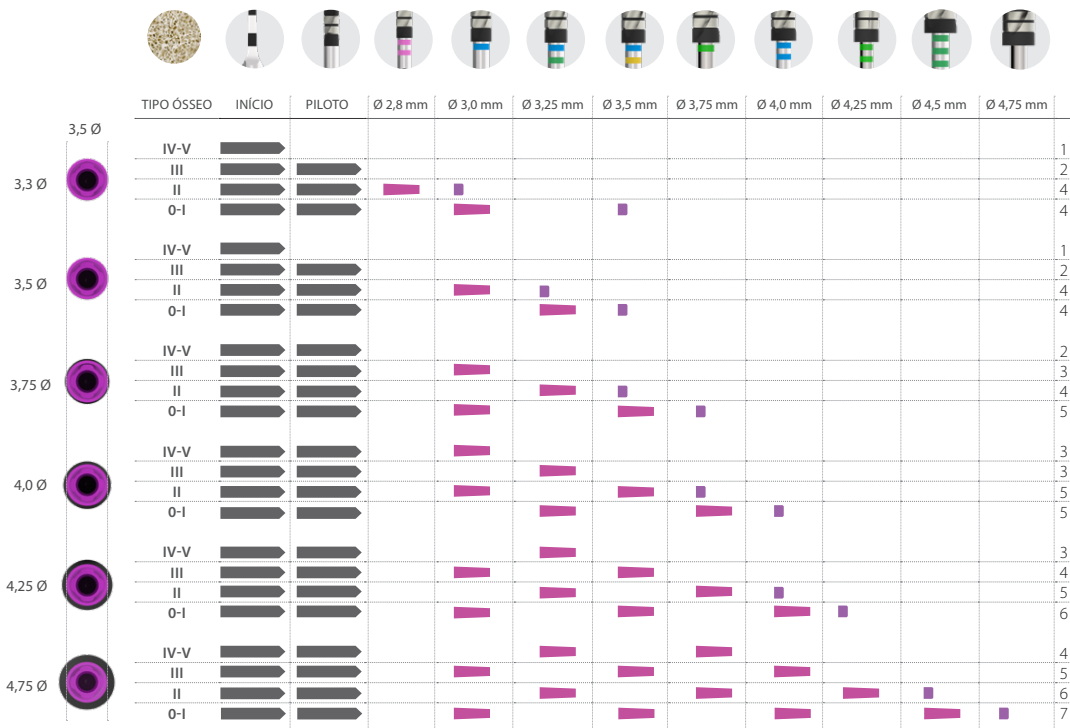

Implantes comprimento

(de 4,5 a 6,5 mm)


 Comprimento total do implante
 Comprimento total do implante com a broca de diâmetro especificado
 2-3 mm de profundidade

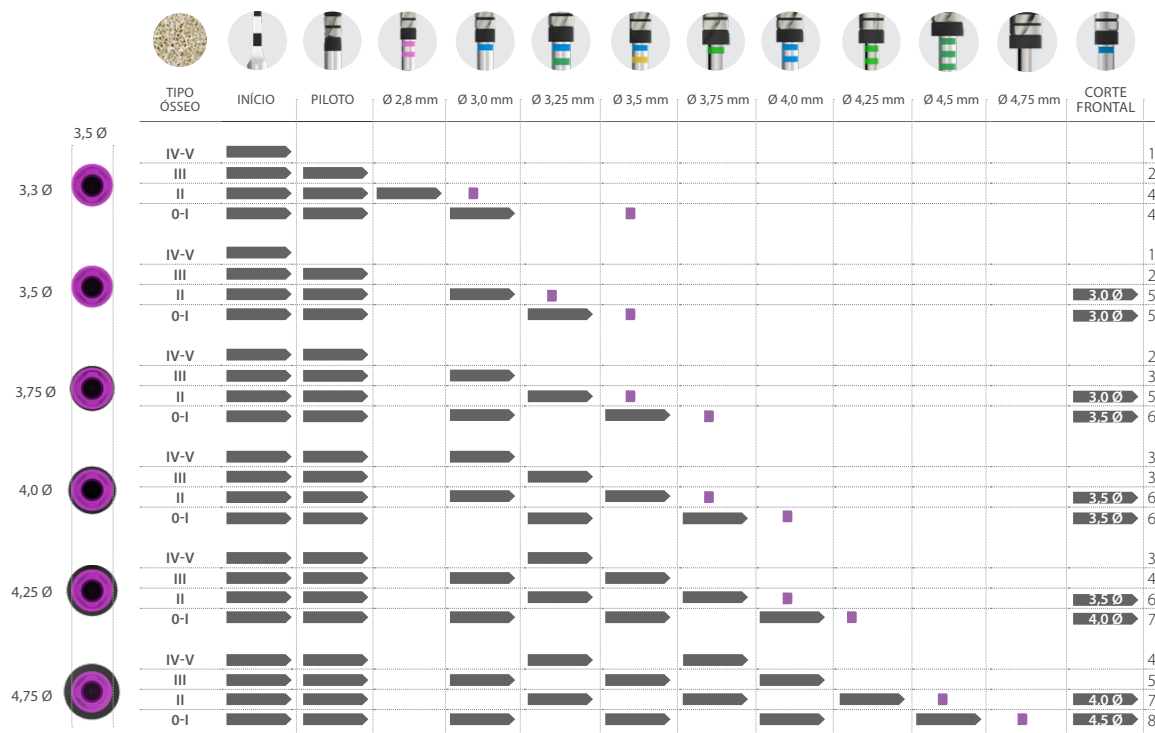

Implantes comprimento

(de 6,5 a 13 mm)

Comprimento total do implante
5,5 mm de profundidade
2-3 mm de profundidade

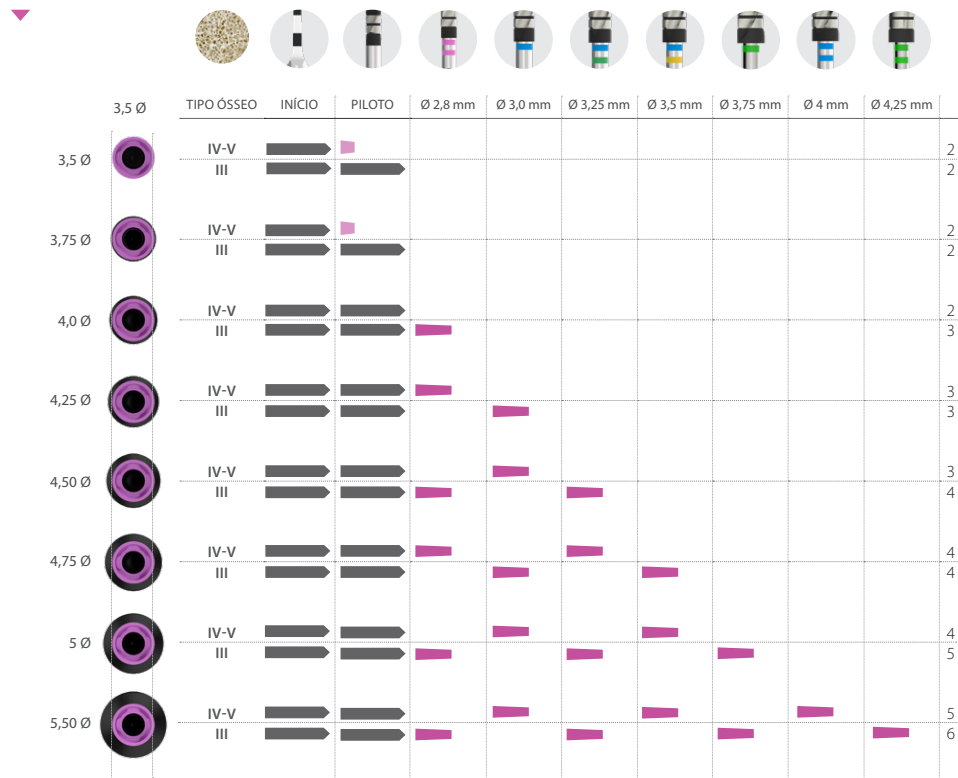

IMPORTANTE:
sequência de fresagem
válida apenas para
implantes e CORE-X


Protocolo de perfuração



Implantes comprimento

(de 4,5 a 5,5 mm)

Comprimento total do implante
2-3 mm de profundidade


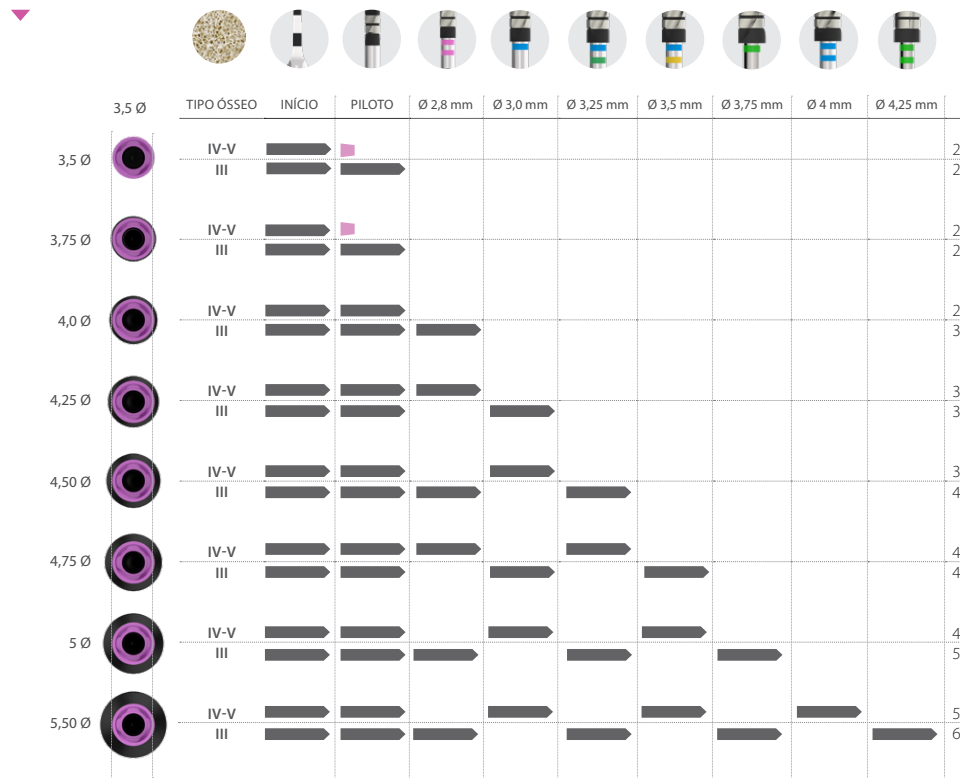


IMPORTANTE:
sequência de fresa
válida apenas para
implantes e CORE-X



Implantes comprimento


(de 10 a 15 mm)

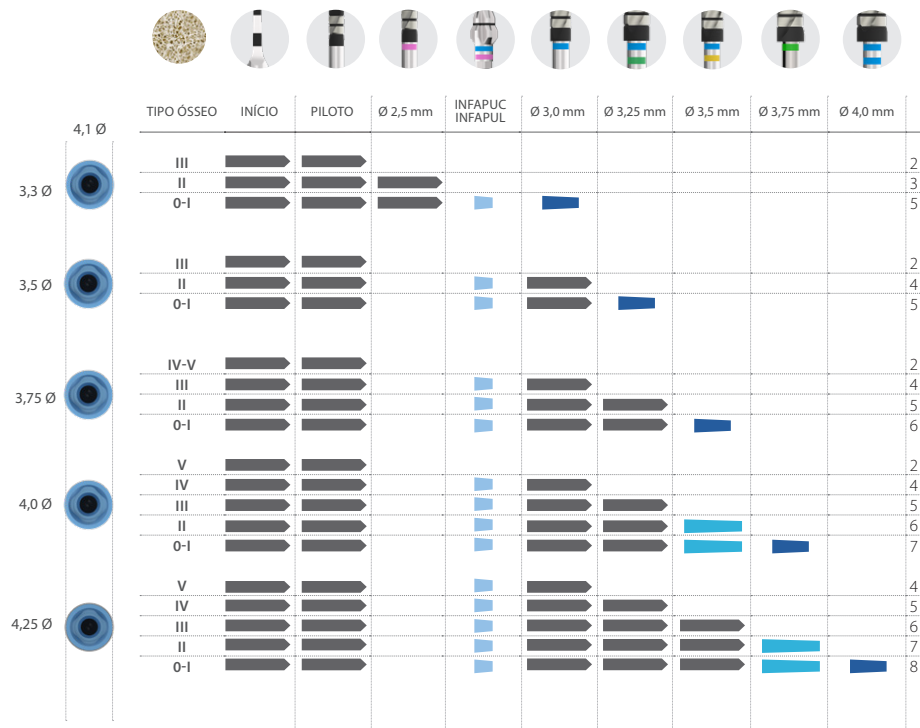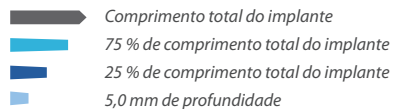

Implantes comprimento

(de 5,5 a 8,5 mm)

- Comprimento total do implante
- X,X Ø Comprimento total do implante com a broca de diâmetro especificado
- 5,0 mm de profundidade
- 2-3 mm de profundidade

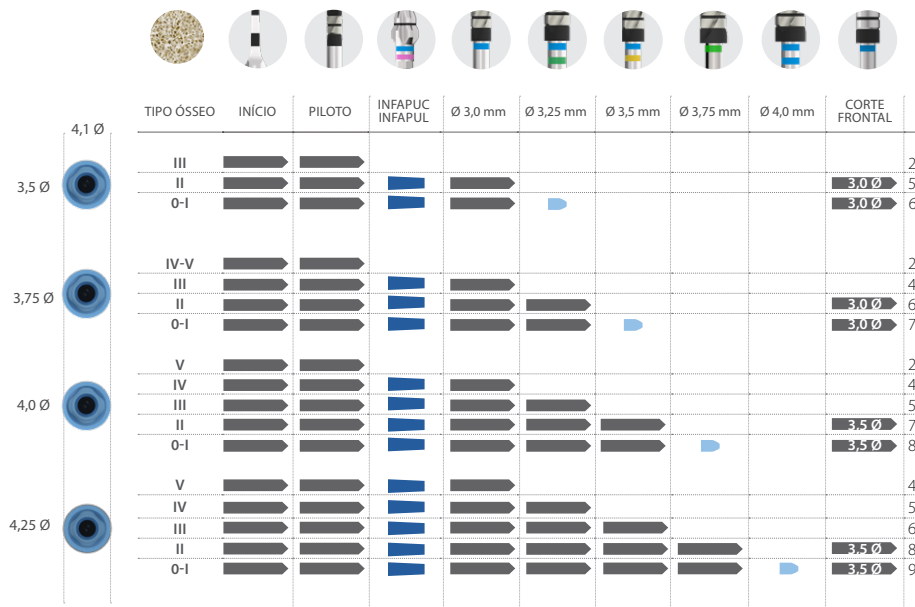




Implantes comprimento

(de 8,5 a 15 mm)



Comprimento total do implante
6,5 mm de profundidade
3 mm de profundidade

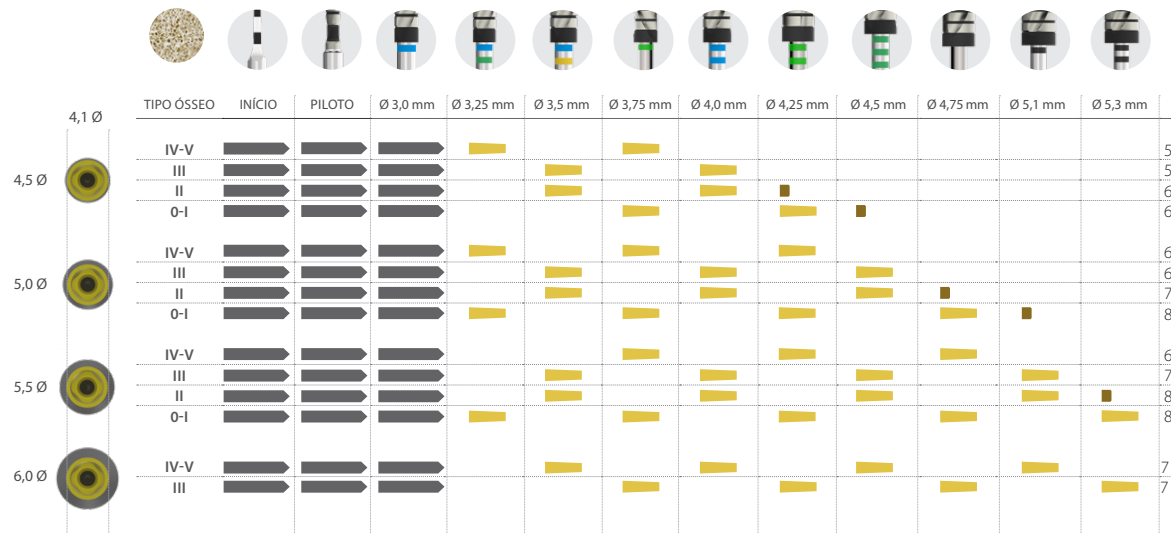



Plataforma Universal Plus

Ø4,1 mm de diâmetro da plataforma

Implantes comprimento

(de 4,5 a 7,5 mm)




Comprimento total do implante



Comprimento total do implante com a broca de diâmetro especificado



3 mm de profundidade

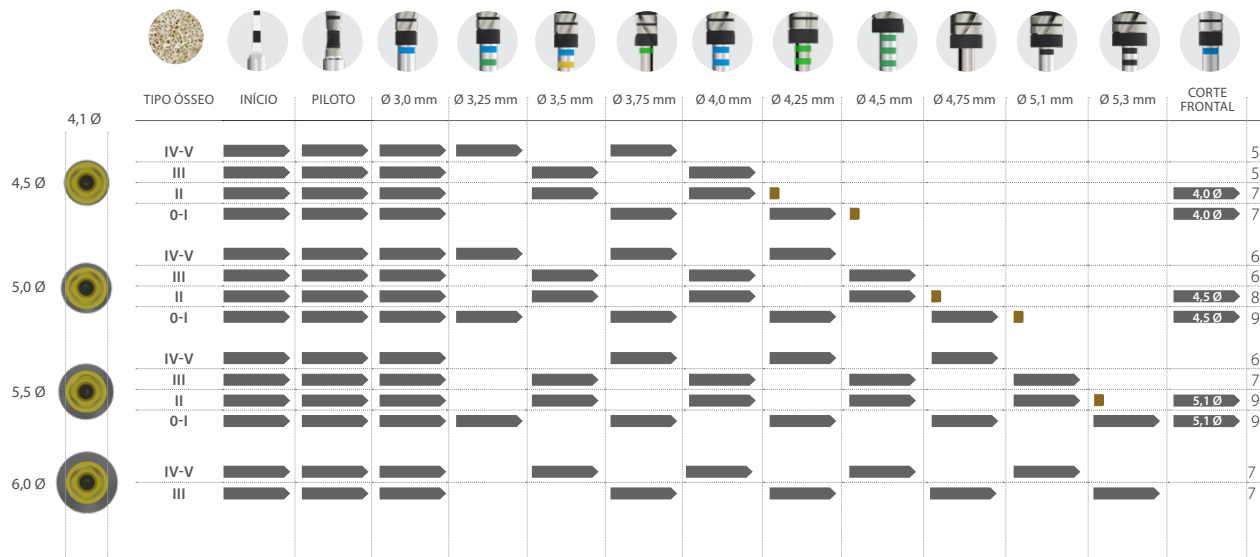

Protocolo de perfuração



