



# Ghid de secvență de găurire recomandat

*pentru implanturile BTI Interna*



NOTĂ: consultați distribuitorul dvs. pentru disponibilitatea produsului pe diferite piețe.

# Semne de adâncime a burghiului

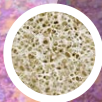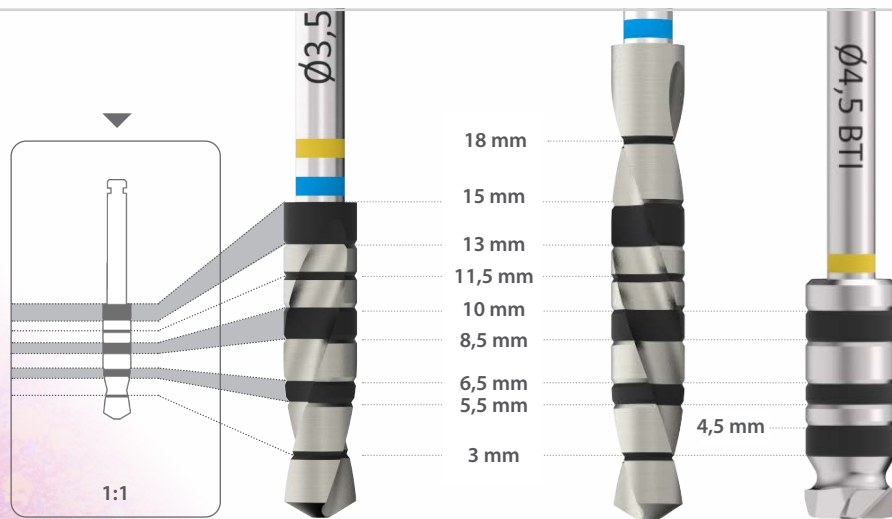

## CLASĂ / HOUNSFIELD

|    |               |     |           |
|----|---------------|-----|-----------|
| 0  | 1.400 - 1.200 | III | 800 - 500 |
| I  | 1.200 - 1.000 | IV  | 500 - 400 |
| II | 1.000 - 850   | V   | 350 - 100 |

## BURGHIU

Burghiu inițial  
Burghiu  
Burghiu conic  
Burghie cu tăiere frontală

## ROTAȚII

800 - 1.000 rpm  
50 - 75 rpm  
150 - 200 rpm  
0 - 75 rpm


## IRIGARE

da  
nu  
nu  
nu

# Lungimea implantului (de la 6,5 la 13 mm)



 Lungimea totală a implantului  
 6,5 mm adâncime de găurire  
 2-3 mm adâncime de găurire

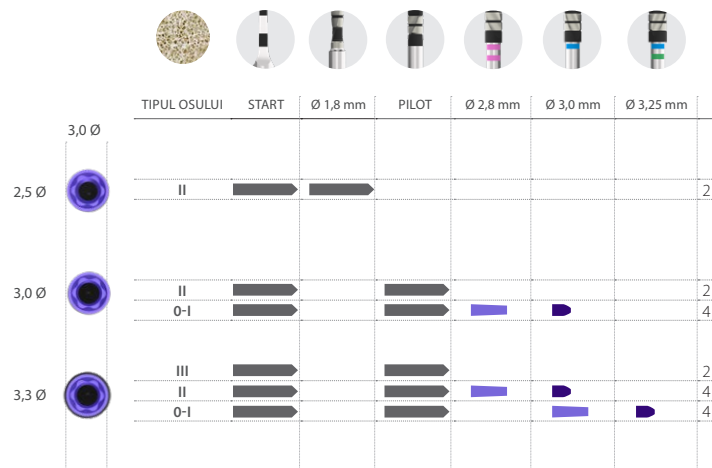




# Lungimea implantului

(de la 4,5 la 5,5 mm)



Lungimea totală a implantului

2-3 mm adâncime de găurire

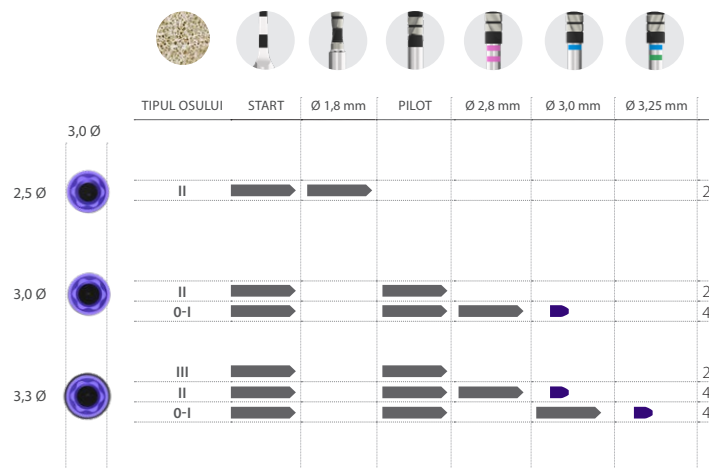

 **3.0 Platformă**


Diametrul platformei Ø3,0 mm

**găurire**  
Ghid de secvență de

 **bti.**  
Human  
Technology

# Lungimea implantului (de la 7,5 la 15 mm)


 Lungimea totală a implantului  
 6,5 mm adâncime de găurire  
 2-3 mm adâncime de găurire

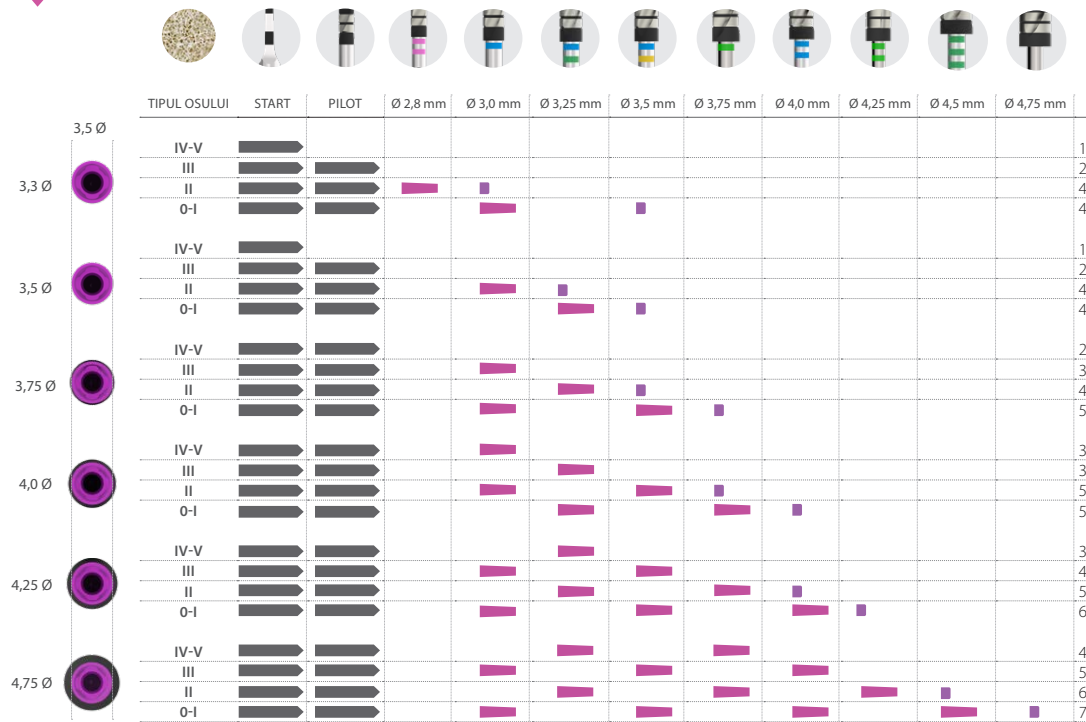



# Lungimea implantului (de la 4,5 la 6,5 mm)

— Lungimea totală a implantului  
X.X Ø Lungimea totală a implantului cu burghiul cu diametrul specificat  
■ 2-3 mm adâncime de găurire

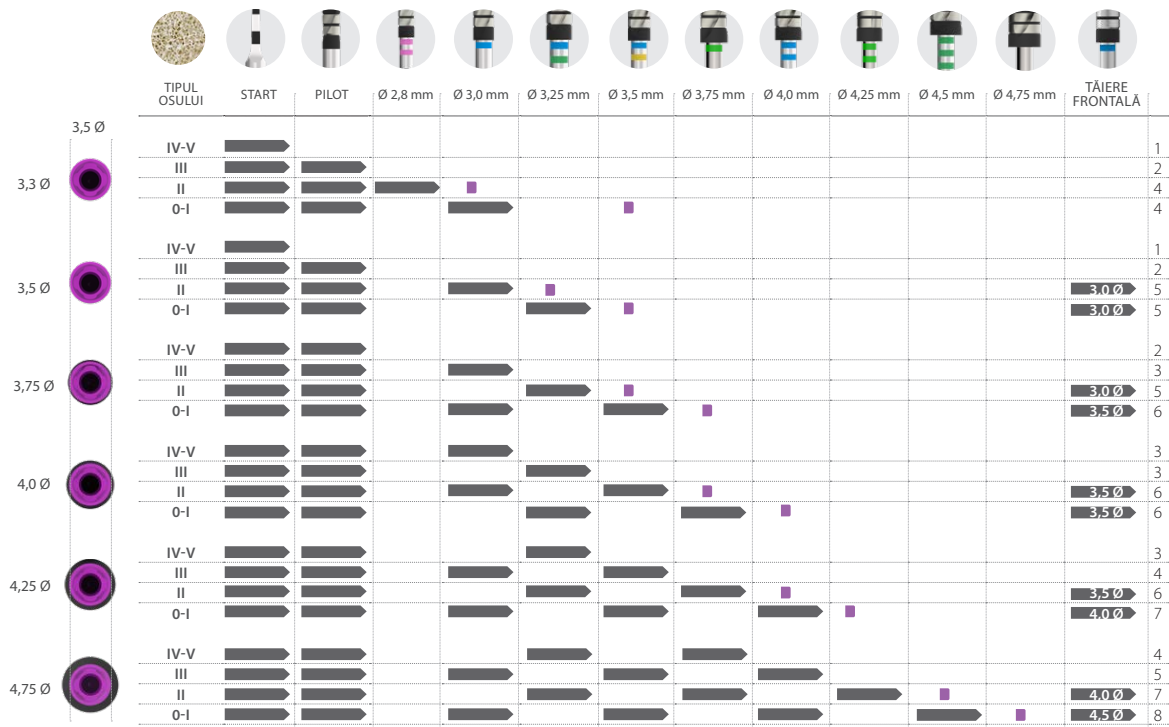


Platformă îngustă/CORE  
Diametrul platformei Ø3,5 mm

găurire  
Ghid de secvență de

bt  
Human  
Technology

# Lungimea implantului (de la 6,5 la 13 mm)


— Lungimea totală a implantului  
— 5,5 mm adâncime de găurire

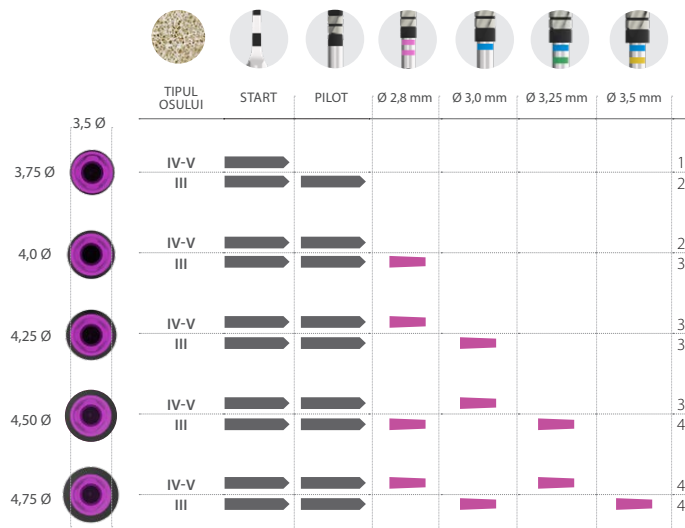

**IMPORTANT:**  
Secvență de frezare valabilă  
numai pentru implanturile  
CORE-X®

# Lungimea implantului (de la 4,5 la 5,5 mm)

→ Lungimea totală a implantului

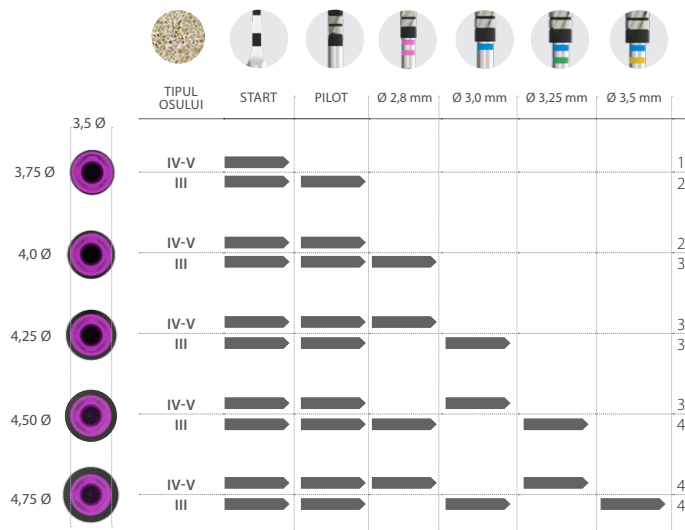

**IMPORTANT:**  
Secvență de frezare valabilă  
numai pentru implanturile  
CORE-X®




# Lungimea implantului

(de la 10 la 15 mm)




- Lungimea totală a implantului
- 75 % din lungimea totală a implantului
- 25 % din lungimea totală a implantului
- 5,0 mm adâncime de găurire

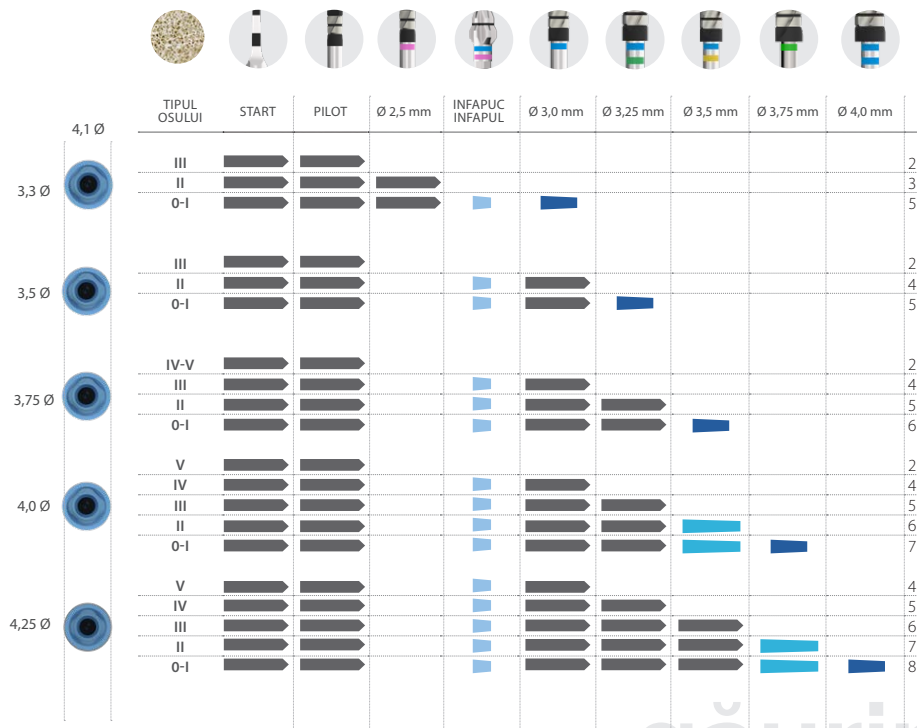



# Lungimea implantului (de la 5,5 la 8,5 mm)


- Lungimea totală a implantului
- Lungimea totală a implantului cu burghiul cu diametrul specificat
- 5,0 mm adâncime de găurire
- 2-3 mm adâncime de găurire

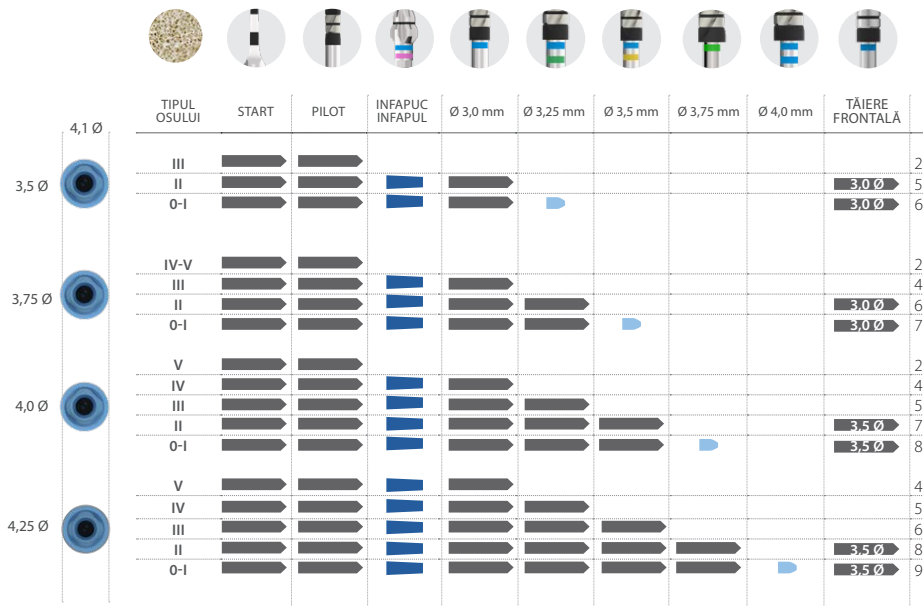

# Lungimea implantului (de la 8,5 la 15 mm)



 Lungimea totală a implantului  
 6,5 mm adâncime de găurire  
 3 mm adâncime de găurire

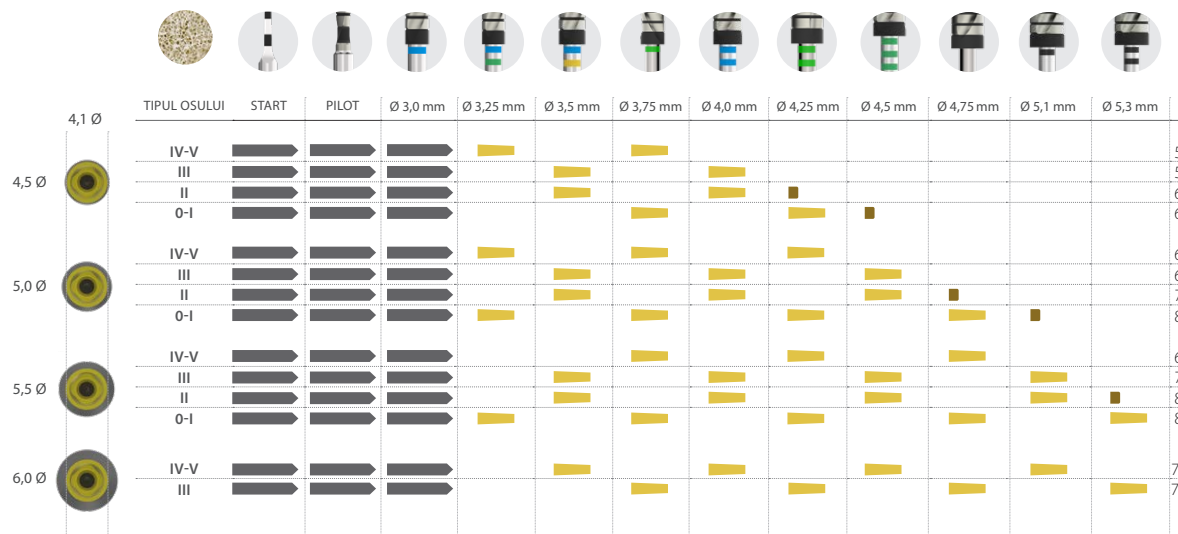

# Lungimea implantului (de la 4,5 la 7,5 mm)



- Lungimea totală a implantului
- Lungimea totală a implantului cu burghiul cu diametrul specificat
- 3 mm adâncime de găurire

|       | TIPUL OSULUI | START | PILOT | Ø 3,0 mm | Ø 3,25 mm | Ø 3,5 mm | Ø 3,75 mm | Ø 4,0 mm | Ø 4,25 mm | Ø 4,5 mm | Ø 4,75 mm | Ø 5,1 mm | Ø 5,3 mm | TĂIERE FRONTALĂ |
|-------|--------------|-------|-------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------------|
| 4,1 Ø |              |       |       |          |           |          |           |          |           |          |           |          |          |                 |
| 4,5 Ø | IV-V         |       |       |          |           |          |           |          |           |          |           |          |          | 5               |
|       | III          |       |       |          |           |          |           |          |           |          |           |          |          | 5               |
|       | II           |       |       |          |           |          |           |          |           |          |           |          |          | 7               |
|       | 0-I          |       |       |          |           |          |           |          |           |          |           |          |          | 7               |
| 5,0 Ø | IV-V         |       |       |          |           |          |           |          |           |          |           |          |          | 6               |
|       | III          |       |       |          |           |          |           |          |           |          |           |          |          | 6               |
|       | II           |       |       |          |           |          |           |          |           |          |           |          |          | 8               |
|       | 0-I          |       |       |          |           |          |           |          |           |          |           |          |          | 9               |
| 5,5 Ø | IV-V         |       |       |          |           |          |           |          |           |          |           |          |          | 6               |
|       | III          |       |       |          |           |          |           |          |           |          |           |          |          | 7               |
|       | II           |       |       |          |           |          |           |          |           |          |           |          |          | 9               |
|       | 0-I          |       |       |          |           |          |           |          |           |          |           |          |          | 9               |
| 6,0 Ø | IV-V         |       |       |          |           |          |           |          |           |          |           |          |          | 7               |
|       | III          |       |       |          |           |          |           |          |           |          |           |          |          | 7               |