



Ghid de secvență de găurire recomandat

pentru implanturile BTI Interna



NOTĂ: consultați distribuitorul dvs. pentru disponibilitatea produsului pe diferite piețe.

Semne de adâncime a burghiului

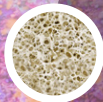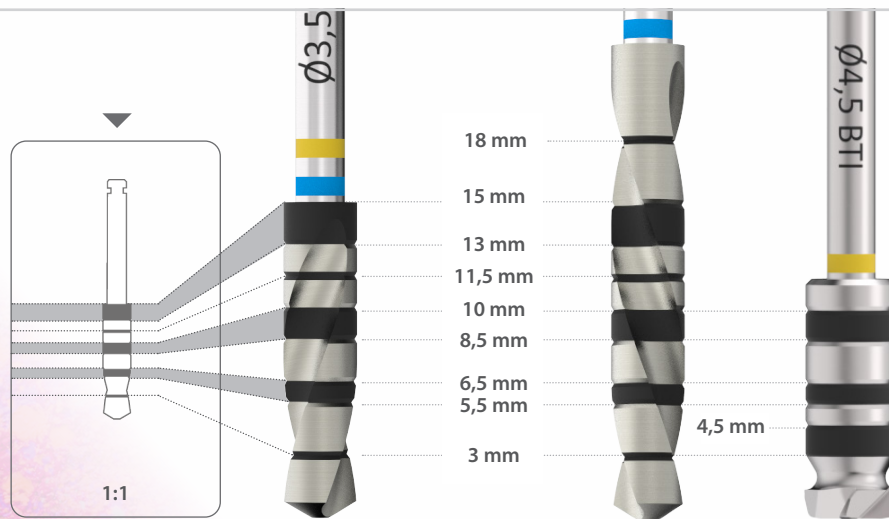

CLASĂ / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BURGHIU

Burghiu inițial
Burghiu
Burghiu conic
Burghie cu tăiere
frontală

ROTAȚII

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
0 - 75 rpm


IRIGARE

da
nu
nu
nu

Lungimea implantului (de la 6,5 la 13 mm)




 Lungimea totală a implantului
 6,5 mm adâncime de găurire
 2-3 mm adâncime de găurire

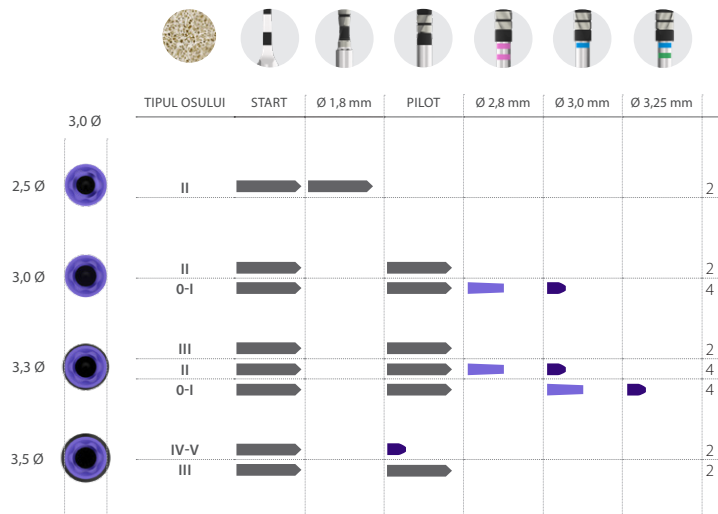

Lungimea implantului (de la 4,5 la 5,5 mm)



 Lungimea totală a implantului
 2-3 mm adâncime de găurire

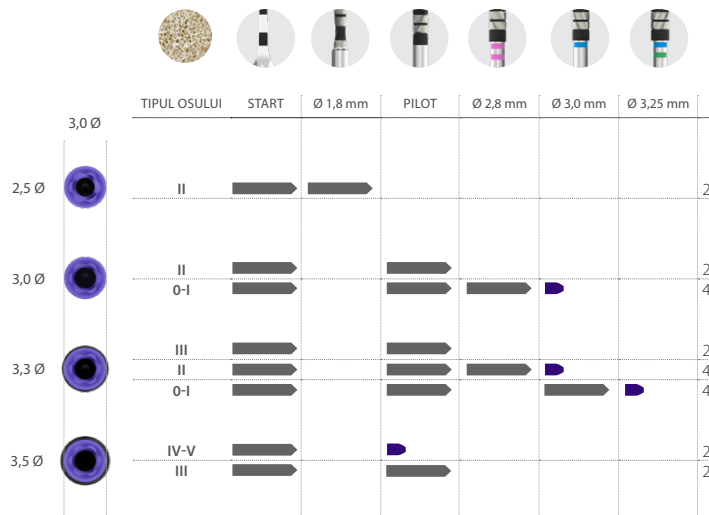


Platformă îngustă / CORE

Diametrul platformei Ø3,5 mm

Lungimea implantului (de la 7,5 la 15 mm)

 Lungimea totală a implantului
 6,5 mm adâncime de găurire
 2-3 mm adâncime de găurire

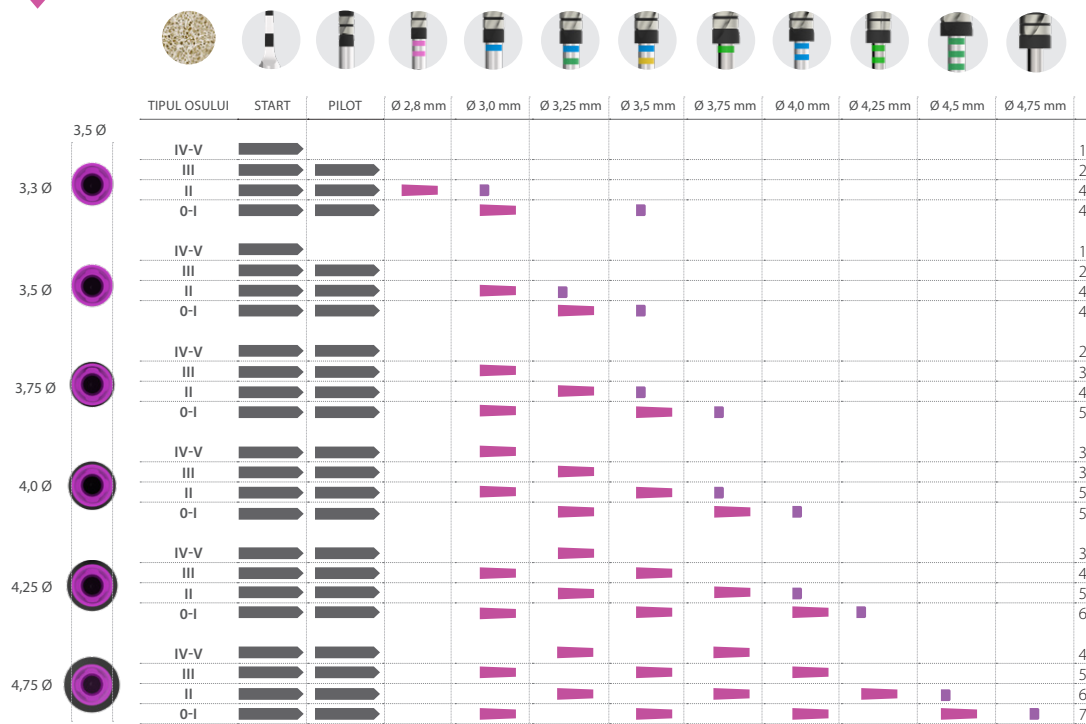


găurire
Ghid de secvență de





Lungimea implantului (de la 4,5 la 6,5 mm)

 Lungimea totală a implantului
 Lungimea totală a implantului cu burghiul cu diametrul specificat
 2-3 mm adâncime de găurire

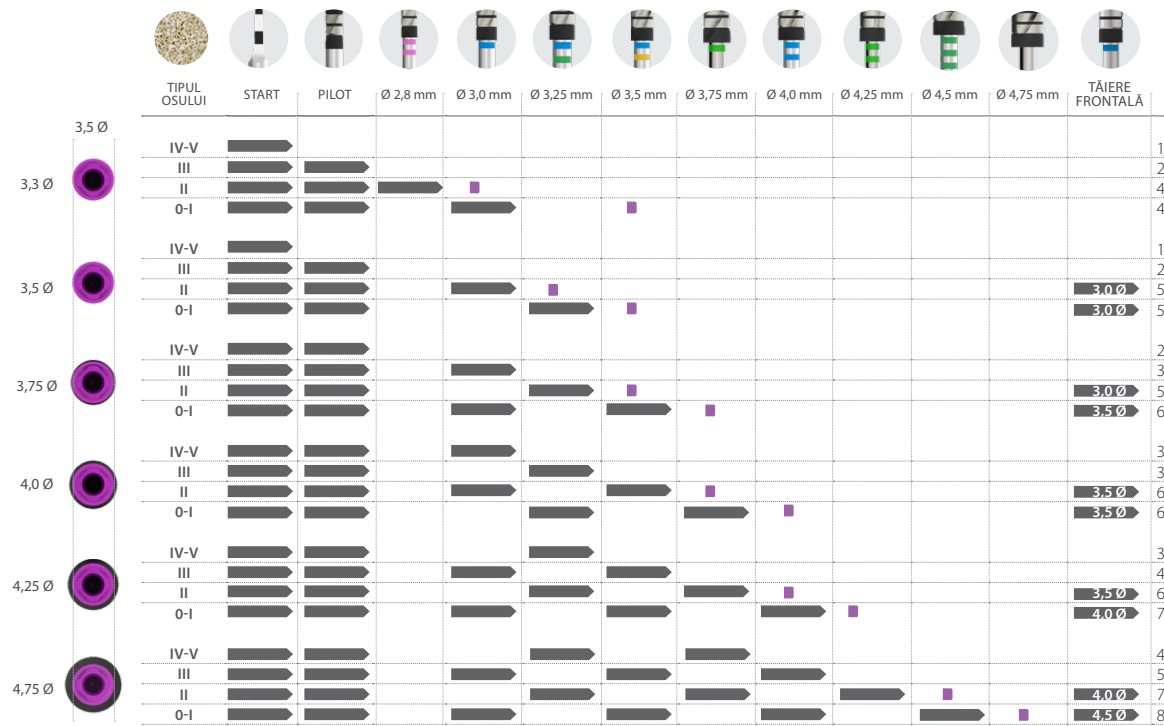

Platformă îngustă / CORE-X


Diametrul platformei Ø3,5 mm



Lungimea implantului (de la 6,5 la 13 mm)



 Lungimea totală a implantului
 5,5 mm adâncime de găurire
 2-3 mm adâncime de găurire

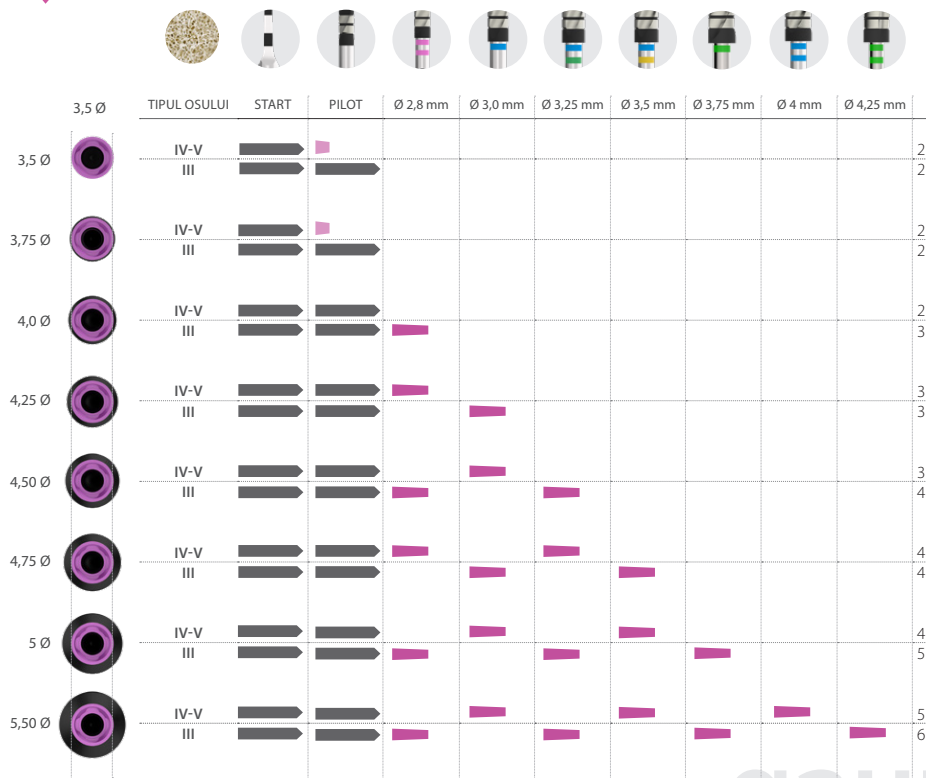

IMPORTANT:

Secvență de frezare
valabilă numai pentru
implanturile CORE-X

gaurire
Ghid de secvență de



Platformă îngustă / CORE-X

Diametrul platformei Ø3,5 mm




Lungimea implantului

(de la 4,5 la 5,5 mm)



 Lungimea totală a implantului
 2-3 mm adâncime de găurire

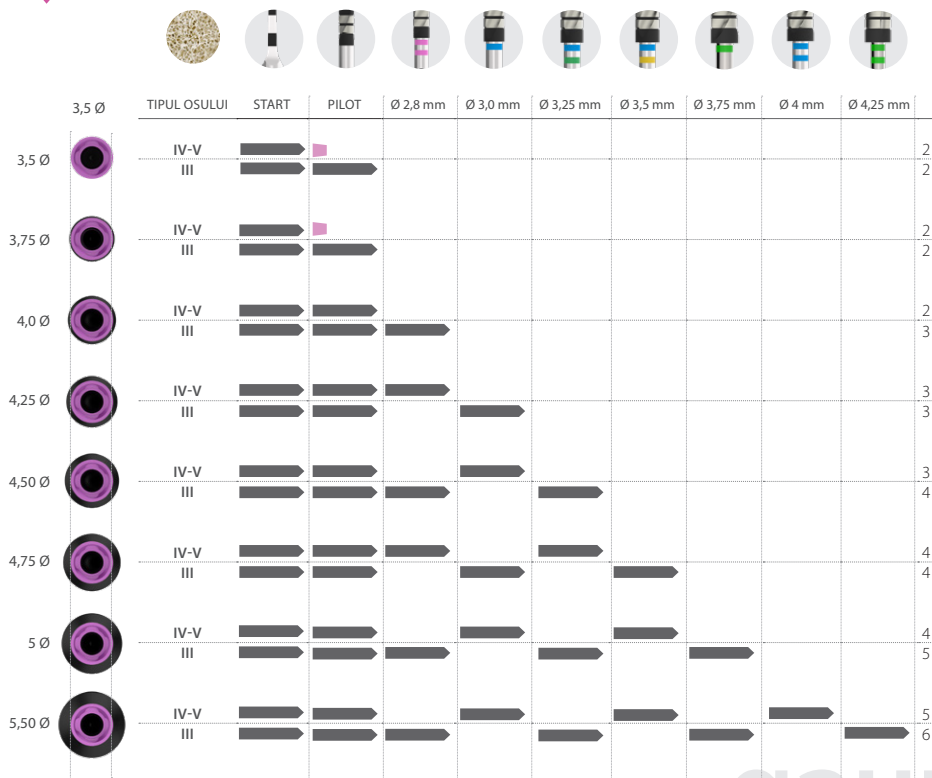

IMPORTANT:

Secvență de frezare
valabilă numai pentru
implanturile CORE-X


gaurire
Ghid de secvență de



Lungimea implantului (de la 10 la 15 mm)




 Lungimea totală a implantului
 75 % din lungimea totală a implantului
 25 % din lungimea totală a implantului
 5,0 mm adâncime de găurire

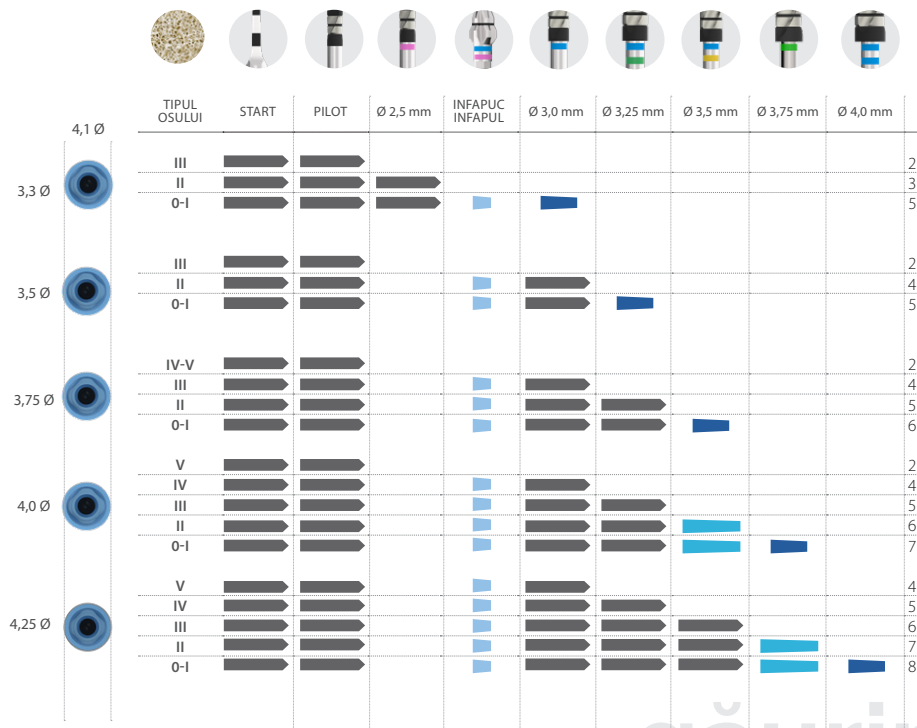

Lungimea implantului (de la 5,5 la 8,5 mm)

-  Lungimea totală a implantului
-  Lungimea totală a implantului cu burghiul cu diametrul specificat
-  5,0 mm adâncime de găurire
-  2-3 mm adâncime de găurire

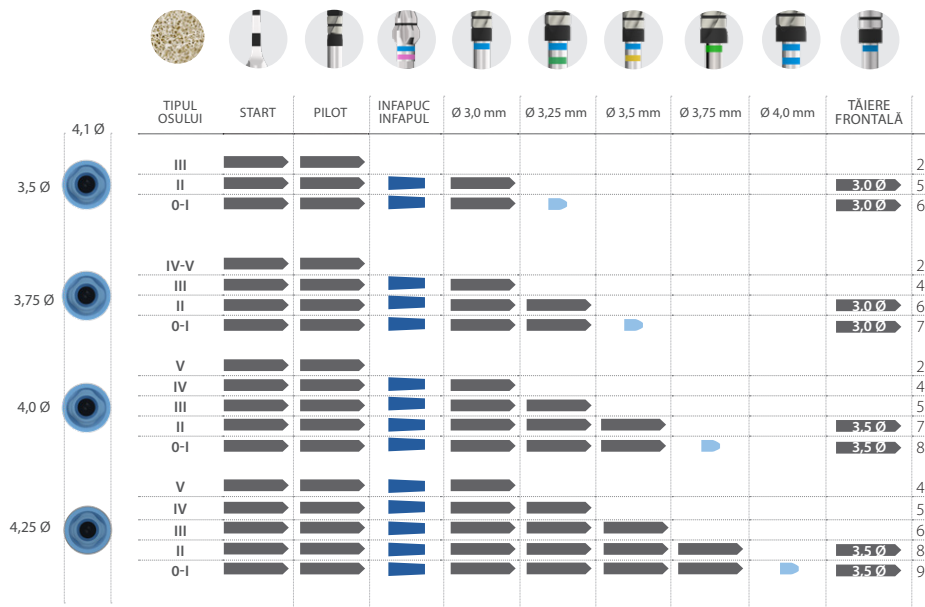




Lungimea implantului (de la 8,5 la 15 mm)



 Lungimea totală a implantului
 6,5 mm adâncime de găurire
 3 mm adâncime de găurire

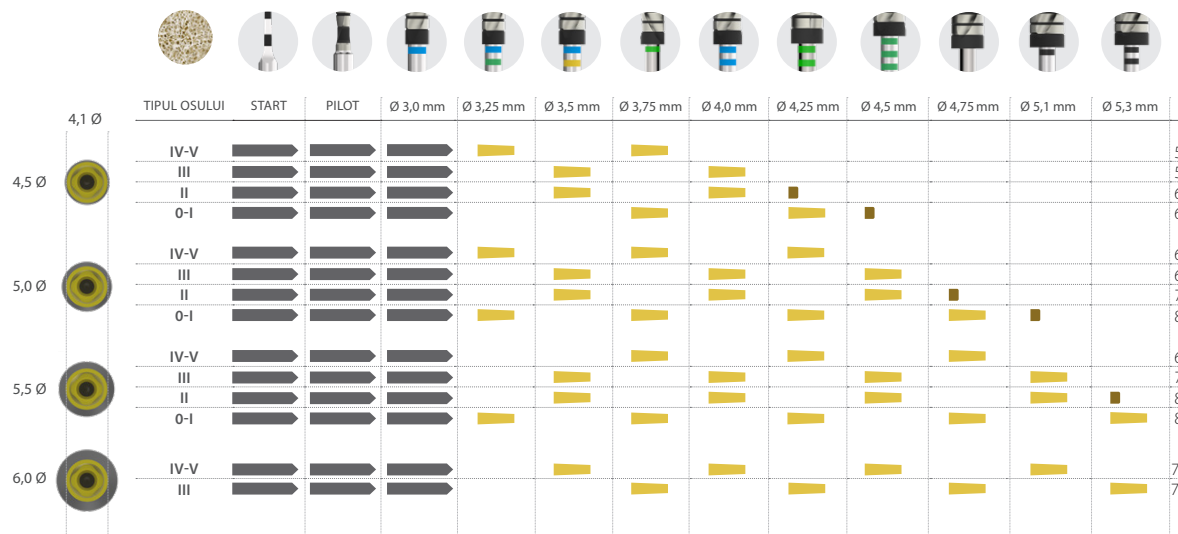

găurire
Ghid de secvență de



Platformă Universală Plus

Diametrul platformei Ø4,1 mm



Lungimea implantului

(de la 4,5 la 7,5 mm)



Lungimea totală a implantului



Lungimea totală a implantului cu burghiul cu diametrul specificat



3 mm adâncime de găurire



	TIPUL OSULUI	START	PILOT	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,25 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,75 mm	Ø 5,1 mm	Ø 5,3 mm	TĂIERE FRONTALĂ
4,1 Ø														
4,5 Ø	IV-V													5
	III													5
	II													7
	0-I													7
5,0 Ø	IV-V													6
	III													6
	II													8
	0-I													9
5,5 Ø	IV-V													6
	III													7
	II													9
	0-I													9
6,0 Ø	IV-V													7
	III													7

găurire
Ghid de secvență de

