



Guide till rekommenderad borrningssekvens

för Interna BTI-implantat



OBS: kontakta din distributör för information om produktens tillgänglighet på de olika marknaderna

Borrdjupsmarkeringar

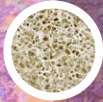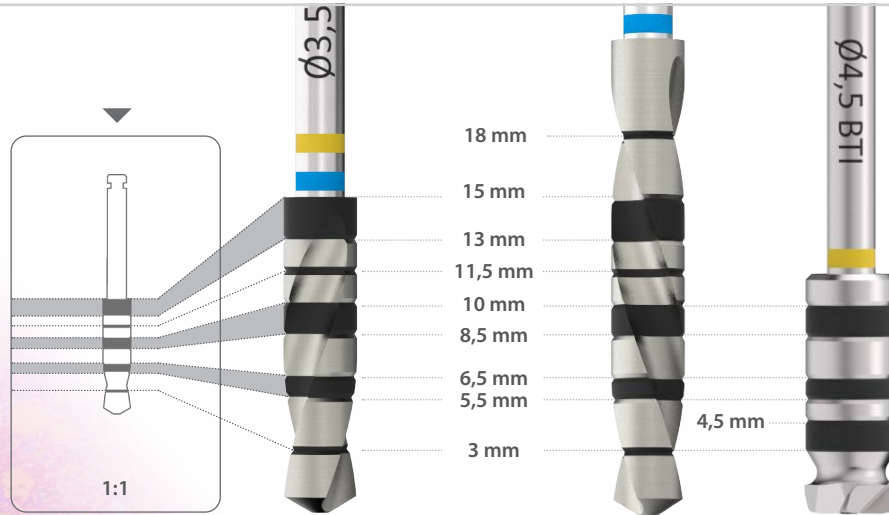

KLASS / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BORR

Inledande borrar
Borrar
Borrar för försänkning
Främre skärborrar

VARVTAL

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm


SKÖLJNING

ja
nej
nej
nej

Implantatlängder

(från 6,5 till 13 mm)

Implantatets totala längd
 6,5 mm borrhjup
 2-3 mm borrhjup

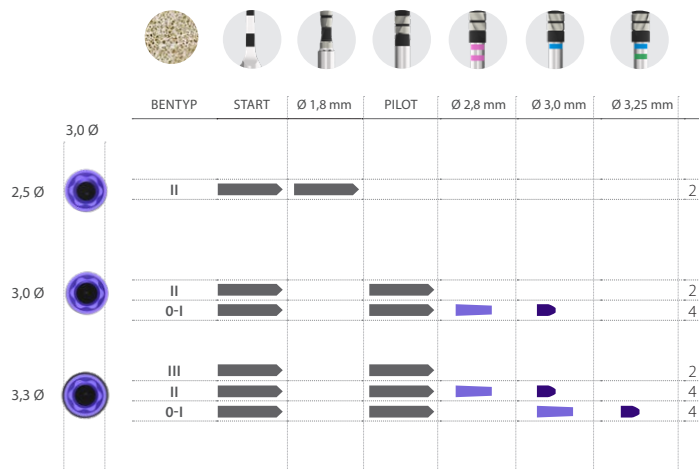




Implantatlängder

(från 4,5 till 5,5 mm)

Implantatets totala längd
2-3 mm borrhjup

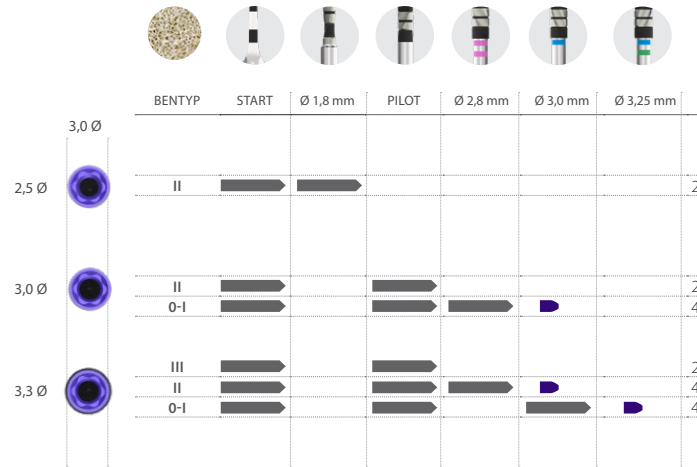



Implantatlängder

(från 7,5 till 15 mm)

Implantatets totala längd
6,5 mm borrhjup
2-3 mm borrhjup



Smal/CORE plattform
Plattformsdiameter Ø3,5 mm


borrningssekvens
Guide till



Implantatlängder

(från 4,5 till 6,5 mm)

- Implantatets totala längd
- Implantatets totala längd med borrh med specificerad diameter
- 2-3 mm borrhjup

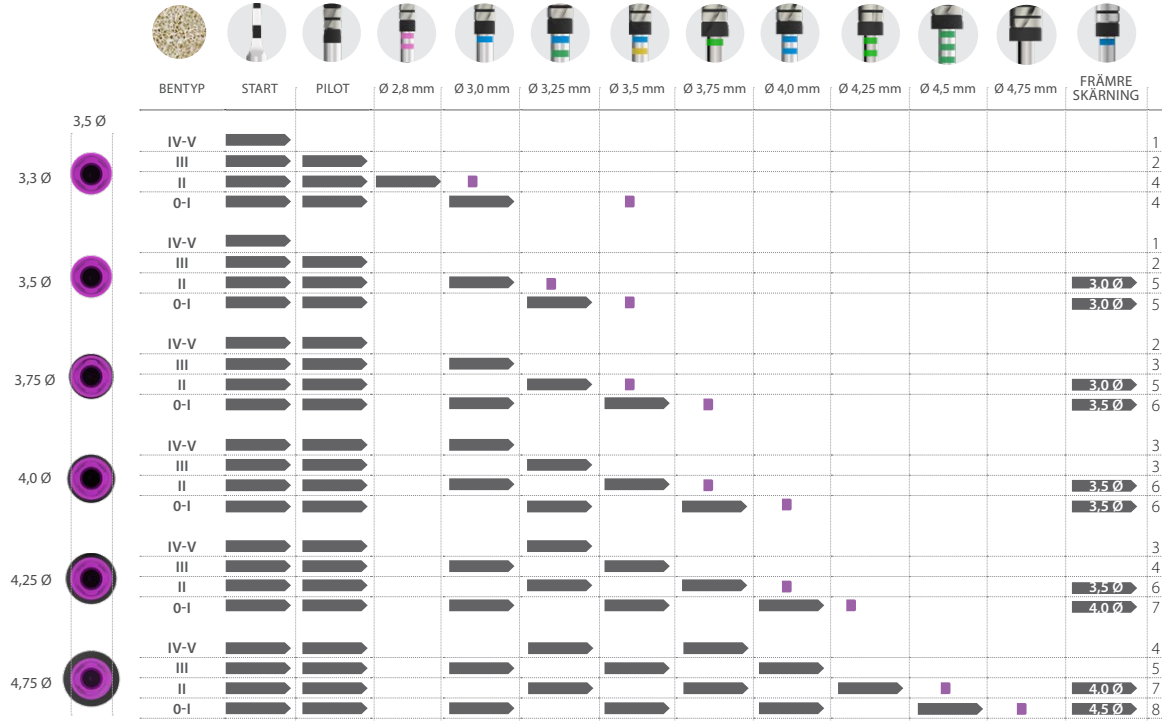

Smal/CORE plattform
Plattformsdiameter Ø3,5 mm


borrningssekvens
Guide till



Implantatlängder

(från 6,5 till 13 mm)

Implantatets totala längd
5,5 mm borrhjup

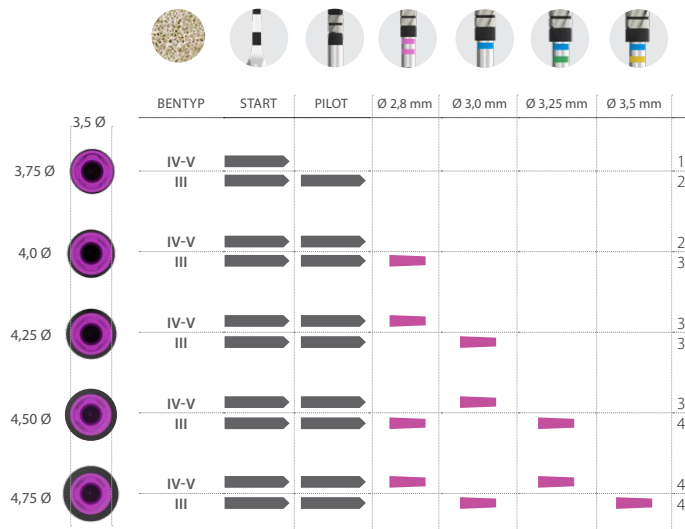


VIKTIGT:
Fräsekvensen gäller endast
för CORE-X® -implantat

Implantatlängder

(från 4,5 till 5,5 mm)

Implantatets totala längd


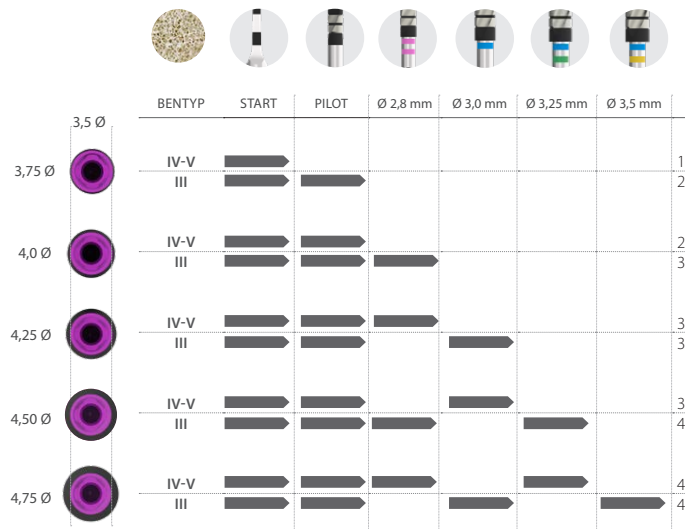


VIKTIGT:

Fräsekvensen gäller endast för CORE-X® -implantat

Implantatlängder

(från 10 till 15 mm)

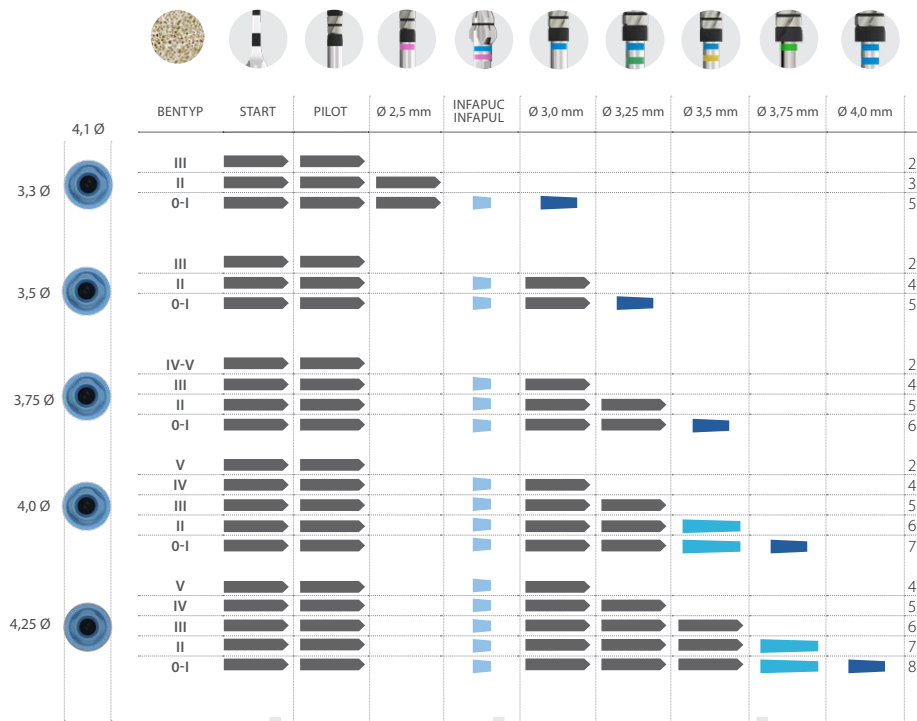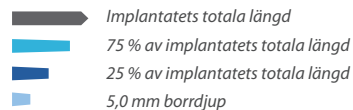


borrningssekvens
Guide till



Implantatlängder

(från 5,5 till 8,5 mm)

- Implantatets totala längd
- Implantatets totala längd med borr med specificerad diameter
- 5,0 mm borrdjup
- 2-3 mm borrdjup

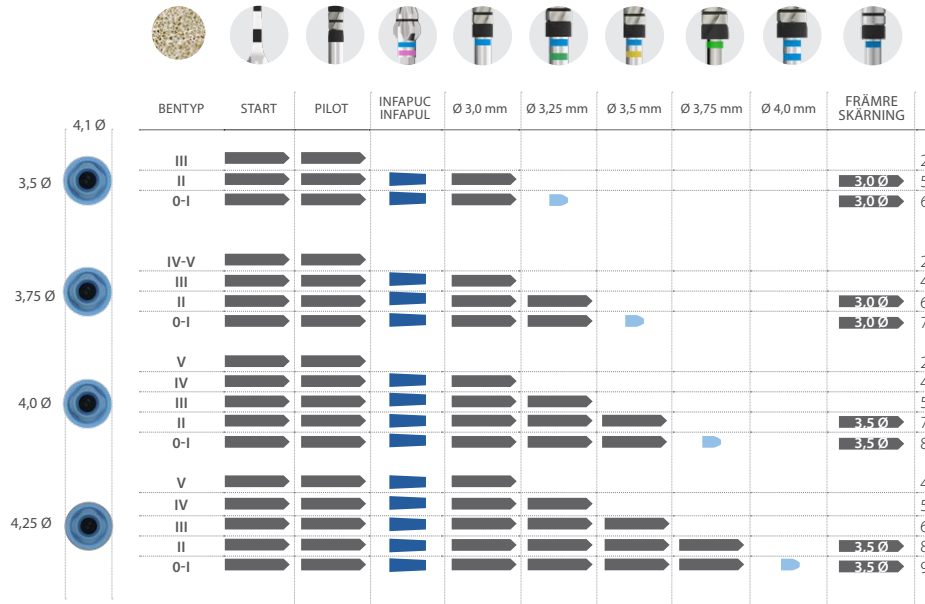


Implantatlängder

(från 8,5 till 15 mm)



Implantatets totala längd
6,5 mm borrhjup
3 mm borrhjup

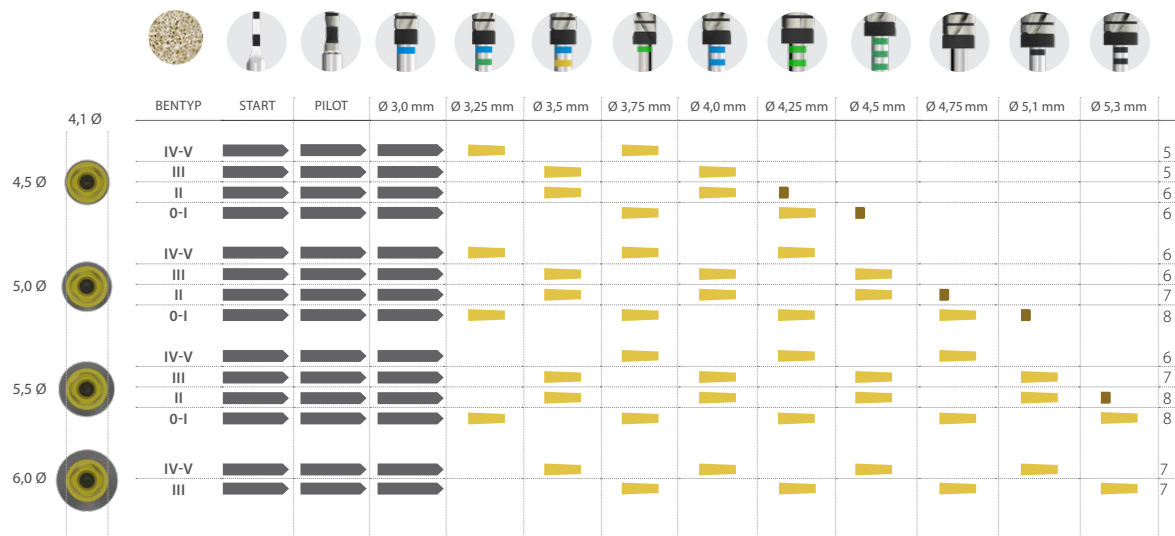

borrningssekvens
Guide till

Implantatlängder

(från 4,5 till 7,5 mm)

- Implantatets totala längd
- X,X Ø Implantatets totala längd med borrh med specificerad diameter
- 3 mm borrhdjup

