



Guide till rekommenderad borrningssekvens

för Interna BTI-implantat



OBS: kontakta din distributör för information om produktens tillgänglighet på de olika marknaderna

Borrdjupsmarkeringar

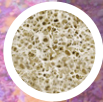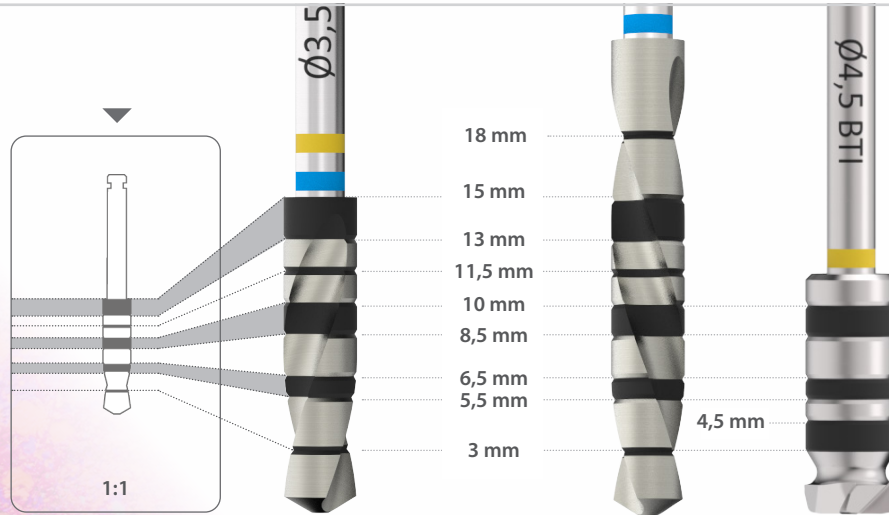

KLASS / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BORR

Inledande borrar
Borrar
Borrar för försänkning
Främre skärborrar

VARVTAL

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

SKÖLJNING


ja
nej
nej
nej

Implantatlängder

(från 6,5 till 13 mm)




Implantatets totala längd
 6,5 mm borrhjup
 2-3 mm borrhjup

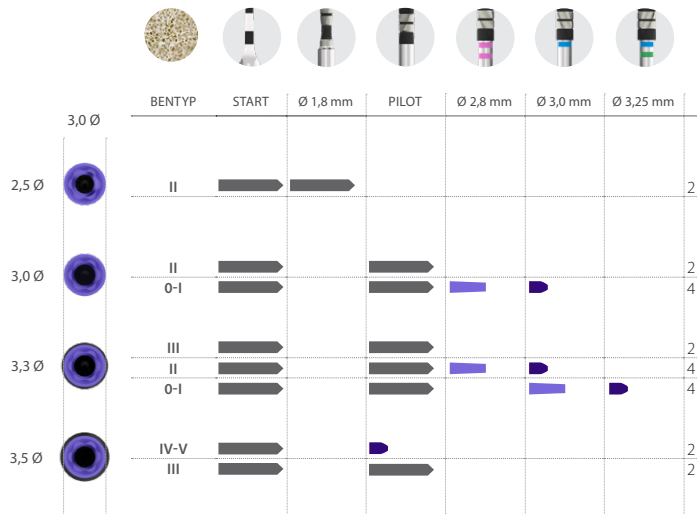

Implantatlängder (från 4,5 till 5,5 mm)




Implantatets totala längd
 2-3 mm borrhjup

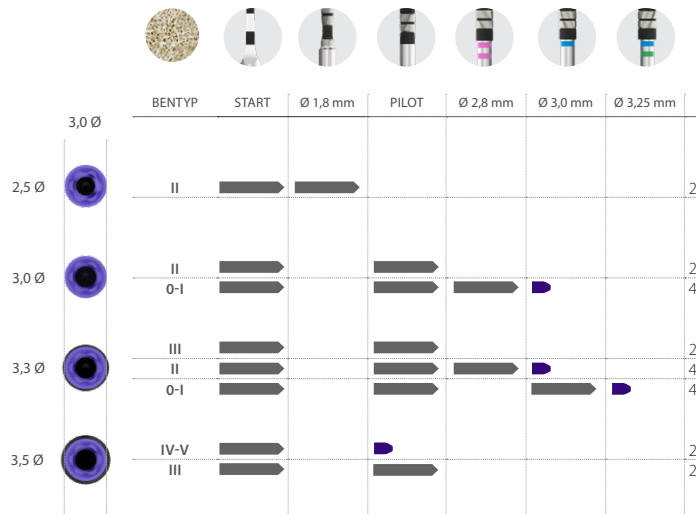

Implantatlängder

(från 7,5 till 15 mm)


Implantatets totala längd
6,5 mm borrhjup
2-3 mm borrhjup

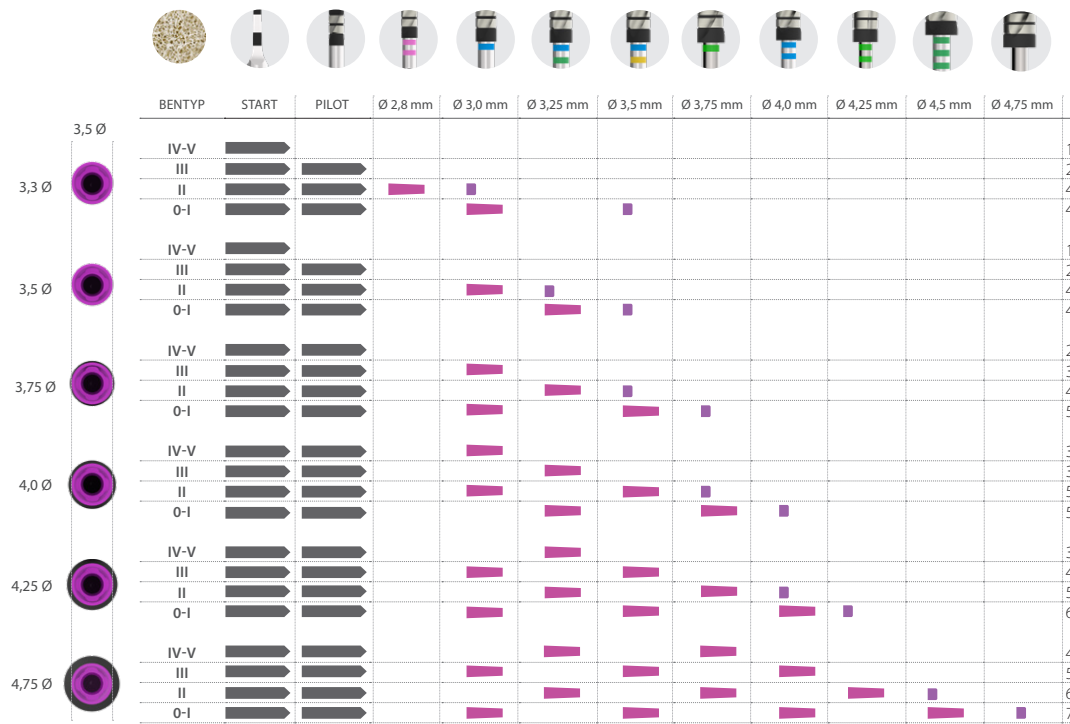

Implantatlängder

(från 4,5 till 6,5 mm)


 Implantatets totala längd
 Implantatets totala längd med borrh med specificerad diameter
 2-3 mm borrhjup

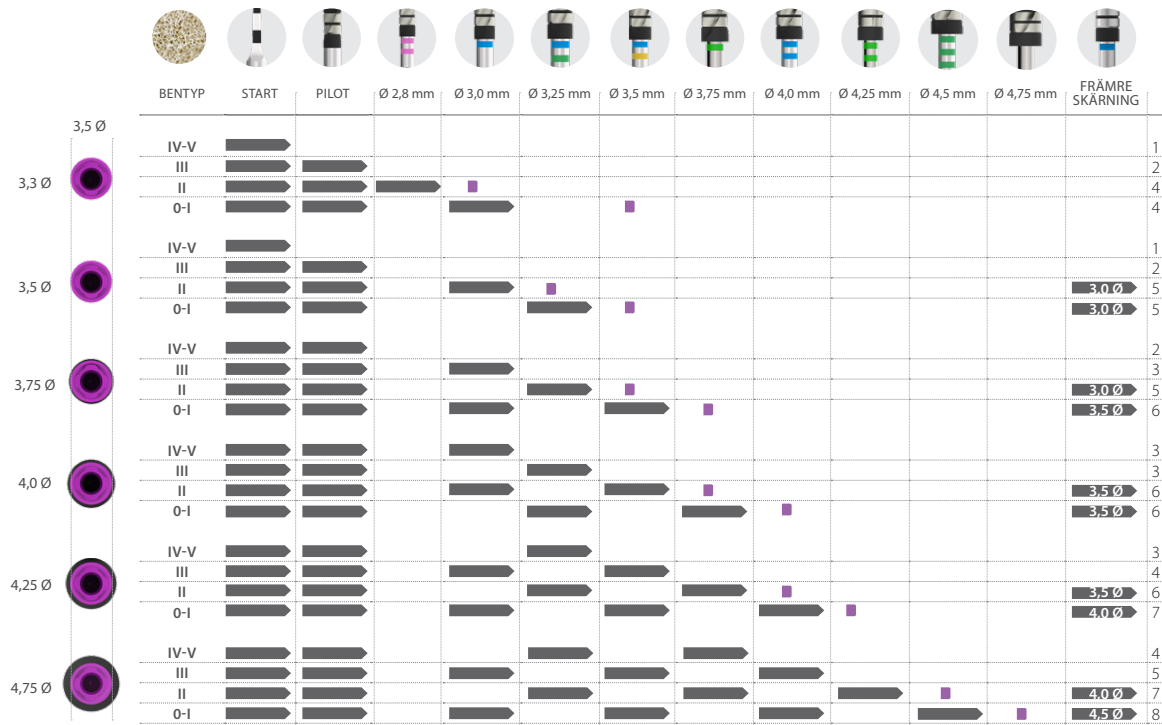

Implantatlängder

(från 6,5 till 13 mm)

Implantatets totala längd
5,5 mm borrhjup
2-3 mm borrhjup

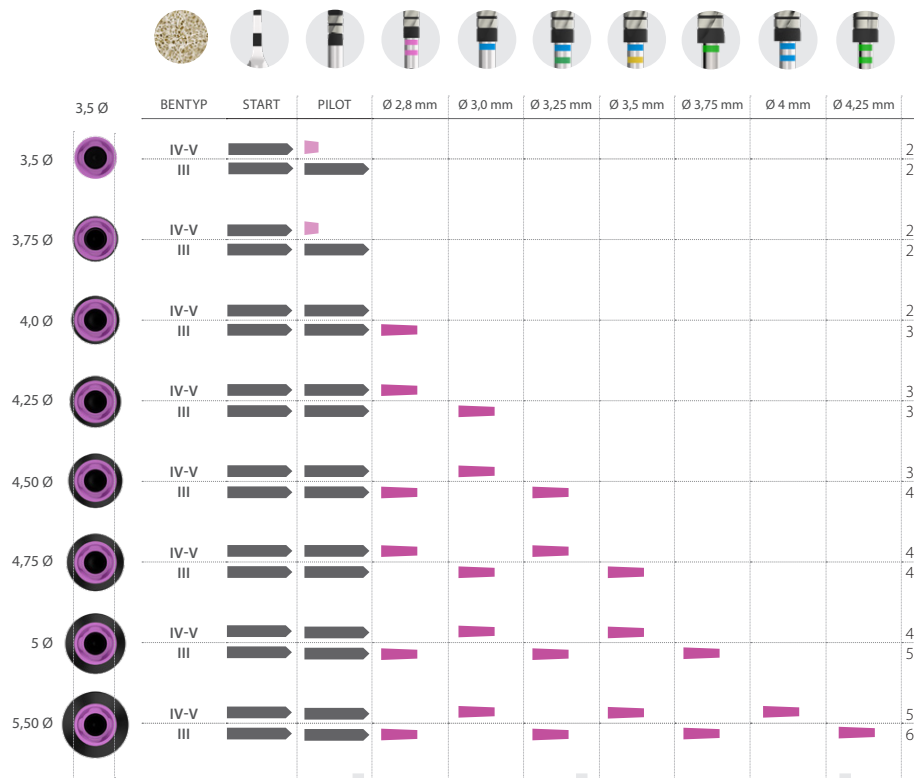


VIKTIGT:
Fräsekvensen gäller
endast för CORE-X
-implantat



Implantatlängder

(från 4,5 till 5,5 mm)

Implantatets totala längd
2-3 mm borrhjup

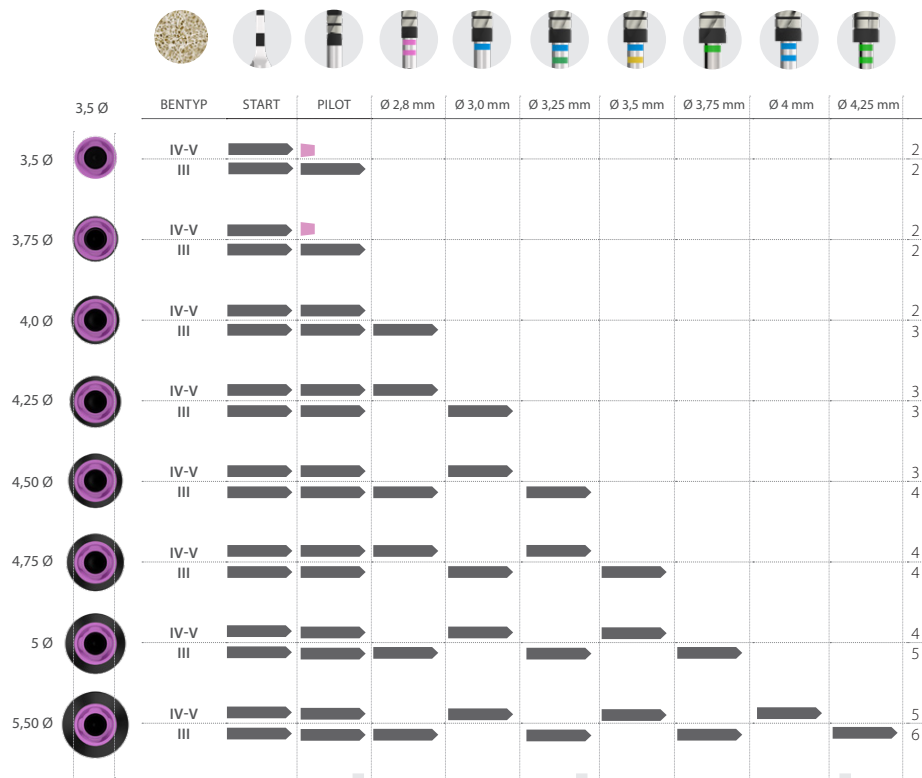

VIKTIGT:

Fräsekvensen gäller
endast före CORE-X
-implantat



borrningssekvens

Guide till



Implantatlängder


(från 10 till 15 mm)

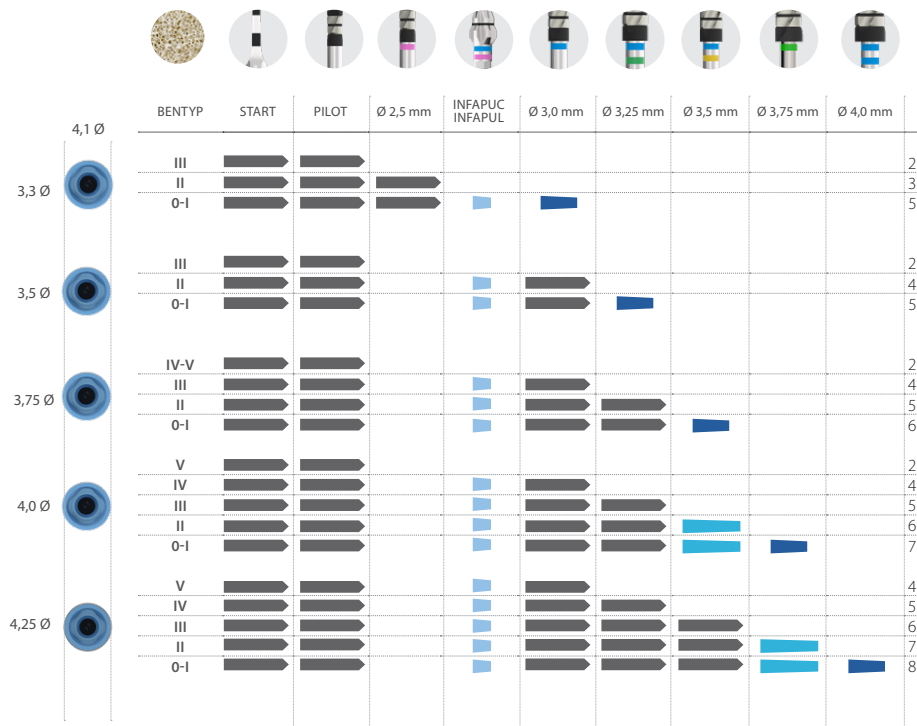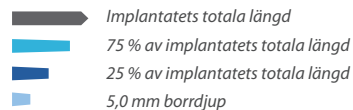

Implantatlängder

(från 5,5 till 8,5 mm)

- Implantatets totala längd
- Implantatets totala längd med borrhål med specificerad diameter
- 5,0 mm borrhål
- 2-3 mm borrhål

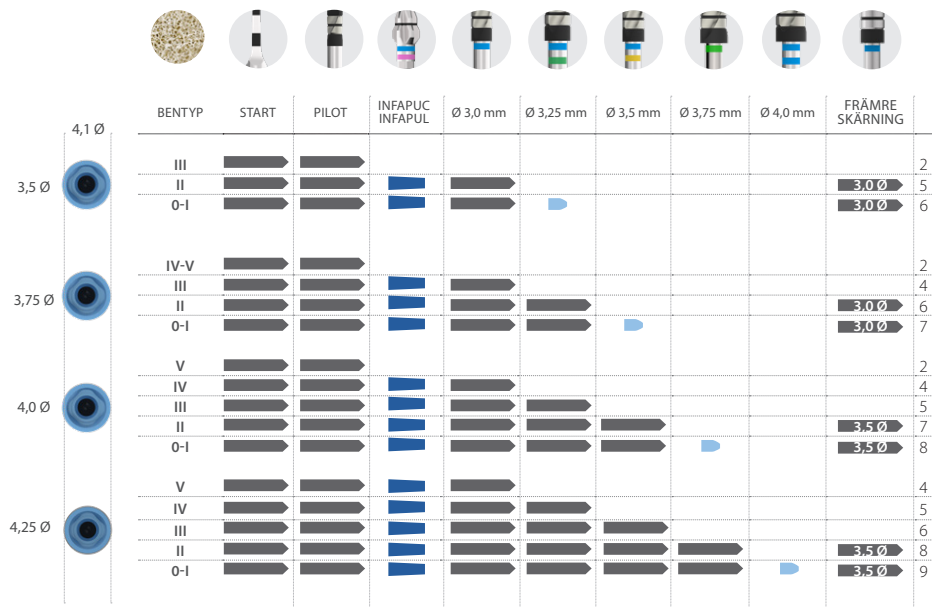




Implantatlängder

(från 8,5 till 15 mm)



 Implantatets totala längd
 6,5 mm borrhjup
 3 mm borrhjup

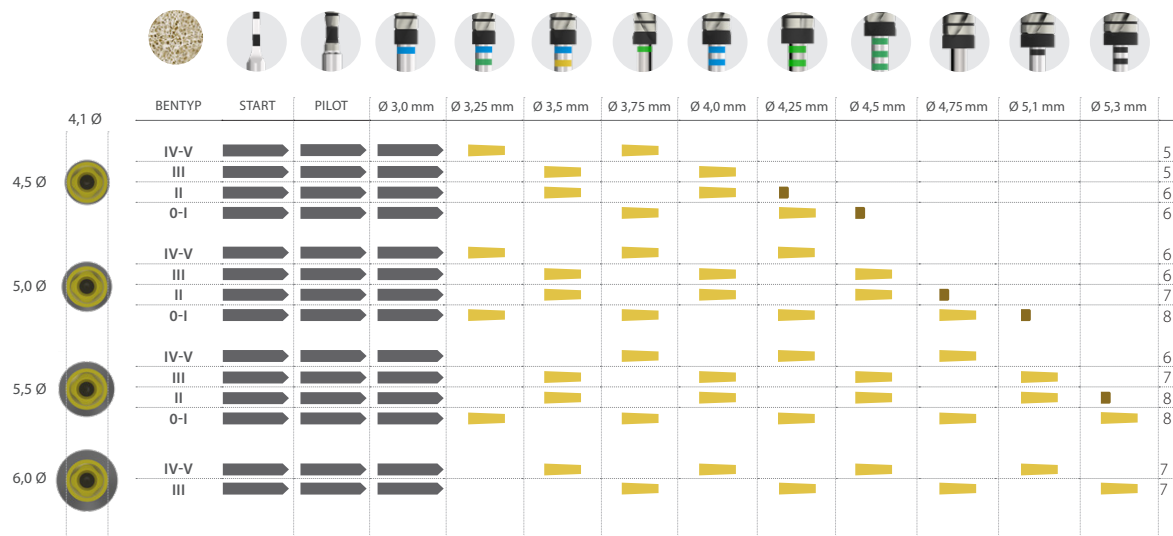

Implantatlängder

(från 4,5 till 7,5 mm)

- Implantatets totala längd
- X,X Ø Implantatets totala längd med borrh med specificerad diameter
- 3 mm borrhjup

