



Guide till rekommenderad borrningssekvens

för Interna BTI-implantat



OBS: kontakta din distributör för information om produktens tillgänglighet på de olika marknaderna

Borrdjupsmarkeringar

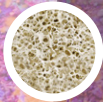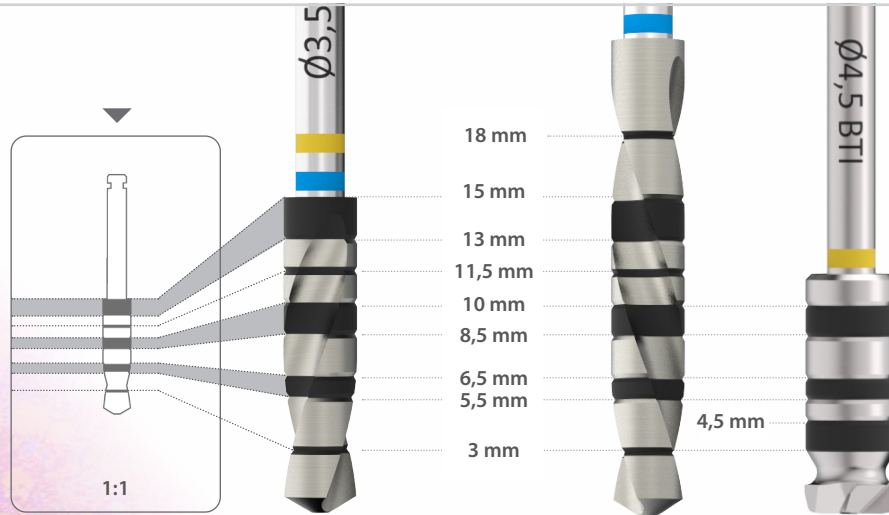

KLASS / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BORR

Inledande borrar
Borrar
Borrar för försänkning
Främre skärborrar

VARVTAL

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

SKÖLJNING

ja
nej
nej
nej

Implantatlängder

(från 5,5 till 13 mm)

Implantatets totala längd
 mm
 Variabel
 2-3 mm borrhjup


IMPLANTATLÄNGDER	2,5 Ø						
	BENTYP	START	Ø 1,8 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,2 mm	Ø 2,3 mm	Ø 2,4 mm
5,5 - 6,5 - 7,5 mm	III						2
	II			5,5 mm			3
	0-I			5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	6
8,5 - 10 mm	III						2
	II			6,5 mm			3
	0-I			6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6
11,5 - 13 mm	III						2
	II			8,5 mm			3
	0-I			8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	6



Implantatlängder

(från 7,5 till 13 mm)

Implantatets totala längd
6,5 mm borrhjup
2-3 mm borrhjup

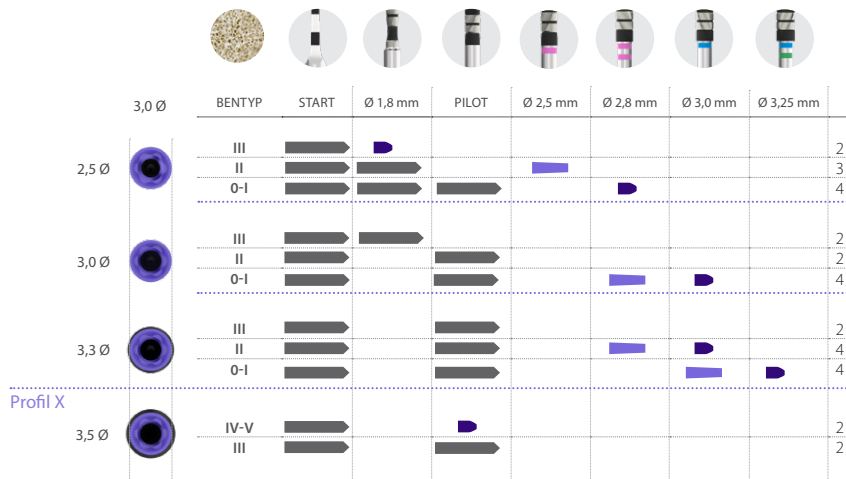

Implantatlängder

(från 4,5 till 6,5 mm)



-  Implantatets totala längd
-  Total längd på implantatet med borr med angiven diameter
-  2-3 mm borrhjup
-  2-3 mm borrhjup. Endast för implantat på 6,5 mm

		BENTYP	START	Ø 1,8 mm	PILOT	Ø 2,5 mm	Ø 2,8 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	FRÄMRE SKÄRNING	
3,0 Ø		III									2
		II								 2,5 Ø	4
		0-I								 2,5 Ø	5
2,5 Ø		III									2
		II								 2,5 Ø	3
		0-I								 2,5 Ø	5
3,0 Ø		III									2
		II								 2,5 Ø	3
		0-I								 2,5 Ø	5
3,3 Ø		III									2
		II								 2,5 Ø	5
		0-I								 2,5 Ø	5
3,5 Ø		IV-V									2
		III									2


Profil X



Implantatlängder

(från 7,5 till 15 mm)


Implantatets totala längd
 6,5 mm borrhjup
 2-3 mm borrhjup

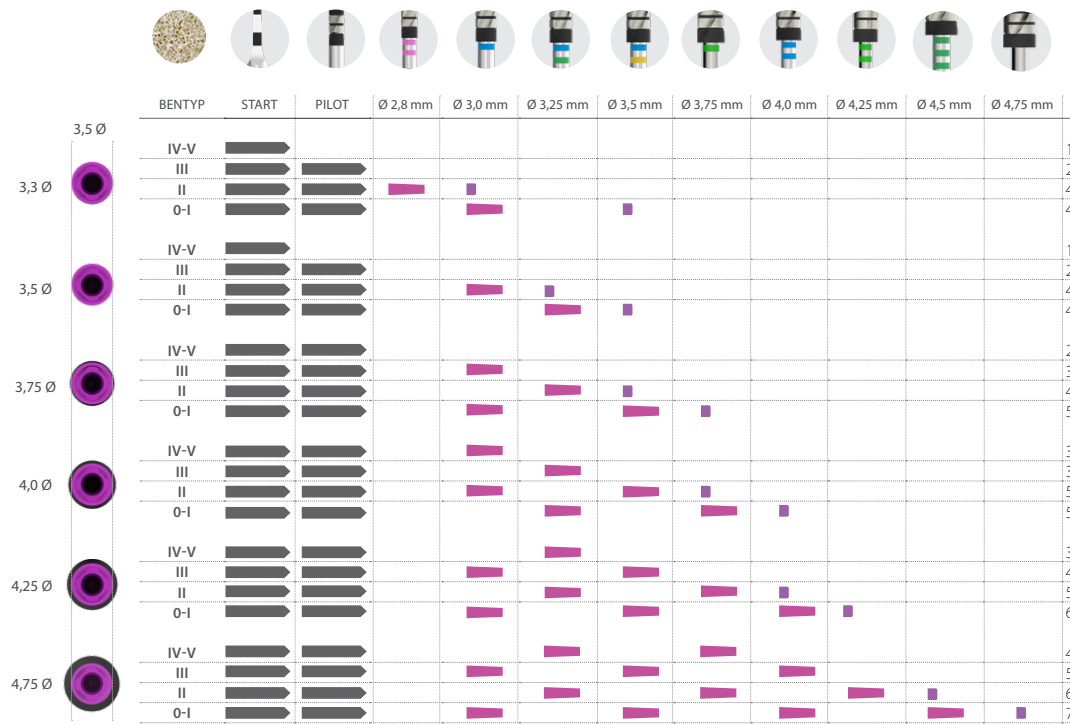

Implantatlängder

(från 4,5 till 6,5 mm)


 Implantatets totala längd
 Implantatets totala längd med borr med specificerad diameter
 2-3 mm borrhjup

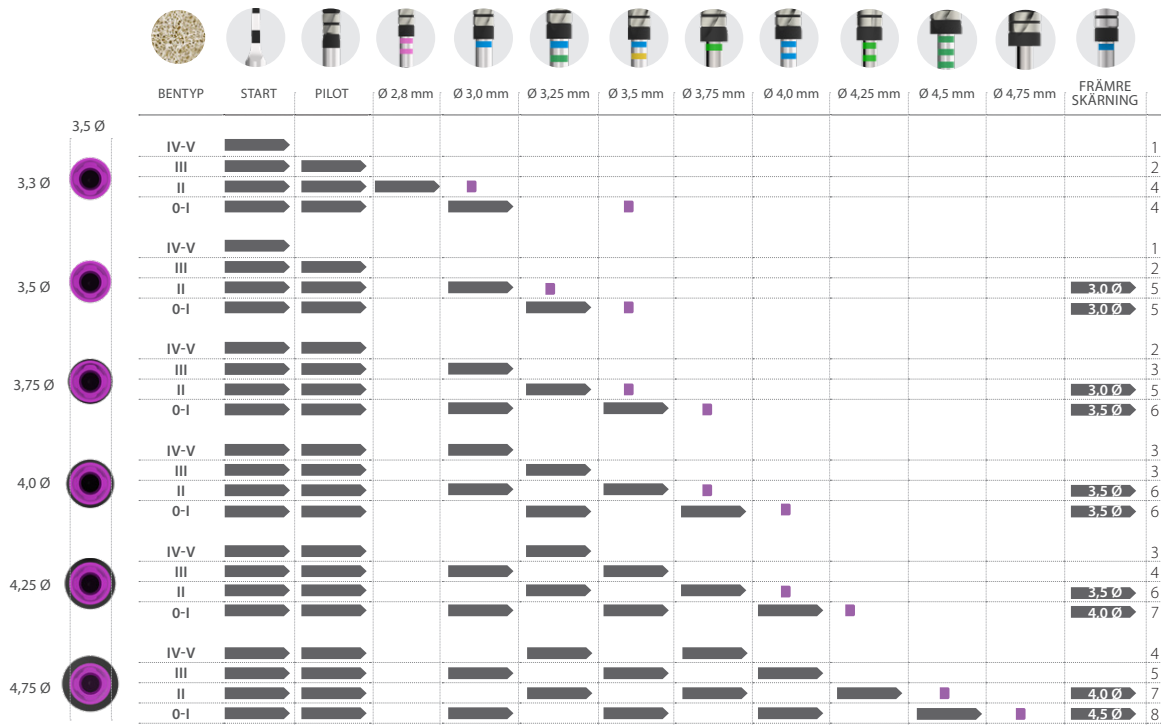

Implantatlängder

(från 6,5 till 13 mm)

Implantatets totala längd
5,5 mm borrhjup
2-3 mm borrhjup

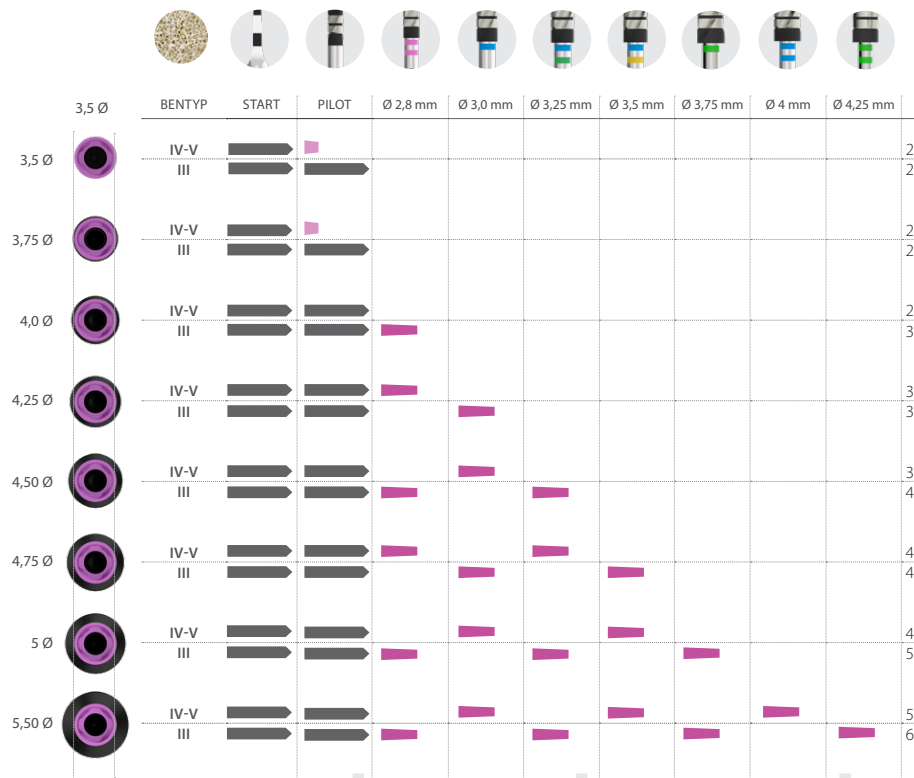

VIKTIGT:

Fräsekvensen gäller
endast för CORE-X
-implantat


borrningsssekvens
Guide till



Implantatlängder

(från 4,5 till 5,5 mm)

Implantatets totala längd
2-3 mm borrhjup

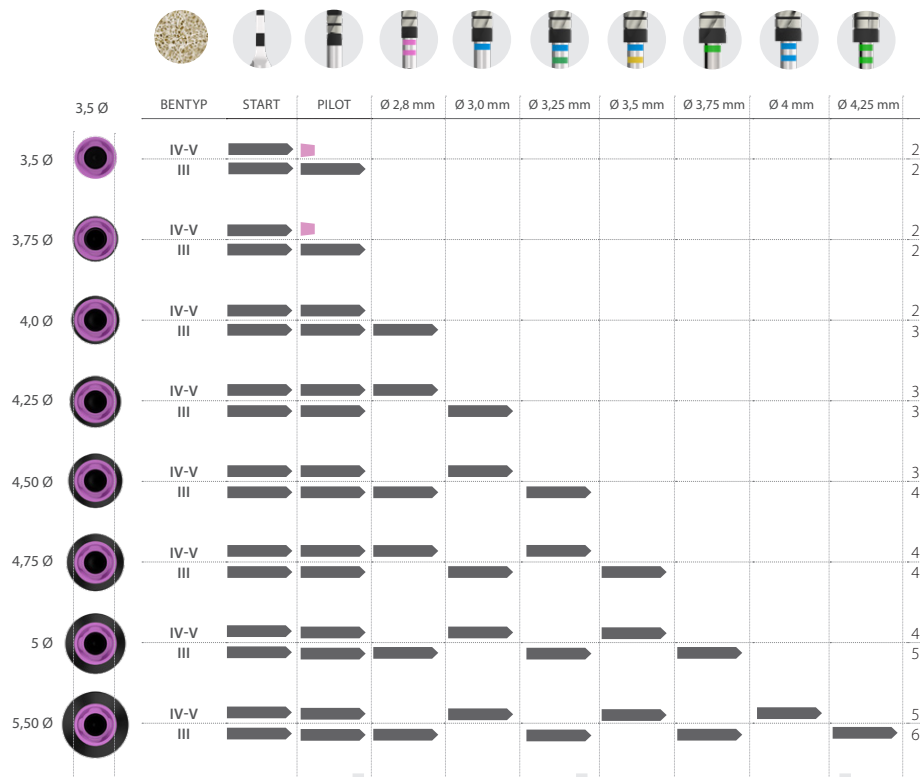



VIKTIGT:

Fräsekvensen gäller
endast före CORE-X
-implantat



Implantatlängder


(från 10 till 15 mm)

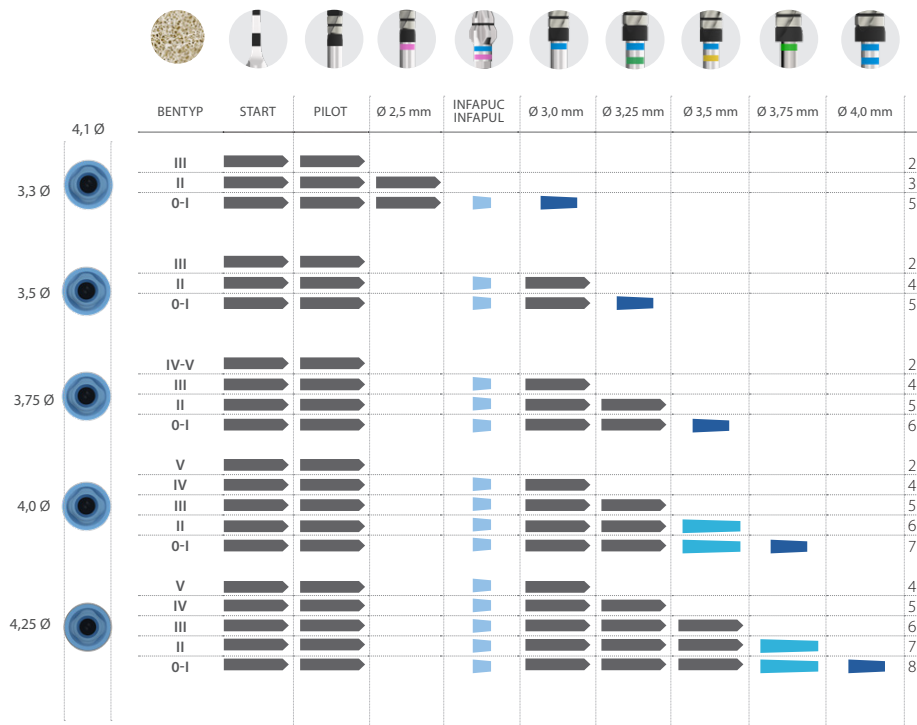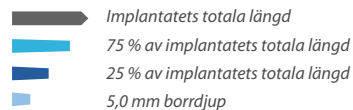

Implantatlängder

(från 5,5 till 8,5 mm)

- Implantatets totala längd
- Implantatets totala längd med borrhål med specificerad diameter
- 5,0 mm borrhål
- 2-3 mm borrhål

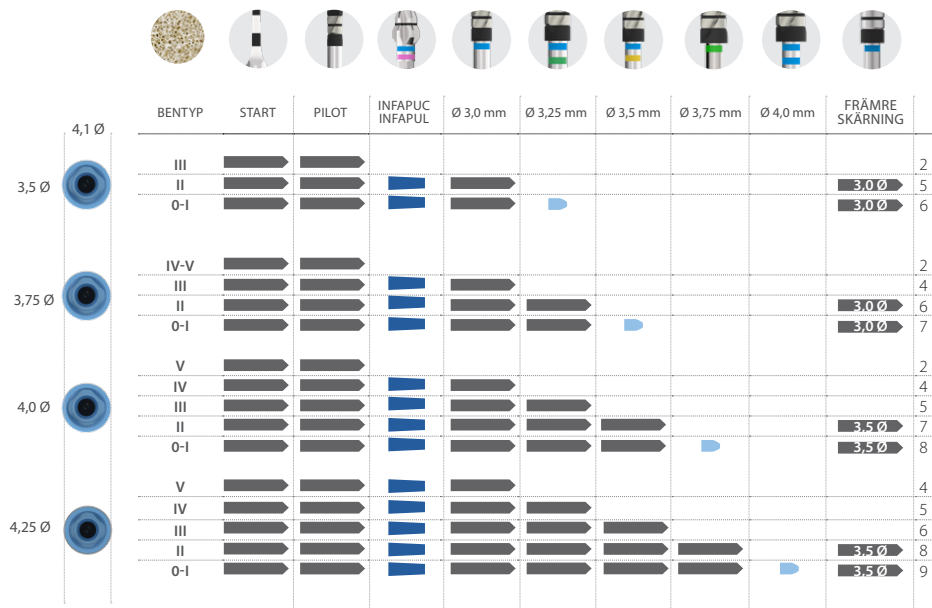




Implantatlängder

(från 8,5 till 15 mm)



Implantatets totala längd
6,5 mm borrhjup
3 mm borrhjup

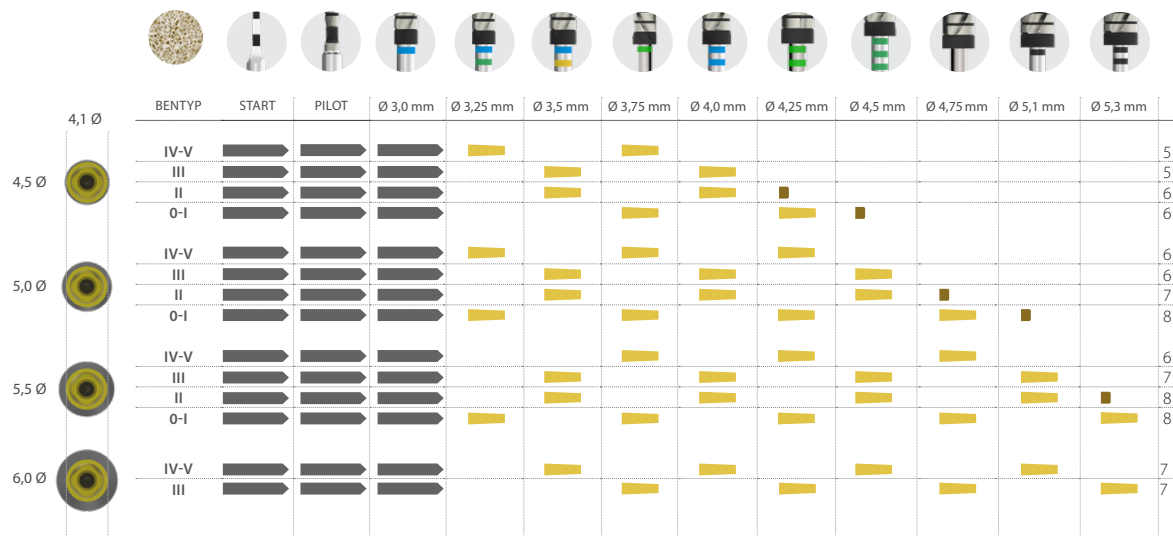

Implantatlängder

(från 4,5 till 7,5 mm)

- Implantatets totala längd
- X,X Ø Implantatets totala längd med borrh med specificerad diameter
- 3 mm borrhjup

