



Doporučený průvodce sekvencemi vrtání

pro implantáty Interna BTI



POZNÁMKA: o dostupnosti výrobku na různých trzích se informujte u svého distributora.

Značky hloubky vrtáku

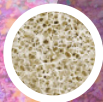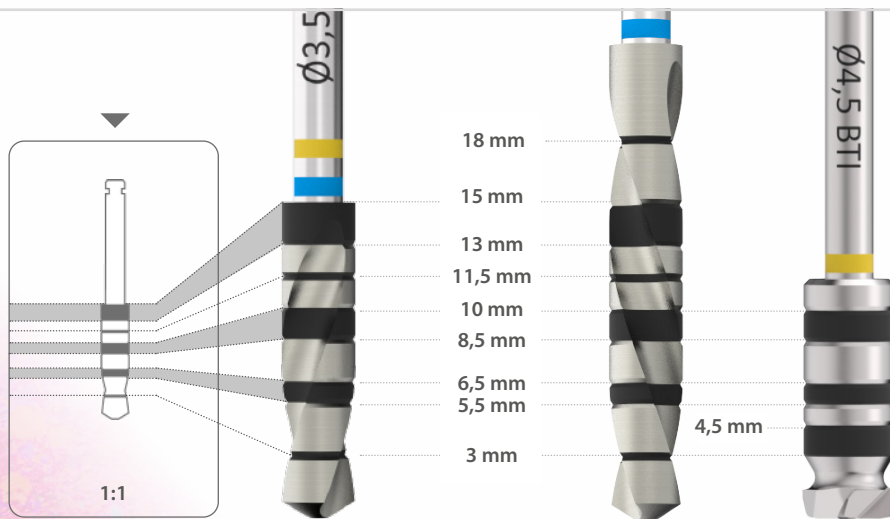

Třída/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

VRTÁK

Počáteční vrták

Vrták

Zahloubovací vrták

Přední řezací vrtáky

OTÁČKY

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

IRIGACE

ano

ne


ne

ne

Délka implantátu (od 6,5 do 13 mm)



 Celková délka implantátu
 Hloubka vrtání 6,5 mm
 Hloubka vrtání 2–3 mm

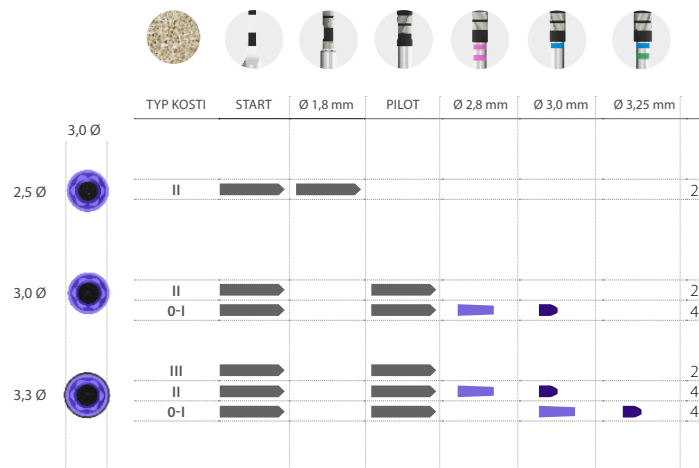


Délka implantátu

(5,5 mm)




→ Celková délka implantátu
Hloubka vrtání 2–3 mm

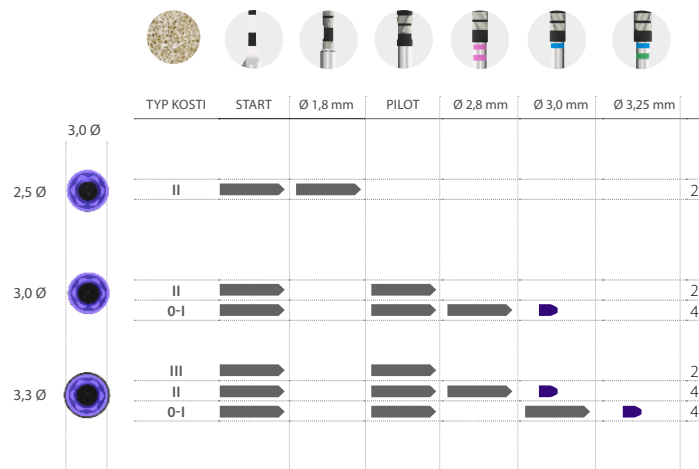

Délka implantátu (od 7,5 do 15 mm)


 Celková délka implantátu
 Hloubka vrtání 6,5 mm
 Hloubka vrtání 2-3 mm

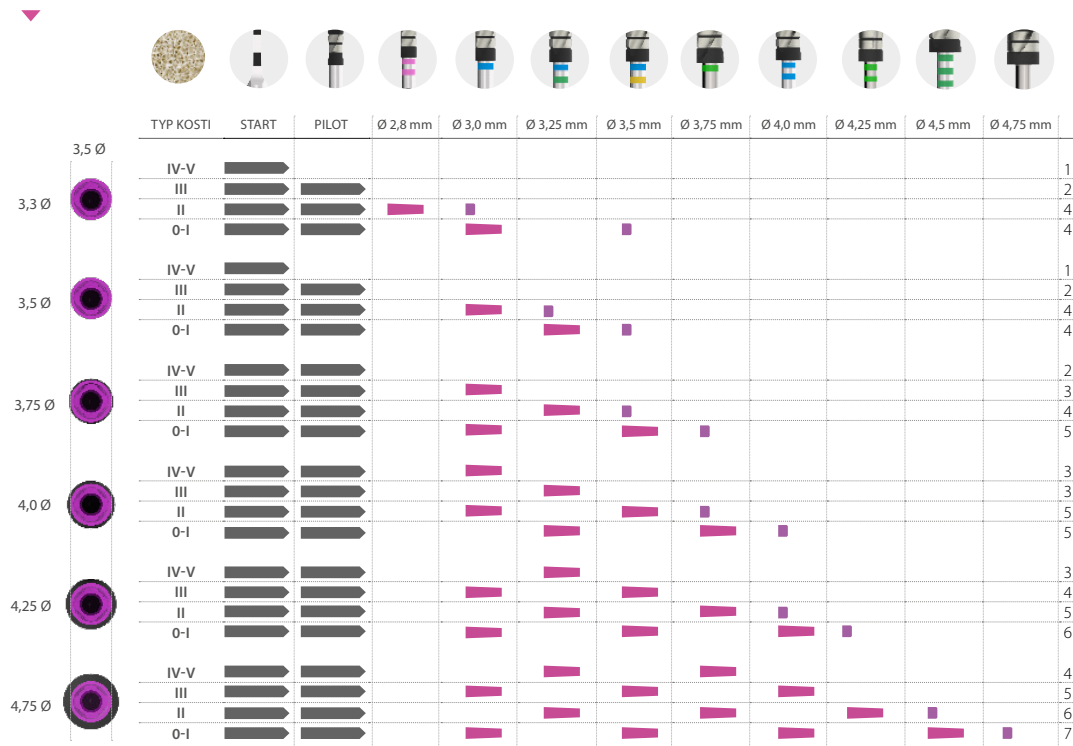

Délka implantátu


(od 4,5 do 6,5 mm)

- Celková délka implantátu
- $X \times \emptyset$ Celková délka implantátu se stanoveným průměrem vrtáku
- Hloubka vrtání 2–3 mm

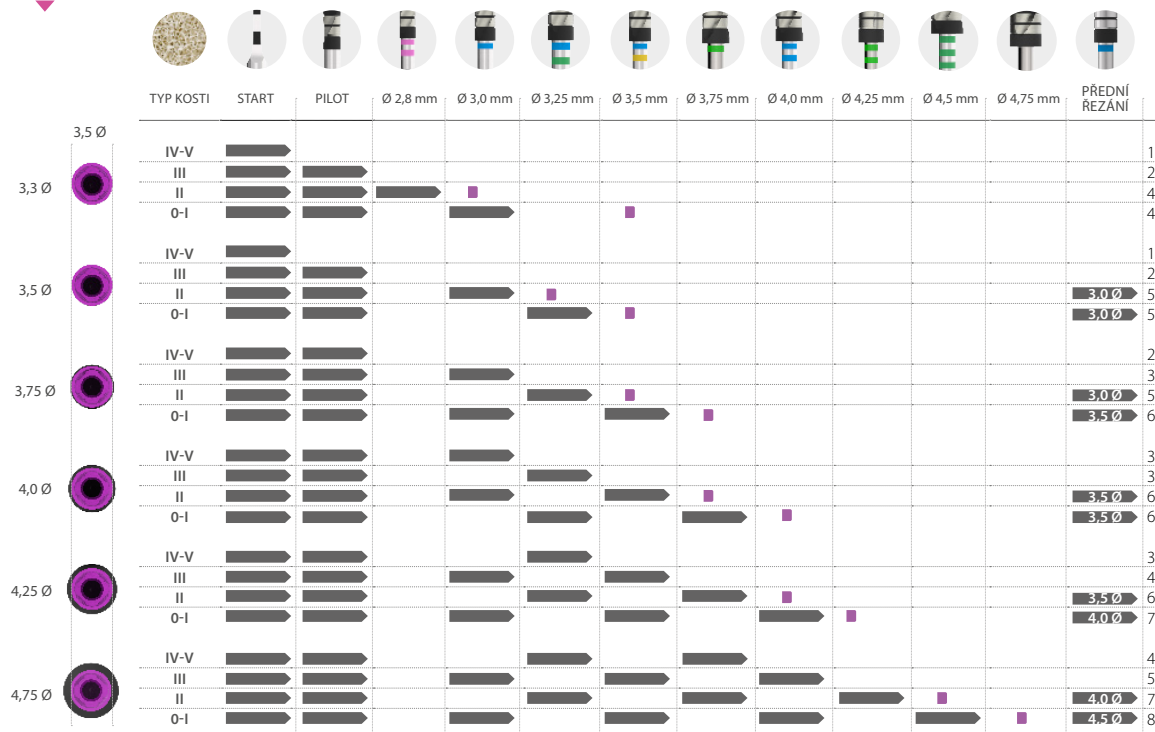

Délka implantátu (od 6,5 do 13 mm)


 Celková délka implantátu
 Hloubka vrtání 5,5 mm

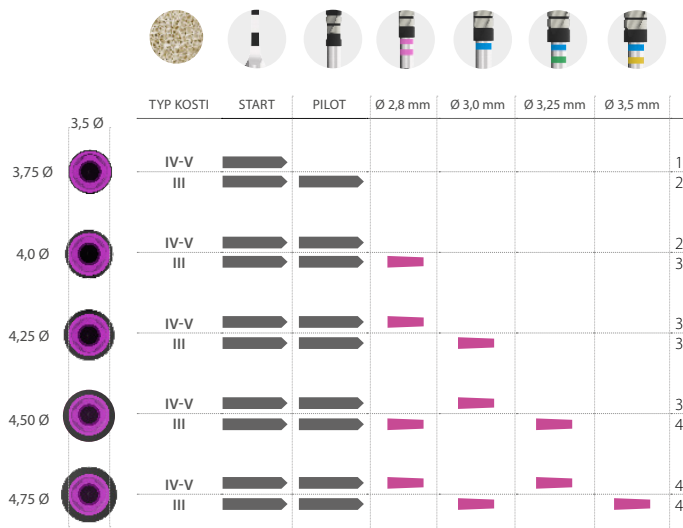

DŮLEŽITÉ:
Sekvence frézování platí
pouze pro implantáty
CORE-X®

Délka implantátu (od 4,5 do 5,5 mm)

→ Celková délka implantátu

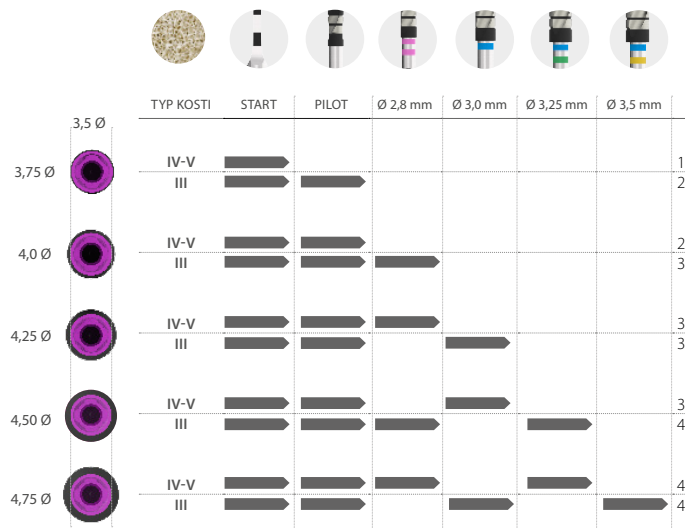

DŮLEŽITÉ:
Sekvence frézování platí
pouze pro implantáty
CORE-X®


vrtání
Průvodce sekvencemi



Délka implantátu

(od 10 do 15 mm)

- Celková délka implantátu
- 75 % celkové délky implantátu
- 25 % celkové délky implantátu
- Hloubka vrtání 5 mm

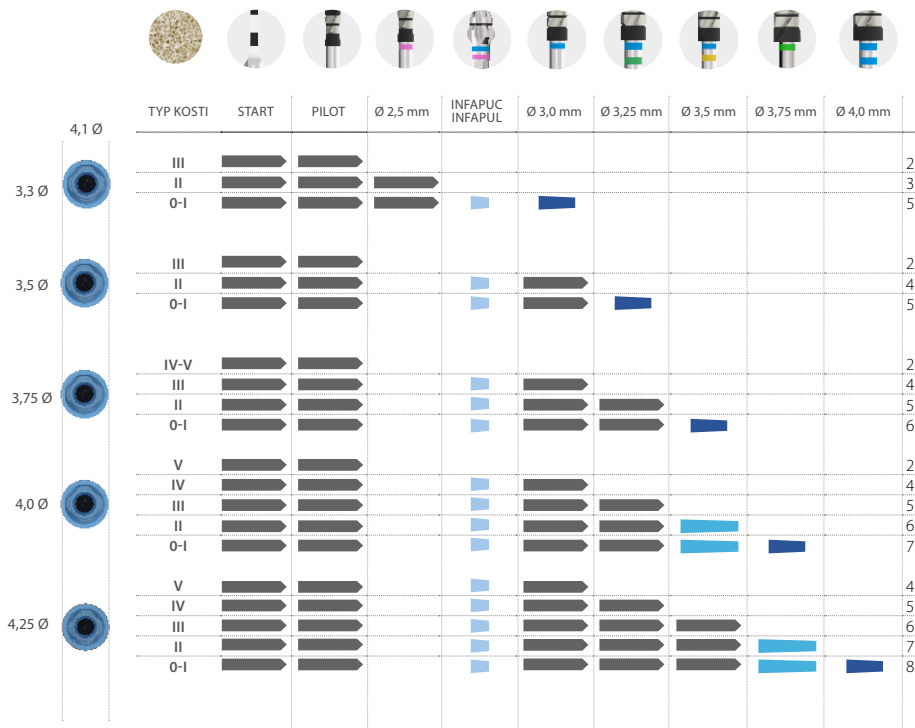


Průvodce sekvencemi



Délka implantátu

(od 5,5 do 8,5 mm)


- Celková délka implantátu
- Celková délka implantátu se stanoveným průměrem vrtáku
- Hloubka vrtání 5 mm
- Hloubka vrtání 2–3 mm

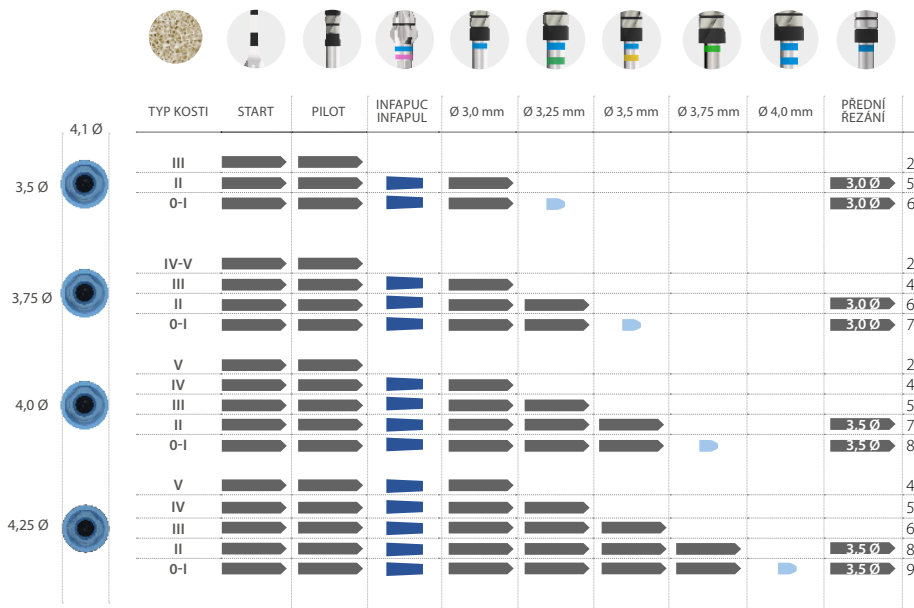

Délka implantátu (od 8,5 do 15 mm)



 Celková délka implantátu
 Hloubka vrtání 6,5 mm
 Hloubka vrtání 3 mm

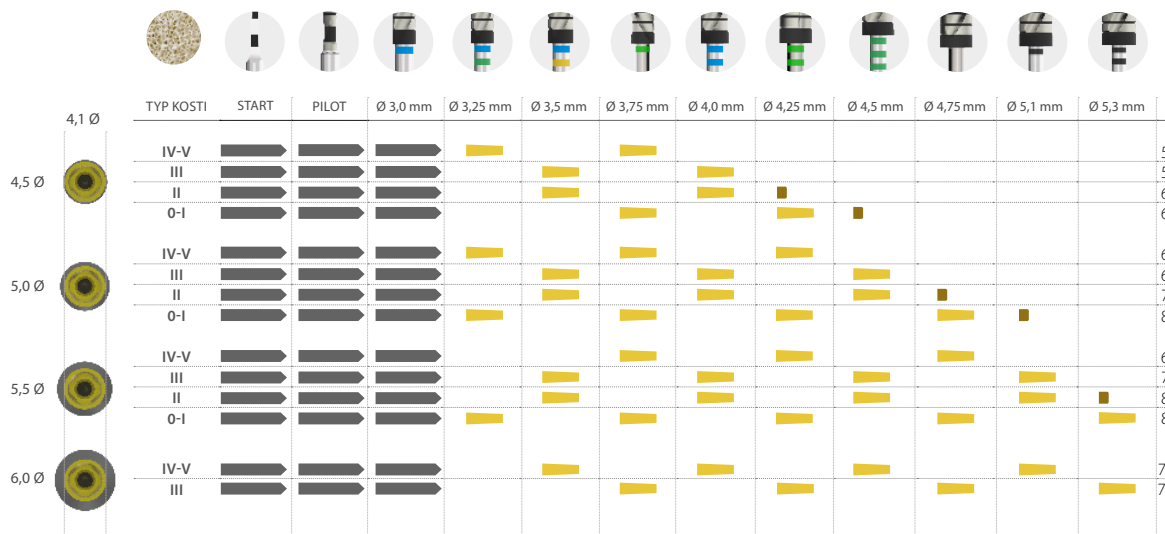

Délka implantátu

(od 4,5 do 7,5 mm)

 Celková délka implantátu
 Celková délka implantátu se stanoveným průměrem vrtáku
 Hloubka vrtání 3 mm

