



Anbefalet boresekvensguide

for Interna BTI-implantater



BEMÆRK: Kontakt din distributør for at høre, om produktet er tilgængeligt på de forskellige markeder.

Boredybdemærker

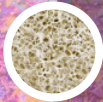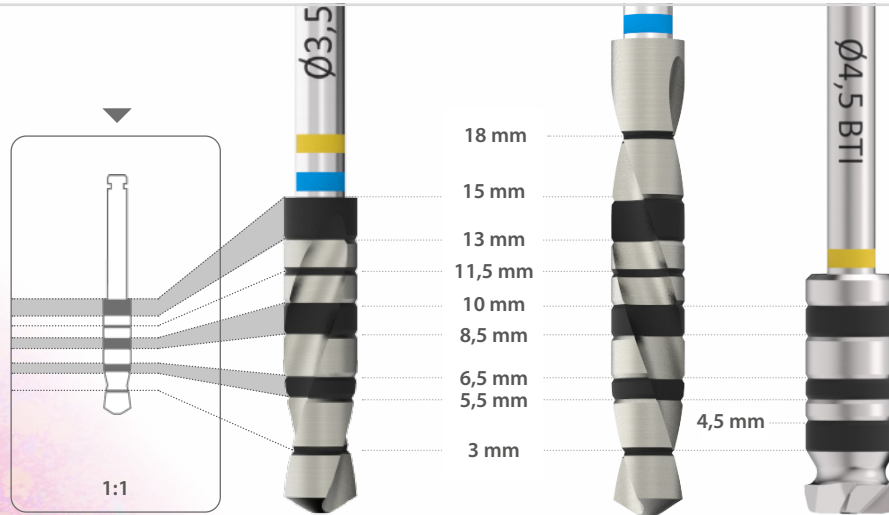

Klasse/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

BOR

Indledende bor

Bor

Sænkebor

Front skærebør

REVOLUTIONER

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

VANDING

ja

nej


nej

nej

Implantatlængder

(fra 6,5 til 13 mm)

Implantatets samlede længde
6,5 mm boreddybde
2-3 mm boreddybde

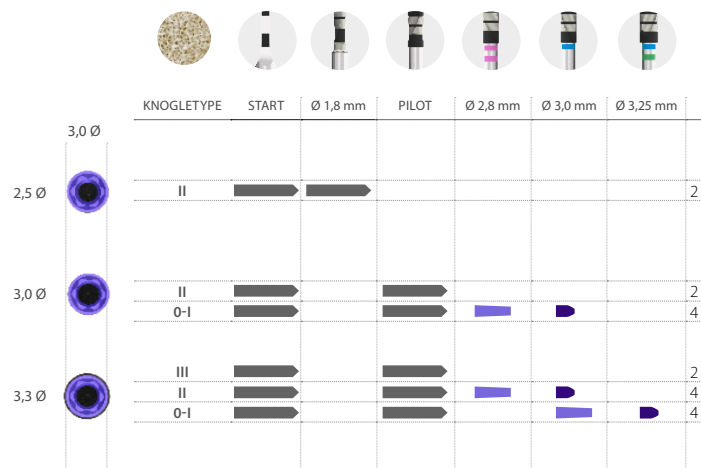


Boresekvensguide

Implantatlængder

(5,5 mm)



Implantatets samlede længde
2-3 mm boreddybde

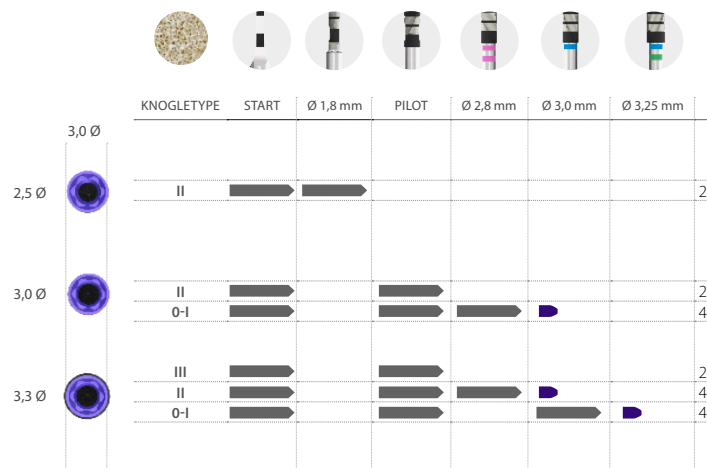


Boresekvensguide

Implantatlængder

(fra 7,5 til 15 mm)

Implantatets samlede længde
6,5 mm boreddybde
2-3 mm boreddybde

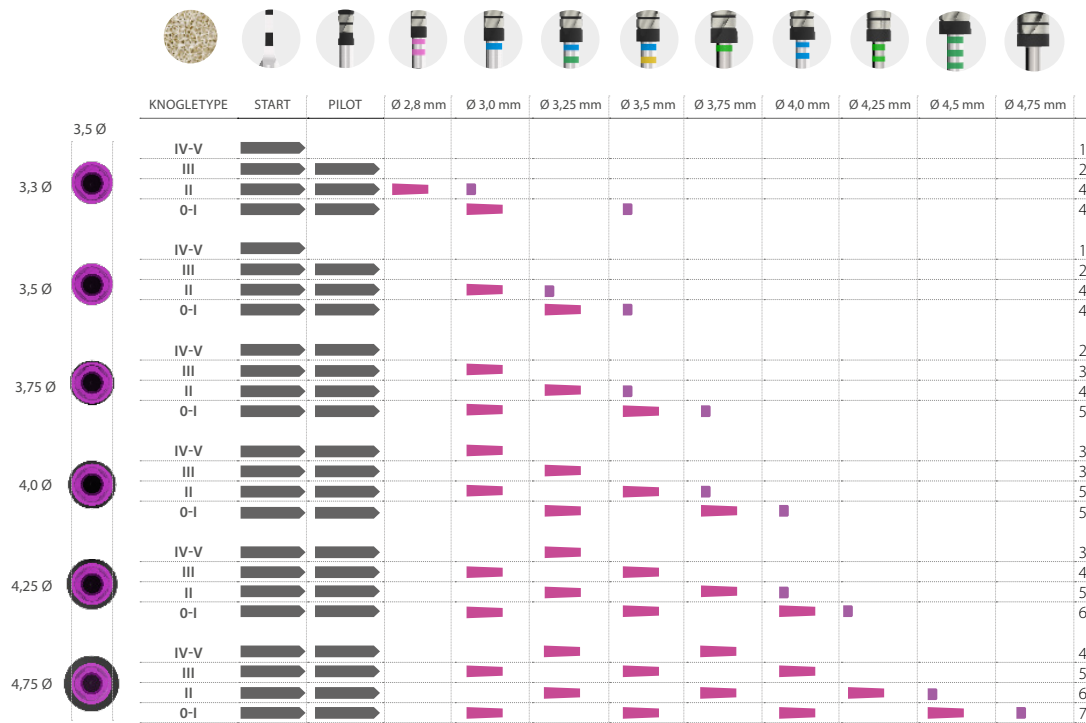


Boresekvensguide



Implantatlængder

(fra 4,5 til 6,5 mm)

- Implantatets samlede længde
- X,X Ø Implantatets samlede længde med bore-maskine med specificeret diameter
- 2-3 mm boreddybde

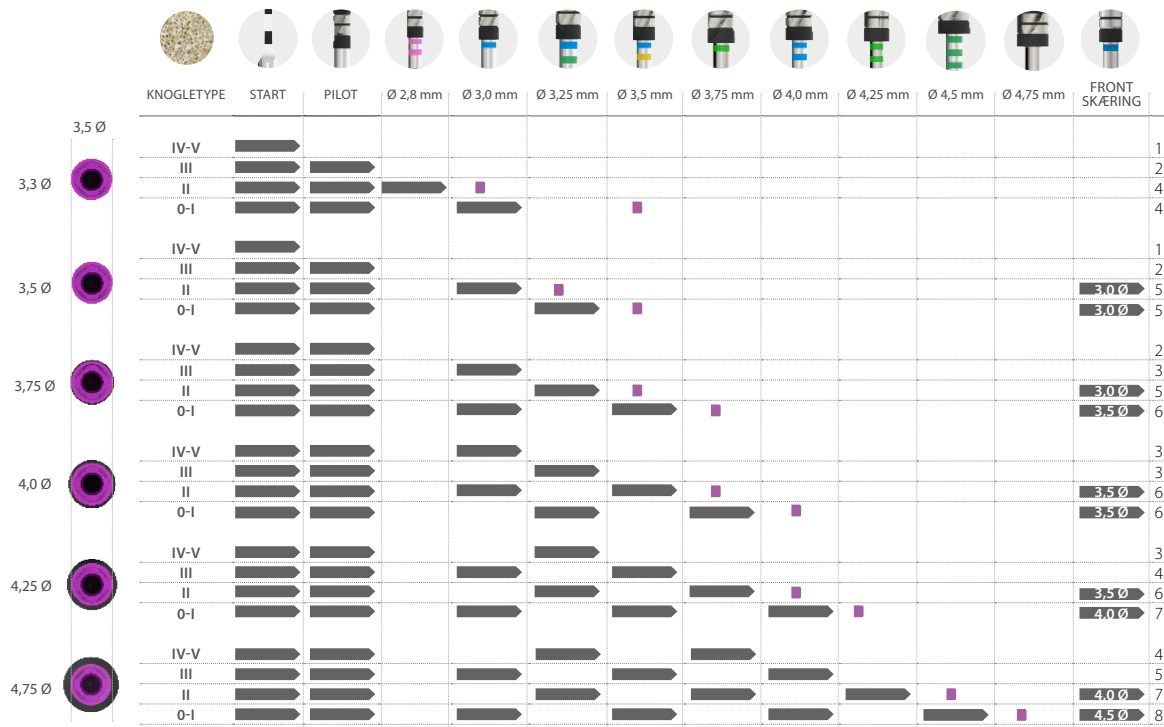


Smal/CORE Platform
Platformdiameter Ø3,5 mm

Boresekvensguide

Implantatlængder

(fra 6,5 til 13 mm)

Implantatets samlede længde
5,5 mm boreddybde

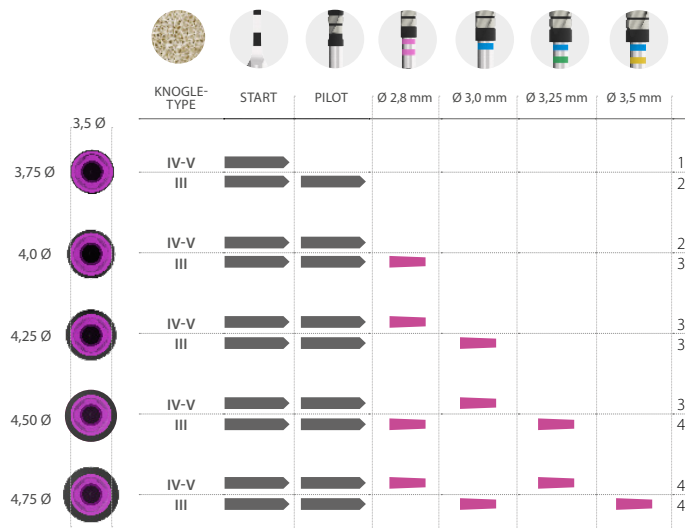


VIGTIGT:
Fræsesekvensen gælder kun
for CORE-X® -implantater

Boresekvensguide

Implantatlængder

(fra 4,5 til 5,5 mm)

Implantatets samlede længde

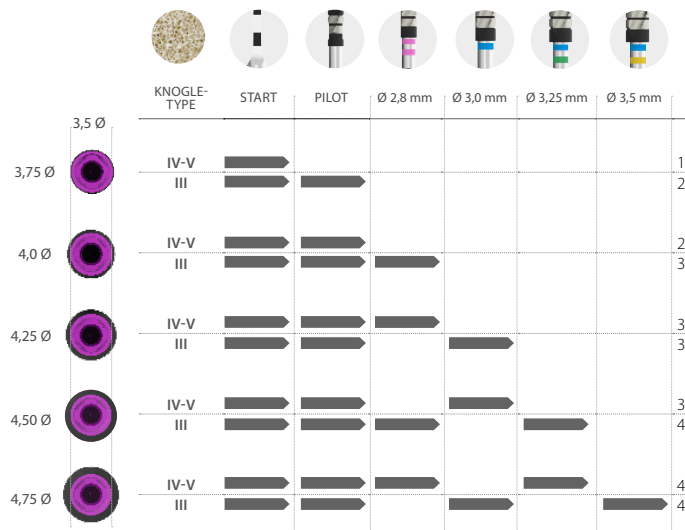

VIGTIGT:
Fræsesekvensen gælder kun
for CORE-X® -implantater


Boresekvensguide

Implantatlængder

(fra 10 til 15 mm)



- Implantatets samlede længde
- 75 % of the Implantatets samlede længde
- 25 % of the Implantatets samlede længde
- 5,0 mm boreddybde

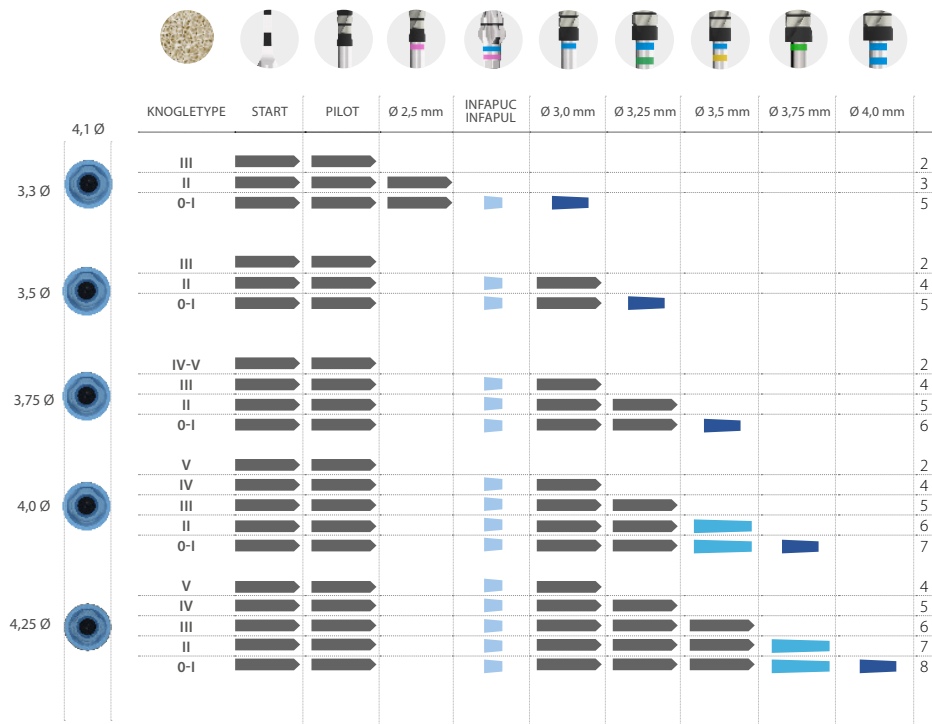


Boresekvensguide



Implantatlængder

(fra 5,5 til 8,5 mm)

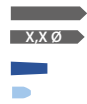


Implantatets samlede længde

X,X Ø

Implantatets samlede længde med bore-maskine med specificeret diameter

5,0 mm boreddybde

2-3 mm boreddybde

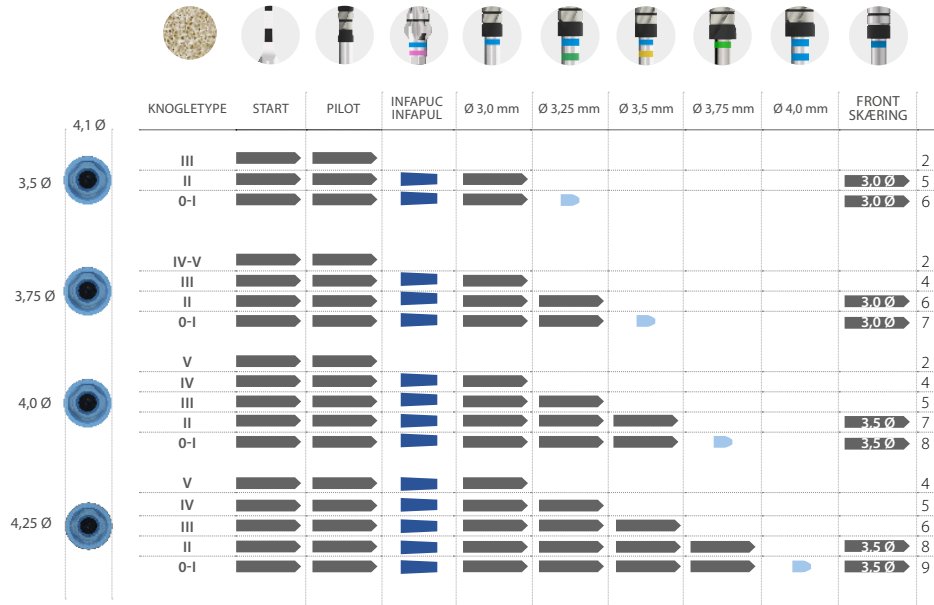


Implantatlængder

(fra 8,5 til 15 mm)



Implantatets samlede længde
6,5 mm boreddybde
3 mm boreddybde

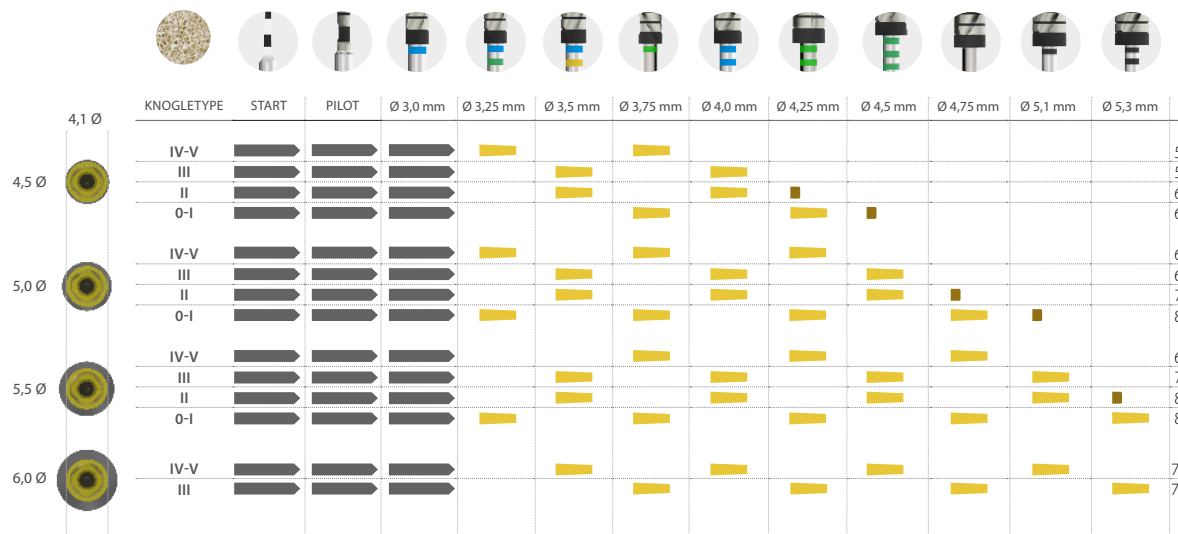

Boresekvensguide

Implantatlængder

(fra 4,5 til 7,5 mm)

- Implantatets samlede længde
- X,X Ø Implantatets samlede længde med bore-maskine med specificeret diameter
- 3 mm boreddybde

