



Empfohlene Bohrsequenzen

für BTI Interna Implantate



Hinweis: Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der Produkte in den verschiedenen Ländern.

Lasermarkierungen

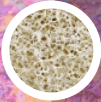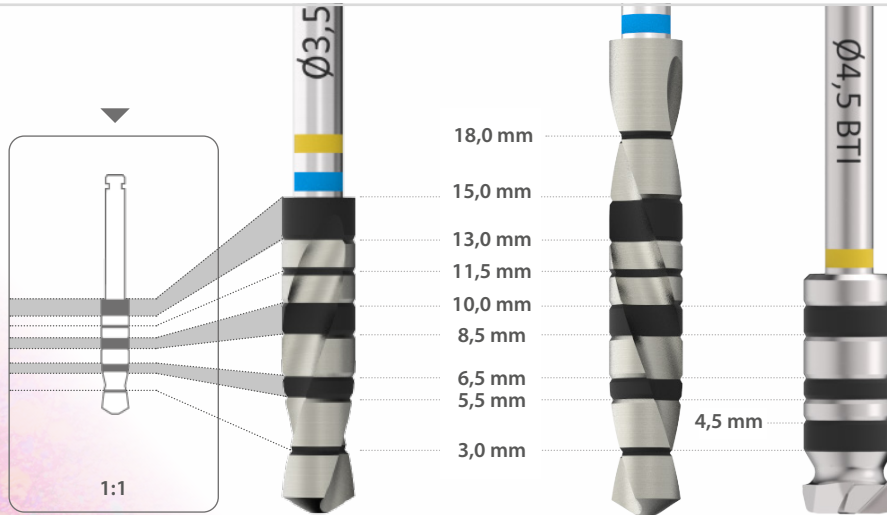

Klasse/Hounsfield

I 1.050 - 1.400

II 850 - 1.000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

BOHRER

Initialbohrer

Spiralbohrer

Versenker

Bohrer mit
frontaler Schneide

UMDREHUNGSZAHL

800 - 1.000 U/min

50 - 75 U/min

150 - 200 U/min

50 - 75 U/min

KÜHLUNG

ja

nein


nein

nein

Implantate

(Länge von 6,5 bis 13 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 6,5 mm Bohrtiefe
 2-3 mm Bohrtiefe

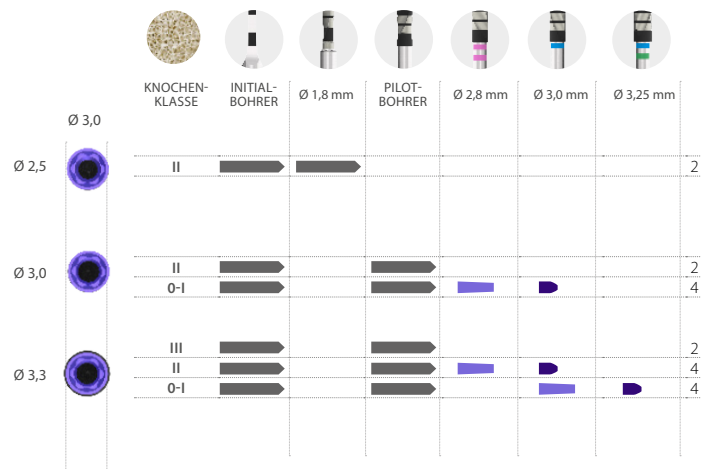


Bohrsequenzen
Empfohlene

Implantate

(Länge 5,5 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 2-3 mm Bohrtiefe

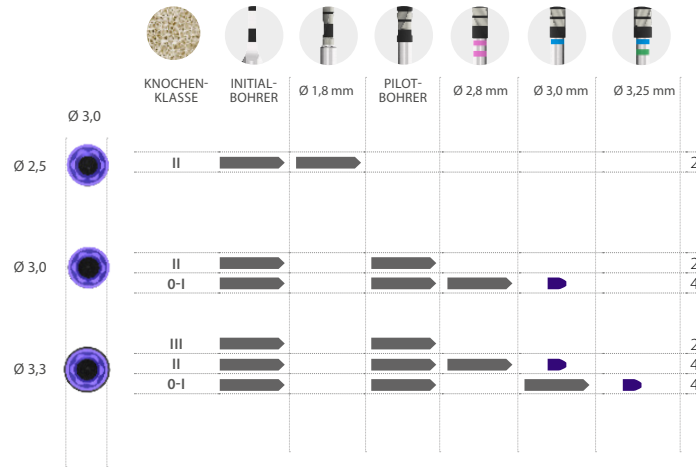


Bohrsequenzen
Empfohlene

Implantate

(Länge von 7,5 bis 15 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 6,5 mm Bohrtiefe
 2-3 mm Bohrtiefe

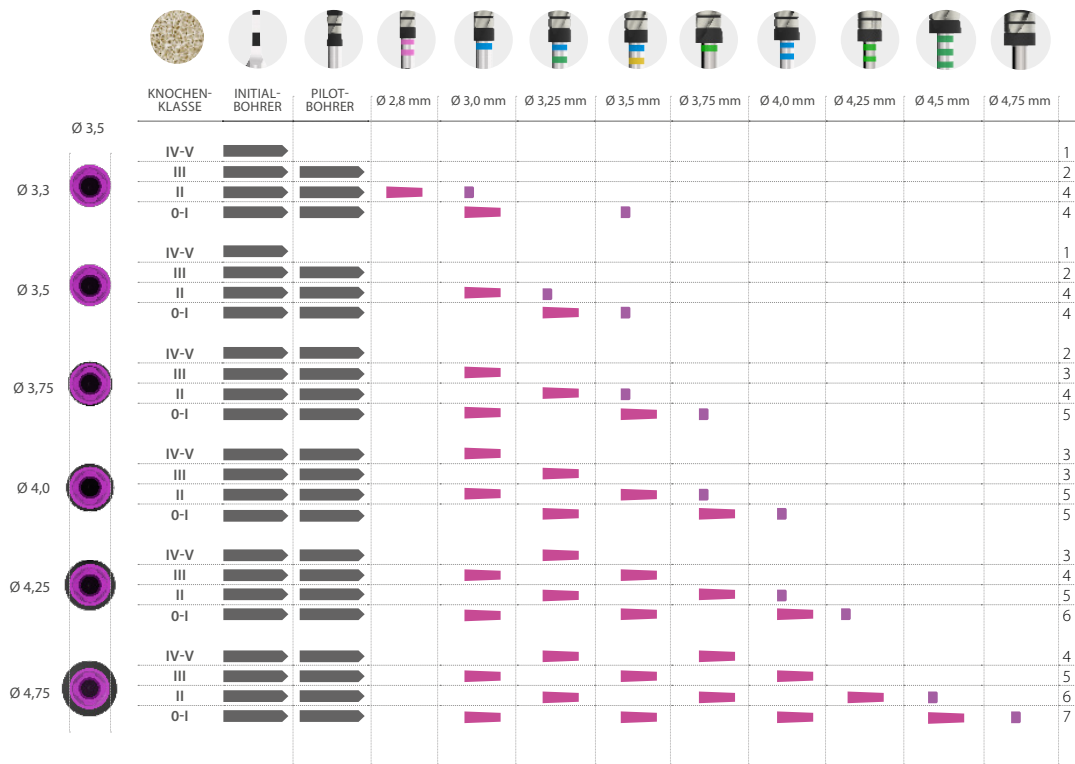


Bohrsequenzen
Empfohlene



Implantate

(Länge von 4,5 bis 6,5 mm)

— Gesamtlänge des Implantats
— Ø X.X Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers
■ 2-3 mm Bohrtiefe

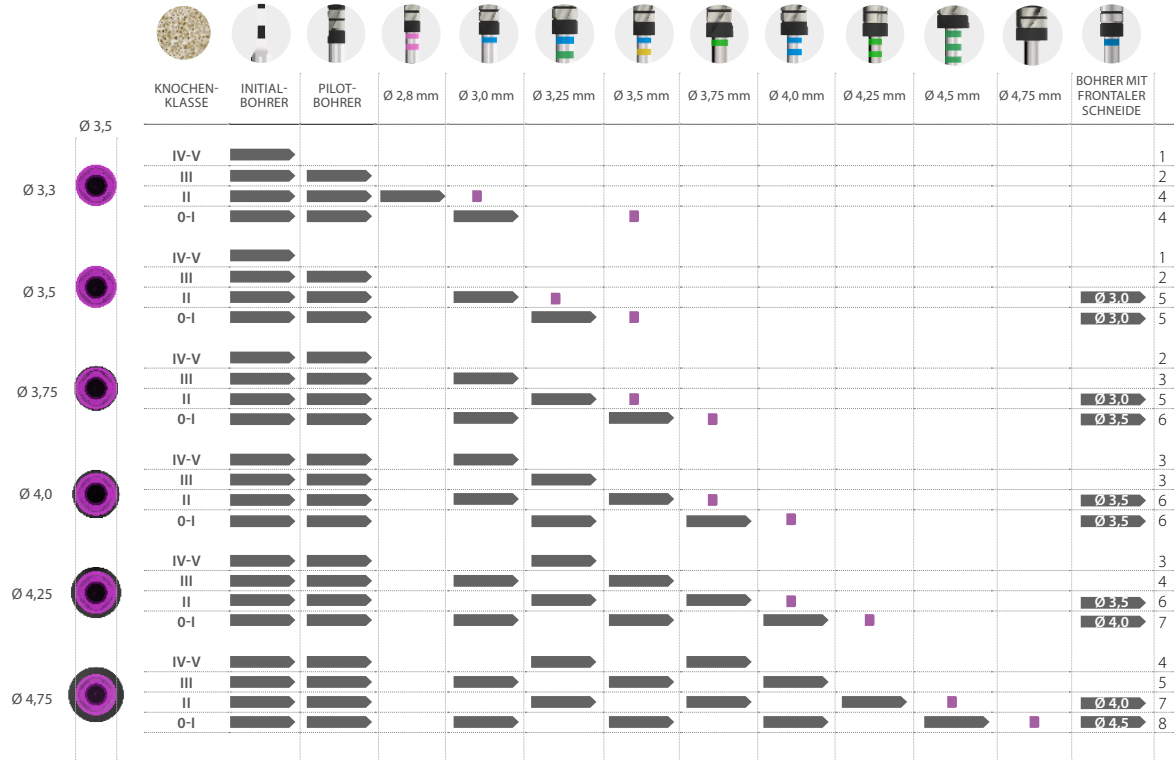


○ Schmale/CORE Plattform
Prothetische Plattform: Ø 3,5 mm

Bohrsequenzen
Empfohlene

Implantate

(Länge von 6,5 bis 13 mm)

— Gesamtlänge des Implantats
■ 5,5 mm Bohrtiefe

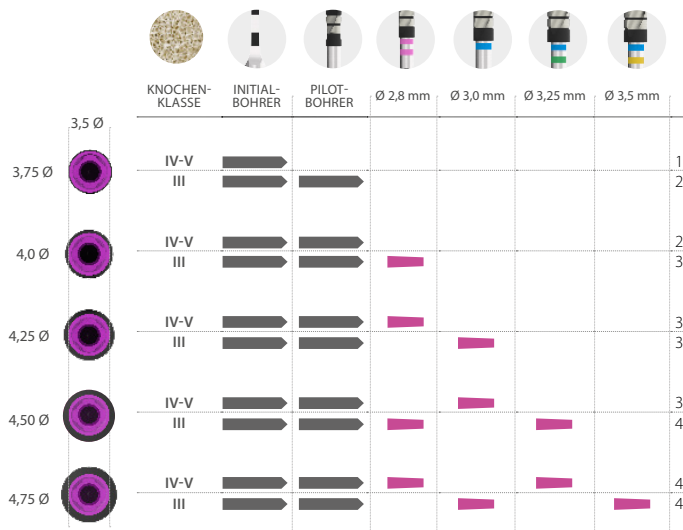


WICHTIG:
Bohrsequenz nur gültig für
CORE-X® Implantate

Bohrsequenzen
Empfohlene

Implantate

(4,5 - 5,5 mm)

➡ Gesamtlänge des Implantats

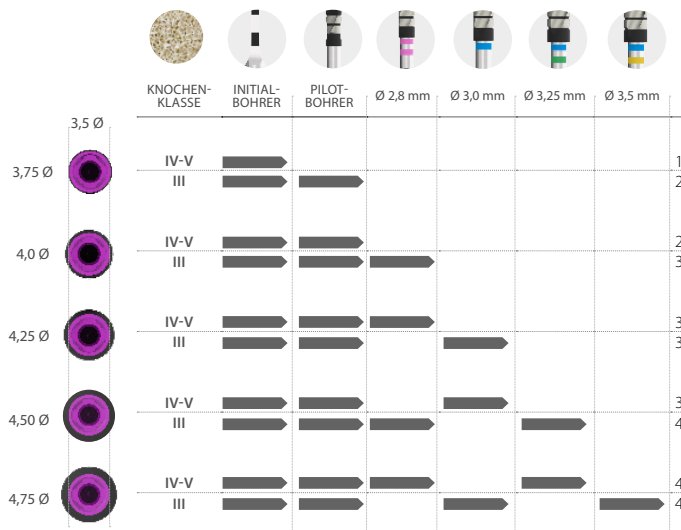

WICHTIG:
Bohrsequenz nur gültig für
CORE-X® Implantate


Bohrsequenzen
Empfohlene



Implantate

(Länge von 10 bis 15 mm)


- Gesamtlänge des Implantats
- 75 % der Gesamtlänge des Implantats
- 25 % der Gesamtlänge des Implantats
- 5,0 mm Bohrtiefe

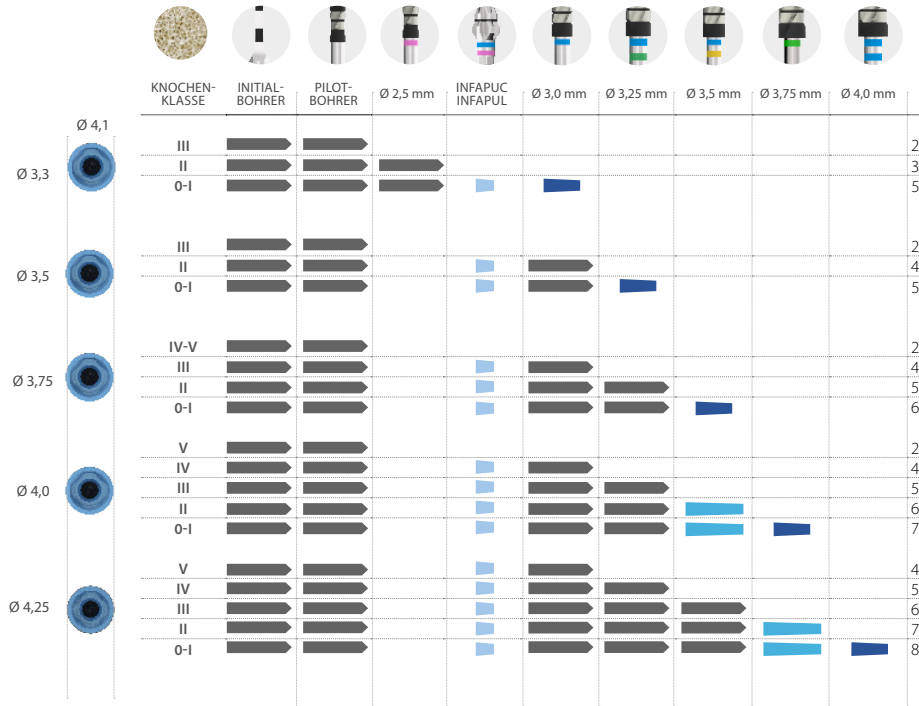

Bohrsequenzen
Empfohlene

Implantate (Länge von 5,5 bis 8,5 mm)


 Gesamtlänge des Implantats
 Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers
 5,0 mm Bohrtiefe
 2-3 mm Bohrtiefe

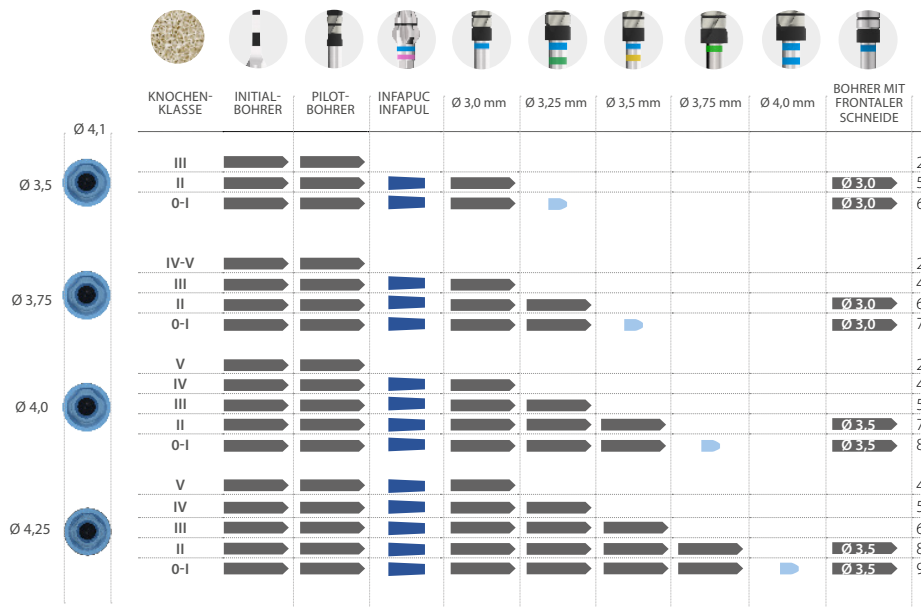

Implantate

(Länge von 8,5 bis 15 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 6,5 mm Bohrtiefe
 3 mm Bohrtiefe

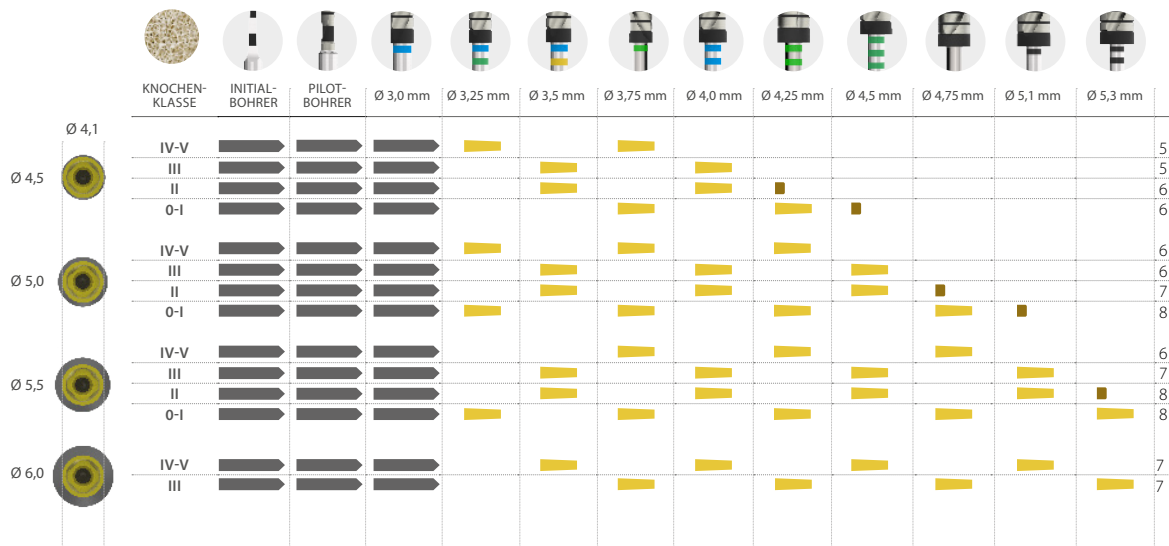


Bohrsequenzen
Empfohlene

Implantate

(Länge von 4,5 bis 7,5 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers
 3 mm Bohrtiefe

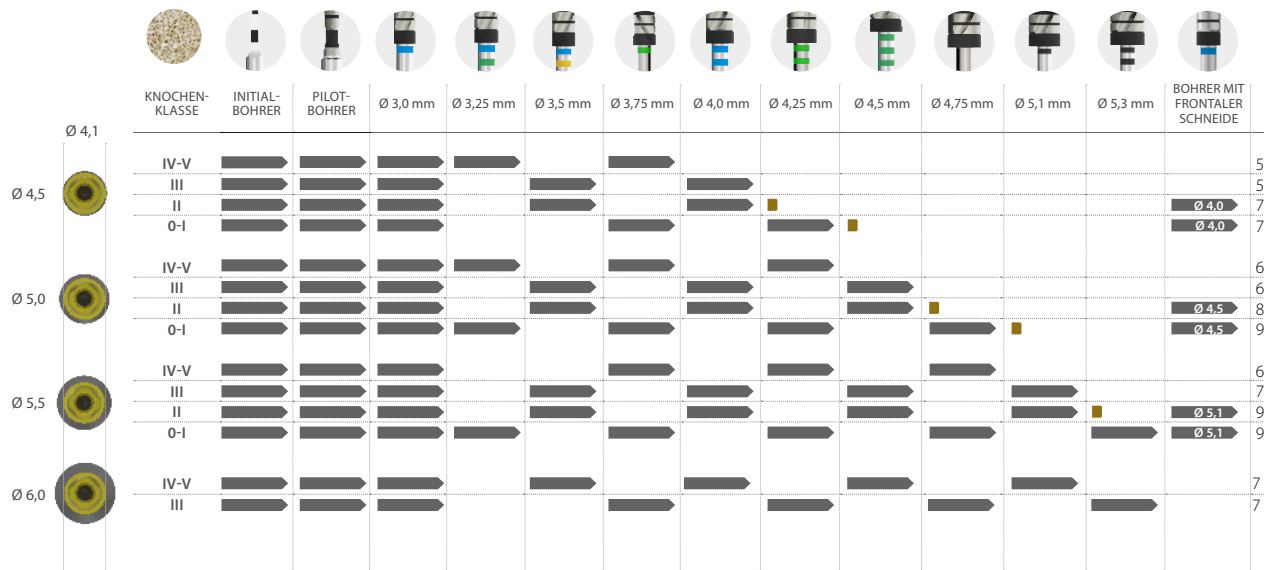

Bohrsequenzen

Empfohlene