



Secuencias de fresado recomendadas

para implantes de BTI Interna



NOTA: Consulte disponibilidad del producto en los diferentes mercados con su distribuidor.

Marcas de profundidad de fresado

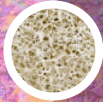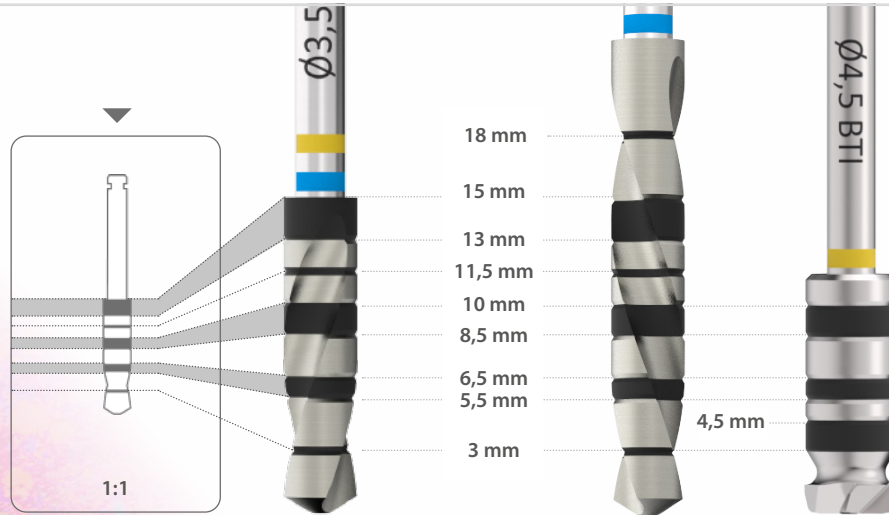

Tipo/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

FRESA

Fresa de inicio

Fresas

Fresas avellanado

Fresas corte frontal

VELOCIDAD

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

IRRIGACIÓN

sí

no


no

no

Implantes longitud

(desde 6,5 hasta 13 mm)

Longitud total del implante
6,5 mm de profundidad de fresado
2-3 mm de profundidad de fresado

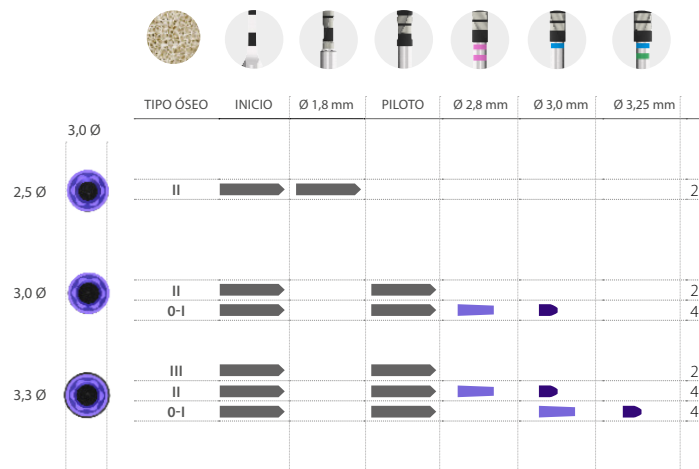


Implantes longitud

(5,5 mm)




Longitud total del implante
2-3 mm de profundidad de fresado

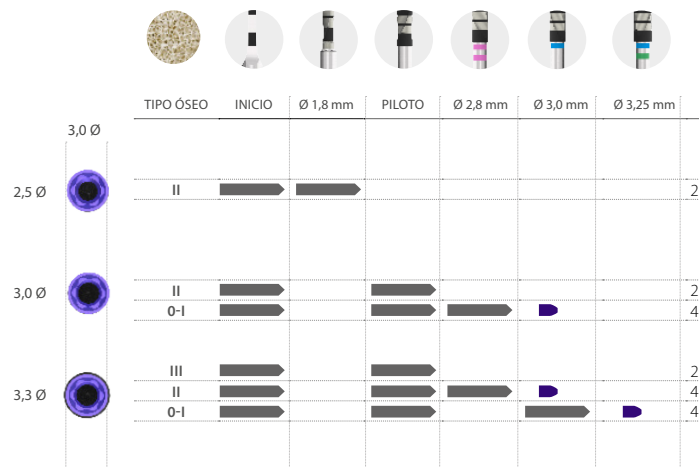

Implantes longitud

(desde 7,5 hasta 15 mm)


Longitud total del implante
6,5 mm de profundidad de fresado
2-3 mm de profundidad de fresado

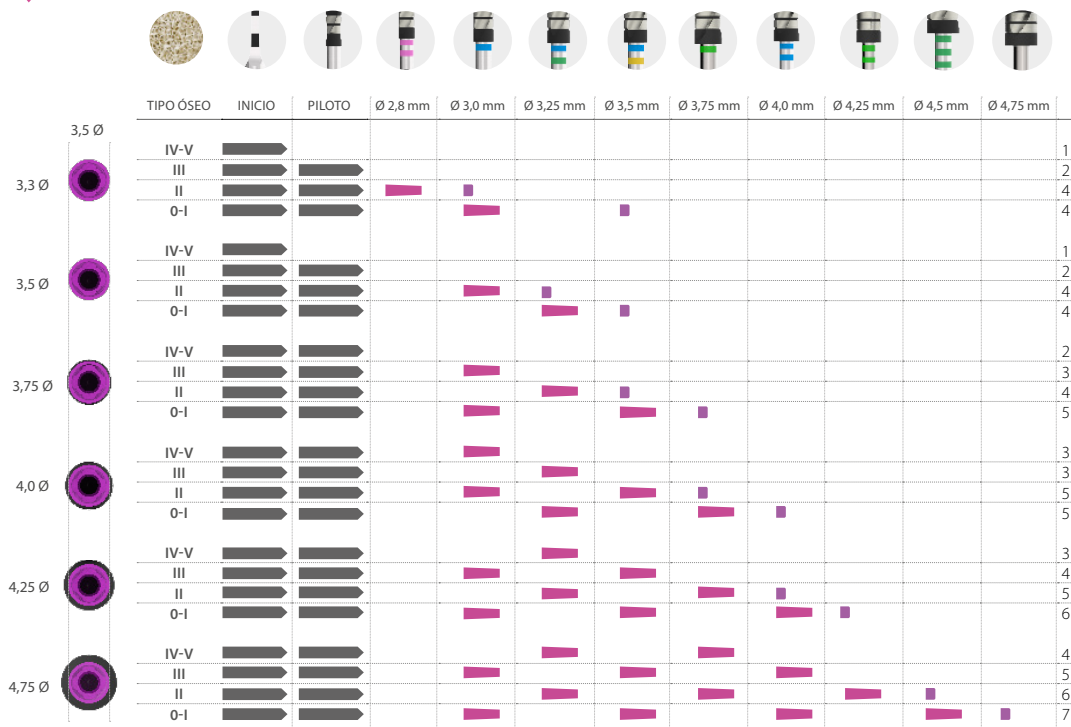

Implantes longitud


(desde 4,5 hasta 6,5 mm)

Longitud total del implante
X.X Ø Longitud total del implante con fresa del diámetro especificado
2-3 mm de profundidad de fresado

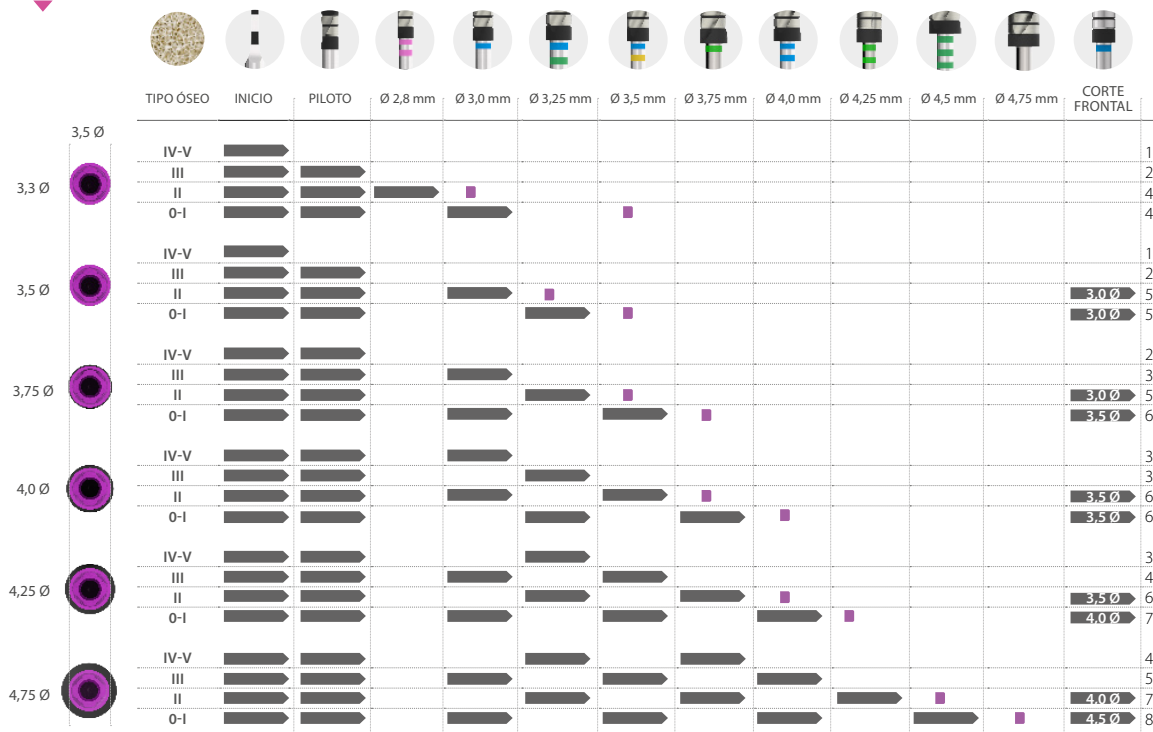

Implantes longitud (desde 6,5 hasta 13 mm)

Longitud total del implante
5,5 mm de profundidad de fresado

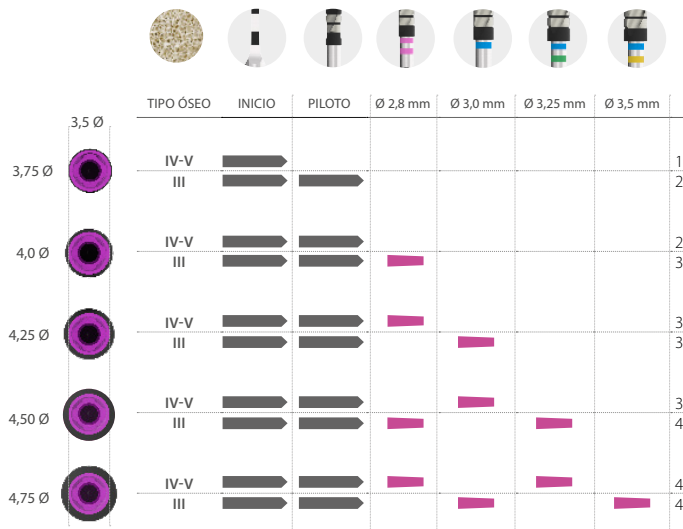


IMPORTANTE:
Secuencia de fresado válida únicamente para el implante CORE-X®

fresado
Secuencias de

Implantes longitud (4,5 - 5,5 mm)

Longitud total del implante

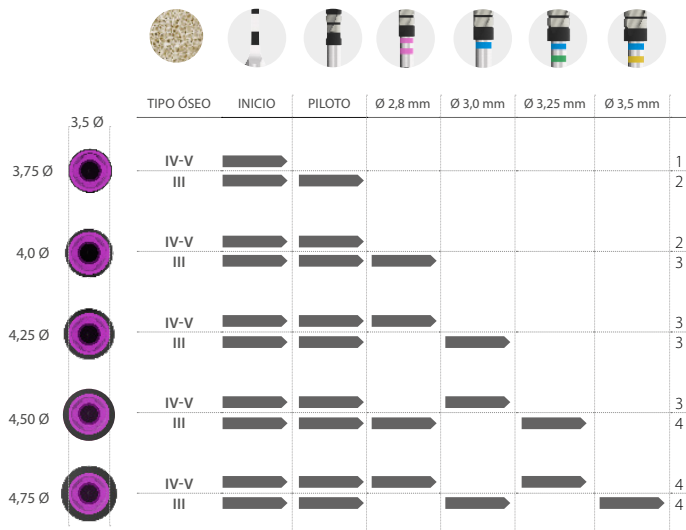

IMPORTANTE:

Secuencia de fresado válida únicamente para el implante CORE-X®


fresado
Secuencias de



Implantes longitud

(desde 10 hasta 15 mm)

- Longitud total del implante
- 75 % de la longitud total del implante
- 25 % de la longitud total del implante
- 5,0 mm de profundidad de fresado

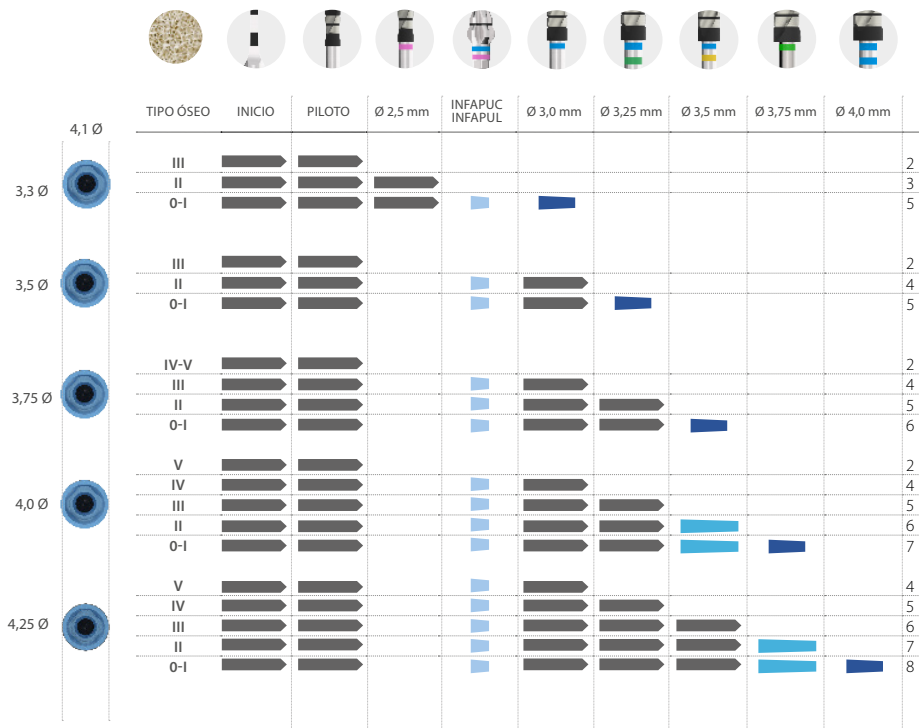


fresado
Secuencias de



Implantes longitud

(desde 5,5 hasta 8,5 mm)

- Longitud total del implante
- Longitud total del implante con fresa del diámetro especificado
- 5,0 mm de profundidad de fresado
- 2-3 mm de profundidad de fresado

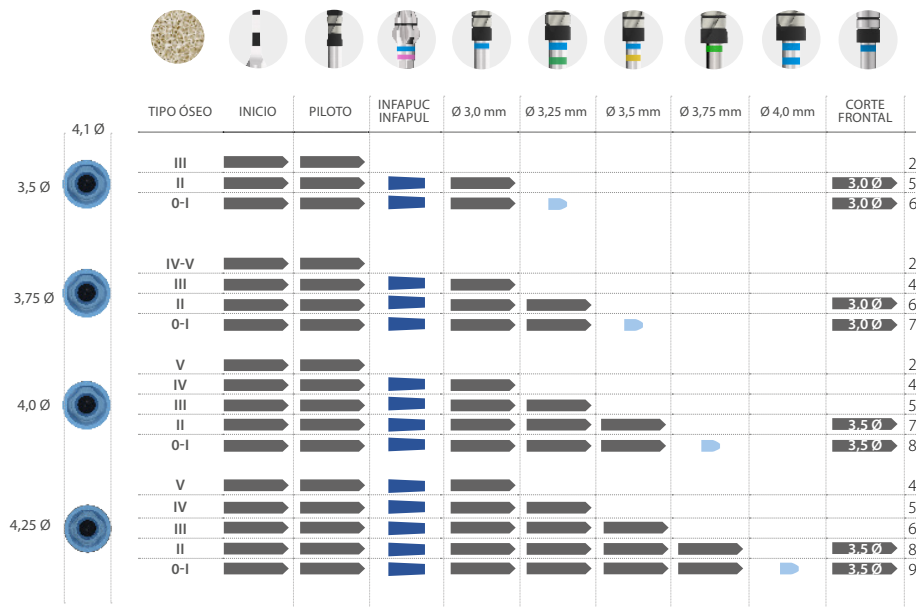


Implantes longitud

(desde 8,5 hasta 15 mm)



Longitud total del implante
6,5 mm de profundidad de fresado
3 mm de profundidad de fresado

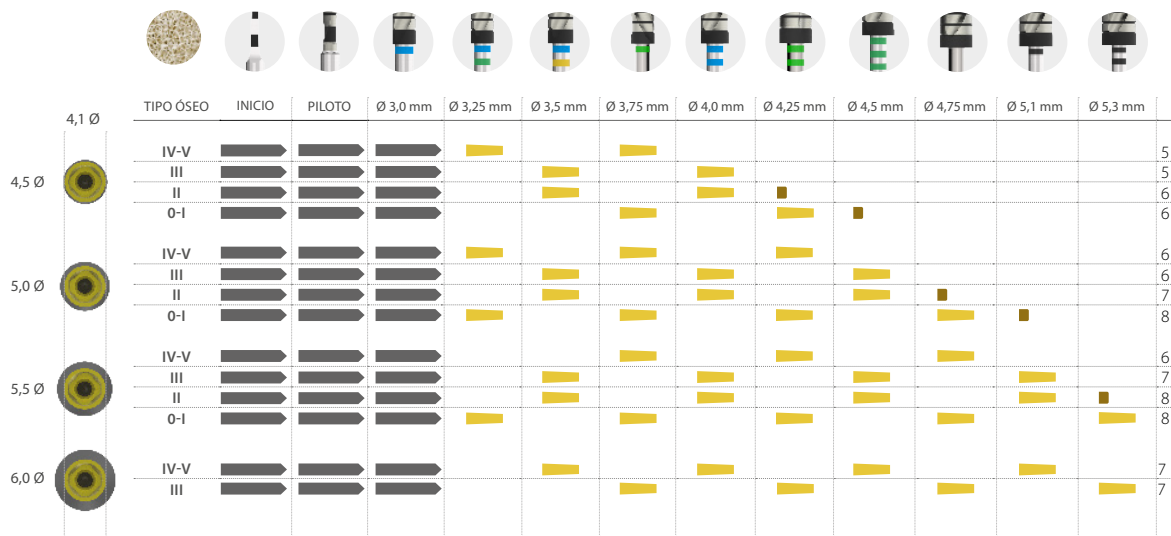

Implantes longitud

(desde 4,5 hasta 7,5 mm)

Longitud total del implante
X,X Ø Longitud total del implante con fresa del diámetro especificado
3 mm de profundidad de fresado

