



Soovitatav puurimisjärjestuse juhend

Interna BTI implantaatidele



MÄRKUS: Kontrollige toote kättesaadavust erinevatel turgudel oma turustajalt.

Puuri sügavuse märgid

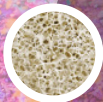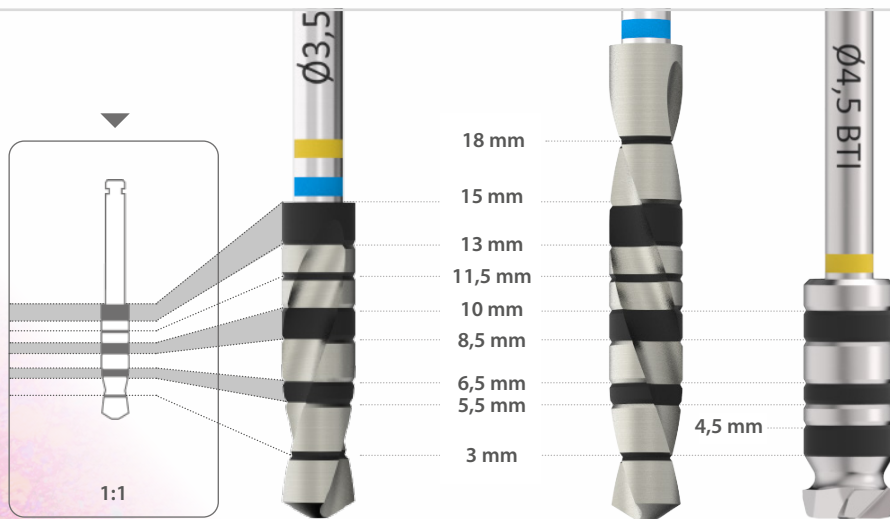

Klass/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

PUUR

Iniitsiaalpuur

Puur

Süvistuspuur

Esilõikepuurid

PÖÖRETE ARV

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

NIISUTUS

jah


nr

nr

nr

Implantaadi pikkused (6,5 - 13 mm)


Implantaadi kogupikkus
 6,5 mm puurimissügavus
 2-3 mm puurimissügavus

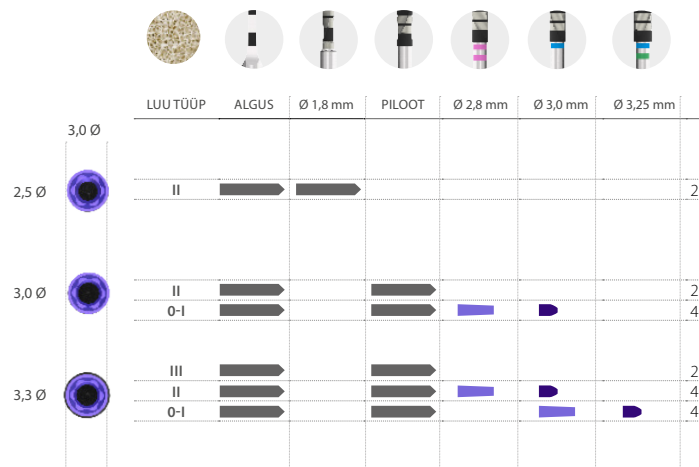

Implantaadi pikkused (5,5 mm)




Implantaadi kogupikkus
 2-3 mm puurimissügavus

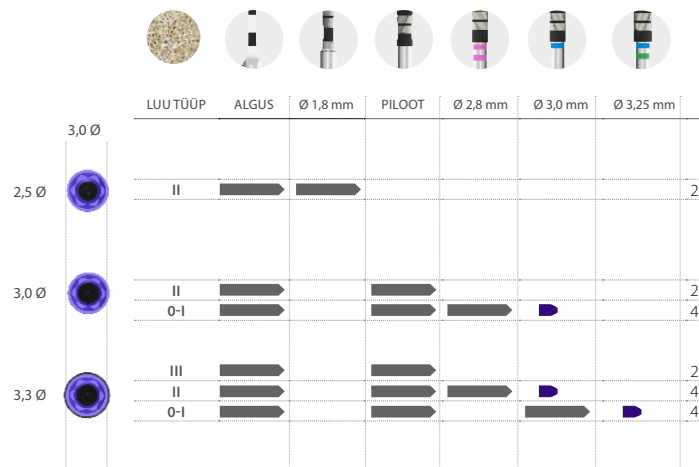




Implantaadi pikkused (7,5 - 15 mm)

Implantaadi kogupikkus
6,5 mm puurimissügavus
2-3 mm puurimissügavus

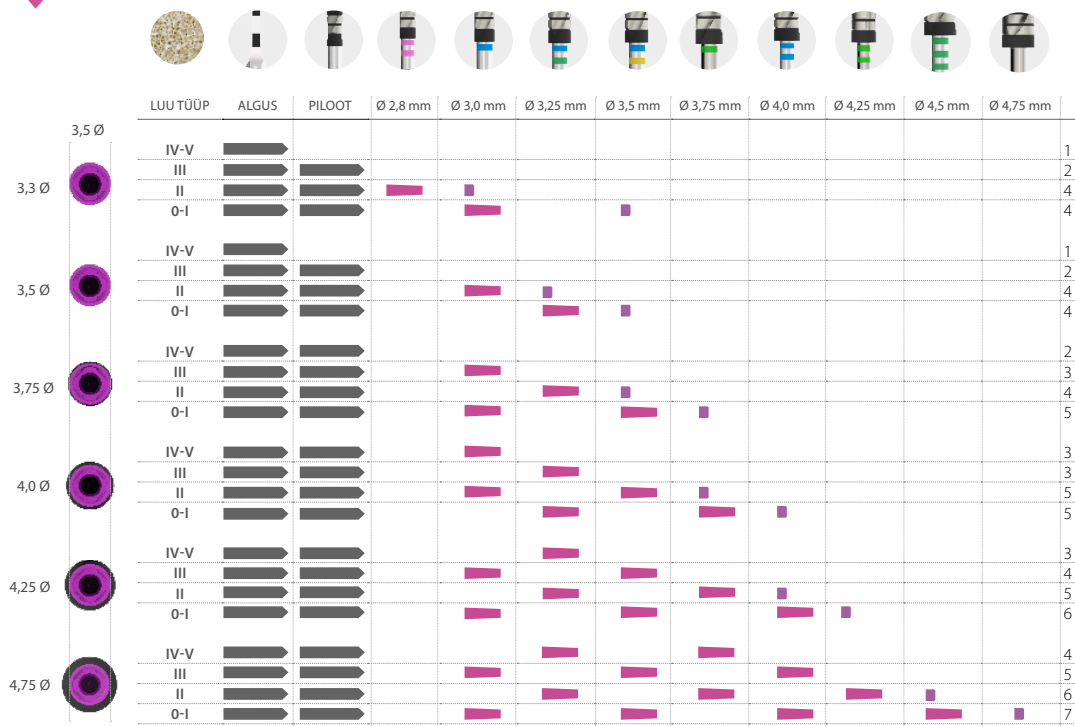


Implantaadi pikkused (4,5 - 6,5 mm)

Implantaadi kogupikkus
X.X Ø Implantaadi kogupikkus koos määratud puuri läbimõõduga
2-3 mm puurimisügavus

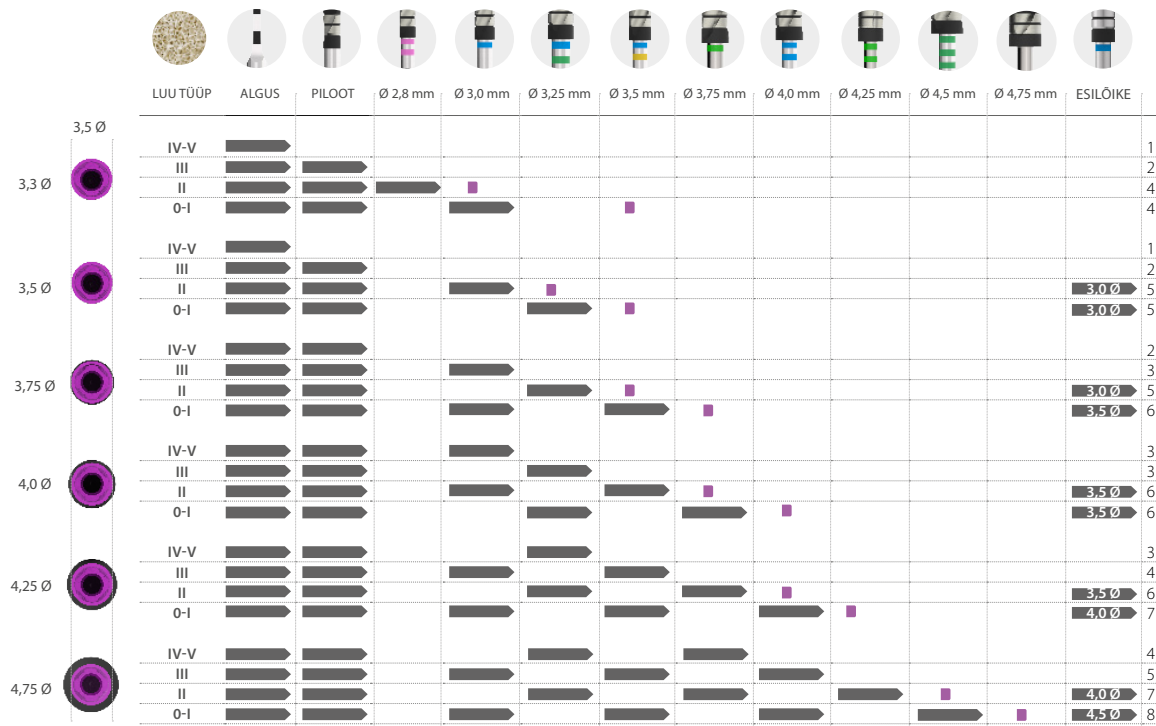

Implantaadi pikkused (6,5 - 13 mm)

Implantaadi kogupikkus
5,5 mm puurimissügavus

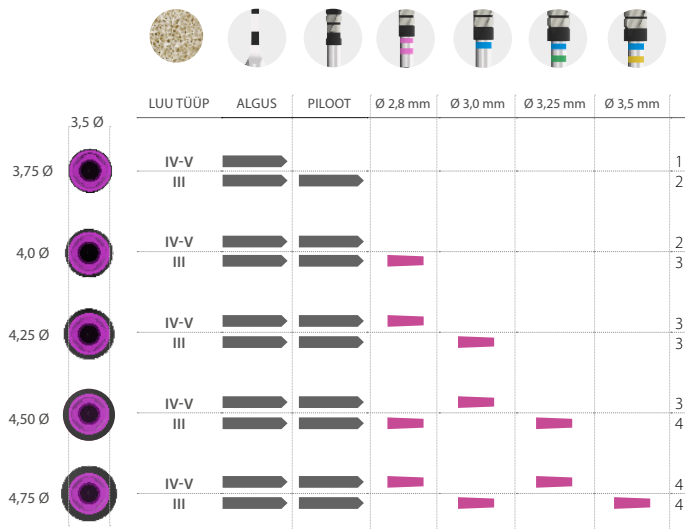


OLULINE:
freesimisjärjestus kehtib
ainult CORE-X® implantaatide
puhul

Puurimisjärjestuse
juhend

Implantaadi pikkused (4,5 - 5,5 mm)

Implantaadi kogupikkus

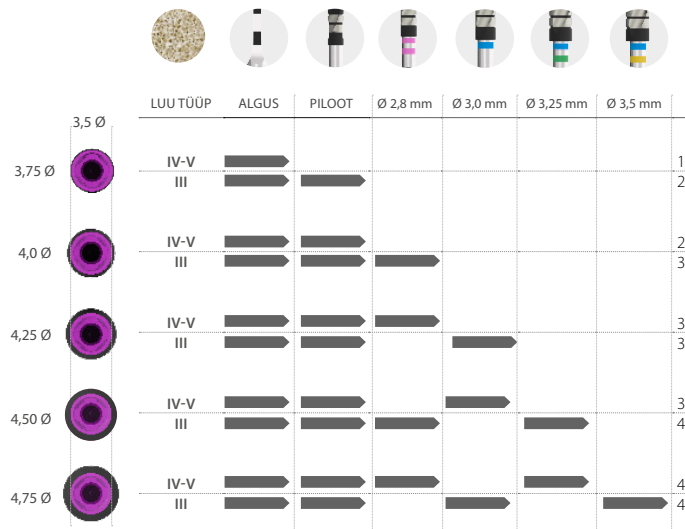


OLULINE:
freesimisjärjestus kehtib
ainult CORE-X® implantaatide
puhul

Puurimisjärjestuse juhend

Implantaadi pikkused (10 - 15 mm)


Implantaadi kogupikkus
 75 % of the Implantaadi kogupikkus
 25 % of the Implantaadi kogupikkus
 5,0 mm puurimissügavus

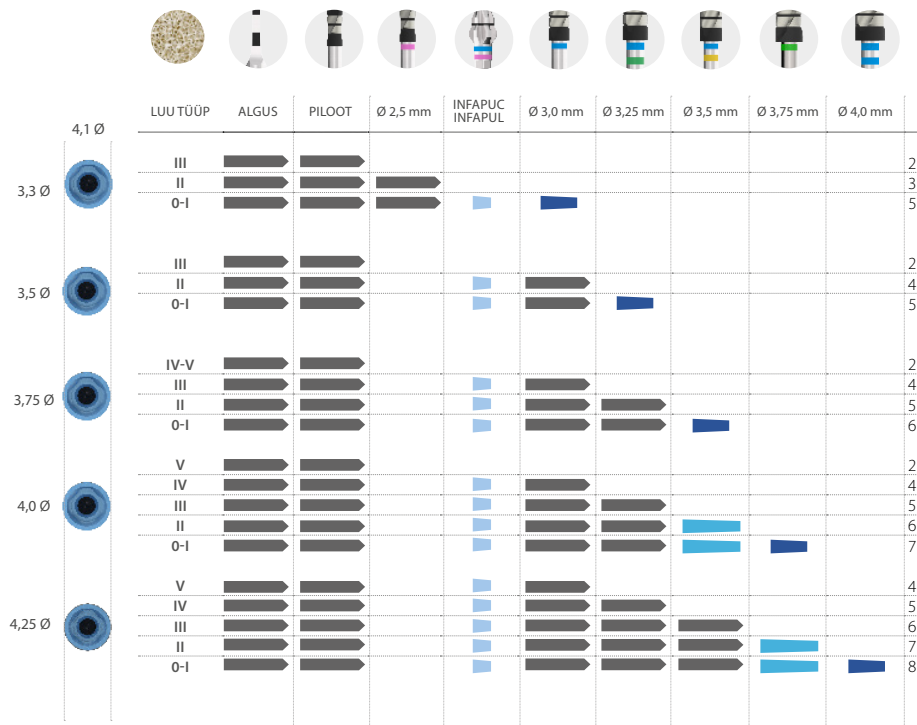

Puurimisjärjestuse juhend


Implantaadi pikkused (5,5 - 8,5 mm)

- Implantaadi kogupikkus
- X.X Ø Implantaadi kogupikkus koos määratud puuri läbimõõduga
- 5,0 mm puurimissügavus
- 2-3 mm puurimissügavus

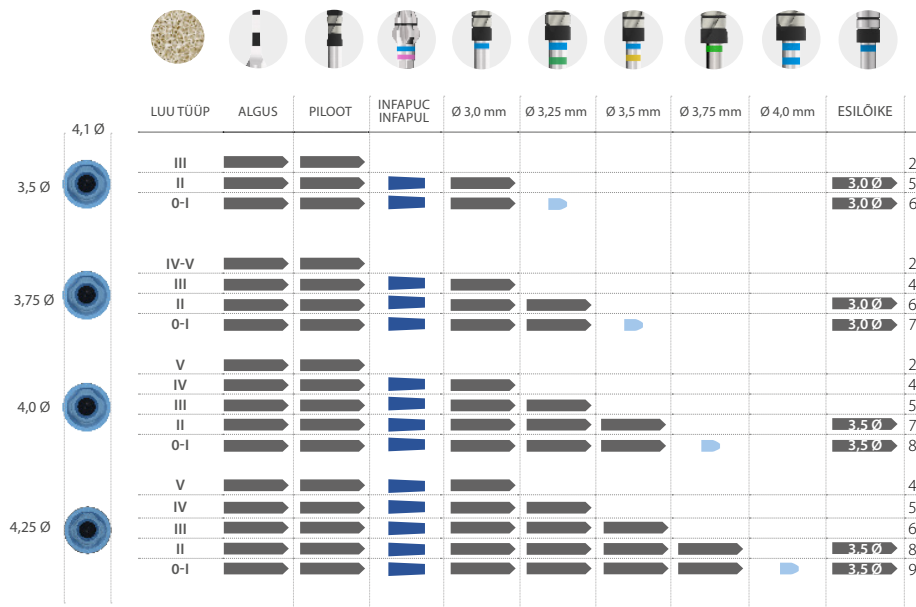

Implantaadi pikkused (8,5 - 15 mm)

Implantaadi kogupikkus
6,5 mm puurimissügavus
3 mm puurimissügavus

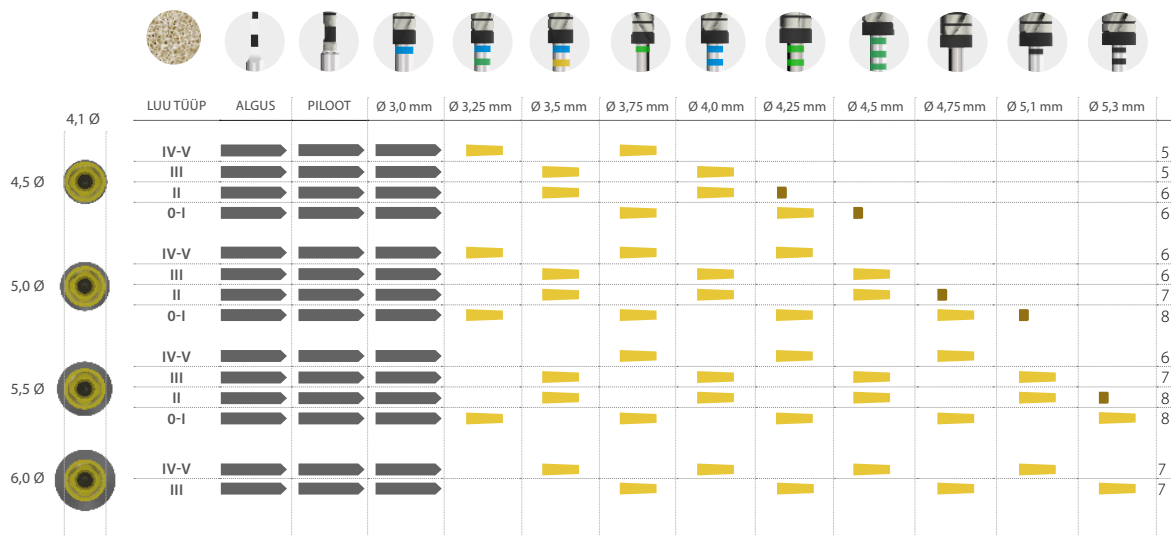



Implantaadi pikkused

(4,5 - 7,5 mm)

- Implantaadi kogupikkus
- X,X Ø Implantaadi kogupikkus koos määratud puuri läbimõõduga
- 3 mm puurimissügavus

