



# Suosittelava poraus järjestysopas

*Interna BTI-implanttien osalta*



**HUOMAUTUS:** kysy jälleenmyyjältäsi tuotteen saatavuudesta eri markkinoilla

# Poraussyvyyden merkit

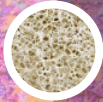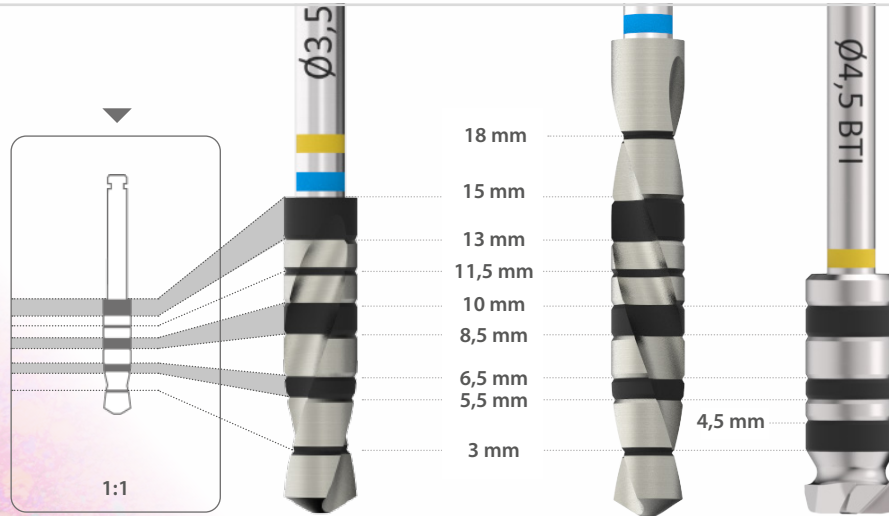

## Luokka/Hounsfield

- I ..... 1050 - 1400
- II ..... 850 - 1000

- III ..... 550 - 800
- IV ..... 400 - 500
- V ..... 100 - 350

## PORA

- Aloituspورا
- Pora
- Upotusporat
- Edestä leikkaavat porat

## KIERROSNOPEUDET

- 800 - 1.000 rpm
- 50 - 75 rpm
- 150 - 200 rpm
- 50 - 75 rpm


## KASTELU

- kyllä
- ei
- ei
- ei

# Implantin pituudet (6,5 - 13 mm)




Implantin kokonaispituus  
Poraussyvyys 6,5 mm  
Poraussyvyys 2-3 mm

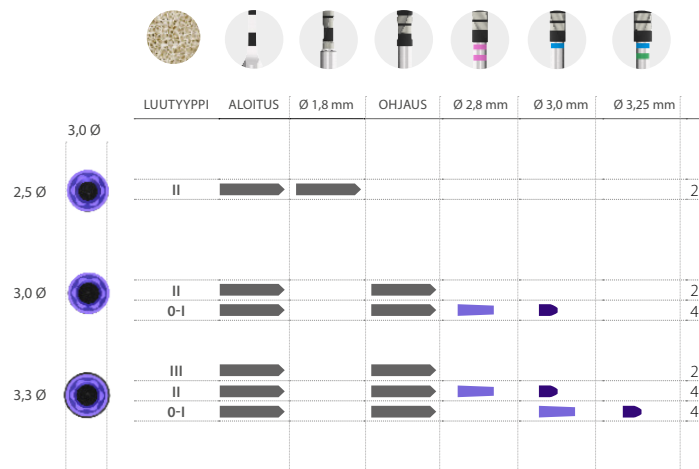

# Implantin pituudet (5,5 mm)




Implantin kokonaispituus  
Porausyvyyts 2-3 mm

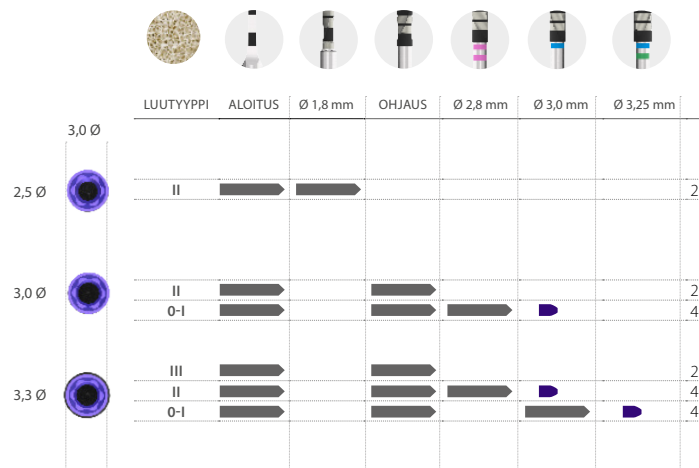

# Implantin pituudet (7,5 - 15 mm)


Implantin kokonaispituus  
Poraussyvyys 6,5 mm  
Poraussyvyys 2-3 mm

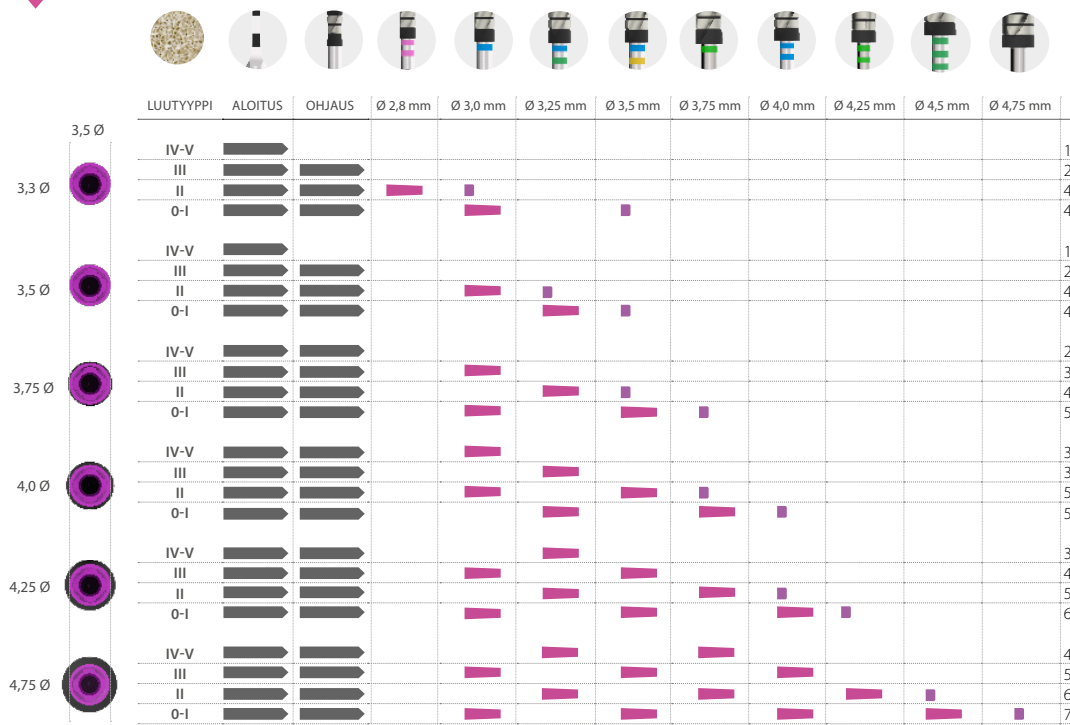

opas Porausjärjestyksen


# Implantin pituudet (4,5 - 6,5 mm)

Implantin kokonaispituus  
X.X Ø Implantin kokonaispituus määritetyllä halkaisijalla  
Poraussyvyys 2-3 mm

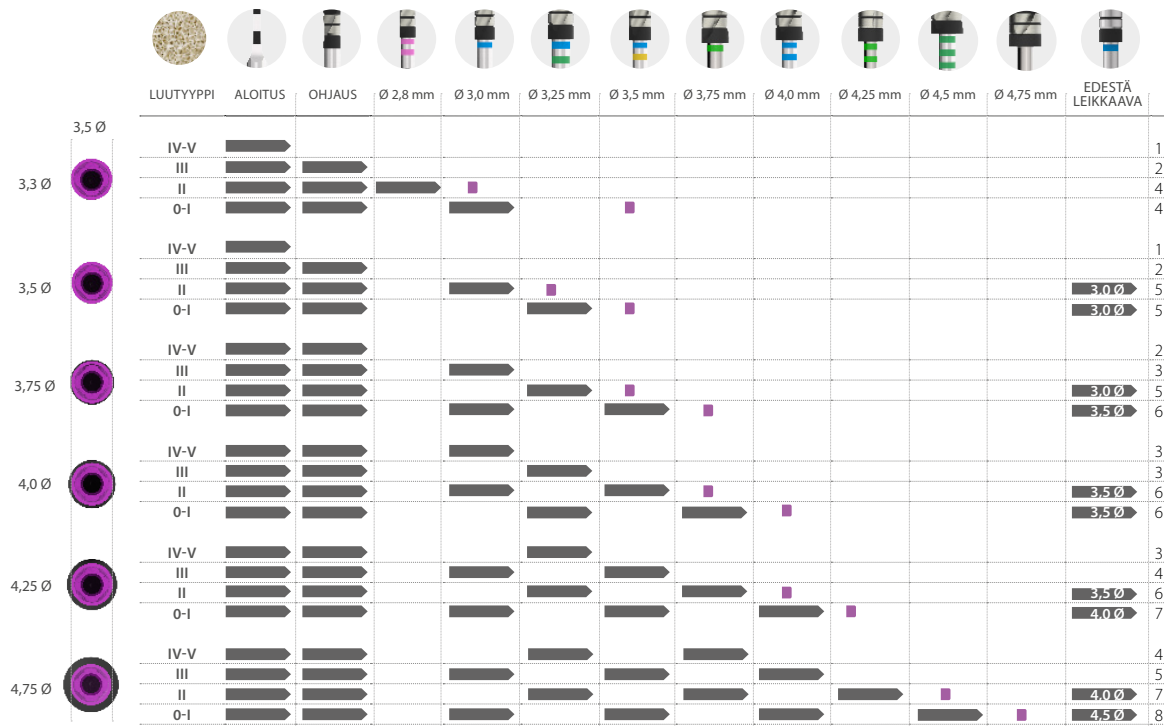

# Implantin pituudet (6,5 - 13 mm)


Implantin kokonaispituus  
Poraussyvyys 5,5 mm

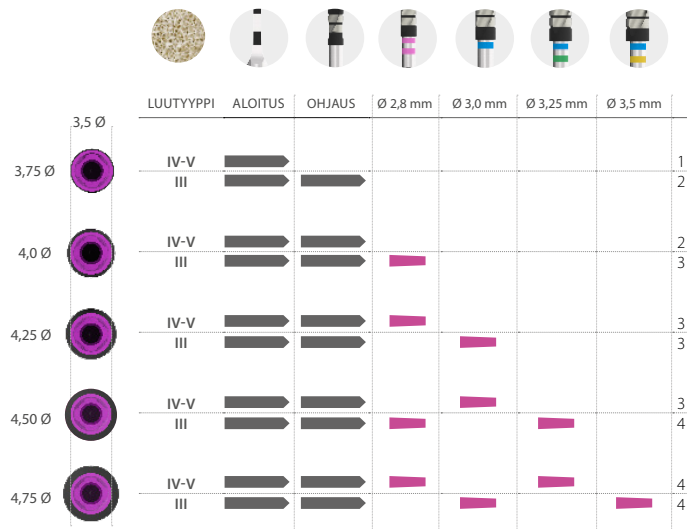

**TÄRKEÄÄ:**  
Jyrsintäjärjestys koskee vain  
CORE-X® -implantteja

# Implantin pituudet (4,5 - 5,5 mm)

➡ Implantin kokonaispituus

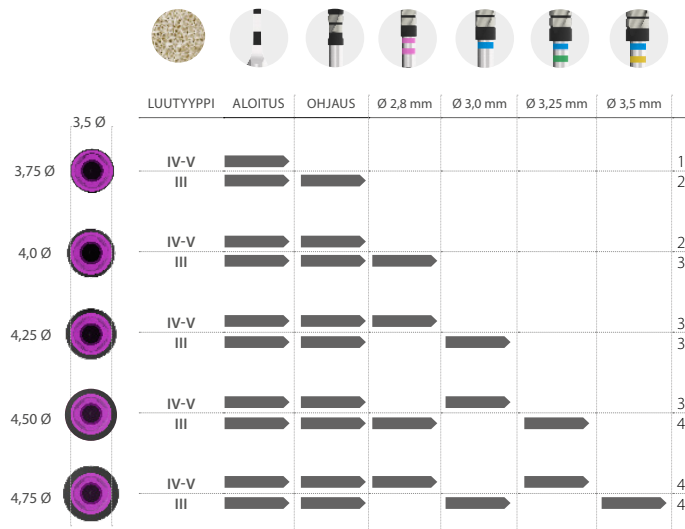


## TÄRKEÄÄ:

Jyrsintäjärjestys koskee vain  
CORE-X<sup>®</sup> -implantteja

# Implantin pituudet (10 - 15 mm)




- Implantin kokonaispituus
- 75 % implantin kokonaispituudesta
- 25 % implantin kokonaispituudesta
- Poraussyvyys 5,0 mm

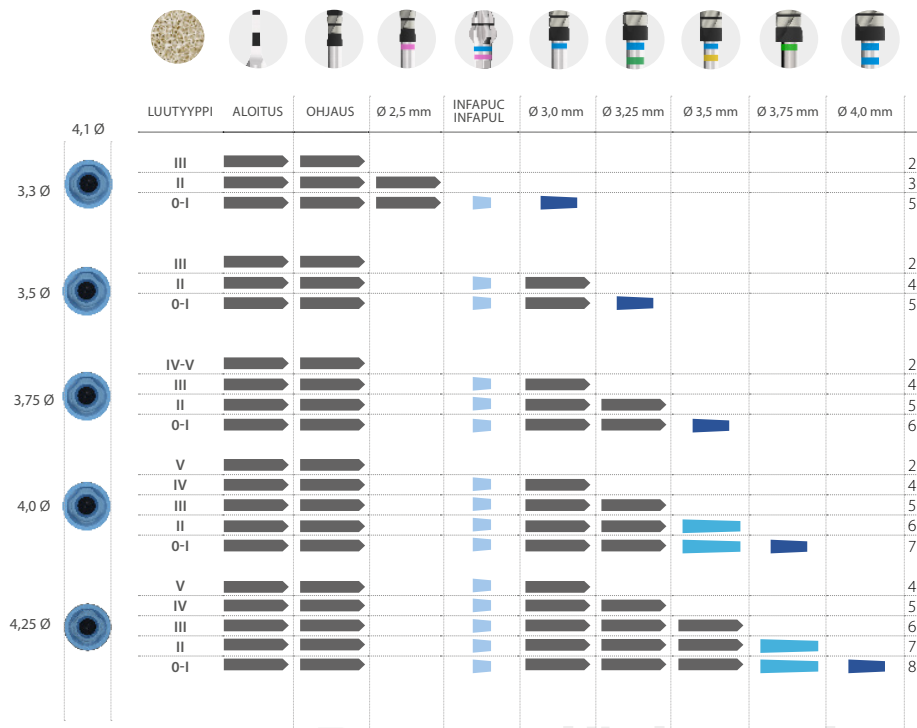

opas Porausjärjestyksen

# Implantin pituudet (5,5 - 8,5 mm)


- Implantin kokonaispituus
- X,X Ø Implantin kokonaispituus määritetyllä halkaisijalla
- Poraussyvyys 5,0 mm
- Poraussyvyys 2-3 mm

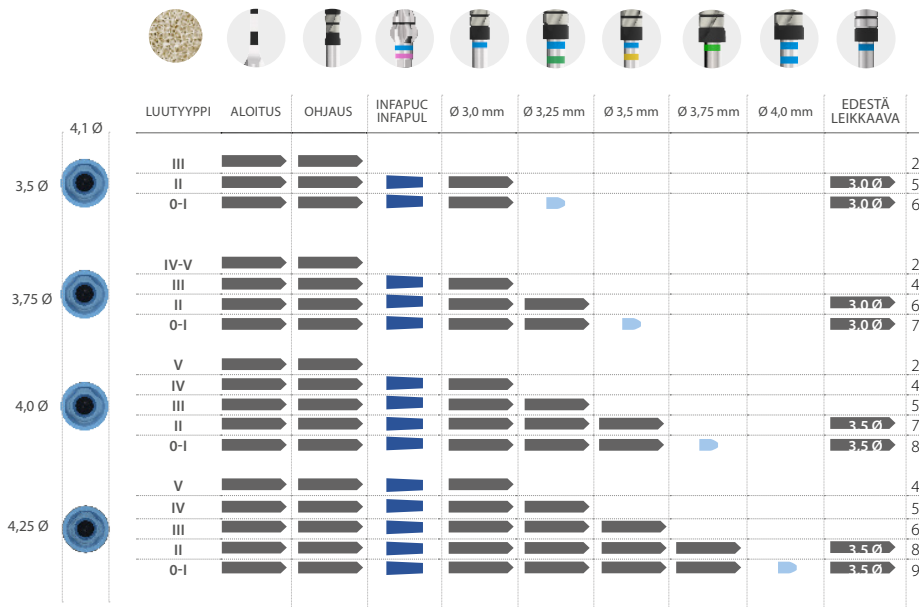

# Implantin pituudet (8,5 - 15 mm)



Implantin kokonaispituus  
Poraussyvyys 6,5 mm  
Poraussyvyys 3 mm

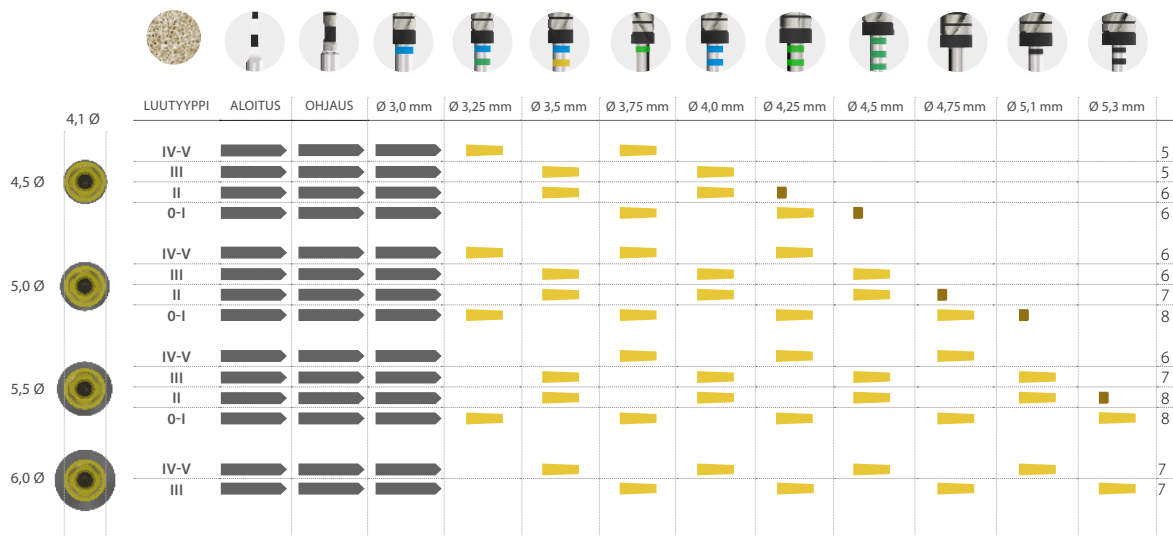

# Implantin pituudet (4,5 - 7,5 mm)



- Implantin kokonaispituus
- X,X Ø Implantin kokonaispituus määritetyllä halkaisijalla
- Porausvyövyys 3 mm

