



Útmutató az ajánlott fúrási lépésekről

az Interna BTI implantátumokhoz



MEGJEGYZÉS: a termék elérhetőségéről a különböző piacokon érdeklődjön a forgalmazónál

Fúrásmélység-jelek

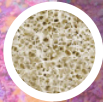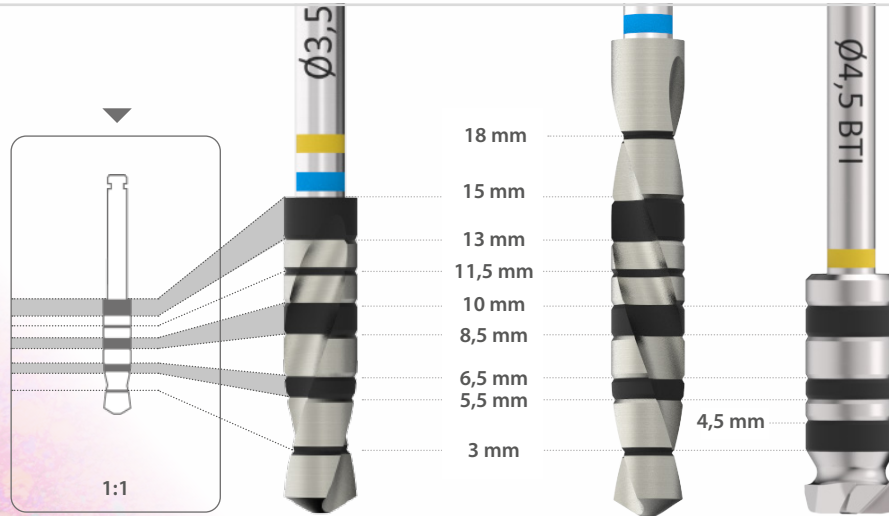

Besorolás/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

FÚRÓ

Előfúró

Fúró

Marófúró

Vágóéles fúrók

FORDULAT

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

ÖBLÍTÉS

igen

nem


nem

nem

Implantátum hossza

(6,5 - 13 mm)

 Az implantátum teljes hossza
 6,5 mm-es fúrásmélység
 2-3 mm-es fúrásmélység

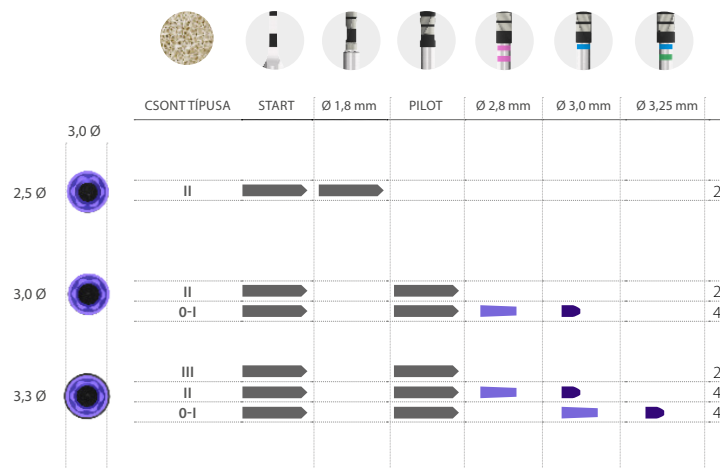


fúrási lépésekhez
Útmutató a

Implantátum hossza

(5,5 mm)



 Az implantátum teljes hossza
 2-3 mm-es fúrásmélység

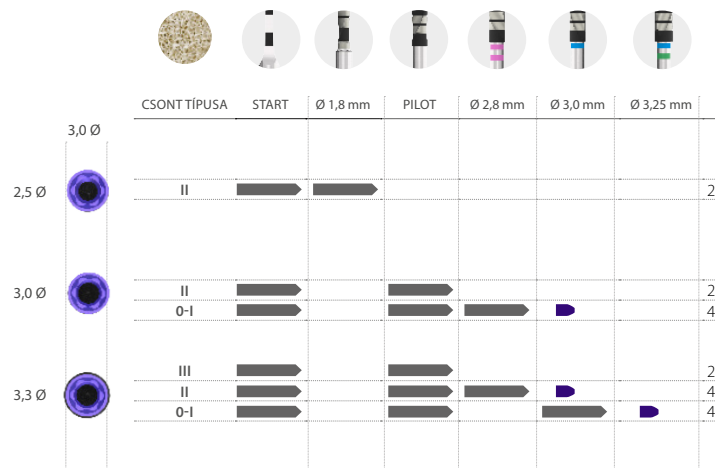


fúrási lépésekhez
Útmutató a

Implantátum hossza

(7,5 - 15 mm)

 Az implantátum teljes hossza
 6,5 mm-es fúrásmélység
 2-3 mm-es fúrásmélység

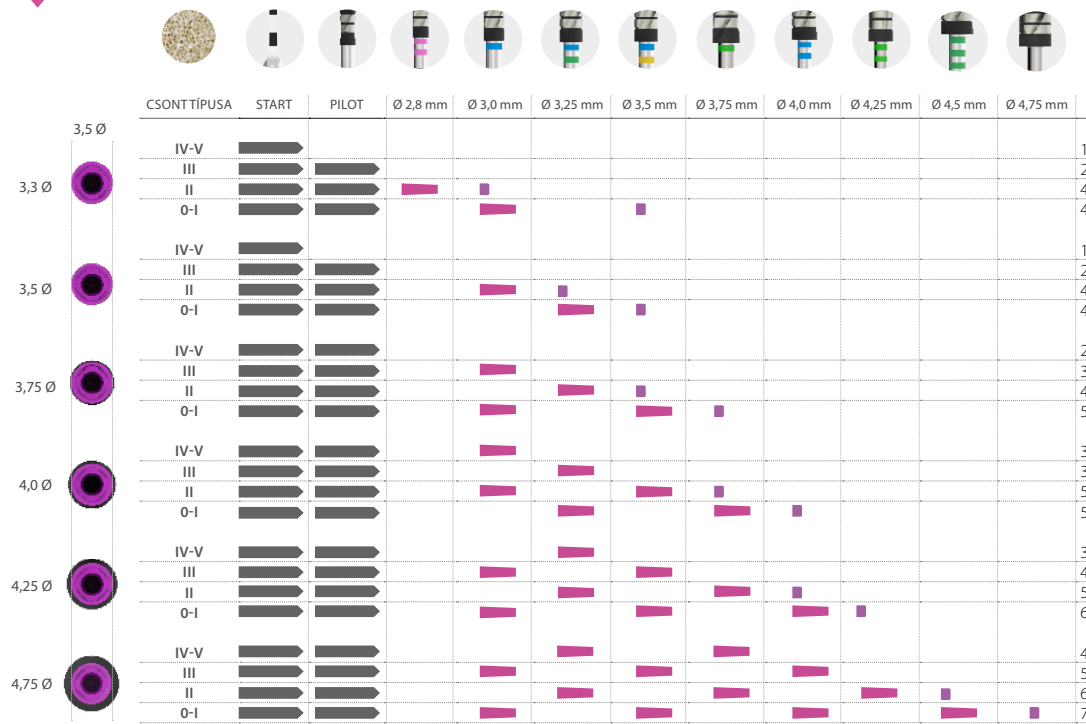


Útmutató a fúrási lépésekhez




Implantátum hossza (4,5 - 6,5 mm)

- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hossza a megadott átmérőjű fúróval
- 2-3 mm-es fúrásmélység

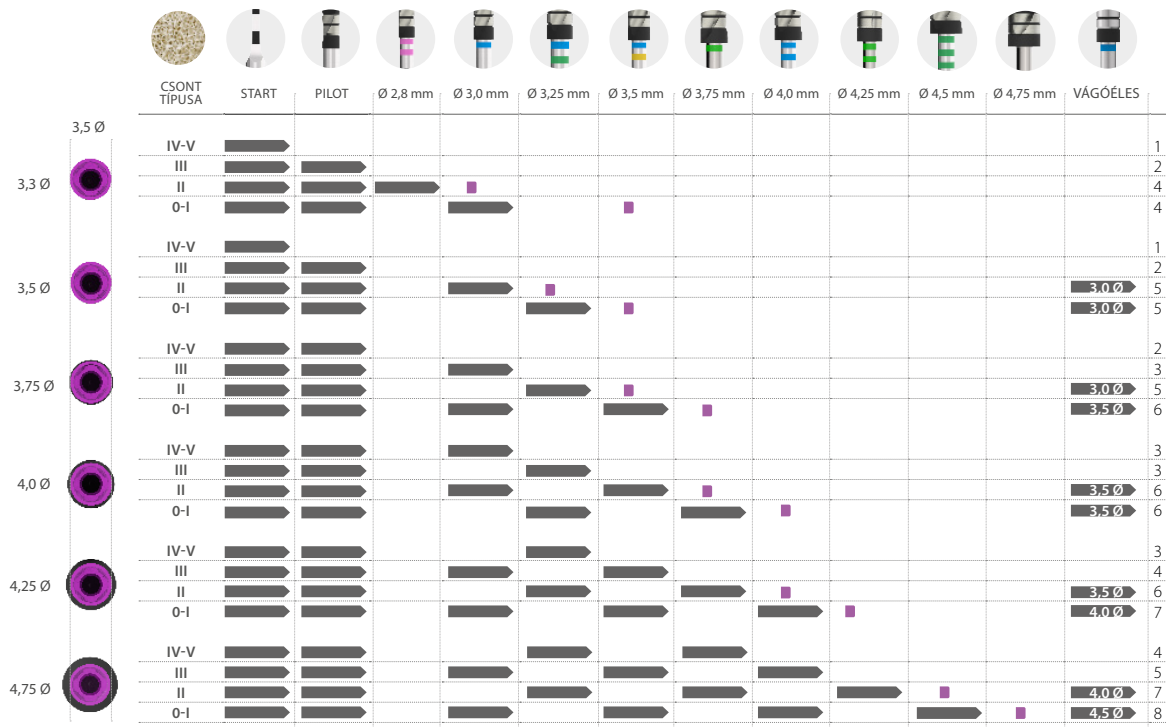

Implantátum hossza (6,5 - 13 mm)

 Az implantátum teljes hossza
 5,5 mm-es fúrásmélység

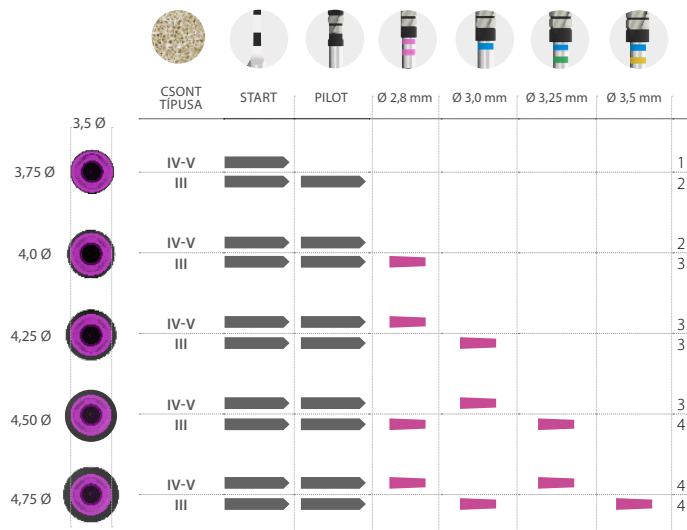

FONTOS:


A marási sorrend csak
CORE-X® implantátumokra
érvényes

fúrási lépésekhez
Útmutató a

Implantátum hossza

(4,5 - 5,5 mm)

➡ Az implantátum teljes hossza

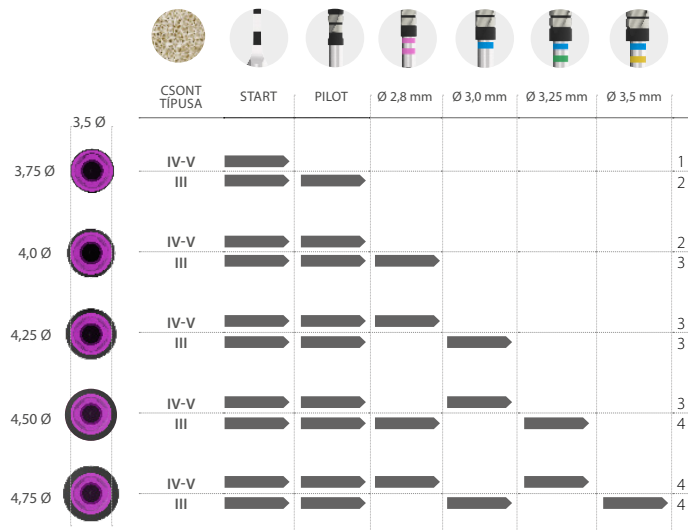

FONTOS:

A marási sorrend csak
CORE-X® implantátumokra
érvényes


fúrási lépésekhez
Útmutató a



Implantátum hossza

(10 - 15 mm)

- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hosszának 75%-a
- Az implantátum teljes hosszának 25%-a
- 5,0 mm-es fúrásmélység

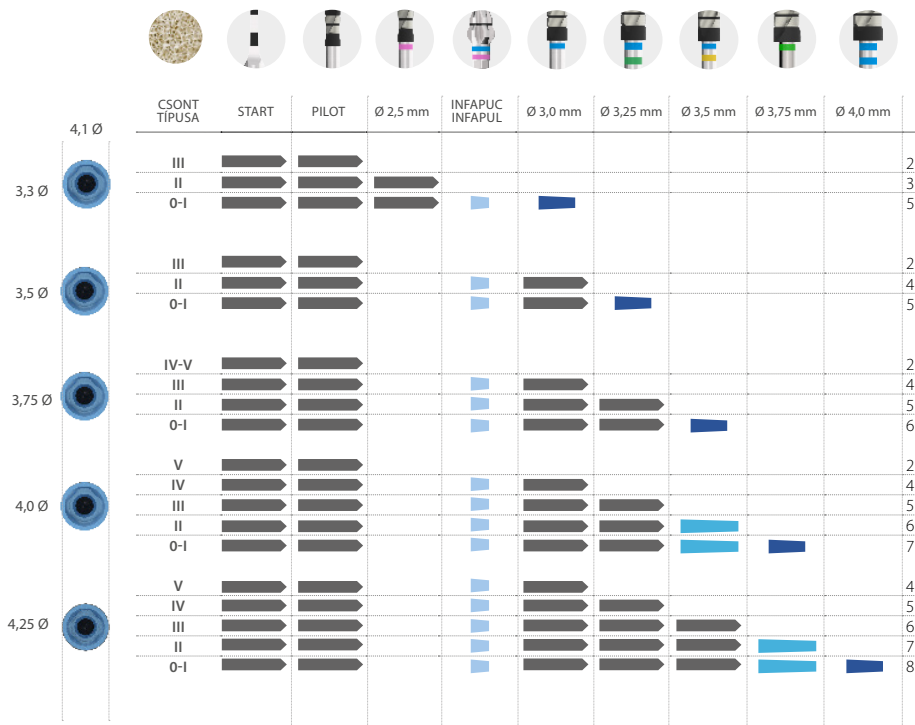


fúrási lépésekhez
Útmutató a

Implantátum hossza

(5,5 - 8,5 mm)

- Az implantátum teljes hossza
- $X \times \emptyset$ Az implantátum teljes hossza a megadott átmérőjű fúróval
- 5,0 mm-es fúrásmélység
- 2-3 mm-es fúrásmélység

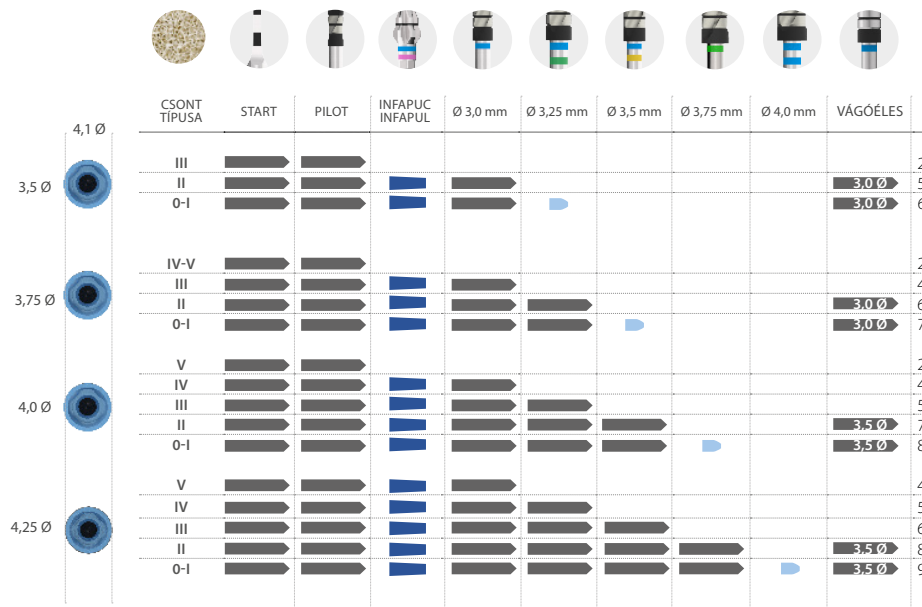

fúrási lépésekhez


Útmutató a

Implantátum hossza

(8,5 - 15 mm)



 Az implantátum teljes hossza
 6,5 mm-es fúrásmélység
 3 mm-es fúrásmélység

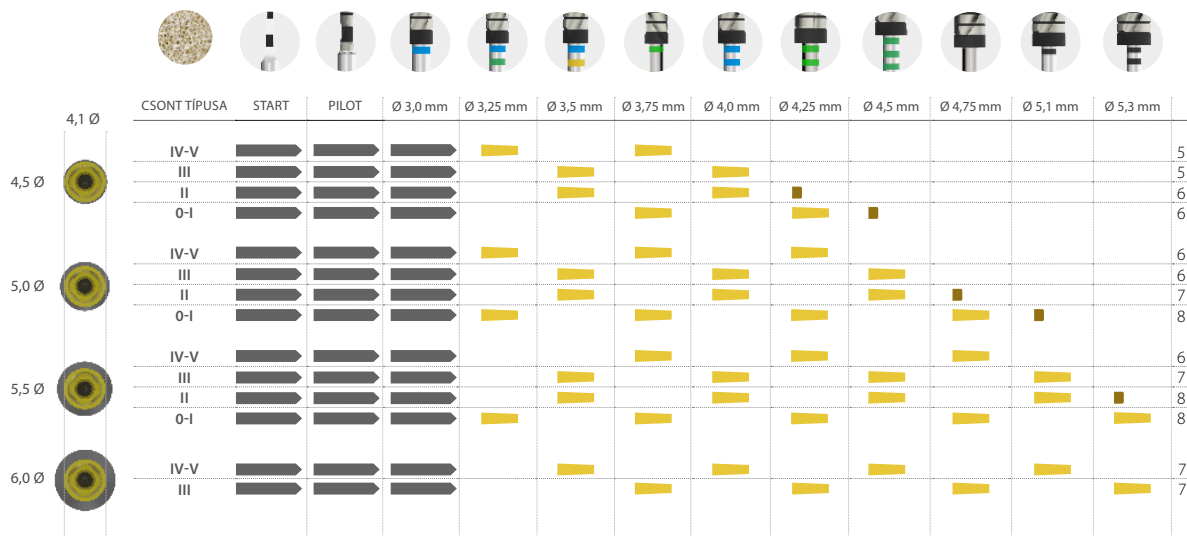

fúrési lépésekhez
Útmutató a



Implantátum hossza

(4,5 - 7,5 mm)




Az implantátum teljes hossza



Az implantátum teljes hossza a megadott átmérőjű fúróval



3 mm-es fúrásmélység

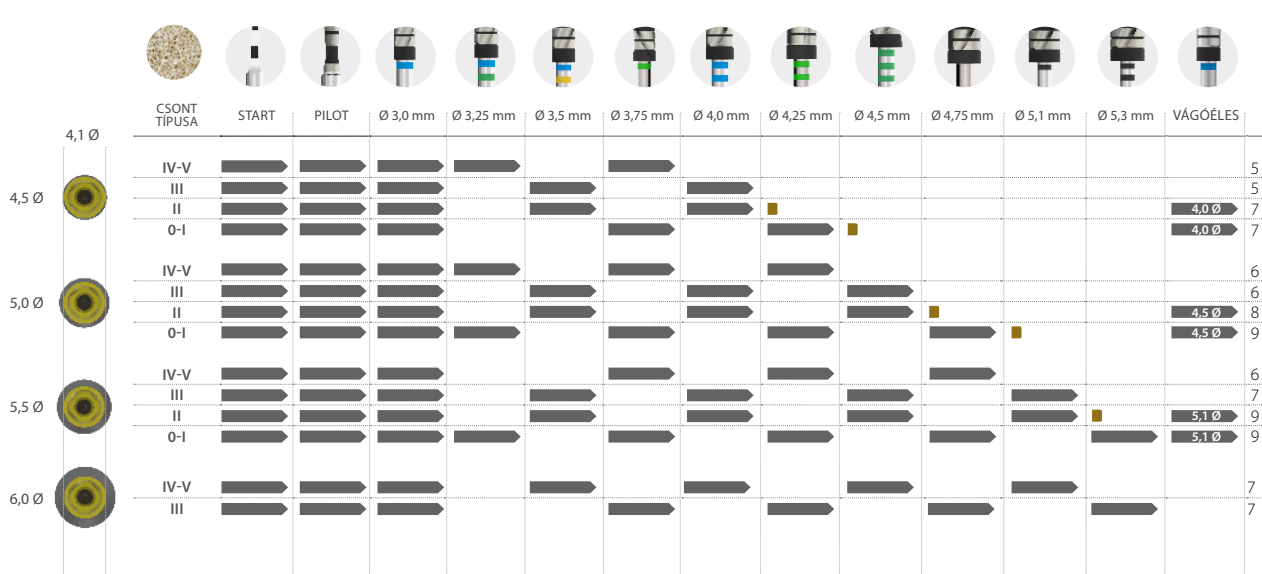

Universal Plus Platform

Platform átmérője Ø4,1 mm

fúrási lépésekhez

Útmutató a