



Sequenze consigliate di fresatura

per impianti BTI Interna



NOTA: Si prega di verificare la disponibilità del prodotto sui vari mercati con la filiale di riferimento.

Tacche di profondità di fresatura

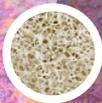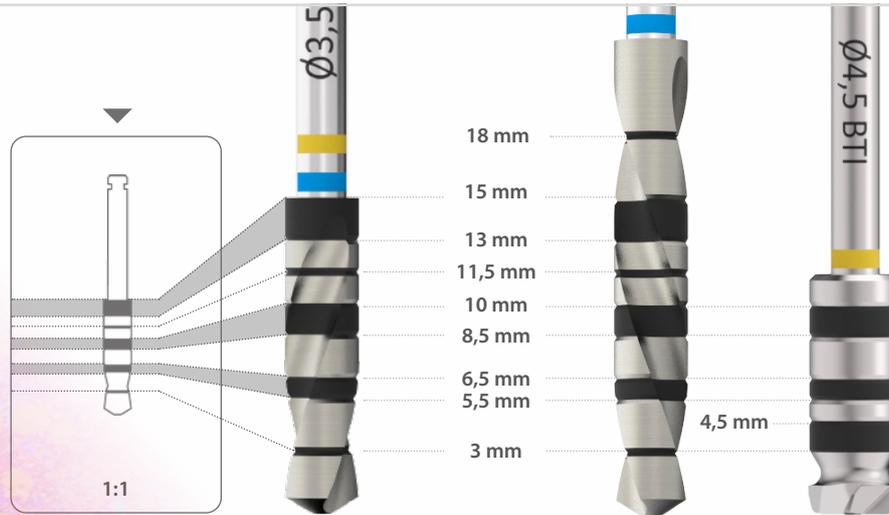

Tipo/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

FRESA

Fresa di inizio

Frese

Frese svasatrici

Fresa taglio frontale

VELOCITÀ

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

IRRIGAZIONE

si

no

no


no



Impianti lunghezza

(da 6,5 a 13 mm)

- Lunghezza totale dell'impianto
- 6,5 mm di profondità di fresatura
- 2-3 mm di profondità di fresatura

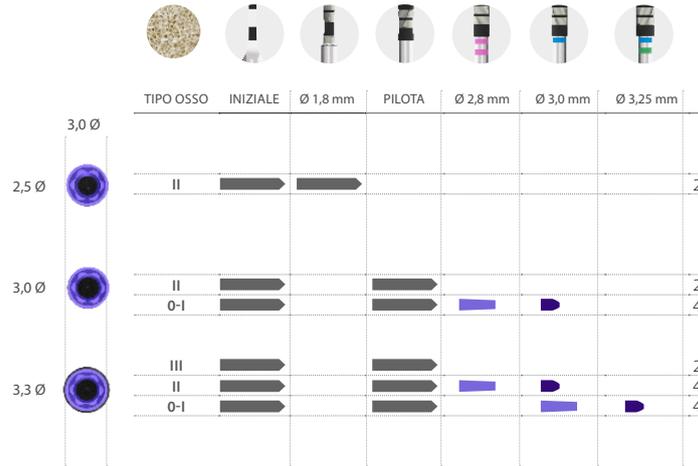

Piattaforma 3.0
Ø3,0 mm diametro della piattaforma


fresatura
Sequenze di



Impianti lunghezza (5,5 mm)




 Lunghezza totale dell'impianto
 2-3 mm di profondità di fresatura

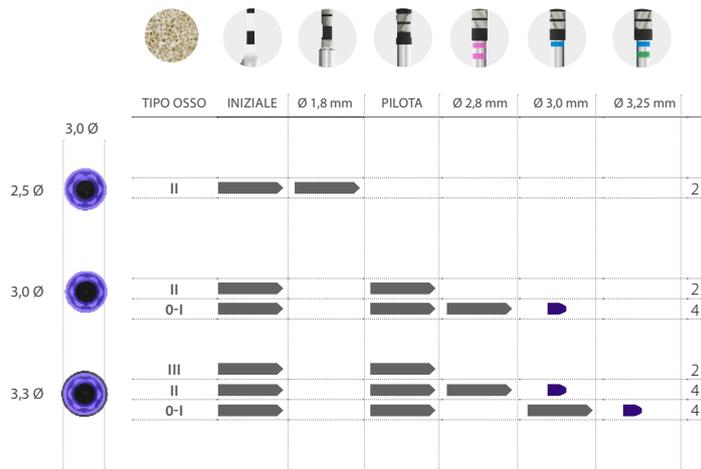

Impianti lunghezza

(da 7,5 a 15 mm)

 Lunghezza totale dell'impianto
 6,5 mm di profondità di fresatura
 2-3 mm di profondità di fresatura

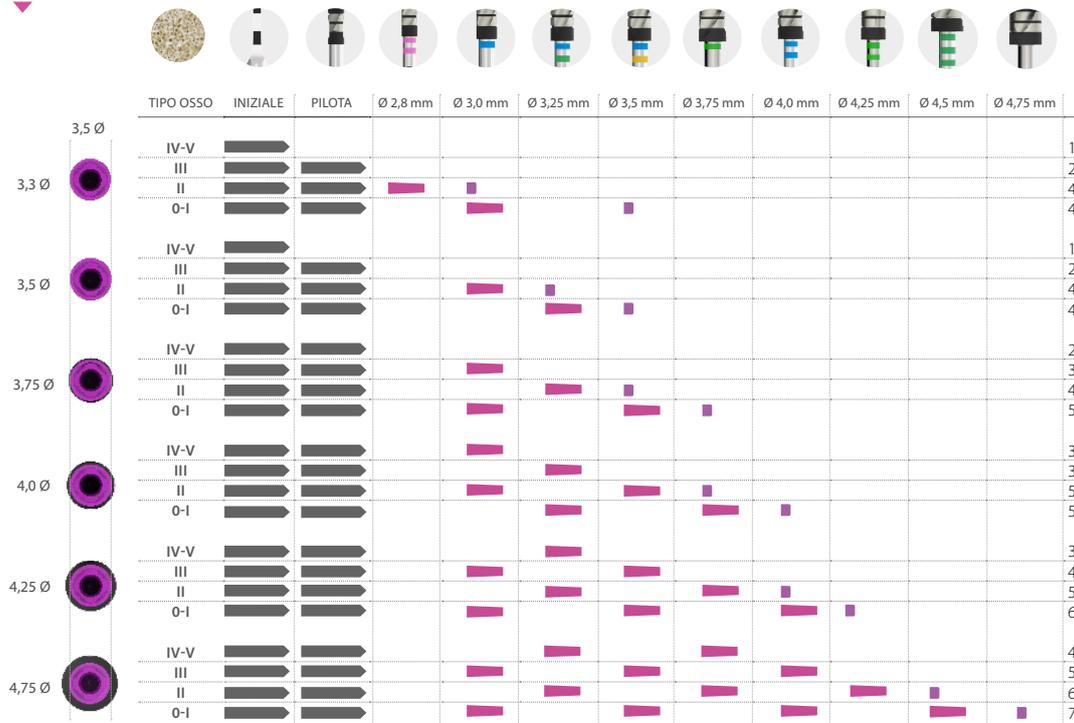



Impianti lunghezza (da 4,5 a 6,5 mm)

- Lunghezza totale dell'impianto
- X,X Ø Lunghezza totale dell'impianto con fresa del diametro specificato
- 2-3 mm di profondità di fresatura



Ø3,5 mm diametro della piattaforma


Piattaforma Stretta/CORE

fresatura
Sequenze di



Impianti lunghezza (da 6,5 a 13 mm)


 Lunghezza totale dell'impianto
 5,5 mm di profondità di fresatura

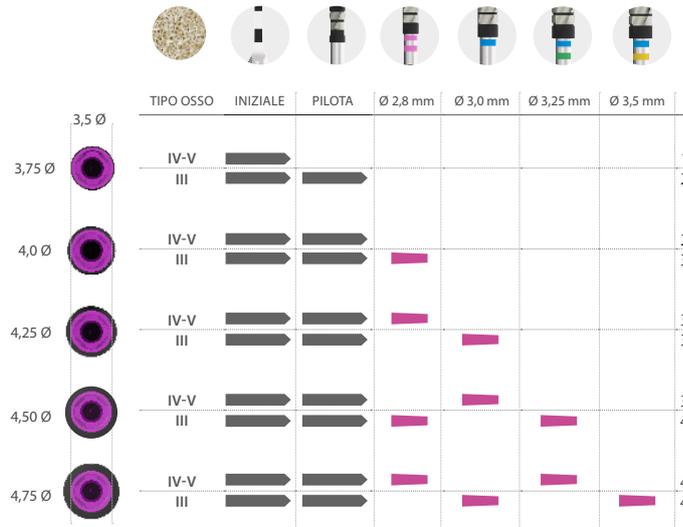

IMPORTANTE:
 sequenza di fresatura valida solo per impianti CORE-X®

Impianti lunghezza (da 4,5 a 5,5 mm)

➔ Lunghezza totale dell'impianto

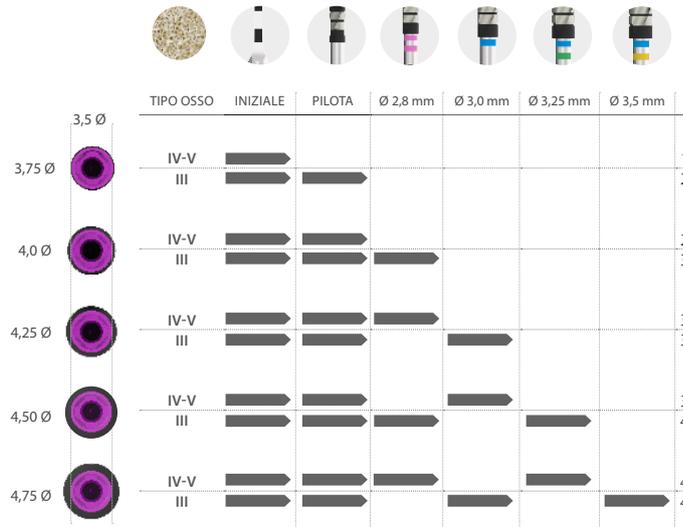


IMPORTANTE:
 sequenza di fresatura valida
 solo per impianti CORE-X®



Impianti lunghezza

(da 10 a 15 mm)

- Lunghezza totale dell'impianto
- 75 % della lunghezza totale dell'impianto
- 25 % della lunghezza totale dell'impianto
- 5,0 mm di profondità di fresatura

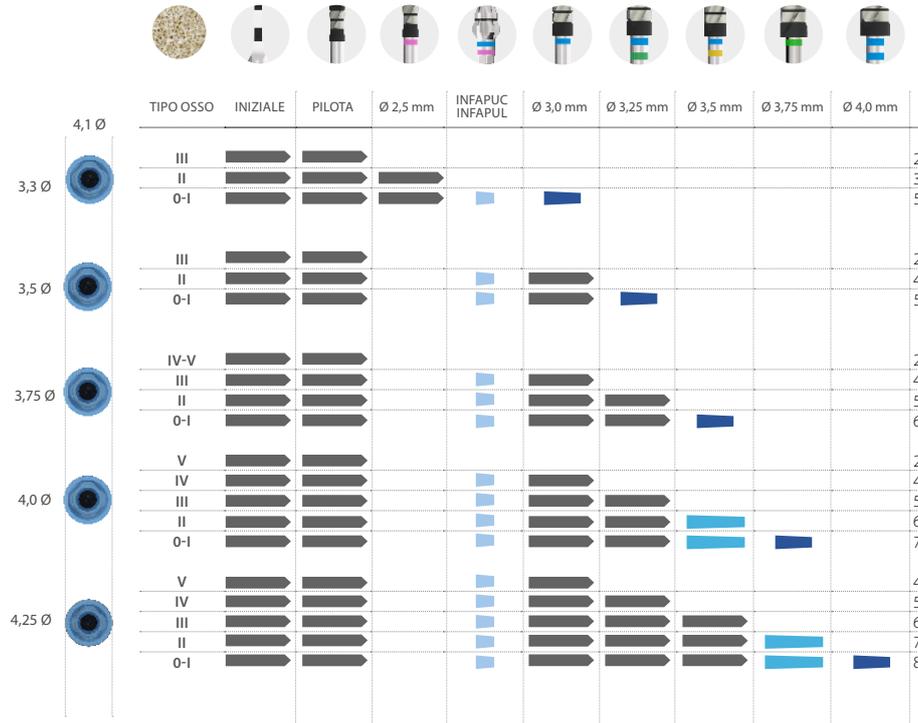

© Piattaforma Universale
Ø4,1 mm diametro della piattaforma


fresatura
Sequenze di





Impianti lunghezza *(da 5,5 a 8,5 mm)*

- Lunghezza totale dell'impianto
- Lunghezza totale dell'impianto con fresa del diametro specificato
- 5,0 mm di profondità di fresatura
- 2-3 mm di profondità di fresatura

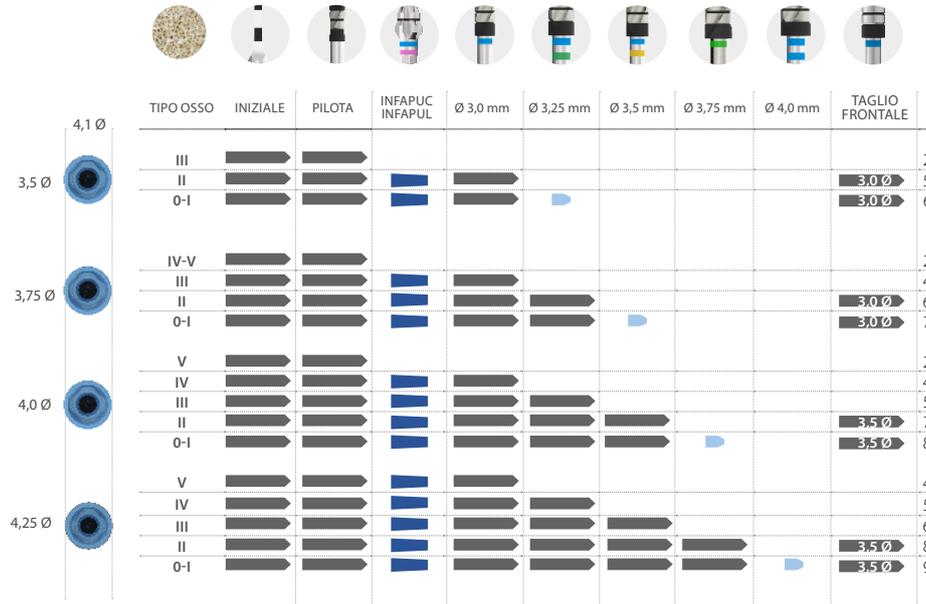

© Piattaforma Universale
Ø4,1 mm diametro della piattaforma


fresatura
Sequenze di



Impianti lunghezza (da 8,5 a 15 mm)



 Lunghezza totale dell'impianto
 6,5 mm di profondità di fresatura
 3 mm di profondità di fresatura

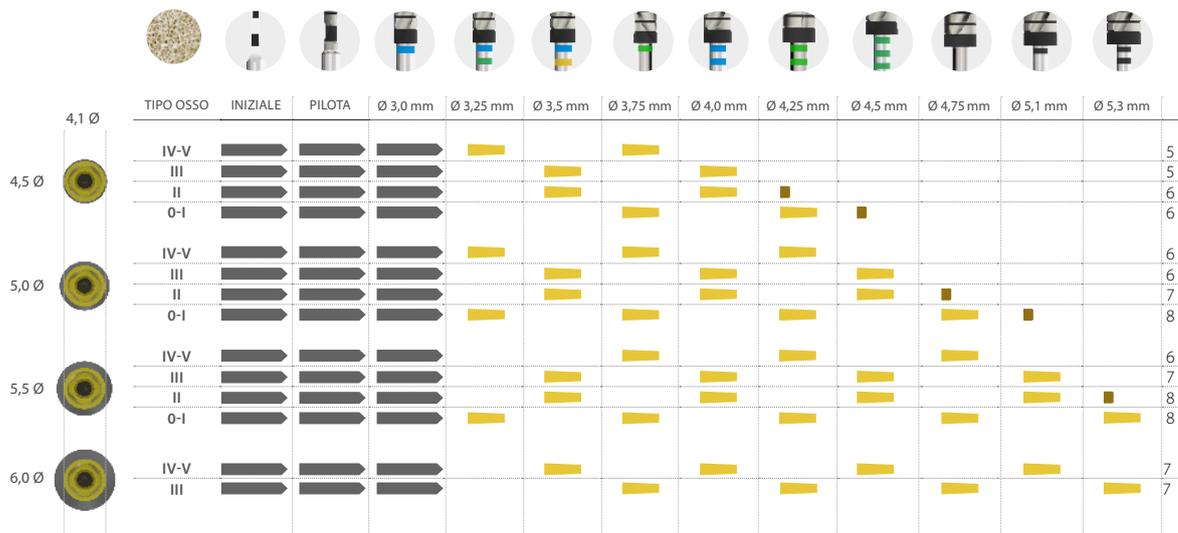

Piattaforma Universale Plus

Ø4,1 mm diametro della piattaforma

Impianti lunghezza (da 4,5 a 7,5 mm)



-  Lunghezza totale dell'impianto
-  Lunghezza totale dell'impianto con fresa del diametro specificato
-  3 mm di profondità di fresatura



fresatura
Sequenze di

