



Rekomenduojamas gręžimo sekos vadovas

skirtas Interna BTI implantams



PASTABA: dėl gaminio prieinamumo skirtingose rinkose kreipkitės į platintoją

Gręžimo gylio žymės

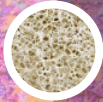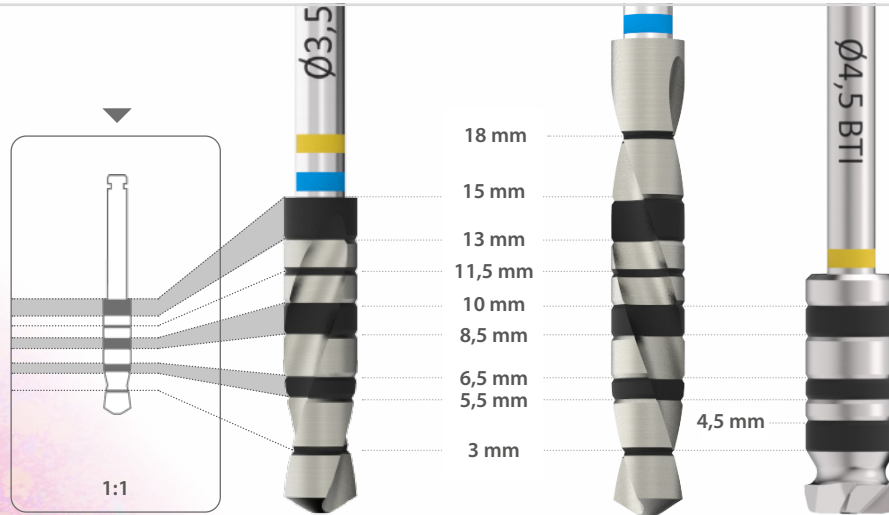

Klasė/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

GRĘŽTUVAS

Pradinis gręžtuvas

Gręžtuvas

Latakų gręžtuvas

Gręžtuvai priekiniams
dantims

APSISUKIMAI

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

DRĖKINIMAS

taip

ne


ne

ne

Implanto ilgis

(nuo 6,5 iki 13 mm)

 Bendras implanto ilgis
 6,5 mm gręžimo gylis
 2-3 mm gręžimo gylis

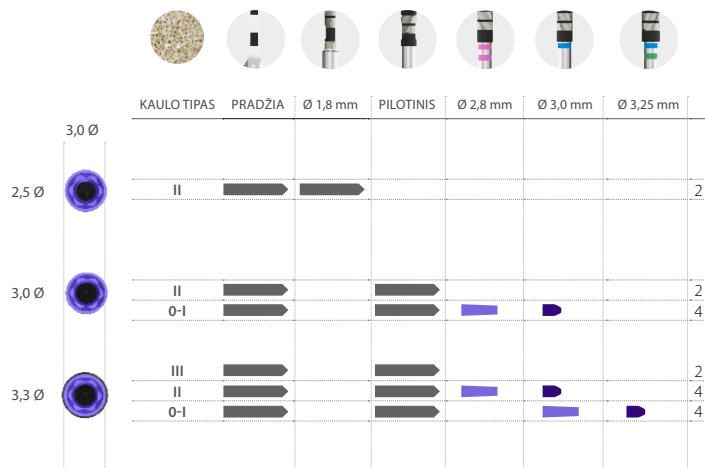


Implanto ilgis

(5,5 mm)




➔ Bendras implanto ilgis
■ 2-3 mm gręžimo gylis

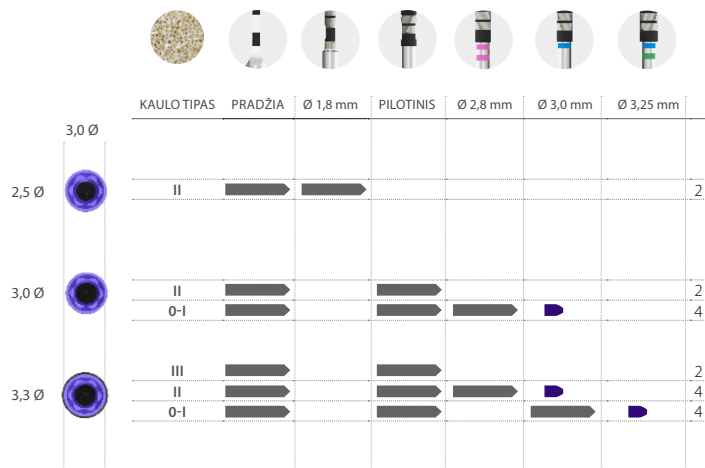

Implanto ilgis (nuo 7,5 iki 15 mm)


 Bendras implanto ilgis
 6,5 mm gręžimo gylis
 2-3 mm gręžimo gylis

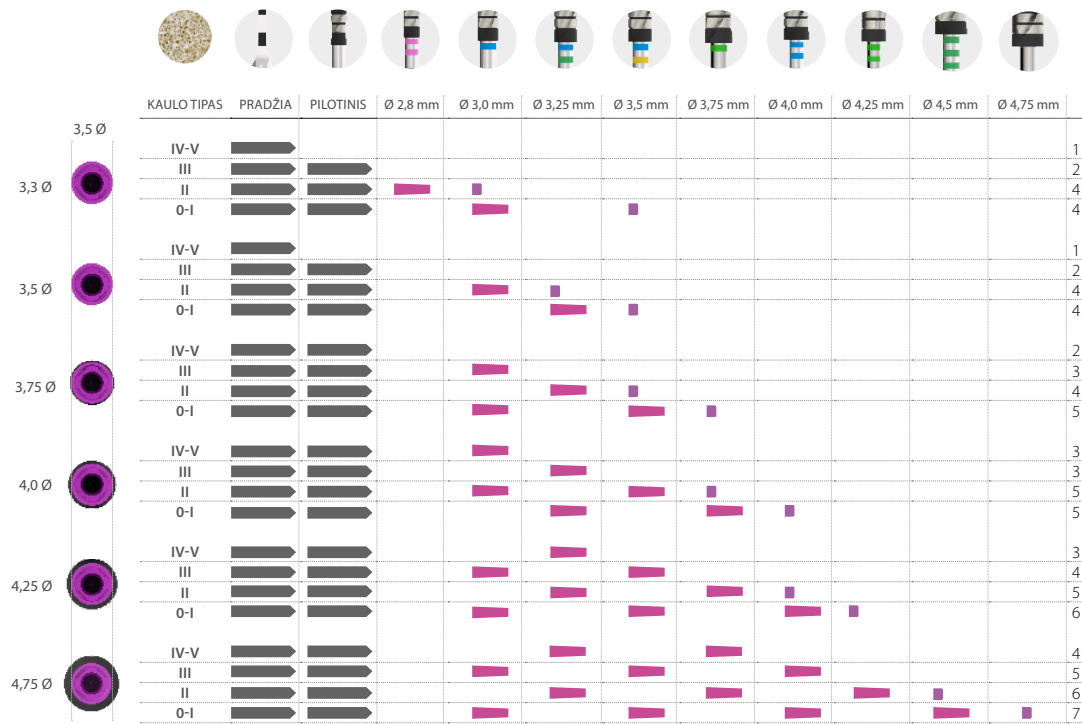

Implanto ilgis

(nuo 4,5 iki 6,5 mm)


 Bendras implanto ilgis
 Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu
 2-3 mm gręžimo gylis

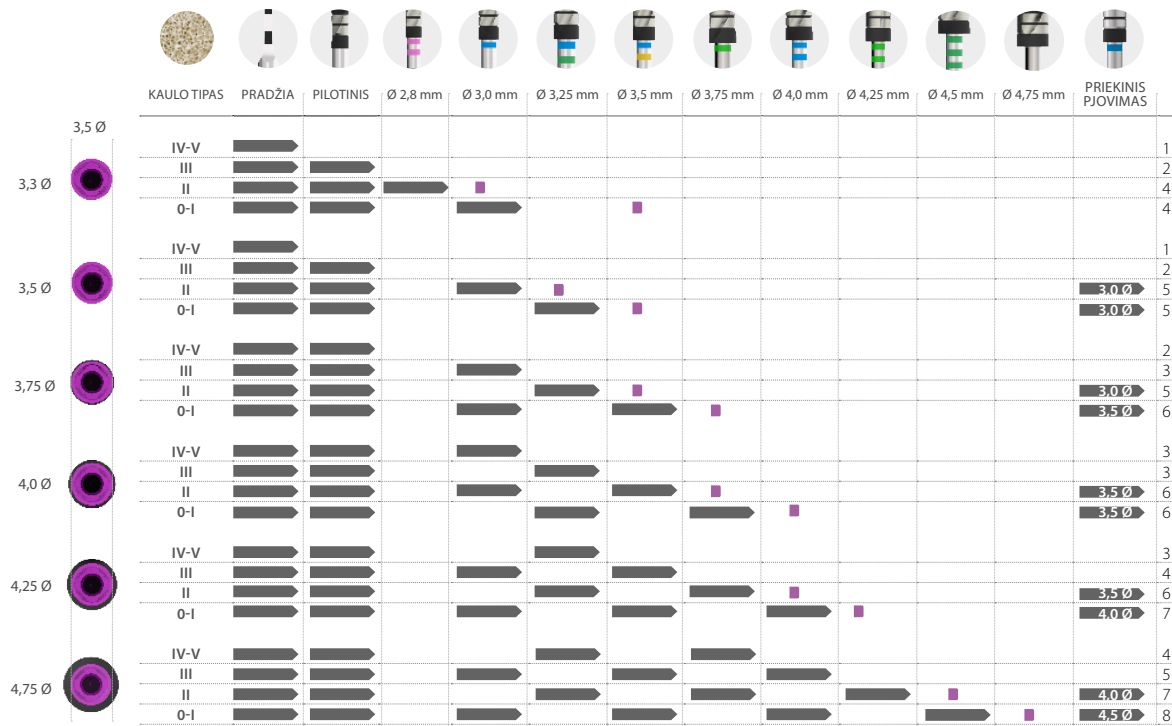

Implanto ilgis

(nuo 6,5 iki 13 mm)

— Bendras implanto ilgis
— 5,5 mm gręžimo gylis

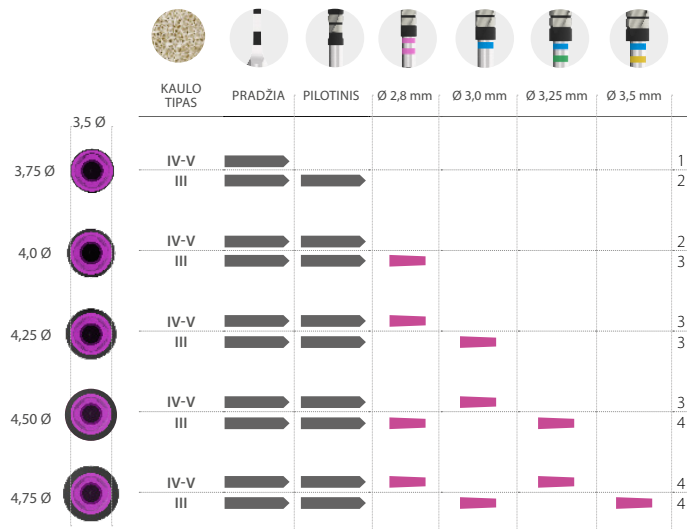


SVARBU:
Šis frezavimo eiliškumas tinka tik CORE-X® implantams

Implanto ilgis

(nuo 4,5 iki 5,5 mm)

➡ Bendras implanto ilgis

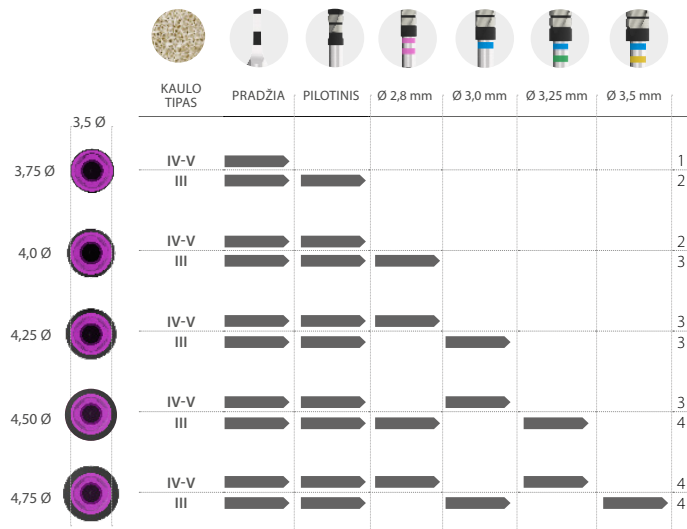

SVARBU:


Šis frezavimo eiliškumas tinka tik CORE-X® implantams



Implanto ilgis

(nuo 10 iki 15 mm)

- Bendras implanto ilgis
- 75 % viso implanto ilgio
- 25 % viso implanto ilgio
- 5,0 mm gręžio gylis

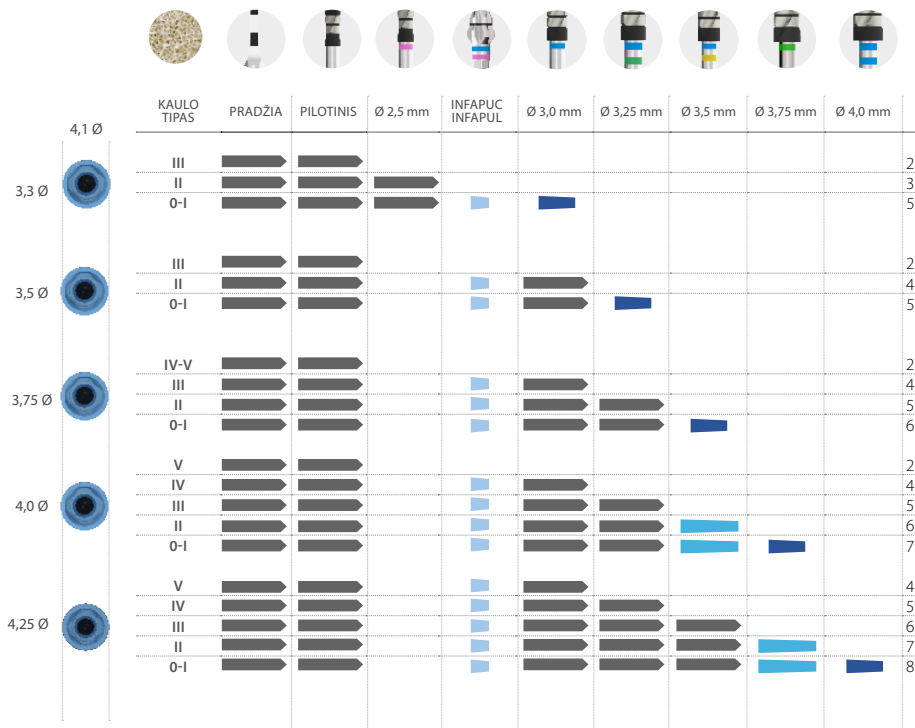

Gręžio
sekos kreiptuvas






Implanto ilgis

(nuo 5,5 iki 8,5 mm)


- Bendras implanto ilgis
- XXØ Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu
- 5,0 mm gręžimo gylis
- 2-3 mm gręžimo gylis

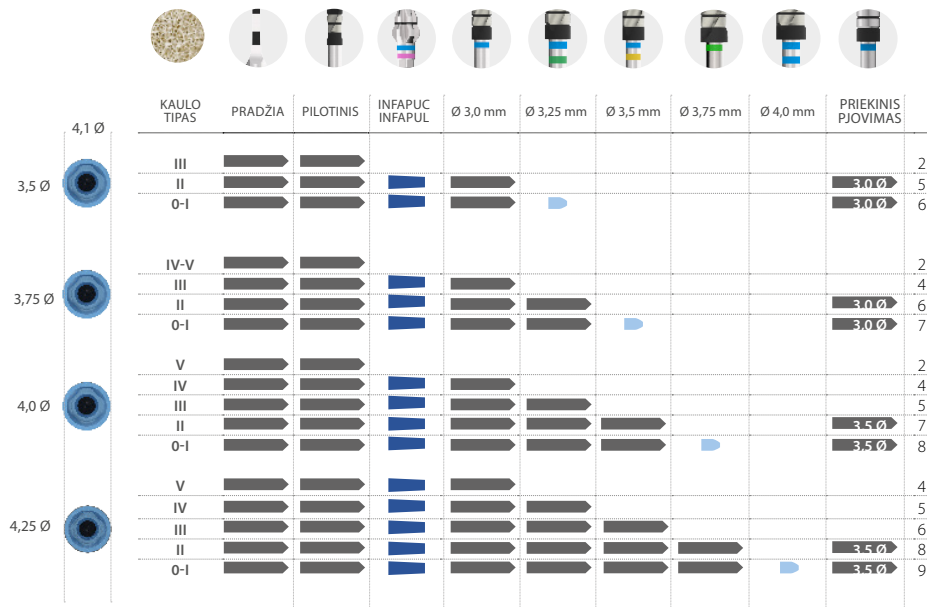

Implanto ilgis

(nuo 8,5 iki 15 mm)

 Bendras implanto ilgis
 6,5 mm gręžimo gylis
 3 mm gręžimo gylis

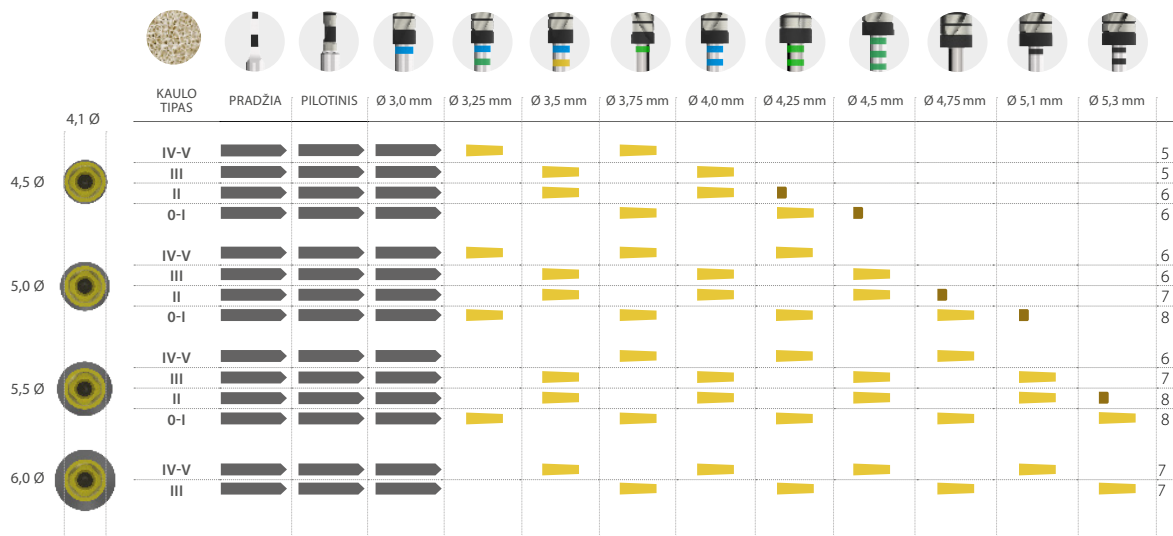

Implanto ilgis (nuo 4,5 iki 7,5 mm)

- ➔ Bendras implanto ilgis
- X,X Ø Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu
- 3 mm gręžimo gylis

