



Anbefalt boresekvensguide

for Interna BTI-implantater



MERK: Ta kontakt med din distributør for å få informasjon om tilgjengeligheten av produktet i de ulike markedene

Boredybdemerker

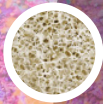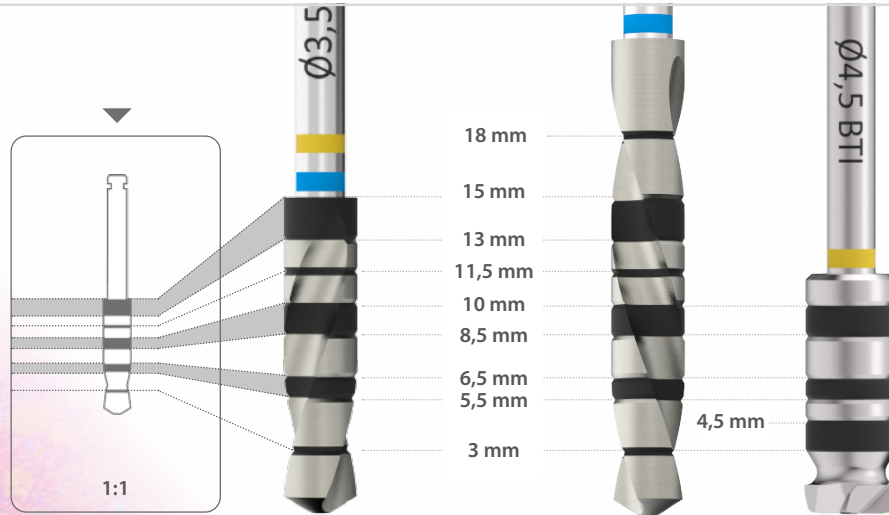

Klasse/Hounsfield	III	IV	V
I	1050 - 1400	400 - 500	100 - 350
II	850 - 1000		


BOR	REVOLUSJONER	IRRIGASJON
Første boring	800 - 1.000 rpm	ja
Bor	50 - 75 rpm	nei
Forskningsbor	150 - 200 rpm	nei
Frontskjærende bor	50 - 75 rpm	nei



Implantatlengder

(fra 6,5 til 13 mm)

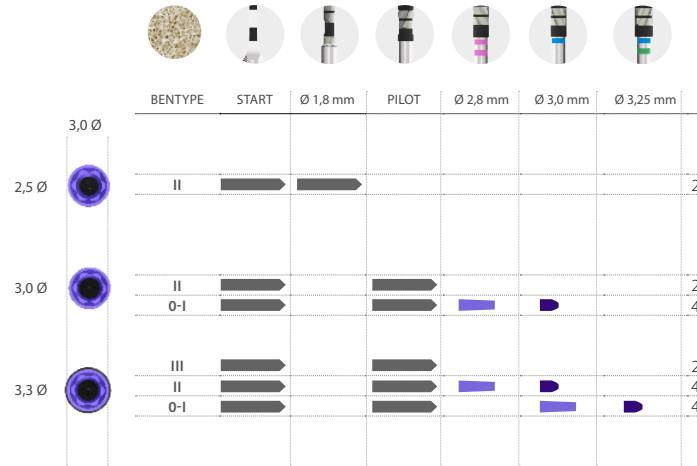

Total lengde på implantatet
 6,5 mm boreddybde
 2-3 mm boreddybde






Implantatlengder

(5,5 mm)

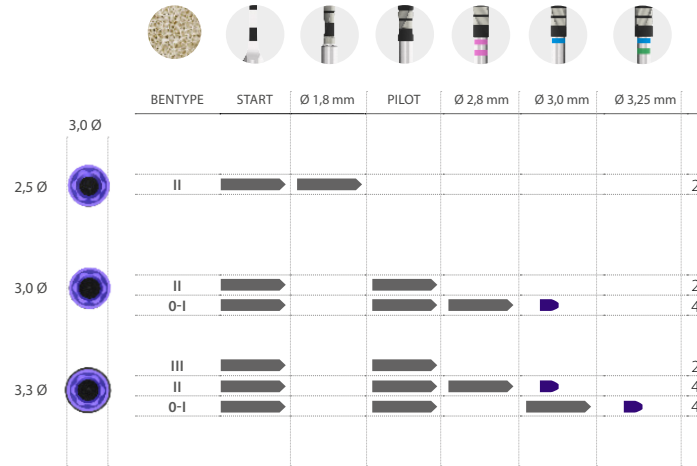


 Total lengde på implantatet
 2-3 mm boreddybde





Implantatlengder

(fra 7,5 til 15 mm)

 Total lengde på implantatet
 6,5 mm boredybde
 2-3 mm boredybde



 Smal/CORE plattform
 Plattformdiameter Ø3,5 mm

Boresekvensguide






Implantatlengder

(fra 4,5 til 6,5 mm)

Total lengde på implantatet
 Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor
 2-3 mm boreddybde

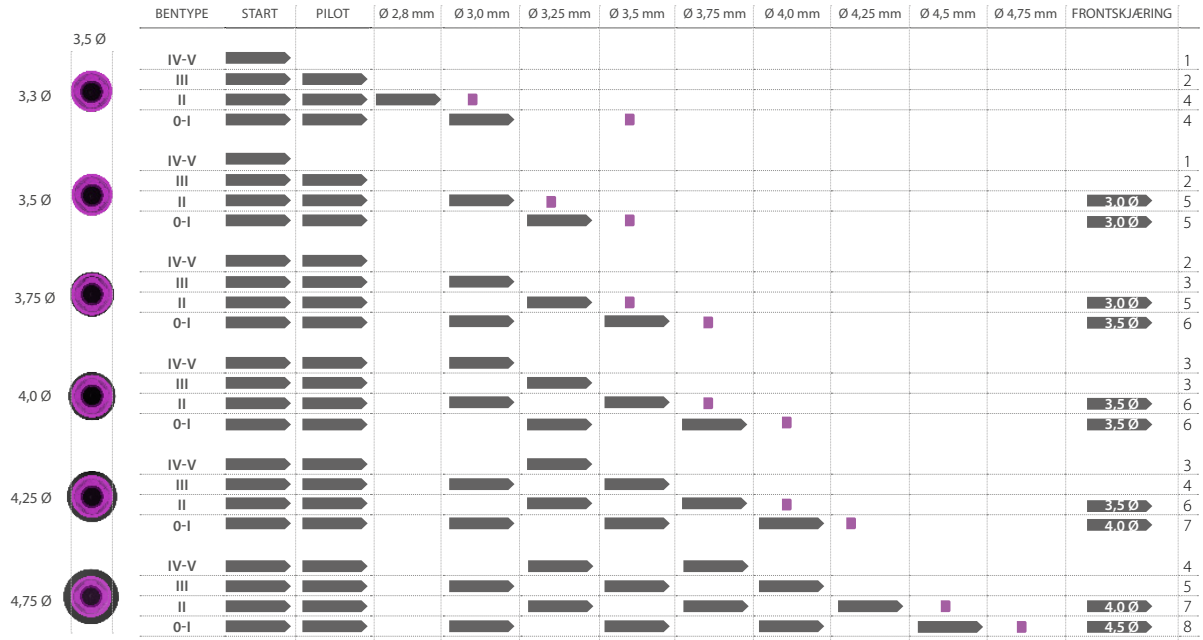



Smal/CORE plattform
 Plattformdiameter Ø3,5 mm


Boresekvensguide



Implantatlengder

(fra 6,5 til 13 mm)

 Total lengde på implantatet
 5,5 mm boreddybde

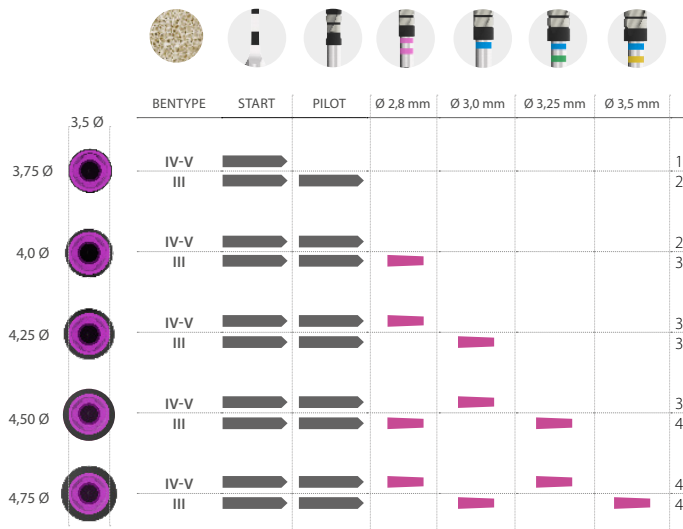


VIKTIG:
 Fresesekvensen gjelder kun
 for CORE-X® -implantater

Implantatlengder

(fra 4,5 til 5,5 mm)

➔ Total lengde på implantatet

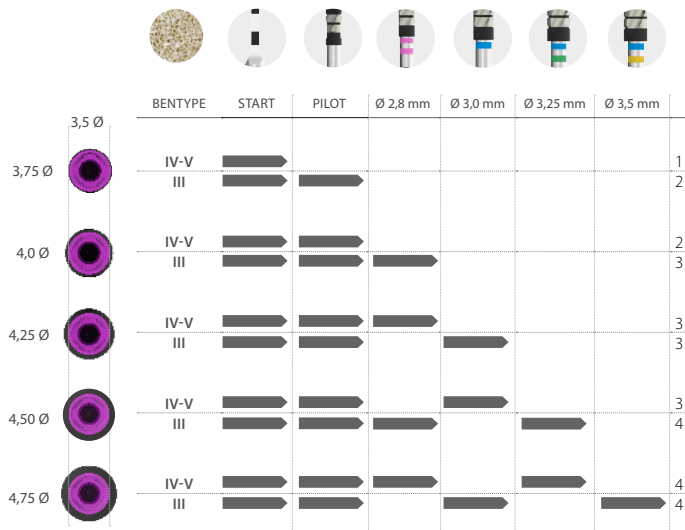

VIKTIG:
 Fresesekvensen gjelder kun
 for CORE-X® -implantater






Implantatlengder

(fra 10 til 15 mm)

- Total lengde på implantatet
- 75 % av den totale lengden på implantatet
- 25 % av den totale lengden på implantatet
- 5,0 mm boreddybde

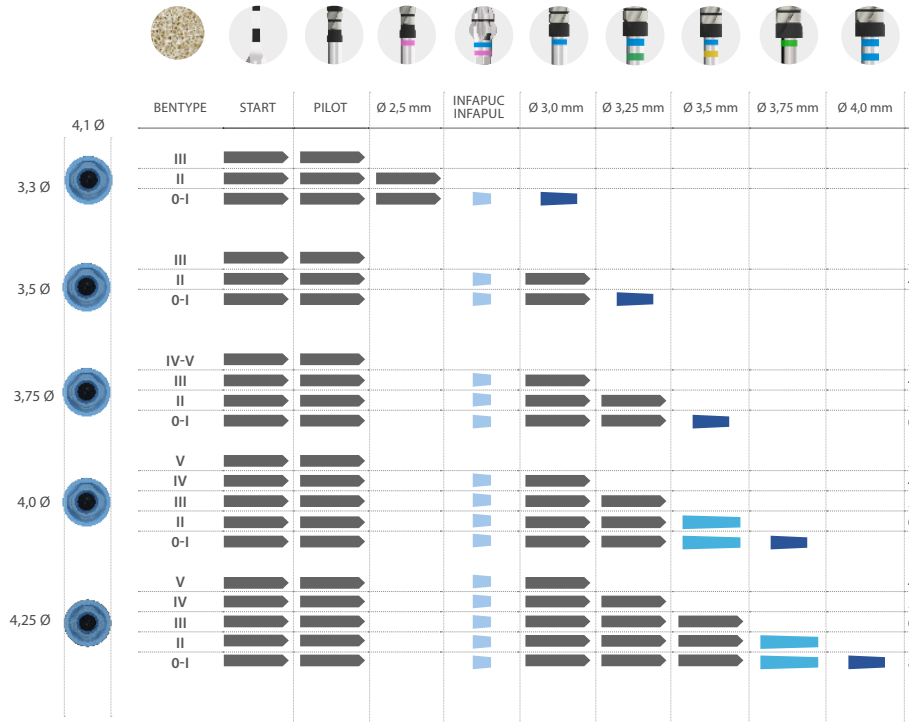




Implantatlengder




(fra 5,5 til 8,5 mm)

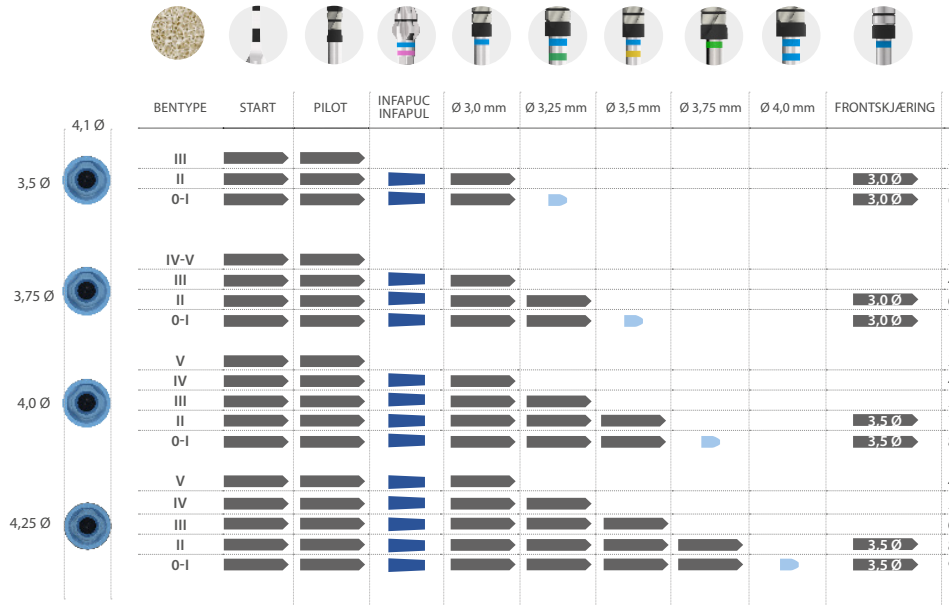
- Total lengde på implantatet
- Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor
- 5,0 mm boreddybde
- 2-3 mm boreddybde



Implantatlengder (fra 8,5 til 15 mm)



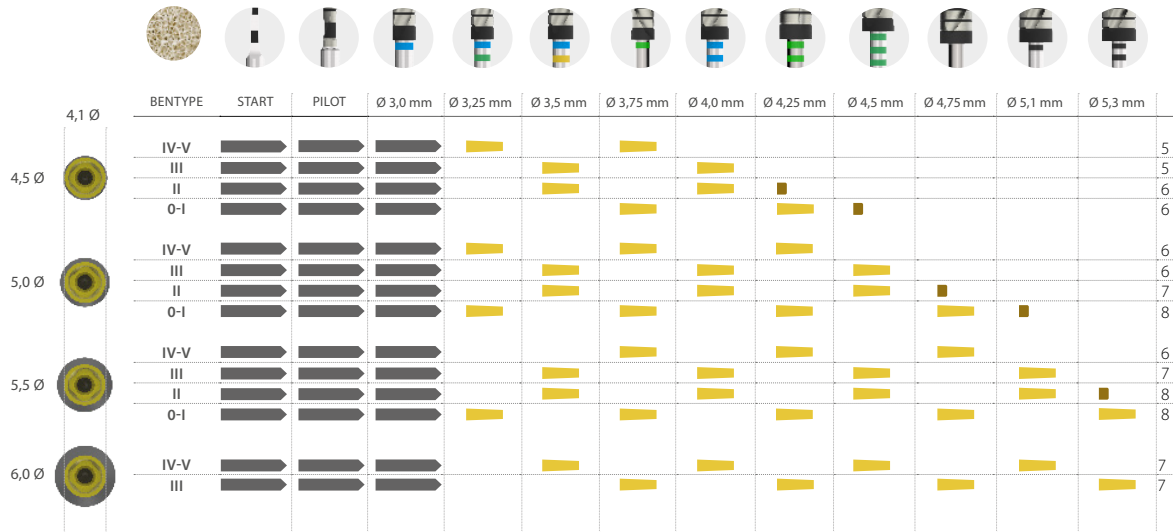


 Total lengde på implantatet
 6,5 mm boreddybde
 3 mm boreddybde



Implantatlengder

(fra 4,5 til 7,5 mm)

-  Total lengde på implantatet
-  Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor
-  3 mm boreddybde

