



Ghid de secvență de găurire recomandat

pentru implanturile BTI Interna



NOTĂ: consultați distribuitorul dvs. pentru disponibilitatea produsului pe diferite piețe.

Semne de adâncime a burghiului

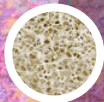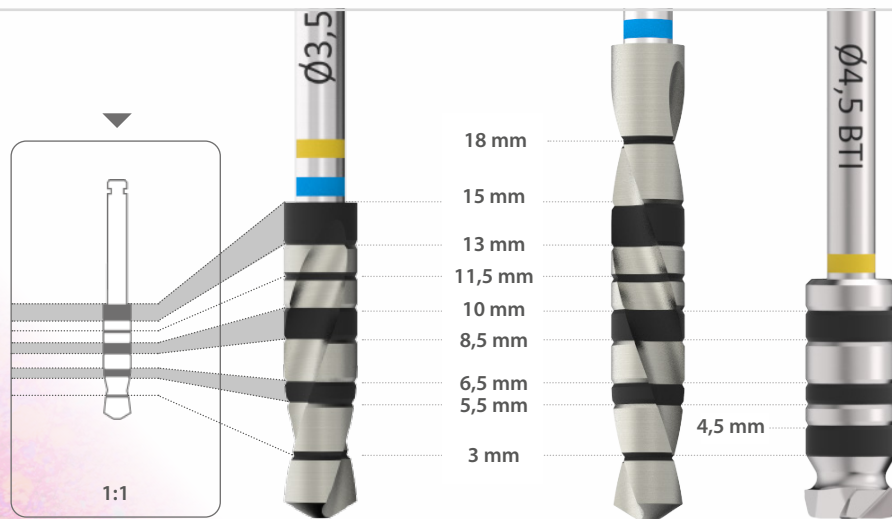

Clasă/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

BURGHIU

Burghiu inițial

Burghiu

Burghiu conic

Burghie cu tăiere
frontală

ROTAȚII

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

0 - 75 rpm

IRIGARE

da

nu


nu

nu

Lungimea implantului (de la 6,5 la 13 mm)



 Lungimea totală a implantului
 6,5 mm adâncime de găurire
 2-3 mm adâncime de găurire

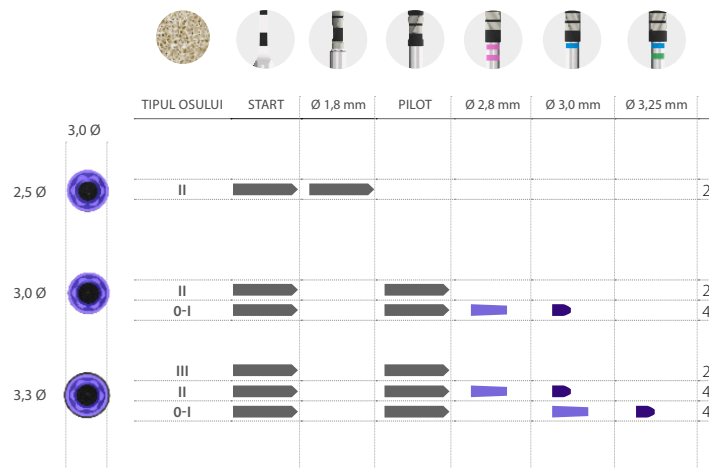


Lungimea implantului

(5,5 mm)




→ Lungimea totală a implantului
■ 2-3 mm adâncime de găurire

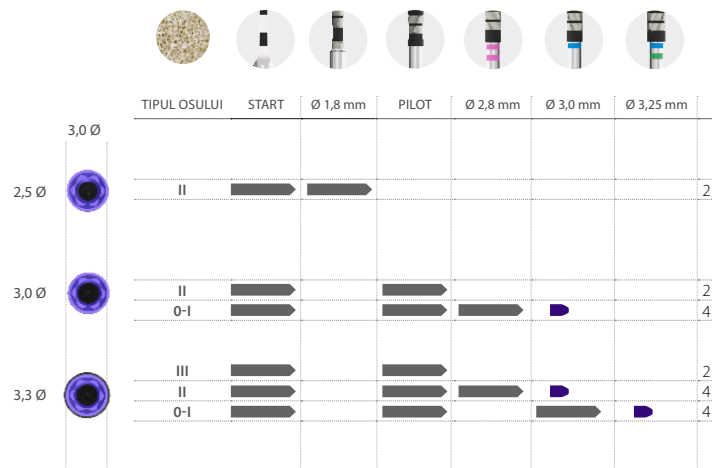

Lungimea implantului (de la 7,5 la 15 mm)


 Lungimea totală a implantului
 6,5 mm adâncime de găurire
 2-3 mm adâncime de găurire

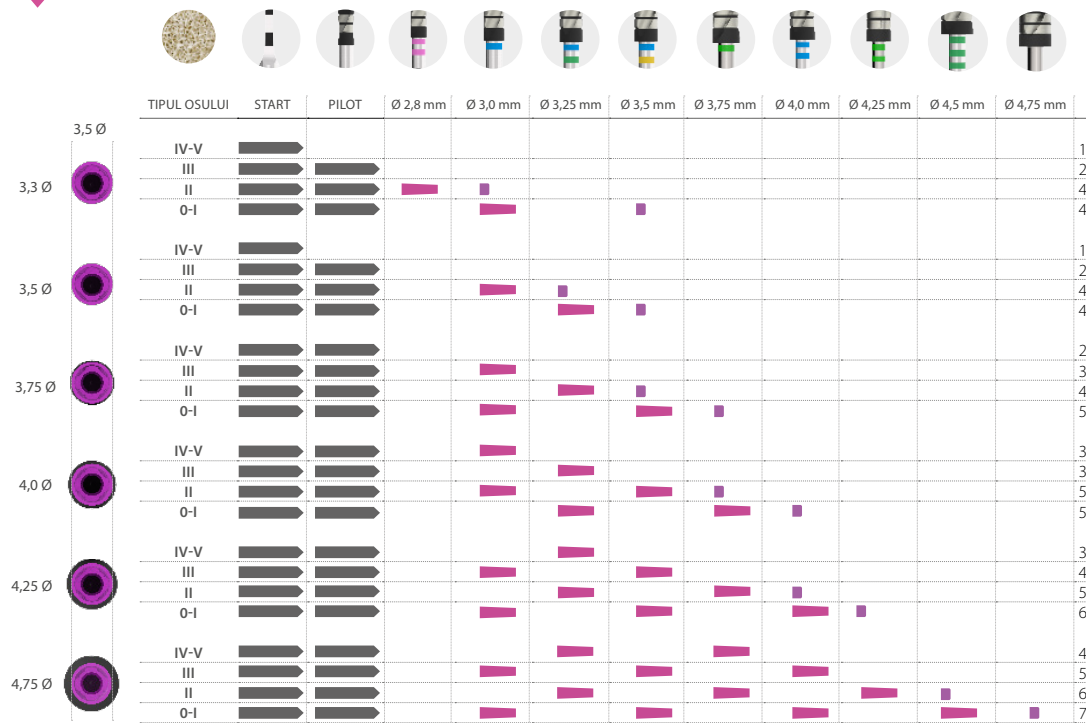



Lungimea implantului (de la 4,5 la 6,5 mm)

— Lungimea totală a implantului
X.X Ø Lungimea totală a implantului cu burghiul cu diametrul specificat
■ 2-3 mm adâncime de găurire

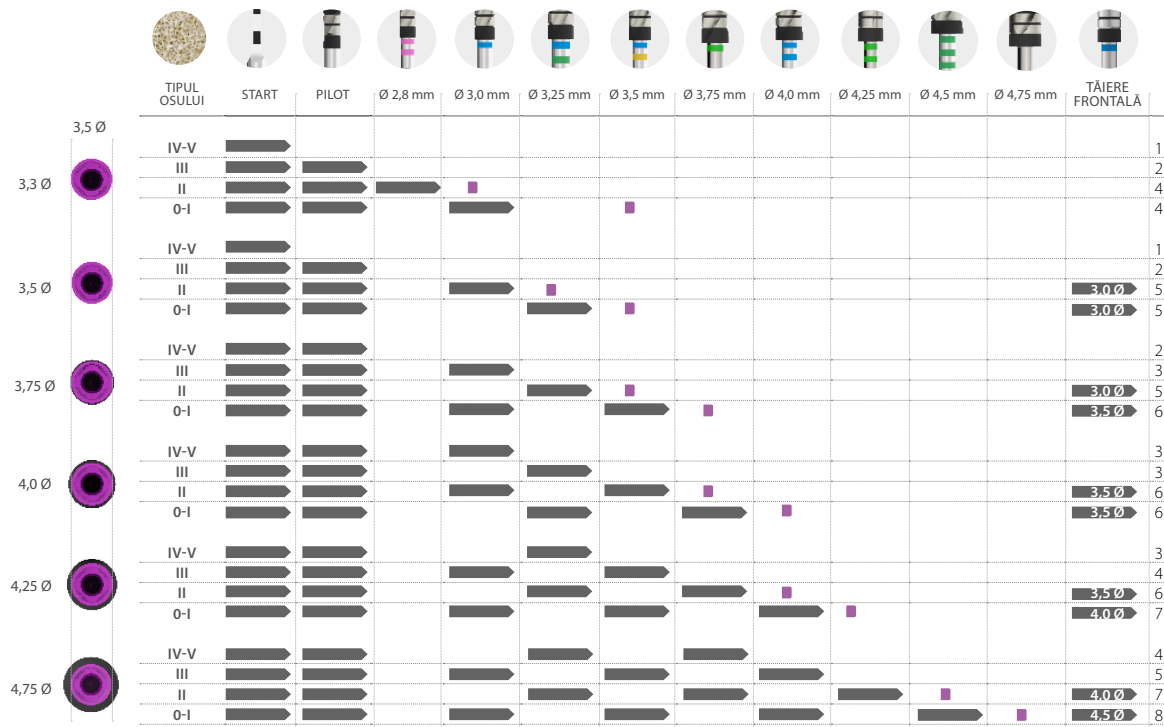


Platformă îngustă/CORE
Diametrul platformei Ø3,5 mm

găurire
Ghid de secvență de

bt
Human
Technology

Lungimea implantului (de la 6,5 la 13 mm)


— Lungimea totală a implantului
— 5,5 mm adâncime de găurire

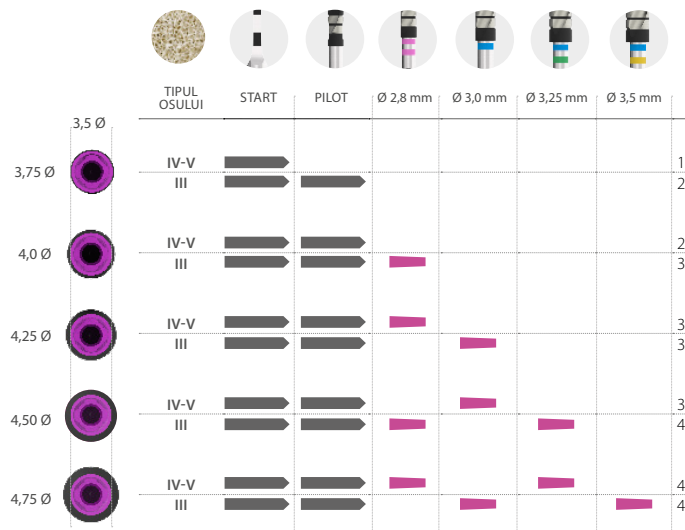

IMPORTANT:
Secvență de frezare valabilă
numai pentru implanturile
CORE-X®

Lungimea implantului (de la 4,5 la 5,5 mm)

→ Lungimea totală a implantului

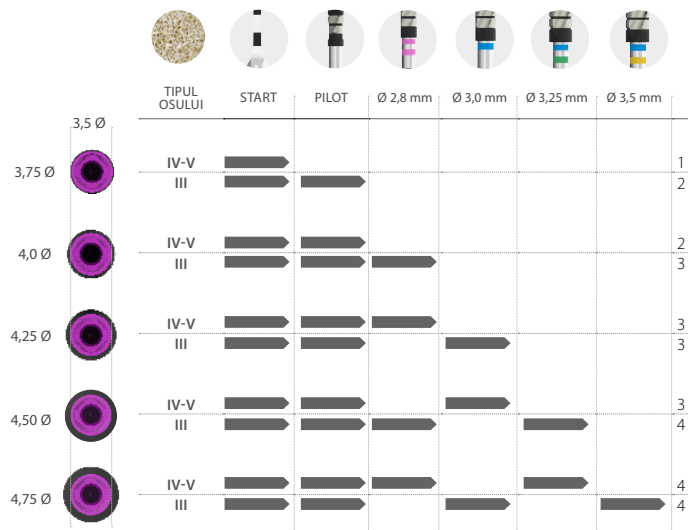

IMPORTANT:
Secvență de frezare valabilă
numai pentru implanturile
CORE-X®




Lungimea implantului

(de la 10 la 15 mm)



- Lungimea totală a implantului
- 75 % din lungimea totală a implantului
- 25 % din lungimea totală a implantului
- 5,0 mm adâncime de găurire

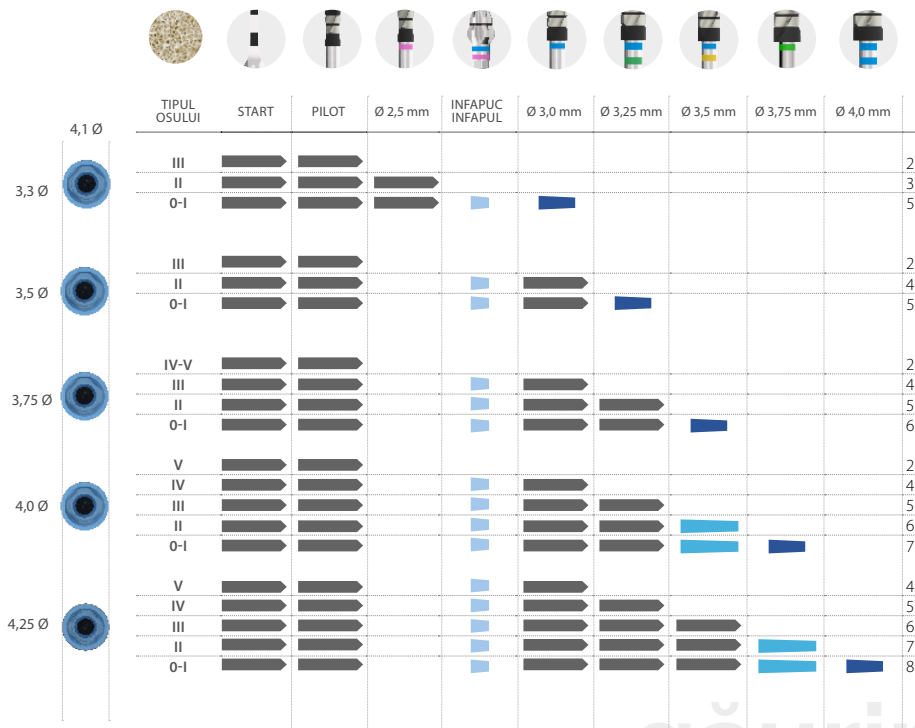


găurire
Ghid de secvență de



Lungimea implantului (de la 5,5 la 8,5 mm)


-  Lungimea totală a implantului
-  Lungimea totală a implantului cu burghiul cu diametrul specificat
-  5,0 mm adâncime de găurire
-  2-3 mm adâncime de găurire

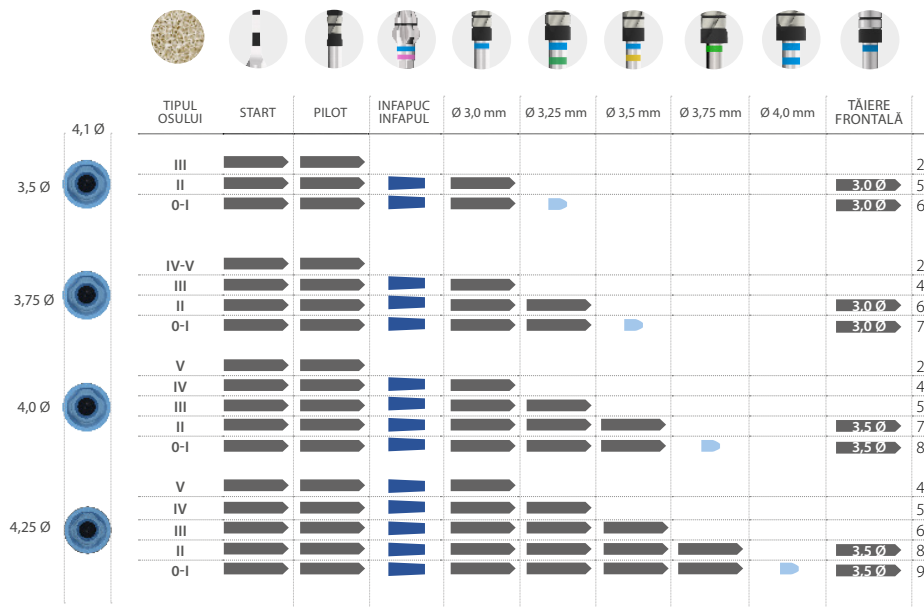

Lungimea implantului (de la 8,5 la 15 mm)



 Lungimea totală a implantului
 6,5 mm adâncime de găurire
 3 mm adâncime de găurire

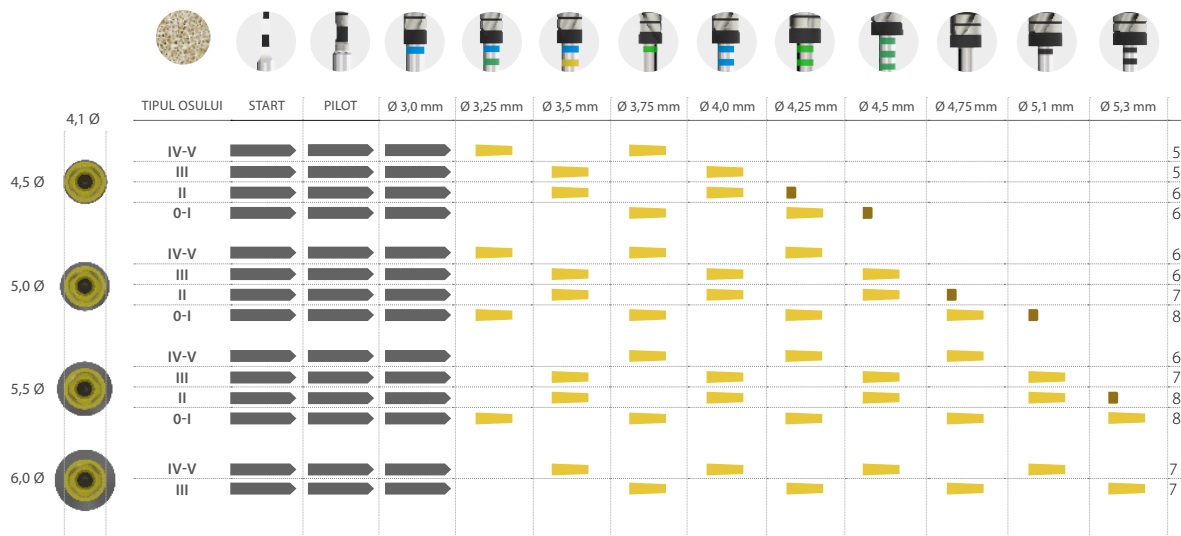

Lungimea implantului (de la 4,5 la 7,5 mm)



- Lungimea totală a implantului
- Lungimea totală a implantului cu burghiul cu diametrul specificat
- 3 mm adâncime de găurire

	TIPUL OSULUI	START	PILOT	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,25 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,75 mm	Ø 5,1 mm	Ø 5,3 mm	TĂIERE FRONTALĂ	
4,1 Ø															
4,5 Ø	IV-V														5
	III														5
	II													4,0 Ø	7
	0-I													4,0 Ø	7
5,0 Ø	IV-V														6
	III														6
	II													4,5 Ø	8
	0-I													4,5 Ø	9
5,5 Ø	IV-V														6
	III														7
	II													5,1 Ø	9
	0-I													5,1 Ø	9
6,0 Ø	IV-V														7
	III														7