



Guide till rekommenderad borrningssekvens

för Interna BTI-implantat



OBS: kontakta din distributör för information om produktens tillgänglighet på de olika marknaderna

Borrdjupsmarkeringar

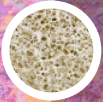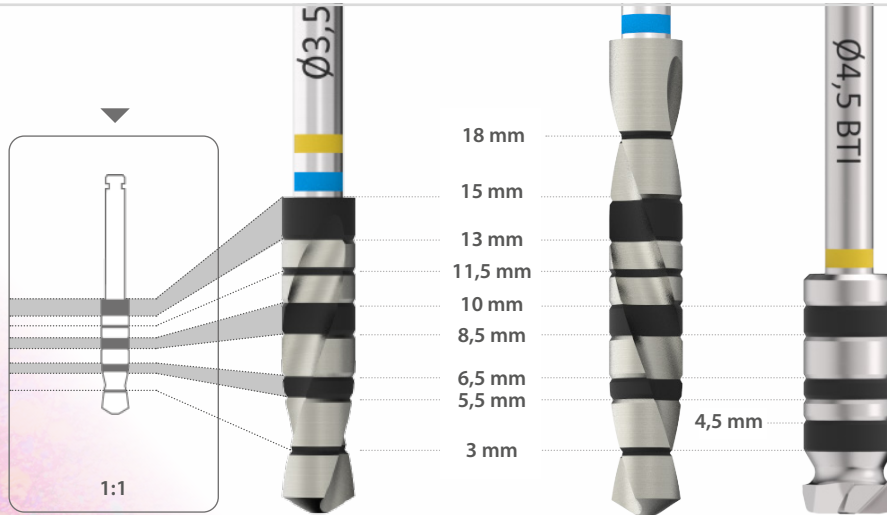

Klass/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

BORR

Inledande borrar

Borrar

Borrar för försänkning

Främre skärborrar

VARVTAL

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

SKÖLJNING

ja

nej


nej

nej

Implantatlängder


(från 6,5 till 13 mm)

 Implantatets totala längd
 6,5 mm borrhjup
 2-3 mm borrhjup

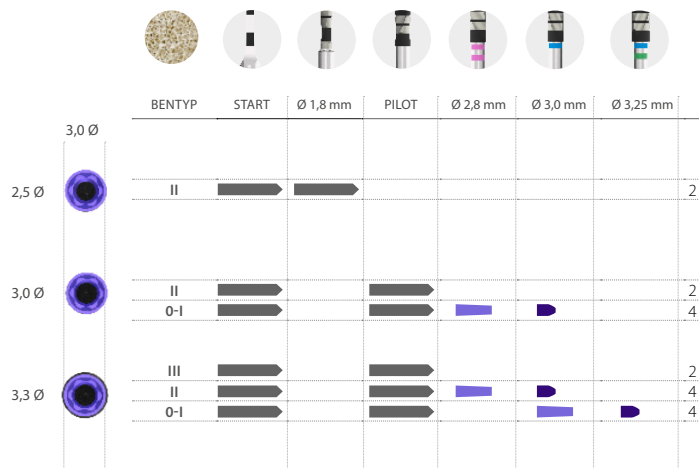

Implantatlängder (5,5 mm)

Implantatets totala längd
 2-3 mm borrhjup

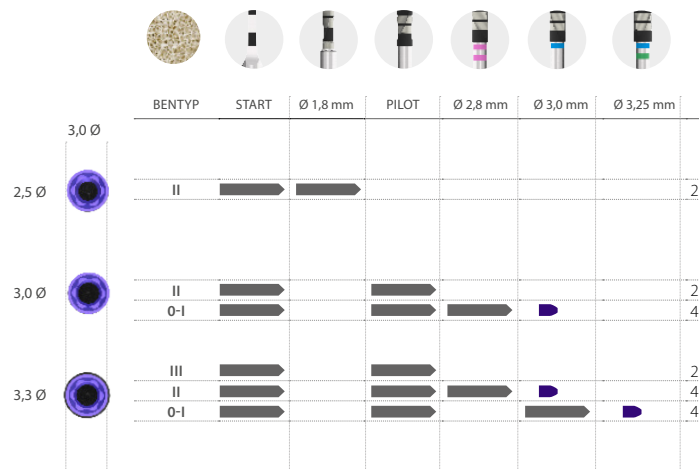



Implantatlängder

(från 7,5 till 15 mm)

Implantatets totala längd
6,5 mm borrhjup
2-3 mm borrhjup



Smal/CORE platform
Plattformsdiameter Ø3,5 mm


borrningssekvens
Guide till



Implantatlängder

(från 4,5 till 6,5 mm)

- Implantatets totala längd
- Implantatets totala längd med borrh med specificerad diameter
- 2-3 mm borrhjup

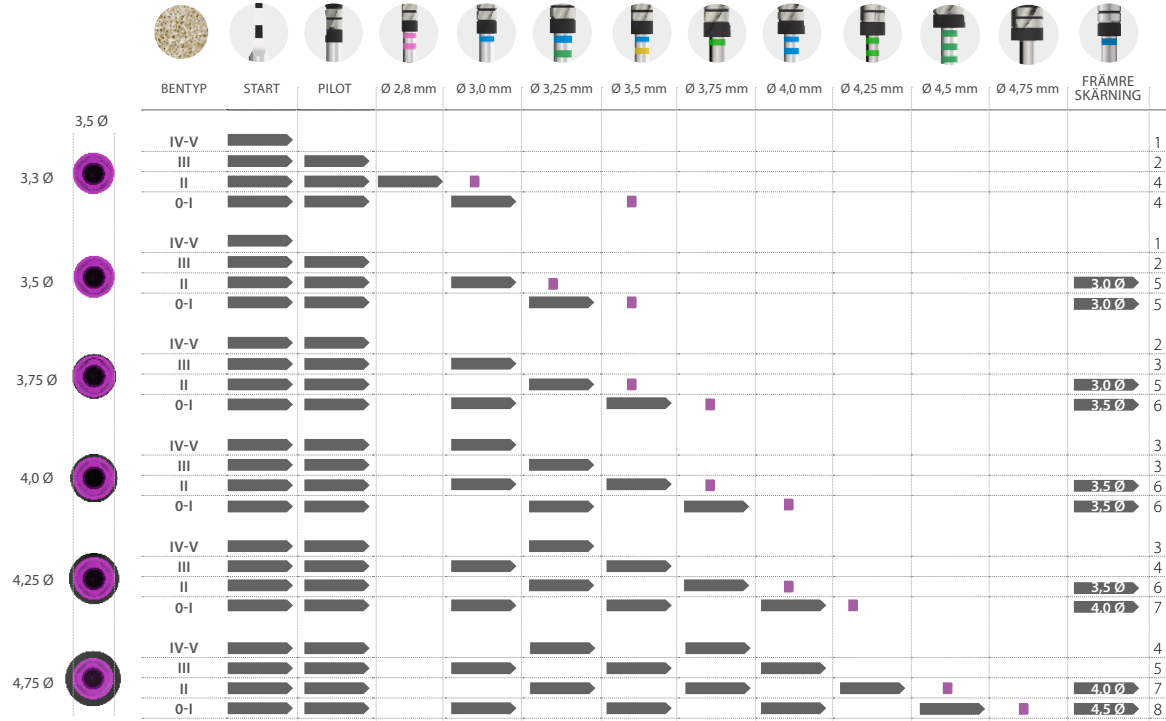

Smal/CORE plattform
Plattformsdiameter Ø3,5 mm


borrningssekvens
Guide till



Implantatlängder

(från 6,5 till 13 mm)

Implantatets totala längd
5,5 mm borrhjup

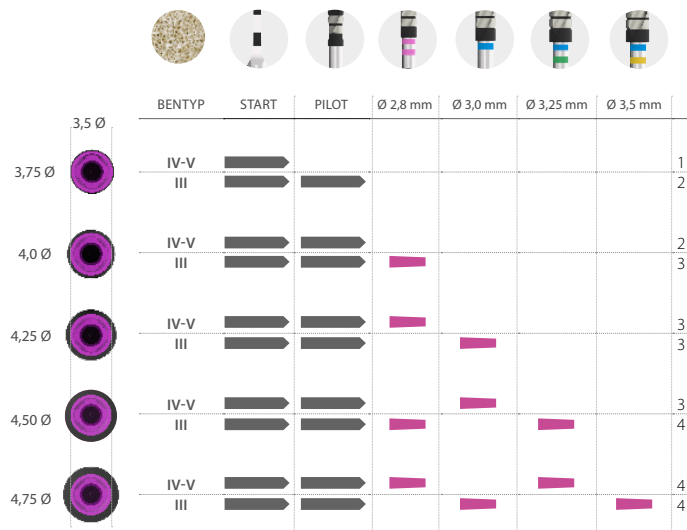


VIKTIGT:
Fräsekvensen gäller endast
för CORE-X® -implantat

borrningssekvens
Guide till

Implantatlängder

(från 4,5 till 5,5 mm)

Implantatets totala längd


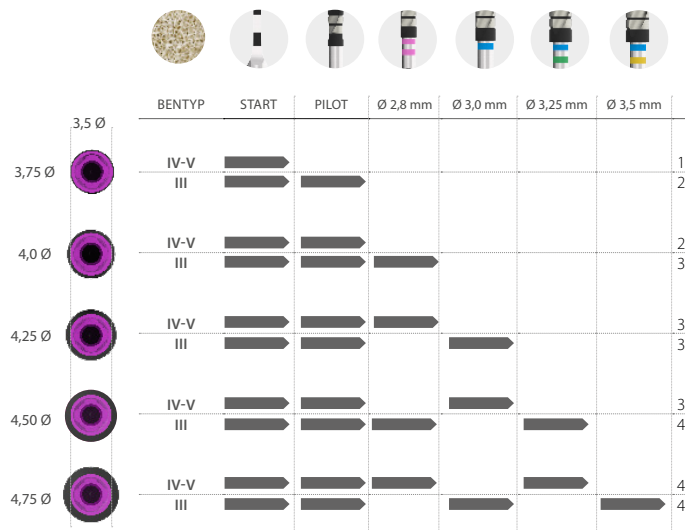


VIKTIGT:

Fräsekvensen gäller endast för CORE-X® -implantat

Implantatlängder

(från 10 till 15 mm)

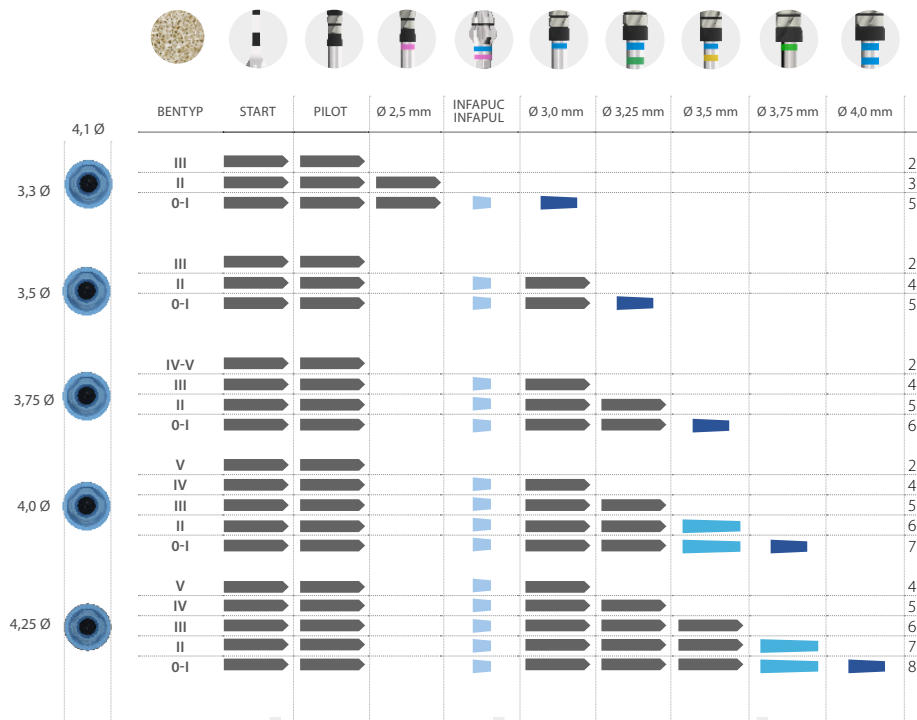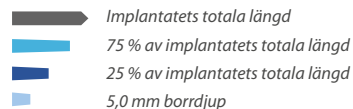


borrningssekvens
Guide till



Implantatlängder

(från 5,5 till 8,5 mm)

- Implantatets totala längd
- Implantatets totala längd med borr med specificerad diameter
- 5,0 mm borrhjup
- 2-3 mm borrhjup

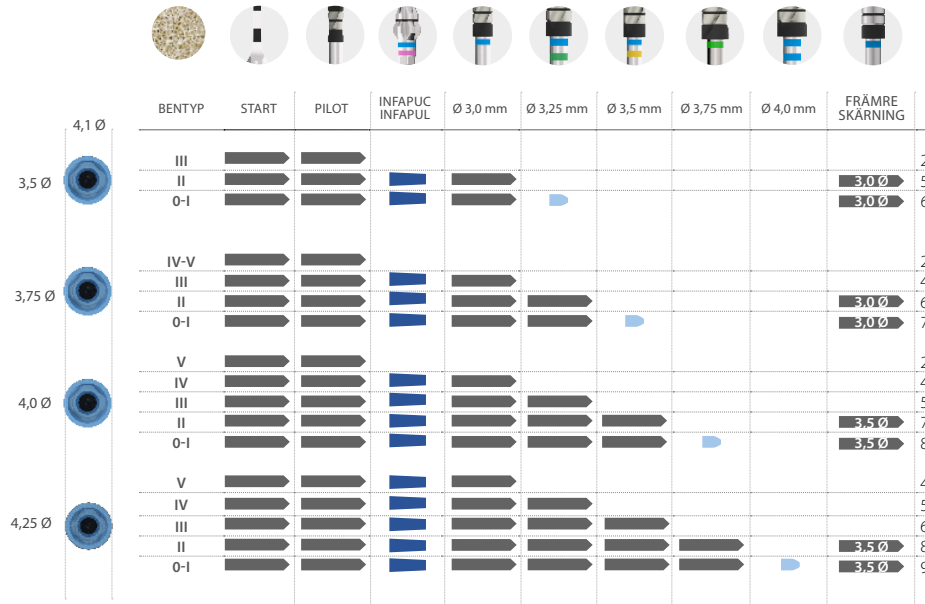


Implantatlängder

(från 8,5 till 15 mm)



Implantatets totala längd
6,5 mm borrhjup
3 mm borrhjup

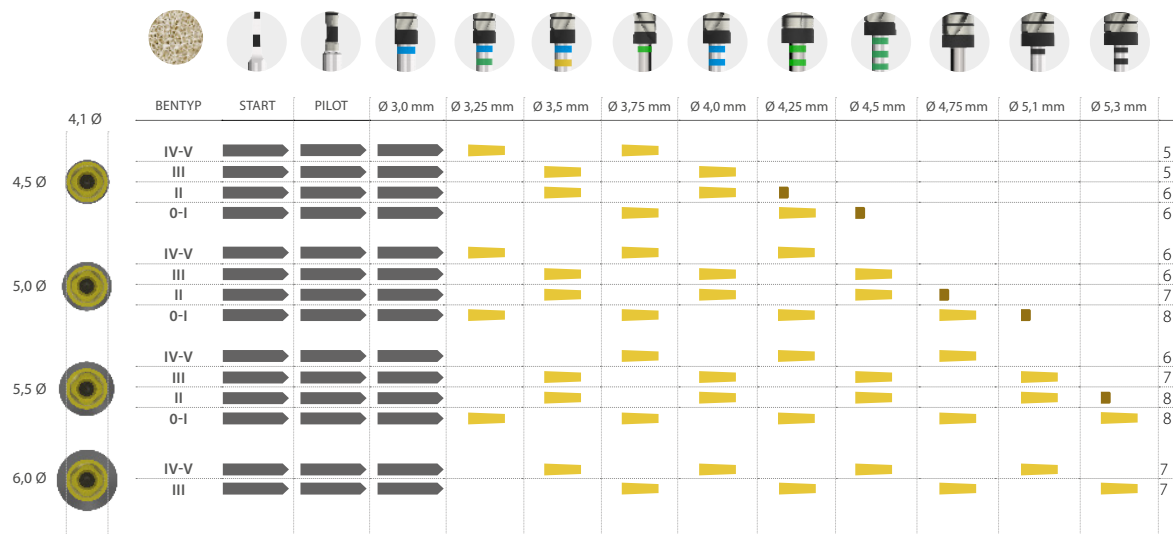

Implantatlängder

(från 4,5 till 7,5 mm)

- Implantatets totala längd
- X,X Ø Implantatets totala längd med borrh med specificerad diameter
- 3 mm borrhdjup

