


Doporučený průvodce sekvencemi vrtání

pro implantáty Externa BTI



POZNÁMKA: o dostupnosti výrobku na různých trzích se informujte u svého distributora.

Značky hloubky vrtáku

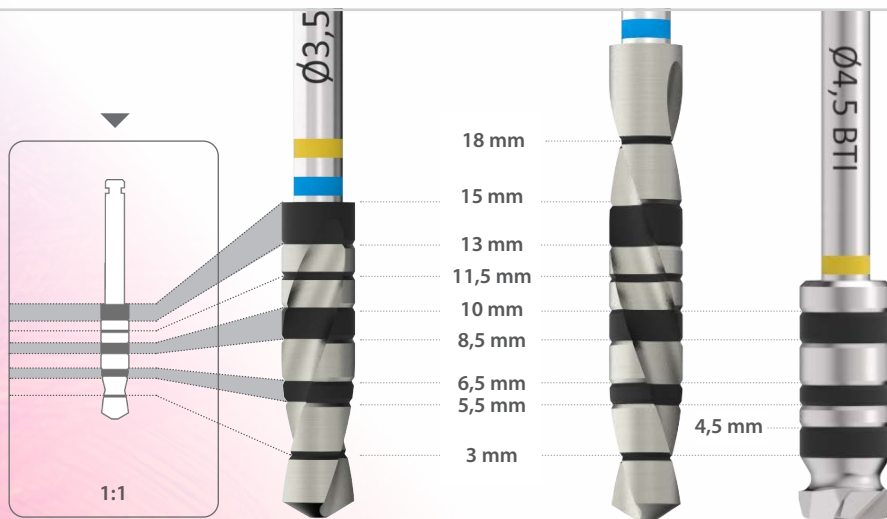

TŘÍDA / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

VRTÁK

Počáteční vrták
Vrták
Zahloubovací vrták
Přední řezací vrtáky

OTÁČKY

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

IRIGACE

ano
ne
ne
ne



Délka implantátu

(od 10 do 15 mm)

- Celková délka implantátu
- 75 % celkové délky implantátu
- 25 % celkové délky implantátu
- Hloubka vrtání 5,0 mm



Tiny Platforma
Průměr plošiny Ø3,5 mm

vrtání
Průvodce sekvencemi


bti.
Human
Technology





Délka implantátu

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Celková délka implantátu
- Celková délka implantátu se stanoveným průměrem vrtáku
- Hloubka vrtání 5 mm (nepoužívá se u délky 4,5 mm)

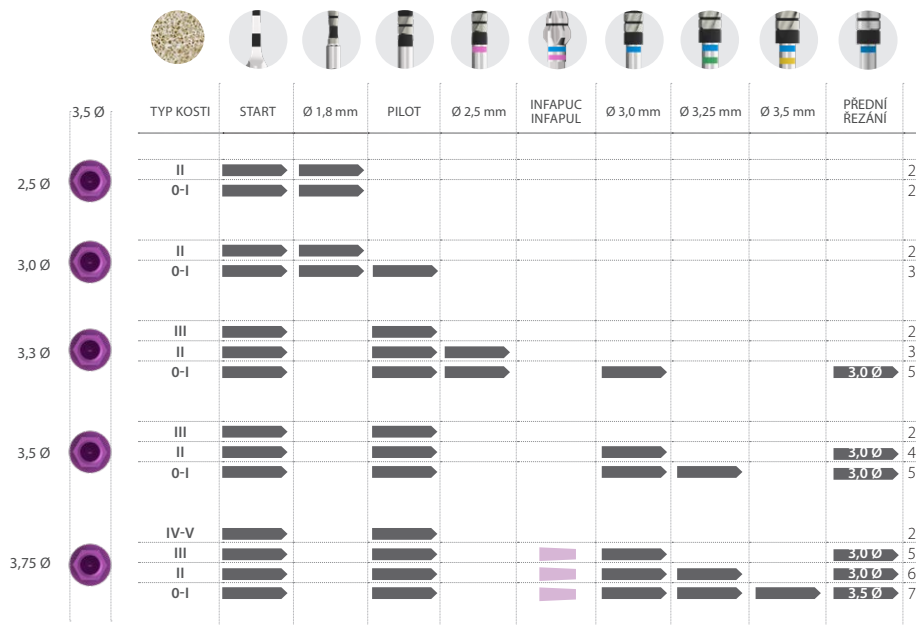


Délka implantátu (od 10 do 15 mm)

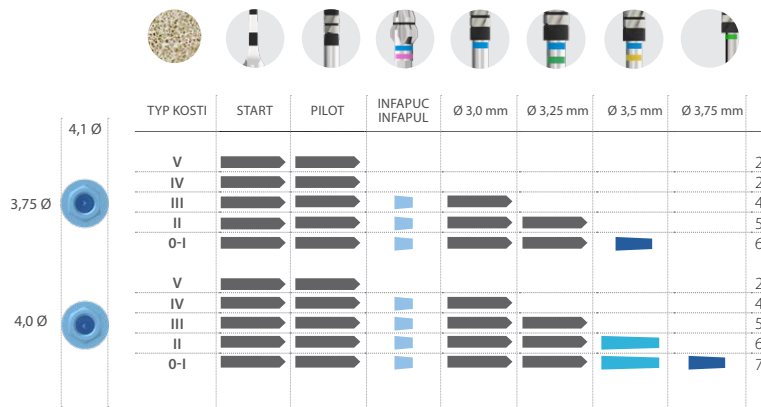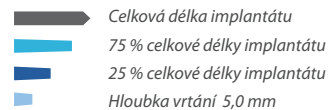



Délka implantátu (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Celková délka implantátu
- Celková délka implantátu se stanoveným průměrem vrtáku
- Hloubka vrtání 5,0 mm
- Hloubka vrtání 2-3 mm

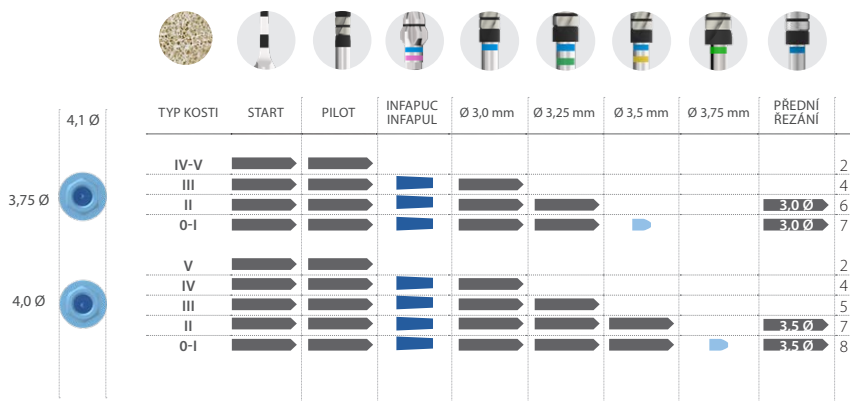

Univerzální Platforma


Průměr plošiny Ø4,1 mm

vrtání
Průvodce sekvencemi

Délka implantátu (od 10 do 15 mm)



-  Celková délka implantátu
-  75 % celkové délky implantátu
-  25 % celkové délky implantátu
-  Hloubka vrtání 4,5 mm

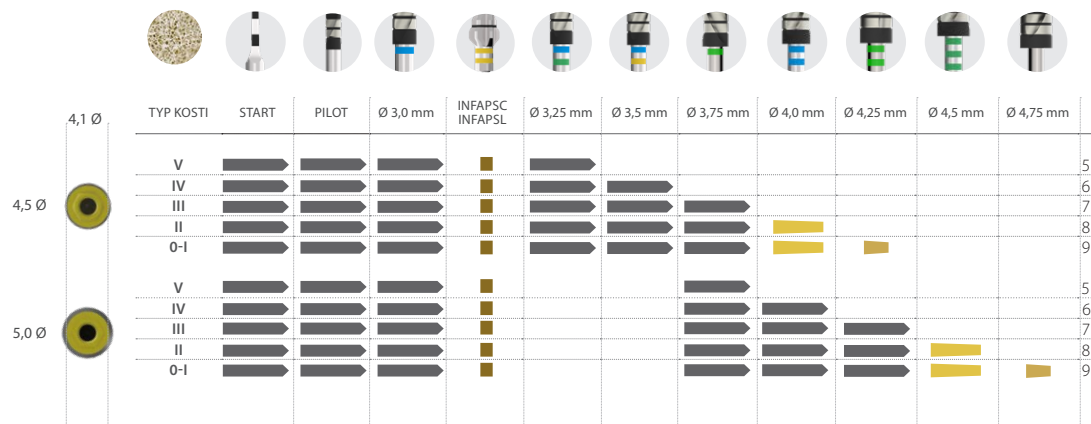

Délka implantátu (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

-  Celková délka implantátu
-  Celková délka implantátu se stanoveným průměrem vrtáku
-  Hloubka vrtání 4,5 mm

