


Doporučený průvodce sekvencemi vrtání

pro implantáty Externa BTI



POZNÁMKA: o dostupnosti výrobku na různých trzích se informujte u svého distributora.

Značky hloubky vrtáku

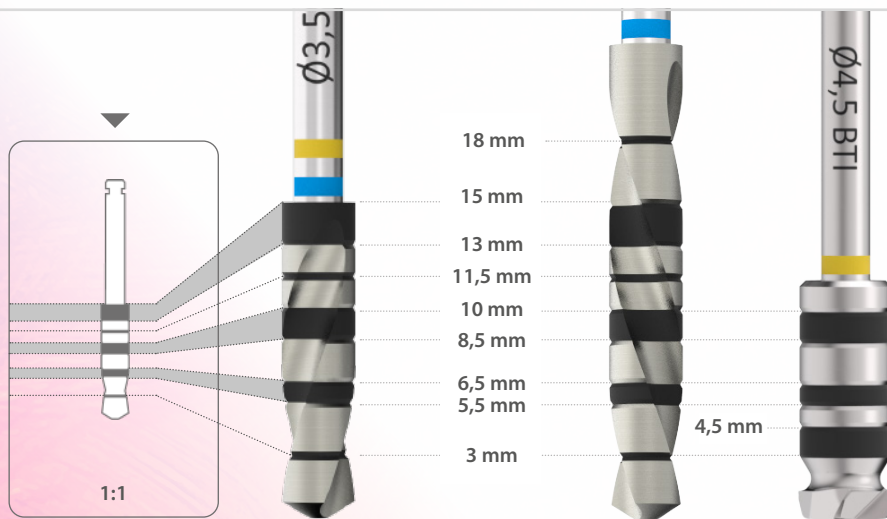

Třída/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

VRTÁK

Počáteční vrták

Vrták

Zahloubovací vrták

Přední řezací vrtáky

OTÁČKY

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

IRIGACE

ano

ne

ne


ne



Délka implantátu

(od 10 do 15 mm)

- Celková délka implantátu
- 75 % celkové délky implantátu
- 25 % celkové délky implantátu
- Hloubka vrtání 5,0 mm

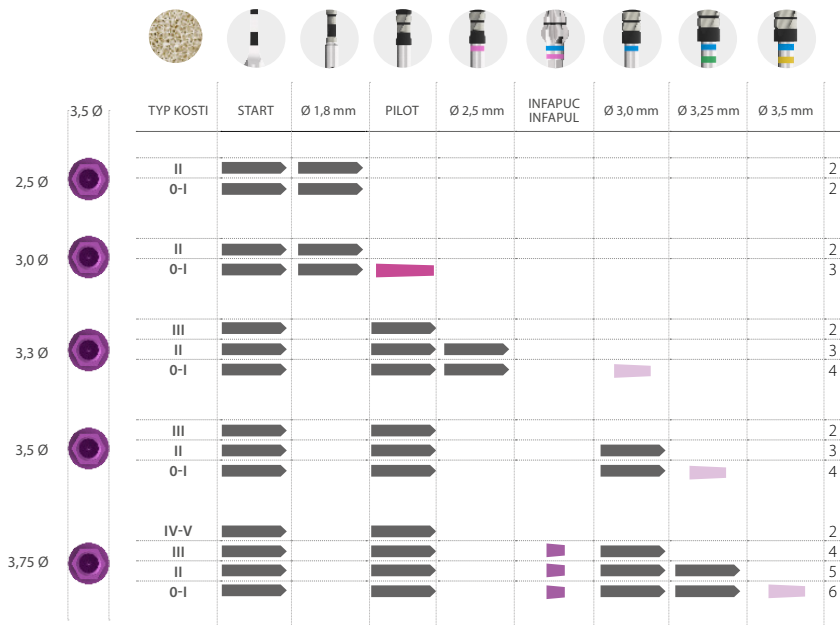

Tiny Platforma
Průměr plošiny Ø3,5 mm

vrtání
Průvodce sekvencemi


bti.
Human
Technology



Délka implantátu

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Celková délka implantátu
- Celková délka implantátu se stanoveným průměrem vrtáku
- Hloubka vrtání 5 mm (nepoužívá se u délky 4,5 mm)


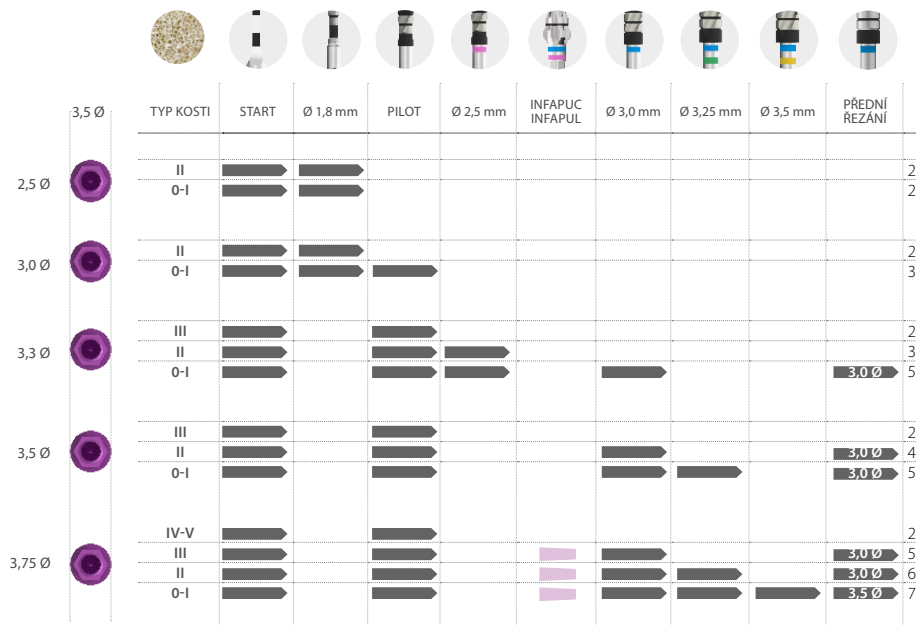


Tiny Platforma
Průměr plošiny Ø3,5 mm

vrtání
Průvodce sekvencemi




Délka implantátu (od 10 do 15 mm)

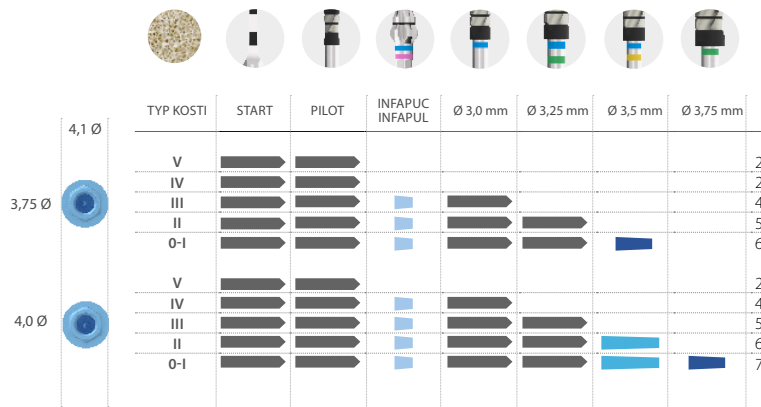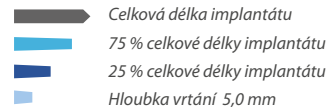


Délka implantátu (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Celková délka implantátu
- Celková délka implantátu se stanoveným průměrem vrtáku
- Hloubka vrtání 5,0 mm
- Hloubka vrtání 2-3 mm

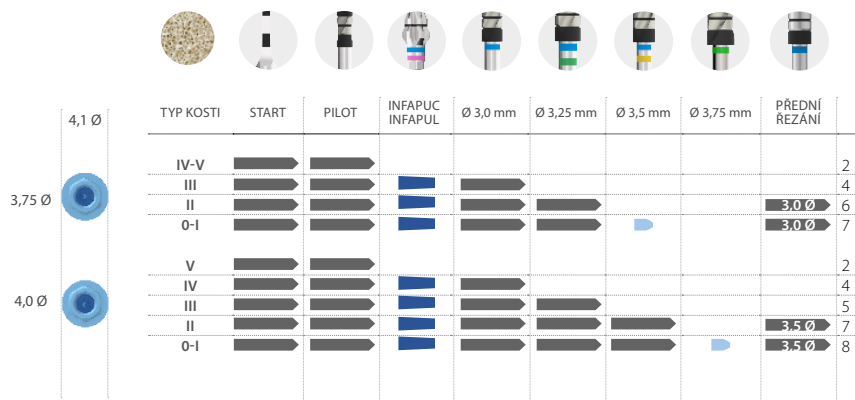

Délka implantátu (od 10 do 15 mm)

- Celková délka implantátu
- 75 % celkové délky implantátu
- 25 % celkové délky implantátu
- Hloubka vrtání 4,5 mm

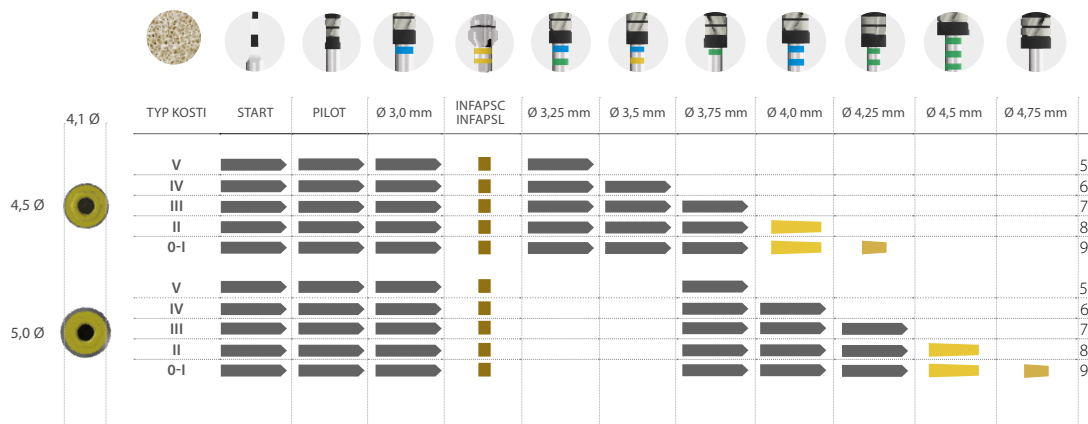

Délka implantátu (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



- Celková délka implantátu
- Celková délka implantátu se stanoveným průměrem vrtáku
- Hloubka vrtání 4,5 mm

