


Anbefalet boresekvensguide

for Externa BTI-implantater



BEMÆRK: Kontakt din distributør for at høre, om produktet er tilgængeligt på de forskellige markeder.

Boredybdemærker

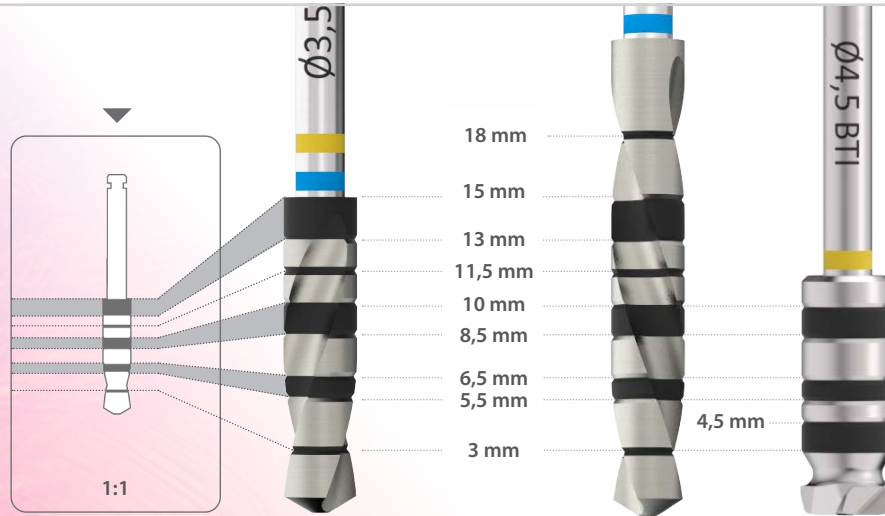

KLASSE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BOR

Indledende bor
 Bor
 Sænkebor
 Front skærebør

REVOLUTIONER

800 - 1.000 rpm
 50 - 75 rpm
 150 - 200 rpm
 50 - 75 rpm

VANDING

ja
 nej
 nej
 nej



Implantatlængder

(fra 10 til 15 mm)



- Implantatets samlede længde
- 75 % af implantatets samlede længde
- 25 % af implantatets samlede længde
- 5,0 mm boreddybde





Implantatlængder

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



Implantatets samlede længde



Implantatets samlede længde med boremaskine
med specificeret diameter





5 mm boreddybde (må ikke anvendes i 4,5 mm længde)





Implantatlængder

(fra 10 til 15 mm)

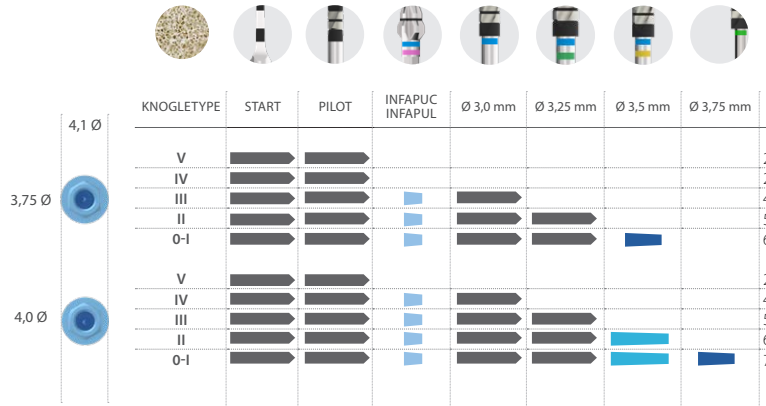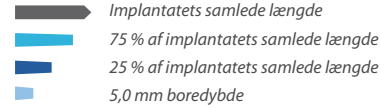

Boresekvensguide




Implantatlængder

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



- Implantatets samlede længde
- X,X Ø 75 % af implantatets samlede længde
- 5,0 mm boreddybde
- 2-3 mm boreddybde

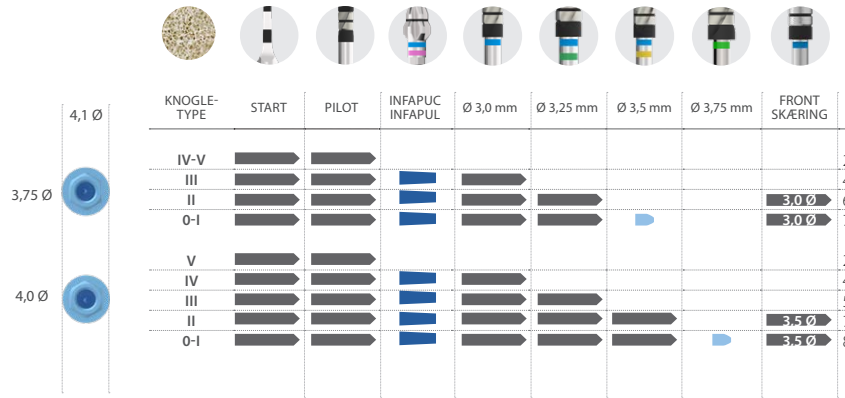




Implantatlængder

(fra 10 til 15 mm)



- Implantatets samlede længde
- 75 % af implantatets samlede længde
- 25 % af implantatets samlede længde
- 4,5 mm boreddybde

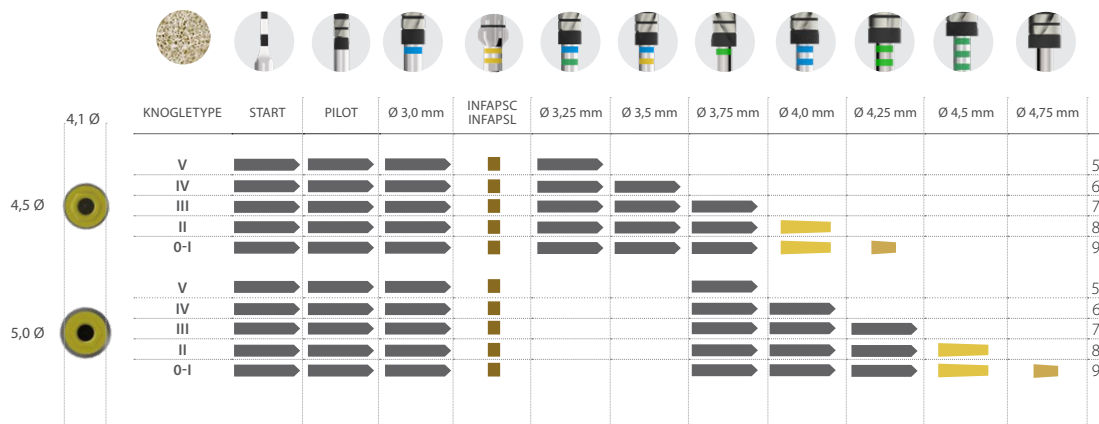

Boresekvensguide

Implantatlængder

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



Implantatets samlede længde



Implantatets samlede længde med boremaskine med specificeret diameter



4,5 mm boreddybde

