


Empfohlene Bohrsequenzen

für *BTI Externa Implantate*



Hinweis: Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der Produkte in den verschiedenen Ländern.

Lasermarkierungen

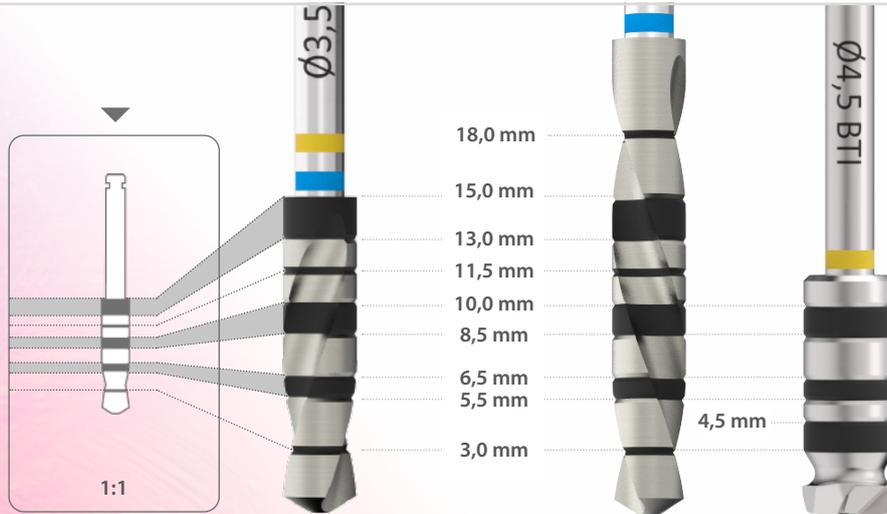

Klasse/Hounsfield	III	IV	V
I	1.050 - 1.400	400 - 500	100 - 350
II	850 - 1.000	400 - 500	100 - 350

BOHRER	UMDREHUNGSZAHL	KÜHLUNG
Initialbohrer	800 - 1.000 U/min	ja
Spiralbohrer	50 - 75 U/min	nein
Versenker	150 - 200 U/min	nein
Bohrer mit frontaler Schneide	50 - 75 U/min	nein



Implantate

(Länge von 10 bis 15 mm)



- Gesamtlänge des Implantats
- 75 % der Gesamtlänge des Implantats
- 25 % der Gesamtlänge des Implantats
- 5,0 mm Bohrtiefe



Tiny Plattform
 Prothetische Plattform: Ø 3,5 mm

empfohlene
Bohrsequenzen






Implantate

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers
 5,0 mm Bohrtiefe (Nicht mit 4,5 mm langen Implantaten verwenden)

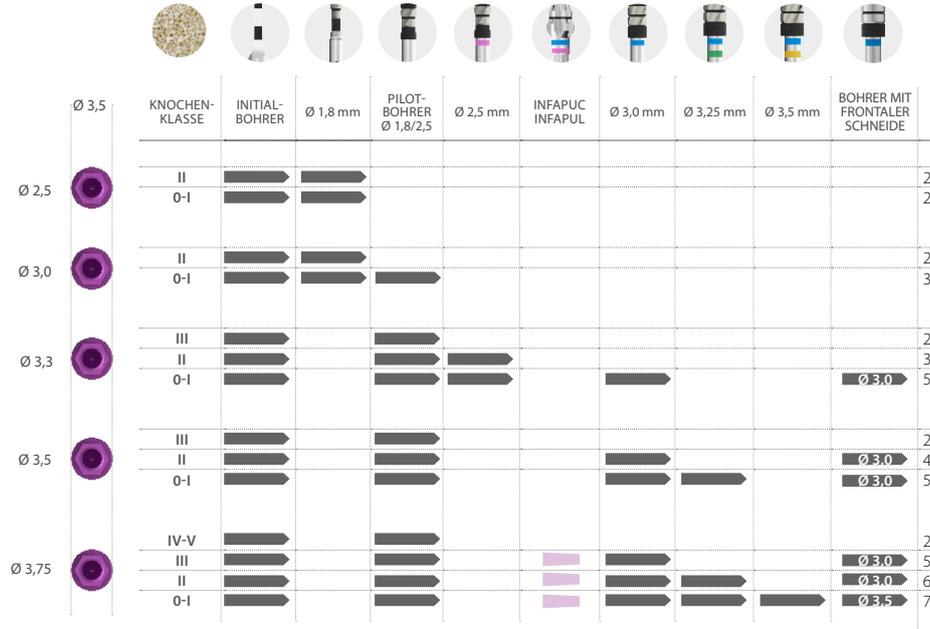


Tiny Plattform
 Prothetische Plattform: Ø 3,5 mm



empfohlene Bohrsequenzen





Implantate

(Länge von 10 bis 15 mm)

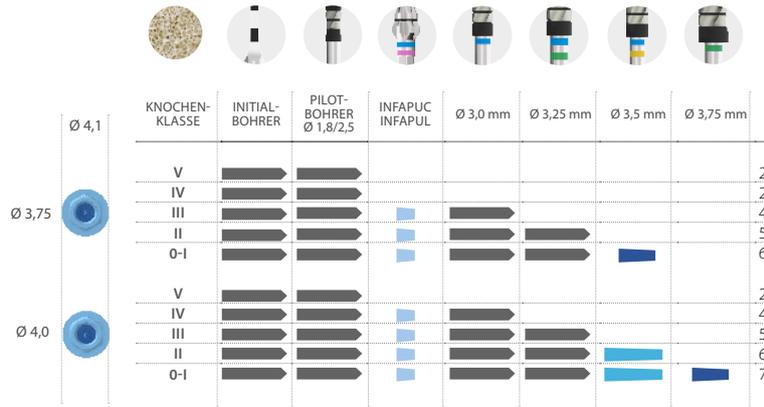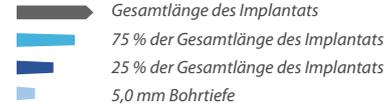




Implantate

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Gesamtlänge des Implantats
- Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers
- 5,0 mm Bohrtiefe
- 2-3 mm Bohrtiefe

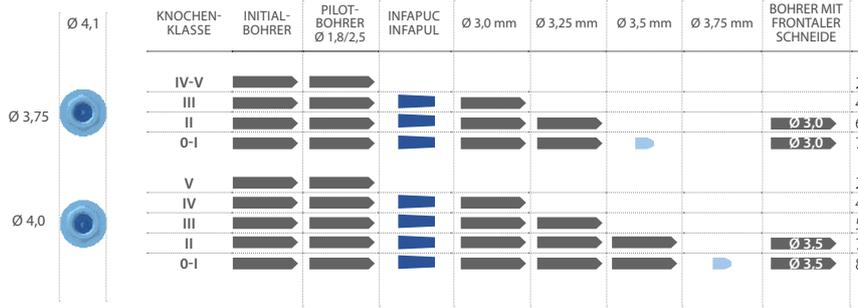



Implantate

(Länge von 10 bis 15 mm)

- Gesamtlänge des Implantats
- 75 % der Gesamtlänge des Implantats
- 25 % der Gesamtlänge des Implantats
- 4,5 mm Bohrtiefe

Standard Plus Plattform

Prothetische Plattform: Ø 4,1 mm



empfohlene
Bohrsequenzen




Implantate

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Gesamtlänge des Implantats
- Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers
- 4,5 mm Bohrtiefe

Standard Plus Plattform

Prothetische Plattform: Ø 4,1 mm

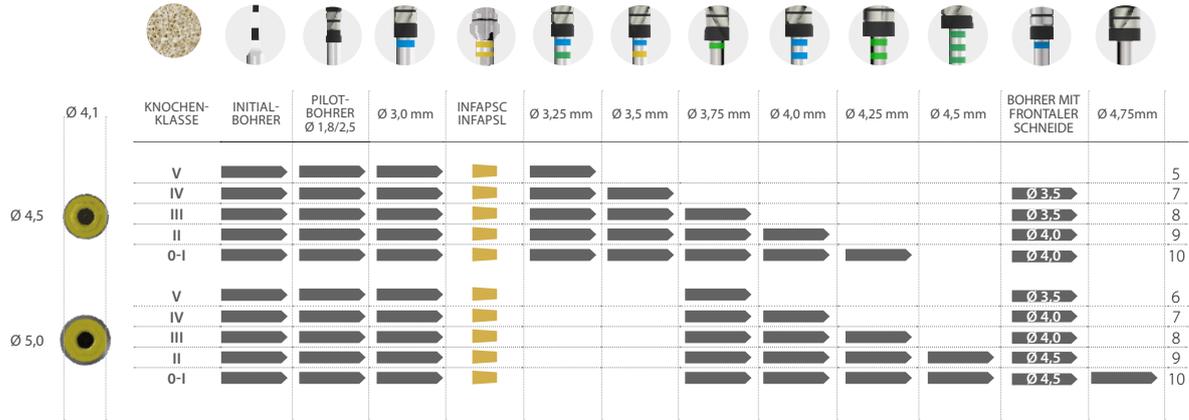

empfohlene
Bohrsequenzen