


Empfohlene Bohrsequenzen

für BTI Externa Implantate



Hinweis: Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der Produkte in den verschiedenen Ländern.

Lasermarkierungen

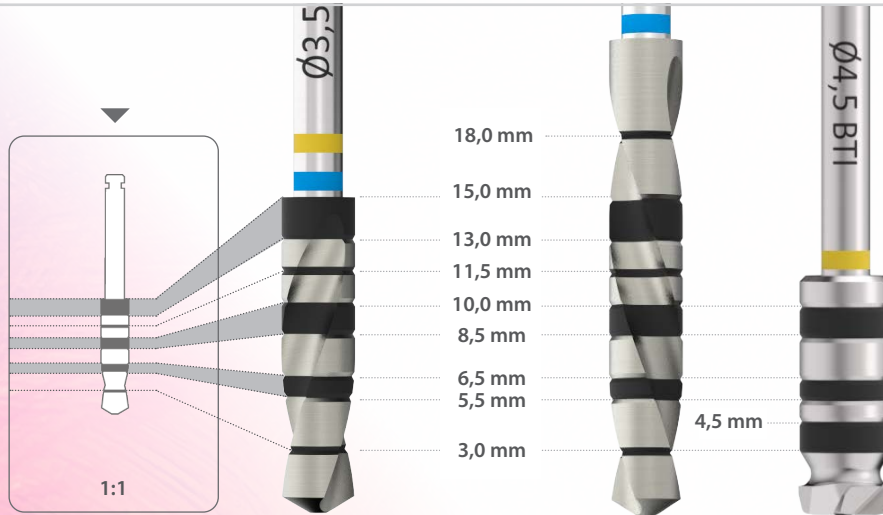

KLASSE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BOHRER

Initialbohrer
Spiralbohrer
Versenker
Bohrer mit
frontaler Schneide

UMDREHUNGSZAHL

800 - 1.000 U/min
50 - 75 U/min
150 - 200 U/min
50 - 75 U/min

KÜHLUNG

ja
nein
nein
nein




Implantate

(Länge von 10 bis 15 mm)



- Gesamtlänge des Implantats
- 75 % der Gesamtlänge des Implantats
- 25 % der Gesamtlänge des Implantats
- 5,0 mm Bohrtiefe

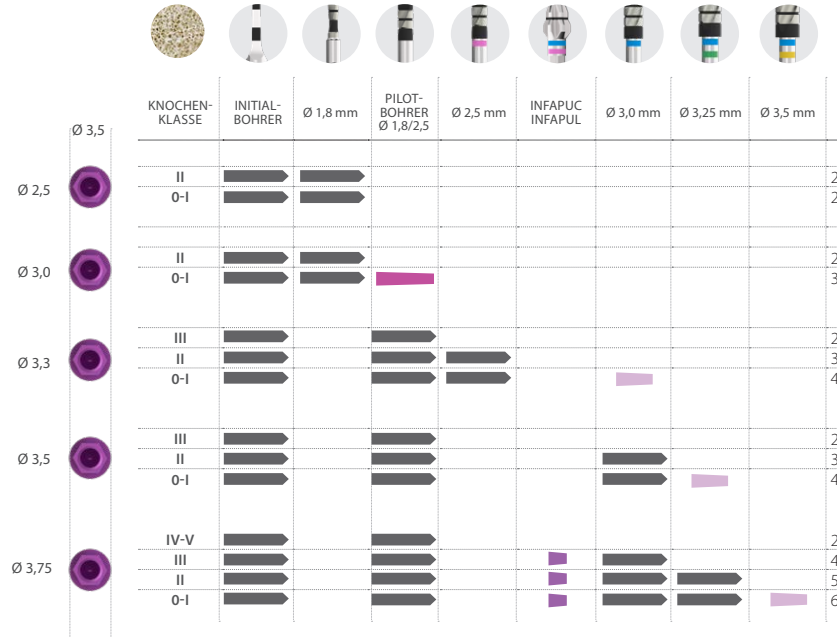



Implantate



(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

■ Gesamtlänge des Implantats
■ Ø X.X Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers
■ 5,0 mm Bohrtiefe (Nicht mit 4,5 mm langen Implantaten verwenden)



Implantate

(Länge von 10 bis 15 mm)

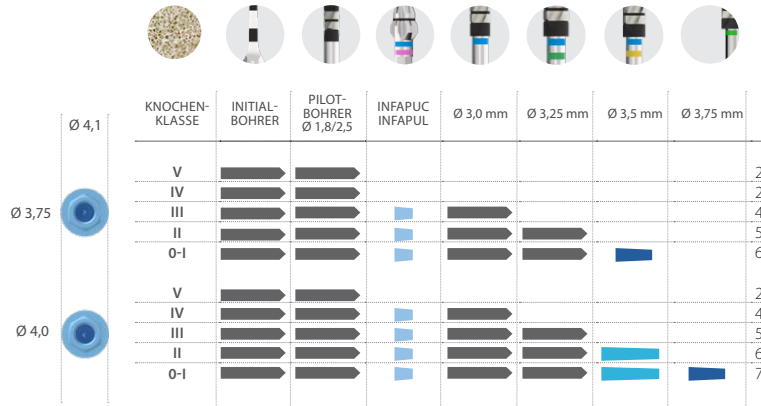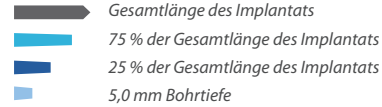


empfohlene
Bohrsequenzen



Implantate

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

-  Gesamtlänge des Implantats
-  Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers
-  5,0 mm Bohrtiefe
-  2-3 mm Bohrtiefe

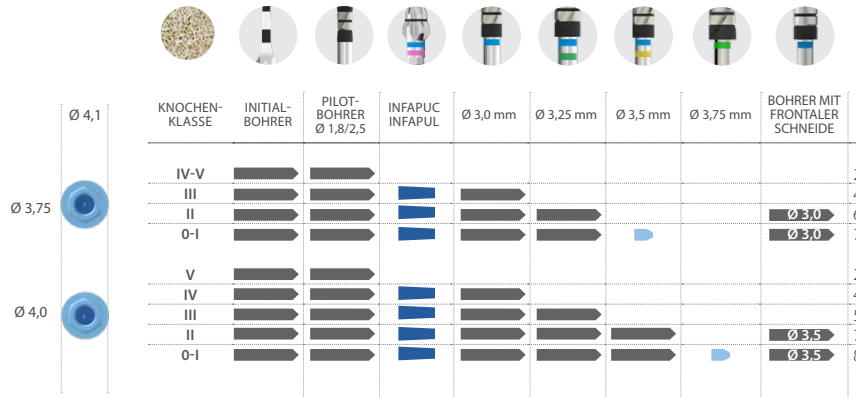


Implantate

(Länge von 10 bis 15 mm)



-  Gesamtlänge des Implantats
-  75 % der Gesamtlänge des Implantats
-  25 % der Gesamtlänge des Implantats
-  4,5 mm Bohrtiefe

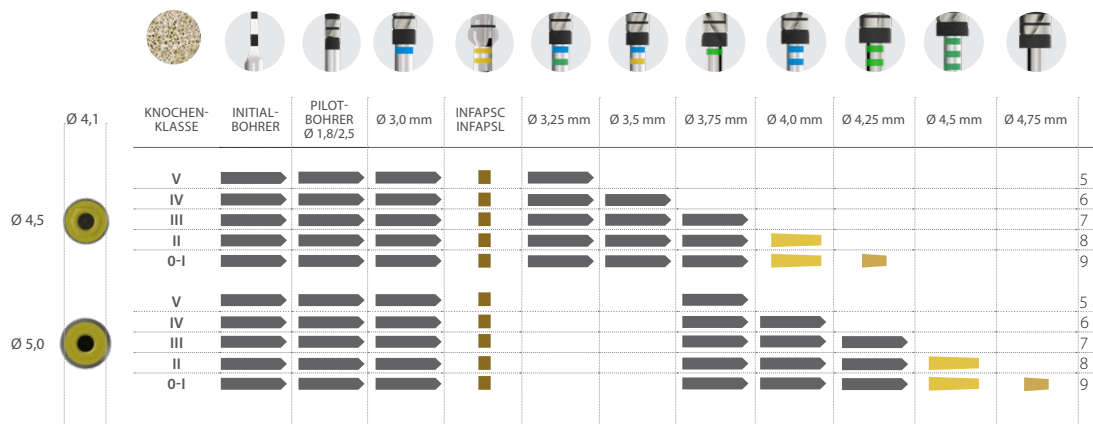


empfohlene
Bohrsequenzen

Implantate

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

 Gesamtlänge des Implantats
 Gesamtlänge des Implantats mit Bohrer des angegebenen Durchmessers
 4,5 mm Bohrtiefe

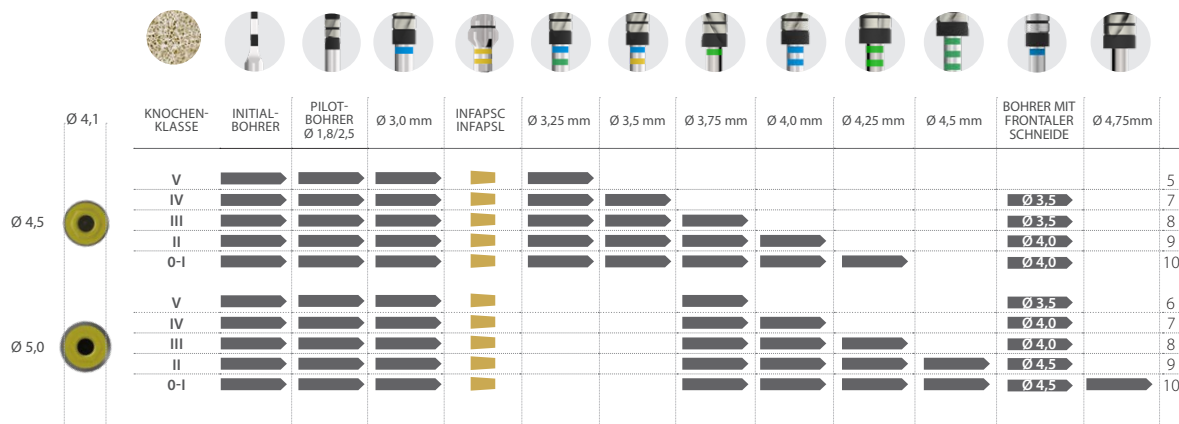

empfohlene
Bohrsequenzen