


Secuencias de fresado recomendadas

para implantes de BTI Externa



NOTA: Consulte disponibilidad del producto en los diferentes mercados con su distribuidor.

Marcas de profundidad de fresado

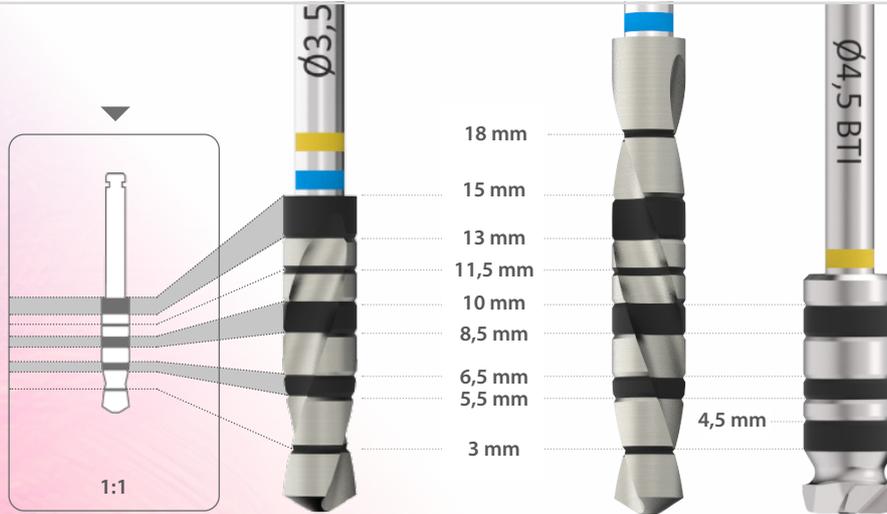

Tipo/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

FRESA

Fresa de inicio

Fresas

Fresas avellanado

Fresas corte frontal

VELOCIDAD

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

IRRIGACIÓN

sí

no

no

no



Implantes longitud

(desde 10 hasta 15 mm)

- Longitud total del implante
- 75 % de la longitud total del implante
- 25 % de la longitud total del implante
- 5,0 mm de profundidad de fresado



Plataforma Tiny
Ø3,5 mm diámetro de plataforma


fresado
Secuencias de





Implantes longitud (4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Longitud total del implante
- X,X Ø Longitud total del implante con fresa del diámetro especificado
- 5 mm de profundidad de fresado (no usar en longitud de 4,5mm)

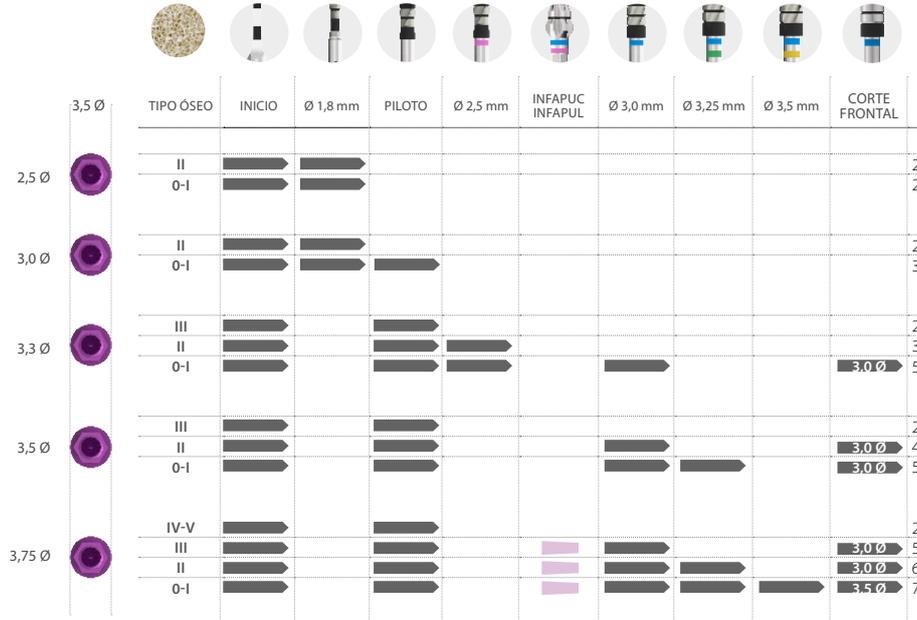

Plataforma Tiny
Ø3,5 mm diámetro de plataforma



fresado
Secuencias de





Implantes longitud

(desde 10 hasta 15 mm)

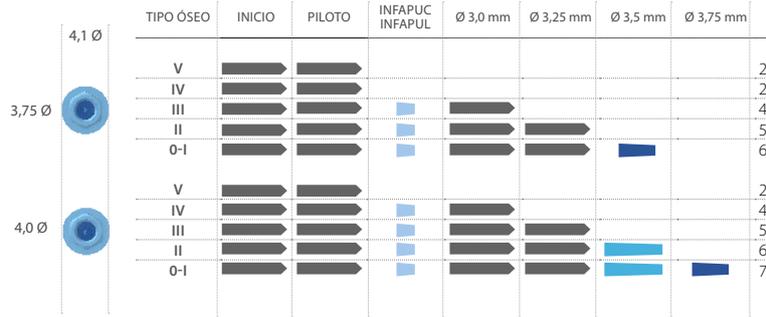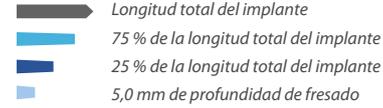




Implantes longitud

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Longitud total del implante
- Longitud total del implante con fresa del diámetro especificado
- 5,0 mm de profundidad de fresado
- 2-3 mm de profundidad de fresado

Plataforma Universal
Ø4,1 mm diámetro de plataforma

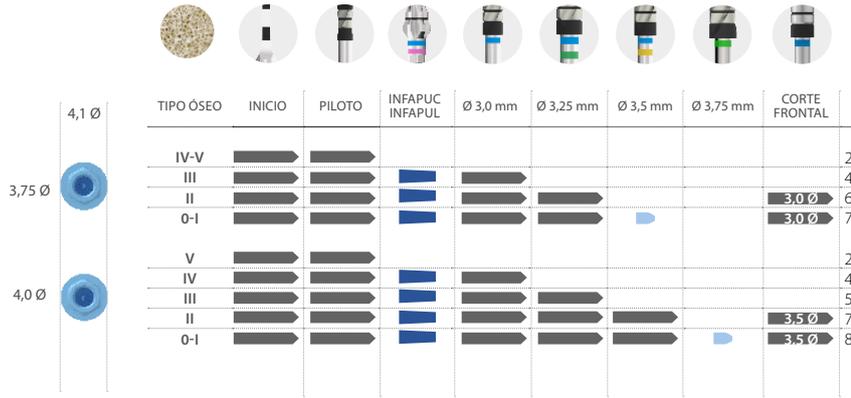

fresado
Secuencias de





Implantes longitud

(desde 10 hasta 15 mm)

-  Longitud total del implante
-  75 % de la longitud total del implante
-  25 % de la longitud total del implante
-  4,5 mm de profundidad de fresado

Plataforma Universal Plus

Ø4,1 mm diámetro de plataforma






Implantes longitud

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

 Longitud total del implante
 Longitud total del implante con fresa del diámetro especificado
 4,5 mm de profundidad de fresado

Plataforma Universal Plus

Ø4,1 mm diámetro de plataforma

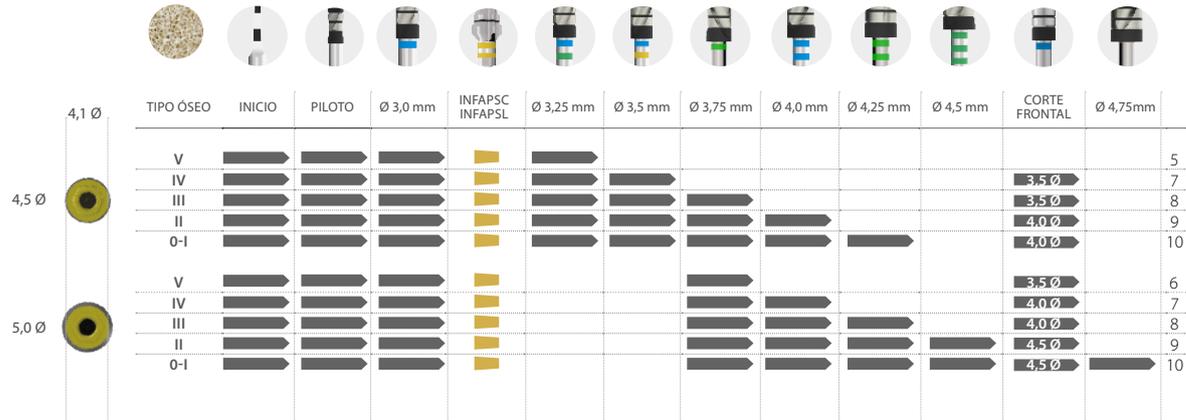

fresado
Secuencias de

