


Secuencias de fresado recomendadas

para implantes de BTI Externa



NOTA: Consulte disponibilidad del producto en los diferentes mercados con su distribuidor.

Marcas de profundidad de fresado

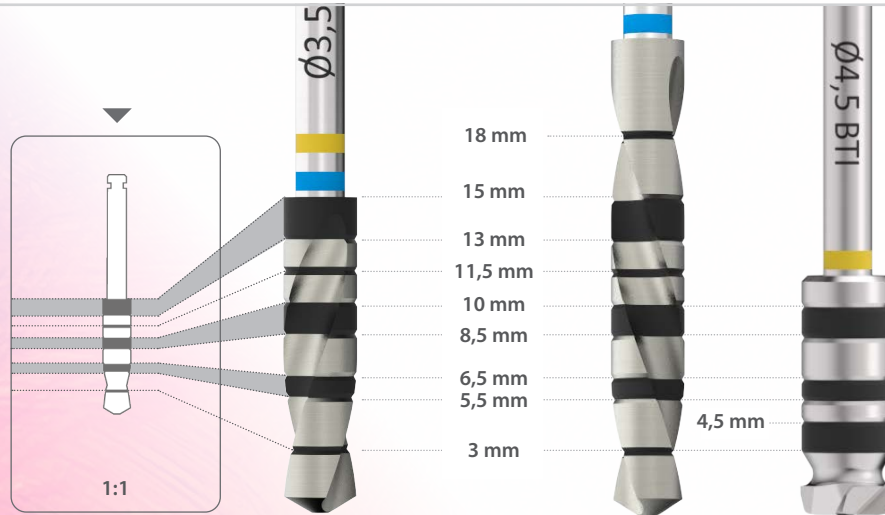

TIPO / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

FRESA

Fresa de inicio
Fresas
Fresas avellanado
Fresas corte frontal

VELOCIDAD

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

IRRIGACIÓN

sí
no
no
no



Implantes longitud

(desde 10 hasta 15 mm)


- Longitud total del implante
- 75 % de la longitud total del implante
- 25 % de la longitud total del implante
- 5,0 mm de profundidad de fresado





Implantes longitud (4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

Longitud total del implante
X.X Ø Longitud total del implante con fresa del diámetro especificado
5 mm de profundidad de fresado (no usar en longitud de 4,5mm)

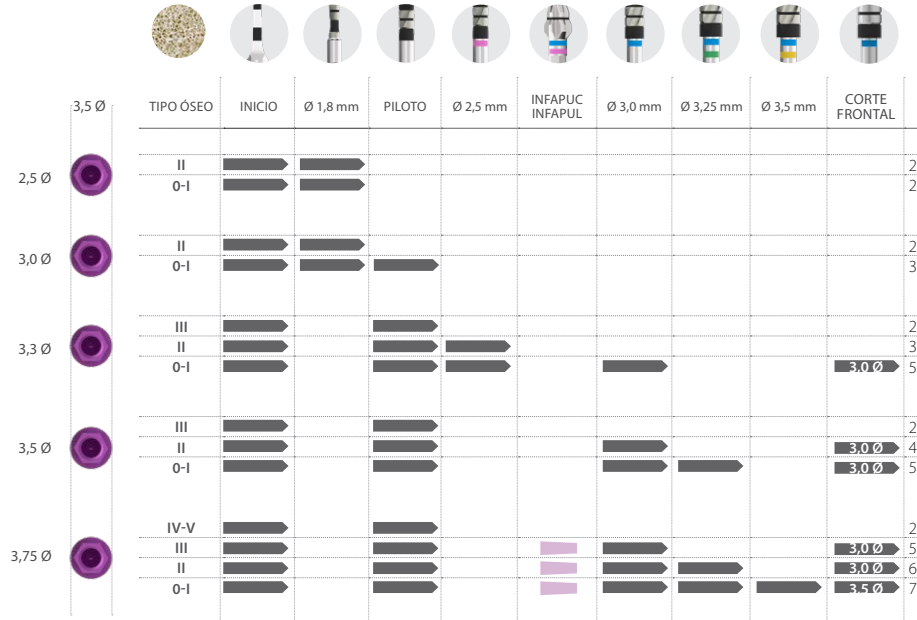



Plataforma Tiny
Ø 3,5 mm diámetro de plataforma

fresado
Secuencias de

bti
Human
Technology

Implantes longitud


(desde 10 hasta 15 mm)

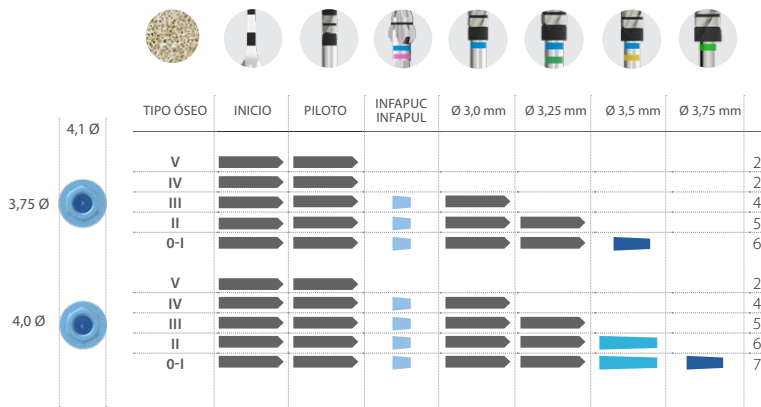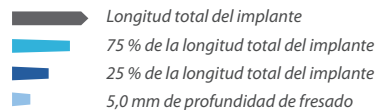

Implantes longitud

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)


- Longitud total del implante
- Longitud total del implante con fresa del diámetro especificado
- 5,0 mm de profundidad de fresado
- 2-3 mm de profundidad de fresado

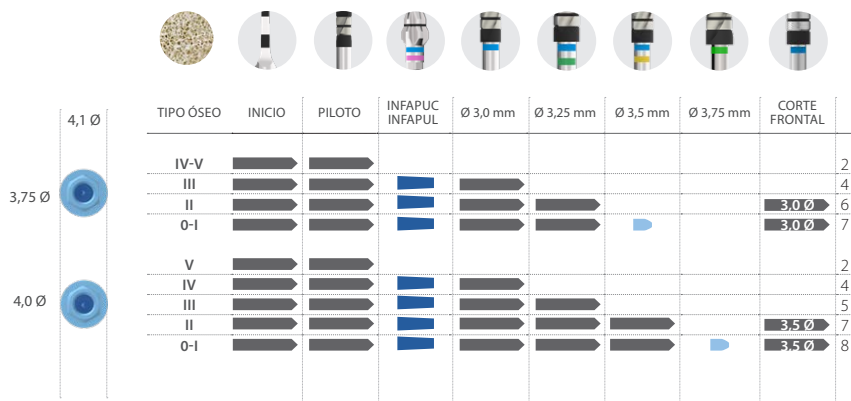

Implantes longitud

(desde 10 hasta 15 mm)

- Longitud total del implante
- 75 % de la longitud total del implante
- 25 % de la longitud total del implante
- 4,5 mm de profundidad de fresado

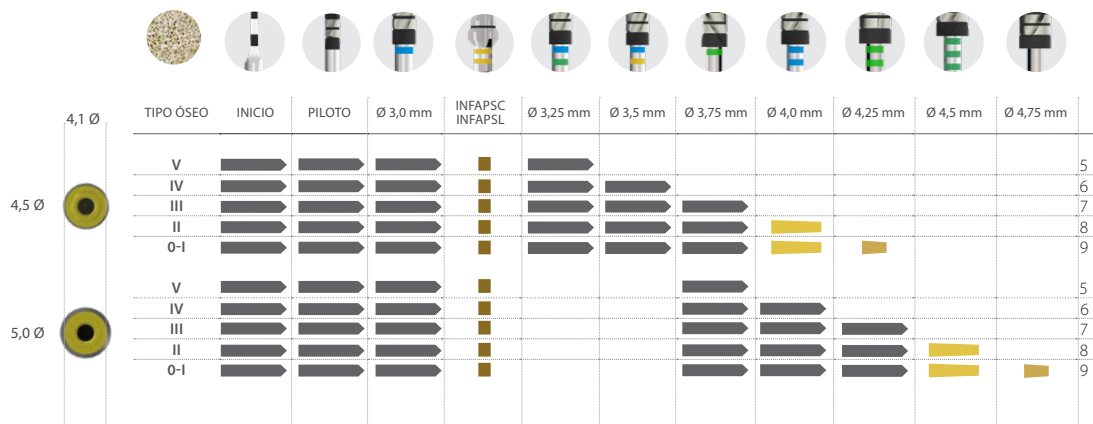

Implantes longitud

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

 Longitud total del implante
 Ø X,X
 4,5 mm de profundidad de fresado

